



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-004768-21-6

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-004768-21-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones FRANLAU SRL solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca DEMETECH nombre descriptivo sutura absorbible Poliglactina 910 y nombre técnico suturas de ácido poliglicólico, de acuerdo con lo solicitado por FRANLAU SRL, con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2021-112641924-APN-INPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 2507-4", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º.

Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 2507-4

Nombre descriptivo: sutura absorbible Poliglactina 910

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
13-908 suturas de ácido poliglicólico

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): DEMETECH

Modelos:
DemeCRYL

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

Las suturas de POLIGLACTINA 910 son indicadas para el uso general en la aproximación y/o ligadura de tejidos suaves, incluyendo el uso en cirugías oftalmológicas, pero no para el uso en tejido cardiovascular ni oftalmológico.

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NA

Forma de presentación: caja x 12 unidades esteriles envasadas unitariamente

Método de esterilización: ETO

Nombre del fabricante:

DEMETECH CORP

Lugar de elaboración:

14175 NW 60th Ave., Miami Lakes, FL 33014 Estados Unidos

Expediente N° 1-0047-3110-004768-21-6

N° Identificador Trámite: 30394

AM

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2022.02.08 17:13:03 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.02.08 17:13:05 -03:00


FRANLAU S.R.L.

DISTRIBUCIONES MEDICAS
CUIT 30-71432154-0

MARCONI 726 – Dpto. 4
GODOY CRUZ, MENDOZA
CEL.:0261-156546830
eduardorissopatron@speedy.com.ar

PROYECTO DE RÓTULO

1. Fabricante: DEMETECH CORP – 14175 NW 60th Ave., Miami Lakes, FL 33014 Estados Unidos
2. Importador: Franlau SRL – Marconi 726, Dpto 4, Godoy Cruz, Mendoza
Sutura absorbible POLIGLACTINA 910 - Marca: Demetech, modelo: DemeCRYL, códigos:
según corresponda (calibre, longitud, tipo de sutura, tamaño y tipo de aguja)
3. PRODUCTO MEDICO DE UN SOLO USO
4. No utilizar si el envase se encuentra dañado
5. ESTÉRIL / ETO
6. Lote N°
7. Fecha de elab.
8. Fecha de vto.
9. Almacenar por debajo de 25°C, lejos de la humedad y el calor directo. No utilizar después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.
10. Ver "Instrucciones para Uso" en el envase
11. Precauciones y Advertencias, contraindicaciones en el envase
12. Directora Técnica: Ana Cristina Juana Aznar, Farmacéutica, MP 2160
13. Autorizado por la A.N.M.A.T PM-2507-4
14. "Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias"

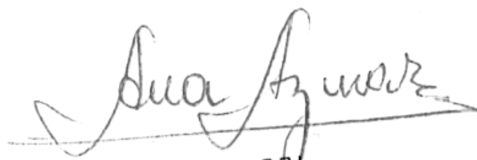

FRANLAU S. R. L.
DISTRIBUIDORA FARM. MEDICAS
FARMACIUBIC: ANA C. AZNAR
MAT. 2160
MARCONI 726 - DPTO. 4 - GODOY CRUZ
TEL. 0261 156546830



FRANLAU S. R. L.
CUIT. 30-71432154-0
EDUARDO RISSO PATRON
SOCIO GERENTE

FRANLAU S.R.L.

DISTRIBUCIONES MEDICAS
CUIT 30-71432154-0

MARCONI 726 – Dpto. 4
GODOY CRUZ, MENDOZA
CEL.:0261-156546830
eduardorissopatron@speedy.com.ar

PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

1. Fabricante: DEMETECH CORP – 14175 NW 60th Ave., Miami Lakes, FL 33014 Estados Unidos
2. Importador: Franlau SRL – Marconi 726, Dpto 4, Godoy Cruz, Mendoza
Sutura absorbible POLIGLACTINA 910 - Marca: Demetech, modelo: DemeCRYL, códigos: según corresponda (calibre, longitud, tipo de sutura, tamaño y tipo de aguja)
3. PRODUCTO MEDICO DE UN SOLO USO
4. No utilizar si el envase se encuentra dañado
5. ESTÉRIL / ETO
6. Almacenar por debajo de 25°C, lejos de la humedad y el calor directo. No utilizar después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.
7. Ver "Instrucciones para Uso" en el envase
8. Precauciones y Advertencias, contraindicaciones en el envase
9. Directora Técnica: Ana Cristina Juana Aznar, Farmacéutica, MP 2160
10. Autorizado por la A.N.M.A.T PM-2507-4
11. "Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias"


INDICACIÓN, FINALIDAD O USO AL QUE SE DESTINA

Las suturas de POLIGLACTINA 910 son indicadas para el uso general en la aproximación y/o ligadura de tejidos suaves, incluyendo el uso en cirugías oftalmológicas, pero no para el uso en tejido cardiovascular ni oftalmológico.

3. PRECAUCIONES, RESTRICCIONES, ADVERTENCIAS, CUIDADOS ESPECIALES Y ACLARACIONES SOBRE EL USO DEL PRODUCTO MÉDICO

REACCIONES

Inflamación ligera del tejido puede ocurrir cuando suturas POLIGLACTINA 910 son colocadas en el tejido, lo cual es una respuesta característica del cuerpo humano a materiales extraños, esto es

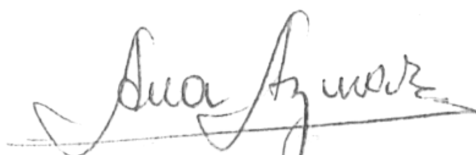

FRANLAU S.R.L.
DISTRIBUIDORA PROD. MEDICOS
Farmacéutica: ANA C. AZNAR
MAXI. 2160
MARCONI 726 - DTD. 4 - GODOY CRUZ
TEL. 0261 156546830



FRANLAU S.R.L.
CUIT. 30-71432154-0
EDUARDO RISSO PATRON
SOCIO GERENTE

FRANLAU S.R.L.

DISTRIBUCIONES MEDICAS

CUIT 30-71432154-0

MARCONI 726 – Dpto. 4
GODOY CRUZ, MENDOZA
CEL.:0261-156546830
eduardorissopatron@speedy.com.ar

seguido de una encapsulación gradual por tejido conectivo; después del cual empieza la absorción por medio de la hidrólisis, donde el polímero se degrada a ácido glicólico, y es absorbido por el cuerpo. Las suturas de POLIGLACTINA 910 de DemeTECH producen una reacción inflamatoria mínima aguda en el tejido, el cual es seguido de una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de la fuerza de tensión y la eventual absorción de la sutura de POLIGLACTINA 910 ocurre por medio de la hidrólisis, en la cual el polímero se degrada a ácido glicólico o a ácido láctico y ácido glicólico los cuales son absorbidos y metabolizados por el cuerpo humano. La absorción empieza como pérdida de la fuerza de tensión seguido de pérdida de masa. La pérdida completa de la fuerza de tensión se da a las 5 semanas después de la implantación. La absorción completa de la sutura quirúrgica absorbible de POLIGLACTINA 910, se da esencialmente entre los 56 y 70 días.


Post Implantación	Fuerza original restante aproximada
14 días	75%
21 días	50%
28 días	25%

CONTRAINDICACIONES

Esta sutura, al ser absorbible, no debe de ser usada donde se requiera aproximación extendida del tejido.

ADVERTENCIAS

- i. No re-esterilizar. Estéril a menos que el empaque haya sido abierto o dañado. Descartar suturas abiertas que no hayan sido utilizadas. Almacenar a temperatura ambiente. Evitar exposición prolongada a temperaturas elevadas.
- ii. Como con cualquier material extraño en el cuerpo, el contacto prolongado de esta o cualquier sutura con soluciones salinas, como las encontradas en el tracto urinario o biliar, puede resultar en la formación de cálculos.

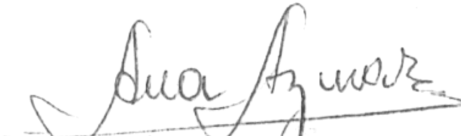

FRANLAU S.R.L.
DISTRIBUIDORA PROD. MEDICOS
Farmacéutica ANA C. AZNAR
MAT. 2180
MARCONI 726 - DPTO. 4 - GODOY CRUZ
TEL. 0261 156546830



FRANLAU S.R.L.
CUIT. 30-71432154-0
EDUARDO RISSO PATRON
SOCIO GERENTE

FRANLAU S.R.L.

DISTRIBUCIONES MEDICAS
CUIT 30-71432154-0

MARCONI 726 – Dpto. 4
GODOY CRUZ, MENDOZA
CEL.:0261-156546830
eduardorissopatron@speedy.com.ar


- iii. Usuarios deben estar familiarizados con los procedimientos y técnicas quirúrgicas que involucren suturas sintéticas absorbibles, antes de emplear suturas quirúrgicas de POLIGLACTINA 910 de DemeTECH, para cerrar heridas; ya que el riesgo de dehiscencia de la herida puede variar con el sitio de aplicación y el material de sutura utilizado.
- iv. Prácticas quirúrgicas aceptables deben de seguirse con respecto al drenaje y cierre de heridas infectadas o contaminadas.
- v. El uso de esta sutura puede ser inapropiado para pacientes con edad avanzada, malnutridos, pacientes debilitados o con cualquier condición, la cual, según la opinión del cirujano, puede causar o contribuir en un retraso en la curación de la herida.
- vi. Como esta es una sutura absorbible, el uso de suturas no-absorbibles complementarias debe de considerarse por el cirujano al momento de cerrar sitios sujetos a expansión, estiramiento, distensión o que requieran soporte adicional.

PRECAUCIONES

Cuando se manejen suturas de POLIGLACTINA 910, es necesario manejar la sutura con especial cuidado, prestando atención particular a la aguja y evitando causar daño por los porta agujas. El usuario debe poseer suficiente conocimiento y estar familiarizado con suturas quirúrgicas absorbibles y la disminución particular de la fuerza de tensión, antes de manejar este tipo de suturas.

Bajo ciertas circunstancias, procedimientos ortopédicos, inmovilización por soporte externo puede ser empleado a discreción del cirujano. Las suturas para piel que deban permanecer en la herida por más de 7 días pueden causar irritación localizada y deben ser removidas o cortadas como es indicado. En el manejo de la sutura quirúrgica, se debe tener cuidado para evitar el daño por manejo.

Evitar el aplastamiento y las abrasiones ocasionadas por el uso o aplicación de instrumentos quirúrgicos como fórceps o porta agujas. La adecuada seguridad del anudado requiere de la técnica quirúrgica aceptada de anudado de suturas y el uso de puntos adicionales como aseguramiento en dependencia de las circunstancias quirúrgicas y la experiencia del cirujano. El uso de puntos adicionales es particularmente apropiado cuando se anudan suturas de monofilamentos. Las

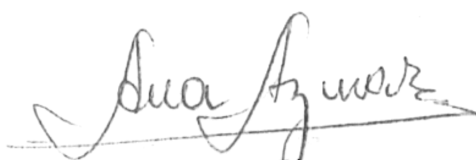

FRANLAU S.R.L.
DISTRIBUIDORA PROD. MEDICOS
Farmacéuticos: ANA C. AZNAR
MAX 2160
MARCONI 726 - DTO. 4 - GODOY CRUZ
TEL. 0261 156546830



FRANLAU S.R.L.
CUIT. 30-71432154-0
EDUARDO RISSO PATRON
SOCIO GERENTE

FRANLAU S.R.L.

DISTRIBUCIONES MEDICAS

CUIT 30-71432154-0

MARCONI 726 – Dpto. 4
GODOY CRUZ, MENDOZA
CEL.:0261-156546830
eduardorissopatron@speedy.com.ar

suturas POLIGLACTINA 910 no son recomendadas para pacientes debilitados o de edad avanzada o pacientes con procesos de curación retardados. Tejido con poca irrigación de sangre puede rechazar el material de la sutura debido a una absorción retardada

REACCIONES ADVERSAS

Efectos adversos, que pueden estar relacionados al uso de este producto, incluyen: dehiscencia de la herida, dificultad para proveer el soporte necesario para las heridas en sitios donde haya expansión, estiramiento o distensión, dificultad en proveer el soporte en pacientes malnutridos o debilitados o con condiciones que pueden retrasar la curación de la herida, reacción inflamatoria mínima aguda en el tejido, irritación localizada cuando suturas son dejadas en la piel por más de 7 días, formación de cálculos en tractos urinarios y biliares cuando tiene contacto prolongado con soluciones salinas como la orina o jugos biliares, aumento de la capacidad infecciosa bacteriana, reacción inflamatoria mínima ligera del tejido e irritación local transitoria.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Es recomendado que las suturas sean almacenadas debajo de 25°C y se mantengan lejos de fuentes directas de calor y humedad. Observar cuidadosamente la fecha de expiración.


FORMA DE PRESENTACIÓN

Las suturas sintéticas absorbibles POLIGLACTINA 910 están disponibles en tamaños de 2 hasta 6-0. La sutura es suministrada en longitudes pre-cortadas, con o sin aguja adjunta, en cajas que contienen una docena.

Cajas conteniendo 12 unidades estériles envasadas unitariamente

VIDA ÚTIL

5 años

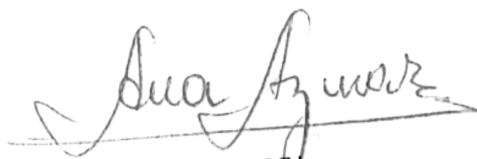

FRANLAU S.R.L.
DISTRIBUIDORA PROD. MEDICOS
Farmaceutica: ANA C. AZNAR
MAR. 21 00
MARCONI 726 - DPTO. 4 - GODOY CRUZ
TEL. 0261 156546830



FRANLAU S.R.L.
CUIT. 30-71432154-0
EDUARDO RISSO PATRON
SOCIO GERENTE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: rot, e, inst, de uso-FRANLAU

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.11.19 10:39:22 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.11.19 10:39:23 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-004768-21-6

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº 1-0047-3110-004768-21-6

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por FRANLAU SRL ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 2507-4

Nombre descriptivo: sutura absorbible Poliglactina 910

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
13-908 suturas de acido poliglicolico

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): DEMETECH

Modelos:
DemeCRYL

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

Las suturas de POLIGLACTINA 910 son indicadas para el uso general en la aproximación y/o ligadura de tejidos suaves, incluyendo el uso en cirugías oftalmológicas, pero no para el uso en tejido cardiovascular ni oftalmológico.

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NA

Forma de presentación: caja x 12 unidades esteriles envasadas unitariamente

Método de esterilización: ETO

Nombre del fabricante:

DEMETECH CORP

Lugar de elaboración:

14175 NW 60th Ave., Miami Lakes, FL 33014 Estados Unidos

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 2507-4 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-004768-21-6

N° Identificadorio Trámite: 30394

AM