



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 9468

BUENOS AIRES, 23 AGO. 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-4437-15-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma CROSMED S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1552-25, denominado: Prótesis para reemplazo total de cadera, marca: MICROPORT ORTHOPEDICS INC.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 de 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1552-25, denominado: Prótesis para reemplazo total de cadera, marca: MICROPORT ORTHOPEDICS INC.



DISPOSICIÓN N° 9 4 6 8

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ARTÍCULO 2º.- Acéptese el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1552-25.

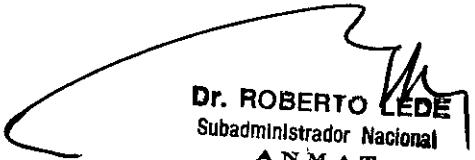
ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-4437-15-7

DISPOSICIÓN N°

9 4 6 8

LA


Dr. ROBERTO LEDEZMA
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.S.I.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **9468** a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1552-25 y de acuerdo a lo solicitado por la firma CROSMED S.A., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre descriptivo: Prótesis para reemplazo total de cadera

Nombre comercial: MICROPORT ORTHOPEDICS INC.

Clase: III

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 6519/12

Tramitado por expediente N° 1-47-14230-10-4

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Rotulo	Aprobado por Disposición ANMAT N° 6747/15	Fjs 620 a 621
Instrucciones de Uso	Aprobado por Disposición ANMAT N° 6747/15	Fjs 622 a 629
Nombre genérico	PROTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA	SISTEMA PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA
Modelos	CONSERVE DSPCGG58 Cotilo poroso 58 mm grupo G DSPCGG60 Cotilo poroso 60 mm grupo G DSPCGG62 Cotilo poroso 62 mm grupo G DSPCGH64 Cotilo poroso 64 mm grupo H DSPCGH66 Cotilo poroso 66 mm grupo H DSPCGH68 Cotilo poroso 68 mm grupo H DSBFGB46 Cotilo 46 mm grupo B DSBFGB48 Cotilo 48 mm grupo B	CONSERVE DSPCGG58 Cotilo poroso 58 mm grupo G DSPCGG60 Cotilo poroso 60 mm grupo G DSPCGG62 Cotilo poroso 62 mm grupo G DSPCGH64 Cotilo poroso 64 mm grupo H DSPCGH66 Cotilo poroso 66 mm grupo H DSPCGH68 Cotilo poroso 68 mm grupo H DSBFGB46 Cotilo 46 mm grupo B DSBFGB48 Cotilo 48 mm grupo B



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	DSBFGC50 Cotilo 50 mm grupo C	DSBFGC50 Cotilo 50 mm grupo C
	DSBFGD52 Cotilo 52 mm grupo D	DSBFGD52 Cotilo 52 mm grupo D
	DSBFGE54 Cotilo 54 mm grupo E	DSBFGE54 Cotilo 54 mm grupo E
	DSBFGF56 Cotilo 56 mm grupo F	DSBFGF56 Cotilo 56 mm grupo F
	DLCOGB32 Inserto metal 32 mm grupo B	DLCOGB32 Inserto metal 32 mm grupo B
	DLCOGC36 Inserto metal 36 mm grupo C	DLCOGC36 Inserto metal 36 mm grupo C
	DLCOGD38 Inserto metal 38 mm grupo D	DLCOGD38 Inserto metal 38 mm grupo D
	DLCOGE40 Inserto metal 40 mm grupo E	DLCOGE40 Inserto metal 40 mm grupo E
	DLCOGF42 Inserto metal 42 mm grupo F	DLCOGF42 Inserto metal 42 mm grupo F
	DLCOGG44 Inserto metal 44 mm grupo G	DLCOGG44 Inserto metal 44 mm grupo G
	38CH3800 Cabeza femoral ceramica Conserve 38 mm	38CH3800 Cabeza femoral ceramica Conserve 38 mm
	38CH4000 Cabeza femoral ceramica Conserve 40 mm	38CH4000 Cabeza femoral ceramica Conserve 40 mm
	38CH4200 Cabeza femoral ceramica Conserve 42 mm	38CH4200 Cabeza femoral ceramica Conserve 42 mm
	38CH4600 Cabeza femoral ceramica Conserve 46 mm	38CH4600 Cabeza femoral ceramica Conserve 46 mm
	38CH5000 Cabeza femoral ceramica Conserve 50 mm	38CH5000 Cabeza femoral ceramica Conserve 50 mm
	38CH5400 Cabeza femoral ceramica Conserve 54 mm	38CH5400 Cabeza femoral ceramica Conserve 54 mm
	38NS0035 Cuello corto	38NS0035 Cuello corto
	38AM1046 Componente femoral cementado Conserve A-class 46 mm	38AM1046 Componente femoral cementado Conserve A-class 46 mm
	DLXPGH46 Inserto 46 mm std	DLXPGH46 Inserto 46 mm std
	38SC5670 Cotilo Conserve Total Super-fix 56 mm ID 70 mm OD	38SC5670 Cotilo Conserve Total Super-fix 56 mm ID 70 mm OD
	38SC5672 Cotilo Conserve Total Super-fix 56 mm ID 72 mm OD	38SC5672 Cotilo Conserve Total Super-fix 56 mm ID 72 mm OD
	38SC5872 Cotilo Conserve Total Super-fix 58 mm ID 72	38SC5872 Cotilo Conserve Total Super-fix 58 mm ID 72

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.S.A.T.

	Total Super-fix 58 mm ID 72 mm OD 38021146 Cotilo 36 mm ID 46 mm OD 38021148 Cotilo 38 mm ID 48 mm OD 38QF3644 Cotilo Plus Quadra-fix 36 mm ID 44 mm OD 38QF3846 Cotilo Plus Quadra-fix 38 mm ID 46 mm OD 38QF4048 Cotilo Plus Quadra-fix 40 mm ID 48 mm OD 38QF4250 Cotilo Plus Quadra-fix 42 mm ID 50 mm OD DSBFGK76 Cotilo 76 mm grupo K 38AM4400 Cabeza femoral mediana cuello 44 mm 38AM4404 Cabeza femoral corta cuello 44 mm 38014204 Cabeza femoral 42 OD PEQ 38025662 Cotilo Conserve Plus 56 x 62 38PF1042 Componente femoral Conserve A-class press fit 42 mm 38SC4054 Cotilo Conserve Total Super-fix 40 mm ID 54 mm OD 38SC4256 Cotilo Conserve Total Super-fix 42 mm ID 56 mm OD 38SC4458 Cotilo Conserve Total Super-fix 44 mm ID 58 mm OD 38AM5000 Cabeza femoral mediana cuello 50 mm 38AM5004 Cabeza femoral corta cuello 50 mm 38AM5200 Cabeza femoral	mm OD 38021146 Cotilo 36 mm ID 46 mm OD 38021148 Cotilo 38 mm ID 48 mm OD 38QF3644 Cotilo Plus Quadra-fix 36 mm ID 44 mm OD 38QF3846 Cotilo Plus Quadra-fix 38 mm ID 46 mm OD 38QF4048 Cotilo Plus Quadra-fix 40 mm ID 48 mm OD 38QF4250 Cotilo Plus Quadra-fix 42 mm ID 50 mm OD DSBFGK76 Cotilo 76 mm grupo K 38AM4400 Cabeza femoral mediana cuello 44 mm 38AM4404 Cabeza femoral corta cuello 44 mm 38014204 Cabeza femoral 42 OD PEQ 38025662 Cotilo Conserve Plus 56 x 62 38PF1042 Componente femoral Conserve A-class press fit 42 mm 38SC4054 Cotilo Conserve Total Super-fix 40 mm ID 54 mm OD 38SC4256 Cotilo Conserve Total Super-fix 42 mm ID 56 mm OD 38SC4458 Cotilo Conserve Total Super-fix 44 mm ID 58 mm OD 38AM5000 Cabeza femoral mediana cuello 50 mm 38AM5004 Cabeza femoral corta cuello 50 mm 38AM5200 Cabeza femoral mediana cuello 52 mm 38014004 Cabeza femoral 40 OD PEQ 38021154 Cotilo 44 mm ID 54 mm OD
--	---	--

Handwritten signature or mark.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.A.T.

	mediana cuello 52 mm 38014004 Cabeza femoral 40 OD PEQ 38021154 Cotilo 44 mm ID 54 mm OD 38021156 Cotilo 46 mm ID 56 mm OD 38021158 Cotilo 48 mm ID 58 mm OD 38021160 Cotilo 50 mm ID 60 mm OD 38021162 Cotilo 52 mm ID 62 mm OD 38021164 Cotilo 54 mm ID 64 mm OD 38023642 Cotilo Conserve Plus 36 x 42 38SC6074 Cotilo Conserve Total Super-fix 60 mm ID 74 mm OD 38031060 Cabeza femoral CoCr 60mm DSPCGD52 Cotilo poroso 52 mm grupo D PHA02920 Tornillo esponjoso 20 mm PHA02925 Tornillo esponjoso 25 mm PHA02930 Tornillo esponjoso 30 mm PHA02935 Tornillo esponjoso 35 mm PHA02940 Tornillo esponjoso 40 mm PHA02945 Tornillo esponjoso 45 mm DLXPGE38 Inserto 38 mm std DLXPGF28 Inserto 28 mm std DLXPGF32 Inserto 32 mm std DLXPGF36 Inserto 36 mm std DLXPGF40 Inserto 40 mm	38021156 Cotilo 46 mm ID 56 mm OD 38021158 Cotilo 48 mm ID 58 mm OD 38021160 Cotilo 50 mm ID 60 mm OD 38021162 Cotilo 52 mm ID 62 mm OD 38021164 Cotilo 54 mm ID 64 mm OD 38023642 Cotilo Conserve Plus 36 x 42 38SC6074 Cotilo Conserve Total Super-fix 60 mm ID 74 mm OD 38031060 Cabeza femoral CoCr 60mm DSPCGD52 Cotilo poroso 52 mm grupo D PHA02920 Tornillo esponjoso 20 mm PHA02925 Tornillo esponjoso 25 mm PHA02930 Tornillo esponjoso 30 mm PHA02935 Tornillo esponjoso 35 mm PHA02940 Tornillo esponjoso 40 mm PHA02945 Tornillo esponjoso 45 mm DLXPGE38 Inserto 38 mm std DLXPGF28 Inserto 28 mm std DLXPGF32 Inserto 32 mm std DLXPGF36 Inserto 36 mm std DLXPGF40 Inserto 40 mm std 38025258 Cotilo Conserve Plus 52 x 58 DLXPGG32 Inserto 32 mm std DLXPGG36 Inserto 36 mm std DLXPGG42 Inserto 42 mm std DLXPGH28 Inserto 28 mm std 38031036 Cabeza femoral CoCr 36mm 38021036 Componente
--	---	--

21



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

std	femoral 36 mm
38025258 Cotilo Conserve Plus 52 x 58	38AM3800 Cabeza femoral mediana cuello 38 mm
DLXPGG32 Inserto 32 mm	38PF1040 Componente femoral Conserve A-class press fit 40 mm
std	38013835 Cabeza femoral 38 OD GDE
DLXPGG36 Inserto 36 mm	38021038 Componente femoral 38 mm
std	38021040 Componente femoral 40 mm
DLXPGG42 Inserto 42 mm	38021042 Componente femoral 42 mm
std	38021044 Componente femoral 44 mm
DLXPGH28 Inserto 28 mm	38021046 Componente femoral 46 mm
std	38021048 Componente femoral 48 mm
38031036 Cabeza femoral CoCr 36mm	38031054 Cabeza femoral CoCr 54mm
38021036 Componente femoral 36 mm	38031056 Cabeza femoral CoCr 56mm
38AM3800 Cabeza femoral mediana cuello 38 mm	38031058 Cabeza femoral CoCr 58mm
38PF1040 Componente femoral Conserve A-class press fit 40 mm	38015235 Cabeza femoral 52 OD
38013835 Cabeza femoral 38 OD GDE	38QF5664 Cotilo Plus Quadra-fix 56 mm ID 64 mm OD
38021038 Componente femoral 38 mm	DLXPGE36 Inserto 36 mm std
38021040 Componente femoral 40 mm	38024858 Cotilo Conserve Plus 48 x 58
38021042 Componente femoral 42 mm	38025460 Cotilo Conserve Plus 54 x 60
38021044 Componente femoral 44 mm	38025464 Cotilo Conserve Plus 54 x 64
38021046 Componente femoral 46 mm	38QF5866 Cotilo Plus Quadra-fix 58 mm ID 66 mm OD
38021048 Componente femoral 48 mm	38QF6068 Cotilo Plus Quadra-fix 60 mm ID 68 mm OD
38031054 Cabeza femoral CoCr 54mm	38SC3650 Cotilo Conserve Total Super-fix 36 mm ID 50 mm OD
38031056 Cabeza femoral CoCr 56mm	38SC3852 Cotilo Conserve
38031058 Cabeza femoral CoCr 58mm	
38015235 Cabeza femoral 52 OD	
38QF5664 Cotilo Plus Quadra-fix 56 mm ID 64 mm OD	

5.1



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.S.A.T.

	DLXPGE36 Inserto 36 mm std	Total Super-fix 38 mm ID 52 mm OD
	38024858 Cotilo Conserve Plus 48 x 58	38QF4452 Cotilo Plus Quadra-fix 44 mm ID 52 mm OD
	38025460 Cotilo Conserve Plus 54 x 60	38QF4654 Cotilo Plus Quadra-fix 46 mm ID 54 mm OD
	38025464 Cotilo Conserve Plus 54 x 64	38QF4856 Cotilo Plus Quadra-fix 48 mm ID 56 mm OD
	38QF5866 Cotilo Plus Quadra-fix 58 mm ID 66 mm OD	DLXPGE32 Inserto 32 mm std
	38QF6068 Cotilo Plus Quadra-fix 60 mm ID 68 mm OD	38QF0055 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5x 55 mm
	38SC3650 Cotilo Conserve Total Super-fix 36 mm ID 50 mm OD	38QF0060 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 60 mm
	38SC3852 Cotilo Conserve Total Super-fix 38 mm ID 52 mm OD	38QF0065 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 65 mm
	38QF4452 Cotilo Plus Quadra-fix 44 mm ID 52 mm OD	38SP6066 Cotilo Conserve Plus spiked 60 mm ID 66 mm OD
	38QF4654 Cotilo Plus Quadra-fix 46 mm ID 54 mm OD	38AM1060 Componente femoral cementado Conserve A-class 60 mm
	38QF4856 Cotilo Plus Quadra-fix 48 mm ID 56 mm OD	38PF1036 Componente femoral Conserve A-class press fit 36 mm
	DLXPGE32 Inserto 32 mm std	38PF1038 Componente femoral Conserve A-class press fit 38 mm
	38QF0055 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5x 55 mm	DLCOGJ52 Inserto metal 52 mm grupo J
	38QF0060 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 60 mm	DLCOGK56 Inserto metal 56 mm grupo K
	38QF0065 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 65 mm	DSBFGG58 Cotilo 58 mm grupo G
	38SP6066 Cotilo Conserve Plus spiked 60 mm ID 66 mm OD	DSBFGG60 Cotilo 60 mm grupo G
	38AM1060 Componente femoral cementado Conserve	DLXPGD28 Inserto 28 mm std
		DLXPGD32 Inserto 32 mm std
		DLXPGD36 Inserto 36 mm std
		DLXPGE28 Inserto 28 mm std
		38QF0035 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 35 mm

Handwritten signature or mark



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

A-class 60 mm 38PF1036 Componente femoral Conserve A-class press fit 36 mm	38QF0040 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 40 mm
38PF1038 Componente femoral Conserve A-class press fit 38 mm	38QF0045 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 45 mm
DLCOGJ52 Inserto metal 52 mm grupo J	38QF0050 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 50 mm
DLCOGK56 Inserto metal 56 mm grupo K	38025664 Cotilo Conserve Plus 56 x 64
DSBFGG58 Cotilo 58 mm grupo G	38025666 Cotilo Conserve Plus 56 x 66
DSBFGG60 Cotilo 60 mm grupo G	38025668 Cotilo Conserve Plus 56 x 68
DLXPGD28 Inserto 28 mm std	38025864 Cotilo Conserve Plus 58 x 64
DLXPGD32 Inserto 32 mm std	38025868 Cotilo Conserve Plus 58 x 68
DLXPGD36 Inserto 36 mm std	38026066 Cotilo Conserve Plus 60 x 66
DLXPGE28 Inserto 28 mm std	38AM4600 Cabeza femoral mediana cuello 46 mm
38QF0035 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 35 mm	38AM4604 Cabeza femoral corta cuello 46 mm
38QF0040 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 40 mm	DLXPGB28 Inserto 28 mm std
38QF0045 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 45 mm	DLXPGC28 Inserto 28 mm std
38QF0050 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 50 mm	DLXPGC32 Inserto 32 mm std
38025664 Cotilo Conserve Plus 56 x 64	38AM4204 Cabeza femoral corta cuello 42 mm
38025666 Cotilo Conserve Plus 56 x 66	38024050 Cotilo Conserve Plus 40 x 50
38025668 Cotilo Conserve Plus 56 x 68	38024252 Cotilo Conserve Plus 42 x 52
38025864 Cotilo Conserve Plus 58 x 64	38AM3804 Cabeza femoral corta cuello 38 mm
38025868 Cotilo Conserve Plus 58 x 68	36AM3835 Cabeza femoral lge cuello 38 mm
	38024454 Cotilo Conserve Plus 44 x 54
	38024652 Cotilo Conserve Plus 46 x 52
	38024656 Cotilo Conserve Plus 46 x 56
	38024854 Cotilo Conserve

Handwritten signature



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.S.A.T.

38026066	Cotilo	Conserve	Plus 48 x 54
Plus 60 x 66			DLXPLC32 Inserto polietileno
38AM4600	Cabeza femoral		32 mm, 15°
mediana cuello 46 mm			DLXPLD28 Inserto polietileno
38AM4604	Cabeza femoral		28 mm, 15°
corta cuello 46 mm			DLXPLD32 Inserto polietileno
DLXPGB28	Inserto	28 mm	32 mm, 15°
std			DLXPLD36 Inserto polietileno
DLXPGC28	Inserto	28 mm	36 mm, 15°
std			DSBFGG62 Cotilo 62 mm
DLXPGC32	Inserto	32 mm	grupo G
std			DSBFGH64 Cotilo 64 mm
38AM4204	Cabeza femoral		grupo H
corta cuello 42 mm			DSBFGH66 Cotilo 66 mm
38024050	Cotilo	Conserve	grupo H
Plus 40 x 50			DSBFGH68 Cotilo 68 mm
38024252	Cotilo	Conserve	grupo H
Plus 42 x 52			DSBFGJ70 Cotilo 70 mm
38AM3804	Cabeza femoral		grupo J
corta cuello 38 mm			DSBFGJ72 Cotilo 72 mm
36AM3835	Cabeza femoral		grupo J
lge cuello 38 mm			DSBFGJ74 Cotilo 74 mm
38024454	Cotilo	Conserve	grupo J
Plus 44 x 54			38031052 Cabeza femoral
38024652	Cotilo	Conserve	CoCr 52mm
Plus 46 x 52			38AC4400 Cabeza femoral 44
38024656	Cotilo	Conserve	mm
Plus 46 x 56			38AC4600 Cabeza femoral 46
38024854	Cotilo	Conserve	mm
Plus 48 x 54			DLXPLF40 Inserto polietileno
DLXPLC32	Inserto	polietileno	40 mm, 15°
32 mm, 15°			38AM3600 Cabeza femoral
DLXPLD28	Inserto	polietileno	mediana cuello 36 mm
28 mm, 15°			38AM3604 Cabeza femoral
DLXPLD32	Inserto	polietileno	corta cuello 36 mm
32 mm, 15°			38AM3635 Cabeza femoral
DLXPLD36	Inserto	polietileno	corta cuello 36 mm
36 mm, 15°			38025262 Cotilo Conserve
DSBFGG62	Cotilo	62 mm	Plus 52 x 62
grupo G			38AM1036
DSBFGH64	Cotilo	64 mm	Componente
grupo H			femoral cementado Conserve
DSBFGH66	Cotilo	66 mm	A-class 36 mm
grupo H			38AM1038
DSBFGH68	Cotilo	68 mm	Componente
			femoral cementado Conserve
			A-class 38 mm

[Handwritten signature]



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.S.

grupo H	DSBFGJ70	Cotilo	70	mm	DLXPLJ50	Inserto polietileno	50 mm, 15°
grupo J	DSBFGJ72	Cotilo	72	mm	38021152	Cotilo 42 mm ID 52 mm OD	
grupo J	DSBFGJ74	Cotilo	74	mm	38AM1044	Componente femoral cementado Conserve A-class 44 mm	
grupo J	38031052	Cabeza femoral			DLXPGJ28	Inserto 28 mm std	
	CoCr 52mm				DLXPGJ32	Inserto 32 mm std	
	38AC4400	Cabeza femoral			DLXPGJ36	Inserto 36 mm std	
	44 mm				DLXPGJ50	Inserto 50 mm std	
	38AC4600	Cabeza femoral			38QF5058	Cotilo Plus Quadrafix 50 mm ID 58 mm OD	
	46 mm				38QF5260	Cotilo Plus Quadrafix 52 mm ID 60 mm OD	
	DLXPLF40	Inserto polietileno			38014435	Cabeza femoral 44 OD GDE	
	40 mm, 15°				38014600	Cabeza femoral 46 OD MED	
	38AM3600	Cabeza femoral			38014604	Cabeza femoral 46 OD PEQ	
	mediana cuello 36 mm				38014635	Cabeza femoral 46 OD GDE	
	38AM3604	Cabeza femoral			38014800	Cabeza femoral 48 OD MED	
	corta cuello 36 mm				DLXPLK54	Inserto polietileno 54 mm, 15°	
	38AM3635	Cabeza femoral			38021050	Componente femoral 50 mm	
	corta cuello 36 mm				38021052	Componente femoral 52 mm	
	38025262	Cotilo Conserve			38021054	Componente femoral 54 mm	
	Plus 52 x 62				38021056	Componente femoral 56 mm	
	38AM1036	Componente femoral cementado Conserve A-class 36 mm			DLXPLE28	Inserto polietileno 28 mm, 15°	
	38AM1038	Componente femoral cementado Conserve A-class 38 mm			DLXPLE32	Inserto polietileno 32 mm, 15°	
	DLXPLJ50	Inserto polietileno 50 mm, 15°			DLXPLE36	Inserto polietileno 35 mm, 15°	
	38021152	Cotilo 42 mm ID 52 mm OD			DLXPLE38	Inserto polietileno 38 mm, 15°	
	38AM1044	Componente femoral cementado Conserve A-class 44 mm			DLXPLF28	Inserto polietileno 28mm, 15°	
	DLXPGJ28	Inserto 28 mm std					
	DLXPGJ32	Inserto 32 mm std					
	DLXPGJ36	Inserto 36 mm std					
	DLXPGJ50	Inserto 50 mm std					
	38QF5058	Cotilo Plus					



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. P.

Quadra-fix 50 mm ID 58 mm OD	DLXPLF32 Inserto polietileno 32 mm, 15°
38QF5260 Cotilo Plus	DLXPLF36 Inserto polietileno 36 mm, 15°
Quadra-fix 52 mm ID 60 mm OD	38021150 Cotilo 40 mm ID 50 mm OD
38014435 Cabeza femoral 44 OD GDE	DLXPGG28 Inserto 28 mm std
38014600 Cabeza femoral 46 OD MED	38024450 Cotilo Conserve Plus 44 x 50
38014604 Cabeza femoral 46 OD PEQ	DLXPGH32 Inserto 32 mm std
38014635 Cabeza femoral 46 OD GDE	38014035 Cabeza femoral 40 OD GDE
38014800 Cabeza femoral 48 OD MED	DLXPGK54 Inserto polietileno 15°
DLXPLK54 Inserto polietileno 54 mm, 15°	DLXPLB28 Inserto polietileno 28mm, 15°
38021050 Componente femoral 50 mm	DLXPLC28 Inserto polietileno 28 mm, 15°
38021052 Componente femoral 52 mm	38SC4862 Cotilo Conserve Total Super-fix 48 mm ID 62 mm OD
38021054 Componente femoral 54 mm	DLCOGH48 Inserto metal 48 mm grupo H
38021056 Componente femoral 56 mm	38AM1040 Componente femoral cementado Conserve A-class 40 mm
DLXPLE28 Inserto polietileno 28 mm, 15°	38AM4004 Cabeza femoral corta cuello 40 mm
DLXPLE32 Inserto polietileno 32 mm, 15°	38QF5666 Cotilo Plus Quadra-fix 56 mm ID 66 mm OD
DLXPLE36 Inserto polietileno 35 mm, 15°	38031038 Cabeza femoral CoCr 38mm
DLXPLE38 Inserto polietileno 38 mm, 15°	38014235 Cabeza femoral 42 OD GDE
DLXPLF28 Inserto polietileno 28mm, 15°	38014400 Cabeza femoral 44 OD MED
DLXPLF32 Inserto polietileno 32 mm, 15°	38014404 Cabeza femoral 44 OD PEQ
DLXPLF36 Inserto polietileno 36 mm, 15°	38QF0070 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 70 mm
38021150 Cotilo 40 mm ID 50 mm OD	38SC4660 Cotilo Conserve Total Super-fix 46 mm ID 60 mm OD
DLXPGG28 Inserto 28 mm std	38031042 Cabeza femoral
38024450 Cotilo Conserve Plus 44 x 50	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

DLXPGH32 Inserto 32 mm std	CoCr 42mm	38031044 Cabeza femoral
38014035 Cabeza femoral 40 OD GDE	CoCr 44mm	38031046 Cabeza femoral
DLXPGK54 Inserto polietileno 15°	CoCr 46mm	38031048 Cabeza femoral
DLXPLB28 Inserto polietileno 28mm, 15°	CoCr 48mm	38031050 Cabeza femoral
DLXPLC28 Inserto polietileno 28 mm, 15°	CoCr 50mm	38015204 Cabeza femoral 52 OD
38SC4862 Cotilo Conserve Total Super-fix 48 mm ID 62 mm OD	38AM5600 Cabeza femoral mediana cuello 56 mm	38AM5604 Cabeza femoral corta cuello 56 mm
DLCOGH48 Inserto metal 48 mm grupo H	DLXPLG28 Inserto polietileno 28 mm, 15°	DLXPLG32 Inserto polietileno 32mm, 15°
38AM1040 Componente femoral cementado Conserve A-class 40 mm	DLXPLG36 Inserto polietileno 36 mm, 15°	DLXPLG42 Inserto polietileno 42 mm, 15°
38AM4004 Cabeza femoral corta cuello 40 mm	DLXPLH28 Inserto polietileno 28 mm, 15°	DLXPLH32 Inserto polietileno 32 mm, 15°
38QF5666 Cotilo Plus Quadra-fix 56 mm ID 66 mm OD	DLXPLH36 Inserto polietileno 36 mm, 15°	DLXPLH46 Inserto polietileno 46 mm, 15°
38031038 Cabeza femoral CoCr 38mm	DLXPLJ28 Inserto polietileno 28 mm, 15°	DLXPLJ32 Inserto polietileno 32 mm, 15°
38014235 Cabeza femoral 42 OD GDE	DLXPLJ36 Inserto polietileno 36 mm, 15°	38AM4200 Cabeza femoral mediana cuello 42 mm
38014400 Cabeza femoral 44 OD MED	38QF0075 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 75 mm	38QF0080 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 80 mm
38014404 Cabeza femoral 44 OD PEQ		
38QF0070 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 70 mm		
38SC4660 Cotilo Conserve Total Super-fix 46 mm ID 60 mm OD		
38031042 Cabeza femoral CoCr 42mm		
38031044 Cabeza femoral CoCr 44mm		
38031046 Cabeza femoral CoCr 46mm		
38031048 Cabeza femoral CoCr 48mm		



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

38031050 Cabeza femoral CoCr 50mm	38013800 Cabeza femoral 38 OD MED
38015204 Cabeza femoral 52 OD	38013804 Cabeza femoral 38 OD PEQ
38AM5600 Cabeza femoral mediana cuello 56 mm	38025056 Cotilo Conserve Plus 50 x 56
38AM5604 Cabeza femoral corta cuello 56 mm	38025060 Cotilo Conserve Plus 50 x 60
DLXPLG28 Inserto polietileno 28 mm, 15°	38SP5460 Cotilo Conserve Plus spiked 54 mm ID 60 mm OD
DLXPLG32 Inserto polietileno 32mm, 15°	38SP5662 Cotilo Conserve Plus spiked 56 mm ID 62 mm OD
DLXPLG36 Inserto polietileno 36 mm, 15°	38SP5664 Cotilo Conserve Plus spiked 56 mm ID 64 mm OD
DLXPLG42 Inserto polietileno 42 mm, 15°	38SP5864 Cotilo Conserve Plus spiked 58 mm ID 64 mm OD
DLXPLH28 Inserto polietileno 28 mm, 15°	38AC3600 Cabeza femoral 36 mm
DLXPLH32 Inserto polietileno 32 mm, 15°	38AC3800 Cabeza femoral 38 mm
DLXPLH36 Inserto polietileno 36 mm, 15°	38AC4000 Cabeza femoral 40 mm
DLXPLH46 Inserto polietileno 46 mm, 15°	38AC4200 Cabeza femoral 42 mm
DLXPLJ28 Inserto polietileno 28 mm, 15°	DLXPLK28 Inserto polietileno 28 mm, 15°
DLXPLJ32 Inserto polietileno 32 mm, 15°	DLXPLK32 Inserto polietileno 32 mm, 15°
DLXPLJ36 Inserto polietileno 36 mm, 15°	DLXPLK36 Inserto polietileno 36 mm, 15°
38AM4200 Cabeza femoral mediana cuello 42 mm	DSPCGF56 Cotilo poroso 56 mm grupo F
38QF0075 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 75 mm	38014000 Cabeza femoral 40 OD MED
38QF0080 Tornillo esponjoso Conserve Quadra-fix 6.5 x 80 mm	38024248 Cotilo Conserve Plus 42 x 48
38013800 Cabeza femoral 38 OD MED	38NS0000 Cuello mediano
38013804 Cabeza femoral 38 OD PEQ	38014200 Cabeza femoral 42 OD MED
38025056 Cotilo Conserve Plus 50 x 56	38AM1048 Componente femoral cementado Conserve
38025060 Cotilo Conserve	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	Plus 50 x 60 38SP5460 Cotilo Conserve Plus spiked 54 mm ID 60 mm OD 38SP5662 Cotilo Conserve Plus spiked 56 mm ID 62 mm OD 38SP5664 Cotilo Conserve Plus spiked 56 mm ID 64 mm OD 38SP5864 Cotilo Conserve Plus spiked 58 mm ID 64 mm OD 38AC3600 Cabeza femoral 36 mm 38AC3800 Cabeza femoral 38 mm 38AC4000 Cabeza femoral 40 mm 38AC4200 Cabeza femoral 42 mm DLXPLK28 Inserto polietileno 28 mm, 15° DLXPLK32 Inserto polietileno 32 mm, 15° DLXPLK36 Inserto polietileno 36 mm, 15° DSPCGF56 Cotilo poroso 56 mm grupo F 38014000 Cabeza femoral 40 OD MED 38024248 Cotilo Conserve Plus 42 x 48 38NS0000 Cuello mediano 38014200 Cabeza femoral 42 OD MED 38AM1048 Componente femoral cementado Conserve A-class 48 mm 38AM1050 Componente femoral cementado Conserve A-class 50 mm 38AM1052 Componente femoral cementado Conserve A-class 52 mm	A-class 48 mm 38AM1050 Componente femoral cementado Conserve A-class 50 mm 38AM1052 Componente femoral cementado Conserve A-class 52 mm 38AM1054 Componente femoral cementado Conserve A-class 54 mm 38AM1056 Componente femoral cementado Conserve A-class 56 mm 38AM1058 Componente femoral cementado Conserve A-class 58 mm 38SP4450 Cotilo Conserve Plus spiked 44 mm ID 50 mm OD 38023646 Cotilo Conserve Plus 36 x 46 38023844 Cotilo Conserve Plus 38 x 44 38PF1046 Componente femoral Conserve A-class press fit 46 mm 38SC5064 Cotilo Conserve Total Super-fix 50 mm ID 64 mm OD 38SC5266 Cotilo Conserve Total Super-fix 52 mm ID 66 mm OD 38SC5468 Cotilo Conserve Total Super-fix 54 mm ID 68 mm OD DLXPGK28 Inserto 28 mm std DLXPGK32 Inserto 32 mm std DLXPGK36 Inserto 36 mm std 38AM5400 Cabeza femoral mediana cuello 54 mm 38AM5404 Cabeza femoral corta cuello 54 mm DLXPGH36 Inserto 36 mm std 38AM5204 Cabeza femoral corta cuello 52 mm
--	---	---

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. J.

38AM1054	Componente femoral cementado Conserve A-class 54 mm	38AM1042	Componente femoral cementado Conserve A-class 42 mm
38AM1056	Componente femoral cementado Conserve A-class 56 mm	38AM4000	Cabeza femoral mediana cuello 40 mm
38AM1058	Componente femoral cementado Conserve A-class 58 mm	38PF1044	Componente femoral Conserve A-class press fit 44 mm
38SP4450	Cotilo Conserve Plus spiked 44 mm ID 50 mm OD	38SP4652	Cotilo Conserve Plus spiked 46 mm ID 52 mm OD
38023646	Cotilo Conserve Plus 36 x 46	38SP5056	Cotilo Conserve Plus spiked 50 mm ID 56 mm OD
38023844	Cotilo Conserve Plus 38 x 44	38SP5258	Cotilo Conserve Plus spiked 52 mm ID 58 mm OD
38PF1046	Componente femoral Conserve A-class press fit 46 mm	38015400	Cabeza femoral 54 OD
38SC5064	Cotilo Conserve Total Super-fix 50 mm ID 64 mm OD	38015404	Cabeza femoral 54 OD
38SC5266	Cotilo Conserve Total Super-fix 52 mm ID 66 mm OD	38015435	Cabeza femoral 54 OD
38SC5468	Cotilo Conserve Total Super-fix 54 mm ID 68 mm OD	38015600	Cabeza femoeral 56OD
DLXPGK28	Inserto 28 mm std	38015604	Cabeza femoeral 56OD
DLXPGK32	Inserto 32 mm std	38015635	Cabeza femoeral 56OD
DLXPGK36	Inserto 36 mm std	38014835	Cabeza femoral 48 OD GDE
38AM5400	Cabeza femoral mediana cuello 54 mm	38015000	Cabeza femoral 50 OD
38AM5404	Cabeza femoral corta cuello 54 mm	38015004	Cabeza femoral 50 OD
DLXPGH36	Inserto 36 mm std	38015035	Cabeza femoral 50 OD
38AM5204	Cabeza femoral corta cuello 52 mm	38015200	Cabeza femoral 52 OD
38AM1042	Componente femoral cementado Conserve A-class 42 mm	DSPCGE54	Cotilo poroso 54 mm grupo E
		38031040	Cabeza femoral CoCr 40mm
		38014804	Cabeza femoral 48 OD PEQ



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.T.

38AM4000 Cabeza femoral mediana cuello 40 mm	38AM4800 Cabeza femoral mediana cuello 48 mm
38PF1044 Componente femoral Conserve A-class press fit 44 mm	38AM4804 Cabeza femoral corta cuello 48 mm
38SP4652 Cotilo Conserve Plus spiked 46 mm ID 52 mm OD	38023848 Cotilo Conserve Plus 38 x 48
38SP5056 Cotilo Conserve Plus spiked 50 mm ID 56 mm OD	38024046 Cotilo Conserve Plus 40 x 46
38SP5258 Cotilo Conserve Plus spiked 52 mm ID 58 mm OD	38PF1048 Componente femoral Conserve A-class press fit 48 mm
38015400 Cabeza femoral 54 OD	38PF1050 Componente femoral Conserve A-class press fit 50 mm
38015404 Cabeza femoral 54 OD	38QF5462 Cotilo Plus Quadrafix 54 mm ID 62 mm OD
38015435 Cabeza femoral 54 OD	38PF1056 Componente femoral Conserve A-class press fit 56 mm
38015600 Cabeza femoral 56OD	38PF1058 Componente femoral Conserve A-class press fit 58 mm
38015604 Cabeza femoral 56OD	38PF1060 Componente femoral Conserve A-class press fit 60 mm
38015635 Cabeza femoral 56OD	DSPCGB46 Cotilo poroso 46 mm grupo B
38014835 Cabeza femoral 48 OD GDE	DSPCGB48 Cotilo poroso 48 mm grupo B
38015000 Cabeza femoral 50 OD	DSPCGC50 Cotilo poroso 50 mm grupo C
38015004 Cabeza femoral 50 OD	38PF1052 Componente femoral Conserve A-class press fit 542 mm
38015035 Cabeza femoral 50 OD	38PF1054 Componente femoral Conserve A-class press fit 54 mm
38015200 Cabeza femoral 52 OD	38026070 Cotilo Conserve Plus 60 x 70
DSPCGE54 Cotilo poroso 54 mm grupo E	38SP3642 Cotilo Conserve Plus spiked 36 mm ID 42 mm OD
38031040 Cabeza femoral CoCr 40mm	38SP3844 Cotilo Conserve Plus spiked 38 mm ID 44 mm OD
38014804 Cabeza femoral 48 OD PEQ	
38AM4800 Cabeza femoral mediana cuello 48 mm	
38AM4804 Cabeza femoral	

(Handwritten signature)



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.A.T.

	corta cuello 48 mm 38023848 Cotilo Conserve Plus 38 x 48 38024046 Cotilo Conserve Plus 40 x 46 38PF1048 Componente femoral Conserve A-class press fit 48 mm 38PF1050 Componente femoral Conserve A-class press fit 50 mm 38QF5462 Cotilo Plus Quadra-fix 54 mm ID 62 mm OD 38PF1056 Componente femoral Conserve A-class press fit 56 mm 38PF1058 Componente femoral Conserve A-class press fit 58 mm 38PF1060 Componente femoral Conserve A-class press fit 60 mm DSPCGB46 Cotilo poroso 46 mm grupo B DSPCGB48 Cotilo poroso 48 mm grupo B DSPCGC50 Cotilo poroso 50 mm grupo C 38PF1052 Componente femoral Conserve A-class press fit 542 mm 38PF1054 Componente femoral Conserve A-class press fit 54 mm 38026070 Cotilo Conserve Plus 60 x 70 38SP3642 Cotilo Conserve Plus spiked 36 mm ID 42 mm OD 38SP3844 Cotilo Conserve Plus spiked 38 mm ID 44 mm OD 38SP4046 Cotilo Conserve Plus spiked 40 mm ID 46 mm	38SP4046 Cotilo Conserve Plus spiked 40 mm ID 46 mm OD 38SP4248 Cotilo Conserve Plus spiked 42 mm ID 48 mm OD 38AC4800 Cabeza femoral 48 mm 38AC5000 Cabeza femoral 50 mm 38AC5200 Cabeza femoral 52 mm 38AC5400 Cabeza femoral 54 mm 38AC5600 Cabeza femoral 56 mm 38AC5800 Cabeza femoral 58 mm 38AC6000 Cabeza femoral 60 mm 38CH3600 Cabeza femoral ceramica Conserve 36 mm 38SN3500 Cuello largo 38SN0700 Cuello XL DURAMER 36452202 Inserto plastico 22 mm, 15°, grupo 2 36452203 Inserto plastico 22 mm, 15°, grupo 3 36452204 Inserto plastico 22 mm, 15°, grupo 4 36452804 Inserto plastico 28 mm 15° grupo 4 3691284800 Cotilo cementado 28 mm x 48 mm 3691285000 Cotilo cementado 28 mm x 50 mm 3691285200 Cotilo cementado 28 mm x 52 mm 3691285400 Cotilo cementado 28 mm x 54 mm 3691285600 Cotilo cementado 28 x 56 mm 3691285800 Cotilo cementado 28 x 58 mm
--	--	---

51



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. J.

OD	3691286000	Cotilo cementado 28 x 60 mm
38SP4248 Cotilo Conserve Plus spiked 42 mm ID 48 mm	3691286200	Cotilo cementado 28 x 62 mm
OD	35152874	Comp. acetabular 28 mm 15° grupo 5 std
38AC4800 Cabeza femoral 48 mm	35153274	Comp. acetabular 32 mm 15° grupo 5 std
38AC5000 Cabeza femoral 50 mm	3691286400	Cotilo cementado 28 x 64 mm
38AC5200 Cabeza femoral 52 mm	3818000200	Tapon apical EXTEND
38AC5400 Cabeza femoral 54 mm	37991350	Tallo Extend recto reducido 175 mm x 13.5
38AC5600 Cabeza femoral 56 mm	37991500	Tallo Extend recto reducido 175 mm x 15
38AC5800 Cabeza femoral 58 mm	37991650	Tallo Extend recto reducido 175 mm x 16.5
38AC6000 Cabeza femoral 60 mm	37991800	Tallo Extend recto reducido 175 mm x 18
38CH3600 Cabeza femoral ceramica Conserve 36 mm	37991950	Tallo Extend recto reducido 175 mm x 19.5
38SN3500 Cuello largo	37971350	Tallo Extend std recto cocr 13.5 x 205 mm
38SN0700 Cuello XL	37971500	Tallo Extend std recto cocr 15 x 205 mm
DURAMER	37971650	Tallo Extend std recto cocr 16.5 x 205 mm
36452202 Inserto plastico 22 mm, 15°, grupo 2	37971800	Tallo Extend std recto cocr 18 x 205 mm
36452203 Inserto plastico 22 mm, 15°, grupo 3	37971950	Tallo Extend std recto cocr 19.5 x 205 mm
36452204 Inserto plastico 22 mm, 15°, grupo 4	37972100	Tallo Extend std recto cocr 21 x 205 mm
36452804 Inserto plastico 28 mm 15° grupo 4	37972250	Tallo Extend std recto cocr 22.5 x 205 mm
3691284800 Cotilo cementado 28 mm x 48 mm	3796135L	Tallo Extend std angulado izq cocr 13.5 x 255 mm
3691285000 Cotilo cementado 28 mm x 50 mm	3796150L	Tallo Extend std angulado izq cocr 15 x 255 mm
3691285200 Cotilo cementado 28 mm x 52 mm	3796165L	Tallo Extend std angulado izq cocr 16.5 x 255 mm
3691285400 Cotilo cementado 28 mm x 54 mm		
3691285600 Cotilo cementado 28 x 56 mm		
3691285800 Cotilo cementado 28 x 58 mm		
3691286000 Cotilo cementado 28 x 60 mm		

[Handwritten signature]



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	3691286200 Cotilo cementado 28 x 62 mm 35152874 Comp. acetabular 28 mm 15° rgupo 5 std 35153274 Comp. acetabular 32 mm 15° grupo 5 std 3691286400 Cotilo cementado 28 x 64 mm 3818000200 Tapon apical EXTEND 37991350 Tallo Extend recto reducido 175 mm x 13.5 37991500 Tallo Extend recto reducido 175 mm x 15 37991650 Tallo Extend recto reducido 175 mm x 16.5 37991800 Tallo Extend recto reducido 175 mm x 18 37991950 Tallo Extend recto reducido 175 mm x 19.5 37971350 Tallo Extend std recto cocr 13.5 x 205 mm 37971500 Tallo Extend std recto cocr 15 x 205 mm 37971650 Tallo Extend std recto cocr 16.5 x 205 mm 37971800 Tallo Extend std recto cocr 18 x 205 mm 37971950 Tallo Extend std recto cocr 19.5 x 205 mm 37972100 Tallo Extend std recto cocr 21 x 205 mm 37972250 Tallo Extend std recto cocr 22.5 x 205 mm 3796135L Tallo Extend std angulado izq cocr 13.5 x 255 mm 3796150L Tallo Extend std angulado izq cocr 15 x 255 mm 3796165L Tallo Extend std angulado izq cocr 16.5 x 255 mm 3796180L Tallo Extend std	3796180L Tallo Extend std angulado izq cocr 18 x 255 mm 3796195L Tallo Extend std angulado izq cocr 19.5 x 255 mm 3796210L Tallo Extend std angulado izq cocr 21 x 255 mm 3796225L Tallo Extend std angulado izq cocr 22.5 x 255 mm 3796135R Tallo Extend std angulado dcho cocr 13.5 x 255 mm 3796150R Tallo Extend std angulado dcho cocr 15 x 255 mm 3796165R Tallo Extend std angulado dcho cocr 16.5 x 255 mm 3796180R Tallo Extend std angulado dcho cocr 18 x 255 mm 3796195R Tallo Extend std angulado dcho cocr 19.5 x 255 mm 3796210R Tallo Extend std angulado dcho cocr 21 x 255 mm 3795135L Tallo Extend izq 230 mm x 13.5 mm cocr 3795150L Tallo Extend izq 230 mm x 15 mm cocr 3795165L Tallo Extend izq 230 mm x 16.5 mm cocr 3795180L Tallo Extend izq 230 mm x 18 mm cocr 3795195L Tallo Extend izq 230 mm x 19.5 mm cocr 3795135R Tallo Extend dcho 230 mm x 13.5 mm cocr 3795150R Tallo Extend dcho 230 mm x 15 mm cocr 3795165R Tallo Extend dcho
--	--	--

21



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	angulado izq cocr 18 x 255 mm 3796195L Tallo Extend std angulado izq cocr 19.5 x 255 mm 3796210L Tallo Extend std angulado izq cocr 21 x 255 mm 3796225L Tallo Extend std angulado izq cocr 22.5 x 255 mm 3796135R Tallo Extend std angulado dcho cocr 13.5 x 255 mm 3796150R Tallo Extend std angulado dcho cocr 15 x 255 mm 3796165R Tallo Extend std angulado dcho cocr 16.5 x 255 mm 3796180R Tallo Extend std angulado dcho cocr 18 x 255 mm 3796195R Tallo Extend std angulado dcho cocr 19.5 x 255 mm 3796210R Tallo Extend std angulado dcho cocr 21 x 255 mm 3795135L Tallo Extend izq 230 mm x 13.5 mm cocr 3795150L Tallo Extend izq 230 mm x 15 mm cocr 3795165L Tallo Extend izq 230 mm x 16.5 mm cocr 3795180L Tallo Extend izq 230 mm x 18 mm cocr 3795195L Tallo Extend izq 230 mm x 19.5 mm cocr 3795135R Tallo Extend dcho 230 mm x 13.5 mm cocr 3795150R Tallo Extend dcho 230 mm x 15 mm cocr 3795165R Tallo Extend dcho 230 mm x 16.5 mm cocr	230 mm x 16.5 mm cocr 3795180R Tallo Extend dcho 230 mm x 18 mm cocr 3795195R Tallo Extend dcho 230 mm x 19.5 mm cocr 37991200 Tallo Extend recto reducido 175 mm x 12 cocr 3796225R Tallo Extend std angulado dcho cocr 22.5 x 255 mm LINEAGE COD, 36413603 Comp. acetabular 36 mm 0° std grupo 3 36430060 Componente acetabular Lineage size 60 18080300 Tornillos esponjosos 6.5 mm 18080301 Tornillos esponjosos 6.5 mm 18080302 Tornillos esponjosos 6.5 mm 18080303 Tornillos esponjosos 6.5 mm 18080304 Tornillos esponjosos 6.5 mm 18080305 Tornillos esponjosos 6.5 mm 18080306 Tornillos esponjosos 6.5 mm 18080307 Tornillos esponjosos 6.5 mm 26000004 Cabeza femoral de cerámica 28mm,- 3.5 mm 26000005 Cabeza femoral de cerámica 28mm,+ 0 mm 26000006 Cabeza femoral de cerámica 28mm, + 3.5 mm 26000007 Cabeza femoral de cerámica 32mm, - 3.5 mm 26000008 Cabeza femoral de cerámica 32mm, -+0 mm 26000009 Cabeza femoral de cerámica 32mm, + 3.5 mm 26000010 Cabeza femoral de
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.S.T.

	<p>3795180R Tallo Extend dcho 230 mm x 18 mm cocr 3795195R Tallo Extend dcho 230 mm x 19.5 mm cocr 37991200 Tallo Extend recto reducido 175 mm x 12 cocr 3796225R Tallo Extend std angulado dcho cocr 22.5 x 255 mm LINEAGE COD, 36413603 Comp. acetabular 36 mm 0° std grupo 3 36430060 Componente acetabular Lineage size 60 18080300 Tornillos esponjosos 6.5 mm 18080301 Tornillos esponjosos 6.5 mm 18080302 Tornillos esponjosos 6.5 mm 18080303 Tornillos esponjosos 6.5 mm 18080304 Tornillos esponjosos 6.5 mm 18080305 Tornillos esponjosos 6.5 mm 18080306 Tornillos esponjosos 6.5 mm 18080307 Tornillos esponjosos 6.5 mm 26000004 Cabeza femoral de cerámica 28mm,- 3.5 mm 26000005 Cabeza femoral de cerámica 28mm,+ 0 mm 26000006 Cabeza femoral de cerámica 28mm ,+ 3.5 mm 26000007 Cabeza femoral de cerámica 32mm,- 3.5 mm 26000008 Cabeza femoral de cerámica 32mm,-+0 mm 26000009 Cabeza femoral de cerámica 32mm, + 3.5 mm</p>	<p>cerámica 36 mm, - 3.5 mm 26000011 Cabeza femoral de cerámica 36 mm, +0 mm 26000012 Cabeza femoral de cerámica 36 mm, + 3.5 mm 26000017 Cabeza femoral cocr 28 mm- 3.5 mm cuello 26000018 Cabeza femoral cocr 28mm + 0 mm cuello 26000019 Cabeza femoral cocr 28 mm + 3.5 mm cuello 26000025 Cabeza femoral cocr 36 mm -3.5 mm cuello 26000026 Cabeza femoral cocr 36 mm + 0 mm cuello 26000027 Cabeza femoral cocr 36 mm +3.5 mm cuello 26000028 Cabeza femoral cocr 36 mm + 7 mm cuello 26010001 Cabeza femoral cocr 22.25 mm cuello XL 26010002 Cabeza femoral cocr 22.25 mm cuello + 0 mm 26010003 Cabeza femoral cocr 22.25 mm cuello +3.5 mm 26010007 Cabeza femoral 32 mm cocr, cuello -3.5 mm 26010008 Cabeza femoral 32 mm cocr, cuello + 0 mm 26010009 Cabeza femoral 32 mm cocr, cuello +3.5 mm 26010010 Cabeza femoral 32 mm cocr, cuello + 7 mm 26012801 Cabeza femoral 28 mm cocr cuello - 3.5 mm 26012802 Cabeza femoral 28 mm cocr, cuello +0 mm 26012803 Cabeza femoral 28 mm cocr cuello + 3.5 mm 26012804 Cabeza femoral 28 mm cocr cuello + 7 mm 26012805 Cabeza femoral 28 mmcocr, cuello +10.5 mm</p>
--	--	--

Handwritten signature or mark.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. J.

26000010 Cabeza femoral de cerámica 36 mm, - 3.5 mm	26013202 Cabeza femoral 32 mm cocr, cuello +0 mm
26000011 Cabeza femoral de cerámica 36 mm, +0 mm	36412200 Comp. acetabular 22.25 mm 0° std grupo 0
26000012 Cabeza femoral de cerámica 36 mm, + 3.5 mm	36412201 Comp. acetabular 22.25 mm 0° std grupo 1
26000017 Cabeza femoral cocr 28 mm- 3.5 mm cuello	36412202 Comp. acetabular 22.25 mm 0° std grupo 2
26000018 Cabeza femoral cocr 28mm + 0 mm cuello	36412203 Comp. acetabular 22.25 mm 0° std grupo 3
26000019 Cabeza femoral cocr 28 mm + 3.5 mm cuello	36412204 Comp. acetabular 22.25 mm 0° std grupo 4
26000025 Cabeza femoral cocr 36 mm -3.5 mm cuello	36412205 Comp. acetabular 22.25 mm 0° std grupo 5
26000026 Cabeza femoral cocr 36 mm + 0 mm cuello	36412206 Comp. acetabular 22.25 mm 0° std grupo 6
26000027 Cabeza femoral cocr 36 mm +3.5 mm cuello	36412601 Comp. acetabular 26 mm 0° std grupo 1
26000028 Cabeza femoral cocr 36 mm + 7 mm cuello	36412602 Comp. acetabular 26 mm 0° std grupo 2
26010001 Cabeza femoral cocr 22.25 mm cuello XL	36412603 Comp. acetabular 26 mm 0° std grupo 3
26010002 Cabeza femoral cocr 22.25 mm cuello + 0 mm	36412604 Comp. acetabular 26 mm 0° std grupo 4
26010003 Cabeza femoral cocr 22.25 mm cuello +3.5 mm	36412605 Comp. acetabular 26 mm 0° std grupo 5
26010007 Cabeza femoral 32 mm cocr, cuello -3.5 mm	36412606 Comp. acetabular 26 mm 0° std grupo 6
26010008 Cabeza femoral 32 mm cocr, cuello + 0 mm	36412801 Comp. acetabular 28 mm 0° std grupo 1
26010009 Cabeza femoral 32 mm cocr, cuello +3.5 mm	36412802 Comp. acetabular 28 mm 0° std grupo 2
26010010 Cabeza femoral 32 mm cocr, cuello + 7 mm	36412803 Comp. acetabular 28 mm 0° std grupo 3
26012801 Cabeza femoral 28 mm cocr cuello - 3.5 mm	36412804 Comp. acetabular 28 mm 0° std grupo 4
26012802 Cabeza femoral 28 mm cocr, cuello +0 mm	36412805 Comp. acetabular 28 mm 0° std grupo 5
26012803 Cabeza femoral 28 mm cocr cuello + 3.5 mm	36412806 Comp. acetabular 28 mm 0° sd grupo 6
	36413202 Comp. acetabular 32 mm 0° std grupo 2
	36413203 Comp. acetabular 32 mm 0° std grupo 3
	36413204 Comp. acetabular



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

26012804 Cabeza femoral 28 mm cocr cuello cuello + 7 mm	32 mm 0° std grupo 4 36413205 Comp. acetabular 32 mm 0° std grupo 5
26012805 Cabeza femoral 28 mmcocr, cuello +10.5 mm	36413206 Comp. acetabular 32 mm 0° std rgupo 6
26013202 Cabeza femoral 32 mm cocr, cuello +0 mm	36413604 Comp.acetabular 36 mm 0° std grupo 4
36412200 Comp. acetabular 22.25 mm 0° std grupo 0	36413605 Comp. acetabular 36 mm 0° std grupo 5
36412201 Comp. acetabular 22.25 mm 0° std grupo 1	36413606 Comp. acetabular 36 mm 0° std grupo 6
36412202 Comp. acetabular 22.25 mm 0° std grupo 2	36430040 Comp. acetabular Lineage size 40
36412203 Comp. acetabular 22.25 mm 0° std grupo 3	36430042 Componente acetabular Lineage size 42
36412204 Comp. acetabular 22.25 mm 0° std grupo 4	36430044 Componente acetabular Lineage size 64
36412205 Comp. acetabular 22.25 mm 0° std grupo 5	36430046 Componente acetabular Lineage size 46
36412206 Comp. acetabular 22.25 mm 0° std grupo 6	36430048 Componente acetabular Lineage size 48
36412601 Comp. acetabular 26 mm 0° std grupo 1	36430050 Componente acetabular Lineage size 50
36412602 Comp. acetabular 26 mm 0° std grupo 2	36450050 Cotilo acetabular Lineage 50 mm grupo 1
36412603 Comp. acetabular 26 mm 0° std grupo 3	36430052 Componente acetabular Lineage size 52
36412604 Comp. acetabular 26 mm 0° std grupo 4	36450052 Cotilo acetabular Lineage 52 mm grupo 2
36412605 Comp. acetabular 26 mm 0° std grupo 5	36430054 Componente acetabular Lineage size 54
36412606 Comp. acetabular 26 mm 0° std grupo 6	36450054 Cotilo acetabular Lineage 54 mm grupo 2
36412801 Comp. acetabular 28 mm 0° std grupo 1	36430056 Componente acetabular Lineage size 56
36412802 Comp. acetabular 28 mm 0° std grupo 2	36430058 Componente acetabular Lineage size 58
36412803 Comp. acetabular 28 mm 0° std grupo 3	36430062 Componente acetabular Lineage size 62
36412804 Comp. acetabular 28 mm 0° std grupo 4	36430064 Componente acetabular Lineage size 64
36412805 Comp. acetabular 28 mm 0° std grupo 5	36430066 Componente acetabular Lineage size 66
36412806 Comp. acetabular 28 mm 0° sd grupo 6	36430068 Componente acetabular Lineage size 68

[Handwritten signature]



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	36413202 Comp. acetabular 32 mm 0° std grupo 2	36430070 Componente acetabular Lineage size 70
	36413203 Comp. acetabular 32 mm 0° std grupo 3	grupo 5
	36413204 Comp. acetabular 32 mm 0° std grupo 4	36430072 Componente acetabular Lineage size 72
	36413205 Comp. acetabular 32 mm 0° std grupo 5	grupo 5
	36413206 Comp. acetabular 32 mm 0° std grupo 6	36430074 Componente acetabular Lineage size 74
	36413604 Comp. acetabular 36 mm 0° std grupo 4	grupo 5
	36413605 Comp. acetabular 36 mm 0° std grupo 5	36430076 Componente acetabular Lineage size 76
	36413606 Comp. acetabular 36 mm 0° std grupo 6	grupo 6
	36430040 Comp. acetabular Lineage size 40	36430078 Componente acetabular Lineage size 78
	36430042 Componente acetabular Lineage size 42	grupo 6
	36430044 Componente acetabular Lineage size 64	36430080 Componente acetabular Lineage size 80
	36430046 Componente acetabular Lineage size 46	grupo 6
	36430048 Componente acetabular Lineage size 48	364328X1 Acetabulo 28 mm +4°, std grupo 1
	36430050 Componente acetabular Lineage size 50	364328X2 Acetabulo 28 mm +4° std grupo 2
	36450050 Cotilo acetabular Lineage 50 mm grupo 1	364328X3 Acetabulo 28 mm +4° std grupo 3
	36430052 Componente acetabular Lineage size 52	364328X4 Acetabulo 28 mm +4°, std grupo 4
	36450052 Cotilo acetabular Lineage 52 mm grupo 2	36433204 Comp. acetabular 32 mm 0° +4 grupo 4
	36430054 Componente acetabular Lineage size 54	36433205 Comp. acetabular 32 mm 0° +4 grupo 5
	36450054 Cotilo acetabular Lineage 54 mm grupo 2	36433206 Comp. acetabular 32 mm 0° +4 grupo 6
	36430056 Componente acetabular Lineage size 56	364332X2 Acetabulo 32 mm +4, 0° std grupo 2
	36430058 Componente acetabular Lineage size 58	364332X3 Acetabulo 32 mm +4, 0° std grupo 3
	36430062 Componente acetabular Lineage size 62	364332X4 Acetabulo 32 mm +4, 0° std grupo 4
	36430064 Componente	36433603 Comp. acetabular 36 mm 0° +4 grupo 3
		36433604 Comp. acetabular 36 mm 0° +4 grupo 4
		36433605 Comp. acetabular 36 mm 0° +4 grupo 5
		36433606 Comp. acetabular



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.I.

acetabular Lineage size 64 36430066 Componente	36 mm 0° +4 grupo 6 36433606 Inserto plastico 36 mm, 15°, grupo 6
acetabular Lineage size 66 36430068 Componente	364336X3 Acetabulo 36 mm +4 0° std grupo 3
acetabular Lineage size 68 36430070 Componente	364336X4 Acetabulo 36 mm +4 0° std grupo 4
acetabular Lineage size 70 grupo 5 36430072 Componente	36450040 Cotilo acetabular Lineage 40 mm grupo 0
acetabular Lineage size 72 grupo 5 36430074 Componente	36450042 Cotilo acetabular Lineage 42 mm grupo 0
acetabular Lineage size 74 grupo 5 36430076 Componente	36450044 Cotilo acetabular Lineage 44 mm grupo 0
acetabular Lineage size 76 grupo 6 36430078 Componente	36450046 Cotilo acetabular Lineage 46 mm grupo 1
acetabular Lineage size 78 grupo 6 36430080 Componente	36450048 Cotilo acetabular Lineage 48 mm grupo 1
acetabular Lineage size 80 grupo 6 364328X1 Acetabulo 28 mm +4°, std grupo 1	36450056 Cotilo acetabular Lineage 56 mm grupo 2
364328X2 Acetabulo 28 mm +4° std grupo 2	36450058 Cotilo acetabular Lineage 58 mm grupo 3
364328X3 Acetabulo 28 mm +4° std grupo 3	36450060 Cotilo acetabular Lineage 60 mm grupo 3
364328X4 Acetabulo 28 mm +4°, std grupo 4	36450062 Cotilo acetabular Lineage 62 mm grupo 3
36433204 Comp. acetabular 32 mm 0° +4 grupo 4	36450064 Cotilo acetabular Lineage 64 mm grupo 4
36433205 Comp. acetabular 32 mm 0° +4 grupo 5	36450066 Cotilo acetabular Lineage 66 mm grupo 4
36433206 Comp. acetabular 32 mm 0° +4 grupo 6	36450068 Cotilo acetabular Lineage 68 mm grupo 4
364332X2 Acetabulo 32 mm +4, 0° std grupo 2	36450070 Cotilo acetabular Lineage 70 mm grupo 5
364332X3 Acetabulo 32 mm +4, 0° std grupo 3	36450072 Cotilo acetabular Lineage 72 mm grupo 5
364332X4 Acetabulo 32 mm +4, 0° std grupo 4	36450074 Cotilo acetabular Lineage 74 mm grupo 5
36433603 Comp. acetabular 36 mm 0° +4 grupo 3	36450076 Cotilo acetabular Lineage 76 mm grupo 6
	36450078 Cotilo acetabular Lineage 78 mm grupo 6
	36450080 Cotilo acetabular Lineage 80 mm grupo 6
	36452200 Inserto plastico 22 mm 15°, grupo 0



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

36433604 Comp. acetabular 36 mm 0° +4 grupo 4	36452201 Inserto plastico 22 mm, 15°, grupo 1
36433605 Comp. acetabular 36 mm 0° +4 grupo 5	36452205 Inserto plastico 22mm, 15°, grupo 5
36433606 Comp. acetabular 36 mm 0° +4 grupo 6	36452206 Inserto plastico 22mm, 15°, grupo 6
36433606 Inserto plastico 36 mm, 15°, grupo 6	36452601 Inserto plastico 26 mm, 15°, grupo 1
364336X3 Acetabulo 36 mm +4 0° std grupo 3	36452602 Inserto plastico 26 mm, 15°, grupo 2
364336X4 Acetabulo 36 mm +4 0° std grupo 4	36452603 Inserto plastico 26 mm, 15°, grupo 3
36450040 Cotilo acetabular Lineage 40 mm grupo 0	36452604 Inserto plastico 26 mm, 15°, grupo 4
36450042 Cotilo acetabular Lineage 42 mm grupo 0	36452605 Inserto plastico 26 mm, 15°, grupo 5
36450044 Cotilo acetabular Lineage 44 mm grupo 0	36452606 Inserto plastico 26 mm, 15°, grupo 6
36450046 Cotilo acetabular Lineage 46 mm grupo 1	36452801 Inserto plastico 28 mm, 15°, grupo 1
36450048 Cotilo acetabular Lineage 48 mm grupo 1	36452802 Inserto plastico 28 mm, 15°, grupo 2
36450056 Cotilo acetabular Lineage 56 mm grupo 2	36452803 Inserto plastico 28 mm, 15°, grupo 3
36450058 Cotilo acetabular Lineage 58 mm grupo 3	36452805 Componente acetabular 28 mm 15° grupo 5
36450060 Cotilo acetabular Lineage 60 mm grupo 3	36452806 Componente acetabular 28 mm 15° grupo 6
36450062 Cotilo acetabular Lineage 62 mm grupo 3	364528X1 Acetabulo 28 mm 15° std grupo 1
36450064 Cotilo acetabular Lineage 64 mm grupo 4	364528X2 Acetabulo 28 mm 15° std grupo 2
36450066 Cotilo acetabular Lineage 66 mm grupo 4	364528X3 Acetabulo 28 mm 15° std grupo 3
36450068 Cotilo acetabular Lineage 68 mm grupo 4	364528X4 Acetabulo 28 mm 15° std grupo 4
36450070 Cotilo acetabular Lineage 70 mm grupo 5	36453202 Inserto plastico 32 mm, 15°, grupo 2
36450072 Cotilo acetabular Lineage 72 mm grupo 5	36453203 Inserto plastico 32 mm, 15°, grupo 3
36450074 Cotilo acetabular Lineage 74 mm grupo 5	36453204 Inserto plastico 32 mm, 15°, grupo 4
36450076 Cotilo acetabular Lineage 76 mm grupo 6	36453205 Inserto plastico 32 mm, 15°, grupo 5
36450078 Cotilo acetabular	36453206 Inserto plastico 32

EA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

Lineage 78 mm grupo 6 36450080 Cotilo acetabular	mm, 15°, grupo 6 364532X2 Acetabulo 32 mm
Lineage 80 mm grupo 6 36452200 Inserto plastico 22 mm 15°, grupo 0	15° std grupo 2 364532X3 Acetabulo 32 mm 15° std grupo 3
36452201 Inserto plastico 22 mm, 15°, grupo 1	364532X4 Acetabulo 32 mm 15° std grupo 4
36452205 Inserto plastico 22mm, 15°, grupo 5	36453603 Inserto plastico 36 mm, 15°, grupo 3
36452206 Inserto plastico 22mm, 15°, grupo 6	36453604 Inserto plástico 36 mm, 15°, grupo 4
36452601 Inserto plastico 26 mm, 15°, grupo 1	36453605 Inserto plastico 36 mm, 15°, grupo 5
36452602 Inserto plastico 26 mm, 15°, grupo 2	364536X2 Acetabulo 36 mm 15° std grupo 2
36452603 Inserto plastico 26 mm, 15°, grupo 3	364536X2 Acetabulo 36 mm 15° std grupo 2
36452604 Inserto plastico 26 mm, 15°, grupo 4	364536X3 Acetabulo 36 mm 15° std grupo 3
36452605 Inserto plastico 26 mm, 15°, grupo 5	364536X4 Acetabulo 36 mm 15° std grupo 4
36452606 Inserto plastico 26 mm, 15°, grupo 6	36472200 Componente acetabular 22.25 15° +4 grupo 0
36452801 Inserto plastico 28 mm, 15°, grupo 1	36472201 Componente acetabular 22.25 15° +4 grupo 1
36452802 Inserto plastico 28 mm, 15°, grupo 2	36472202 Componente acetabular 22.25 15° +4 grupo 2
36452803 Inserto plastico 28 mm, 15°, grupo 3	36472203 Componente acetabular 22.25 15° +4 grupo 3
36452805 Componente acetabular 28 mm 15° grupo 5	36472204 Componente acetabular 22.25 15° +4 grupo 4
36452806 Componente acetabular 28 mm 15° grupo 6	36472205 Componente acetabular 22.25 15° +4 grupo 5
364528X1 Acetabulo 28 mm 15° std grupo 1	36472206 Componente acetabular 22.25 15° +4 grupo 6
364528X2 Acetabulo 28 mm 15° std grupo 2	36472601 Componente acetabular 26 mm 15° +4 grupo 1
364528X3 Acetabulo 28 mm 15° std grupo 3	
364528X4 Acetabulo 28 mm 15° std grupo 4	
36453202 Inserto plastico 32 mm, 15°, grupo 2	

Handwritten signature



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

36453203	Inserto plastico 32 mm, 15°, grupo 3	36472602	Componente acetabular 26 mm 15° +4 grupo 2
36453204	Inserto plastico 32 mm, 15°, grupo 4	36472603	Componente acetabular 26 mm 15° +4 grupo 3
36453205	Inserto plastico 32 mm, 15°, grupo 5	36472604	Componente acetabular 26 mm 15° +4 grupo 4
36453206	Inserto plastico 32 mm, 15°, grupo 6	36472605	Componente acetabular 26 mm 15° +4 grupo 5
364532X2	Acetabulo 32 mm 15° std grupo 2	36472606	Componente acetabular 28 mm 15° + 4 grupo 6
364532X3	Acetabulo 32 mm 15° std grupo 3	36472801	Inserto de polietileno 28 mm 15 grados +4 lat grupo 1
364532X4	Acetabulo 32 mm 15° std grupo 4	36472802	Inserto de polietileno 28 mm 15 grados +4 lat grupo 2
36453603	Inserto plastico 36 mm, 15°, grupo 3	36472803	Inserto de polietileno 28 mm 15 grados + 4 lat. Grupo 3
36453604	Inserto plástico 36 mm, 15°, grupo 4	36472804	Inserto de polietileno 28 mm 15 grados + 4 lat. Grupo 4
36453605	Inserto plastico 36 mm, 15°, grupo 5	36472805	Inserto de polietileno 28 mm 15° +4 grupo 5
364536X2	Acetabulo 36 mm 15° std grupo 2	36472806	Inserto de polietileno 28 mm 15° +4 grupo 6
364536X2	Acetabulo 36 mm 15° std grupo 2	36473202	Componente acetabular 32 mm 15° +4 grupo 2
364536X3	Acetabulo 36 mm 15° std grupo 3	36473203	Componente acetabular 32 mm 15° +4 grupo 3
364536X4	Acetabulo 36 mm 15° std grupo 4	36473204	Componente acetabular 32 mm 15° +4 grupo 4
36472200	Componente acetabular 22.25 15° +4 grupo 0	36473205	Componente acetabular 32 mm, 15° +4 grupo 5
36472201	Componente acetabular 22.25 15° +4 grupo 1		
36472202	Componente acetabular 22.25 15° +4 grupo 2		
36472203	Componente acetabular 22.25 15° +4 grupo 3		
36472204	Componente acetabular 22.25 15° +4 grupo 4		
36472205	Componente acetabular 22.25 15° +4 grupo 5		



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

grupo 5	36472206	Componente acetabular	22.25	15°	+4	36473206	Componente acetabular	32	mm	15°	+4		
grupo 6	36472601	Componente acetabular	26	mm	15°	+4	grupo 6	36473603	Componente acetabular	36	mm	15°	+4
grupo 1	36472602	Componente acetabular	26	mm	15°	+4	grupo 3	36473604	Componente acetabular	36	mm	15°	+4
grupo 2	36472603	Componente acetabular	26	mm	15°	+4	grupo 4	36473605	Componente acetabular	36	mm	15°	+4
grupo 3	36472604	Componente acetabular	26	mm	15°	+4	grupo 5	36473606	Componente acetabular	36	mm	15°	+4
grupo 4	36472605	Componente acetabular	26	mm	15°	+4	grupo 6	36580046	Componente acetabular	multi	agujeros	std	
grupo 5	36472606	Componente acetabular	28	mm	15°	+4	sz 46 gr 1	36580048	Componente acetabular	multi	agujeros	std	
grupo 6	36472801	Inserto de polietileno	28	mm	15	grados	sz 48 gr 1	36580050	Componente acetabular	multi	agujeros	std	
+4 lat grupo 1	36472802	Inserto de polietileno	28	mm	15	grados	sz 50 gr 1	36580052	Componente acetabular	multi	agujeros	std	
+4 lat grupo 2	36472803	Inserto de polietileno	28	mm	15	grados	sz 52 gr 2	36580054	Componente acetabular	multi	agujeros	std	
+4 lat. Grupo 3	36472804	Inserto de polietileno	28	mm	15	grados	sz 54 gr 2	36580056	Componente acetabular	multi	agujeros	std	
+4 lat. Grupo 4	36472805	Inserto de polietileno	28	mm	15°	+4	sz 56 gr 2	36580058	Componente acetabular	multi	agujeros	std	
grupo 5	36472806	Inserto de polietileno	28	mm	15°	+4	sz 58 gr 3	36580060	Componente acetabular	multi	agujeros	std	
grupo 6	36473202	Componente acetabular	32	mm	15°	+4	sz 60 gr 3	36580062	Componente acetabular	multi	agujeros	std	
grupo 2	36473203	Componente acetabular	32	mm	15°	+4	sz 62 gr 3	36580064	Componente acetabular	multi	agujeros	std	
grupo 1							sz 64 gr 4						



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.S.T.

	acetabular grupo 3	32 mm 15° +4	36473204	Componente	36580066	Componente acetabular multi agujeros std sz 66 gr 4
	acetabular grupo 4	32 mm 15° +4	36473205	Componente	36580068	Componente acetabular multi agujeros std sz 68 gr 4
	acetabular grupo 5	32 mm 15° +4	36473206	Componente	36580070	Componente acetabular multi agujeros std sz 70 gr 5
	acetabular grupo 6	32 mm 15° +4	36473603	Componente	36580072	Componente acetabular multi agujeros std sz 72 gr 5
	acetabular grupo 3	36 mm 15° +4	36473604	Componente	36580074	Componente acetabular multi agujeros std sz 74 gr
	acetabular grupo 4	36 mm 15° +4	36473605	Componente	36580076	Cotilo multiperforado sz 76 grupo 6
	acetabular grupo 5	36 mm 15° +4	36473606	Componente	36580078	Cotilo multiperforado sz 78 grupo 6
	acetabular grupo 6	36 mm 15° +4	36580046	Componente	36580080	Cotilo multiperforado sz 80 grupo 6
	acetabular multi agujeros std sz 46 gr 1		70102846	Inserto metalico para protesis de cadera 28 x 46-50 mm	70202852	Inserto metalico para protesis de cadera 28 x 52-56 mm
	acetabular multi agujeros std sz 48 gr 1		36580048	Componente	70203252	Inserto metalico para protesis de cadera 32 x 52-56 mm
	acetabular multi agujeros std sz 50 gr 1		36580050	Componente	70203652	Inserto metalico para prótesis de cadera
	acetabular multi agujeros std sz 52 gr 2		36580052	Componente	70302858	Inserto metalico para protesis de cadera 28 x 58-62 mm
	acetabular multi agujeros std sz 54 gr 2		36580054	Componente	70303258	Inserto metalico para protesis de cadera 28 x 58-62 mm
	acetabular multi agujeros std sz 56 gr 2		36580056	Componente	70303264	Inserto metalico para protesis de cadera 32 x 64-68 mm
	acetabular multi agujeros std sz 58 gr 3		36580058	Componente	70303658	Inserto metalico para prótesis de cadera 36 x 58-62 mm
			36580060	Componente	70402864	Inserto metalico



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.T.

acetabular multi agujeros std sz 60 gr 3	36580062	Componente	para protesis de cadera 28 x 64-68 mm
acetabular multi agujeros std sz 62 gr 3	36580064	Componente	70403264 Inserto metalico para protesis de cadera 32 x 64-68 mm
acetabular multi agujeros std sz 64 gr 4	36580066	Componente	70403664 Inserto metalico para protesis de cadera 36 x 64-68 mm
acetabular multi agujeros std sz 66 gr 4	36580068	Componente	71002846 Inserto de ceramica para protesis de cadera 28 x 46-50 mm
acetabular multi agujeros std sz 68 gr 4	36580070	Componente	71003246 Inserto de ceramica para protesis de cadera 32 x 46-50 mm
acetabular multi agujeros std sz 70 gr 5	36580072	Componente	72003252 Inserto de ceramica para protesis de cadera 32 x 52-56 mm
acetabular multi agujeros std sz 72 gr 5	36580074	Componente	72002852 Inserto de ceramica para protesis de cadera 28 x 52-56 mm
acetabular multi agujeros std sz 74 gr	36580076	Cotilo	73002858 Inserto de ceramica para protesis de cadera 28 x 58-62 mm
multiperforado sz 76 grupo 6	36580078	Cotilo	73003258 Inserto de ceramica para protesis de cadera 32 x 58-62 mm
multiperforado sz 78 grupo 6	36580080	Cotilo	73003264 Inserto de ceramica para prótesis de cadera 32 x 64-68 mm
multiperforado sz 80 grupo 6	70102846	Inserto metalico	73003658 Inserto de ceramica para prótesis de cadera 36 x 58-62 mm
para protesis de cadera 28 x 46-50 mm	70202852	Inserto metalico	74002864 Inserto de ceramica para protesis de cadera 28 x 64-68 mm
para protesis de cadera 28 x 52-56 mm	70203252	Inserto metalico	74003664 Inserto de ceramica para protesis de cadera 36 x 64-68 mm
para protesis de cadera 32 x 52-56 mm	70203652	Inserto metalico	PERFECTA
para prótesis de cadera	70302858	Inserto metalico	37861050 Tallo Perfecta cementado 10.5
para protesis de cadera 28 x 58-62 mm	70303258	Inserto metalico	37861200 Tallo Perfecta cementado 12
para protesis de cadera 28 x			37861350 Tallo Perfecta cementado 13.5

Handwritten signature



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.T.

	58-62 mm		37861500	Tallo	Perfecta
	70303264 Inserto metalico para protesis de cadera 32 x 64-68 mm		cementado 15		
	70303658 Inserto metalico para prótesis de cadera 36 x 58-62 mm		37861800	Tallo	Perfecta
	70402864 Inserto metalico para protesis de cadera 28 x 64-68 mm		cementado 18		
	70403264 Inserto metalico para protesis de cadera 32 x 64-68 mm		37561050 Tallo pulido espejo		
	70403664 Inserto metalico para protesis de cadera 36 x 64-68 mm		37561200 Tallo pulido espejo		
	71002846 Inserto de ceramica para protesis de cadera 28 x 46-50 mm		37561350 Tallo Pulido espejo		
	71003246 Inserto de ceramica para protesis de cadera 32 x 46-50 mm		37561500 Tallo pulido espejo		
	72003252 Inserto de ceramica para protesis de cadera 32 x 52-56 mm		37561650 Tallo pulido espejo		
	72002852 Inserto de ceramica para protesis de cadera 28 x 52-56 mm		37561800 Tallo pulido espejo		
	73002858 Inserto de ceramica para protesis de cadera 28 x 58-62 mm		37571050 Tallo pulido espejo 10.5		Perfecta
	73003258 Inserto de ceramica para protesis de cadera 32 x 58-62 mm		37571200 Tallo pulido espejo 12		Perfecta
	73003264 Inserto de ceramica para prótesis de cadera 32 x 64-68 mm		37571350 Tallo pulido espejo 13.5		Perfecta
	73003658 Inserto de ceramica para prótesis de cadera 36 x 58-62 mm		37571500 Tallo PHA02950 Tornillo esponjoso 50 mm		
	74002864 Inserto de ceramica para protesis de cadera 28 x 64-68 mm		PHA02955 Tornillo esponjoso 55 mm		
	74003664 Inserto de ceramica para protesis de cadera 28 x 64-68 mm		PHA02960 Tornillo esponjoso 60 mm		
			37821650 Tallo Perfecta no cementado 16.5		
			37821800 Tallo Perfecta no cementado 18		
			37571500 Tallo Perfecta pulido espejo 15		
			37571650 Tallo Perfecta pulido espejo 16.5		
			37571800 Tallo Perfecta pulido espejo 18		
			37821050 Tallo Perfecta no cementado 10.5		
			37821200 Tallo Perfecta no cementado 12		
			37821350 Tallo Perfecta no cementado 13.5		
			37821500 Tallo Perfecta no cementado 15		
			37871050 Tallo Perfecta no cementado 10.5		
			37871120 Tallo Perfecta no cementado 11.2		
			37871200 Tallo Perfecta no cementado 11.2		



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

	cadera 36 x 64-68 mm PERFECTA 37861050 Tallo Perfecta cementado 10.5 37861200 Tallo Perfecta cementado 12 37861350 Tallo Perfecta cementado 13.5 37861500 Tallo Perfecta cementado 15 37861800 Tallo Perfecta cementado 18 37561050 Tallo pulido espejo 37561200 Tallo pulido espejo 37561350 Tallo Pulido espejo 37561500 Tallo pulido espejo 37561650 Tallo pulido espejo 37561800 Tallo pulido espejo 37571050 Tallo Perfecta pulido espejo 10.5 37571200 Tallo Perfecta pulido espejo 12 37571350 Tallo Perfecta pulido espejo 13.5 PHA02950 Tornillo esponjoso 50 mm PHA02955 Tornillo esponjoso 55 mm PHA02960 Tornillo esponjoso 60 mm 37821650 Tallo Perfecta no cementado 16.5 37821800 Tallo Perfecta no cementado 18 37571500 Tallo Perfecta pulido espejo 15 37571650 Tallo Perfecta pulido espejo 16.5 37571800 Tallo Perfecta pulido espejo 18 37821050 Tallo Perfecta no cementado 10.5 37821200 Tallo Perfecta no cementado 12 37821350 Tallo Perfecta no	cementado 12 37871270 Tallo Perfecta no cementado 12.7 37871350 Tallo Perfecta no cementado 13.5 37871420 Tallo Perfecta no cementado 14.2 26012602 Cabeza femoral 26 mm +0 mm cuello 26012603 Cabeza femoral 26 mm + 3.5 mm cuello 26012604 Cabeza femoral 26 mm + 7 mm cuello 26012605 Cabeza femoral 26 mm +10.5 mm cuello PROFEMUR PLSOR410 Tallo Profemur Renaissance sz 10 PLSOR411 Tallo Profemur Renaissance sz 11 PLSOR412 Tallo Profemur Renaissance sz 12 PLSOR413 Tallo Profemur Renaissance sz 13 PPW38362 Tallo proximal Profemur estandar 2 PPW38363 Tallo proximal Profemur estandar 3 PPW38364 Tallo proximal Profemur estandar 4 PPW38365 Tallo proximal Profemur estandar 5 PPW38370 Tallo distal Profemur recto 115 mm sz 10.5 PPW38372 Tallo distal Profemur recto 115 mm sz 12 PPW38374 Tallo distal Profemur recto 115 mm sz 13.5 PPW38376 Tallo distal Profemur recto 115 mm sz 15 PPW38378 Tallo distal Profemur recto 115 mm sz 16.5
--	---	--

Handwritten signature or mark



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. J.

cementado 13.5 37821500 Tallo Perfecta no cementado 15 37871050 Tallo Perfecta no cementado 10.5 37871120 Tallo Perfecta no cementado 11.2 37871200 Tallo Perfecta no cementado 12 37871270 Tallo Perfecta no cementado 12.7 37871350 Tallo Perfecta no cementado 13.5 37871420 Tallo Perfecta no cementado 14.2 26012602 Cabeza femoral 26 mm +0 mm cuello 26012603 Cabeza femoral 26 mm + 3.5 mm cuello 26012604 Cabeza femoral 26 mm + 7 mm cuello 26012605 Cabeza femoral 26 mm +10.5 mm cuello PROFEMUR PLSOR410 Tallo Profemur Renaissance sz 10 PLSOR411 Tallo Profemur Renaissance sz 11 PLSOR412 Tallo Profemur Renaissance sz 12 PLSOR413 Tallo Profemur Renaissance sz 13 PPW38362 Tallo proximal Profemur estandar 2 PPW38363 Tallo proximal Profemur estandar 3 PPW38364 Tallo proximal Profemur estandar 4 PPW38365 Tallo proximal Profemur estandar 5 PPW38370 Tallo distal Profemur recto 115 mm sz 10.5	PHA00270 Tallo fem Profemur z 1/3 cubierto sz 6 PHA00272 Tallo fem Profemur z 1/3 cubierto sz 7 PHA00262 Tallo fem Profemur z 1/3 cubierto sz 2 PHA00264 Tallo fem Profemur z 1/3 cubierto sz 3 PHA00266 Tallo fem Profemur z 1/3 cubierto sz 4 PPW38300 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 10 PPW38336 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 22.5 PHA00614 Tallo de revision Profemur Z size 7 PHA00620 Tallo de revision Profemur Z size 10 PHA00622 Tallo de revision Profemur Z size 11 PPW38306 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 15 PPW38307 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 17 PPW38308 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 16.5 PPW38309 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 19 PLSOS412 Tallo Profemur Renaissance sz 12 std PLSOS413 Tallo Profemur Renaissance sz 13 std PLSOS414 Tallo Profemur Renaissance sz 14 std PLSOS415 Tallo Profemur Renaissance sz 15 std PLSOS417 Tallo Profemur Renaissance sz 17 std PLSOS418 Tallo Profemur Renaissance sz 18 std PPW00140 Tallo Profemur ext 26 x 19 mm dia
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.S.T.

PPW38372	Tallo distal	Profemur recto 115 mm sz 12	PPW00141	Tallo Profemur ext
PPW38374	Tallo distal	Profemur recto 115 mm sz 13.5	SPHS8040	Tallo Profemur r
PPW38376	Tallo distal	Profemur recto 115 mm sz 15	SPHS8041	Tallo Profemur r
PPW38378	Tallo distal	Profemur recto 115 mm sz 16.5	SPHS8042	Tallo Profemur r
PHA00270	Tallo fem	Profemur z 1/3 cubierto sz 6	SPHS8043	Tallo Profemur r
PHA00272	Tallo fem	Profemur z 1/3 cubierto sz 7	SPHS8044	Tallo Profemur r
PHA00262	Tallo fem	Profemur z 1/3 cubierto sz 2	SPHS8045	Tallo Profemur r
PHA00264	Tallo fem	Profemur z 1/3 cubierto sz 3	PPW38029	Tallo Profemur R
PHA00266	Tallo fem	Profemur z 1/3 cubierto sz 4	PPW38030	Tallo Profemur R
PPW38300	Tallo distal	Profemur recto 135 mm sz 10	PPW38031	Tallo Profemur R
PPW38336	Tallo distal	Profemur inclinado 175 mm size 22.5	PPW38032	Tallo Profemur R
PHA00614	Tallo de revision	Profemur Z size 7	PPW38360	Tallo proximal
PHA00620	Tallo de revision	Profemur Z size 10	PPW38361	Tallo proximal
PHA00622	Tallo de revision	Profemur Z size 11	PHAC1202	Cuello Profemur corto cocr
PPW38306	Tallo distal	Profemur recto 135 mm sz 15	PHAC1204	Cuello Profemur largo cocr
PPW38307	Tallo distal	Profemur recto 135 mm sz 17	PPW00148	Tallo Profemur ext
PPW38308	Tallo distal	Profemur recto 135 mm sz 16.5	PPW39104	Cuerpo proximal microtextuizado std 1 v4
PPW38309	Tallo distal	Profemur recto 135 mm sz 19	PPW39106	Cuerpo proximal microtextuizado std 2 v4
PLSOS412	Tallo Profemur Renaissance sz 12 std		PPW39108	Cuerpo proximal microtextuizado std 3 v4
PLSOS413	Tallo Profemur Renaissance sz 13 std		PPW39110	Cuerpo proximal microtextuizado std 4 v4
PLSOS414	Tallo Profemur Renaissance sz 13 std		SPHS8000	Tallo Profemur r
			SPHS8001	Tallo Profemur r
			PPW38024	Tallo Profemur R

Handwritten signature or mark



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.T.

Renaissance sz 14 std PLSOS415 Tallo Profemur	175 mm sz 14 PPW38025 Tallo Profemur R
Renaissance sz 15 std PLSOS417 Tallo Profemur	175 mm sz 15 PPW38026 Tallo Profemur R
Renaissance sz 17 std PLSOS418 Tallo Profemur	175 mm sz 16 PPW38027 Tallo Profemur R
Renaissance sz 18 std PPW00140 Tallo Profemur	175 mm sz 17 PPW38028 Tallo Profemur R
ext 26 x 19 mm dia PPW00141 Tallo Profemur	135 mm sz 18 PHA01136 Placa DBL LT izq 6
ext 26 x 21 mm dia SPHS8040 Tallo Profemur r	orificios PHA01144 Placa DBL LT dcha
215 mm sz 10 SPHS8041 Tallo Profemur r	4 orificios PHA01145 Placa DBL LT dcha
215 mm sz 11 SPHS8042 Tallo Profemur r	5 orificios PHA01146 Placa DBL LT dcha
215 mm sz 12 SPHS8043 Tallo Profemur r	6 orificios PPW00142 Tallo Profemur ext
215 mm sz 13 SPHS8044 Tallo Profemur r	26 x 23 mm dia PPW38310 Tallo distal
215 mm sz 14 SPHS8045 Tallo Profemur r	Profemur recto 135 mm sz 18 PPW38311 Tallo distal
215 mm sz 15 PPW38029 Tallo Profemur R	Profemur recto 135 mm sz 21 PPW38316 Tallo distal
135 mm sz 19 PPW38030 Tallo Profemur R	Profemur recto 135 mm sz 22.5 PPW38320 Tallo distal
135 mm sz 20 PPW38031 Tallo Profemur R	Profemur inclinado 175 mm size 10.5 SPHS8008 Tallo Profemur r
135 mm sz 21 PPW38032 Tallo Profemur R	135 mm sz 18 SPHS8009 Tallo Profemur r
135 mm sz 22 PPW38360 Tallo proximal	135 mm sz 19 SPHS8010 Tallo Profemur r
Profemur pequeño PPW38361 Tallo proximal	135 mm sz 20 SPHS8020 Tallo Profemur r
Profemur estandar 1 PHAC1202 Cuello Profemur	175 mm sz 10 SPHS8021 Tallo Profemur r
corto cocr PHAC1204 Cuello Profemur	175 mm sz 11 SPHS8022 Tallo Profemur r
largo cocr PPW00148 Tallo Profemur	175 mm sz 12 SPHS8023 Tallo Profemur r
ext 26 x 19 mm dia PPW39104 Cuerpo proximal	175 mm sz 13 SPHS8024 Tallo Profemur r
microtextuizado std 1 v4 PPW39106 Cuerpo proximal	175 mm sz 14
microtextuizado std 2 v4	

EA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.T.

PPW39108	Cuerpo proximal microtextuizado std 3 v4	SPHS8025	Tallo Profemur r 175 mm sz 15
PPW39110	Cuerpo proximal microtextuizado std 4 v4	PHA01262	Cuello intercambiable 15° VAR/VAL corto
SPHS8000	Tallo Profemur r 135 mm sz 10	PHA01264	Cuello intercambiable 15° VAR/VAL largo
SPHS8001	Tallo Profemur r 135 mm sz 11	PHA03140	Tallo Profemur E , size 0 estandar
PPW38024	Tallo Profemur R 175 mm sz 14	PHA03141	Tallo Profemur E , size 1 estandar
PPW38025	Tallo Profemur R 175 mm sz 15	PHA03142	Tallo Profemur E , size 2 standard
PPW38026	Tallo Profemur R 175 mm sz 16	PHA03143	Tallo Profemur E , size 3 standard
PPW38027	Tallo Profemur R 175 mm sz 17	PHA03144	Tallo Profemur E , size 4 standard
PPW38028	Tallo Profemur R 135 mm sz 18	PHA03145	Tallo Profemur E , size 5 standard
PHA01136	Placa DBL LT izq 6 orificios	PHA03146	Tallo Profemur E , size 6 standard
PHA01144	Placa DBL LT dcha 4 orificios	PHA01120	Placa izquierda T
PHA01145	Placa DBL LT dcha 5 orificios	PHA01122	Placa dcha T
PHA01146	Placa DBL LT dcha 6 orificios	PHA01134	Placa DBL LT izq 4 orificios
PPW00142	Tallo Profemur ext 26 x 23 mm dia	PHA01135	Placa DBL LT izq 5 orificios
PPW38310	Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 18	PPW38347	Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 17
PPW38311	Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 21	PPW38348	Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 18
PPW38316	Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 22.5	PPW38349	Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 19
PPW38320	Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 10.5	PPW38350	Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 20
SPHS8008	Tallo Profemur r 135 mm sz 18	PPW38351	Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 21
SPHS8009	Tallo Profemur r 135 mm sz 19	PPW38352	Tallo distal Profemur inclinado 215 mm
SPHS8010	Tallo Profemur r 135 mm sz 20		

Handwritten signature or initials



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S. N. M. S. T.

	SPHS8020 Tallo Profemur r 175 mm sz 10	size 22	
	SPHS8021 Tallo Profemur r 175 mm sz 11	PPW38354 Tallo proximal Profemur XS	
	SPHS8022 Tallo Profemur r 175 mm sz 12	PPW38356 Tallo proximal Profemur XXS	
	SPHS8023 Tallo Profemur r 175 mm sz 13	PPW38358 Tallo proximal Profemur extra-pequeño	
	SPHS8024 Tallo Profemur r. 175 mm sz 14	PPW38001 Tallo Profemur R 135 mm sz 11	
	SPHS8025 Tallo Profemur r 175 mm sz 15	PHAC1212 Cuello Profemur corto # 2 cocr	
	PHA01262 Cuello intercambiable 15° VAR/VAL corto	PPW38302 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 12	
	PHA01264 Cuello intercambiable 15° VAR/VAL largo	PPW38303 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 13	
	PHA03140 Tallo Profemur E , size 0 estandar	PPW38304 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 13.5	
	PHA03141 Tallo Profemur E , size 1 estandar	PPW38305 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 15	
	PHA03142 Tallo Profemur E , size 2 standard	PPW38050 Tallo Profemur R 135 mm sz 20	
	PHA03143 Tallo Profemur E , size 3 standard	PPW38051 Tallo Profemur R 135 mm sz 21	
	PHA03144 Tallo Profemur E , size 4 standard	PLSOR415 Tallo Profemur Renaissance sz 15	
	PHA03145 Tallo Profemur E , size 5 standard	PPW38061 Cuerpo proximal Profemur R std 1	
	PHA03146 Tallo Profemur E , size 6 standard	PPW38062 Cuerpo proximal Profemur R std 2	
	PHA01120 Placa izquierda T	PPW38063 Cuerpo proximal Profemur R std 3	
	PHA01122 Placa dcha T	PPW38064 Cuerpo proximal Profemur R std 4	
	PHA01134 Placa DBL LT izq 4 orificios	PPW38065 Cuerpo proximal Profemur R std 5	
	PHA01135 Placa DBL LT izq 5 orificios	PPW38496 Tallo distal Profemur poroso	
	PPW38347 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 17	PPW38498 Tallo distal Profemur poroso	
	PPW38348 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 18	PPW38502 Tallo distal Profemur poroso	
	PPW38349 Tallo distal	PPW38504 Tallo distal Profemur poroso	
		PPW38506 Tallo distal Profemur poroso	

Handwritten signature



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.S.T.

	Profemur inclinado 215 mm size 19 PPW38350 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 20 PPW38351 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 21 PPW38352 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 22 PPW38354 Tallo proximal Profemur XS PPW38356 Tallo proximal Profemur XXS PPW38358 Tallo proximal Profemur extra-pequeño PPW38001 Tallo Profemur R 135 mm sz 11 PHAC1212 Cuello Profemur corto # 2 cocr PPW38302 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 12 PPW38303 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 13 PPW38304 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 13.5 PPW38305 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 15 PPW38050 Tallo Profemur R 135 mm sz 20 PPW38051 Tallo Profemur R 135 mm sz 21 PLSOR415 Tallo Profemur Renaissance sz 15 PPW38061 Cuerpo proximal Profemur R std 1 PPW38062 Cuerpo proximal Profemur R std 2 PPW38063 Cuerpo proximal Profemur R std 3 PPW38064 Cuerpo proximal Profemur R std 4 PPW38065 Cuerpo proximal	Profemur poroso PPW38508 Tallo distal Profemur poroso PPW31126 Tallo distal de revision Profemur r d18*16 PPW31128 Tallo distal de revision Profemur r d20*16 PPW38342 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 12 PPW38410 Tallo profemur 95 mm recto sz 16.5 PPW38412 Tallo profemur 95 mm recto sz 18 PLSOS410 Tallo Profemur Renaissance sz 10 std PLSOS411 Tallo Profemur Renaissance sz 11 std PPW38314 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 21 PPW38325 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 15 SPHS8027 Tallo Profemur r 175 mm sz 17 SPHS8028 Tallo Profemur r 175 mm sz 18 SPHS8029 Tallo Profemur r 175 mm sz 19 SPHS8030 Tallo Profemur r 175 mm sz 20 PPW30115 Tallo proximal de revision Profemur r 5 PPW31100 Tallo distal de revision Profemur r d10*13 PPW31102 Tallo distal de revision Profemur r d12*13 PPW31104 Tallo distal de revision Profemur r d14*13 PPW31106 Tallo distal de revision Profemur r d16*13 PPW31108 Tallo distal de revision Profemur r d18*13 PHA00244 Tallo nro 7 Profemur Z
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.T.

Profemur R std 5 PPW38496 Tallo distal	PHA00246 Tallo nro 8 Profemur Z
Profemur poroso PPW38498 Tallo distal	PHA00248 Tallo nro 9 Profemur Z
Profemur poroso PPW38502 Tallo distal	PHA00409 Tallo Profemur size 9 estandar
Profemur poroso PPW38504 Tallo distal	PHA00410 Tallo Profemur size 10 estandar
Profemur poroso PPW38506 Tallo distal	PLSOS416 Tallo Profemur Renaissance sz 16 std
Profemur poroso PPW38508 Tallo distal	PHA00411 Tallo Profemur size 11 estandar
Profemur poroso PPW31126 Tallo distal de revision Profemur r d18*16	PPW38060 Cuerpo proximal Profemur R peq
PPW31128 Tallo distal de revision Profemur r d20*16	PPW38430 Tallo profemur 115 mm recto sz 16.5
PPW38342 Tallo distal	PPW38432 Tallo profemur 115 mm recto sz 18
Profemur inclinado 215 mm size 12	PPW38434 Tallo profemur 115 mm recto sz 19.5
PPW38410 Tallo profemur 95 mm recto sz 16.5	PPW38436 Tallo profemur 115 mm recto sz 21
PPW38412 Tallo profemur 95 mm recto sz 18	PPW38438 Tallo profemur 115 mm recto sz 22.5
PLSOS410 Tallo Profemur Renaissance sz 10 std	PPW38442 Tallo profemur 135 mm recto sz 10.5
PLSOS411 Tallo Profemur Renaissance sz 11 std	PPW38444 Tallo profemur 135 mm recto sz 12
PPW38314 Tallo distal	PPW38446 Tallo profemur 135 mm recto sz 13.5
Profemur recto 135 mm sz 21	PPW38010 Tallo Profemur R 135 mm sz 20
PPW38325 Tallo distal	PPW38011 Tallo Profemur R 135 mm sz 21
Profemur inclinado 175 mm size 15	PPW38012 Tallo Profemur R 135 mm sz 22
SPHS8027 Tallo Profemur r 175 mm sz 17	PPW38020 Tallo Profemur R 175 mm sz 10
SPHS8028 Tallo Profemur r 175 mm sz 18	PHA00666 Tallo fem Profemur z sin cementar 1/3 cubierto sz 9
SPHS8029 Tallo Profemur r 175 mm sz 19	PHA00232 Tallo nro 1 Profemur Z
SPHS8030 Tallo Profemur r 175 mm sz 20	PHA00234 Tallo nro 2 Profemur Z
PPW30115 Tallo proximal de revision Profemur r 5	
PPW31100 Tallo distal de revision Profemur r d10*13	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S. S.A.S.

PPW31102 Tallo distal de revision Profemur r d12*13	PHA00236 Tallo nro 3 Profemur Z
PPW31104 Tallo distal de revision Profemur r d14*13	PHA00238 Tallo nro 4 Profemur Z
PPW31106 Tallo distal de revision Profemur r d16*13	PHA00240 Tallo nro 5 Profemur Z
PPW31108 Tallo distal de revision Profemur r d18*13	PHA00242 Tallo nro 6 Profemur Z
PHA00244 Tallo nro 7 Profemur Z	PPW38052 Tallo Profemur R 135 mm sz 22
PHA00246 Tallo nro 8 Profemur Z	PHA00412 Tallo Profemur size 12 estandar
PHA00248 Tallo nro 9 Profemur Z	PPW38058 Cuerpo proximal Profemur R XX peq
PHA00409 Tallo Profemur size 9 estandar	PHAC1234 Cuello Profemur A/R 8º largo cocr
PHA00410 Tallo Profemur size 10 estandar	PHAC1242 Cuello Profemur A/R 15º corto cocr
PLSOS416 Tallo Profemur Renaissance sz 16 std	PHAC1244 Cuello Profemur A/R 15º largo cocr
PHA00411 Tallo Profemur size 11 estandar	PHAC1252 Cuello Profemur A/R 8º corto cocr
PPW38060 Cuerpo proximal Profemur R peq	PHAC1254 Cuello Profemur A/R 8º largo cocr
PPW38430 Tallo profemur 115 mm recto sz 16.5	PPW38422 Tallo profemur 115 mm recto sz 10.5
PPW38432 Tallo profemur 115 mm recto sz 18	PPW38424 Tallo profemur 115 mm recto sz 12
PPW38434 Tallo profemur 115 mm recto sz 19.5	PPW38426 Tallo profemur 115 mm recto sz 13.5
PPW38436 Tallo profemur 115 mm recto sz 21	PPW38428 Tallo profemur 115 mm recto sz 15
PPW38438 Tallo profemur 115 mm recto sz 22.5	PPW38344 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 14
PPW38442 Tallo profemur 135 mm recto sz 10.5	PPW38345 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 15
PPW38444 Tallo profemur 135 mm recto sz 12	PPW38346 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 16
PPW38446 Tallo profemur 135 mm recto sz 13.5	PPW38418 Tallo profemur 95 mm recto sz 22.5
PPW38010 Tallo Profemur R 135 mm sz 20	SPHS8002 Tallo Profemur r 135 mm sz 12
PPW38011 Tallo Profemur R 135 mm sz 21	
PPW38012 Tallo Profemur R	

EA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

135 mm sz 22	SPHS8003 Tallo Profemur r
PPW38020 Tallo Profemur R	135 mm sz 13
175 mm sz 10	SPHS8004 Tallo Profemur r
PHA00666 Tallo fem	135 mm sz 14
Profemur z sin cementar 1/3	SPHS8005 Tallo Profemur r
cubierto sz 9	135 mm sz 15
PHA00232 Tallo nro 1	SPHS8006 Tallo Profemur r
Profemur Z	135 mm sz 16
PHA00234 Tallo nro 2	SPHS8007 Tallo Profemur r
Profemur Z	135 mm sz 17
PHA00236 Tallo nro 3	PPW00144 Tallo Profemur ext
Profemur Z	26 x 19 mm dia
PHA00238 Tallo nro 4	PLSOR414 Tallo Profemur
Profemur Z	Renaissance sz 14
PHA00240 Tallo nro 5	26000020 Cabeza femoral
Profemur Z	cocr 28mm + 7 mm cuello
PHA00242 Tallo nro 6	26000021 Cabeza femoral
Profemur Z	cocr 32 mm -3.5 mm cuello
PPW38052 Tallo Profemur R	26000022 Cabeza femoral
135 mm sz 22	cocr 32 mm +0 mm cuello
PHA00412 Tallo Profemur	26000023 Cabeza femoral
size 12 estandar	cocr 32 mm +3.5 mm cuello
PPW38058 Cuerpo proximal	26000024 Cabeza femoral
Profemur R XX peq	cocr 32 mm + 7 mm cuello
PHAC1234 Cuello Profemur	PHA00616 Tallo de revision
A/R 8° largo cocr	Profemur Z size 8
PHAC1242 Cuello Profemur	PHA00618 Tallo de revision
A/R 15° corto cocr	Profemur Z size 9
PHAC1244 Cuello Profemur	PHA00374 Copa acetabular
A/R 15° largo cocr	56/64 grupo 1
PHAC1252 Cuello Profemur	PHA00376 Copa acetabular
A/R 8° corto cocr	58/66 grupo 2
PHAC1254 Cuello Profemur	PHA00378 Copa acetabular
A/R 8° largo cocr	60/68 grupo 2
PPW38422 Tallo profemur	PHA00380 Copa acetabular
115 mm recto sz 10.5	62/70 grupo 2
PPW38424 Tallo profemur	PHA00664 Tallo fem Profemur
115 mm recto sz 12	z sin cementar 1/3 cubierto sz
PPW38426 Tallo profemur	8
115 mm recto sz 13.5	PPW38002 Tallo Profemur R
PPW38428 Tallo profemur	135 mm sz 12
115 mm recto sz 15	PPW39102 Cuerpo proximal
PPW38344 Tallo distal	microtexturizado peq
Profemur inclinado 215 mm	PPW38009 Tallo Profemur R
size 14	135 mm sz 19

Handwritten signature or mark



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.A.T.

PPW38345 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 15	PPW38326 Tallo distal Profemur inclinado 175mm size 15
PPW38346 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 16	PPW38327 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 17
PPW38418 Tallo profemur 95 mm recto sz 22.5	PPW38021 Tallo Profemur R 175 mm sz 11
SPHS8002 Tallo Profemur r 135 mm sz 12	PPW38022 Tallo Profemur R 175 mm sz 12
SPHS8003 Tallo Profemur r 135 mm sz 13	PPW38023 Tallo Profemur R 175 mm sz 13
SPHS8004 Tallo Profemur r 135 mm sz 14	PPW38046 Tallo Profemur R 215 mm sz 16
SPHS8005 Tallo Profemur r 135 mm sz 15	PHA00413 Tallo Profemur size 13 estandar
SPHS8006 Tallo Profemur r 135 mm sz 16	PHA00414 Tallo Profemur size 14 estandar
SPHS8007 Tallo Profemur r 135 mm sz 17	PPW38321 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 11
PPW00144 Tallo Profemur ext 26 x 19 mm dia	PPW38322 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm sz 12
PLSOR414 Tallo Profemur Renaissance sz 14	PPW38323 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm sz 13
26000020 Cabeza femoral cocr 28mm + 7 mm cuello	PPW38324 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 13.5
26000021 Cabeza femoral cocr 32 mm -3.5 mm cuello	PPW38044 Tallo Profemur R 215 mm sz 14
26000022 Cabeza femoral cocr 32 mm +0 mm cuello	PHA00382 Copa acetabular 64/72 grupo 2
26000023 Cabeza femoral cocr 32 mm +3.5 mm cuello	PHA03147 Tallo Profemur E , size 7 standard
26000024 Cabeza femoral cocr 32 mm + 7 mm cuello	PHA03148 Tallo Profemur E , size 8 standard
PHA00616 Tallo de revision Profemur Z size 8	PHA03149 Tallo Profemur E , size 9 standard
PHA00618 Tallo de revision Profemur Z size 9	PHA03160 Tallo Profemur E , size 0+
PHA00374 Copa acetabular 56/64 grupo 1	PPW31130 Tallo distal de revision Profemur r d20*16
PHA00376 Copa acetabular 58/66 grupo 2	PHA00415 Tallo Profemur size
PHA00378 Copa acetabular 60/68 grupo 2	
PHA00380 Copa acetabular	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. J.

	<p>62/70 grupo 2 PHA00664 Tallo fem Profemur z sin cementar 1/3 cubierto sz 8 PPW38002 Tallo Profemur R 135 mm sz 12 PPW39102 Cuerpo proximal microtexturizado peq PPW38009 Tallo Profemur R 135 mm sz 19 PPW38326 Tallo distal Profemur inclinado 175mm size 15 PPW38327 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 17 PPW38021 Tallo Profemur R 175 mm sz 11 PPW38022 Tallo Profemur R 175 mm sz 12 PPW38023 Tallo Profemur R 175 mm sz 13 PPW38046 Tallo Profemur R 215 mm sz 16 PHA00413 Tallo Profemur size 13 estandar PHA00414 Tallo Profemur size 14 estandar PPW38321 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 11 PPW38322 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm sz 12 PPW38323 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm sz 13 PPW38324 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 13.5 PPW38044 Tallo Profemur R 215 mm sz 14 PHA00382 Copa acetabular 64/72 grupo 2</p>	<p>15 estandar PHA00416 Tallo Profemur size 16 estandar PPW38003 Tallo Profemur R 135 mm sz 13 PPW38004 Tallo Profemur R 135 mm sz 14 PPW38340 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 10 PPW38040 Tallo Profemur R 215 mm sz 10 PPW38041 Tallo Profemur R 215 mm sz 11 PPW38042 Tallo Profemur R 215 mm sz 12 PPW38043 Tallo Profemur R 215 mm sz 13 94009342 Tallo Profemu std sz 9 94009347 Tallo Profemu std sz 10 94009348 Tallo Profemu std sz 11 94009349 Tallo Profemu std sz 12 94009350 Tallo Profemu std sz 13 94009351 Tallo Profemu std sz 14 PPW38047 Tallo Profemur R 215 mm sz 17 PPW38048 Tallo Profemur R 215 mm sz 18 PPW38049 Tallo Profemur R 215 mm sz 19 SPHS8026 Tallo Profemur r 175 mm sz 16 SPHS8050 Tallo Profemur r 215 mm sz 20 PHA00260 Tallo fem Profemur z 1/3 cubierto sz 1 PHA00370 Copa acetabular 52/60 grupo 1 PHA00372 Copa acetabular</p>
--	---	---

Handwritten signature



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

PHA03147 Tallo Profemur E , size 7 standard PHA03148 Tallo Profemur E , size 8 standard PHA03149 Tallo Profemur E , size 9 standard PHA03160 Tallo Profemur E , size 0+ PPW31130 Tallo distal de revision Profemur r d20*16 PHA00415 Tallo Profemur size 15 estandar PHA00416 Tallo Profemur size 16 estandar PPW38003 Tallo Profemur R 135 mm sz 13 PPW38004 Tallo Profemur R 135 mm sz 14 PPW38340 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 10 PPW38040 Tallo Profemur R 215 mm sz 10 PPW38041 Tallo Profemur R 215 mm sz 11 PPW38042 Tallo Profemur R 215 mm sz 12 PPW38043 Tallo Profemur R 215 mm sz 13 94009342 Tallo Profemu std sz 9 94009347 Tallo Profemu std sz 10 94009348 Tallo Profemu std sz 11 94009349 Tallo Profemu std sz 12 94009350 Tallo Profemu std sz 13 94009351 Tallo Profemu std sz 14 PPW38047 Tallo Profemur R 215 mm sz 17 PPW38048 Tallo Profemur R 215 mm sz 18	54/62 grupo 1 PPW38380 Tallo distal Profemur recto 115 mm sz 18 PPW38382 Tallo distal Profemur recto 115 mm sz. 19.5 PHA00517 Tallo Profemur size 17 PHA00518 Tallo Profemur size 18 PHA00606 Tallo de revision Profemur Z size 3 PHA00608 Tallo de revision Profemur Z size 4 PHA00610 Tallo de revision Profemur Z size 5 PHA00612 Tallo de revision Profemur Z size 6 94009352 Tallo Profemu std sz 15 94009353 Tallo Profemu std sz 16 PPW38312 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 19.5 PPW38059 Cuerpo proximal Profemur R X peq PPW31140 Tallo distal de revision Profemur r d10*21 PPW31142 Tallo distal de revision Profemur r d12*21 PPW31144 Tallo distal de revision Profemur r d14*21 PPW31146 Tallo distal de revision Profemur r d16*21 PHA00650 Tallo fem Profemur z sin cementar 1/3 cubierto sz 1 PHA00652 Tallo fem Profemur z sin cementar 1/3 cubierto sz 2 PHA00654 Tallo fem Profemur z sin cementar 1/3 cubierto sz 3 PHA00656 Tallo fem Profemur
--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.S.T.

PPW38049 Tallo Profemur R 215 mm sz 19	z sin cementar 1/3 cubierto sz 4
SPHS8026 Tallo Profemur r 175 mm sz 16	PHA00658 Tallo fem Profemur z sin cementar 1/3 cubierto sz 5
SPHS8050 Tallo Profemur r 215 mm sz 20	PHA00660 Tallo fem Profemur z sin cementar 1/3 cubierto sz 6
PHA00260 Tallo fem Profemur z 1/3 cubierto sz 1	PHA00662 Tallo fem Profemur z sin cementar 1/3 cubierto sz 7
PHA00370 Copa acetabular 52/60 grupo 1	PPW38328 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 16.5
PHA00372 Copa acetabular 54/62 grupo 1	PPW38329 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 19
PPW38380 Tallo distal Profemur recto 115 mm sz 18	PPW38330 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 18
PPW38382 Tallo distal Profemur recto 115 mm sz. 19.5	PPW38331 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 21
PHA00517 Tallo Profemur size 17	PPW38332 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 19.5
PHA00518 Tallo Profemur size 18	PPW31148 Tallo distal de revision Profemur r d18*21
PHA00606 Tallo de revision Profemur Z size 3	PPW31150 Tallo distal de revision Profemur r d20*21
PHA00608 Tallo de revision Profemur Z size 4	PPW31160 Tallo proximal Profemur r revet hap 1
PHA00610 Tallo de revision Profemur Z size 5	PPW31162 Tallo proximal Profemur r revet hap 2
PHA00612 Tallo de revision Profemur Z size 6	PPW31164 Tallo proximal Profemur r revet hap 3
94009352 Tallo Profemu std sz 15	PPW31166 Tallo proximal Profemur r revet hap 4
94009353 Tallo Profemu std sz 16	PPW31168 Tallo proximal Profemur r revet hap 5
PPW38312 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 19.5	PPW38000 Tallo Profemur R 135 mm sz 10
PPW38059 Cuerpo proximal Profemur R X peq	94009354 Tallo Profemu std sz 17
PPW31140 Tallo distal de revision Profemur r d10*21	94009355 Tallo Profemu std
PPW31142 Tallo distal de revision Profemur r d12*21	
PPW31144 Tallo distal de revision Profemur r d14*21	

[Handwritten signature]



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Población e Institutos
 A. N. M. A. T.

PPW31146 Tallo distal de revision Profemur r d16*21	sz 18
PHA00650 Tallo fem Profemur z sin cementar 1/3 cubierto sz 1	PPW38624 Tallo femoral Profemur
PHA00652 Tallo fem Profemur z sin cementar 1/3 cubierto sz 2	PHAC1214 Cuello Profemur largo # 2 cocr
PHA00654 Tallo fem Profemur z sin cementar 1/3 cubierto sz 3	PHAC1222 Cuello Profemur corto # 1 cocr
PHA00656 Tallo fem Profemur z sin cementar 1/3 cubierto sz 4	PHAC1224 Cuello Profemur largo # 2 cocr
PHA00658 Tallo fem Profemur z sin cementar 1/3 cubierto sz 5	PPW38334 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 21
PHA00660 Tallo fem Profemur z sin cementar 1/3 cubierto sz 6	PPW38510 Tallo distal Profemur poroso
PHA00662 Tallo fem Profemur z sin cementar 1/3 cubierto sz 7	PPW38448 Tallo profemur 135 mm recto sz 15
PPW38328 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 16.5	PPW38450 Tallo profemur 135 mm recto sz 16.5
PPW38329 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 19	PPW38452 Tallo profemur 135 mm recto sz 18
PPW38330 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 18	PPW38454 Tallo profemur 135 mm recto sz 19.5
PPW38331 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 21	PPW38456 Tallo profemur 135 mm recto sz 21
PPW38332 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 19.5	PPW38458 Tallo profemur 135 mm recto sz 22.5
PPW31148 Tallo distal de revision Profemur r d18*21	PPW38464 Tallo distal Profemur poroso
PPW31150 Tallo distal de revision Profemur r d20*21	PPW38466 Tallo distal Profemur poroso
PPW31160 Tallo proximal Profemur r revet hap 1	PPW38468 Tallo distal Profemur poroso
PPW31162 Tallo proximal Profemur r revet hap 1	PPW38470 Tallo distal Profemur poroso
	PPW38472 Tallo distal Profemur poroso
	PPW38474 Tallo distal Profemur poroso
	PHA00417 Tallo Profemur size 17 estandar
	PHA00418 Tallo Profemur size 18 estandar
	PPW38404 Tallo profemur 95 mm recto sz 12
	PPW38406 Tallo profemur 95 mm recto sz 12

Handwritten signature or initials



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S. N. M. S. T.

	Profemur r revet hap 2 PPW31164 Tallo proximal Profemur r revet hap 3 PPW31166 Tallo proximal Profemur r revet hap 4 PPW31168 Tallo proximal Profemur r revet hap 5 PPW38000 Tallo Profemur R 135 mm sz 10 94009354 Tallo Profemu std sz 17 94009355 Tallo Profemu std sz 18 PPW38624 Tallo femoral Profemur PHAC1214 Cuello Profemur largo # 2 cocr PHAC1222 Cuello Profemur corto # 1 cocr PHAC1224 Cuello Profemur largo # 2 cocr PPW38334 Tallo distal Profemur inclinado 175 mm size 21 PPW38510 Tallo distal Profemur poroso PPW38448 Tallo profemur 135 mm recto sz 15 PPW38450 Tallo profemur 135 mm recto sz 16.5 PPW38452 Tallo profemur 135 mm recto sz 18 PPW38454 Tallo profemur 135 mm recto sz 19.5 PPW38456 Tallo profemur 135 mm recto sz 21 PPW38458 Tallo profemur 135 mm recto sz 22.5 PPW38464 Tallo distal Profemur poroso PPW38466 Tallo distal Profemur poroso PPW38468 Tallo distal Profemur poroso PPW38470 Tallo distal	mm recto sz 13.5 PPW38408 Tallo profemur 95 mm recto sz 15 PHA01204 Cuello intercambiable largo PHA01206 Cuello intercambiable XL PHA01212 Cuello intercambiable A/R VAR/VAL 2 corto PHAC1232 Cuello Profemur A/R 8º corto cocr PHA03161 Tallo Profemur E , size 1+ PPW38476 Tallo distal Profemur poroso PPW38478 Tallo distal Profemur poroso PPW38402 Tallo profemur 95 mm rexta sz 10.5 PHA03162 Tallo Profemur E size 2+ PHA03163 Tallo Profemur E , size 3+ PHA03164 Tallo Profemur E , size 4+ PHA03165 Tallo Profemur E , size 5+ PHA03166 Tallo Profemur E , size 6+ PHA03167 Tallo Profemur E , size 7+ PHA03168 Tallo Profemur E , size 8+ PHA01110 s Placa LT izq 5 perforacione PHA01112 Placa RT dcha 5 perforaciones PHA00274 Tallo fem Profemur z 1/3 cubierto sz 8 PHA00276 Tallo fem Profemur z 1/3 cubierto sz 9 PHA00278 Tallo fem Profemur z 1/3 cubierto sz 10 PHA00280 Tallo fem Profemur
--	--	--

Handwritten signature



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S. N. M. S. T.

	Profemur poroso PPW38472 Tallo distal	z 1/3 cubierto sz 11 PPW38005 Tallo Profemur R 135 mm sz 15
	Profemur poroso PPW38474 Tallo distal	PPW38006 Tallo Profemur R 135 mm sz 16
	Profemur poroso PHA00417 Tallo Profemur size 17 estandar	PPW38007 Tallo Profemur R 135 mm sz 17
	PHA00418 Tallo Profemur size 18 estandar	PPW38008 Tallo Profemur R 135 mm sz 18
	PPW38404 Tallo profemur 95 mm recto sz 12	PLSOR416 Tallo Profemur Renaissance sz 16
	PPW38406 Tallo profemur 95 mm recto sz 13.5	PLSOR417 Tallo Profemur Renaissance sz 17
	PPW38408 Tallo profemur 95 mm recto sz 15	PPW38402 Tallo profemur 95 mm recto sz 10.5
	PHA01204 Cuello intercambiable largo	PPW38414 Tallo profemur 95 mm recto sz 19.5
	PHA01206 Cuello intercambiable XL	PPW38416 Tallo profemur 95 mm recto sz 21
	PHA01212 Cuello intercambiable A/R VAR/VAL 2 corto	PPW38384 Tallo distal Profemur recto 115 mm sz 21
	PHAC1232 Cuello Profemur A/R 8º corto cocr	PPW38386 Tallo distal Profemur recto 115 mm sz 22.5
	PHA03161 Talo Profemur E , size 1+	PPW38408 Tallo profemur 95 mm rextto sz 15
	PPW38476 Tallo distal Profemur poroso	PHA00268 Tallo fem Profemur z 1/3 cubierto sz 5
	PPW38478 Tallo distal Profemur poroso	PHA03169 Tallo Profemur E , size 9+
	PPW38402 Tallo profemur 95 mm rextto sz 10.5	PHA06000 Tallo Profemur XM sz 0 cr/co cementado
	PHA03162 Tallo Profemur E size 2+	PHA06002 Tallo Profemur XM sz 1 cr/co cementado
	PHA03163 Tallo Profemur E , size 3+	PHA06004 Tallo Profemur XM sz 2 cr/co cementado
	PHA03164 Tallo Profemur E , size 4+	PHA06006 Tallo Profemur XM sz 3 cr/co cementado
	PHA03165 Tallo Profemur E , size 5+	PPW38045 Tallo Profemur R 215 mm sz 15
	PHA03166 Tallo Profemur E , size 6+	PPW38512 Tallo distal Profemur poroso
	PHA03167 Tallo Profemur E , size 7+	PHA00509 Tallo Profemur size 9
	PHA03168 Tallo Profemur E	PHA00510 Tallo Profemur size



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.A.T.

	, size 8+ PHA01110 s Placa LT izq 5 perforacione PHA01112 Placa RT dcha 5 perforaciones PHA00274 Tallo fem Profemur z 1/3 cubierto sz 8 PHA00276 Tallo fem Profemur z 1/3 cubierto sz 9 PHA00278 Tallo fem Profemur z 1/3 cubierto sz 10 PHA00280 Tallo fem Profemur z 1/3 cubierto sz 11 PPW38005 Tallo Profemur R 135 mm sz 15 PPW38006 Tallo Profemur R 135 mm sz 16 PPW38007 Tallo Profemur R 135 mm sz 17 PPW38008 Tallo Profemur R 135 mm sz 18 PLSOR416 Tallo Profemur Renaissance sz 16 PLSOR417 Tallo Profemur Renaissance sz 17 PPW38402 Tallo profemur 95 mm recto sz 10.5 PPW38414 Tallo profemur 95 mm recto sz 19.5 PPW38416 Tallo profemur 95 mm recto sz 21 PPW38384 Tallo distal Profemur recto 115 mm sz 21 PPW38386 Tallo distal Profemur recto 115 mm sz 22.5 PPW38408 Tallo profemur 95 mm rexta sz 15 PHA00268 Tallo fem Profemur z 1/3 cubierto sz 5 PHA03169 Tallo Profemur E , size 9+ PHA06000 Tallo Profemur XM sz 0 cr/co cementado PHA06002 Tallo Profemur XM	10 PHA00511 Tallo Profemur size 11 PHA00512 Tallo Profemur size 12 PHA00513 Tallo Profemur size 13 PHA00514 Tallo Profemur size 14 PHA00515 Tallo Profemur size 15 PHA00516 Tallo Profemur size 16 PPW38404 Tallo profemur 95 mm rexta sz 12 PPW38406 Tallo profemur 95 mm rexta sz 13.5 PPW38482 Tallo distal Profemur poroso PPW38484 Tallo distal Profemur poroso PPW38486 Tallo distal Profemur poroso PPW38488 Tallo distal Profemur poroso PPW38490 Tallo distal Profemur poroso PPW38492 Tallo distal Profemur poroso PPW38494 Tallo distal Profemur poroso SPHS8046 Tallo Profemur r 215 mm sz 16 SPHS8047 Tallo Profemur r 215 mm sz 17 SPHS8048 Tallo Profemur r 215 mm sz 18 SPHS8049 Tallo Profemur r 215 mm sz 19 PHA01256 Cuello intercambiable 8° VAR/VAL XL PHA00384 Copa acetabular 66/74 grupo 3 PHA00386 Copa acetabular 68/76 grupo 3
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

sz 1 cr/co cementado PHA06004 Tallo Profemur XM	PHA01106 Gancho 18 PHA01107 Gancho 23 PHA01108 Gancho 28
sz 2 cr/co cementado PHA06006 Tallo Profemur XM	PHA06008 Tallo Profemur XM
sz 3 cr/co cementado PPW38045 Tallo Profemur R 215 mm sz 15	sz 4 cr/co cementado PLIMKITA Kit mplante Profemur Renaissance
PPW38512 Tallo distal Profemur poroso	PPW38301 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 11
PHA00509 Tallo Profemur size 9	PHA02915 Tornillo esponjoso 15 mm
PHA00510 Tallo Profemur size 10	PPW30112 Tallo proximal de revision Profemur r 2
PHA00511 Tallo Profemur size 11	PPW30113 Tallo proximal de revision Profemur r 3
PHA00512 Tallo Profemur size 12	PPW30114 Tallo proximal de revision Profemur r 4
PHA00513 Tallo Profemur size 13	PPW38514 Tallo distal Profemur poroso
PHA00514 Tallo Profemur size 14	PPW38516 Tallo distal Profemur poroso
PHA00515 Tallo Profemur size 15	PPW38518 Tallo distal Profemur poroso
PHA00516 Tallo Profemur size 16	PPW38522 Tallo distal Profemur poroso
PPW38404 Tallo profemur 95 mm rextto sz 12	PPW38524 Tallo distal Profemur poroso
PPW38406 Tallo profemur 95 mm rextto sz 13.5	PPW38526 Tallo distal Profemur poroso
PPW38482 Tallo distal Profemur poroso	PPW38528 Tallo distal Profemur poroso
PPW38484 Tallo distal Profemur poroso	PPW38530 Tallo distal Profemur poroso
PPW38486 Tallo distal Profemur poroso	PPW38532 Tallo distal Profemur poroso
PPW38488 Tallo distal Profemur poroso	PPW38534 Tallo distal Profemur poroso
PPW38490 Tallo distal Profemur poroso	PPW38536 Tallo distal Profemur poroso
PPW38492 Tallo distal Profemur poroso	PPW38538 Tallo distal Profemur poroso
PPW38494 Tallo distal Profemur poroso	PPW38538 Tallo distal Profemur poroso
SPHS8046 Tallo Profemur r 215 mm sz 16	PHA01214 Cuello intercambiable A/R VAR/VAL 2 largo PHA01222 Cuello



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.S.T.

SPHS8047 Tallo Profemur r 215 mm sz 17	intercambiable A/R VAR/VAL 1 corto
SPHS8048 Tallo Profemur r 215 mm sz 18	PHA01224 Cuello intercambiable largo A/R
SPHS8049 Tallo Profemur r 215 mm sz 19	VAR/VAL 1 largo
PHA01256 Cuello intercambiable 8° VAR/VAL XL	PHA01232 Cuello intercambiable 8° corto
PHA00384 Copa acetabular 66/74 grupo 3	PHA01234 Cuello intercambiable 8° largo
PHA00386 Copa acetabular 68/76 grupo 3	PHA01242 Cuello intercambiable 15° corto
PHA01106 Gancho 18	PHA01244 Cuello intercambiable 15° largo
PHA01107 Gancho 23	PHA01252 Cuello intercambiable 8° VAR/VAL corto
PHA01108 Gancho 28	PHA01254 Cuello intercambiable 8° VAR/VAL largo
PHA06008 Tallo Profemur XM sz 4 cr/co cementado	PPW31110 Tallo distal de revision Profemur r d20*13
PLIMKITA Kit mplante Profemur Renaissance	PPW31120 Tallo distal de revision Profemur r d10*16
PPW38301 Tallo distal Profemur recto 135 mm sz 11	PPW31122 Tallo distal de revision Profemur r d12*16
PHA02915 Tornillo esponjoso 15 mm	PPW31124 Tallo distal de revision Profemur r d14*16
PPW30112 Tallo proximal de revision Profemur r 2	PLSOR418 Tallo Profemur Renaissance sz 18
PPW30113 Tallo proximal de revision Profemur r 3	PPT08710 Cabeza femoral cocr 28 (-3.5)
PPW30114 Tallo proximal de revision Profemur r 4	PPT08712 Cabeza femoral cocr 28 (0)
PPW38514 Tallo distal Profemur poroso	PPT08714 Cabeza femoral cocr 28 (+3.5)
PPW38516 Tallo distal Profemur poroso	PHA01202 Cuello intercambiable corto
PPW38518 Tallo distal Profemur poroso	PPW38343 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 13
PPW38522 Tallo distal Profemur poroso	PPW30110 Tallo proximal de revision Profemur r 1
PPW38524 Tallo distal Profemur poroso	PPW38341 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 11
PPW38526 Tallo distal Profemur poroso	
PPW38528 Tallo distal Profemur poroso	
PPW38530 Tallo distal Profemur poroso	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.A.T.

	Profemur poroso PPW38532 Tallo distal	26000017 TRANSCEND®, CABEZA DE FÉMUR 28MM SLT. CUELLO CORTO AHUSADO	COCR
	Profemur poroso PPW38534 Tallo distal	26000018 TRANSCEND®, CABEZA DE FÉMUR 28MM SLT CUELLO MEDIANO AHUSADO	COCR
	Profemur poroso PPW38536 Tallo distal	26000019 TRANSCEND®, CABEZA DE FÉMUR 28MM SLT CUELLO LARGO AHUSADO	COCR
	Profemur poroso PPW38538 Tallo distal	94008340 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA,	
	Profemur poroso PHA01214 Cuello	ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 12	
	intercambiable A/R VAR/VAL 2 largo	94008341 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA,	
	PHA01222 Cuello	ABOCINADO/CAMPANA PLUS, MEDIDA 12	
	intercambiable A/R VAR/VAL 1 corto	94008342 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA,	
	PHA01224 Cuello	ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 13	
	intercambiable largo A/R VAR/VAL 1 largo	94008343 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA,	
	PHA01232 Cuello	ABOCINADO/CAMPANA PLUS, MEDIDA 13	
	intercambiable 8º corto	94008344 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA,	
	PHA01234 Cuello	ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 14	
	intercambiable 8º largo	94008345 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA,	
	PHA01242 Cuello	ABOCINADO/CAMPANA PLUS, MEDIDA 14	
	intercambiable 15º corto	94008346 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA,	
	PHA01244 Cuello		
	intercambiable 15º largo		
	PHA01252 Cuello		
	intercambiable 8º VAR/VAL corto		
	PHA01254 Cuello		
	intercambiable 8º VAR/VAL largo		
	PPW31110 Tallo distal de revision Profemur r d20*13		
	PPW31120 Tallo distal de revision Profemur r d10*16		
	PPW31122 Tallo distal de revision Profemur r d12*16		
	PPW31124 Tallo distal de revision Profemur r d14*16		
	PLSOR418 Tallo Profemur Renaissance sz 18		
	PPT08710 Cabeza femoral cocr 28 (-3.5)		
	PPT08712 Cabeza femoral		

[Handwritten signature]



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Población e Institutos
 S.N.M.S.T.

	cocr 28 (0) PPT08714 Cabeza femoral cocr 28 (+3.5) PHA01202 Cuello intercambiable corto PPW38343 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 13 PPW30110 Tallo proximal de revision Profemur r 1 PPW38341 Tallo distal Profemur inclinado 215 mm size 11 26000017 COCR TRANSCEND®, CABEZA DE FÉMUR 28MM SLT CUELLO CORTO AHUSADO 26000018 COCR TRANSCEND®, CABEZA DE FÉMUR 28MM SLT CUELLO MEDIANO AHUSADO 26000019 COCR TRANSCEND®, CABEZA DE FÉMUR 28MM SLT CUELLO LARGO AHUSADO 94008340 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 12 94008341 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA PLUS, MEDIDA 12 94008342 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 13 94008343 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA PLUS, MEDIDA 13	ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 15 94008347 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA PLUS, MEDIDA 15 94008348 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 16 94008349 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA PLUS, MEDIDA 16 94008350 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 17 94008351 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 18 94009352 PROFEMUR® VÁSTAGO AHUSADO PARA CADERA A 94008341 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA PLUS, MEDIDA 12 94009353 PROFEMUR® VÁSTAGO AHUSADO PARA CADERA A 94008342 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 13 94009467 PROFEMUR® S ALPHA VÁSTAGO PARA CADERA PLUS 94008343 PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA PLUS, MEDIDA 13 94009468 PROFEMUR® S ALPHA VÁSTAGO PARA CADERA PLUS
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.A.T.

94008344	PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 14	ABOCINADO/CAMPANA, MEDIDA 17
94008345	PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA PLUS, MEDIDA 14	94009582 PROFEMUR® S ALPHA VÁSTAGO PARA CADERA PLUS ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 11
94008346	PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 15	LUXR5812 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 12
94008347	PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA PLUS, MEDIDA 15	LUXR5813 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 13
94008348	PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 16	LUXR5814 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 14
94008349	PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA PLUS, MEDIDA 16	LUXR5815 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 15
94008350	PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 17	LUXR5816 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 16
94008351	PROFEMUR® S ALPHA, VÁSTAGO PARA CADERA, ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 18	LUXR5817 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 17
94009352	PROFEMUR® VÁSTAGO AHUSADO PARA CADERA A	LUXR5818 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 18
	ABOCINADO/CAMPANA STANDARD, MEDIDA 15	LUXR5819 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 19
		LUXR5820 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 20
		LUXRKITA PROFEMUR® LX 5/8 REV, KIT P/IMPLANTE PHA01509 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 9 CON RANURA IMP
		PHA01510 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA AHUSADO,

51



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.A.T.

94009353 PROFEMUR® VÁSTAGO AHUSADO PARA CADERA A ABOCINADO/CAMPANA STANDARD, MEDIDA 16	CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 10 CON RANURA IMP PHA01511 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA
94009467 PROFEMUR® S ALPHA VÁSTAGO PARA CADERA PLUS ABOCINADO/CAMPANA, MEDIDA 11	AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 11 CON RANURA IMP PHA01512 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA
94009468 PROFEMUR® S ALPHA VÁSTAGO PARA CADERA PLUS ABOCINADO/CAMPANA, MEDIDA 17	AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 12 CON RANURA IMP PHA01513 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA
94009582 PROFEMUR® S ALPHA VÁSTAGO PARA CADERA PLUS ABOCINADO/CAMPANA REDUCIDO, MEDIDA 11	AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 13 CON RANURA IMP PHA01514 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA
LUXR5812 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 12	AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 14 CON RANURA IMP PHA01515 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA
LUXR5813 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 13	AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 15 CON RANURA IMP PHA01516 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA
LUXR5814 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 14	AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 16 CON RANURA IMP PHA01517 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA
LUXR5815 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 15	AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 17 CON RANURA IMP
LUXR5816 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 16	
LUXR5817 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 17	
LUXR5818 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 18	
LUXR5819 PROFEMUR® LX REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 19	
LUXR5820 PROFEMUR® LX	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.M.S.T.

	REV 5/8, VÁSTAGO RECUBIERTO, MEDIDA 20 LUXRKITA PROFEMUR® LX 5/8 REV, KIT P/IMPLANTE PHA01509 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 9 CON RANURA IMP PHA01510 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 10 CON RANURA IMP PHA01511 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 11 CON RANURA IMP PHA01512 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 12 CON RANURA IMP PHA01513 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 13 CON RANURA IMP PHA01514 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 14 CON RANURA IMP PHA01515 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 15 CON RANURA	PHA01518 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 18 CON RANURA IMP PHA03180 TORNILLO PARA CUERPO PROXIMAL EXTRA CHICO PHA03181 TORNILLO Y TAPA PARA CUERPOS PROXIMALES CHICO, STD., GRANDE PHA03302 VÁSTAGO FEMORAL "CONTACT E" MEDIDA 1 PHA03304 VÁSTAGO FEMORAL "CONTACT E" MEDIDA 2 PHA03306 VÁSTAGO FEMORAL "CONTACT E" MEDIDA 3 PHA03308 VÁSTAGO FEMORAL "CONTACT E" MEDIDA 4 PHA03310 VÁSTAGO FEMORAL "CONTACT E" MEDIDA 5 PHA03312 VÁSTAGO FEMORAL "CONTACT E" MEDIDA 6 PHA03314 VÁSTAGO FEMORAL "CONTACT E" MEDIDA 7 PHA03316 VÁSTAGO FEMORAL "CONTACT E" MEDIDA 8 PHA03400 CABEZA FEMORAL 36 CUELLO CORTO, 12/14, CERAMIQUE AL2.03 PHA03402 CABEZA FEMORAL 36 CUELLO MEDIANO, 12/14, CERAMIQUE AL2.03 PHA03404 CABEZA FEMORAL 36 CUELLO LARGO, 12/14, CERAMIQUE AL2.03 PHA05502 PROFEMUR® L VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA 1 COBERTURA HA PHA05504 PROFEMUR® L VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA 2 COBERTURA HA PHA05506 PROFEMUR® L VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA
--	---	---

[Handwritten signature]



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

IMP PHA01516 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 16 CON RANURA IMP PHA01517 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 17 CON RANURA IMP PHA01518 PROFEMUR® VÁSTAGO PARA CADERA AHUSADO, CAMPANA/ABOCINADO STD. HA, MEDIDA 18 CON RANURA IMP	3 COBERTURA HA PHA05508 PROFEMUR® L VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA 4 COBERTURA HA PHA05510 PROFEMUR® L VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA 5 COBERTURA HA PHA05512 PROFEMUR® L VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA 6 COBERTURA HA PHA05514 PROFEMUR® L VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA 7 COBERTURA HA PHA05516 PROFEMUR® L VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA 8 COBERTURA HA PHA05518 PROFEMUR® L VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA 9 COBERTURA HA PHA05520 PROFEMUR® L VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA 10 COBERTURA HA PHA05522 PROFEMUR® L VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA 11 COBERTURA HA PHA05664 VÁSTAGO REVISIÓN "PROFEMUR® L" MEDIDA 5 PHA05666 VÁSTAGO REVISIÓN "PROFEMUR® L" MEDIDA 7 PHA05668 VÁSTAGO REVISIÓN "PROFEMUR® L" MEDIDA 9 PHA05670 VÁSTAGO REVISIÓN "PROFEMUR® L" MEDIDA 10 PHA05672 VÁSTAGO REVISIÓN "PROFEMUR® L" MEDIDA 11 PLS0S510 PROFEMUR® RENAISSANCE® HA VÁSTAGO STD., MEDIDA 10 PLS0S511 PROFEMUR® RENAISSANCE® HA VÁSTAGO
PHA03180 TORNILLO PARA CUERPO PROXIMAL EXTRA CHICO PHA03181 TORNILLO Y TAPA PARA CUERPOS PROXIMALES CHICO, STD., GRANDE PHA03302 VÁSTAGO FEMORAL "CONTACT E" MEDIDA 1 PHA03304 VÁSTAGO FEMORAL "CONTACT E" MEDIDA 2 PHA03306 VÁSTAGO FEMORAL "CONTACT E" MEDIDA 3 PHA03308 VÁSTAGO FEMORAL "CONTACT E" MEDIDA 4 PHA03310 VÁSTAGO FEMORAL "CONTACT E" MEDIDA 5 PHA03312 VÁSTAGO FEMORAL "CONTACT E" MEDIDA 6	

51



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. J.

PHA03314	VÁSTAGO	STD., MEDIDA 11
FEMORAL	"CONTACT E"	PLS0S512 PROFEMUR®
MEDIDA 7		RENAISSANCE® HA VÁSTAGO
PHA03316	VÁSTAGO	STD., MEDIDA 12
FEMORAL	"CONTACT E"	PLS0S513 PROFEMUR®
MEDIDA 8		RENAISSANCE® HA VÁSTAGO
PHA03400	CABEZA FEMORAL	STD., MEDIDA 13
36 CUELLO CORTO, 12/14,		PLS0S514 PROFEMUR®
CERAMIQUE AL2.03		RENAISSANCE® HA VÁSTAGO
PHA03402	CABEZA FEMORAL	STD., MEDIDA 14
36 CUELLO MEDIANO, 12/14,		PLS0S515 PROFEMUR®
CERAMIQUE AL2.03		RENAISSANCE® HA VÁSTAGO
PHA03404	CABEZA FEMORAL	STD., MEDIDA 15
36 CUELLO LARGO, 12/14,		PLS0S516 PROFEMUR®
CERAMIQUE AL2.03		RENAISSANCE® HA VÁSTAGO
PHA05502	PROFEMUR® L	STD., MEDIDA 16
VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA		PLS0S517 PROFEMUR®
1 COBERTURA HA		RENAISSANCE® HA VÁSTAGO
PHA05504	PROFEMUR® L	STD., MEDIDA 17
VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA		PLS0S518 PROFEMUR®
2 COBERTURA HA		RENAISSANCE® HA VÁSTAGO
PHA05506	PROFEMUR® L	STD., MEDIDA 18
VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA		PPW38462 "PROFEMUR® R"
3 COBERTURA HA		VÁSTAGO DISTAL V.US L215
PHA05508	PROFEMUR® L	T10.5 LONG TIT. POROSO
VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA		PPW39009 TIGE PROXIM.
4 COBERTURA HA		MONOBLOC V4 EV1
PHA05510	PROFEMUR® L	"PROFEMUR® R", EX/SMALL
VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA		PPW39122 "PROFEMUR® R"
5 COBERTURA HA		CUERPO PROXIMAL
PHA05512	PROFEMUR® L	COBERTURA HA CHICO V4
VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA		PPW39124 "PROFEMUR® R"
6 COBERTURA HA		CUERPO PROXIMAL
PHA05514	PROFEMUR® L	COBERTURA HA STD 1 V4
VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA		PPW39126 "PROFEMUR® R"
7 COBERTURA HA		CUERPO PROXIMAL
PHA05516	PROFEMUR® L	COBERTURA HA STD 2 V4
VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA		PPW39128 "PROFEMUR® R"
8 COBERTURA HA		CUERPO PROXIMAL
PHA05518	PROFEMUR® L	COBERTURA HA STD 3 V4
VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA		PPW39130 "PROFEMUR® R"
9 COBERTURA HA		CUERPO PROXIMAL
PHA05520	PROFEMUR® L	COBERTURA HA STD 4 V4
VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA		PPW39132 "PROFEMUR® R"
10 COBERTURA HA		CUERPO PROXIMAL



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

PHA05522	PROFEMUR® L	COBERTURA HA GRANDE V4
VÁSTAGO P/CADERA MEDIDA 11	COBERTURA HA	PRAMLH01 PROFEMUR® AM
PHA05664	VÁSTAGO	POROSO, TI, IZQUIERDO, CON
REVISIÓN "PROFEMUR® L"	HA MEDIDA 1	PRAMLH02 PROFEMUR® AM
MEDIDA 5		POROSO, TI, IZQUIERDO, CON
PHA05666	VÁSTAGO	HA MEDIDA 2
REVISIÓN "PROFEMUR® L"		PRAMLH03 PROFEMUR® AM
MEDIDA 7		POROSO, TI, IZQUIERDO, CON
PHA05668	VÁSTAGO	HA MEDIDA 3
REVISIÓN "PROFEMUR® L"		PRAMLH04 PROFEMUR® AM
MEDIDA 9		POROSO, TI, IZQUIERDO, CON
PHA05670	VÁSTAGO	HA MEDIDA 4
REVISIÓN "PROFEMUR® L"		PRAMLH05 PROFEMUR® AM
MEDIDA 10		POROSO, TI, IZQUIERDO, CON
PHA05672	VÁSTAGO	HA MEDIDA 5
REVISIÓN "PROFEMUR® L"		PRAMLH06 PROFEMUR® AM
MEDIDA 11		POROSO, TI, IZQUIERDO, CON
PLS05510	PROFEMUR®	HA MEDIDA 6
RENAISSANCE®	HA	PRAMLH07 PROFEMUR® AM
VÁSTAGO STD., MEDIDA 10		POROSO, TI, IZQUIERDO, CON
PLS05511	PROFEMUR®	HA MEDIDA 7
RENAISSANCE®	HA	PRAMLH08 PROFEMUR® AM
VÁSTAGO STD., MEDIDA 11		POROSO, TI, IZQUIERDO, CON
PLS05512	PROFEMUR®	HA MEDIDA 8
RENAISSANCE®	HA	PRAMLH09 PROFEMUR® AM
VÁSTAGO STD., MEDIDA 12		POROSO, TI, IZQUIERDO, CON
PLS05513	PROFEMUR®	HA MEDIDA 9
RENAISSANCE®	HA	PRAMRH01 PROFEMUR® AM
VÁSTAGO STD., MEDIDA 13		POROUS, TI, DERECHO, CON
PLS05514	PROFEMUR®	HA MEDIDA 1
RENAISSANCE®	HA	PRAMRH02 PROFEMUR® AM
VÁSTAGO STD., MEDIDA 14		POROUS, TI, DERECHO, CON
PLS05515	PROFEMUR®	HA MEDIDA 2
RENAISSANCE®	HA	PRAMRH03 PROFEMUR® AM
VÁSTAGO STD., MEDIDA 15		POROUS, TI, DERECHO, CON
PLS05516	PROFEMUR®	HA MEDIDA 3
RENAISSANCE®	HA	PRAMRH04 PROFEMUR® AM
VÁSTAGO STD., MEDIDA 16		POROUS, TI, DERECHO, CON
PLS05517	PROFEMUR®	HA MEDIDA 4
RENAISSANCE®	HA	PRAMRH05 PROFEMUR® AM
VÁSTAGO STD., MEDIDA 17		POROUS, TI, DERECHO, CON
PLS05518	PROFEMUR®	HA MEDIDA 5
RENAISSANCE®	HA	PRAMRH06 PROFEMUR® AM
VÁSTAGO STD., MEDIDA 18		POROUS, TI, DERECHO, CON



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. J.

PPW38462 "PROFEMUR® R" VÁSTAGO DISTAL V.US L215 T10.5 LONG TIT. POROSO PPW39009 TIGE PROXIM. MONOBLOC V4 EV1 "PROFEMUR® R", EX/SMALL PPW39122 "PROFEMUR® R" CUERPO PROXIMAL COBERTURA HA CHICO V4 PPW39124 "PROFEMUR® R" CUERPO PROXIMAL COBERTURA HA STD 1 V4 PPW39126 "PROFEMUR® R" CUERPO PROXIMAL COBERTURA HA STD 2 V4 PPW39128 "PROFEMUR® R" CUERPO PROXIMAL COBERTURA HA STD 3 V4 PPW39130 "PROFEMUR® R" CUERPO PROXIMAL COBERTURA HA STD 4 V4 PPW39132 "PROFEMUR® R" CUERPO PROXIMAL COBERTURA HA GRANDE V4 PRAMLH01 PROFEMUR® AM POROSO, TI, IZQUIERDO, CON HA MEDIDA 1 PRAMLH02 PROFEMUR® AM POROSO, TI, IZQUIERDO, CON HA MEDIDA 2 PRAMLH03 PROFEMUR® AM POROSO, TI, IZQUIERDO, CON HA MEDIDA 3 PRAMLH04 PROFEMUR® AM POROSO, TI, IZQUIERDO, CON HA MEDIDA 4 PRAMLH05 PROFEMUR® AM POROSO, TI, IZQUIERDO, CON HA MEDIDA 5 PRAMLH06 PROFEMUR® AM POROSO, TI, IZQUIERDO, CON HA MEDIDA 6 PRAMLH07 PROFEMUR® AM POROSO, TI, IZQUIERDO, CON HA MEDIDA 7	HA MEDIDA 6 PRAMRH07 PROFEMUR® AM POROUS, TI, DERECHO, CON HA MEDIDA 7 PRAMRH08 PROFEMUR® AM POROUS, TI, DERECHO, CON HA MEDIDA 8 PRAMRH09 PROFEMUR® AM POROUS, TI, DERECHO, CON HA MEDIDA 9 PRFC0010 PROFEMUR® FC VÁSTAGO MEDIDA 10 0 PRFC0011 PROFEMUR® FC VÁSTAGO MEDIDA 11 0 PRFC0012 PROFEMUR® FC VÁSTAGO MEDIDA 12 0 PRFC0013 PROFEMUR® FC VÁSTAGO MEDIDA 13 0 PRFC0014 PROFEMUR® FC VÁSTAGO MEDIDA 14 0 PRFC0015 PROFEMUR® FC VÁSTAGO MEDIDA 15 0 PRFC0016 PROFEMUR® FC VÁSTAGO MEDIDA 16 0 PRFC0017 PROFEMUR® FC VÁSTAGO MEDIDA 17 0 PRFC0018 PROFEMUR® FC VÁSTAGO MEDIDA 18 0 PRGL0001 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO MEDIDA 1 PRGL0002 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO MEDIDA 2 PRGL0003 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO MEDIDA 3 PRGL0004 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO MEDIDA 4 PRGL0005 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO MEDIDA 5 PRGL0006 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA
--	---

Handwritten signature



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. J.

PRAMLH08 PROFEMUR® AM POROSO, TI, IZQUIERDO, CON HA MEDIDA 8	VÁSTAGO MEDIDA 6
PRAMLH09 PROFEMUR® AM POROSO, TI, IZQUIERDO, CON HA MEDIDA 9	PRGL0007 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA
PRAMRH01 PROFEMUR® AM POROUS, TI, DERECHO, CON HA MEDIDA 1	VÁSTAGO MEDIDA 7
PRAMRH02 PROFEMUR® AM POROUS, TI, DERECHO, CON HA MEDIDA 2	PRGL0008 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA
PRAMRH03 PROFEMUR® AM POROUS, TI, DERECHO, CON HA MEDIDA 3	VÁSTAGO MEDIDA 8
PRAMRH04 PROFEMUR® AM POROUS, TI, DERECHO, CON HA MEDIDA 4	PRGL0009 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA
PRAMRH05 PROFEMUR® AM POROUS, TI, DERECHO, CON HA MEDIDA 5	VÁSTAGO MEDIDA 9
PRAMRH06 PROFEMUR® AM POROUS, TI, DERECHO, CON HA MEDIDA 6	PRGL0010 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA
PRAMRH07 PROFEMUR® AM POROUS, TI, DERECHO, CON HA MEDIDA 7	VÁSTAGO MEDIDA 10
PRAMRH08 PROFEMUR® AM POROUS, TI, DERECHO, CON HA MEDIDA 8	PRGLCE10 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA
PRAMRH09 PROFEMUR® AM POROUS, TI, DERECHO, CON HA MEDIDA 9	VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 10 EXTENDIDO
PRFC0010 PROFEMUR® FC VÁSTAGO MEDIDA 10 0	PRGLCLE1 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA
PRFC0011 PROFEMUR® FC VÁSTAGO MEDIDA 11 0	VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 1 EXTENDIDO
PRFC0012 PROFEMUR® FC VÁSTAGO MEDIDA 12 0	PRGLCLE2 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA
PRFC0013 PROFEMUR® FC VÁSTAGO MEDIDA 13 0	VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 2 EXTENDIDO
PRFC0014 PROFEMUR® FC VÁSTAGO MEDIDA 14 0	PRGLCLE3 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA
PRFC0015 PROFEMUR® FC VÁSTAGO MEDIDA 15 0	VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 3 EXTENDIDO
	PRGLCLE4 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA
	VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 4 EXTENDIDO
	PRGLCLE5 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA
	VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 5 EXTENDIDO
	PRGLCLE6 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Población e Institutos
 S. N. M. S. T.

PRFC0016	PROFEMUR®	FC	VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA
VÁSTAGO MEDIDA 16 0			CLASSIC MEDIDA 6
PRFC0017	PROFEMUR®	FC	EXTENDIDO
VÁSTAGO MEDIDA 17 0			PRGLCLE7 PROFEMUR®
PRFC0018	PROFEMUR®	FC	GLADIATOR® PLASMA
VÁSTAGO MEDIDA 18 0			VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA
PRGL0001	PROFEMUR®		CLASSIC MEDIDA 7
GLADIATOR®		PLASMA	EXTENDIDO
VÁSTAGO MEDIDA 1			PRGLCLE8 PROFEMUR®
PRGL0002	PROFEMUR®		GLADIATOR® PLASMA
GLADIATOR®		PLASMA	VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA
VÁSTAGO MEDIDA 2			CLASSIC MEDIDA 8
PRGL0003	PROFEMUR®		EXTENDIDO
GLADIATOR®		PLASMA	PRGLCLE9 PROFEMUR®
VÁSTAGO MEDIDA 3			GLADIATOR® PLASMA
PRGL0004	PROFEMUR®		VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA
GLADIATOR®		PLASMA	CLASSIC MEDIDA 9
VÁSTAGO MEDIDA 4			EXTENDIDO
PRGL0005	PROFEMUR®		PRGLCLS1 PROFEMUR®
GLADIATOR®		PLASMA	GLADIATOR® PLASMA
VÁSTAGO MEDIDA 5			VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA
PRGL0006	PROFEMUR®		CLASSIC MEDIDA 1 STD.
GLADIATOR®		PLASMA	PRGLCLS2 PROFEMUR®
VÁSTAGO MEDIDA 6			GLADIATOR® PLASMA
PRGL0007	PROFEMUR®		VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA
GLADIATOR®		PLASMA	CLASSIC MEDIDA 2 STD.
VÁSTAGO MEDIDA 7			PRGLCLS3 PROFEMUR®
PRGL0008	PROFEMUR®		GLADIATOR® PLASMA
GLADIATOR®		PLASMA	VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA
VÁSTAGO MEDIDA 8			CLASSIC MEDIDA 3 STD.
PRGL0009	PROFEMUR®		PRGLCLS4 PROFEMUR®
GLADIATOR®		PLASMA	GLADIATOR® PLASMA
VÁSTAGO MEDIDA 9			VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA
PRGL0010	PROFEMUR®		CLASSIC MEDIDA 4 STD.
GLADIATOR®		PLASMA	PRGLCLS5 PROFEMUR®
VÁSTAGO MEDIDA 10			GLADIATOR® PLASMA
PRGLCE10	PROFEMUR®		VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA
GLADIATOR®		PLASMA	CLASSIC MEDIDA 5 STD.
VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA			PRGLCLS6 PROFEMUR®
CLASSIC MEDIDA 10			GLADIATOR® PLASMA
EXTENDIDO			VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA
PRGLCLE1	PROFEMUR®		CLASSIC MEDIDA 6 STD.
GLADIATOR®		PLASMA	PRGLCLS7 PROFEMUR®
VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA			GLADIATOR® PLASMA
CLASSIC MEDIDA 1			VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

	EXTENDIDO PRGLCLE2 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 2	CLASSIC MEDIDA 7 STD. PRGLCLS8 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 8 STD.
	EXTENDIDO PRGLCLE3 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 3	PRGLCLS9 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 9 STD.
	EXTENDIDO PRGLCLE4 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 4	PRGLCM04 PROFEMUR® GLADIATOR® VÁSTAGO CEMENTADO MEDIDA 4 PRGLCM06 PROFEMUR® GLADIATOR® VÁSTAGO CEMENTADO MEDIDA 6 STD.
	EXTENDIDO PRGLCLE5 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 5	PRGLCM08 PROFEMUR® GLADIATOR® VÁSTAGO CEMENTADO MEDIDA 8 STD. PRGLCM10 PROFEMUR® GLADIATOR® VÁSTAGO CEMENTADO MEDIDA 10
	EXTENDIDO PRGLCLE6 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 6	PRGLCM12 PROFEMUR® GLADIATOR® VÁSTAGO CEMENTADO MEDIDA 12 PRGLCS10 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 10 STD.
	EXTENDIDO PRGLCLE7 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 7	PRGLDC04 PROFEMUR® GLADIATOR® CENTRALIZADOR DISTAL MEDIDA 4
	EXTENDIDO PRGLCLE8 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 8	PRGLDC06 PROFEMUR® GLADIATOR® CENTRALIZADOR DISTAL MEDIDA 6
	EXTENDIDO PRGLCLE9 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 9	PRGLDC08 PROFEMUR® GLADIATOR® CENTRALIZADOR DISTAL MEDIDA 8
	EXTENDIDO PRGLCLS1 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA CLASSIC MEDIDA 1 STD.	PRGLDC10 PROFEMUR® GLADIATOR® CENTRALIZADOR DISTAL MEDIDA 10 PRGLDC12 PROFEMUR®

51



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.T.

PRGLCLS2	PROFEMUR®	GLADIATOR®	PROFEMUR®
GLADIATOR®	PLASMA	CENTRALIZADOR	DISTAL
VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA		MEDIDA 12	
CLASSIC MEDIDA 2 STD.		PRGLHA01	PROFEMUR®
PRGLCLS3	PROFEMUR®	GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
GLADIATOR®	PLASMA	CON COLLAR, HA,	MEDIDA 1
VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA		PRGLHA02	PROFEMUR®
CLASSIC MEDIDA 3 STD.		GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
PRGLCLS4	PROFEMUR®	CON COLLAR, HA,	MEDIDA 2
GLADIATOR®	PLASMA	PRGLHA03	PROFEMUR®
VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA		GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
CLASSIC MEDIDA 4 STD.		CON COLLAR, HA,	MEDIDA 3
PRGLCLS5	PROFEMUR®	PRGLHA04	PROFEMUR®
GLADIATOR®	PLASMA	GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA		CON COLLAR, HA,	MEDIDA 4
CLASSIC MEDIDA 5 STD.		PRGLHA05	PROFEMUR®
PRGLCLS6	PROFEMUR®	GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
GLADIATOR®	PLASMA	CON COLLAR, HA,	MEDIDA 5
VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA		PRGLHA06	PROFEMUR®
CLASSIC MEDIDA 6 STD.		GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
PRGLCLS7	PROFEMUR®	CON COLLAR, HA,	MEDIDA 6
GLADIATOR®	PLASMA	PRGLHA07	PROFEMUR®
VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA		GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
CLASSIC MEDIDA 7 STD.		CON COLLAR, HA,	MEDIDA 7
PRGLCLS8	PROFEMUR®	PRGLHA08	PROFEMUR®
GLADIATOR®	PLASMA	GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA		CON COLLAR, HA,	MEDIDA 8
CLASSIC MEDIDA 8 STD.		PRGLHA09	PROFEMUR®
PRGLCLS9	PROFEMUR®	GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
GLADIATOR®	PLASMA	CON COLLAR, HA,	MEDIDA 9
VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA		PRGLHA10	PROFEMUR®
CLASSIC MEDIDA 9 STD.		GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
PRGLCM04	PROFEMUR®	CON COLLAR, HA,	MEDIDA 10
GLADIATOR®	VÁSTAGO	PRGLHA11	PROFEMUR®
CEMENTADO MEDIDA 4		GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
PRGLCM06	PROFEMUR®	SIN COLLAR, HA,	MEDIDA 1
GLADIATOR®	VÁSTAGO	PRGLHA12	PROFEMUR®
CEMENTADO MEDIDA 6 STD.		GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
PRGLCM08	PROFEMUR®	SIN COLLAR, HA,	MEDIDA 2
GLADIATOR®	VÁSTAGO	PRGLHA13	PROFEMUR®
CEMENTADO MEDIDA 8 STD.		GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
PRGLCM10	PROFEMUR®	SIN COLLAR, HA,	MEDIDA 3
GLADIATOR®	VÁSTAGO	PRGLHA14	PROFEMUR®
CEMENTADO MEDIDA 10		GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
PRGLCM12	PROFEMUR®	SIN COLLAR, HA,	MEDIDA 4



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

GLADIATOR®	VÁSTAGO	PRGLHA15	PROFEMUR®
CEMENTADO MEDIDA 12		GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
PRGLCS10	PROFEMUR®	SIN COLLAR, HA, MEDIDA 5	
GLADIATOR®	PLASMA	PRGLHA16	PROFEMUR®
VÁSTAGO CLÁSICO /PLASMA		GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
CLASSIC MEDIDA 10 STD.		SIN COLLAR, HA, MEDIDA 6	
PRGLDC04	PROFEMUR®	PRGLHA17	PROFEMUR®
GLADIATOR®		GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
CENTRALIZADOR	DISTAL	SIN COLLAR, HA, MEDIDA 7	
MEDIDA 4		PRGLHA18	PROFEMUR®
PRGLDC06	PROFEMUR®	GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
GLADIATOR®		SIN COLLAR, HA, MEDIDA 8	
CENTRALIZADOR	DISTAL	PRGLHA19	PROFEMUR®
MEDIDA 6		GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
PRGLDC08	PROFEMUR®	SIN COLLAR, HA, MEDIDA 9	
GLADIATOR®		PRGLHA20	PROFEMUR®
CENTRALIZADOR	DISTAL	GLADIATOR®	HA VÁSTAGO
MEDIDA 8		SIN COLLAR, HA, MEDIDA 10	
PRGLDC10	PROFEMUR®	PRLX0011	PROFEMUR® LX
GLADIATOR®		VÁSTAGO MEDIDA 11 0	
CENTRALIZADOR	DISTAL	PRLX0012	PROFEMUR® LX
MEDIDA 10		VÁSTAGO MEDIDA 12 0	
PRGLDC12	PROFEMUR®	PRLX0013	PROFEMUR® LX
GLADIATOR®		VÁSTAGO MEDIDA 13 0	
CENTRALIZADOR	DISTAL	PRLX0014	PROFEMUR® LX
MEDIDA 12		VÁSTAGO MEDIDA 14 0	
PRGLHA01	PROFEMUR®	PRLX0015	PROFEMUR® LX
GLADIATOR®	HA VÁSTAGO	VÁSTAGO MEDIDA 15 0	
CON COLLAR, HA, MEDIDA 1		PRLX0016	PROFEMUR® LX
PRGLHA02	PROFEMUR®	VÁSTAGO MEDIDA 16 0	
GLADIATOR®	HA VÁSTAGO	PRLX0017	PROFEMUR® LX
CON COLLAR, HA, MEDIDA 2		VÁSTAGO MEDIDA 17 0	
PRGLHA03	PROFEMUR®	PRLX0018	PROFEMUR® LX
GLADIATOR®	HA VÁSTAGO	VÁSTAGO MEDIDA 18 0	
CON COLLAR, HA, MEDIDA 3		PRLX0019	PROFEMUR® LX
PRGLHA04	PROFEMUR®	VÁSTAGO MEDIDA 19 0	
GLADIATOR®	HA VÁSTAGO	PRLX5810	PROFEMUR® LX
CON COLLAR, HA, MEDIDA 4		VÁSTAGO, COBERTURA	PS
PRGLHA05	PROFEMUR®	MEDIDA 10 5/8	
GLADIATOR®	HA VÁSTAGO	PRLX5811	PROFEMUR® LX
CON COLLAR, HA, MEDIDA 5		VÁSTAGO, COBERTURA	PS
PRGLHA06	PROFEMUR®	MEDIDA 11 5/8	
GLADIATOR®	HA VÁSTAGO	PRLX5812	PROFEMUR® LX
CON COLLAR, HA, MEDIDA 6		VÁSTAGO, COBERTURA	PS
PRGLHA07	PROFEMUR®	MEDIDA 12 5/8	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S. N. M. S. T.

	GLADIATOR® HA VÁSTAGO CON COLLAR, HA, MEDIDA 7 PRGLHA08 PROFEMUR®	PRLX5813 PROFEMUR® LX VÁSTAGO, COBERTURA PS MEDIDA 13 5/8
	GLADIATOR® HA VÁSTAGO CON COLLAR, HA, MEDIDA 8 PRGLHA09 PROFEMUR®	PRLX5814 PROFEMUR® LX VÁSTAGO, COBERTURA PS MEDIDA 14 5/8
	GLADIATOR® HA VÁSTAGO CON COLLAR, HA, MEDIDA 9 PRGLHA10 PROFEMUR®	PRLX5815 PROFEMUR® LX VÁSTAGO, COBERTURA PS MEDIDA 15 5/8
	GLADIATOR® HA VÁSTAGO CON COLLAR, HA, MEDIDA 10 PRGLHA11 PROFEMUR®	PRLX5816 PROFEMUR® LX VÁSTAGO, COBERTURA PS MEDIDA 16 5/8
	GLADIATOR® HA VÁSTAGO SIN COLLAR, HA, MEDIDA 1 PRGLHA12 PROFEMUR®	PRLX5817 PROFEMUR® LX VÁSTAGO, COBERTURA PS MEDIDA 17 5/8
	GLADIATOR® HA VÁSTAGO SIN COLLAR, HA, MEDIDA 2 PRGLHA13 PROFEMUR®	PRLX5818 PROFEMUR® LX VÁSTAGO, COBERTURA PS MEDIDA 18 5/8
	GLADIATOR® HA VÁSTAGO SIN COLLAR, HA, MEDIDA 3 PRGLHA14 PROFEMUR®	PRPR0001 PROFEMUR® PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 1
	GLADIATOR® HA VÁSTAGO SIN COLLAR, HA, MEDIDA 4 PRGLHA15 PROFEMUR®	PRPR0002 PROFEMUR® PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 2
	GLADIATOR® HA VÁSTAGO SIN COLLAR, HA, MEDIDA 5 PRGLHA16 PROFEMUR®	PRPR0003 PROFEMUR® PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 3
	GLADIATOR® HA VÁSTAGO SIN COLLAR, HA, MEDIDA 6 PRGLHA17 PROFEMUR®	PRPR0004 PROFEMUR® PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 4
	GLADIATOR® HA VÁSTAGO SIN COLLAR, HA, MEDIDA 7 PRGLHA18 PROFEMUR®	PRPR0004SP PROFEMUR® PRESERVE MUESTRA MEDIDA 4
	GLADIATOR® HA VÁSTAGO SIN COLLAR, HA, MEDIDA 8 PRGLHA19 PROFEMUR®	PRPR0005 PROFEMUR® PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 5
	GLADIATOR® HA VÁSTAGO SIN COLLAR, HA, MEDIDA 9 PRGLHA20 PROFEMUR®	PRPR0006 PROFEMUR® PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 6
	GLADIATOR® HA VÁSTAGO SIN COLLAR, HA, MEDIDA 10 PRLX0011 PROFEMUR® LX	PRPR0007 PROFEMUR® PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 7
	VÁSTAGO MEDIDA 11 0 PRLX0012 PROFEMUR® LX	PRPR0008 PROFEMUR® PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 8



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.A.T.

	VÁSTAGO MEDIDA 12 0		PRPR0009	PROFEMUR®	
	PRLX0013 PROFEMUR®	LX	PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA		
	VÁSTAGO MEDIDA 13 0		9		
	PRLX0014 PROFEMUR®	LX	PRPR0010	PROFEMUR®	
	VÁSTAGO MEDIDA 14 0		PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA		
	PRLX0015 PROFEMUR®	LX	10		
	VÁSTAGO MEDIDA 15 0		PRPR0011	PROFEMUR®	
	PRLX0016 PROFEMUR®	LX	PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA		
	VÁSTAGO MEDIDA 16 0		11		
	PRLX0017 PROFEMUR®	LX	PRPR0012	PROFEMUR®	
	VÁSTAGO MEDIDA 17 0		PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA		
	PRLX0018 PROFEMUR®	LX	12		
	VÁSTAGO MEDIDA 18 0		PRTL0021	PROFEMUR®	TL
	PRLX0019 PROFEMUR®	LX	VÁSTAGO MEDIDA 1 0		
	VÁSTAGO MEDIDA 19 0		PRTL0022	PROFEMUR®	TL
	PRLX5810 PROFEMUR®	LX	VÁSTAGO MEDIDA 2 0		
	VÁSTAGO, COBERTURA	PS	PRTL0023	PROFEMUR®	TL
	MEDIDA 10 5/8		VÁSTAGO MEDIDA 3 0		
	PRLX5811 PROFEMUR®	LX	PRTL0024	PROFEMUR®	TL
	VÁSTAGO, COBERTURA	PS	VÁSTAGO MEDIDA 4 0		
	MEDIDA 11 5/8		PRTL0025	PROFEMUR®	TL
	PRLX5812 PROFEMUR®	LX	VÁSTAGO MEDIDA 5 0		
	VÁSTAGO, COBERTURA	PS	PRTL0026	PROFEMUR®	TL
	MEDIDA 12 5/8		VÁSTAGO MEDIDA 6 0		
	PRLX5813 PROFEMUR®	LX	PRTL0027	PROFEMUR®	TL
	VÁSTAGO, COBERTURA	PS	VÁSTAGO MEDIDA 7 0		
	MEDIDA 13 5/8		PRTL0028	PROFEMUR®	TL
	PRLX5814 PROFEMUR®	LX	VÁSTAGO MEDIDA 8 0		
	VÁSTAGO, COBERTURA	PS	PRTL0029	PROFEMUR®	TL
	MEDIDA 14 5/8		VÁSTAGO MEDIDA 9 0		
	PRLX5815 PROFEMUR®	LX	PRTL0030	PROFEMUR®	TL
	VÁSTAGO, COBERTURA	PS	VÁSTAGO MEDIDA 10 0		
	MEDIDA 15 5/8		PRTL0031	PROFEMUR®	TL
	PRLX5816 PROFEMUR®	LX	VÁSTAGO MEDIDA 11 0		
	VÁSTAGO, COBERTURA	PS	PRTL0032	PROFEMUR®	TL
	MEDIDA 16 5/8		VÁSTAGO MEDIDA 12 0		
	PRLX5817 PROFEMUR®	LX	PRXMDC01	PROFEMUR®XM	
	VÁSTAGO, COBERTURA	PS	CENTRALIZADOR DISTAL 0		
	MEDIDA 17 5/8		PYRD0001	PROFEMUR® RAZ,	
	PRLX5818 PROFEMUR®	LX	VÁSTAGO MEDIDA 1.0		
	VÁSTAGO, COBERTURA	PS	PYRD0002	PROFEMUR® RAZ,	
	MEDIDA 18 5/8		VÁSTAGO MEDIDA 2.0		
	PRPR0001	PROFEMUR®	PYRD0003	PROFEMUR® RAZ,	
	PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA		VÁSTAGO MEDIDA 3.0		
	1		PYRD0004	PROFEMUR® RAZ,	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

PRPR0002	PROFEMUR®	VÁSTAGO MEDIDA 4.0
PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 2		PYRD0005 PROFEMUR® RAZ, VÁSTAGO MEDIDA 5.0
PRPR0003	PROFEMUR®	PYRD0006 PROFEMUR® RAZ, VÁSTAGO MEDIDA 6.0
PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 3		PYRD0007 PROFEMUR® RAZ, VÁSTAGO MEDIDA 7.0
PRPR0004	PROFEMUR®	PYRD0008 PROFEMUR® RAZ, VÁSTAGO MEDIDA 8.0
PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 4		PYRD0009 PROFEMUR® RAZ, VÁSTAGO MEDIDA 9.0
PRPR0004SP	PROFEMUR®	PHA0S232 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 1 VÁSTAGO CLÁSICO, STD.
PRESERVE MUESTRA MEDIDA 4		PHA0S234 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 2 VÁSTAGO CLÁSICO, STD.
PRPR0005	PROFEMUR®	PHA0S236 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 3 VÁSTAGO CLÁSICO, STD.
PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 5		PHA0S238 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 4 VÁSTAGO CLÁSICO, STD.
PRPR0006	PROFEMUR®	PHA0S240 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 5 VÁSTAGO CLÁSICO, STD.
PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 6		PHA0S242 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 6 VÁSTAGO CLÁSICO, STD.
PRPR0007	PROFEMUR®	PHA0S244 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 7 VÁSTAGO CLÁSICO, STD.
PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 7		PHA0S246 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 8 VÁSTAGO CLÁSICO, STD.
PRPR0008	PROFEMUR®	PHA0S248 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 9 VÁSTAGO CLÁSICO, STD.
PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 8		PHA0E232 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 1 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO
PRPR0009	PROFEMUR®	PHA0E234 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 2 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO
PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 9		PHA0E236 PROFEMUR® Z
PRPR0010	PROFEMUR®	
PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 10		
PRPR0011	PROFEMUR®	
PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 11		
PRPR0012	PROFEMUR®	
PRESERVE VÁSTAGO MEDIDA 12		
PRTL0021	PROFEMUR® TL	
VÁSTAGO MEDIDA 1 0		
PRTL0022	PROFEMUR® TL	
VÁSTAGO MEDIDA 2 0		
PRTL0023	PROFEMUR® TL	
VÁSTAGO MEDIDA 3 0		
PRTL0024	PROFEMUR® TL	
VÁSTAGO MEDIDA 4 0		
PRTL0025	PROFEMUR® TL	

CA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

VÁSTAGO MEDIDA 5 0 PRTL0026 PROFEMUR® TL	FEM, MEDIDA 3 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO
VÁSTAGO MEDIDA 6 0 PRTL0027 PROFEMUR® TL	PHA0E238 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 4 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO
VÁSTAGO MEDIDA 7 0 PRTL0028 PROFEMUR® TL	PHA0E240 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 5 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO
VÁSTAGO MEDIDA 8 0 PRTL0029 PROFEMUR® TL	PHA0E242 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 6 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO
VÁSTAGO MEDIDA 9 0 PRTL0030 PROFEMUR® TL	PHA0E244 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 7 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO
VÁSTAGO MEDIDA 10 0 PRTL0031 PROFEMUR® TL	PHA0E246 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 8 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO
VÁSTAGO MEDIDA 11 0 PRTL0032 PROFEMUR® TL	PHA0E248 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 9 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO
VÁSTAGO MEDIDA 12 0 PRXMDC01 PROFEMUR®XM	PHAPCLS1 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 1 CUELLO CORTO STD.
CENTRALIZADOR DISTAL 0 PYRD0001 PROFEMUR® RAZ,	PHAPCLS2 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 2 CUELLO CORTO STD.
VÁSTAGO MEDIDA 1.0 PYRD0002 PROFEMUR® RAZ,	PHAPCLS3 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 3 CUELLO CORTO STD.
VÁSTAGO MEDIDA 2.0 PYRD0003 PROFEMUR® RAZ,	PHAPCLS4 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 4 CUELLO CORTO STD.
VÁSTAGO MEDIDA 3.0 PYRD0004 PROFEMUR® RAZ,	PHAPCLS5 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 5 CUELLO CORTO STD.
VÁSTAGO MEDIDA 4.0 PYRD0005 PROFEMUR® RAZ,	PHAPCLS6 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 6 CUELLO CORTO STD.
VÁSTAGO MEDIDA 5.0 PYRD0006 PROFEMUR® RAZ,	PHAPCLS7 PROFEMUR®
VÁSTAGO MEDIDA 6.0 PYRD0007 PROFEMUR® RAZ,	
VÁSTAGO MEDIDA 7.0 PYRD0008 PROFEMUR® RAZ,	
VÁSTAGO MEDIDA 8.0 PYRD0009 PROFEMUR® RAZ,	
VÁSTAGO MEDIDA 9.0 PHA0S232 PROFEMUR® Z	
FEM, MEDIDA 1 VÁSTAGO CLÁSICO, STD.	
PHA0S234 PROFEMUR® Z	
FEM, MEDIDA 2 VÁSTAGO CLÁSICO, STD.	
PHA0S236 PROFEMUR® Z	
FEM, MEDIDA 3 VÁSTAGO CLÁSICO, STD.	
PHA0S238 PROFEMUR® Z	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	FEM, MEDIDA 4 VÁSTAGO CLÁSICO, STD. PHA0S240 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 5 VÁSTAGO CLÁSICO, STD. PHA0S242 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 6 VÁSTAGO CLÁSICO, STD. PHA0S244 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 7 VÁSTAGO CLÁSICO, STD. PHA0S246 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 8 VÁSTAGO CLÁSICO, STD. PHA0S248 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 9 VÁSTAGO CLÁSICO, STD. PHA0E232 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 1 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO PHA0E234 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 2 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO PHA0E236 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 3 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO PHA0E238 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 4 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO PHA0E240 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 5 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO PHA0E242 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 6 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO PHA0E244 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 7 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO PHA0E246 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 8 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO PHA0E248 PROFEMUR® Z FEM, MEDIDA 9 VÁSTAGO CLÁSICO EXTENDIDO PHAPCLS1 PROFEMUR®	PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 7 CUELLO CORTO STD. PHAPCLS8 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 8 CUELLO CORTO STD. PHAPCLS9 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 9 CUELLO CORTO STD. PHAPCLE1 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 1 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHAPCLE2 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 2 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHAPCLE3 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 3 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHAPCLE4 PROFEMUR® PI ASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 4 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHAPCLE5 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 5 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHAPCLE6 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 6 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHAPCLE7 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 7 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHAPCLE8 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 8 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHAPCLE9 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO,
--	---	--

EA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

	PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 1 CUELLO CORTO STD. PHAPCLS2 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 2 CUELLO CORTO STD. PHAPCLS3 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 3 CUELLO CORTO STD. PHAPCLS4 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 4 CUELLO CORTO STD. PHAPCLS5 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 5 CUELLO CORTO STD. PHAPCLS6 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 6 CUELLO CORTO STD. PHAPCLS7 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 7 CUELLO CORTO STD. PHAPCLS8 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 8 CUELLO CORTO STD. PHAPCLS9 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 9 CUELLO CORTO STD. PHAPCLE1 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 1 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHAPCLE2 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 2 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHAPCLE3 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO	MEDIDA 9 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHA0CLS1 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 1 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLS2 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 2 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLS3 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 3 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLS4 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 4 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLS5 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 5 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLS6 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 6 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLS7 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 7 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLS8 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 8 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLS9 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 9 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLE1 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 1 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PHA0CLE2 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 2 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PHA0CLE3 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 3 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PHA0CLE4 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 4 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PHA0CLE5 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 5 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PHA0CLE6 PROFEMUR® Z
--	--	---

51



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Población e Institutos
 S. N. M. S. T.

	CLÁSICO, MEDIDA 3 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHAPCLE4 PROFEMUR® PI ASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 4 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHAPCLE5 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 5 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHAPCLE6 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 6 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHAPCLE7 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 7 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHAPCLE8 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 8 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHAPCLE9 PROFEMUR® PLASMA Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 9 CUELLO CORTO EXTENDIDO PHA0CLS1 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 1 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLS2 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 2 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLS3 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 3 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLS4 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 4 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLS5 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 5 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLS6 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 6 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLS7 PROFEMUR® Z	VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 6 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PHA0CLE7 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 7 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PHA0CLE8 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 8 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PHA0CLE9 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 9 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PRTLS021 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 1 CUELLO CORTO, STD. PRTLS022 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 2 CUELLO CORTO, STD. PRTLS023 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 3 CUELLO CORTO, STD. PRTLS024 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 4 CUELLO CORTO, STD. PRTLS025 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 5 CUELLO CORTO, STD. PRTLS026 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 6 CUELLO CORTO, STD. PRTLS027 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 7 CUELLO CORTO, STD. PRTLS028 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 8 CUELLO CORTO, STD. PRTLS029 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 9 CUELLO CORTO, STD. PRTLS030 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 10 CUELLO CORTO, STD. PRTLS031 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 11 CUELLO CORTO, STD. PRTLS032 PROFEMUR® TL
--	---	--

5-1



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.S.T.

	VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 7 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLS8 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 8 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLS9 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 9 CUELLO CORTO, STD. PHA0CLE1 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 1 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PHA0CLE2 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 2 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PHA0CLE3 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 3 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PHA0CLE4 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 4 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PHA0CLE5 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 5 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PHA0CLE6 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 6 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PHA0CLE7 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 7 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PHA0CLE8 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 8 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PHA0CLE9 PROFEMUR® Z VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 9 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PRTL021 PROFEMUR® TL	VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 12 CUELLO CORTO, STD. PRTLE021 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 1 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PRTLE022 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 2 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PRTLE023 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 3 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PRTLE024 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 4 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PRTLE025 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 5 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PRTLE026 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 6 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PRTLE027 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 7 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PRTLE028 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 8 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PRTLE029 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 9 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PRTLE030 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 10 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PRTLE031 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 11 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PRTLE032 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 12 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PLSS010 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 10 CUELLO CORTO
--	---	---

51



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S. N. M. S. T.

	<p>VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 1 CUELLO CORTO, STD. PRTLS022 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 2 CUELLO CORTO, STD. PRTLS023 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 3 CUELLO CORTO, STD. PRTLS024 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 4 CUELLO CORTO, STD. PRTLS025 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 5 CUELLO CORTO, STD. PRTLS026 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 6 CUELLO CORTO, STD. PRTLS027 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 7 CUELLO CORTO, STD. PRTLS028 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 8 CUELLO CORTO, STD. PRTLS029 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 9 CUELLO CORTO, STD. PRTLS030 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 10 CUELLO CORTO, STD. PRTLS031 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 11 CUELLO CORTO, STD. PRTLS032 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 12 CUELLO CORTO, STD. PRTLE021 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 1 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PRTLE022 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA 2 CUELLO CORTO, EXTENDIDO PRTLE023 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA</p>	<p>STD. PLSSS011 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 11 CUELLO CORTO STD. PLSSS012 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 12 CUELLO CORTO STD. PLSSS013 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 13 CUELLO CORTO STD. PLSSS014 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 14 CUELLO CORTO STD. PLSSS015 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 15 CUELLO CORTO STD. PLSSS016 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 16 CUELLO CORTO STD. PLSSS017 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 17 CUELLO CORTO STD. PLSSS018 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 18 CUELLO CORTO STD. PLSES010 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 10 CUELLO EXTRA</p>
--	---	---

E. A.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.A.T.

3	CUELLO CORTO, EXTENDIDO	PRTLE024 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA	CORTO PLSES011 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 11 CUELLO EXTRA CORTO
4	CUELLO CORTO, EXTENDIDO	PRTLE025 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA	PLSES012 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 12 CUELLO EXTRA CORTO
5	CUELLO CORTO, EXTENDIDO	PRTLE026 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA	PLSES013 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 13 CUELLO EXTRA CORTO
6	CUELLO CORTO, EXTENDIDO	PRTLE027 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA	PLSES014 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 14 CUELLO EXTRA CORTO
7	CUELLO CORTO, EXTENDIDO	PRTLE028 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA	
8	CUELLO CORTO, EXTENDIDO	PRTLE029 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA	INSTRUMENTAL
9	CUELLO CORTO, EXTENDIDO	PRTLE030 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA	CONSERVE 48021013 CONSERVE® SONDA PARA RETRACTOR ACETABULAR
10	CUELLO CORTO, EXTENDIDO	PRTLE031 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA	48031025 CONSERVE® PLUS ELEVADOR DE CUELLO FEMORAL INNOMED #7650
11	CUELLO CORTO, EXTENDIDO	PRTLE032 PROFEMUR® TL VÁSTAGO CLÁSICO, MEDIDA	48031026 CONSERVE® PLUS EJE P/SONDA CIRCULAR DE PRUEBA, 2" MÁS
12	CUELLO CORTO, EXTENDIDO	PLSSS010 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 10 CUELLO CORTO STD.	48031000 CONSERVE® PLUS GUÍA CENTRALIZACIÓN CLAVIJAS
		PLSSS011 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO,	48031001 CONSERVE® PLUS GONIÓMETRO 0
			48031003 CONSERVE® PLUS PIN RELOCATOR 0/REUBICADOR CLAVIJAS
			48030021 PORTA SONDA P/ESCARIADOR CILÍNDRICO, CHICA, 36 - 42

5 A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 11 CUELLO CORTO STD. PLSSS012 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 12 CUELLO CORTO STD. PLSSS013 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 13 CUELLO CORTO STD. PLSSS014 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 14 CUELLO CORTO STD. PLSSS015 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 15 CUELLO CORTO STD. PLSSS016 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 16 CUELLO CORTO STD. PLSSS017 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 17 CUELLO CORTO STD. PLSSS018 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 18 CUELLO CORTO STD. PLSES010 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 10 CUELLO EXTRA CORTO PLSES011 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO,	48030136 CONSERVE® PLUS SONDA P/ESCARIADOR CILÍNDRICO, 36MM 48030138 CONSERVE® PLUS SONDA P/ESCARIADOR CILÍNDRICO, 38MM 48030140 CONSERVE® PLUS SONDA P/ESCARIADOR CILÍNDRICO, 40MM 48030142 CONSERVE® PLUS SONDA P/ESCARIADOR CILÍNDRICO, 42MM 48030144 CONSERVE® PLUS SONDA P/ESCARIADOR CILÍNDRICO, 44MM 48030146 CONSERVE® PLUS SONDA P/ESCARIADOR CILÍNDRICO, 46MM 48030148 CONSERVE® PLUS SONDA P/ESCARIADOR CILÍNDRICO, 48MM 48030150 CONSERVE® PLUS SONDA P/ESCARIADOR CILÍNDRICO, 50MM 48030152 CONSERVE® PLUS SONDA P/ESCARIADOR CILÍNDRICO, 52MM 48030154 CONSERVE® PLUS SONDA P/ESCARIADOR CILÍNDRICO, 54MM 48030156 CONSERVE® PLUS SONDA ESCARIADOR CILÍNDRICO, 56MM 48031308 CONSERVE® PLUS CAN 8MM SPIGOT 0/SPIGOT CANULADO 48031357 CONSERVE® PLUS MOD REAM SHAFT 8.2MM HOLE/EJE ESCARIADOR MOD. ORIFICIO 8.2MM 48031136 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 36MM , CON ORIFICIO 8.2MM 48031138 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO,
--	--	---

52



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 11 CUELLO EXTRA CORTO PLSES012 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 12 CUELLO EXTRA CORTO PLSES013 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 13 CUELLO EXTRA CORTO PLSES014 PROFEMUR® RENAISSANCE® CLÁSICO, ABOCINADO/CAMPANA STD. MEDIDA 14 CUELLO EXTRA CORTO</p>	<p>38MM , CON ORIFICIO 8.2MM 48031140 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 40MM , CON ORIFICIO 8.2MM 48031142 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 42MM , CON ORIFICIO 8.2MM 48031144 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 44MM , CON ORIFICIO 8.2MM 48031146 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 46MM , CON ORIFICIO 8.2MM 48031148 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 48MM , CON ORIFICIO 8.2MM 48031150 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 50MM , CON ORIFICIO 8.2MM 48031152 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 52MM , CON ORIFICIO 8.2MM 48031154 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 54MM , CON ORIFICIO 8.2MM 48031156 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 56MM , CON ORIFICIO 8.2MM 48031158 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 58MM , CON ORIFICIO 8.2MM 48031160 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 60MM , CON ORIFICIO 8.2MM 48031200 CONSERVE® PLUS GUIDE TOWER 0/TORRE GUÍA 48031236 CONSERVE® PLUS GUÍA P/NIVEL DE CORTE CABEZA FEMORAL, 36MM 48031238 CONSERVE® PLUS GUÍA P/NIVEL DE CORTE CABEZA FEMORAL, 38MM 48031240 CONSERVE® PLUS GUÍA P/NIVEL DE CORTE CABEZA FEMORAL, 40MM</p>
--	---	---

JA



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

		48031242 CONSERVE® PLUS GUÍA P/NIVEL DE CORTE CABEZA FEMORAL, 42MM 48031244 CONSERVE® PLUS GUÍA P/NIVEL DE CORTE CABEZA FEMORAL, 44MM 48031246 CONSERVE® PLUS GUÍA P/NIVEL DE CORTE CABEZA FEMORAL, 46MM 48031248 CONSERVE® PLUS GUÍA P/NIVEL DE CORTE CABEZA FEMORAL, 48MM 48031250 CONSERVE® PLUS GUÍA P/NIVEL DE CORTE CABEZA FEMORAL, 50MM 48031252 CONSERVE® PLUS GUÍA P/NIVEL DE CORTE CABEZA FEMORAL, 52MM 48031254 CONSERVE® PLUS GUÍA P/NIVEL DE CORTE CABEZA FEMORAL, 54MM 48031256 CONSERVE® PLUS GUÍA P/NIVEL DE CORTE CABEZA FEMORAL, 56MM 48031017 CONSERVE® PLUS CLAVIJA FIJACIÓN 0 K0002015 ADVANCE® PIN INSERTER 0/INTRODUCTOR DE CLAVIJAS 48031018 CONSERVE® PLUS BROCA DE INICIO P/TALLO 48031016 CONSERVE® PLUS ESCARIAODR DE TALLO, 0 48031022 CONSERVE® PLUS GUÍA EN BISEL, CHICA, TAMAÑO 36-46MM 48031023 CONSERVE® PLUS GUÍA EN BISEL, GRANDE, TAMAÑO 48-56MM 48031336 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR EN BISEL, 36MM , ORIFICIO 8.2MM 48031338 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR EN BISEL, 38MM , ORIFICIO 8.2MM
--	--	---

EA



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		<p>48031340 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR EN BISEL, 40MM , ORIFICIO 8.2MM</p> <p>48031342 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR EN BISEL, 42MM , ORIFICIO 8.2MM</p> <p>48031344 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR EN BISEL, 44MM , ORIFICIO 8.2MM</p> <p>48031346 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR EN BISEL, 46MM , ORIFICIO 8.2MM</p> <p>48031348 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR EN BISEL, 48MM , ORIFICIO 8.2MM</p> <p>48031350 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR EN BISEL, 50MM , ORIFICIO 8.2MM</p> <p>48031352 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR EN BISEL, 52MM , ORIFICIO 8.2MM</p> <p>48031354 CONSERVE® PLUS CHAMFR REAMER 54MM 8.2MM HOLE/ESCARIADOR EN BISEL, 54MM, ORIFICIO 8.2MM</p> <p>48031356 CONSERVE® PLUS CHAMFR REAMER 54MM 8.2MM HOLE/ESCARIADOR EN BISEL, 56MM, ORIFICIO 8.2MM</p> <p>48PT0036 CONSERVE® PLUS INSTRUMENTAL P/ CABEZA DE PRUEBA PLÁSTICA, TAMAÑO 36MM</p> <p>48PT0038 CONSERVE® PLUS INSTRUMENTAL P/ CABEZA DE PRUEBA PLÁSTICA, TAMAÑO 38MM</p> <p>48PT0040 CONSERVE® PLUS INSTRUMENTAL P/ CABEZA DE PRUEBA PLÁSTICA, TAMAÑO 40MM</p> <p>48PT0042 CONSERVE® PLUS INSTRUMENTAL P/ CABEZA DE</p>
--	--	--

E A



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		<p>PRUEBA PLÁSTICA, TAMAÑO 42MM 48PT0044 CONSERVE® PLUS INSTRUMENTAL P/ CABEZA DE PRUEBA PLÁSTICA, TAMAÑO 44MM 48PT0046 CONSERVE® PLUS INSTRUMENTAL P/ CABEZA DE PRUEBA PLÁSTICA, TAMAÑO 46MM 48PT0048 CONSERVE® PLUS INSTRUMENTAL P/ CABEZA DE PRUEBA PLÁSTICA, TAMAÑO 48MM 48PT0050 CONSERVE® PLUS INSTRUMENTAL P/ CABEZA DE PRUEBA PLÁSTICA, TAMAÑO 50MM 48PT0052 CONSERVE® PLUS INSTRUMENTAL P/ CABEZA DE PRUEBA PLÁSTICA, TAMAÑO 52MM 48PT0054 CONSERVE® PLUS INSTRUMENTAL P/ CABEZA DE PRUEBA PLÁSTICA, TAMAÑO 54MM 48PT0056 CONSERVE® PLUS INSTRUMENTAL P/ CABEZA DE PRUEBA PLÁSTICA, TAMAÑO 56MM 48031015 CONSERVE® PLUS PUNTA DE SUCCIÓN P/TALLO 4803LT01 CONSERVE® PLUS LESS TROCHANTER SUCTION TIP/PUNTA SUCCIÓN SIN TROCANTER 5803TRA1 CONSERVE® PLUS G3 FEMORAL /INSTRUMENTAL I 48030022 PORTA SONDA P/ESCARIADOR CILÍNDRICO, GRANDE, 44 - 60 51561814 STEINMANN PINS STYLE 4 PLAIN SHANK TROCAR POINT/PUNTA</p>
--	--	---

E-1



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		TROCAR EN ESPIGA P/CLAVIJAS STEINMANN 5803TRA2 CONSERVE® PLUS G3 FEMORAL /INSTRUMENTAL II 48LP36ID CONSERVE® IMPACTOR/EXTRACTOR PERFIL BAJO, 36ID 48LP38ID CONSERVE® IMPACTOR/EXTRACTOR PERFIL BAJO, 38ID 48LP40ID CONSERVE® IMPACTOR/EXTRACTOR PERFIL BAJO, 40ID 48LP42ID CONSERVE® LOW PROFILE IMPACTOR / EXTRACTOR 42 ID 48LP44ID CONSERVE® IMPACTOR/EXTRACTOR PERFIL BAJO, 44ID 48LP46ID CONSERVE® IMPACTOR/EXTRACTOR PERFIL BAJO, 46ID 48LP48ID CONSERVE® IMPACTOR/EXTRACTOR PERFIL BAJO, 48ID 48LP50ID CONSERVE® IMPACTOR/EXTRACTOR PERFIL BAJO, 50ID 48LP52ID CONSERVE® IMPACTOR/EXTRACTOR PERFIL BAJO, 52ID 48LP54ID CONSERVE® IMPACTOR/EXTRACTOR PERFIL BAJO, 54ID 48LP56ID CONSERVE® IMPACTOR/EXTRACTOR PERFIL BAJO, 56ID PPW38094 PROFEMUR® ASA MANDRIL DISTAL, NUEVO DISEÑO +20MM 48031010 CONSERVE® PLUS GUÍA DE ALINEACIÓN, SNAP ON, 15 GRADOS 5803TRA3 CONSERVE® PLUS
--	--	--

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.A.T.

		G3 ACETABULAR /INSTRUMENTAL I 5803TRA4 CONSERVE® PLUS G3 ACETABULAR /INSTRUMENTAL II 41103600 CONSERVE® TOTAL, CABEZA DE PRUEBA, 36MM 41103800 CONSERVE® TOTAL, CABEZA DE PRUEBA, 38MM 41104000 CONSERVE® TOTAL, CABEZA DE PRUEBA, 40MM 41104200 CONSERVE® TOTAL, CABEZA DE PRUEBA, 42MM 41104400 CONSERVE® TOTAL, CABEZA DE PRUEBA, 44MM 41104600 CONSERVE® TOTAL, CABEZA DE PRUEBA, 46MM 41104800 CONSERVE® TOTAL, CABEZA DE PRUEBA, 48MM 41105000 CONSERVE® TOTAL, CABEZA DE PRUEBA, 50MM 41105200 CONSERVE® TOTAL, CABEZA DE PRUEBA, 52MM 41105400 CONSERVE® TOTAL, CABEZA DE PRUEBA, 54MM 41105600 CONSERVE® TOTAL, CABEZA DE PRUEBA, 56MM 48031020 CONSERVE® PLUS ADAPTADOR P/IMPACTOR, SECUNDARIO 4110TSS3 CONSERVE® TOTAL, MANGUITO DE PRUEBA, CABEZA -3.5MM PARA PERFECTA®
--	--	---

EA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.A.T.

	4110TSM0 CONSERVE® TOTAL, MANGUITO DE PRUEBA, CABEZA 0MM PARA PERFECTA® 4110TSL3 CONSERVE® TOTAL, MANGUITO DE PRUEBA , CABEZA +3.5MM PARA PERFECTA® APA0TSS3 CONSERVE® TOTAL MANGUITO DE PRUEBA, CABEZA CORTA, PROFEMUR® APA0TSM0 CONSERVE® TOTAL MANGUITO DE PRUEBA, CABEZA MEDIANA, PROFEMUR® APA0TSL3 CONSERVE® TOTAL MANGUITO DE PRUEBA , CABEZA ALARGADA PROFEMUR® 4802BFHI IMPACTOR CABEZA FEMORAL CONSERVE® TOTAL BFH® 48023642 CONSERVE® PLUS ACETÁBULO DE PRUEBA, 36MM ID 42MM OD 48023844 CONSERVE® PLUS ACETÁBULO DE PRUEBA, 38MM ID 44MM OD 48024046 CONSERVE® PLUS ACETÁBULO DE PRUEBA, 40MM ID 46MM OD 48024248 CONSERVE® PLUS ACETÁBULO DE PRUEBA, 42MM ID 48MM OD 48024450 CONSERVE® PLUS ACETÁBULO DE PRUEBA, 44MM ID 50MM OD 48024652 CONSERVE® PLUS ACETÁBULO DE PRUEBA, 46MM ID 52MM OD 48024854 CONSERVE® PLUS ACETÁBULO DE PRUEBA, 48MM ID 54MM OD 48025056 CONSERVE® PLUS
--	--

ETA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.

		ACETÁBULO DE PRUEBA, 50MM ID 56MM OD 48025258 CONSERVE® PLUS ACETÁBULO DE PRUEBA, 52MM ID 58MM OD 48025460 CONSERVE® PLUS ACETÁBULO DE PRUEBA, 54MM ID 60MM OD 48025662 CONSERVE® PLUS ACETÁBULO DE PRUEBA, 56MM ID 62MM OD 48025664 CONSERVE® PLUS ACETÁBULO DE PRUEBA, 56MM ID 64MM OD 4802TRCH CONSERVE® , ASA P/ACETÁBULO DE PRUEBA 0 5803TRA5 CONSERVE® PLUS G3 CÓTILO DE PRUEBAS ACETABULAR , INSTRUMENTAL 4802BH50 CONSERVE® PLUS GANCHO ÓSEO, GANCHO ÓSEO (sic) 50mm 48021012 CONSERVE® ELEVADOR DE CUELLO FEMORAL 48031021 CONSERVE® PLUS SONDA ANILLO DE PRUEBA 18410213 ORTHOLOC® CALIBRE P/MEDICIÓN CABEZA PATELAR/FEMORAL 48030357 CONSERVE® PLUS ASA ESCARIADOR MODULAR 48030036 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 36MM 48030038 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 38MM 48030040 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 40MM 48030042 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 42MM 48030044 CONSERVE® PLUS
--	--	---

FA



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		ESCARIADOR CILÍNDRICO, 44MM 48030046 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 46MM 48030048 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 48MM 48030050 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 50MM 48030052 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 52MM 48030054 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 54MM 48030056 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 56MM 48030058 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 58MM 48030060 CONSERVE® PLUS ESCARIADOR CILÍNDRICO, 60MM 48031014 CONSERVE® PLUS TOWER GUÍA DE ALINEACIÓN, 18770140 ORTHOLOC® EMPUJA CLAVIJA, 0 48021003 CONSERVE® CHAMFER GUÍA P/ESCARIADOR 48030336 CONSERVE® PLUS CANASTA P/ESCARIADOR ANGULO EN BISEL, 36MM 48030338 CONSERVE® PLUS CHAMFER ANGLE REAMER BASKET 38MM/CANASTA ESCARIADOR ÁNGULO EN BISEL 48030340 CONSERVE® PLUS CANASTA P/ESCARIADOR ANGULO EN BISEL, 40MM 48030342 CONSERVE® PLUS
--	--	---

Handwritten signature or initials



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		CANASTA P/ESCARIADOR ANGULO EN BISEL, 42MM 48030344 CONSERVE® PLUS CANASTA P/ESCARIADOR ANGULO EN BISEL, 44MM 48030346 CONSERVE® PLUS CANASTA P/ESCARIADOR ANGULO EN BISEL, 46MM 48030348 CONSERVE® PLUS CANASTA P/ESCARIADOR ANGULO EN BISEL, 48MM 48030350 CONSERVE® PLUS CANASTA P/ESCARIADOR ANGULO EN BISEL, 50MM 48030352 CONSERVE® PLUS CANASTA ESCARIADO ÁNGULO BISEL, 52MM 48030356 CONSERVE® PLUS CANASTA ESCARIADO ÁNGULO BISEL, 56MM 48020736 CONSERVE® PROBADOR DE FÉMUR, TAMAÑO 36 48020738 CONSERVE® PROBADOR DE FÉMUR, TAMAÑO 38 48020740 CONSERVE® PROBADOR DE FÉMUR, TAMAÑO 40 48020742 CONSERVE® PROBADOR DE FÉMUR, TAMAÑO 42 48020744 CONSERVE® PROBADOR DE FÉMUR, TAMAÑO 44 48020746 CONSERVE® PROBADOR DE FÉMUR, TAMAÑO 46 48020748 CONSERVE® PROBADOR DE FÉMUR, TAMAÑO 48 48020752 CONSERVE® PROBADOR FEMORAL, TAMAÑO 52 48030019 CONSERVE® PLUS
--	--	---

TA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Población e Institutos
 S.A.S.

	SONDA P/ESCARIADOR CILÍNDRICO, CUERPO PEQUEÑO 48030020 CONSERVE® PLUS SONDA P/ESCARIADOR CILÍNDRICO, CUERPO GRANDE 48020750 CONSERVE® PROBADOR DE FÉMUR, TAMAÑO 50 48020754 CONSERVE® PROBADOR FEMORAL, TAMAÑO 54 48020756 CONSERVE® PROBADOR FEMORAL, TAMAÑO 56 48CH36ID ASA CURVA, PUNTA IMPACTOR, 36ID 0 48CH38ID ASA CURVA, PUNTA IMPACTOR, 38ID 0 48CH40ID ASA CURVA, PUNTA IMPACTOR, 40ID 0 48CH42ID ASA CURVA, PUNTA IMPACTOR, 42ID 0 48CH44ID ASA CURVA, PUNTA IMPACTOR, 44ID 0 48CH46ID ASA CURVA, PUNTA IMPACTOR, 46ID 0 48CH48ID ASA CURVA, PUNTA IMPACTOR, 48ID 0 48CH50ID ASA CURVA, PUNTA IMPACTOR, 50ID 0 48CH52ID ASA CURVA, PUNTA IMPACTOR, 52ID 0 48CH54ID ASA CURVA, PUNTA IMPACTOR, 54ID 0 48CH56ID ASA CURVA, PUNTA IMPACTOR, 56ID 0 48CH58ID ASA CURVA, PUNTA IMPACTOR, 58ID 0 48CH60ID ASA CURVA, PUNTA IMPACTOR, 60ID 0 48CH1HAN CONSERVE® , ASA CURVA P/IMPACTOR 8400CP03 LINEAGE®, GUÍA ALINEACIÓN ACETABULAR
--	---

Handwritten signature or initials



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		3803TRA1 CONSERVE® CURVED BFH® CASE 0/CAJA 18410135 DESTORNILLADOR 48SI36ID CONSERVE® SAMUELSON PUNTA P/IMPACTOR, 36 ID 48SI38ID CONSERVE® SAMUELSON PUNTA P/IMPACTOR, 38 ID 48SI40ID CONSERVE® SAMUELSON PUNTA P/IMPACTOR, 40 ID 48SI42ID CONSERVE® SAMUELSON PUNTA P/IMPACTOR, 42 ID 48SI44ID CONSERVE® SAMUELSON PUNTA P/IMPACTOR, 44 ID 48SI46ID CONSERVE® SAMUELSON PUNTA P/IMPACTOR, 46 ID 48SI48ID CONSERVE® SAMUELSON PUNTA P/IMPACTOR, 48 ID 48SI50ID CONSERVE® SAMUELSON PUNTA P/IMPACTOR, 50 ID 48SI52ID CONSERVE® SAMUELSON PUNTA P/IMPACTOR, 52 ID 48SI54ID CONSERVE® SAMUELSON PUNTA P/IMPACTOR, 54 ID 48SI56ID CONSERVE® SAMUELSON PUNTA P/IMPACTOR, 56 ID 38SI1HAN CONSERVE® SAMUELSON, ASA P/IMPACTOR 38SIAG01 CONSERVE® SAMUELSON, GUÍA P/ABDUCCIÓN 38SITRAY CONSERVE® BANDEJA SAMUELSON 0 48021048 CONSERVE® PLUS
--	--	--

C.A



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

		BAYONETA IMPACTOR, TAMAÑO 48mm 48021050 CONSERVE® PLUS BAYONETA IMPACTOR, TAMAÑO 50mm 48021052 CONSERVE® PLUS BAYONETA IMPACTOR, TAMAÑO 52mm 48021054 CONSERVE® PLUS BAYONETA IMPACTOR, TAMAÑO 54mm 48021056 CONSERVE® PLUS BAYONETA IMPACTOR, TAMAÑO 56mm 48021058 CONSERVE® PLUS BAYONETA IMPACTOR, TAMAÑO 58mm 48021100 CONSERVE® PLUS IMPACTOR DE ACETÁBULO 0 4802AG00 CONSERVE® PLUS 15 DEGREE FIXED/ GUÍA DE ALINEACIÓN, FIJA, 15 GRADOS 4802WR00 CONSERVE® PLUS LLAVE EN BAYONETA 48021102 CONSERVE® PLUS IMPACTOR CABEZA 0 20102015 BANDEJA UNIVERSAL, 9 REV A 0 20102017 WRIGHT CHOICE, ALFOMBRILLA UNIVERSAL, 0 48021046 CONSERVE® PLUS BAYONETA P/IMPACTOR, TAMAÑO 46mm 20010440 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 40MM 20010441 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 41mm 20010442 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 42mm 20010443 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO
--	--	--

Handwritten signature or mark.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		PRECIMED®, 43mm
		20010444 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO
		PRECIMED®, 44mm
		20010445 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO
		PRECIMED®, 45mm
		20010446 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO
		PRECIMED®, 46mm
		20010447 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO
		PRECIMED®, 47mm
		20010448 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO
		PRECIMED®, 48mm
		20010449 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO
		PRECIMED®, 49mm
		20010450 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO
		PRECIMED®, 50mm
		20010451 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO
		PRECIMED®, 51mm
		20010452 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO
		PRECIMED®, 52mm
		20010453 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO
		PRECIMED®, 53mm
		20010454 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO
		PRECIMED®, 54mm
		20010455 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO
		PRECIMED®, 55mm
		20010456 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO
		PRECIMED®, 56mm
		20010457 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO
		PRECIMED®, 57mm
		20010458 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO

E.A.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.A.T.*

		PRECIMED®, 58mm 20010459 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 59mm 20010460 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 60mm 20010461 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 61mm 20010462 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 62mm 20010463 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 63mm 20010464 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 64mm 20010465 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 65mm 20010466 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 66mm 20010467 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 67mm 20010468 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 68mm 20010400 ASA P/ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED® 84002001 LINEAGE® ACETABULAR BOTTOM INSERT 62-80 (1mm)/INSERTO ACETABULAR INFERIOR 84002003 LINEAGE® CAJA ACETABULAR EXTERNA CON CUBIERTA 84002004 LINEAGE® INSERTO SUPERIOR ACETABULAR 40-61 (1mm) CON ADAPTADOR P/ASA
--	--	--

Handwritten signature or mark



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

		4400DA0100 HALL/HUDSON, ASA P/ADAPTADOR, PUNTA P/ADAPTADOR 48021060 CONSERVE® PLUS BAYONETA IMPACTOR, TAMAÑO 60mm 48021062 CONSERVE® PLUS BAYONETA IMPACTOR, TAMAÑO 62mm 48021064 CONSERVE® PLUS BAYONETA IMPACTOR, TAMAÑO 64mm LINEAGE - DURAMER 20010400 ASA P/ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED® 20010441 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 41mm 20010442 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 42mm 20010443 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 43mm 20010444 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 44mm 20010445 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 45mm 20010446 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 46mm 20010447 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 47mm 20010448 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 48mm 20010449 BESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 49mm 20010450 ESCARIADOR
--	--	---

Handwritten signature or initials



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

		ACETABULAR, PRECIMED®, 50mm 20010451	DISEÑO ESCARIADOR
		ACETABULAR, PRECIMED®, 51mm 20010452	DISEÑO ESCARIADOR
		ACETABULAR, PRECIMED®, 52mm 20010453	DISEÑO ESCARIADOR
		ACETABULAR, PRECIMED®, 53mm 20010454	DISEÑO ESCARIADOR
		ACETABULAR, PRECIMED®, 54mm 20010455	DISEÑO ESCARIADOR
		ACETABULAR, PRECIMED®, 55mm 20010456	DISEÑO ESCARIADOR
		ACETABULAR, PRECIMED®, 56mm 20010457	DISEÑO ESCARIADOR
		ACETABULAR, PRECIMED®, 57mm 20010458	DISEÑO ESCARIADOR
		ACETABULAR, PRECIMED®, 58mm 20010459	DISEÑO ESCARIADOR
		ACETABULAR, PRECIMED®, 59mm 20010460	DISEÑO ESCARIADOR
		ACETABULAR, PRECIMED®, 60mm 20010461	DISEÑO ESCARIADOR
		ACETABULAR, PRECIMED®, 61mm 20010462	DISEÑO ESCARIADOR
		ACETABULAR, PRECIMED®, 62mm 20010463	DISEÑO ESCARIADOR
		ACETABULAR, PRECIMED®, 63mm 20010464	DISEÑO ESCARIADOR
		ACETABULAR, PRECIMED®, 64mm 20010465	DISEÑO ESCARIADOR

5 2



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 65mm 20010466 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 66mm 20010467 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 67mm 20010468 ESCARIADOR
		ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 68mm 4400DA0100 HALL/HUDSON, ASA P/ADAPTADOR, PUNTA P/ADAPTADOR
		84002001 LINEAGE® ACETABULAR BOTTOM INSERT 62-80 (1mm)/INSERTO ACETABULAR INFERIOR
		84002003 LINEAGE® CAJA ACETABULAR EXTERNA CON CUBIERTA
		84002004 LINEAGE® INSERTO SUPERIOR ACETABULAR 40-61 (1mm) CON ADAPTADOR P/ASA
		20010440 ESCARIADOR ACETABULAR, DISEÑO PRECIMED®, 40MM
		4820SH0000 INTERSEAL®, PORTA TORNILLO 0
		8400DG01 LINEAGE®, GUÍA DE BROCA DE ÁNGULO FIJO, 3.2mm/4.5mm
		8400DG03 GUÍA DE BROCA AJUSTABLE 0
		8400FD01 EJE MODULAR, FLEXIBLE, TORNILLO DE BROCA
		8400FD02 BROCA FLEXIBLE, 3.2 X 25MM , UNA PIEZA
		8400FD03 BROCA FLEXIBLE, 4.5 X 25MM , UNA PIEZA
		8400FD04 BROCA FLEXIBLE, 3.2 X 15MM 0
		8400FD05 BROCA FLEXIBLE,

Handwritten signature or mark



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		3.2 X 25MM 0 8400FD06 BROCA FLEXIBLE, 3.2 X 35MM 0 8400FD07 BROCA FLEXIBLE, 4.5 X 15MM 0 8400FD08 BROCA FLEXIBLE, 4.5 X 25MM 0 8400FD09 BROCA FLEXIBLE, 4.5 X 35MM 0 8400FD10 BROCA FLEXIBLE, 4.5 X 45MM 0 8400SD02 DESTORNILLADOR CABEZA HEXAGONAL, BROCA MODULAR 8400SD03 UNIVERSAL JOINT , EJE IMPULSOR HEXAGONAL, 3.5MM, CON AJUSTE STRYKER 8400SD04 BALL & SOCKET 3.5MM HEX DRVR SHFT STR SOL W/STRYK/IMPULSOR HEXAGONAL 8400SD06 HEX DRIVER SHAFT W/STRYKR STRAIGHT SOLID 3.5MM/IMPULSOR HEXAGONAL CON STRYKER SÓLIDO, RECTO 8400SG01 SONDA DE PROFUNDIDA PARA TORNILLO, AJUSTABLE 8400ST01MACHO ROSCADO MODULAR, 6.5 X 15MM 8400ST02 MACHO ROSCADO MODULAR, 6.5 X 25MM 8400ST03 MACHO ROSCADO MODULAR, 6.5 X 35MM 84003000 LINEAGE®, CAJA INSTRUMENTAL P/TORNILLO ACETABULAR 2002QCRH QUICK CONNECT, ASA P/TRINQUETE 0 PROFEMUR APA11102 PROFEMUR® CUELLO DE PRUEBA CORTO, RECTO, CON RADIO OPAQUE
--	--	--

Handwritten signature



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		RADEL APA11104 PROFEMUR® CUELLO DE PRUEBA LARGO, RECTO, CON RADEL RADIO- OPACO APA11112 PROFEMUR® A/R VAR/VAL 1 CUELLO DE PRUEBA CORTO, CON RADEL RADIO-OPACO APA11114 PROFEMUR® A/R VAR/VAL 1 CUELLO DE PRUEBA LARGO, CON RADEL RADIO-OPACO APA11122 PROFEMUR® A/R VAR/VAL 2 CUELLO DE PRUEBA CORTO, CON RADEL RADIO-OPACO APA11124 PROFEMUR® A/R VAR/VAL 2 CUELLO DE PRUEBA LARGO, CON RADEL RADIO-OPACO APA11132 PROFEMUR® A/R 8 GRADOS, CUELLO DE PRUEBA CORTO, CON RADEL RADIO- OPACO APA11134 PROFEMUR® A/R 8 GRADOS, CUELLO DE PRUEBA LARGO, CON RADEL RADIO- OPACO APA11142 PROFEMUR® A/R 15 GRADOS, CUELLO DE PRUEBA CORTO, CON RADEL RADIO-OPACO APA11144 PROFEMUR® A/R 15 GRADOS, CUELLO DE PRUEBA LARGO, CON RADEL RADIO-OPACO APA11152 PROFEMUR® VAR/VAL 8 GRADOS, CUELLO DE PRUEBA CORTO, CON RADEL RADIO-OPACO APA11154 PROFEMUR® VAR/VAL 8 GRADOS, CUELLO DE PRUEBA LARGO, CON RADEL RADIO-OPACO
--	--	--

JA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

		<p>APA02121 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA, 28mm CORTA - 3.5mm</p> <p>APA02122 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA, 28mm MEDIUM +0</p> <p>APA02123 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA, 28mm LARGA +3.5mm</p> <p>APA02124 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA, 28mm EXTRA LARGA +7mm</p> <p>APA02125 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA, 28mm XX-LARGA +10.5mm</p> <p>APA02151 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA, 32MM CORTA - 3.5MM</p> <p>APA02152 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA, 32MM MEDIUM +0MM</p> <p>APA02153 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA, 32MM LARGA +3.5MM</p> <p>APA02154 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA, 32MM X-LARGA +7MM</p> <p>APA02142 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA, 36MM S (-3.5)</p> <p>APA02144 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA, 36MM M (0)</p> <p>APA02146 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA, 36MM L (+3.5)</p> <p>APA02148 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA, 36MM XL (+7)</p> <p>PRGITRAY PROFEMUR® S & TAPERED TRAY & LID GENERAL</p> <p>INSTRUMENT/INSTRUMENTAL GENERAL, BANDEJA AHUSADA Y CUBIERTA</p> <p>APA04750 PROFEMUR® E, ESCARIADOR INICIAL 0</p> <p>K0001016 ADVANCE® QUICK DISCONNECT (sic)</p>
--	--	---

JA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. I.

		<p>PRFS0450 PROFEMUR® S & TAPERED STEM BOX CHISEL/CINCEL AHUSADO P/TALLO APA04241 PROFEMUR®, ASA MANDRIL MIS 0 APA04244 VARILLA REFERENCIA CON ASA P/MANDRIL RECTO PRFS0461 PROFEMUR® INTRODUTOR DE VÁSTAGO IN LINE, ROSCADO PRFS0460 PROFEMUR® INTRODUTOR DE DESTORNILLADOR 4400FI0000 IMPACTOR CABEZA FEMORAL 0 APA01120 PROFEMUR® NECK INSERTER 0/INSERTO CUELLO PRFS0458 PROFEMUR® INSERTO DE PRUEBA DE CABEZA E IMPLANTE APA00001 HEAD / NECK EXTRACTOR 0/EXTRACTOR CUELLO/CABEZA PRFS0459 PROFEMUR® IMPACTOR DE CABEZA, ÁNGULO DERECHO APA00003 ADAPTATER 12/14 FOR HEAD / NECK EXTRACTOR/ADAPTADOR P/EXTRACTOR CABEZA/CUELLO APA00005 CARDAN SPANNER HEX.14 FOR HEAD / NECK EXTRACTOR/EXTRACTOR DE CUELLO/CABEZA CON SPANNER HEXAGONAL APA00006 TOMMY BAR FOR CARDAN SPANNER HEX.14/BARRA TOMMY P/SPANNER HEXAGONAL PPR67688 EXTRACTOR PARA TALLO "ANCA-FIT™" 0 PRFS0462 PROFEMUR® EJE</p>
--	--	---

Handwritten signature or mark



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. I.

		<p>P/EXTRACCIÓN DE MANDRIL PP275400 DESTORNILLADOR HEXAGONAL, 0 PREXTRAY PROFEMUR® S & TAPERED TRAY & LID EXTRACTION/BANDEJA Y CUBIERTA P/EXTRACCIÓN APA01070 ESCOFINA INICIAL P/TALLO, CEMENTLESS "PROFEMUR® Z" APA01072 ESCOFINA P/TALLO MODULAR, SIN CEMENTO, TAMAÑO 1 "PROFEMUR® Z" APA01074 ESCOFINA P/TALLO MODULAR, SIN CEMENTO, TAMAÑO 2 "PROFEMUR® Z" APA01076 ESCOFINA P/TALLO MODULAR, SIN CEMENTO, TAMAÑO 3 "PROFEMUR® Z" APA01078 ESCOFINA P/TALLO MODULAR, SIN CEMENTO, TAMAÑO 4 "PROFEMUR® Z" APA01080 ESCOFINA P/TALLO MODULAR, SIN CEMENTO, TAMAÑO 5 "PROFEMUR® Z" APA01082 ESCOFINA P/TALLO MODULAR, SIN CEMENTO, TAMAÑO 6 "PROFEMUR® Z" APA01084 ESCOFINA P/TALLO MODULAR, SIN CEMENTO, TAMAÑO 7 "PROFEMUR® Z" APA01086 ESCOFINA P/TALLO MODULAR, SIN CEMENTO, TAMAÑO 8 "PROFEMUR® Z" APA01088 ESCOFINA P/TALLO MODULAR, SIN CEMENTO, TAMAÑO 9 "PROFEMUR® Z" APA01114 STEM GUIDE IMPACTOR "PROFEMUR® Z"/IMPACTOR GUÍA ALLO PP275400 DESTORNILLADOR HEXAGONAL, 0 PPF60200 IMPACTOR FINAL P/TALLO TMF 0 PPR67702 IMPACTOR</p>
--	--	--

5-1



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.P.

		P/CABEZA 0 PPR67704 INITIAL CHISEL ANCA-FIT™, 0/CINCEL DE INICIO PPF63011 BARRA TOMMY PARA ESCOFINA PROXIMAL, ASA PPW36296 ESCOFINA CON MARTILLO DESLIZABLE , TAMAÑO 10 47990074 PROFEMUR® Z ESCOFINA, BANDEJA Y CUBIERTA 0 47990075 PROFEMUR® Z & E BANDEJA INSTRUMENTAL Y CUBIERTA GENERAL CORE APA08001 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 1 0 APA08002 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 2 0 APA08003 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 3 0 APA08004 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 4 0 APA08005 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 5 0 APA08006 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 6 0 APA08007 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 7 0 APA08008 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 8 0 APA08009 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 9 0 SLBROHAN ASA P/IMPACTOR MANDRIL RANURADO,
--	--	---

Handwritten signature or mark



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.

		PRTLBR04 PROFEMUR® TL , MANDRIL, TAMAÑO 4 0 PRTLBR05 PROFEMUR® TL , MANDRIL, TAMAÑO 5 0 PRTLBR06 PROFEMUR® TL , MANDRIL, TAMAÑO 6 0 PRTLBR07 PROFEMUR® TL , MANDRIL, TAMAÑO 7 0 PRTLBR08 PROFEMUR® TL , MANDRIL, TAMAÑO 8 0 PRTLBR09 PROFEMUR® TL , MANDRIL, TAMAÑO 9 0 PRTLBR10 PROFEMUR® TL , MANDRIL, TAMAÑO 10 0 PRTLBR11 PROFEMUR® TL , MANDRIL, TAMAÑO 11 0 PRTLBR12 PROFEMUR® TL , MANDRIL, TAMAÑO 12 0 PRTL00BT PROFEMUR® TL BANDEJA P/MANDRIL 0 BROHANTL ASA T P/MANDRIL PPA30091 ESCOFINA, SISTEMA NEUMÁTICO CON ASA 0 APA04243 ASA RECTA DE MANDRIL PARA SISTEMA NEUMÁTICO PRTLXR15 PROFEMUR® TL TEMPLATE 15% MAGNIFICATION/TEMPLATE PTLXR15 PROFEMUR® TL Classic Short Necks/CUELLOS CORTOS CLÁSICOS PTLXR15 PROFEMUR® TL Classic Long Necks/CUELLOS LARGOS CLÁSICOS PRGLBR01 PROFEMUR® GLADIATOR® , MANDRIL, TAMAÑO 1 PRGLBR02 PROFEMUR® GLADIATOR® , MANDRIL, TAMAÑO 2 PRGLBR03 PROFEMUR® GLADIATOR® , MANDRIL, TAMAÑO 3
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		PRGLBR04 GLADIATOR® TAMAÑO 4	PROFEMUR® , MANDRIL,
		PRGLBR05 GLADIATOR® TAMAÑO 5	PROFEMUR® , MANDRIL,
		PRGLBR06 GLADIATOR® TAMAÑO 6	PROFEMUR® , MANDRIL,
		PRGLBR07 GLADIATOR® TAMAÑO 7	PROFEMUR® , MANDRIL,
		PRGLBR08 GLADIATOR® TAMAÑO 8	PROFEMUR® , MANDRIL,
		PRGLBR09 GLADIATOR® TAMAÑO 9	PROFEMUR® , MANDRIL,
		PRGLBR10 GLADIATOR® TAMAÑO 10	PROFEMUR® , MANDRIL,
		PRGLBR11 GLADIATOR® TAMAÑO 11	PROFEMUR® , MANDRIL,
		PRGLBR12 GLADIATOR® TAMAÑO 12	PROFEMUR® , MANDRIL,
		PRGLREAM GLADIATOR®, DE NICIO	PROFEMUR® ESCARIADOR
		PRGLSTBR GLADIATOR®, DE INICIO	PROFEMUR® MANDRIL DE
		PRGLTRA1 GLADIATOR®, BROHANTL ASA T P/ APA12102	PROFEMUR® BANDEJA 0 MANDRIL
		PROFEMUR®CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, , CORTO	DE 1 , RECTO
		APA12104 PROFEMUR®CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, , LARGO	DE 1 , RECTO
		APA12112	

Handwritten signature or mark.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.A.T.

		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 1 A/R VAR / VAL , CORTO APA12114
		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 1 A/R VAR / VAL , LARGO APA12122
		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 2 A/R VAR / VAL , CORTO APA12124
		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 2 A/R VAR / VAL , LARGO APA12132
		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 8 GRADOS A/R , CORTO APA12134
		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 8 GRADOS A/R , LARGO APA12142
		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 15 GRADOS A/R , CORTO APA12144
		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 15 GRADOS A/R , LARGO APA12152
		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 8 GRADOS VAR / VAL , CORTO APA12154
		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 8 GRADOS VAR / VAL , LARGO PRCLSTMN GLADIATOR@ CLASSIC STANDARD/CUELLO DE PRUEBA METÁLICO PRMNCAD1 PROFEMUR@ METAL TRIAL NECK CADDY/CADDY P/CUELLO DE

Handwritten signature or mark



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		PRUEBA METÁLICO PRCLEXMN GLADIATOR® CLASSIC EXTENDED TRIAL NECK METAL/CUELLO DE PRUEBA CLÁSICO EXTENDIDO, METÁLICO 4700CP0000 PERFECTA® POWER, CEPILLO CALCÁNEO PRGLPOST BARRA CENTRALIZADORA P/TALLO GLADIATOR® PRGLTRA2 PROFEMUR® GLADIATOR®, BANDEJA 2 0 PRCMSTIN PROFEMUR® INSERTO DE TALLO, CEMENTADO, PARA TALLO CEMENTADO PPR67702 IMPACTOR P/CABEZA 0 20070050 INTRODUTOR MODULAR P/CUELLO PRGLTRA3 PROFEMUR® GLADIATOR®, BANDEJA 3 PPF60200 IMPACTOR FINAL P/TALLO TMF 0 PRGPXR15 PROFEMUR® GLADIATOR® PS X-RAY TEMPLATE 15% MAGNIFICATION/TEMPLATE RAYOS X PRGLXR15 PROFEMUR® GLADIATOR® PLASMA CLASSIC X-RAY TEMPLATE 15% MAG/TEMPLATE MAGNIF. RAYOS X PRGHXR15 PROFEMUR® GLADIATOR® HA X-RAY TEMPLATE 15% MAGNIFICATION/TEMPLATE RAYOS X PRGCXR15 PROFEMUR® GLADIATOR® CEMENT X-RAY TEMPLATE 15% MAGNIF/TEMPLATE RAYOS X PROLSB01 PROFEMUR® L
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

		MANDRIL RANURADO ,
		MEDIDA/TALLA 1
		PROLSB02 PROFEMUR® L
		MANDRIL RANURADO ,
		MEDIDA/TALLA 2
		PROLSB03 PROFEMUR® L
		MANDRIL RANURADO ,
		MEDIDA/TALLA 3
		PROLSB04 PROFEMUR® L
		MANDRIL RANURADO ,
		MEDIDA/TALLA 4
		PROLSB05 PROFEMUR® L
		MANDRIL RANURADO ,
		MEDIDA/TALLA 5
		PROLSB06 PROFEMUR® L
		MANDRIL RANURADO ,
		MEDIDA/TALLA 6
		PROLSB07 PROFEMUR® L
		MANDRIL RANURADO ,
		MEDIDA/TALLA 7
		PROLSB08 PROFEMUR® L
		MANDRIL RANURADO ,
		MEDIDA/TALLA 8
		PROLSB09 PROFEMUR® L
		MANDRIL RANURADO ,
		MEDIDA/TALLA 9
		PROLSB10 PROFEMUR® L
		MANDRIL RANURADO ,
		MEDIDA/TALLA 10
		PROLSB11 PROFEMUR® L
		MANDRIL RANURADO ,
		MEDIDA/TALLA 11
		PRL0TR01 PROFEMUR® L
		TRAY 1/BANDEJA
		CRL1CL01E X-RAY FOR
		FEMORAL STEM "PROFEMUR®
		L" (EN INGLÉS)/RAYOS X,
		TALLO FEMORAL (sic)
		APA01662 CUELLO DE PRUEBA
		METÁLICO NEUTRALCORTO
		CORTO
		APA01664 CUELLO DE PRUEBA
		METÁLICO NEUTRAL LARGO
		APA02112 CABEZA FEMORAL
		DE PRUEBA, 22mm MEDIUM



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		+0 APA02113 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA, 22mm LARGO +3.5mm APA04240 NUEVA ESCOFINA PROXIMAL, ASA CON MARCACIÓN ACTUALIZADA PARA MERCADO EEUU APA04248 PROFEMUR® ESCOFINA CUERPO PROXIMAL, XCHICO APA04252 PROFEMUR® ESCOFINA CUERPO PROXIMAL, CHICO APA04254 PROFEMUR® ESCOFINA CUERPO PROXIMAL, STD 1 APA04256 PROFEMUR® ESCOFINA CUERPO PROXIMAL, STD 2 APA04258 PROFEMUR® ESCOFINA CUERPO PROXIMAL, STD 3 APA04260 PROFEMUR® ESCOFINA CUERPO PROXIMAL, STD 4 APA04262 PROFEMUR® ESCOFINA CUERPO PROXIMAL, LARGE APA04302 ALESOIR D'EBAUCHE T CHICO PROFEMUR® R (VERSION USA) (sic) APA04304 ESCARIADOR PARA BIFURCACIÓN, STD. 1 0 APA04306 ESCARIADOR PARA BIFURCACIÓN, STD. 2 0 APA04308 ESCARIADOR PARA BIFURCACIÓN, STD. 3 0 APA04310 ESCARIADOR PARA BIFURCACIÓN, STD. 4 0 APA04312 ESCARIADOR P/BIFURCACIÓN, GRANDE 0 APA04340 MANDRIL DISTAL AHUSADO, CORTO,
--	--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	"PROFEMUR® R" 135MM SZ 10 V.US APA04342 MANDRIL DISTAL AHUSADO, CORTO, "PROFEMUR® R" 135MM SZ 11 V.US APA04344 MANDRIL DISTAL AHUSADO, CORTO, "PROFEMUR® R" 135MM SZ 12 V.US APA04346 MANDRIL DISTAL AHUSADO, CORTO, "PROFEMUR® R" 135MM SZ 13 V.US APA04348 MANDRIL DISTAL AHUSADO, CORTO, "PROFEMUR® R" 135MM SZ 14 V.US APA04350 MANDRIL DISTAL AHUSADO, CORTO, "PROFEMUR® R" 135MM SZ 15 V.US APA04352 MANDRIL DISTAL AHUSADO, CORTO, "PROFEMUR® R" 135MM SZ 16 V.US APA04354 MANDRIL DISTAL AHUSADO, CORTO, "PROFEMUR® R" 135MM SZ 17 V.US APA04356 MANDRIL DISTAL AHUSADO, CORTO, "PROFEMUR® R" 135MM SZ 18 V.US APA04358 MANDRIL DISTAL AHUSADO, CORTO, "PROFEMUR® R" 135MM SZ 19 V.US APA04360 MANDRIL DISTAL AHUSADO, CORTO, "PROFEMUR® R" 135MM SZ 20 V.US APA04362 MANDRIL DISTAL AHUSADO, CORTO, "PROFEMUR® R" 135MM SZ
--	---

E-1



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	21 V.US APA04364 MANDRIL DISTAL AHUSADO, CORTO, "PROFEMUR® R" 135MM SZ
	22 V.US APA04370 MANDRIL DISTAL AHUSADO, MED., "PROFEMUR® R" 175MM SZ
	10 V.US APA04372 MANDRIL DISTAL AHUSADO, MED., "PROFEMUR® R" 175MM SZ
	11 V.US APA04374 MANDRIL DISTAL AHUSADO, MED., "PROFEMUR® R" 175MM SZ
	12 V.US APA04376 MANDRIL DISTAL AHUSADO, MED., "PROFEMUR® R" 175MM SZ
	13 V.US APA04378 MANDRIL DISTAL AHUSADO, MED., "PROFEMUR® R" 175MM SZ
	14 V.US APA04380 MANDRIL DISTAL AHUSADO, MED., "PROFEMUR® R" 175MM SZ
	15 V.US APA04382 MANDRIL DISTAL AHUSADO, MED., "PROFEMUR® R" 175MM SZ
	16 V.US APA04384 MANDRIL DISTAL AHUSADO, MED., "PROFEMUR® R" 175MM SZ
	17 V.US APA04386 MANDRIL DISTAL AHUSADO, MED., "PROFEMUR® R" 175MM SZ
	18 V.US APA04388 MANDRIL DISTAL AHUSADO, MED., "PROFEMUR® R" 175MM SZ
	19 V.US

Handwritten signature or initials



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		APA04390 MANDRIL DISTAL AHUSADO, MED., "PROFEMUR® R" 175MM SZ 20 V.US APA04392 MANDRIL DISTAL AHUSADO, MED., "PROFEMUR® R" 175MM SZ 21 V.US APA04394 MANDRIL DISTAL AHUSADO, MED., "PROFEMUR® R" 175MM SZ 22 V.US APA04400 MANDRIL DISTAL AHUSADO, LARGO, "PROFEMUR® R" 215MM SZ 10 V.US APA04402 MANDRIL DISTAL AHUSADO, LARGO, "PROFEMUR® R" 215MM SZ 11 V.US APA04404 MANDRIL DISTAL AHUSADO, LARGO, "PROFEMUR® R" 215MM SZ 12 V.US APA04406 MANDRIL DISTAL AHUSADO, LARGO, "PROFEMUR® R" 215MM SZ 13 V.US APA04408 MANDRIL DISTAL AHUSADO, LARGO, "PROFEMUR® R" 215MM SZ 14 V.US APA04410 MANDRIL DISTAL AHUSADO, LARGO, "PROFEMUR® R" 215MM SZ 15 V.US APA04412 MANDRIL DISTAL AHUSADO, LARGO, "PROFEMUR® R" 215MM SZ 16 V.US APA04414 MANDRIL DISTAL AHUSADO, LARGO, "PROFEMUR® R" 215MM SZ 17 V.US APA04416 MANDRIL DISTAL
--	--	---

← A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

		PPW36300 ESCOFINA P/EXTRACTOR DE TALLO DISTAL, TAMAÑO 10 PPW36302 ESCOFINA P/ESCARIADOR INICIAL DE CANAL, TAMAÑO 10 PPW38077 ESCOFINA TORNILLO DE AJUSTE, TAMAÑO 10 PPW38094 PROFEMUR® ASA MANDRIL DISTAL, NUEVO DISEÑO +20MM PPW38158 ADAPTADOR DISTAL DE PRUEBA/MANDRIL PPW38159 PROFEMUR® THREADED SEPARATOR ROD NEW/VARILLA SEPARADORA ROSCADA, NUEVA PPW38161 PROFEMUR® SEPARADOR PROX/DISTAL PARA CUERPO CHICO,STD, GRANDE PPW38163 PROFEMUR® SEPARADOR PROX/DISTAL PARA CUERPO X-CHICO PPW38165 REGLA 400mm 0 PPW38166 IMPACTOR/EXTRACOR TALLO, CUERPO PROXIMAL XCHICO PRR0TR01 PROFEMUR® R GENERAL TRAY 1/BANDEJA GENERAL PRR0TR02 PROFEMUR® R GENERAL TRAY 2/BANEJA GENERAL PRR0TR03 PROFEMUR® R TRAY 3 SHORT DISTAL BROACHES/BANDEJA 3, MANDRILES DISTALES CORTOS PRR0TR04 PROFEMUR® R TRAY 4 MEDIUM DISTAL BROACHES/BANDEJA 4, MANDRILES DISTALES MEDIANOS
--	--	---

Handwritten signature



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. F.

	PRR0TR05 PROFEMUR® R TRAY 5 MEDIUM DISTAL BROACHES/BANDEJA 5, MANDRILES DISTALES MEDIANOS PRR0TR06 PROFEMUR® R TRAY 6 LONG DISTAL BROACHES/BANDEJA 6, MANDRILES DISTALES LARGOS PRR0TR07 PROFEMUR® R TRAY 7 LONG DISTAL BROACHES/BANDEJA 7, MANDRILES DISTALES LARGOS SLBROHAN ASA P/IMPACTOR MANDRIL RANURADO, PROFEMUR® 20070013 PATH®, ADAPTADOR DE ACETÁBULO, ROSCADO 0 20070015 PATH®, GUÍA COLOCACIÓN PORTAL 0 20070023 PATH® IMPACTOR DE INSERTO METÁLICO / CERÁMICO, 28MM ID 20070024 PATH® IMPACTOR DE INSERTO METÁLICO / CERÁMICO, 32MM ID 20070025 PATH® IMPACTOR DE INSERTO METÁLICO / CERÁMICO, 36MM ID 20070037 ODYSSEY®, ASA P/ESCARIADO 45 GRADOS, 0 20070038 AUFRANC, ELEVADOR 0 20070039 AUFRANC, ELEVADOR/CORTO, RETRACTOR P/CADERA 0 20070040 AUFRANC, ELEVADOR/LARGO, RETRACTOR P/CADERA 0 20070041 RONGEUR DENTADO 0 20070042 ODYSSEY®,
--	---

→ 1



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

		GANCHO ÓSEO 0 20070043 RONGEUR DOBLE ACCIÓN X-LONG 0 20070045 DISPOSITIVO SUJECIÓN UNIVERSAL CON ASA T, 0 20070050 INTRODUTOR MODULAR P/CUELLO 20070051 SCHANZ SCREW SELF DRILL BIT 4MM /sic), BROCA p/TORNILLO 20070052 PUNZÓN REDONDO P/CALCÁNEO, CHICO 0 20070053 PUNZÓN REDONDO P/CALCÁNEO, MEDIANO 0 20070054 PUNZÓN REDONDO P/CALCÁNEO, GRANDE 0 20070057 SCHANZ SCREW SELF DRILL BIT 4MM STERILE/BROCA ESTÉRIL 20070110 PATH®, ADAPTADOR P/ ESCARIADOR ACETABULAR 20070116 PATH®, TRÓCAR ROMO 0 20070120 PATH® SHORT DRIVE SHAFT CANNULA/CÁNULA EJE IMPULSOR 20070136 ODYSSEY® RT IMPACTOR ANGULAR DE ACETÁBULO CON GUÍA ALINEACIÓN 20070146 PATH®, COPA ACETABULAR DE PRUEBA, 46MM 0 20071001 RETRACTOR ROMANELLI 0 20071002 SUPERPATH™ DESTORNILLADOR P/ARTICULACIONES, DE ESFERA 20071003 SUPERPATH™ DESTORNILLADOR RECTO 20071004 RETRACTOR ZELPI
--	--	---

Handwritten signature or mark



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. F.

		0
		20071005 SUPERPATH™, TUBO P/BROCA 0
		20071006 SUPERPATH™, CURETA P/CALCÁNEO 0
		20071007 SUPERPATH™, BROCA ROSCADA, ESTÉRIL
		20071008 SONDA P/ACANALADOR FEMORAL CON CALIBRACIÓN
		20071009 SUPERPATH™, ASA P/ALINEACIÓN ACETABULAR
		20071010 SUPERPATH™, IMPACTOR DE ACETÁBULO 0
		20071011 SUPERPATH™, GANCHO ÓSEO 0
		20071012 SUPERPATH™, TUBO P/BROCA, LARGO 0
		20071059 IMPULSOR P/LIMITACIÓN TORQUE, BOQUILLA HEXAGONAL
		20072121 LLAVE 7/8", EXTREMO ABIERTO 0
		20073003 RETRACTOR AGUDO HOHMANN 17MM 0
		20073005 RETRACTOR ANCHO HOHMANN 8MM 0
		20073009 ODYSSEY®, IMPACTOR CUELLO MODULAR OFFSET
		20073010 SONDA P/CANAL FEMORAL, 0
		20073011 OSTÉOTOMO DE METAL, CON CUBIERTA 0
		20073061 EXTRACTOR DE INSERTO P/PRUEBA 0
		20073111 RETRACTOR HOHMANN ROMO, REVERSO
		20073112 IMPACT HOHMANN SMALL ODYSSEY® PHASE 3/IMPACTOR PEQUEÑO
		20073113 IMPACT HOHMANN LARGE ODYSSEY® PHASE 3/IMPACTOR GRANDE
		20073114 IMPACT BLUNT

Handwritten signature or initials



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		HOHMANN ODYSSEY® PHASE 3/IMPACTOR ROMO 20073115 ODYSSEY® PHASE 3, RETRACTOR IMPACTOR 20073214 ODYSSEY® INSTR SUPERCAP® TRAY1 EMPTY/BANDEJA 1 INSTRUMENTAL VACÍA 20073215 ODYSSEY® INSTR SUPERCAP® TRAY2 EMPTY/BANDEJA 2 INSTRUMENTAL VACÍA 20080001 MARTILLO GOMA P/EXTRACCIÓN CABEZA PARA ODYSSEY® PHASE III 33330080 DYNASTY® GUÍA DE ALINEACIÓN, ASA RECTA, 20 GRADOS 80000010 TRANSCEND®, ASA P/IMPACTOR DE INSERTO 2002QCRH QUICK CONNECT, ASA P/TRINQUETE 0 2007ST20 PATH® DRIVE SHAFT CANNULA STERILE/CÁNULA EJE IMPULSOR ESTÉRIL APA04750 PROFEMUR® E, ESCARIADOR INICIAL 0 APA12102 PROFEMUR®CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 1 , RECTO , CORTO APA12104 PROFEMUR®CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 1 , RECTO , LARGO APA12112 PROFEMUR®CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 1 A/R VAR / VAL , CORTO APA12114 PROFEMUR®CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 1 A/R VAR / VAL , LARGO APA12122
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 2 A/R VAR / VAL , CORTO APA12124
		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 2 A/R VAR / VAL , LARGO APA12132
		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 8 GRADOS A/R , CORTO APA12134
		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 8 GRADOS A/R , LARGO APA12142
		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 15 GRADOS A/R , CORTO APA12144
		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 15 GRADOS A/R , LARGO APA12152
		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 8 GRADOS VAR / VAL , CORTO APA12154
		PROFEMUR@CUELLO DE PRUEBA METÁLICO, 8 GRADOS VAR / VAL , LARGO PRMNCAD1 PROFEMUR@ METAL TRIAL NECK CADDY/CADDY P/CUELLO DE PRUEBA METÁLICO
		PRR00080 PROFEMUR@ ESCARIADOR FEMORAL , TAMAÑO 8.0
		PTMR0001 PROFEMUR@ TAP METAPHYSEAL REAM 0 (sic)/ESCARIADOR AHUSADO 20070048 PORTA CESTA P/ESCARIADOR, 0
		20070011 PATH®, EJE DE ESCARIADOR 0

ETA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. I.

		4820SH0000 INTERSEAL®, PORTA TORNILLO 0 SPTHTRA5 SUPERPATH™ BANDEJA INSTRUMENTAL 5 0 SPTHTRA6 SUPERPATH™ BANDEJA INSTRUMENTAL 6 0 PLRB0009 PROFEMUR® RENAISSANCE®, MANDRIL DE INICIO PLRB0010 PROFEMUR® RENAISSANCE® MANDRIL REDUCIDO, TAMAÑO 10 PLRB0011 PROFEMUR® RENAISSANCE® MANDRIL REDUCIDO, TAMAÑO 11 PLRB0012 PROFEMUR® RENAISSANCE® MANDRIL REDUCIDO, TAMAÑO 12 PLRB0013 PROFEMUR® RENAISSANCE® MANDRIL REDUCIDO, TAMAÑO 13 PLRB0014 PROFEMUR® RENAISSANCE® MANDRIL REDUCIDO, TAMAÑO 14 PLRB0015 PROFEMUR® RENAISSANCE® MANDRIL REDUCIDO, TAMAÑO 15 PLRB0016 PROFEMUR® RENAISSANCE® MANDRIL REDUCIDO, TAMAÑO 16 PLRB0017 PROFEMUR® RENAISSANCE® MANDRIL REDUCIDO, TAMAÑO 17 PLRB0018 PROFEMUR® RENAISSANCE® MANDRIL REDUCIDO, TAMAÑO 18 PLSB0010 PROFEMUR® RENAISSANCE® MANDRIL STD., TAMAÑO 10 PLSB0011 PROFEMUR® RENAISSANCE® MANDRIL STD., TAMAÑO 11 PLSB0012 PROFEMUR® RENAISSANCE® MANDRIL STD., TAMAÑO 12
--	--	--

ST 1



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.T.

		PLSB0013	PROFEMUR®
		RENAISSANCE®	MANDRIL
		STD., TAMAÑO 13	
		PLSB0014	PROFEMUR®
		RENAISSANCE®	MANDRIL
		STD., TAMAÑO 14	
		PLSB0015	PROFEMUR®
		RENAISSANCE®	MANDRIL
		STD., TAMAÑO 15	
		PLSB0016	PROFEMUR®
		RENAISSANCE®	MANDRIL
		STD., TAMAÑO 16	
		PLSB0017	PROFEMUR®
		RENAISSANCE®	MANDRIL
		STD., TAMAÑO 17	
		PLSB0018	PROFEMUR®
		RENAISSANCE®	MANDRIL
		STD., TAMAÑO 18	
		PTRG0410	PROFEMUR® GUÍA
		DE RESECCIÓN P/CUELLO	
		PRZBTRA1	ZONE-
		PROFEMUR®,	BANDEJA
		P/MANDRIL 0	
		PSSR1118	PROFEMUR®
		RENAISSANCE®	ESCARIADOR
		PROXIMAL, TAMAÑO S 10-18	
		PRR00085	PROFEMUR®
		ESCARIADOR	FEMORAL ,
		TAMAÑO 8.5	
		PRR00090	PROFEMUR®
		ESCARIADOR	FEMORAL ,
		TAMAÑO 9.0	
		PRR00095	PROFEMUR®
		ESCARIADOR	FEMORAL ,
		TAMAÑO 9.5	
		PRR00100	PROFEMUR®
		ESCARIADOR	FEMORAL ,
		TAMAÑO 10.0	
		PRR00105	PROFEMUR®
		ESCARIADOR	FEMORAL ,
		TAMAÑO 10.5	
		PRR00110	PROFEMUR®
		ESCARIADOR	FEMORAL ,
		TAMAÑO 11.0	
		PRR00115	PROFEMUR®

[Handwritten signature]



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S. N. M. S. T.

		ESCARIADOR TAMAÑO 11.5 PRR00120	FEMORAL , PROFEMUR®
		ESCARIADOR TAMAÑO 12.0 PRR00125	FEMORAL , PROFEMUR®
		ESCARIADOR TAMAÑO 12.5 PRR00130	FEMORAL , PROFEMUR®
		ESCARIADOR TAMAÑO 13.0 PRR00135	FEMORAL , PROFEMUR®
		ESCARIADOR TAMAÑO 13.5 PRR00140	FEMORAL , PROFEMUR®
		ESCARIADOR TAMAÑO 14.0 PRR00145	FEMORAL , PROFEMUR®
		ESCARIADOR TAMAÑO 14.5 PRR00150	FEMORAL , PROFEMUR®
		ESCARIADOR TAMAÑO 15.0 PRR00155	FEMORAL , PROFEMUR®
		ESCARIADOR TAMAÑO 15.5 PRR00160	FEMORAL , PROFEMUR®
		ESCARIADOR TAMAÑO 16.0 PRR00165	FEMORAL , PROFEMUR®
		ESCARIADOR TAMAÑO 16.5 PRR00170	FEMORAL , PROFEMUR®
		ESCARIADOR TAMAÑO 17.0 PRR00175	FEMORAL , PROFEMUR®
		ESCARIADOR TAMAÑO 17.5 PRR00180	FEMORAL , PROFEMUR®
		ESCARIADOR TAMAÑO 18.0 PRZNTA1	FEMORAL , ZONE-
		PROFEMUR®, ESCARIADOR 0	BANDEJA
		APA08001	PROFEMUR® Z ,

Handwritten signature



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.I.

	MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 1 0 APA08002 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 2 0 APA08003 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 3 0 APA08004 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 4 0 APA08005 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 5 0 APA08006 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 6 0 APA08007 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 7 0 APA08008 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 8 0 APA08009 PROFEMUR® Z , MANDRIL CON RANURA, TAMAÑO 9 0 20070071 PROFEMUR® Z BANDEJA P/MANDRIL TALLE 1, 0 SPTHRM40 ESCARIADOR ACETABULAR, 40MM, HEX. SPTHRM41 ESCARIADOR ACETABULAR, 41MM, HEX. SPTHRM42 ESCARIADOR ACETABULAR, 42MM, HEX. SPTHRM43 ESCARIADOR ACETABULAR, 43MM, HEX. SPTHRM44 ESCARIADOR ACETABULAR, 44MM, HEX. SPTHRM45 ESCARIADOR ACETABULAR, 45MM, HEX. SPTHRM46 ESCARIADOR ACETABULAR, 46MM, HEX. SPTHRM47 ESCARIADOR ACETABULAR, 47MM, HEX.
--	--

J. A.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

		SPTHRM48 ESCARIADOR ACETABULAR, 48MM, HEX. SPTHRM49 ESCARIADOR ACETABULAR, 49MM, HEX. SPTHRM50 ESCARIADOR ACETABULAR, 50MM, HEX. SPTHRM51 ESCARIADOR ACETABULAR, 51MM, HEX. SPTHRM52 ESCARIADOR ACETABULAR, 52MM, HEX. SPTHRM53 ESCARIADOR ACETABULAR, 53MM, HEX. SPTHRM54 ESCARIADOR ACETABULAR, 54MM, HEX. SPTHRM55 ESCARIADOR ACETABULAR, 55MM, HEX. SPTHRM56 ESCARIADOR ACETABULAR, 56MM, HEX. SPTHRM57 ESCARIADOR ACETABULAR, 57MM, HEX. SPTHRM58 ESCARIADOR ACETABULAR, 58MM, HEX. SPTHRM59 ESCARIADOR ACETABULAR, 59MM, HEX. SPTHRM60 ESCARIADOR ACETABULAR, 60MM, HEX. SPTHRM61 ESCARIADOR ACETABULAR, 61MM, HEX. SPTHRM62 ESCARIADOR ACETABULAR, 62MM, HEX. SPTHRM63 ESCARIADOR ACETABULAR, 63MM, HEX. SPTHRM64 ESCARIADOR ACETABULAR, 64MM, HEX. SPTHRM65 ESCARIADOR ACETABULAR, 65MM, HEX. SPTHRM66 ESCARIADOR ACETABULAR 66MM HEX SPTHRM67 ESCARIADOR ACETABULAR 67MM HEX SPTHRM68 ESCARIADOR ACETABULAR 68MM HEX PERFECTA - DURAMER
--	--	--

E.A.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S. N. M. S. T.

		18056093 ESTERILIZACIÓN INSTRUMENTAL FEMORAL	BANDEJA VÀSTAGO
		20050012 MANDRIL STANDARD, DENTADO,	PERFECTA®, CON PLETINA TOTALMENTE MEDIDA/TALLA 12
		20050015 MANDRIL STANDARD, DENTADO,	PERFECTA®, CON PLETINA TOTALMENTE MEDIDA/TALLA 15
		20050018 MANDRIL STANDARD, DENTADO,	PERFECTA®, CON PLETINA TOTALMENTE MEDIDA/TALLA 18
		20050105 MANDRIL STANDARD, DENTADO,	PERFECTA®, CON PLETINA TOTALMENTE MEDIDA/TALLA 10.5
		20050127 MANDRIL STANDARD, DENTADO,	PERFECTA®, CON PLETINA TOTALMENTE MEDIDA/TALLA 12.7
		20050135 MANDRIL STANDARD, DENTADO,	PERFECTA®, CON PLETINA TOTALMENTE MEDIDA/TALLA 13.5
		20050142 MANDRIL STANDARD, DENTADO,	PERFECTA®, CON PLETINA TOTALMENTE MEDIDA/TALLA 14.2
		20050165 MANDRIL STANDARD, DENTADO,	PERFECTA®, CON PLETINA TOTALMENTE MEDIDA/TALLA 16.5
		20060009 MANDRIL TOTALMENTE MEDIDA/TALLA	PERFECTA®, CON PLETINA ROJA, DENTADO, 9

ET. A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		20060012 PERFECTA®, MANDRIL CON PLETINA ROJA, TOTALMENTE DENTADO, MEDIDA/TALLA 12 20060015 PERFECTA®, MANDRIL CON PLETINA ROJA, TOTALMENTE DENTADO, MEDIDA/TALLA 15 20060105 PERFECTA®, MANDRIL CON PLETINA ROJA, TOTALMENTE DENTADO, MEDIDA/TALLA 10.5 20060127 PERFECTA®, MANDRIL CON PLETINA ROJA, TOTALMENTE DENTADO, MEDIDA/TALLA 12.7 20060135 PERFECTA®, MANDRIL CON PLETINA ROJA, TOTALMENTE DENTADO, MEDIDA/TALLA 13.5 20060142 PERFECTA®, MANDRIL CON PLETINA ROJA, TOTALMENTE DENTADO, MEDIDA/TALLA 14.2 41102639 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 39MM OD 41102640 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 40MM OD 41102641 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 41MM OD 41102642 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 42MM OD 41102643 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 43MM OD 41102644 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 44MM OD 41102645 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 45MM OD
--	--	---

← 2



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

	<p>41102646 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 46MM OD</p> <p>41102647 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 47MM OD</p> <p>41102648 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 48MM OD</p> <p>41102649 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 49MM OD</p> <p>41102650 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 50MM OD</p> <p>41102651 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 51MM OD</p> <p>41102652 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 52MM OD</p> <p>41102653 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 53MM OD</p> <p>41102654 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 54MM OD</p> <p>41102655 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 55MM OD</p> <p>41102656 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 56MM OD</p> <p>41102658 SONDA BIPOLAR DE PRUEBA, 26MM ID X 58MM OD</p> <p>42900000 PERFECTA®, TRAY TWIST LATCH LID WRIGHT EXPRESS® KIT/KIT DE CUBIERTA CON CERRADURA PARA BANDEJA</p> <p>42900009 PERFECTA®, PDA BANDEJA ESTERILIZACIÓN CALCAR</p> <p>42900010 PERFECTA®, PDA</p>
--	--

E. A.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.A.T.

		CUBIERTA BANDEJA ESTERILIZACIÓN CALCAR 42900011 CUBIERTA DE REEMPLAZO PARA BANDEJA DE SONDAS/MEDIDORES DE CANAL PERFECTA® 42900020 PERFECTA®, BANDEJA ESTÉRIL P/MEDIDORES DE CANAL, CON TAPA 42900030 PERFECTA®, BANDEJA AUXILIAR ESTÉRIL CON TAPA 42900040 PERFECTA®, RMR BANDEJA ESTÉRIL 42900050 PERFECTA®, MANDRIL/PRUEBA 42900060 PERFECTA®, INSTRUMENTAL GENERAL 46112600 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 26MM + 0MM 46112602 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 26MM + 2.5MM 46112605 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 26MM + 5MM 46112607 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 26MM + 7.5MM 46112610 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 26MM + 10MM 46112612 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 26MM + 12.5MM 46112615 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 26MM + 15MM 46112800 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 28MM + 0MM 46112802 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA
--	--	--

Handwritten signature or mark



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.S.T.

	Y CUELLO, 28MM + 2.5MM 46112805 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 28MM + 5MM 46112807 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 28MM + 7.5MM 46112810 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 28MM + 10MM 46112812 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 28MM + 12.5MM 46112815 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 28MM + 15MM 46113200 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 32MM + 0MM 46113202 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 32MM + 2.5MM 46113205 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 32MM + 5MM 46113207 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 32MM + 7.5MM 46113210 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 32MM + 10MM 46113212 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 32MM + 12.5MM 46113215 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 32MM + 15MM 46132800 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 28MM + 0MM 46132802 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 28MM + 2.5MM 46132805 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA
--	---

Handwritten signature or initials



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

	Y CUELLO, 28MM + 5MM 46132807 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 28MM + 7.5MM 46132810 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 28MM + 10MM 46132812 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 28MM + 12.5MM 46132815 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO, 28MM + 15MM 47200970 PERFECTA®, ESCOFINA DENTADA/PRUEBA VOLADIZO STANDARD, MEDIDA/TALLA 9.7 47201050 PERFECTA®, ESCOFINA DENTADA/PRUEBA VOLADIZO STANDARD, MEDIDA/TALLA 10.5 47201120 PERFECTA®, ESCOFINA DENTADA/PRUEBA VOLADIZO STANDARD, MEDIDA/TALLA 11.2 47201200 PERFECTA®, ESCOFINA DENTADA/PRUEBA VOLADIZO STANDARD, MEDIDA/TALLA 12.0 47201270 PERFECTA®, ESCOFINA DENTADA/PRUEBA VOLADIZO STANDARD, MEDIDA/TALLA 12.7 47201350 PERFECTA®, ESCOFINA DENTADA/PRUEBA VOLADIZO STANDARD, MEDIDA/TALLA 13.5 47201420 PERFECTA®, ESCOFINA DENTADA/PRUEBA VOLADIZO STANDARD, MEDIDA/TALLA 14.2 47201500 PERFECTA®, ESCOFINA DENTADA/PRUEBA VOLADIZO STANDARD, MEDIDA/TALLA 15.0
--	--

E. A.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.A.T.

	47201650 PERFECTA®, ESCOFINA DENTADA/PRUEBA VOLADIZO STANDARD, MEDIDA/TALLA 16.5 47201800 PERFECTA®, ESCOFINA DENTADA/PRUEBA VOLADIZO STANDARD, MEDIDA/TALLA 18.0 47871500 PERFECTA®, CUERPO MODULAR DE PRUEBA, MEDIDA/TALLA 15.0 47871800 PERFECTA®, CUERPO MODULAR DE PRUEBA, MEDIDATALLA 18.0 47881350 PERFECTA®, VASTAGO MODULAR ARQUEADO DE PRUEBA, MEDIDA/TALLA 13.5 X 220MM 47881500 PERFECTA®, VASTAGO MODULAR ARQUEADO DE PRUEBA, MEDIDA/TALLA 15.0 X 225MM 47881800 PERFECTA®, VASTAGO MODULAR ARQUEADO DE PRUEBA, MEDIDA/TALLA 18.5 X 235MM 47891200 PERFECTA®, VASTAGO MODULAR RECTO DE PRUEBA, MEDIDA/TALLA 12.0 X 190MM 47891350 PERFECTA®, VASTAGO MODULAR RECTO DE PRUEBA, MEDIDA/TALLA 13.5 X 195MM 47891500 PERFECTA®, VASTAGO MODULAR RECTO DE PRUEBA, MEDIDA/TALLA 15.0 X 200MM 47891650 PERFECTA®, VASTAGO MODULAR RECTO DE PRUEBA, MEDIDA/TALLA 16.5 X 205MM 47891800 PERFECTA®, VASTAGO MODULAR RECTO DE PRUEBA, MEDIDA/TALLA
--	--

ET 1



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	18.0 X 205MM 47931050 PERFECTA®, PDA CALCAR TRL/CALCAR DE PRUEBA 47931200 PERFECTA®, PDA CALCAR DE PRUEBA, MEDIDA/TALLA 12.0 47931350 PERFECTA®, PDA CALCAR DE PRUEBA, MEDIDA/TALLA 13.5 47931500 PERFECTA®, PDA CALCAR DE PRUEBA, MEDIDA/TALLA 15.0 47950001 PERFECTA®, PDA STOP P/PRUEBA, MEDIDA/TALLA 10.5 \ 12.0 47950002 PERFECTA®, PDA STOP P/CALCAR 47950003 PERFECTA®, PDA STOP P/CALCAR 47990006 EXTEND®, BANDEJA ESCARIADOR CON TAPA 47990007 BASE DE BANDEJA P/ESCARIADOR VERTICAL UNIVERSAL 60030000 INTRODUTOR DE RESTRICTOR DE CEMENTO 1700XR15 XRAY OVERLAY, BIPOLAR, 15% MAGNIFICATION/AMPLIACION ES 1808G001 SONDA DE DIÁMETRO P/ESCARIADOR FEMORAL 1808R070 EXTEND®, ESCARIADOR FEMORAL, 7.0MM 1808R075 EXTEND®, ESCARIADOR FEMORAL, 7.5MM 1808R080 EXTEND®, ESCARIADOR FEMORAL, 8.0MM 1808R085 EXTEND®,
--	--

E. A.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		ESCARIADOR 8.5MM	FEMORAL,
		1808R090	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 9.0MM	FEMORAL,
		1808R095	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 9.5MM	FEMORAL,
		1808R100	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 10.0MM	FEMORAL,
		1808R105	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 10.5MM	FEMORAL,
		1808R110	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 11.0MM	FEMORAL,
		1808R115	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 11.5MM	FEMORAL,
		1808R120	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 12.0MM	FEMORAL,
		1808R125	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 12.5MM	FEMORAL,
		1808R130	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 13.0MM	FEMORAL,
		1808R135	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 13.5MM	FEMORAL,
		1808R140	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 14.0MM	FEMORAL,
		1808R145	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 14.5MM	FEMORAL,
		1808R150	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 15.0MM	FEMORAL,
		1808R155	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 15.5MM	FEMORAL,
		1808R160	EXTEND® ,

EA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

		ESCARIADOR 16.0MM	FEMORAL,
		1808R165	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 16.5MM	FEMORAL,
		1808R170	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 17.0MM	FEMORAL,
		1808R175	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 17.5MM	FEMORAL,
		1808R180	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 18.0MM	FEMORAL,
		1808R185	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 18.5MM	FEMORAL,
		1808R190	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 19.0MM	FEMORAL,
		1808R195	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 19.5MM	FEMORAL,
		1808R200	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 20.0MM	FEMORAL,
		1808R205	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 20.5MM	FEMORAL,
		1808R210	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 21.0MM	FEMORAL,
		1808R215	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 21.5MM	FEMORAL,
		1808R220	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 22.0MM	FEMORAL,
		1808R225	EXTEND® ,
		ESCARIADOR 22.5MM	FEMORAL,
		1809R175	ESCARIADOR PARA CANAL CILÍNDRICO, PUNTA QUICK CONNECT, 17.5MM
		1809R180	ESCARIADOR PARA

E. A.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. F.

		CANAL CILÍNDRICO, PUNTA QUICK CONNECT, 18.0MM 1809R185 ESCARIADOR PARA CANAL CILÍNDRICO, PUNTA QUICK CONNECT, 18.5MM 1809R190 ESCARIADOR PARA CANAL CILÍNDRICO, PUNTA QUICK CONNECT, 19.0MM 1809R195 ESCARIADOR PARA CANAL CILÍNDRICO, PUNTA QUICK CONNECT, 19.5MM 1809R200 ESCARIADOR PARA CANAL CILÍNDRICO, PUNTA QUICK CONNECT, 20.0MM 1809R205 ESCARIADOR PARA CANAL CILÍNDRICO, PUNTA QUICK CONNECT, 20.5MM 4700CG18 SONDA PARA CANAL, MEDIDA/TALLA 18MM 4700CG19 SONDA PARA CANAL, MEDIDA/TALLA 19MM 4700CG20 SONDA PARA CANAL, MEDIDA/TALLA 20MM 4700CG21 SONDA PARA CANAL, MEDIDA/TALLA 21MM 4700CN28 PERFECTA®, PLASMA II , CUELLO DE PRUEBA 28MM , CON COLLARETA/CUELLO 4700CN32 PERFECTA®, PLASMA II , CUELLO DE PRUEBA 32MM , CON COLLARETA/CUELLO 4700CN33 PERFECTA®, PLASMA II , CUELLO DE PRUEBA 33MM , CON COLLARETA/CUELLO 4700CN37 PERFECTA®, PLASMA II , CUELLO DE PRUEBA 37MM , CON COLLARETA/CUELLO
--	--	--

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		4700CN38 PERFECTA®, PLASMA II , CUELLO DE PRUEBA 38MM , CON COLLARETA/CUELLO
		4700CN42 PERFECTA®, PLASMA II , CUELLO DE PRUEBA 42MM , CON COLLARETA/CUELLO
		4700CP00 PERFECTA®, CEPILLO CALCAR ELÉCTRICO, GRANDE
		4700CP01 PERFECTA®, CEPILLO CALCAR ELÉCTRICO, CHICO
		4700CP03 PERFECTA®, CEPILLO CALCAR ELÉCTRICO, GRANDE
		4700EL00 PERFECTA®, EXTRACTOR DE VÁSTAGO DE CADERA
		4700HE00 PERFECTA®, REMOVEDOR/EXTRACTOR HEMIHEAD (sic)
		4700HE01 PERFECTA®, CABEZA DE PRÓTESIS, 22MM
		4700HK01 GANCHO P/REMOCIÓN, CHICO
		4700HR00 PERFECTA®, GUÍA RESECCIÓN FEMORAL
		4700HR0080 CONJUNTO GUÍA RESECCIÓN CABEZA FEMORAL DOBLE PUNTO DE APOYO
		4700HR01 PERFECTA®, GUÍA P/CUELLO FEMORAL
		4700HR02 HMC GUÍA RESECCIÓN CABEZA FEMORAL
		4700HR03 DUAL OFFSET RESECTION, GUIDE
		4700HR04 ANTERIOR LEFT DUALFULC
		4700KIT1 PERFECTA®, KIT P/WORKSHOP
		4700KIT2 PERFECTA®, WORKSHOP
		4700KIT3 RSF WRIGHT

51



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S. N. M. S. T.

	EXPRESS®, INSTRUMENTAL 4700MC02 CINCÉL PARA ANTALLAR, MEDIANO 4700PI00 INTRODUCOR TAPÓN ÓSEO 4700PN28 PERFECTA®, PLASMA II CUELLO DE PRUEBA / 28MM , SIN CUELLO 4700PN32 PERFECTA®, PLASMA II CUELLO DE PRUEBA / NUEVO 28MM , SIN CUELLO 4700PN33 PERFECTA®, PLASMA II CUELLO DE PRUEBA / 33MM , SIN CUELLO 4700PN37 PERFECTA®, PLASMA II CUELLO DE PRUEBA / NUEVO 33MM , SIN CUELLO 4700PN38 PERFECTA®, PLASMA II CUELLO DE PRUEBA / 38MM , SIN CUELLO 4700PN42 PERFECTA®, PLASMA II CUELLO DE PRUEBA / NUEVO 38MM , SIN CUELLO 4700PR01 ESCARIADOR PROXIMAL CHICO 4700PR02 ESCARIADOR PROXIMAL GRANDE 4700R000 PERFECTA®, ESCARIADOR DE INICIO, FEMROAL 4700R090 PERFECTA®, ESCARIADOR FEMORAL 9.0MM 4700R097 PERFECTA®, ESCARIADOR FEMORAL 9.7MM 4700R105 PERFECTA®, ESCARIADOR FEMORAL 10.5MM 4700R112 PERFECTA®, ESCARIADOR FEMORAL 11.2MM 4700R120 PERFECTA®, ESCARIADOR FEMORAL 12.0MM 4700R127 PERFECTA®, ESCARIADOR FEMORAL
--	--

Handwritten signature or mark



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

		12.7MM	
		4700R135	PERFECTA®,
		ESCARIADOR	FEMORAL
		13.5MM	
		4700R142	PERFECTA®,
		ESCARIADOR	FEMORAL
		14.2MM	
		4700R150	PERFECTA®,
		ESCARIADOR	FEMORAL
		15.0MM	
		4700R165	PERFECTA®,
		ESCARIADOR	FEMORAL
		16.5MM	
		4700R180	PERFECTA®,
		ESCARIADOR	FEMORAL
		18.0MM	
		4700R195	PERFECTA®,
		ESCARIADOR	FEMORAL
		19.5MM	
		4700RE00	PERFECTA®,
		EXTRACTOR ESCOFINA	
		4700RH00	PERFECTA®,
		MANGO ESCOFINA	
		4700RH01	PERFECTA®,
		MANGO ESCOFINA	
		4700RH02	PERFECTA®,
		MANGO ESCOFINA	
		4700RH03	RSF MANGO
		ESCOFINA	
		4700RH04	MANGO PARA
		ESCOFINA, MODIFICADO	
		4700RH05	PERFECTA®,
		MANGO ESCOFINA, DELGADO	
		4700SD00	PERFECTA®,
		MAGO ESCOFINA	
		4700SE01	PERFECTA®,
		EXTRACTOR DE VASTAGO	
		4700SE03	PERFECTA®,
		EXTRACTOR DE VASTAGO	
		4700SE05	PERFECTA®,
		UNIVERSAL, EXTRACTOR	
		4700SH00	MARTILLO DE
		GOMA	
		4700SI00	PERFECTA®,
		VASTAGO FEMORAL	

EA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	4700SI01 PERFECTA®, IMPACTOR DE VÁSTAGO
	4700SN03 PERFECTA®, CUELLO DELGADO
	4700SN04 PERFECTA®, CUELLO DELGADO
	4700SRH0 PERFECTA®, MANGO P/ESCOFINA CORTO
	4700TN01 PERFECTA®, CUELLO DE PRUEBA CON COLLARETA/CUELLO, 25MM
	4700TN02 PERFECTA®, CUELLO DE PRUEBA CON COLLARETA/CUELLO, 30MM
	4700TN03 PERFECTA®, CUELLO DE PRUEBA CON COLLARETA/CUELLO, 35MM
	4700TN04 CUELLO DE PRUEBA SIN COLLARETA 25MM, CUELLO BASE 910.5
	4770XR10 XRAY OVERLAY SHORT NECK 10% MAG/AMPLIACIÓN
	4770XR10 XRAY OVERLAY SHORT NECK 10% MAG/AMPLIACIÓN
	4784XR15 PERFECTA®, PXRAY OVERLAY 15% MAG/AMPLIACIÓN
	4786XR15 PERFECTA®, PLASMA SPRAY TAPER XRAY OVERLAY 15% MAG/AMPLIACIÓN RAYOS X, AHUSADO
	4787NR15 PERFECTA®, TEMPLATE/PLANTILLA P/CORTE CALCAR MEDIDA/TALLA 15.0
	4787NR18 PERFECTA®, TEMPLATE/PLANTILLA P/CORTE CALCAR MEDIDA/TALLA 18.0
	4788XR15 PERFECTA®, XRAY OVERLAY 15% TITANIUM STEMS/VÁSTAGOS TITANIO



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

		4788XR20 PERFECTA®, TITANIO, RECTO 4789XR15 PERFECTA®, CALCAR CURVO DE TITANIO 4789XR20 PERFECTA®, CALCAR CURVO DE TITANIO 4793CP00 RESECCIÓN PROBADOR CALCAR 4793KIT1 PERFECTA®, SLT TAPER/HUSO 4793R105 PERFECTA®, PDA TEMPLATE/PLANTILLA P/RESECCIÓN CALCAR, MEDIDA/TALLA 10.5 4793R120 PERFECTA®, PDA TEMPLATE/PLANTILLA P/RESECCIÓN CALCAR, MEDIDA/TALLA 12.0 4793R135 PERFECTA®, PDA TEMPLATE/PLANTILLA P/RESECCIÓN CALCAR, MEDIDA/TALLA 13.5 4793R150 PERFECTA®, PDA TEMPLATE/PLANTILLA P/RESECCIÓN CALCAR, MEDIDA/TALLA 15.0 4793XR15 PDA CALCAR STEM XRAY OVERLAY 15% MAG/AMPLIACIÓN VÁSTAGO CALCAR 4795XR15 PERFECTA®, CALCAR CURVO DE COCR 4795XR20 PERFECTA®, SIST. DE CADERA INTRAFORM CON CALCAR CURVO DE COCR 4796XR15 PERFECTA®, VÁSTAGO CURVO DE COCR 4796XR20 PERFECTA®, SIST. DE CADERA INTRAFORM CON VÁSTAGO CURVO DE COCR 4799KIT3 EXTEND®, ESCARIADOR FEMORAL WRIGHT EXPRESS® INSTR KIT/KIT INSTRUMENTAL 4799NR00 PERFECTA®,
--	--	--

5 1



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.S.T.

		ALIGNMENT JIG/CALIBRE- PLANTILLA ALINEACIÓN 4799SD03 EXTEND® , / PERFECTA®, STEM DRVR ADPTR/ADAPTADOR PULSOR VÁSTAGO 4799SE06 GANCHO EXTRACTOR 4799XR15 PERFECTA®, VÁSTAGO RECTO DE COCR 4799XR20 PERFECTA®, SIST. DE CADERA ITRAFORM CON VÁSTAGO RECTO DE COCR 4820DG00 GUÍA DE BROCA 4820DI00 SONDA DE PROFUNDIDAD 4820DR02 BROCA, 3.2mm X 35mm 4820DR03 BROCA, 3.2mm X 15mm 4820FD01 BROCA ANGULAR 4820SH00 PORTA TORNILLO AD64H30H0 ADAYTUM PERFECTA®, INSTRUMENTAL CP1B0241 LATRLZD.NECK TRL CLLRD. PERFECTA®, SLT. (RX)DR.YETT/CUELLO DE PRUEBA LATERALIZADO CP1B0269 PERFECTA®, RDUCD.FLR.RASP/TRL FOR CP7A0562(RX)/ESCOFINA DE PLATINA REDUCIDA GLBPTH21 GLADIATOR® BIPOLAR, PROBADOR DE CABEZA, PERFECTA® 22MM PRFS1461 PROFEMUR® INTRODUTOR DE TALLO, ROSCADO SMH00001 PERFECTA®, CUELLO DE PRUEBA CON CIERRE/FIJACIÓN SMH00002 PERFECTA®, CUELLO DE PRUEBA CON CIERRE/FIJACIÓN SMH00003 PERFECTA®,
--	--	---

TA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.P.

		CUELLO DE PRUEBA CON CIERRE/FIJACIÓN
		SMH00004 PERFECTA®, ESCOFINA PLETINA STD./PRUEBA, TOTALMENTE DENTADA,
		SMH00005 PERFECTA®, ESCOFINA PLETINA STD./PRUEBA, TOTALMENTE DENTADA,
		SMH00006 PERFECTA®, ESCOFINA PLETINA STD./PRUEBA, TOTALMENTE DENTADA,
		SMH00007 PERFECTA®, ESCOFINA PLETINA STD./PRUEBA, TOTALMENTE DENTADA,
		SMH00008 PERFECTA®, ESCOFINA PLETINA STD./PRUEBA, TOTALMENTE DENTADA,
		SMH00009 PERFECTA®, ESCOFINA PLETINA STD./PRUEBA, TOTALMENTE DENTADA,
		SMH00010 PERFECTA®, ESCOFINA PLETINA STD./PRUEBA, TOTALMENTE DENTADA,
		SMH00011 PERFECTA®, ESCOFINA PLETINA STD./PRUEBA, TOTALMENTE DENTADA,
		SMH00012 PERFECTA®, ESCOFINA PLETINA STD./PRUEBA, TOTALMENTE DENTADA,
		SMH00013 PERFECTA®, ESCOFINA PLETINA STD./PRUEBA, TOTALMENTE DENTADA,
		SMH00014 PERFECTA®, ESCOFINA PLETINA STD./PRUEBA, TOTALMENTE

5 1



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

		ESCOFINA ROJA/PRUEBA, DENTADA, SMH00059	PLETINA TOTALMENTE PERFECTA®, PLETINA
		ESCOFINA ROJA/PRUEBA, DENTADA, SMH00060	TOTALMENTE PERFECTA®, PLETINA
		ESCOFINA ROJA/PRUEBA, DENTADA, SMH00061	TOTALMENTE PERFECTA®, PLETINA
		ESCOFINA ROJA/PRUEBA, DENTADA, SMH00062	TOTALMENTE PERFECTA®, PLETINA
		ESCOFINA ROJA/PRUEBA, DENTADA, SMH00786	TOTALMENTE PERFECTA®, RECTO
		PERFECTA®, P/VÁSTAGO (MODIFICADA)	ESCOFINA
		SMH00806	PERFECTA®, SLT PDA COCR -VÁSTAGO COCR, MEDIDA/TALLA 10.5
		SMH00807	PERFECTA®, SLT PDA COCR -VÁSTAGO COCR, MEDIDA/TALLA 12.0
		SMH00808	PERFECTA®, SLT PDA COCR -VÁSTAGO COCR, MEDIDA/TALLA 12.0
		SMH00809	PERFECTA®, SLT PDA COCR -VÁSTAGO COCR, MEDIDA/TALLA 12.0
		SMH00810	PERFECTA®, SLT PDA COCR -VÁSTAGO COCR, MEDIDA/TALLA 16.5
		SMH00811	PERFECTA®, SLT PDA COCR -VÁSTAGO COCR, MEDIDA/TALLA 18.0
		SMH00911	CUSTOM PERFECTA®, ESCARIADOR
		CÓNICO CON PILOTO SMH00933	CUSTOM



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.A.T.

		PERFECTA®, EXTRACTOR FEMORAL SMH00974 MDFD PERFECTA®, ACET REAMR DRIVER FR PATH®/IMPULSOR ESCARIADOR ACETABULAR SMH00976 CUSTOM PERFECTA®, CINCEL CAJA CANULADO SMH00977 CUSTOM PERFECTA®, CINCEL CAJA CANULADO SMH00982 CUST PERFECTA®, PRESURIZADOR MANUAL DE CEMENTO SMOO1340 PERFECTA®, REAMR SPECIAL MODIFICATION(ISD)/ESCARIA DOR P/MODIFICACIONES ESPECIALES SMT00299 MDFD.PERFECTA®, INTRODUTOR TAPÓN ÓSEO PARA ADVANCE® 4400DA0100 HALL/HUDSON ADAPTOR HALL HANDLE/HUDSON END/MANGO CON ADAPTADOR HUDSON 4400FI0000 IMPACTOR CABEZA FEMORAL 4611260000 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 26mm + 0mm 4611260200 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 26mm + 2.5mm 4611260500 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 26mm + 5mm 4611260700 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 26mm + 7.5mm 4611261000 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA	ANEXO VÁSTAGO
--	--	---	------------------

Handwritten signature



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.N.M.S.T.*

	Y CUELLO 26mm + 10mm 4611261200 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 26mm + 12.5mm 4611261500 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 26mm + 15mm 4611280000 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 28mm + 0mm 4611280200 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 28mm + 2.5mm 4611280500 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 28mm + 5mm 4611280700 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 28mm + 7.5mm 4611281000 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 28mm + 10mm 4611281200 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 28mm + 12.5mm 4611281500 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 28mm + 15mm 4611320000 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 32mm + 0mm 4611320200 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 32mm + 2.5mm 4611320500 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 32mm + 5mm 4611320700 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 32mm + 7.5mm 4611321000 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 32mm + 10mm 4611321200 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA
--	---

E. 1



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. J.

		Y CUELLO 32mm + 12.5mm 4611321500 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 32mm + 15mm 4613280000 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 28mm + 0mm 4613280200 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 28mm + 2.5mm 4613280500 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 28mm + 5mm 4613280700 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 28mm + 7.5mm 4613281000 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 28mm + 10mm 4613281200 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 28mm + 12.5mm 4613281500 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO 28mm + 15mm 4614220000 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO SERIE-A, 22mm +0mm 4614220500 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO SERIE-A, 22mm +5mm 4614221000 PERFECTA®, CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Y CUELLO SERIE-A, 22mm +10mm 4614TN0100 PERFECTA®, CLR TRIAL NECK 25MM A- TAPER/CUELLO DE PRUEBA, AHUSADO 4614TN0200 PERFECTA®, CLRLESS TRIAL NECK 25MM A-TAPER/CUELLO PRUEBA AHUSADO
--	--	---

E 1



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>4616220000 PERFECTA®, FEM HEAD TRIAL 22MM OD - 1MM NECK A- TAPER/PROBADOR CABEZA FEMUR/CUELLO AHUSADO</p> <p>4616220400 PERFECTA®, FEM HEAD TRIAL 22MM OD +3MM NECK A- TAPER/PROBADOR CABEZA FEJUR/CUELLO AHUSADO</p> <p>4700CG0900 PERFECTA®, SONDA P/CANAL DE VÀSTAGO, MEDIDA/TALLA 9mm</p> <p>4700CG1000 PERFECTA®, SONDA P/CANAL DE VÀSTAGO, MEDIDA/TALLA 10mm</p> <p>4700CG1100 PERFECTA®, SONDA P/CANAL DE VÀSTAGO, MEDIDA/TALLA 11mm</p> <p>4700CG1200 PERFECTA®, SONDA P/CANAL DE VÀSTAGO, MEDIDA/TALLA 12mm</p> <p>4700CG1300 PERFECTA®, SONDA P/CANAL DE VÀSTAGO, MEDIDA/TALLA 13mm</p> <p>4700CG1400 PERFECTA®, SONDA P/CANAL DE VÀSTAGO, MEDIDA/TALLA 14mm</p> <p>4700CG1500 PERFECTA®, SONDA P/CANAL DE VÀSTAGO, MEDIDA/TALLA 15mm</p> <p>4700CG1600 PERFECTA®, SONDA P/CANAL DE VÀSTAGO, MEDIDA/TALLA 16mm</p> <p>4708180000 PERFECTA®, ESCOFINA STANDARD/PRUEBA,</p>
--	--

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		MEDIDA/TALLA 18.0 4708195000 PERFECTA®, ESCOFINA STANDARD/PRUEBA, MEDIDA/TALLA 19.5 4708210000 PERFECTA®, ESCOFINA CON VOLADIZO STANDARD/PRUEBA, MEDIDA/TALLA 21.0 4708XR1500 PERFECTA®, X- RAY OVERLAY 15% HA STEMS OMET TAPER 4708XR2000 PERFECTA®, X- RAY OVERLAY 20% HA STEMS OMET TAPER 4730XR1500 PERFECTA®, X- RAY OVERLAY 15% MID- LENGTH STEMS OMET TAPER 4730XR2000 PERFECTA®, X- RAY OVERLAY 20% MID- LENGTH STEMS OMET TAPER 4752HE0000 PERFECTA®, EXTRACTOR DE CABEZA, SERIE-A 4752SE0000 PERFECTA®, EXTRACTOR DE VÁSTAGO, SERIE-A 4820DG0000 DOMED/FINNED ACETABULAR DRILL GUIDE/GUÍA BROCA ACETABULAR CON ALETAS/ABOVEDADO 4820DI0000 DOMED/FINNED ACETABULAR DEPTH INDICATOR/INDICADOR DE PROFUNDIDAD ACETABULAR/ABOVEDADO 4820DR0200 DOMED/FINNED ACETABULAR DRILL 3.2mm X 35mm/BROCA ACETABULAR CON ALETAS/ABOVEDADO 4820DR0300 DOMED/FINNED ACETABULAR DRILL 3.2mm X 15mm/BROCA ACETABULAR CON ALETAS/ABOVEDADA
--	--	--

Handwritten signature or initials.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		<p>4820FD0100 ANGLED DRILL W/ HALL END/BROCA ANGULADO CON EXTREMO HALL</p> <p>4820FD120 PERFECTA® RS X- RAY OVERLAY SLIM NECK TAPER/ P/CUELLO DELGADO</p> <p>4820FD133 CONSERVE® TOTAL, MANGUITO DE PRUEBA , CABEZA +3.5MM PARA PERFECTA®</p> <p>4820FD134 CONSERVE® TOTAL, MANGUITO DE PRUEBA, CABEZA 0MM PARA PERFECTA®</p> <p>4820FD135 CONSERVE® TOTAL, MANGUITO DE PRUEBA, CABEZA -3.5MM PARA PERFECTA®</p> <p>4820FD136 CONSERVE® TOTAL MANGUITO DE PRUEBA +7MM OFFSET PARA PERFECTA®</p>
--	--	---

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma CROSMED S.A., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° 1552-25, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días...**23 AGO. 2016**

Expediente N° 1-47-3110-4437-15-7

DISPOSICIÓN N° **9468**

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



23 AGO. 2016

SISTEMA PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA
PROYECTO DE RÓTULO (ANEXO III-B)



9 4 6 8

Proyecto de rótulo para implantes:

Importado por:

CROSMED S.A.

Domicilio Legal: Av. Corrientes 1386, piso 9º, of.16 –
C.A.B.A.

Depósito: Aguirre 545 – C.A.B.A.

Fabricado por:

MICROPORT ORTHOPEDICS INC.

5677 AIRLINE RD.
Arlington, TN USA 38002

Sistema para reemplazo total de cadera

Marca: MICROPORT ORTHOPEDICS INC.

Modelo (descripción – código): xxxxx

Lote: xxxx

Fecha de vencimiento: xx/yy

Estéril mediante óxido de etileno / radiación gamma (según se trate de un componente polimérico o metálico respectivamente)

Producto de un solo uso.

No reutilizar.

Todos los implantes deben almacenarse en un ambiente limpio y seco, y deben protegerse de la luz del sol y de las temperaturas extremas. Los implantes revestidos de sulfato de calcio deben almacenarse a 15 °C - 30 °C (59 °F - 86 °F).

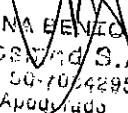
Lea las instrucciones de uso, precauciones y advertencias en el manual de usuario en el interior de la caja.

Directora Técnica: Bioingeniera Silvana Tochetti – M.N. 5634

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Autorizado por la ANMAT **PM-1552 - 25**


SILVANA TOCHETTI
Bioingeniera - M.N. 5634
Directora Técnica


ROMINA BENICOLLILA
CrosMed S.A.
CUIT: 20-70742959-3
Aprobado



SISTEMA PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA
PROYECTO DE RÓTULO (ANEXO III-B)



9468

Proyecto de rótulo para instrumental:

Importado por:

CROSMED S.A.

Domicilio Legal: Av. Corrientes 1386, piso 9º, of.16 –
C.A.B.A.

Depósito: Aguirre 545 – C.A.B.A.

Fabricado por:

MICROPORT ORTHOPEDICS INC.

5677 AIRLINE RD.
Arlington, TN USA 38002

Sistema para reemplazo total de cadera

Marca: MICROPORT ORTHOPEDICS INC.

Modelo (descripción – código): xxxxx

Lote: xxxx

Fecha de fabricación: xx/yy

Producto reutilizable. Lea las instrucciones de esterilización. Método de esterilización recomendado: vapor con prevacío durante 40 min a 132 °C

Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz del sol y de las temperaturas extremas.


Lea las instrucciones de uso, precauciones y advertencias en el manual de usuario en el interior de la caja.

Directora Técnica: Bioingeniera Silvana Tochetti – M.N. 5634

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Autorizado por la ANMAT **PM-1552 - 25**

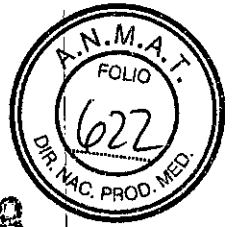

SILVANA TOCHETTI
Bioingeniera - M.N. 5634
Directora Técnica


ROMINA BENTOLILLA
Crosmed S.A.
CUIT: 30-7042959-3
Aprobado



SISTEMA PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA

INSTRUCCIONES DE USO - Anexo III-B



9 4 6 8

Importado por:

CROSMED S.A.

Domicilio Legal: Av. Corrientes 1386, piso 9º, of.16 – C.A.B.A.

Depósito: Julián Álvarez 420– C.A.B.A.

Fabricado por:

MICROPORT ORTHOPEDICS INC.

5677 AIRLINE RD.

Arlington, TN USA 38002

Sistema para reemplazo total de cadera

Marca: MICROPORT ORTHOPEDICS INC.

Modelo (descripción – código): xxxxx

Para implantes:

Estéril mediante óxido de etileno / radiación gamma (según se trate de un componente metálico o polimérico respectivamente)

Producto de un solo uso. No reutilizar.

Todos los implantes deben almacenarse en un ambiente limpio y seco, y deben protegerse de la luz del sol y de las temperaturas extremas. Los implantes revestidos de sulfato de calcio deben almacenarse a 15 °C - 30 °C (59 °F - 86 °F).

Para instrumental:

Producto reutilizable. Lea las instrucciones de esterilización. Método de esterilización recomendado: vapor con prevacío durante 40 min a 132 °C

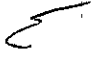
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz del sol y de las temperaturas extremas.


Lea las instrucciones de uso, precauciones y advertencias en el manual de usuario en el interior de la caja.

Directora Técnica: Bioingeniera Silvana Tochetti – M.N. 5634

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Autorizado por la ANMAT PM-1552 - 25


SILVANA TOCHETTI
Bioingeniera - M.N. 5634
Directora Técnica


ROMINA BENJOLILA
Crosmed S.A.
CUIT: 30-0842959-3
Apoderado

9468

Los sistemas totales de cadera Microport están indicados para su uso en la artroplastia total de cadera para la reducción o el alivio del dolor y/o una mejor función de la cadera de pacientes esqueléticamente maduros con las siguientes condiciones:

- Enfermedad articular degenerativa no inflamatoria como artrosis, necrosis avascular, anquilosis, prominencia del acetábulo, y displasia dolorosa de cadera.
- Enfermedad articular degenerativa inflamatoria como artritis reumatoidea.
- Corrección de deformidades funcionales.
- Procedimientos de revisión donde han fracasado otros tratamientos o dispositivos.
- Tratamiento de fracturas imposibles de tratar mediante otras técnicas.

PRECAUCIONES GENERALES

Precauciones antes de la intervención

El cirujano debe evaluar cada situación de forma individual, basándose en la presentación clínica del paciente, para tomar cualquier decisión referente a la selección del implante. El cirujano debe estar ampliamente familiarizado con el implante, el instrumental y el procedimiento quirúrgico antes de realizar la intervención. El cirujano debe ponerse en contacto con MicroPort para obtener las técnicas quirúrgicas específicas para el producto.

Para la selección del paciente deben tenerse en cuenta los siguientes factores, que pueden aumentar el riesgo de fallo y pueden ser determinantes para el éxito final del procedimiento: el peso, el grado de actividad y la profesión del paciente. Todas estas variables pueden influir en la duración y la estabilidad del implante. En los pacientes de mucho peso, la prótesis puede verse sometida a altas cargas que pueden provocar el fallo de la prótesis. El cirujano debe considerar la capacidad y la voluntad del paciente de seguir las instrucciones, y de controlar su peso y nivel de actividad.

No se puede esperar que ningún sistema de reemplazo articular, incluida la interfaz implante/hueso, resista los niveles de actividad y las cargas que resistiría el hueso sano normal; estos sistemas no serán tan fuertes, fiables ni duraderos como una articulación humana natural. El paciente no debe tener expectativas funcionales no realistas para

9 4 6 8

ocupaciones o actividades que incluyan caminar, correr, levantar pesos o ejercer tensiones musculares de forma intensiva.

Otras condiciones que aumentan el riesgo de fallo incluyen:

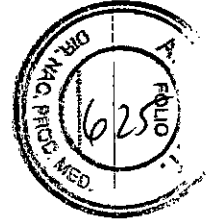
- 1) pacientes que no cooperen o con trastornos mentales o neurológicos que puedan afectar a su capacidad o disposición para seguir las instrucciones;
- 2) pérdida ósea importante, osteoporosis grave o procedimientos de revisión para los que no pueda obtenerse un ajuste adecuado de la prótesis;
- 3) trastornos metabólicos que puedan dificultar la formación ósea;
- 4) osteomalacia;
- 5) estados que puedan dificultar o impedir la curación (por ejemplo, consumo excesivo de alcohol o drogas, úlceras por decúbito, diabetes en fase terminal, deficiencia grave de proteínas o malnutrición);
- 6) procesos preexistentes que se consideran habitualmente para cualquier intervención quirúrgica, como trastornos hemorrágicos, tratamiento prolongado con esteroides, tratamiento inmunosupresor o radioterapia en dosis elevadas.

Se debe advertir al paciente de los riesgos que entraña la intervención y hacerle comprender los posibles efectos adversos. También se le debe advertir de que la prótesis no reemplaza el hueso normal sano, que se puede romper o dañar a causa de ciertas actividades o traumatismos, que tiene una vida útil prevista limitada y que quizá se tenga que reemplazar en el futuro. De igual modo, se le debe advertir de otros riesgos que el cirujano considere oportuno mencionar. Debe advertirse al paciente de que comunique al cirujano cualquier ruido o sensación inusual, ya que podría indicar un mal funcionamiento del implante.

Precauciones durante la intervención

Hay instrumental especializado que debe emplearse para garantizar la precisa implantación de los componentes protésicos. No se debe combinar instrumental de fabricantes diferentes. Aunque no es habitual, el instrumental puede romperse, sobre todo tras un uso prolongado o la aplicación de una fuerza excesiva. Por este motivo, hay que examinar el instrumental antes de la intervención por si presentase daños o desgaste.

9 4 6 8



Inspeccione los dispositivos antes de usarlos para comprobar la ausencia de daños producidos durante el transporte o el almacenamiento, o de cualquier defecto evidente al desembalarlos que aumente la probabilidad de fragmentación durante una intervención.

La elección correcta de la prótesis es sumamente importante. Las prótesis articulares requieren un asentamiento cuidadoso y el adecuado soporte óseo. Se recomienda a los cirujanos elegir, según su mejor criterio profesional, el tamaño de implante adecuado independientemente del área endosea del hueso. Para la selección correcta del implante, debe tenerse en cuenta el diseño, la fijación, el peso y la edad del paciente, la calidad del hueso, el tamaño, el grado de actividad, el estado de salud antes de la intervención, así como la experiencia del cirujano y su familiaridad con el dispositivo. Todas estas variables pueden influir en la duración y la estabilidad del implante. Los cirujanos deben informar a los pacientes de estos factores.

Se utilizan plantillas radiográficas para calcular el tamaño del producto que hay que utilizar. La anatomía de cada paciente determina en última instancia el tamaño del producto que le conviene. El nivel de preparación ósea se determina durante la intervención, utilizando un escariador o un mandril, empezando por el tamaño más pequeño y continuando hasta alcanzar el hueso esponjoso que sangra. También deben utilizarse prótesis de prueba para evaluar la posición del implante definitivo y el arco de movilidad de la articulación. El tamaño final del implante seleccionado durante la intervención puede ser distinto del previsto originalmente durante la evaluación preoperatoria o de la combinación elegida durante las pruebas preliminares.

Aplicación no cementada: La fijación adecuada en el momento de la intervención es de vital importancia para el éxito del procedimiento. Las copas acetabulares sin cementar deben ajustarse a presión en el hueso anfitrión, lo que exige una técnica quirúrgica precisa y el uso de instrumentos específicos. Debe existir una reserva ósea adecuada para sostener el dispositivo.

Aplicación cementada: Hay que asegurarse de que todos los componentes de la prótesis incrustados en cemento óseo dispongan de un soporte completo con el fin de prevenir concentraciones de tensión que puedan conducir al fracaso del procedimiento. Para prevenir el desgaste acelerado de las superficies articulares de la prótesis, es fundamental realizar una limpieza completa antes del cierre del sitio de la prótesis, lo cual incluye la total eliminación de astillas óseas, fragmentos de cemento óseo y restos metálicos. Los centralizadores distales de PMMA están concebidos para su uso como parte de una artroplastia total de cadera cementada.

9 4 6 8

Precauciones después de la intervención

Se debe advertir al paciente de las limitaciones de la reconstrucción y de la necesidad de impedir que la prótesis soporte todo el peso hasta que se haya conseguido una fijación adecuada y la completa curación. Hay que advertir al paciente para que limite sus actividades y no someta la articulación reemplazada a esfuerzos excesivos, y la proteja de un posible aflojamiento, fractura o desgaste. También se le debe recordar que siga las instrucciones del médico respecto al tratamiento y a los cuidados de seguimiento. El aflojamiento de los componentes puede aumentar la producción de partículas por desgaste, así como producir daños en el hueso, lo cual dificultará el éxito de la cirugía de revisión.

Se recomienda realizar un seguimiento periódico a largo plazo para vigilar la posición y el estado de los componentes protésicos, así como el estado del hueso adyacente. Se recomienda realizar periódicamente radiografías postoperatorias para su comparación detenida con las condiciones postoperatorias iniciales, a fin de detectar indicios de cambios a largo plazo en la posición o en el aflojamiento, acodamiento o agrietamiento de los componentes.

Recomendaciones relacionadas con los fragmentos del dispositivo

1. Inspeccione los dispositivos inmediatamente después de retirarlos del paciente para ver si hay señales de rotura o fragmentación.
2. Si el dispositivo ha sufrido algún daño, consérvelo para que sirva de ayuda al análisis que el fabricante efectuará del caso.
3. Considere detenidamente los riesgos y las ventajas de recuperar el fragmento frente a la opción de dejarlo en el paciente, y coméntelos con este (si es posible).
4. Informe al paciente acerca de la naturaleza y seguridad de los fragmentos del dispositivo que no se recuperen, incluida la siguiente información:
 - a. La composición del material, el tamaño y la ubicación del fragmento (si se conoce);
 - b. Los posibles mecanismos de lesión como, por ejemplo, migración, infección;
 - c. Los procedimientos o tratamientos que deben evitarse, tales como exploraciones por resonancia magnética en el caso de fragmentos metálicos. Esto podría ayudar a disminuir el riesgo de sufrir lesiones graves causadas por el fragmento.

Existen riesgos inherentes asociados con el uso de implantes metálicos en un entorno de RM, incluidas la migración de los componentes, la inducción térmica y la distorsión o interferencia de señales en zonas próximas a los componentes. La inducción térmica de los implantes metálicos es un riesgo relacionado con la geometría y el material de los componentes, al igual que con la potencia, duración y secuencia de impulsos de la RM. Dado que los equipos de RM no están estandarizados, se desconocen la intensidad y probabilidad de estas manifestaciones con estos implantes.

No se ha evaluado la seguridad ni la compatibilidad de los sistemas de cadera MicroPort en un entorno de RM. Tampoco se ha evaluado el calentamiento o la migración de los sistemas de cadera MicroPort en un entorno de RM. Dado que estos dispositivos no se han evaluado, MicroPort no puede recomendar el uso de RM con estos implantes, al no disponer de datos sobre la seguridad y la precisión de los estudios de imagen.

Estos componentes son dispositivos metálicos pasivos y, como ocurre con todos los dispositivos pasivos, existe la posibilidad de que se produzcan interferencias recíprocas con determinadas modalidades de obtención de imágenes, incluidas la distorsión de la imagen de RM y la difusión de los rayos X en la TAC.

MANIPULACIÓN Y ESTERILIZACIÓN

Implantes

Los implantes metálicos y cerámicos son esterilizados mediante radiación gamma y los implantes de polietileno son esterilizados mediante óxido de etileno.

Se debe consultar el método específico de esterilización en la etiqueta del envase interno. Los implantes irradiados han estado expuestos a un mínimo de 25 y un máximo de 40 kiloGrays de radiación gamma.

A no ser que se suministre sin esterilizar, este producto ha sido esterilizado y se lo debe considerar estéril a menos que el envase interno esté abierto o dañado. En caso de duda sobre la integridad del envase interno, solicite instrucciones al fabricante. Extraiga el producto del envase mediante una técnica aséptica de quirófano, solo después de que se haya determinado el tamaño correcto y se haya preparado el sitio de la intervención para la implantación definitiva. Manipule siempre el producto con guantes sin polvo y evite el contacto con objetos duros que puedan dañarlo. Esto es especialmente importante durante

9 4 6 8

la manipulación de prótesis con revestimiento poroso y revestimiento de HA. Evite que las superficies porosas o de HA entren en contacto con paños u otros materiales que suelten fibra.

Los dispositivos etiquetados para un solo uso nunca deben reutilizarse. La reutilización de estos dispositivos podría provocar lesiones graves al paciente. Los riesgos relacionados con la reutilización de estos dispositivos son, entre otros, degradación significativa del rendimiento del dispositivo, infección cruzada y contaminación.

Después de haber tenido contacto con fluidos o tejidos corporales, la prótesis no se debe volver a esterilizar ni a utilizar, sino que debe desecharse. MicroPort declina toda responsabilidad derivada del uso de implantes reesterilizados después de haber entrado en contacto con tejidos o líquidos corporales.

Instrumental

Limpieza

1. Desmonte todos los componentes conforme a las instrucciones del fabricante (si procede).
2. Enjuáguelos con agua corriente fría para eliminar la contaminación excesiva.
3. Sumérjalos durante 5 minutos en una solución enzimática preparada con arreglo a las instrucciones del fabricante.
4. Frótelos exhaustivamente con un cepillo de cerdas suaves o un limpiapipas; con ayuda de una jeringa, lave varias veces los instrumentos con diámetros muy pequeños utilizando una solución de detergente enzimático.
5. Aclárelos con agua corriente fría durante un minuto como mínimo; utilice una jeringa para lavar varias veces el interior de los instrumentos con diámetros muy pequeños.
6. Sumérjalos durante 5 minutos en una solución de detergente preparada con arreglo a las instrucciones del fabricante.
7. Frótelos exhaustivamente con un cepillo de cerdas suaves o un limpiapipas; con ayuda de una jeringa, lave varias veces los instrumentos con diámetros muy pequeños utilizando una solución de detergente.
8. Aclárelos por dentro y por fuera con agua desionizada o depurada por ósmosis inversa.



9 4 6 8

9. Sométalos a ultrasonidos durante 10 minutos como mínimo en una solución de detergente enzimático preparada según las instrucciones del fabricante.
 10. Aclárelos a fondo por dentro y por fuera con agua desionizada o depurada por ósmosis inversa.
 11. Séquelos con un paño absorbente desechable, suave y limpio.
 12. Inspeccione visualmente el instrumental para asegurarse de que está limpio. Inspeccione visualmente todas las superficies visibles internas y externas. Si es necesario, vuelva a limpiar el instrumental hasta que quede visiblemente limpio.
- Nota: pueden utilizarse cepillos (por ejemplo, limpiapipas) para limpiar la mayoría de las luces; sin embargo, se recomienda utilizar una jeringa para lavar el interior de los instrumentos con diámetros pequeños, iguales o inferiores a 1,04 mm.

Esterilización

Las condiciones mínimas recomendadas para la esterilización con vapor de los instrumentos reutilizables de MicroPort son:

1. Envuelva doblemente el componente en un envoltorio estéril aprobado por la FDA o en un envoltorio similar de material no tejido para uso médico.
2. Esterilice en autoclave de acuerdo con los siguientes parámetros:

Esterilización con vapor		
Tipo de ciclo	Parámetro	Punto de referencia mínimo
Prevacío 132 °C (270 °F)	Temperatura de exposición	132 °C (270 °F)
	Tiempo de exposición	4 minutos
	Tiempo de secado	20 minutos

3. Después de la esterilización, retire el componente del envoltorio utilizando una técnica estéril aceptada y guantes sin polvo. Asegúrese de que los implantes se encuentren a temperatura ambiente antes de la implantación. Evite el contacto con objetos duros que puedan causar daños.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Todos los implantes deben almacenarse en un ambiente limpio y seco, y deben protegerse de la luz del sol y de las temperaturas extremas. Los implantes revestidos de sulfato de calcio deben almacenarse a 15 °C - 30 °C (59 °F - 86 °F).

SILVANA TOCHETTI
Bioingeniera - M.N. 5634
Directora Técnica

ROMINA BENTIOLLA
Crosmed S.A.
CUIT: 307084259-3
Apodado