



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMAT*

DISPOSICIÓN N° **13848**

BUENOS AIRES, **21 DIC. 2016**

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-2555-16-3 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma Barraca Acher Argentina S.R.L. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-696-472, denominado: Alambres Guía, marca Cook.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

**DISPONE:**

**ARTÍCULO 1º.-** Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-696-472, correspondiente al producto médico denominado: Alambres Guía, marca Cook, propiedad de la firma Barraca Acher Argentina S.R.L. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 3302 de fecha 10 de Mayo

*E A*



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMAT*

DISPOSICIÓN N°

**-13848**

de 2011, según lo establecido en el Anexo que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-696-472, denominado: Alambres Guía, marca Cook.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-696-472.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-2555-16-3

DISPOSICIÓN N°

sgb

**-13848**

**DR. ROBERTO LEBE**  
Subadministrador Nacional  
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMAT

### ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° ~~13848~~ **13848**, a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-696-472 y de acuerdo a lo solicitado por la firma Barraca Acher Argentina S.R.L., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: Alambres Guía.

Marca: Cook.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 3302/11 de fecha 10 de Mayo de 2011.

Tramitado por expediente N° 1-47-1543/10-5.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos	10 de Mayo de 2016	10 de Mayo de 2021
Modelo/s	SF guía con alma fija TSF guía con alma fija TSCFB guía Bentson THSCF guía extra rígida Amplatz THSCF guía ultra rígida Amplatz THSF guía rígida Amplatz THSCF guía extra rígida THSCF guía con alma fija	SF-15-15 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-15-20 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-15-40 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-15-50 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-15-80 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-18-30 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-18-50 GUIAS DE ALMA



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMAT

	THSCF guía curvada Rosen THSCF extra rígida Amplatz curvada con revestimiento TFE TSFB guía Bentson TDOC guía con dos puntas flexibles RPC Roadrunner® PC RFPC Roadrunner® PC RFSPC Roadrunner® PC RSTF soporte adicional Roadrunner® PMG guía con mandril Cope PMG guía nitinol Micropuncture® SMG guía con mandril cope SMG guía con mandril inoxidable HSF guía extra rígida Amplatz RLPC Roadrunner® PC THSF guía extra rigida Amplatz TSCF guía con alma fija	FIJA. SF-18-50-BH GUIAS DE ALMA FIJA. SF-18-80 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-18SP-30 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-21-30 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-21-40 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-21-50 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-21-80 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-25-145 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-25-40 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-25-50 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-25-60 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-25-80 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-32-60 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-35-30 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-35-40 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-35-60 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-35-80 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-38-40 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-38-50 GUIAS DE ALMA FIJA. SF-38-60 GUIAS DE ALMA FIJA.
--	--	---

E. A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
S.A.M.S.

		SF-38-80 GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-18-100 GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-18-125 GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-18-145 GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-18-60 GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-21-125 GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-21-145 GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-25-125 GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-35-100 GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-35-125 GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-38-120-LUND DE INTERCAMBIO LUNDERQUIST. SF-38-125 GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-45-145-ASO POSICIONADOR DE PUNTA ROMA AMPLATZ. SF-028060 GUÍA CON PUNTA FLEXIBLE DE 3CM. SF-28-100 GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-28-145 GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-32-120-LUND GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-32-145 GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-35-145 GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-38-100 GUÍAS DE ALMA FIJA.
--	--	--

C A



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
SAMHIT*

		SF-38-145 GUÍAS DE ALMA FIJA. SF-38-145-LUND GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-18-30 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-18-50 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-18-60 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-18-80 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-18-80-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-21-30 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-21-40 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-21-50 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-21-50-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-21-80 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-21-80-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-25-40 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-25-50 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-25-50-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-25-50-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-25-80 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-25-80-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-25-80-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-32-50 GUÍAS DE ALMA
--	--	---

*E A*



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
SAMSA

		FIJA. TSF-32-50-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-32-80-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-40 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-400-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-50 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-50-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-60 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-80 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-80-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-80-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-38-50 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-38-80 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-38-80-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-38-80-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-45-145-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-45-300-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-52-145-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-52-300-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-18-100 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-18-100-BH GUÍAS DE ALMA FIJA.
--	--	---

E A



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
SAMSA.*

		TSF-18-125-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-18-145 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-18-145-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-18-180 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-18-180-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-18-20 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-18-200-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-18-260 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-18-260-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-21-100 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-21-100-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-21-125-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-21-145 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-21-145-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-21-180 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-21-180-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-21-260 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-21-260-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-25-100-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-25-125 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-25-125-SGH-BH GUÍAS
--	--	---

E A





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
MINSAL

		DE ALMA FIJA. TSF-25-145 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-25-145-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-25-145-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-25-180 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-25-180-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-25-260 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-25-260-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-28-100-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-28-125-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-28-145-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-28-145-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-32-100-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-32-125-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-32-145 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-32-145-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-32-145-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-32-260 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-32-260-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-100-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-125-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA.
--	--	--

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Población e Institutos  
MINSAL

		<p>TSF-35-145 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-145-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-145-CANADA-082589 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-180 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-180-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-20 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-260 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-260-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-260-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-35-300-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-38-100-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-38-125-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-38-145 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-38-145-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-38-180 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-38-180-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-38-260 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-38-260-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-38-260-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-38-300-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSF-52-145 GUÍAS DE ALMA</p>
--	--	--

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMAT

		FIJA. TSF-52-480-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSFB-18-145 GUÍA BENTSON. TSFB-18-145-BH GUÍA BENTSON. TSFB-18-180 GUÍA BENTSON. TSFB-18-180-BH GUÍA BENTSON. TSFB-18-260 GUÍA BENTSON. TSFB-21-145-BH GUÍA BENTSON. TSFB-25-145 GUÍA BENTSON. TSFB-25-145-BH GUÍA BENTSON. TSFB-25-180 GUÍA BENTSON. TSFB-25-180-BH GUÍA BENTSON. TSFB-25-260-BH GUÍA BENTSON. TSFB-28-145-SGH-BH GUÍA BENTSON. TSFB-32-145 GUÍA BENTSON. TSFB-32-145-SGH-BH GUÍA BENTSON. TSFB-32-180 GUÍA BENTSON. TSFB-35-145 GUÍA BENTSON. TSFB-35-145-BH GUÍA BENTSON. TSFB-35-145 TSUKAMOTO-A- 082781-SGH-BH GUÍA BENTSON. TSFB-35-145-UCHIDA- 031584-SGH-BH GUÍA BENTSON. TSFB-35-180 GUÍA BENTSON. TSFB-35-180-BH GUÍA BENTSON. TSFB-35-200 GUÍA BENTSON. TSFB-35-200 UCHIDA-031584- SGH-BH GUÍA BENTSON.
--	--	--

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
SAMSA

		TSFB-35-260 GUÍA BENTSON. TSFB-35-260-BH GUÍA BENTSON. TSFB-35-260-SGH GUÍA BENTSON. TSFB-35-260 UCHIDA-031584- SGH-BH GUÍA BENTSON. TSFB-35-320-SGH GUÍA BENTSON. TSFB-35-360-SGH GUÍA BENTSON. TSFB-38-145 GUÍA BENTSON. TSFB-38-145-BH GUÍA BENTSON. TSFB-38-145 UCHIDA-031584- SGH GUÍA BENTSON. TSFB-38-180 GUÍA BENTSON. TSFB-38-180-BH GUÍA BENTSON. TSFB-38-260 GUÍA BENTSON. TSFB-38-260-BH GUÍA BENTSON. TSCFB-25-180-3-BH GUÍA BENTSON. TSCFB-35-145-1.5 GUÍA BENTSON. TSCFB-35-145-1.5-BH GUÍA BENTSON. TSCFB-35-145-15 GUÍA BENTSON. TSCFB-35-145-3 GUÍA BENTSON. TSCFB-35-145-3-BH GUÍA BENTSON. TSCFB-35-145-7.5 GUÍA BENTSON. TSCFB-35-145-7.5-BH GUÍA BENTSON. TSCFB-35-180-1.5 GUÍA BENTSON. TSCFB-35-180-1.5-BH GUÍA
--	--	---

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMAT

		BENTSON. TSCFB-35-180-3 GUÍA BENTSON. TSCFB-35-180-3-BH GUÍA BENTSON. TSCFB-38-145-15-BH GUÍA BENTSON. TSCFB-38-145-3 GUÍA BENTSON. TSCFB-38-145-3-BH GUÍA BENTSON. THSCF-32-60-3-AES GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-35-100-1.5-ROSEN GUIA CURVADA ROSEN. THSCF-35-145-3-AES GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-35-145-3-AES-BH GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-35-145-3-AES-SGH GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-35-145-3-AES-SGH-BH GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-35-40-3-AES GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-35-80-1.5 GUIAS DE ALMA FIJA. THSCF-35-80-1.5-ROSEN-BH GUIA CURVADA ROSEN. THSCF-35-80-15 GUIAS DE ALMA FIJA. THSCF-35-80-3 GUIAS DE ALMA FIJA. THSCF-35-80-3-AES GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-35-80-3-AES-BH GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-35-80-3-AES-SGH GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-35-80-3-AES-SGH-BH GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ.
--	--	--

E A



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulaciones e Institutos  
SAMSAJ*

		THSCF-35-80-3-AUS GUIA ULTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-35-80-3-AUS-BH GUIA ULTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-35-80-3-BH GUIAS DE ALMA FIJA. THSCF-38-100-3-CWGE GUIAS DE ALMA FIJA. THSCF-38-145-15-AES GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-38-145-15-AES-BH GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-38-145-3-AES GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-38-145-3-AES-BH GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-38-145-15-AUS GUIA ULTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-38-145-15-AUS-BH GUIA ULTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-38-145-7.5-AES-BH GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-38-80-15 GUIAS DE ALMA FIJA. THSCF-38-80-15-BH GUIAS DE ALMA FIJA. THSCF-38-80-3 GUIAS DE ALMA FIJA. THSCF-38-80-3-AES GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-38-80-3-AES-SGH GUIA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-38-80-3-AUS GUIA ULTRA RIGIDA AMPLATZ. THSCF-38-80-3-BH GUIAS DE ALMA FIJA. THSCF-38-80-7.5 GUIAS DE ALMA FIJA. THSCF-35-260-1.5-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-260-3-AUS2 GUÍA
--	--	---

*E. A.*



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMAT

		EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-18-145-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-18-180-1.5-ROSEN-BH GUÍA CURVADA ROSEN. THSCF-21-180-1.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-25-145-1.8-ROSEN GUÍA CURVADA ROSEN. THSCF-25-145-1.5-ROSEN-BH GUÍA CURVADA ROSEN. THSCF-25-145-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-25-145-15-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-25-145-15-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-25-145-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-25-145-3-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-25-145-3-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-25-180-1.5-ROSEN GUÍA CURVADA ROSEN. THSCF-25-180-1.5-ROSEN-BH GUÍA CURVADA ROSEN. THSCF-25-180-15-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-25-180-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-25-180-3-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-25-180-3-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-25-260-1.5-ROSEN GUÍA CURVADA ROSEN. THSCF-25-260-1.5-ROSEN-BH GUÍA CURVADA ROSEN. THSCF-25-260-3 GUÍAS DE ALMA FIJA.
--	--	---

C A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
SAMSAJ

		<p>THSCF-25-260-3-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-25-260-3-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-25-60-3-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-28-145-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-28-180-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-28-40-2-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-32-145-3-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-32-145-3-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-32-180-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-32-180-3-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-32-180-3-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-32-260-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-32-260-3-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-32-260-3-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-100-3-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-100-3-AES-SGH-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-145-1.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-35-145-1.5-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-145-1.5-ROSEN GUÍA CURVADA ROSEN. THSCF-35-145-1.5-ROSEN-BH GUÍA CURVADA ROSEN. THSCF-35-145-15 GUÍAS DE</p>
--	--	---

E A





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*ANMAT*

		<p>ALMA FIJA. THSCF-35-145-15-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-145-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-35-145-3-AUS GUÍA ULTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-145-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-35-145-7.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-35-145-7.5-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-180-1.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-35-180-1.5-ROSEN GUÍA CURVADA ROSEN. THSCF-35-180-1.5-ROSEN-BH GUÍA CURVADA ROSEN. THSCF-35-180-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-35-180-15-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-180-15-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-180-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-35-180-3-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-180-3-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-180-3-AES-SGH-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-180-3-AUS GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-180-3-AUS-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-180-7.5-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-180-7.5-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ.</p>
--	--	--

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMAT

		<p>THSCF-35-180-7.5-AES-SGH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-220-1.5-ROSEN GUÍA CURVADA ROSEN. THSCF-35-260-1.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-35-260-1.5-ROSEN GUÍA CURVADA ROSEN. THSCF-35-260-1.5-ROSEN-BH GUÍA CURVADA ROSEN. THSCF-35-260-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-35-260-15-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-260-15-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-260-15-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-35-260-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-35-260-3-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-260-3-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-260-3-AES-SGH-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-260-3-AESW-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-260-7.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-35-260-7.5-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-35-260-APEX-1 CATÉTER DE INTERCAMBIO CURVADO-AMPLATZ APEX. THSCF-38-100-3-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-38-145-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-38-145-15-BH GUÍAS</p>
--	--	--

CA



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*ANMAT*

		<p>DE ALMA FIJA. THSCF-38-145-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-38-145-3-AES-SGH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-38-145-7.5-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-38-180-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-38-180-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-38-180-3-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-38-180-3-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-38-180-3-AUS GUÍA ULTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-38-180-3-AUS-BH GUÍA ULTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-38-180-7.5-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-38-180-7.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-38-260-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-38-260-3-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-38-260-3-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-38-260-7.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSCF-38-260-7.5-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-38-260-7.5-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-38-260-AUS2 GUÍA ULTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSCF-38-60-3-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. TSFB-35-100 GUÍA BENTSON. TSFB-35-80 GUÍA BENTSON.</p>
--	--	--

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
S.A.M.S.

		<p>TSFB-35-80-BH GUÍA BENTSON. TSFB-38-80 GUÍA BENTSON TSFB-38-80-BH GUÍA BENTSON. TDOC-18-145-0-3-BH GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-18-30-0-2 GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-18-40-0-3 GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-18-50-0-2 GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-18-50-0-3 GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-18-50-0-3-BH GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-21-40-0-2 GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-25-145-0-3-BH GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-25-30-0-2 GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-25-40-0-2 GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-25-50-0-2 GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-25-50-0-3 GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-25-60-0-2 GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-35-100-0-3 GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-35-145-0-1.5 GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-35-145-0-3 GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-35-145-0-3-BH GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-35-180-0-3 GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES.</p>
--	--	---

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulatorias e Institutos  
ANMAT

		<p>TDOC-35-260-0-3 GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-35-50-0-3-BH GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-35-260-0-0 GUÍA CON DOS PUNTAS FLEXIBLES. TDOC-18-40-0-2 GUIA CON DOBLE PUNTA FLEXIBLE. TDOC-18-80-0-2 GUIA CON DOBLE PUNTA FLEXIBLE. TDOC-35-145-0-3-SGH-BH GUIA CON DOBLE PUNTA FLEXIBLE. TDOC-35-40-0-3 GUIA CON DOBLE PUNTA FLEXIBLE. TDOC-35-50-0-3 GUIA CON DOBLE PUNTA FLEXIBLE. TDOC-35-60-0-3 GUIA CON DOBLE PUNTA FLEXIBLE. TDOC-35-80-0-3 GUIA CON DOBLE PUNTA FLEXIBLE. TDOC-35-80-0-3-BH GUIA CON DOBLE PUNTA FLEXIBLE. RPC-035145 GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON TRAMO CÓNICO DE 8 CM. RPC-035145-0 GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON TRAMO CÓNICO DE 8 CM. RPC-038145 GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON TRAMO CÓNICO DE 8 CM. RPC-038145-0 GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON TRAMO CÓNICO DE 8 CM. RPC-35-145 GUÍA</p>
--	--	--

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMST

		ROADRUNNER® THE FIRM®. RPC-35-145-0 GUÍA ROADRUNNER® THE FIRM®. RPC-35-145-CONNORS GUÍA ROADRUNNER® PC THE FIRM®. RPC-35-180 GUÍA ROADRUNNER® THE FIRM®. RPC-35-180-CONNORS GUÍA ROADRUNNER® PC THE FIRM®. RPC-35-260 GUÍA ROADRUNNER® THE FIRM®. RPC-35-260-2-CONNORS GUÍA ROADRUNNER® PC THE FIRM®. RPC-35-260-CONNORS GUÍA ROADRUNNER® PC THE FIRM®. RPC-35-300 GUÍA ROADRUNNER® THE FIRM®. RPC-35-80 GUÍA ROADRUNNER® THE FIRM®. RPC-38-145 GUÍA ROADRUNNER® THE FIRM®. RPC-35-145-0 GUÍA ROADRUNNER® THE FIRM®. RPC-38-180 GUÍA ROADRUNNER® THE FIRM®. THSF-18-145 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-25-145 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-25-145-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-25-145-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-25-145-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-25-180 GUÍAS DE ALMA FIJA.
--	--	---

C A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMAT

		THSF-25-180-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ.   THSF-25-180-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ.   THSF-25-260-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ.   THSF-25-260-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ.   THSF-25-260-AESW GUÍA WHISKER EXTRA RÍGIDA AMPLATZ.   THSF-25-260-AESW-BH GUÍA WHISKER EXTRA RÍGIDA AMPLATZ.   THSF-25-400-AES-SGH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ.   THSF-25-60-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ.   THSF-32-145-BH GUÍAS DE ALMA FIJA.   THSF-32-260 GUÍAS DE ALMA FIJA.   THSF-32-260-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ.   THSF-32-260-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ.   THSF-32-260-AES-SGH-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ.   THSF-35-100-COONS GUÍA INTERVENCIONISTA COONS.   THSF-35-100-COONS-SGH GUÍA INTERVENCIONISTA COONS.   THSF-35-125-AES-SGH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ.   THSF-35-125-COONS-SGH GUÍA INTERVENCIONISTA COONS.   THSF-35-145 GUÍAS DE ALMA FIJA.   THSF-35-145-AES-SGH GUÍA
--	--	--

E A



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
MINSIT*

		EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-145-AES-ST GUÍA ULTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-145-AES3 GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-145-ASG GUÍA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-145-ASG-BH GUÍA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-145-AUS-ST GUÍA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-145-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-35-145-COONS-SGH GUÍA INTERVENCIONISTA COONS. THSF-35-180 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-35-180-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-180-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-180-AES-SGH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-180-AES-ST GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-180-ASG GUÍA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-180-ASG-BH GUÍA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-180-AUS GUÍA ULTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-180-AUS-BH GUÍA ULTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-180-AUS-ST GUÍA ULTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-180-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-35-180-COONS GUÍA INTERVENCIONISTA COONS. THSF-35-180-COONS-BH GUÍA
--	--	--

E A





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*ANMAT*

		<p>INTERVENCIONISTA COONS. THSF-35-180-NY GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-35-180-NY-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-35-190-AES-HTPS GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-260 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-35-260-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-260-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-260-AES-SGH-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-260-AES-ST GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-260-AESW GUÍA WHISKER EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-260-ASG GUÍA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-260-ASG-BH GUÍA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-260-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-35-260-COONS GUÍA INTERVENCIONISTA COONS. THSF-35-260-COONS-BH GUÍA INTERVENCIONISTA COONS. THSF-35-260-NY-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-35-300 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-35-300-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-300-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-300-AES-SGH-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-300-AES-ST GUÍA</p>
--	--	--

*E* *A*



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Población e Institutos  
ANMST

		EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-320-AES-SGH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-360-AES-SGH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-400-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-400-AES-SGH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-480-SGH GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-35-60-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-80-AES-ST GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-80-ASG GUÍA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-35-80-AUS-ST GUÍA ULTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-100-AES-SGH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-125 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-38-125-AES-SGH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-125-ASG GUÍA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-125-COONS-SGH GUÍA INTERVENCIONISTA COONS. THSF-38-145 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-38-145-AES-SGH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-145-ASG GUÍA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-145-ASG-BG GUÍA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-145-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-38-145-COONS-SGH
--	--	---

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMAT

		GUÍA INTERVENCIONISTA COONS. THSF-38-180-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-180-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-180-AES-SGH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-180-ASG GUÍA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-180-ASG-BH GUÍA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-180-AUS-BH GUÍA ULTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-180-COONS GUÍA INTERVENCIONISTA COONS. THSF-38-180-COONS-BH GUÍA INTERVENCIONISTA COONS. THSF-38-200-THG GUÍA DE TORQUE LUNDERQUIST®- RING. THSF-38-260 GUÍAS DE ALMA FIJA. THSF-38-260-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-260-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-260-AES-SGH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-260-ASG-BH GUÍA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-260-COONS GUÍA INTERVENCIONISTA COONS. THSF-38-300-AES GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-300-AES-BH GUÍA EXTRA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-80-ASG GUÍA RÍGIDA AMPLATZ. THSF-38-80-ASG-BH GUÍA RÍGIDA AMPLATZ.
--	--	--

E. A.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
SA. N. O. S. I. T.

		THSF-52-145 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-52-45-3-PTS GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-52-55-3-PTS GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-100-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-125-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-145-1-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-145-1.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-145-1.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-50-3-SGH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-60-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-60-3-PNS GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-80-1-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-80-1.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-80-1.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-80-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-80-15-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-80-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-80-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-80-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-80-7.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-80-7.5-BH GUÍAS DE
--	--	--

E. A.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
S.A.M.S.

		ALMA FIJA. TSCF-35-80-7.5-SGH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-80-7.5-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-100-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-40-3GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-50-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-50-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-60-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-60-3-PNS GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-80-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-80-15-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-80-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-80-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-80-3-PNS GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-80-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-80-7.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-80-7.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-80-7.5-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-45-145-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-52-145-3-SGH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-145-15 GUÍAS DE ALMA FIJA.
--	--	--

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMIAJ

		TSCF-18-145-15-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-145-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-145-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-145-7.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-180-1.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-180-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-180-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-180-7.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-260-1.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-260-1.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-260-15-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-260-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-260-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-21-125-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-21-145-1.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-21-145-1.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-21-145-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-21-145-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-21-145-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-21-180-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-21-180-3-BH GUÍAS DE
--	--	---

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
MINSAL

		ALMA FIJA. TSCF-21-180-7.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-21-260-1.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-21-260-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-21-260-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-100-1-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-100-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-125-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-145-1.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-145-1.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-145-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-145-15-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-145-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-145-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-145-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-145-7.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-145-7.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-180-1.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-180-1.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-180-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-180-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA.
--	--	--

E. A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
SAMSA

		TSCF-25-180-7.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-260-1.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-260-1.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-260-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-260-15-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-260-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-260-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-28-100-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-28-125-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-28-145-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-32-100-1-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-32-100-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-32-125-1-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-32-125-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-32-145-1-SGH-BR GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-32-145-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-32-145-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-32-145-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-32-145-7.5-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-32-180-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-32-180-3-BH GUÍAS DE
--	--	--

E A





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMST

		ALMA FIJA. TSCF-32-260-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-32-260-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-32-260-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-100-15-SGH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-100-15-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-100-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-125-1-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-125-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-125-7.5-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-145-1-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-145-1.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-145-1.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-145-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-145-15-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-145-15-CANADA- 082589 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-145-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-145-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-145-3-CANADA- 082589 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-145-7.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-145-7.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA.
--	--	---

C A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
S.N.N.S.T

		TSCF-35-180-1.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-180-1.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-180-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-180-15-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-180-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-180-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-180-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-180-7.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-200-1-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-200-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-200-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-200-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-220-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-220-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-260-1-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-260-1-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-260-1.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-260-1.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-260-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-260-15-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-260-3 GUÍAS DE
--	--	--

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
SAMSA

		ALMA FIJA. TSCF-35-260-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-260-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-260-7.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-260-7.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-300-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-100-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-125-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-125-7.5-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-145-1.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-145-1.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-145-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-145-15-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-145-15-CANADA- 082589 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-145-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-145-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-145-3-CANADA- 082589 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-145-7.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-145-7.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-180-15-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-180-3 GUÍAS DE ALMA FIJA.
--	--	--



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*ANMIS*

		TSCF-38-180-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-260-15 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-260-15-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-260-3 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-260-3-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-260-3-SGH-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-260-7.5 GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-38-260-7.5-BH GUÍAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-50-1.5-BH GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-50-2 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-50-3 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-50-3-BH GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-80-1.5 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-80-1.5-BH GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-80-3 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-18-80-3-BH GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-21-50-3 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-21-80-1.5 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-21-80-1.5-BH GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-21-80-3 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-21-80-3-BH GUIAS DE
--	--	--

*E A*



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
SAMSA

		ALMA FIJA. TSCF-25-50-1.5 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-50-3 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-50-3-BH GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-50-3-SGH-BH GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-80-1.5-BH GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-80-3 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-80-3-BH GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-25-80-3-SGH-BH GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-28-60-3 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-28-80-3 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-28-80-3-SGH-BH GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-32-80-3 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-32-80-3-SGH-BH GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-32-80-7.5-SGH-BH GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-100-3 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-125-3 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-40-3 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-50-1.5 GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-50-1.5-BH GUIAS DE ALMA FIJA. TSCF-35-50-15-BH GUIAS DE ALMA FIJA.
--	--	---

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMAT

		<p>TSCF-35-50-3 GUIAS DE ALMA FIJA.</p> <p>RFPC-035145 GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON TRAMO CÓNICO DE 7 CM Y CUERPO FLEXIBLE.</p> <p>RFPC-035145-0 GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON TRAMO CÓNICO DE 7 CM Y CUERPO FLEXIBLE.†</p> <p>RFPC-038145 GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON TRAMO CÓNICO DE 7 CM Y CUERPO FLEXIBLE.†</p> <p>RFPC-038145-0 GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON TRAMO CÓNICO DE 7 CM Y CUERPO FLEXIBLE.†</p> <p>RFPC-35-145 GUÍA ROADRUNNER® NIMBLE® FLOPPY.</p> <p>RFPC-35-145-0 GUÍA ROADRUNNER® NIMBLE® FLOPPY.</p> <p>RFPC-35-145-CONNORS GUÍA ROADRUNNER® PC NIMBLE® FLOPPY.</p> <p>RFPC-35-180 GUÍA ROADRUNNER® NIMBLE® FLOPPY.</p> <p>RFPC-35-180-CONNORS GUÍA ROADRUNNER® PC NIMBLE® FLOPPY.</p> <p>RFPC-35-260 GUÍA ROADRUNNER® NIMBLE® FLOPPY.</p>
--	--	--



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.*

		<p>RFPC-35-260-CONNORS GUÍA ROADRUNNER® PC NIMBLE® FLOPPY.</p> <p>RFSPC-035145 GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON CUERPO FLEXIBLE Y TRAMO CÓNICO CORTO.</p> <p>RFSPC-035145-0 GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON CUERPO FLEXIBLE Y TRAMO CÓNICO CORTO.</p> <p>RFSPC-035145-0-I GUÍA ROADRUNNER® PC, CUERPO FLEXIBLE, TRAMO CÓNICO CORTO, SIN REVESTIMIENTO.</p> <p>RFSPC-035145-0-I-AQ GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON CUERPO FLEXIBLE Y TRAMO CÓNICO CORTO.</p> <p>RFSPC-038145 GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON CUERPO FLEXIBLE Y TRAMO CÓNICO CORTO.</p> <p>RFSPC-038145-0 GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON CUERPO FLEXIBLE Y TRAMO CÓNICO CORTO.</p> <p>RFSPC-038145-0-I GUÍA ROADRUNNER® PC SIN REVESTIMIENTO.</p> <p>RFSPC-038145-0-I-AQ GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON CUERPO</p>
--	--	---

*E* *A*



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.*

		<p>FLEXIBLE Y TRAMO CÓNICO CORTO. RFSPC-35-145 GUÍA ROADRUNNER® NIMBLE®. RFSPC-35-145-0-CUI-091798 GUÍA ROADRUNNER® NIMBLE®. RFSPC-35-145-CONNORS GUÍA ROADRUNNER® PC NIMBLE® FLOPPY. RFSPC-35-180 GUÍA ROADRUNNER® NIMBLE®. RFSPC-35-180-CONNORS GUÍA ROADRUNNER® PC NIMBLE® FLOPPY. RFSPC-35-260 GUÍA ROADRUNNER® NIMBLE®. RFSPC-35-260-CONNORS GUÍA ROADRUNNER® PC NIMBLE® FLOPPY. RFSPC-38-145 GUÍA ROADRUNNER® NIMBLE®. RFSPC-38-145-0-CUI-091798 GUÍA ROADRUNNER® NIMBLE®. RSTF-14-180 DE SOPORTE ADICIONAL ROADRUNNER®. RSTF-14-300 DE SOPORTE ADICIONAL ROADRUNNER®. RSTF-18-180 DE SOPORTE ADICIONAL ROADRUNNER®. RSTF-18-270 DE SOPORTE ADICIONAL ROADRUNNER®. RSTF-18-300 DE SOPORTE ADICIONAL ROADRUNNER®. PMG-18-145-COPE-NT GUÍAS CON MANDRIL COPE. PMG-18-40-MPIS GUÍA MICROPUNCTURE®! PMG-18-40-MPIS-C GUÍA MICROPUNCTURE®!</p>
--	--	---





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
SAMSA

		PMG-18-60-MPIS GUÍA MICROPUNCTURE®.   PMG-18-60-MPIS-C GUÍA MICROPUNCTURE®.   PMG-18-80-MPIS GUÍA MICROPUNCTURE®.   PMG-18-80-MPIS-C GUÍA MICROPUNCTURE®.   PMG-18SP-145-COPE GUÍAS CON MANDRIL COPE. PMG-18SP-145-COPE-NT GUÍAS CON MANDRIL COPE. PMG-18SP-180-COPE-NT-ST GUÍAS CON MANDRIL COPE. PMG-18SP-60-COPE-NT-ST GUÍAS CON MANDRIL COPE. PMG-15-100-COPE GUIAS CON MANDRIL COPE.   PMG-15-125-COPE GUIAS CON MANDRIL COPE.   PMG-15-60-COPE GUIAS CON MANDRIL COPE.   PMG-18-100-COPE GUIAS CON MANDRIL COPE.   PMG-18-100-COPE-NT GUIAS CON MANDRIL COPE. PMG-18-125-COPE GUIAS CON MANDRIL COPE.   PMG-18-40-COPE GUIAS CON MANDRIL COPE.   PMG-18-60-COPE GUIAS CON MANDRIL COPE.   PMG-18-60-COPE-NT GUIAS CON MANDRIL COPE. PMG-18-80-COPE GUIAS CON MANDRIL COPE.   PMG-18SP-100-COPE GUIAS CON MANDRIL COPE. PMG-18SP-100-COPE-NT GUIAS CON MANDRIL COPE. PMG-18SP-100-COPE-NT-ST
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
MINSAL

		<p>GUIAS CON MANDRIL COPE. PMG-18SP-125-COPE GUIAS CON MANDRIL COPE.<sup>1</sup> PMG-18SP-125-COPE GUIAS CON MANDRIL COPE.<sup>1</sup> PMG-15-100-COPE-NT GUIAS CON MANDRIL COPE.<sup>1</sup> PMG-18SP-25-COPE-NT GUIAS CON MANDRIL COPE.<sup>1</sup> PMG-18SP-30-COPE-NT GUIAS CON MANDRIL COPE.<sup>1</sup> PMG-18SP-40-COPE GUIAS CON MANDRIL COPE.<sup>1</sup> PMG-18SP-40-COPE-NT GUIAS CON MANDRIL COPE.<sup>1</sup> PMG-18SP-50-COPE-NT GUIAS CON MANDRIL COPE.<sup>1</sup> PMG-18SP-60-COPE GUIAS CON MANDRIL COPE.<sup>1</sup> PMG-18SP-60-COPE-NT GUIAS CON MANDRIL COPE.<sup>1</sup> PMG-18SP-80-COPE-NT GUIAS CON MANDRIL COPE.<sup>1</sup> PMG-18SP-80-COPE-NT-ST GUIAS CON MANDRIL COPE. SMG-18-60 GUÍA CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE. SMG-18-60-COPE GUIAS CON MANDRIL COPE. SMG-18SP-60-COPE GUIAS CON MANDRIL COPE. HSF-38-40-AES GUÍA EXTRA RIGIDA AMPLATZ. RLPC-035145 GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON TRAMO CÓNICO DE 16 CM. RLPC-035145-0 GUÍA ROADRUNNER® PC CON</p>
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
ANMAT

		REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON TRAMO CÓNICO DE 16 CM. RLPC-038145 GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON TRAMO CÓNICO DE 16 CM. RLPC-038145-0 GUÍA ROADRUNNER® PC CON REVESTIMIENTO HIDRÓFILO CON TRAMO CÓNICO DE 16 CM. RLPC-35-145 GUÍA ROADRUNNER®THE FIRM® LT. RLPC-35-145-0 GUÍA ROADRUNNER®THE FIRM® LT. RLPC-35-145 CONNORS GUÍA ROADRUNNER®PC NIMBLE®FLOPPY. RLPC-35-180 GUÍA ROADRUNNER® THE FIRM® LT. RLPC-35-180-0 GUÍA ROADRUNNER® THE FIRM® LT. RLPC-35-180 CONNORS GUÍA ROADRUNNER® PC NIMBLE®FLOPPY. RLPC-35-260 GUÍA ROADRUNNER® THE FIRM® LT. RLPC-35-260 CONNORS GUÍA ROADRUNNER® PC NIMBLE®FLOPPY.
Rótulos	Aprobado por Disposición ANMAT Nº 3302/11.	A fs. 45.

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

Instrucciones de uso	Aprobado por Disposición ANMAT N° 3302/11.	A fs. 46 a 50.
----------------------	--	----------------

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma Barraca Acher Argentina S.R.L., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-696-472, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días.....

Expediente N° 1-47-3110-2555-16-3

DISPOSICIÓN N°

21 DIC. 2016

-13848

  
**Dr. ROBERTO LEÓN**  
Subadministrador Nacional  
A.N.M.A.T.

13848



**Rótulo**

**Alambres Guía**

21 DIC. 2016

**Marca:** Cook

**Modelos:** (según corresponda)

**REF:** (según corresponda)

**Medidas:** (según corresponda)

**Fabricado por:**

**Cook Incorporated**

750 Daniels Way, Bloomington, IN 47404,  
Estados Unidos

**Importado por:**

**BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L.**

Doblas 1510. (1424)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Argentina

**Producto estéril. Esterilizado por óxido de etileno**  
**Producto de un solo uso**

**Lote:** \_\_\_\_\_

**Fecha de fabricación:** AAAA/ MM

**Fecha de caducidad:** AAAA/ MM

**Condiciones de transporte y almacenamiento:**

Mantener seco. No exponer a la luz solar. Conservar entre 2°C y 40°C.

**No utilizar si el envase está abierto o dañado**

**Modo de uso, Advertencias y Precauciones:** Ver Instrucciones de uso.

**"Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias"**

**Director Técnico:** Farm. Rosalba Durante MN 11281

**Autorizado por la ANMAT PM-696-472**

*E.*  
B. ACHER ARGENTINA S.R.L.  
JUAN GONZALEZ MAUREIRA  
APODERADO

*Jorge*  
JORGE MARCELO ALBO  
FARMACEUTICO  
M.N. 12277

*G*

## Instrucciones de Uso

### Alambres Guía

**Marca:** Cook

**Modelos:** (según corresponda)

**REF:** (según corresponda)

**Medidas:** (según corresponda)

**Fabricado por:**

**Cook Incorporated**

750 Daniels Way, Bloomington, IN 47404,  
Estados Unidos

**Importado por:**

**BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L.**

Doblas 1510. (1424)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Argentina

**Producto estéril. Esterilizado por óxido de etileno**  
**Producto de un solo uso**

**Condiciones de transporte y almacenamiento:**

Mantener seco. No exponer a la luz solar. Conservar entre 2°C y 40°C.

**No utilizar si el envase está abierto o dañado**

**Modo de uso, Advertencias y Precauciones:** Ver Instrucciones de uso.

**"Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias"**

**Director Técnico:** Farm. Rosalba Durante MN 11281

**Autorizado por la ANMAT PM-696-472**

B. ACHER ARGENTINA S.R.L.  
JUAN GONZALEZ MAUREIRA  
APODERADO



### Indicaciones de Uso

Los alambres Guía Vasculares están indicados para ayudar en la inserción de catéteres, vainas introductoras y otros dispositivos médicos para aplicaciones vasculares. Estos productos están indicados para ser usados por médicos entrenados y experimentados en procedimientos de acceso al sistema cardiovascular. Deben usarse técnicas de colocación estándar para la colocación de vainas de acceso vascular, catéteres angiográficos y alambres guía.



JÓRGE MARCELO ALBC  
FARMACEUTICO  
M.N. 12277



Los alambres Guía Vasculares que se diseñan para usos específicos incluyen el alambre guía Roadrunner® PC y el alambre guía Roadrunner® Extra Support. A continuación se citan los usos específicos para los que están indicados los dispositivos:

- El alambre guía Roadrunner® PC está indicado específicamente para usar en procedimientos diagnósticos e intervencionistas complejos.
- El alambre guía Roadrunner® Extra Support está indicado para usar en procedimientos diagnósticos e intervencionistas complejos donde se necesita un soporte adicional para el recambio del catéter o el manejo de dispositivos y para facilitar la introducción de catéteres percutáneos en el sistema cardiovascular.


**Contraindicaciones**

No se han descrito contraindicaciones para estos dispositivos.

**Advertencias**

No se han descrito

B. ACHER ARGENTINA S.R.L.  
 JUAN GONZALEZ MAUREIRA  
 APODERADO

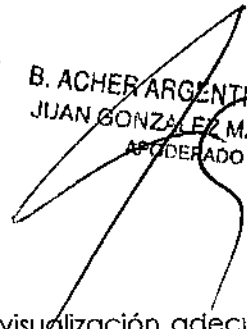

**Precauciones**

**recauciones:**

- La manipulación de la guía requiere una técnica de visualización adecuada. Tenga cuidado de no forzar ni manipular excesivamente las guías durante el acceso.
- Al utilizar la guía a través de una cánula o de una aguja metálicas, tenga cuidado para evitar dañar el revestimiento exterior.
- Al intercambiar o al retirar un instrumento sobre la guía, fije y mantenga la guía en su lugar bajo fluoroscopia para que no se desplace sin querer.

**Para guías Roadrunner PC**

**Advertencias:**

- No está indicado para usos coronarios.
- **No utilice nunca una guía Roadrunner PC a través de una cánula de aguja metálica.** Puede estropearse el revestimiento exterior de poliuretano. Si se utiliza la guía Roadrunner PC para la colocación inicial, se recomienda utilizar una aguja con una vaina exterior de plástico.

**Precauciones:**

- **Para obtener resultados óptimos, mantenga siempre húmeda la superficie de la guía.**
- La manipulación del producto requiere el uso de control fluoroscópico.
- Las guías Roadrunner PC son muy resbaladizas cuando están húmedas. Mantenga en todo momento el control de la guía al manipularla a través del catéter.
- Al retirar la guía del catéter, límpiela con una gasa estéril humedecida con solución salina heparinizada o agua esterilizada y colóqueia de nuevo en el soporte. Llene el soporte con solución salina heparinizada. De este modo se mantendrá la lubricación de su superficie para usos subsecuentes del procedimiento.

**Para las guías Roadrunner PC con soporte extra**

**Advertencias:**

- La guía sólo debe hacerse avanzar cuando se esté visualizando su punta mediante fluoroscopia. No haga girar la guía sin pruebas de que su punta distal se está moviendo correspondientemente.

E

*Jorge*  
 JORGE MARCELO ALBEC  
 FARMACEUTICO -  
 M.N. 12277

-13848



- Consulte las contraindicaciones y las posibles complicaciones asociadas al uso del catéter de acceso cardiovascular percutáneo en la información incluida con éste.

**Precauciones:**

- Este producto está concebido para que lo utilicen médicos con formación y experiencia en procedimientos de acceso al sistema cardiovascular. Deben emplearse las técnicas habituales de colocación de vainas de acceso vascular, catéteres angiográficos y guías.
- La retirada o la manipulación de la parte del **muelle** distal de la guía a través de la punta de la aguja pueden causar la rotura de la guía.
- **Esta guía es un instrumento delicado, por lo que debe** manipularse con cuidado, evitando la angulación forzada.

**Lea atentamente todas las instrucciones antes del uso. Si no se tienen en cuenta todas las advertencias y precauciones, pueden surgir complicaciones.**


**Recomendaciones sobre el producto**

Se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si tiene dudas sobre si el producto está esterilizado. Almacénelo en un lugar fresco, seco y oscuro. Evite la exposición prolongada a la luz. Tras retirarlo del paquete, inspeccione el producto para asegurarse de que no se ha producido ningún daño.

**INSTRUCCIONES DE USO**

Para las guías que poseen revestimiento AQ:

**Activación del revestimiento hidrofílico AQ®**

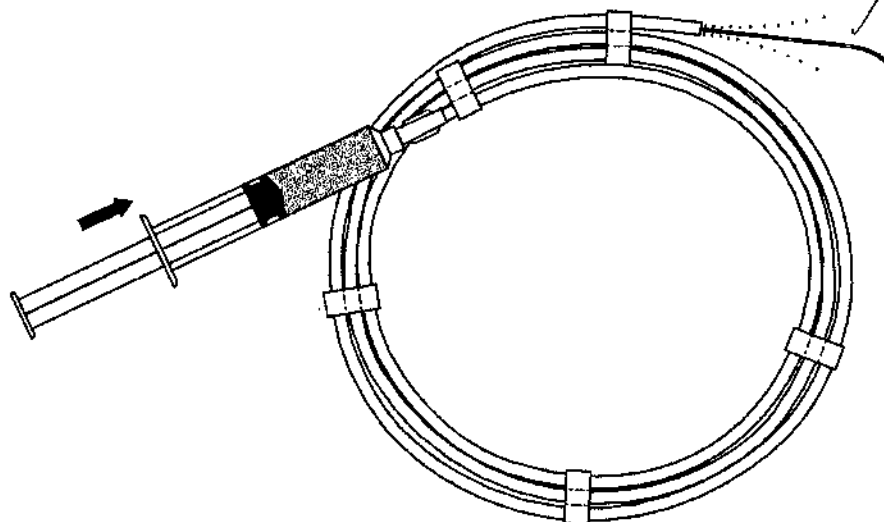

1. Conecte la jeringa con solución salina heparinizada o agua esterilizada al acoplamiento Luer-Lock del soporte de la guía.
2. Inyecte solución suficiente para humedecer por completo la superficie de la guía. De este modo, activará el revestimiento AQ y hará que la superficie de la guía esté muy lubricada.

B. ACHER ARGENTINA S.R.L.  
JUAN GONZALEZ MAUREIRA  
APODERADO

*Jorge*  
JORGE MARCELO ALBOR  
FARMACEUTICO  
M.N. 12277





3. En este momento se puede comenzar a utilizar la guía del modo habitual. Si se purga inicialmente con solución heparinizada la luz del catéter, se mejorará el movimiento inicial de la guía a través del catéter.

**NOTA:** Si la superficie de la guía se seca tras extraerla del soporte, para volver a obtener el efecto hidrofílico, debe humedecerse con más solución salina heparinizada o agua esterilizada.

#### **INSTRUCCIONES PARA EL USO DE UNA GUÍA:**

1. Empleando una técnica aséptica, extraiga la guía de su envase exterior y colóquela en el campo estéril.
2. Extraiga la guía del portaguías.
3. Si utiliza una guía de alma móvil, ajuste la posición del mandril, haciéndolo avanzar o retirándolo dentro de la guía, para lograr el grado de flexibilidad requerida.
4. Haga avanzar el extremo flexible de la guía al interior del dispositivo y posicónela en el lugar anatómico deseado.

**NOTA:** El tamaño del orificio terminal y la longitud del dispositivo deben tenerse en cuenta para asegurar un ajuste adecuado entre la guía y el dispositivo.

5. Una vez que haya terminado de utilizar la guía, extraígalas del paciente y deséchela.

#### **Para las guías Roadrunner PC con soporte extra:**

1. Acople el manguito a la guía.
2. Utilizando fluoroscopia y manteniendo la posición del catéter de acceso cardiovascular, haga avanzar la guía hasta el lugar deseado.

**ADVERTENCIA:** Utilizando fluoroscopia, observe todos los movimientos de la guía en el interior de los vasos. No haga girar la guía sin pruebas de que su punta distal se está moviendo correspondientemente. Si se sigue girando la guía cuando haya resistencia al giro, pueden producirse traumatismos vasculares o daños en la guía, lo que puede causar la fractura del dispositivo.

**ADVERTENCIA:** La guía sólo debe hacerse avanzar cuando se esté visualizando su punta mediante fluoroscopia. Si nota resistencia táctil o visualmente en la fluoroscopia, determine la causa y tome las medidas necesarias para reducir la resistencia. El avance y la retirada de la guía deben realizarse lentamente y con cuidado.

3. Al llegar a la zona en la que se quiera realizar la biopsia, haga avanzar la punta distal de la guía hasta que quede en posición distal respecto a la lesión, colocando una sección más firme de la guía en el lugar deseado.

4. Confirme la ubicación de la guía en dos planos para asegurarse de que la punta distal esté colocada en el vaso deseado y no dentro de un vaso lateral.

5. Con la guía asegurada en posición, haga avanzar el catéter de acceso cardiovascular hasta el lugar deseado.

#### **Cambio de la guía**

1. Retire el manguito de la guía.
2. Abra la válvula hemostática y lave la vía.

**ADVERTENCIA:** Para evitar la entrada de aire en el sistema, mantenga siempre un flujo continuo de lavado mientras esté cambiando la guía.

3. Utilizando fluoroscopia, retire la guía lentamente y con cuidado para evitar traumatismos.

**NOTA:** Tras retirar la guía del catéter, límpiela con una gasa estéril humedecida con solución salina heparinizada o agua esterilizada y colóquela de nuevo en el soporte.

4. Cierre la válvula hemostática, lave la vía y prepare una guía nueva.

**ADVERTENCIA:** Antes de volver a introducir la guía cambiada, asegúrese de que la punta distal del dispositivo cardiovascular esté libre en el interior del vaso. Si la punta está contra la pared del vaso, pueden producirse traumatismos vasculares durante la reintroducción de la guía

B. ACHER ARGENTINA S.R.L.  
JUAN GONZALEZ MAUREIRA  
APODERADO

Jorge Marcelo Albu  
JORGE MARCELO ALBU  
FARMACEUTICO  
M.N. 12277



13848

## Presentación

Producto suministrado esterilizado con óxido de etileno en envases individuales de apertura pelable. Indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que sea estéril. Almacénelo en un lugar fresco, seco y oscuro. Evite la exposición prolongada a la luz. Tras extraerlo del envase, inspeccione el producto para asegurarse de que no haya sufrido ningún daño.

2

B. ACHEF ARGENTINA S.R.L.  
JUAN GONZALEZ MAUREIRA  
APODERADO

Jorge  
JORGE MARCELO ALEI  
FARMACEUTICO  
M.N. 12277