

J-n(, 1/MÚ' d£i;/  
~daNád ,91,,áMJ  
@r((h«M ",~Y;;<J4H(<<4  
cIfAClt.s; j/ 3.

DISPOSICION N° **1-'\_05**

BUENOS AIRES, **15 FEB. 2016**

VISTO el Expediente NO 1-47-3110-1653-14-1 del Registro de esta **Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica** (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

**Que por las presentes actuaciones la firma IMPLANTES FICO S.R.L. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-39, denominado SISTEMA DE CAJAS INTERsOMÁTICAs TORACOLUMBAREs y CERVICAL E INSTRUMENTAL ASOCIADO, marca NUVAfive.**

**Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).**

**Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.**

**Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.**

**Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1~90/92, y Decreto N° 101/15 de fecha 16 de diciembre del 2015.**

**Por ello;**

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

**ARTÍCULO 10.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM NO PM-14-39, denominado SISTEMA DE CAJAS INTERsOMÁTICAs TORACOLUMBAREs y CERVICAL E INSTRUMENTAL ASOCIADO, marca NUVAfive.**



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N°

**1405**

ARTÍCULO 2º.- Acéptese el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-39.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, hágasele entrega de la copia autenticada de la presente Disposición y Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-1653-14-1

DISPOSICIÓN N°

msm

**1405**

**Dr. ROBERTO LEDE**  
Subadministrador Nacional  
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N°.....1405....., los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-39 y de acuerdo a lo solicitado por la firma IMPLANTES FICO S.R.L., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: SISTEMA DE CAJAS INTERSOMÁTICAS TORACOLUMBARES Y CERVICAL E INSTRUMENTAL ASOCIADO.

Marca: NUVASIVE.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 3386/14.

Tramitado por expediente N° 1-47-20561-13-1

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Modelo(s)	Implante Brigade, 10x34x24mm 8° Implante Brigade, 10x38x28mm 8° Implante Brigade, 10x38x32mm 8° Implante Brigade, 10x42x30mm 8° Implante Brigade, 12x34x24mm 8° Implante Brigade, 12x38x28mm 8° Implante Brigade, 12x38x32mm 8° Implante Brigade, 12x42x30mm 8° Implante Brigade, 14x34x24mm 8° Implante Brigade, 14x38x28mm 8° Implante Brigade, 14x38x32mm 8°	6941034 Implante Brigade, 10x34x24mm 8° 6941038 Implante Brigade, 10x38x28mm 8° 6961038 Implante Brigade, 10x38x32mm 8° 6941042 Implante Brigade, 10x42x30mm 8° 6941234 Implante Brigade, 12x34x24mm 8° 6941238 Implante Brigade, 12x38x28mm 8° 6961238 Implante Brigade, 12x38x32mm 8° 6941242 Implante Brigade, 12x42x30mm 8° 6941434 Implante Brigade, 14x34x24mm 8° 6941438 Implante Brigade, 14x38x28mm 8° 6961438 Implante Brigade, 14x38x32mm 8°



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A. N. M. A. F.

Implante Brigade, 14x42x30mm 8°	6941442 Implante Brigade, 14x42x30mm 8°
Implante Brigade, 16x38x28mm 8°	6941638 Implante Brigade, 16x38x28mm 8°
Implante Brigade, 16x38x32mm 8°	6961638 Implante Brigade, 16x38x32mm 8°
Implante Brigade, 16x42x30mm 8°	6941642 Implante Brigade, 16x42x30mm 8°
Implante Brigade, 18x34x24mm 8°	6941834 Implante Brigade, 18x34x24mm 8°
Implante Brigade, 18x38x28mm 8°	6941838 Implante Brigade, 18x38x28mm 8°
Implante Brigade, 18x38x32mm 8°	6961838 Implante Brigade, 18x38x32mm 8°
Implante Brigade, 18x42x30mm 8°	6941842 Implante Brigade, 18x42x30mm 8°
Implante Brigade, 20x34x24mm 8°	6942034 Implante Brigade, 20x34x24mm 8°
Implante Brigade, 20x38x28mm 8°	6942038 Implante Brigade, 20x38x28mm 8°
Implante Brigade, 20x38x32mm 8°	6962038 Implante Brigade, 20x38x32mm 8°
Implante Brigade, 20x42x30mm 8°	6942042 Implante Brigade, 20x42x30mm 8°
Implante Brigade, 10x34x24mm 12°	6951034 Implante Brigade, 10x34x24mm 12°
Implante Brigade, 12x34x24mm 12°	6951234 Implante Brigade, 12x34x24mm 12°
Implante Brigade, 12x38x28mm 12°	6951238 Implante Brigade, 12x38x28mm 12°
Implante Brigade, 12x38x32mm 12°	6971238 Implante Brigade, 12x38x32mm 12°
Implante Brigade, 12x42x30mm 12°	6951242 Implante Brigade, 12x42x30mm 12°
Tornillo XLR-F CoRoent, 4.5x20mm	8594520 Tornillo XLR-F CoRoent, 4.5x20mm
Tornillo XLR-F CoRoent, 4.5x22.5mm	8594522 Tornillo XLR-F CoRoent, 4.5x22.5mm
Tornillo XLR-F CoRoent, 4.5x25mm	8594525 Tornillo XLR-F CoRoent, 4.5x25mm
Tornillo XLR-F CoRoent, 4.5x27.5mm	8594527 Tornillo XLR-F CoRoent, 4.5x27.5mm
Tornillo XLR-F CoRoent, 4.5x30mm	8594530 Tornillo XLR-F CoRoent, 4.5x30mm
Tornillo XLR-F CoRoent, 4.5x35mm	8594535 Tornillo XLR-F CoRoent, 4.5x35mm
Tornillo XLR-F CoRoent, 5.5x20mm	8595520 Tornillo XLR-F CoRoent, 5.5x20mm
Tornillo XLR-F CoRoent, 5.5x22.5mm	8595522 Tornillo XLR-F CoRoent, 5.5x22.5mm
Tornillo XLR-F CoRoent,	8595525 Tornillo XLR-F CoRoent,



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 A. N. M. A. F.

5.5x25mm Tornillo XLR-F CoRoent, 5.5x27.5mm Tornillo XLR-F CoRoent, 5.5x30mm Tornillo XLR-F CoRoent, 5.5x35mm Implante Brigade, 14x34x24mm 12° Implante Brigade, 14x38x28mm 12° Implante Brigade, 14x38x32mm 12° Implante Brigade, 14x42x30mm 12° Implante Brigade, 16x34x24mm 12° Implante Brigade, 16x38x28mm 12° Implante Brigade, 16x38x32mm 12° Implante Brigade, 16x42x30mm 12° Implante Brigade, 18x42x30mm 12° Implante Brigade, 20x34x24mm 12° Implante Brigade, 20x38x28mm 12° Implante Brigade, 20x38x32mm 12° Implante Brigade, 20x42x30mm 12° CoRoent LX, 6mm CoRoent LX, 8mm CoRoent LX, 10mm CoRoent LX, 12mm CoRoent LX, 14mm CoRoent LX, 16mm CoRoent LX, 18mm CoRoent LX, 20mm CoRoent LO, 8x10x25mm 5° CoRoent LO, 8x10x30mm 5° CoRoent LO, 8x10x35mm 5° CoRoent LO, 8x10x40mm 5° CoRoent LO,	5.5x25mm 8595527 Tornillo XLR-F CoRoent, 5.5x27.5mm 8595530 Tornillo XLR-F CoRoent, 5.5x30mm 8595535 Tornillo XLR-F CoRoent, 5.5x35mm 6951434 Implante Brigade, 14x34x24mm 12° 6951438 Implante Brigade, 14x38x28mm 12° 6971438 Implante Brigade, 14x38x32mm 12° 6951442 Implante Brigade, 14x42x30mm 12° 6951634 Implante Brigade, 16x34x24mm 12° 6951638 Implante Brigade, 16x38x28mm 12° 6971638 Implante Brigade, 16x38x32mm 12° 6951642 Implante Brigade, 16x42x30mm 12° 6951842 Implante Brigade, 18x42x30mm 12° 6952034 Implante Brigade, 20x34x24mm 12° 6952038 Implante Brigade, 20x38x28mm 12° 6972038 Implante Brigade, 20x38x32mm 12° 6952042 Implante Brigade, 20x42x30mm 12° 7710635 CoRoent LX, 6mm 7710835 CoRoent LX, 8mm 7711055 CoRoent LX, 10mm 7711275 CoRoent LX, 12mm 7711495 CoRoent LX, 14mm 7711615 CoRoent LX, 16mm 7711835 CoRoent LX, 18mm 7712055 CoRoent LX, 20mm 6850810 CoRoent LO, 8x10x25mm 5° 6850811 CoRoent LO, 8x10x30mm 5° 6850812 CoRoent LO, 8x10x35mm 5° 6850813 CoRoent LO, 8x10x40mm 5° 6851010 CoRoent LO, 10x10x25mm 5° 6851011 CoRoent LO, 10x10x30mm 5° 6851012 CoRoent LO, 10x10x35mm 5° 6851013 CoRoent LO, 10x10x40mm 5° 6851210 CoRoent LO, 12x10x25mm 5°
---	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

10x10x25mm 5° CoRoent LO, 10x10x30mm 5° CoRoent LO, 10x10x35mm 5° CoRoent LO, 10x10x40mm 5° CoRoent LO, 12x10x25mm 5° CoRoent LO, 12x10x30mm 5° CoRoent LO, 12x10x35mm 5° CoRoent LO, 12x10x40mm 5° CoRoent LO, 14x10x25mm 5° CoRoent LO, 14x10x30mm 5° CoRoent LO, 14x10x35mm 5° CoRoent LO, 14x10x40mm 5° CoRoent XL, 8x18x50mm CoRoent XL, 8x18x60mm CoRoent XL, 10x18x45mm CoRoent XL, 10x18x50mm CoRoent XL, 10x18x55mm CoRoent XL, 10x18x60mm CoRoent XL, 12x18x45mm CoRoent XL, 12x18x50mm CoRoent XL, 12x18x55mm CoRoent XL, 12x18x60mm CoRoent XL, 14x18x40mm CoRoent XL, 16x18x40mm CoRoent XL, 10x18x50mm 10° CoRoent XL, 10x18x55mm 10° CoRoent XL, 12x18x45mm 10°	6851211 CoRoent LO, 12x10x30mm 5° 6851212 CoRoent LO, 12x10x35mm 5° 6851213 CoRoent LO, 12x10x40mm 5° 6851410 CoRoent LO, 14x10x25mm 5° 6851411 CoRoent LO, 14x10x30mm 5° 6851412 CoRoent LO, 14x10x35mm 5° 6851413 CoRoent LO, 14x10x40mm 5° 6908850 CoRoent XL, 8x18x50mm 6908860 CoRoent XL, 8x18x60mm 6910845 CoRoent XL, 10x18x45mm 6910850 CoRoent XL, 10x18x50mm 6910855 CoRoent XL, 10x18x55mm 6910860 CoRoent XL, 10x18x60mm 6912845 CoRoent XL, 12x18x45mm 6912850 CoRoent XL, 12x18x50mm 6912855 CoRoent XL, 12x18x55mm 6912860 CoRoent XL, 12x18x60mm 6914850 CoRoent XL, 14x18x40mm 6916850 CoRoent XL, 16x18x40mm 6981050 CoRoent XL, 10x18x50mm 10° 6981055 CoRoent XL, 10x18x55mm 10° 6981245 CoRoent XL, 12x18x45mm 10° 6981250 CoRoent XL, 12x18x50mm 10° 6981255 CoRoent XL, 12x18x55mm 10° 6981260 CoRoent XL, 12x18x60mm 10° 6908245 CoRoent XL Ancho, 8x22x45mm 6908250 CoRoent XL Ancho, 8x22x50mm 6908255 CoRoent XL Ancho, 8x22x55mm 6908260 CoRoent XL Ancho, 8x22x60mm 6910245 CoRoent XL Ancho, 10x22x45mm 6910250 CoRoent XL Ancho, 10x22x50mm 6910255 CoRoent XL Ancho, 10x22x55mm 6912245 CoRoent XL Ancho, 12x22x45mm 6912250 CoRoent XL Ancho, 12x22x50mm 6912255 CoRoent XL Ancho, 12x22x55mm
--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.F.

CoRoent XL, 12x18x50mm 10°	6912260 CoRoent XL Ancho, 12x22x60mm
CoRoent XL, 12x18x55mm 10°	6914250 CoRoent XL Ancho, 14x22x50mm
CoRoent XL, 12x18x60mm 10°	6916250 CoRoent XL Ancho, 16x22x50mm
CoRoent XL Ancho, 8x22x45mm	6920845 CoRoent XL Ancho, 8x22x45mm Lordótica
CoRoent XL Ancho, 8x22x50mm	6920850 CoRoent XL Ancho, 8x22x50mm Lordótica
CoRoent XL Ancho, 8x22x55mm	6920855 CoRoent XL Ancho, 8x22x55mm Lordótica
CoRoent XL Ancho, 8x22x60mm	6920860 CoRoent XL Ancho, 8x22x60mm Lordótica
CoRoent XL Ancho, 10x22x45mm	6921045 CoRoent XL Ancho, 10x22x45mm Lordótica
CoRoent XL Ancho, 10x22x50mm	6921050 CoRoent XL Ancho, 10x22x50mm Lordótica
CoRoent XL Ancho, 10x22x55mm	6921055 CoRoent XL Ancho, 10x22x55mm Lordótica
CoRoent XL Ancho, 12x22x45mm	6921245 CoRoent XL Ancho, 12x22x45mm Lordótica
CoRoent XL Ancho, 12x22x50mm	6921250 CoRoent XL Ancho, 12x22x50mm Lordótica
CoRoent XL Ancho, 12x22x55mm	6921255 CoRoent XL Ancho, 12x22x55mm Lordótica
CoRoent XL Ancho, 12x22x60mm	6608925 CoRoent LC, 8x9x25 8°
CoRoent XL Ancho, 14x22x50mm	6610925 CoRoent LC, 10x9x25 8°
CoRoent XL Ancho, 16x22x50mm	6612925 CoRoent LC, 12x9x25 8°
CoRoent XL Ancho, 8x22x45mm Lordótica	6614925 CoRoent LC, 14x9x25 8°
CoRoent XL Ancho, 8x22x50mm Lordótica	6608125 CoRoent LC, 8x11x25 8°
CoRoent XL Ancho, 8x22x55mm Lordótica	6610125 CoRoent LC, 10x11x25 8°
CoRoent XL Ancho, 8x22x60mm Lordótica	6612125 CoRoent LC, 12x11x25 8°
CoRoent XL Ancho, 10x22x45mm Lordótica	6614125 CoRoent LC, 14x11x25 8°
CoRoent XL Ancho, 10x22x50mm Lordótica	6708920 CoRoent LI, 8x9x20mm
CoRoent XL Ancho; 10x22x55mm Lordótica	6709920 CoRoent LI, 9x9x20mm
CoRoent XL Ancho, 12x22x45mm Lordótica	6710920 CoRoent LI, 10x9x20mm
CoRoent XL Ancho, 12x22x50mm Lordótica	6711920 CoRoent LI, 11x9x20mm
	6712920 CoRoent LI, 12x9x20mm
	6713920 CoRoent LI, 13x9x20mm
	6714920 CoRoent LI, 14x9x20mm
	6708926 CoRoent LI, 8x9x26mm
	6709926 CoRoent LI, 9x9x26mm
	6710926 CoRoent LI, 10x9x26mm
	6711926 CoRoent LI, 11x9x26mm
	6712926 CoRoent LI, 12x9x26mm
	6713926 CoRoent LI, 13x9x26mm
	6714926 CoRoent LI, 14x9x26mm
	6708932 CoRoent LI, 8x9x32mm
	6709932 CoRoent LI, 9x9x32mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

CoRoent XL Ancho, 12x22x55mm Lordótica	6710932 CoRoent LI, 10x9x32mm
CoRoent LC, 8x9x25 8°	6711932 CoRoent LI, 11x9x32mm
CoRoent LC, 10x9x25 8°	6712932 CoRoent LI, 12x9x32mm
CoRoent LC, 12x9x25 8°	6713932 CoRoent LI, 13x9x32mm
CoRoent LC, 14x9x25 8°	6714932 CoRoent LI, 14x9x32mm
CoRoent LC, 8x11x25 8°	6708120 CoRoent LI, 8x11x20mm
CoRoent LC, 10x11x25 8°	6709120 CoRoent LI, 9x11x20mm
CoRoent LC, 12x11x25 8°	6710120 CoRoent LI, 10x11x20mm
CoRoent LC, 14x11x25 8°	6711120 CoRoent LI, 11x11x20mm
CoRoent LI, 8x9x20mm	6712120 CoRoent LI, 12x11x20mm
CoRoent LI, 9x9x20mm	6713120 CoRoent LI, 13x11x20mm
CoRoent LI, 10x9x20mm	6300650 CoRoent XL-H, 6x22x50mm 30°
CoRoent LI, 11x9x20mm	6301050 CoRoent XL-H, 10x22x50mm 30°
CoRoent LI, 12x9x20mm	6300255 CoRoent XL-H, 2x22x55mm 30°
CoRoent LI, 13x9x20mm	6300455 CoRoent XL-H, 4x22x55mm 30°
CoRoent LI, 14x9x20mm	6300655 CoRoent XL-H, 6x22x55mm 30°
CoRoent LI, 8x9x26mm	6300855 CoRoent XL-H, 8x22x55mm 30°
CoRoent LI, 9x9x26mm	6301055 CoRoent XL-H, 10x22x55mm 30°
CoRoent LI, 10x9x26mm	6300460 CoRoent XL-H, 4x22x60mm 30°
CoRoent LI, 11x9x26mm	6300660 CoRoent XL-H, 6x22x60mm 30°
CoRoent LI, 12x9x26mm	6300860 CoRoent XL-H, 8x22x60mm 30°
CoRoent LI, 13x9x26mm	6301060 CoRoent XL-H, 10x22x60mm 30°
CoRoent LI, 14x9x26mm	6910840 CoRoent XL, 10x18x40mm
CoRoent LI, 8x9x32mm	6912840 CoRoent XL, 12x18x40mm
CoRoent LI, 9x9x32mm	6914850 CoRoent XL, 14x18x50mm
CoRoent LI, 10x9x32mm	6981440 CoRoent XL, 14x18x40mm 10°
CoRoent LI, 11x9x32mm	6981445 CoRoent XL, 14x18x45mm 10°
CoRoent LI, 12x9x32mm	6981650 CoRoent XL, 16x18x50mm 10°
CoRoent LI, 13x9x32mm	6808240 CoRoent XLW, 8x22x40mm
CoRoent LI, 14x9x32mm	6908245 CoRoent XLW Ancho, 8x22x45mm
CoRoent LI, 8x11x20mm	6908250 CoRoent XLW Ancho, 8x22x50mm
CoRoent LI, 9x11x20mm	6908255 CoRoent XLW Ancho, 8x22x55mm
CoRoent LI, 10x11x20mm	6810240 CoRoent XLW, 10x22x40mm
CoRoent LI, 11x11x20mm	6910245 CoRoent XLW Ancho,
CoRoent LI, 12x11x20mm	
CoRoent LI, 13x11x20mm	
CoRoent XL-H, 6x22x50mm 30°	
CoRoent XL-H, 10x22x50mm 30°	
CoRoent XL-H, 2x22x55mm 30°	
CoRoent XL-H, 4x22x55mm 30°	
CoRoent XL-H, 6x22x55mm 30°	





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 S.A.S.A.T.

CoRoent XL-H, 8x22x55mm 30°	10x22x45mm
CoRoent XL-H, 10x22x55mm 30°	6910250 CoRoent XLW Ancho, 10x22x50mm
CoRoent XL-H, 4x22x60mm 30°	6910255 CoRoent XLW Ancho, 10x22x55mm
CoRoent XL-H, 6x22x60mm 30°	6812240 CoRoent XLW, 12x22x40mm
CoRoent XL-H, 8x22x60mm 30°	6912245 CoRoent XLW Ancho, 12x22x45mm
CoRoent XL-H, 10x22x60mm 30°	6912250 CoRoent XLW Ancho, 12x22x50mm
CoRoent XL, 10x18x40mm	6912255 CoRoent XLW Ancho, 12x22x55mm
CoRoent XL, 12x18x40mm	6814240 CoRoent XLW, 14x22x40mm
CoRoent XL, 14x18x50mm	6914245 CoRoent XLW Ancho, 14x22x45mm
CoRoent XL, 14x18x40mm 10°	6914250 CoRoent XLW Ancho, 14x22x50mm
CoRoent XL, 14x18x45mm 10°	6914255 CoRoent XLW Ancho, 14x22x55mm
CoRoent XL, 16x18x50mm 10°	6816240 CoRoent XLW, 16x22x40mm
CoRoent XLW, 8x22x40mm	6916245 CoRoent XLW Ancho, 16x22x45mm
CoRoent XLW Ancho, 8x22x45mm	6916250 CoRoent XLW Ancho, 16x22x50mm
CoRoent XLW Ancho, 8x22x50mm	6916255 CoRoent XLW Ancho, 16x22x55mm
CoRoent XLW Ancho, 8x22x55mm	6808340 CoRoent XLW, 8x22x40mm Lordótica
CoRoent XLW, 10x22x40mm	6920845 CoRoent XLW Ancho, 8x22x45mm Lordótica
CoRoent XLW Ancho, 10x22x45mm	6920850 CoRoent XLW Ancho, 8x22x50mm Lordótica
CoRoent XLW Ancho, 10x22x50mm	6920855 CoRoent XLW Ancho, 8x22x55mm Lordótica
CoRoent XLW, 12x22x40mm	6810340 CoRoent XLW, 10x22x40mm Lordótica
CoRoent XLW Ancho, 12x22x45mm	6921045 CoRoent XLW Ancho, 10x22x45mm Lordótica
CoRoent XLW Ancho, 12x22x50mm	6921050 CoRoent XLW Ancho, 10x22x50mm Lordótica
CoRoent,XLW Ancho, 12x22x55mm	6921055 CoRoent XLW Ancho, 10x22x55mm Lordótica
CoRoent XLW, 14x22x40mm	6812340 CoRoent XLW, 12x22x40mm Lordótica
	6921245 CoRoent XLW Ancho, 12x22x45mm Lordótica
	6921250 CoRoent XLW Ancho, 12x22x50mm Lordótica
	6921255 CoRoent XLW Ancho, 12x22x55mm Lordótica



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.S.T.

CoRoent XLW Ancho, 14x22x45mm	6814340 CoRoent XLW, 14x22x40mm Lordótica
CoRoent XLW Ancho, 14x22x50mm	6921445 CoRoent XLW Ancho, 14x22x45mm Lordótica
CoRoent XLW Ancho, 14x22x55mm	6921450 CoRoent XLW Ancho, 14x22x50mm Lordótica
CoRoent XLW, 16x22x40mm	6921455 CoRoent XLW Ancho, 14x22x55mm Lordótica
CoRoent XLW Ancho, 16x22x45mm	6816340 CoRoent XLW, 16x22x40mm Lordótica
CoRoent XLW Ancho, 16x22x50mm	6921645 CoRoent XLW Ancho, 16x22x45mm Lordótica
CoRoent XLW Ancho, 16x22x55mm	6921650 CoRoent XLW Ancho, 16x22x50mm Lordótica
CoRoent XLW, 8x22x40mm Lordótica	6921655 CoRoent XLW Ancho, 16x22x55mm Lordótica
CoRoent XLW Ancho, 8x22x45mm Lordótica	6914860 CoRoent XL, 14x18x60mm
CoRoent XLW Ancho, 8x22x50mm Lordótica	6916860 CoRoent XL, 16x18x60mm
CoRoent XLW Ancho, 8x22x55mm Lordótica	6910260 CoRoent XL Ancho, 10x22x60mm
CoRoent XLW, 10x22x40mm Lordótica	6921060 CoRoent XL Ancho, 10x22x60mm Lordótica
CoRoent XLW Ancho, 10x22x45mm Lordótica	6914260 CoRoent XL Ancho, 14x22x60mm
CoRoent XLW Ancho, 10x22x50mm Lordótica	6921460 CoRoent XL Ancho, 14x22x60mm Lordótica
CoRoent XLW Ancho, 10x22x55mm Lordótica	6916260 CoRoent XL Ancho, 16x22x60mm
CoRoent XLW, 12x22x40mm Lordótica	6921660 CoRoent XL Ancho, 16x22x60mm Lordótica
CoRoent XLW Ancho, 12x22x45mm Lordótica	6908845 CoRoent XL, 8x18x45mm
CoRoent XLW Ancho, 12x22x50mm Lordótica	6914845 CoRoent XL, 14x18x45mm
CoRoent XLW Ancho, 12x22x55mm Lordótica	6914855 CoRoent XL, 14x18x55mm
CoRoent XLW, 14x22x40mm Lordótica	6916845 CoRoent XL, 16x18x45mm
CoRoent XLW Ancho, 14x22x45mm Lordótica	6981040 CoRoent XL, 10x18x40mm 10°
CoRoent XLW Ancho, 14x22x50mm Lordótica	6981045 CoRoent XL, 10x18x45mm 10°
CoRoent XLW, 14x22x55mm Lordótica	6921044 CoRoent XLR, 10x34x24 8°
CoRoent XLW, 16x22x40mm Lordótica	6921244 CoRoent XLR, 12x34x24 8°
CoRoent XLW Ancho, 14x22x45mm Lordótica	6921444 CoRoent XLR, 14x34x24 8°
CoRoent XLW Ancho, 14x22x50mm Lordótica	6921644 CoRoent XLR, 16x34x24 8°
CoRoent XLW Ancho, 14x22x55mm Lordótica	6921844 CoRoent XLR, 18x34x24 8°
CoRoent XLW, 16x22x40mm Lordótica	6922044 CoRoent XLR, 20x34x24 8°
CoRoent XLW Ancho, 16x22x45mm Lordótica	6921088 CoRoent XLR, 10x38x28 8°
CoRoent XLW Ancho, 16x22x55mm Lordótica	6921288 CoRoent XLR, 12x38x28 8°
CoRoent XLW Ancho, 16x22x45mm Lordótica	6809714 CoRoent Pequeño, 9x11x14mm 5° Lordótica
CoRoent XLW Ancho, 16x22x45mm Lordótica	6810714 CoRoent Pequeño, 10x11x14mm 5° Lordótica
CoRoent XLW Ancho,	6811714 CoRoent Pequeño,



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A. N. M. A. T.*

<p>16x22x50mm Lordótica CoRoent XLW Ancho, 16x22x55mm Lordótica CoRoent XL, 14x18x60mm CoRoent XL, 16x18x60mm CoRoent XL Ancho, 10x22x60mm CoRoent XL Ancho, 10x22x60mm Lordótica CoRoent XL Ancho, 14x22x60mm CoRoent XL Ancho, 14x22x60mm Lordótica CoRoent XL Ancho, 16x22x60mm CoRoent XL Ancho, 16x22x60mm Lordótica CoRoent XL, 8x18x45mm CoRoent XL, 14x18x45mm CoRoent XL, 14x18x55mm CoRoent XL, 16x18x45mm CoRoent XL, 10x18x40mm 10 CoRoent XL, 10x18x45mm 10 CoRoent XLR, 10x34x24 8° CoRoent XLR, 12x34x24 8° CoRoent XLR, 14x34x24 8° CoRoent XLR, 16x34x24 8° CoRoent XLR, 18x34x24 8° CoRoent XLR, 20x34x24 8° CoRoent XLR, 10x38x28 8° CoRoent XLR, 12x38x28 8° CoRoent Pequeño, 9x11x14mm 5° Lordótica CoRoent Pequeño, 10x11x14mm 5°</p>	<p>11x11x14mm 5° Lordótica 6812714 CoRoent Pequeño, 12x11x14mm 5° Lordótica 6805815 CoRoent Pequeño, 5x13x15mm Lordótica Plus 6806815 CoRoent Pequeño, 6x13x15mm Lordótica Plus 6807815 CoRoent Pequeño, 7x13x15mm Lordótica Plus 6808815 CoRoent Pequeño, 8x13x15mm Lordótica Plus 6809815 CoRoent Pequeño, 9x13x15mm Lordótica Plus 6810815 CoRoent Pequeño, 10x13x15mm Lordótica Plus 6811815 CoRoent Pequeño, 11x13x15mm Lordótica Plus 6812815 CoRoent Pequeño, 12x13x15mm Lordótica Plus 6790226 CoRoent Bloque Pequeño, 6x17x14mm 7° 6790228 CoRoent Bloque Pequeño, 8x17x14mm 7° 6790230 CoRoent Bloque Pequeño, 10x17x14mm 7° 6790232 CoRoent Bloque Pequeño, 12x17x14mm 7° 6791712 CoRoent Tornillo SI, 4x12mm Rosca 6791713 CoRoent Tornillo SI, 4x13mm Rosca 6791714 CoRoent Tornillo SI, 4x14mm Rosca 6791715 CoRoent Tornillo SI, 4x15mm Rosca 6791716 CoRoent Tornillo SI, 4x16mm Rosca 6791812 CoRoent Tornillo SI, 4.5x12mm Rescate 6791813 CoRoent Tornillo SI, 4.5x13mm Rescate 6791814 CoRoent Tornillo SI, 4.5x14mm Rescate 6791815 CoRoent Tornillo SI, 4.5x15mm Rescate 6791816 CoRoent Tornillo SI, 4.5x16mm Rescate 6791205 CoRoent Bloqueo Contorneado, 5x17x14-7°, Medial Inferior</p>
---	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A. N. M. S. J.

Lordótica CoRoent Pequeño, 11x11x14mm 5° Lordótica CoRoent Pequeño, 12x11x14mm 5° Lordótica CoRoent Pequeño, 5x13x15mm Lordótica Plus CoRoent Pequeño, 6x13x15mm Lordótica Plus CoRoent Pequeño, 7x13x15mm Lordótica Plus CoRoent Pequeño, 8x13x15mm Lordótica Plus CoRoent Pequeño, 9x13x15mm Lordótica Plus CoRoent Pequeño, 10x13x15mm Lordótica Plus CoRoent Pequeño, 11x13x15mm Lordótica Plus CoRoent Pequeño, 12x13x15mm Lordótica Plus CoRoent Bloque Pequeño, 6x17x14mm 7° CoRoent Bloque Pequeño, 8x17x14mm 7° CoRoent Bloque Pequeño, 10x17x14mm 7° CoRoent Bloque Pequeño, 12x17x14mm 7° CoRoent Tornillo SI, 4x12mm Rosca CoRoent Tornillo SI, 4x13mm Rosca CoRoent Tornillo SI, 4x14mm Rosca CoRoent Tornillo SI, 4x15mm Rosca CoRoent Tornillo SI, 4x16mm Rosca CoRoent Tornillo SI, 4.5x12mm Rescate	6791206 CoRoent Bloqueo Contorneado, 6x17x14-7°, Medial Inferior 6791207 CoRoent Bloqueo Contorneado, 7x17x14-7°, Medial Inferior 6791208 CoRoent Bloqueo Contorneado, 8x17x14-7°, Medial Inferior 6791209 CoRoent Bloqueo Contorneado, 9x17x14-7°, Medial Inferior 6791210 CoRoent Bloqueo Contorneado, 10x17x14-7°, Medial Inferior 6791211 CoRoent Bloqueo Contorneado, 11x17x14-7°, Medial Inferior 6791212 CoRoent Bloqueo Contorneado, 12x17x14-7°, Medial Inferior 6791213 CoRoent Bloqueo Contorneado, 13x17x14-7°, Medial Inferior 6791214 CoRoent Bloqueo Contorneado, 14x17x14-7°, Medial Inferior 6791215 CoRoent Bloqueo Contorneado, 15x17x14-7°, Medial Inferior 6791216 CoRoent Bloqueo Contorneado, 16x17x14-7°, Medial Inferior 6101045 CoRoent XLCT, 10x18x45mm 6101050 CoRoent XLCT, 10x18x50mm 6101055 CoRoent XLCT, 10x18x55mm 6101245 CoRoent XLCT, 12x18x45mm 6101255 CoRoent XLCT, 12x18x55mm 6101260 CoRoent XLCT, 12x18x60mm 6101450 CoRoent XLCT, 14x18x50mm 6101455 CoRoent XLCT, 14x18x55mm 6101645 CoRoent XLCT, 16x18x45mm 6101650 CoRoent XLCT, 16x18x50mm 6101655 CoRoent XLCT, 16x18x55mm 6101660 CoRoent XLCT, 16x18x60mm 6111060 CoRoent XLCT, 10x18x60mm 10° 7871445 CoRoent XLF, 14x18x45mm 10° 7871645 CoRoent XLF, 16x18x45mm 10°
--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 A. N. M. A. J.

CoRoent Tornillo SI, 4.5x13mm Rescate	7871845 CoRoent XLF, 18x18x45mm 10°
CoRoent Tornillo SI, 4.5x14mm Rescate	7870850 CoRoent XLF, 8x18x50mm 10°
CoRoent Tornillo SI, 4.5x15mm Rescate	7871650 CoRoent XLF, 16x18x50mm 10°
CoRoent Tornillo SI, 4.5x16mm Rescate	7871850 CoRoent XLF, 18x18x50mm 10°
CoRoent Bloqueo Contorneado, 5x17x14- 7°, Medial Inferior	7870855 CoRoent XLF, 8x18x55mm 10°
CoRoent Bloqueo Contorneado, 6x17x14- 7°, Medial Inferior	7871455 CoRoent XLF, 14x18x55mm 10°
CoRoent Bloqueo Contorneado, 7x17x14- 7°, Medial Inferior	7871655 CoRoent XLF, 16x18x55mm 10°
CoRoent Bloqueo Contorneado, 8x17x14- 7°, Medial Inferior	7871855 CoRoent XLF, 18x18x55mm 10°
CoRoent Bloqueo Contorneado, 9x17x14- 7°, Medial Inferior	7871060 CoRoent XLF, 10x18x60mm 10°
CoRoent Bloqueo Contorneado, 10x17x14- 7°, Medial Inferior	7871260 CoRoent XLF, 12x18x60mm 10°
CoRoent Bloqueo Contorneado, 11x17x14- 7°, Medial Inferior	7871460 CoRoent XLF, 14x18x60mm 10°
CoRoent Bloqueo Contorneado, 12x17x14- 7°, Medial Inferior	7871660 CoRoent XLF, 16x18x60mm 10°
CoRoent Bloqueo Contorneado, 13x17x14- 7°, Medial Inferior	7861445 CoRoent XLF, 14x18x45mm
CoRoent Bloqueo Contorneado, 14x17x14- 7°, Medial Inferior	7861050 CoRoent XLF, 10x18x50mm
CoRoent Bloqueo Contorneado, 15x17x14- 7°, Medial Inferior	7861250 CoRoent XLF, 12x18x50mm
CoRoent Bloqueo Contorneado, 16x17x14- 7°, Medial Inferior	7861055 CoRoent XLF, 10x18x55mm
CoRoent XLCT, 10x18x45mm	7861255 CoRoent XLF, 12x18x55mm
CoRoent XLCT, 10x18x50mm	7861060 CoRoent XLF, 10x18x60mm
CoRoent XLCT, 10x18x55mm	6040823 CoRoent Grande, 8x9x23 4°
	6040923 CoRoent Grande, 9x9x23 4°
	6041123 CoRoent Grande, 11x9x23 4°
	6041323 CoRoent Grande, 13x9x23 4°
	6041423 CoRoent Grande, 14x9x23 4°
	6040828 CoRoent Grande, 8x9x28 4°
	6040928 CoRoent Grande, 9x9x28 4°
	6041028 CoRoent Grande, 10x9x28 4°
	6041128 CoRoent Grande, 11x9x28 4°
	6041228 CoRoent Grande, 12x9x28 4°
	6041328 CoRoent Grande, 13x9x28 4°
	6041428 CoRoent Grande, 14x9x28 4°
	6080823 CoRoent Grande, 8x9x23 8°
	6080923 CoRoent Grande, 9x9x23 8°
	6081023 CoRoent Grande, 10x9x23 8°
	6081223 CoRoent Grande, 12x9x23 8°
	6081323 CoRoent Grande, 13x9x23 8°
	6081423 CoRoent Grande, 14x9x23 8°
	6080828 CoRoent Grande, 8x9x28 8°
	6080928 CoRoent Grande, 9x9x28 8°



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.F.

CoRoent XLCT,12x18x45mm	6081328 CoRoent Grande, 13x9x28 8°
CoRoent XLCT,12x18x55mm	6081428 CoRoent Grande, 14x9x28 8°
CoRoent XLCT,12x18x60mm	6120823 CoRoent Grande, 8x9x23 12°
CoRoent XLCT,14x18x50mm	6121023 CoRoent Grande, 10x9x23 12°
CoRoent XLCT,14x18x55mm	6121223 CoRoent Grande, 12x9x23 12°
CoRoent XLCT,16x18x45mm	6120828 CoRoent Grande, 8x9x28 12°
CoRoent XLCT,16x18x50mm	INSTRUMENTAL ASOCIADO
CoRoent XLCT,16x18x55mm	6714120 CoRoent LI, 14x11x20mm
CoRoent XLCT,16x18x60mm	6708126 CoRoent LI, 8x11x26mm
CoRoent XLCT,10x18x60mm 10°	6709126 CoRoent LI, 9x11x26mm
CoRoent XLF, 14x18x45mm 10°	6710126 CoRoent LI, 10x11x26mm
CoRoent XLF, 16x18x45mm 10°	6711126 CoRoent LI, 11x11x26mm
CoRoent XLF, 18x18x45mm 10°	6712126 CoRoent LI, 12x11x26mm
CoRoent XLF, 8x18x50mm 10°	6713126 CoRoent LI, 13x11x26mm
CoRoent XLF, 16x18x50mm 10°	6714126 CoRoent LI, 14x11x26mm
CoRoent XLF, 18x18x50mm 10°	6708132 CoRoent LI, 8x11x32mm
CoRoent XLF, 8x18x55mm 10°	6709132 CoRoent LI, 9x11x32mm
CoRoent XLF, 14x18x55mm 10°	6710132 CoRoent LI, 10x11x32mm
CoRoent XLF, 16x18x55mm 10°	6711132 CoRoent LI, 11x11x32mm
CoRoent XLF, 18x18x55mm 10°	6712132 CoRoent LI, 12x11x32mm
CoRoent XLF, 10x18x60mm 10°	6713132 CoRoent LI, 13x11x32mm
CoRoent XLF, 12x18x60mm 10°	6714132 CoRoent LI, 14x11x32mm
CoRoent XLF, 14x18x60mm 10°	6808925 CoRoent LN, 8x9x25mm
CoRoent XLF,	6810925 CoRoent LN, 10x9x25mm
	6812925 CoRoent LN, 12x9x25mm
	6814925 CoRoent LN, 14x9x25mm
	6808930 CoRoent LN, 8x9x30mm
	6810930 CoRoent LN, 10x9x30mm
	6812930 CoRoent LN, 12x9x30mm
	6814930 CoRoent LN, 14x9x30mm
	6808125 CoRoent LW, 8x11x25mm
	6808130 CoRoent LW, 8x11x30mm
	6810125 CoRoent LW, 10x11x25mm
	6810130 CoRoent LW, 10x11x30mm
	6812125 CoRoent LW, 12x11x25mm
	6812130 CoRoent LW, 12x11x30mm
	6814125 CoRoent LW, 14x11x25mm
	6814130 CoRoent LW, 14x11x30mm
	6708820 CoRoent LT, 8x9x20 8°
	6710820 CoRoent LT, 10x9x20 8°
	6712820 CoRoent LT, 12x9x20 8°
	6714820 CoRoent LT, 14x9x20 8°
	6708520 CoRoent LT, 8x9x20 15°
	6710520 CoRoent LT, 10x9x20 15°
	6712520 CoRoent LT, 12x9x20 15°
	7860850 CoRoent XLF, 8x18x50mm
	7870855 CoRoent XLF, 8x18x55 10°
	7871055 CoRoent XLF, 10x18x55 10°
	7871660 CoRoent XLF, 16x18x60 10°



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T.

10x18x50mm CoRoent XLF, 12x18x50mm CoRoent XLF, 10x18x55mm CoRoent XLF, 12x18x55mm CoRoent XLF, 10x18x60mm CoRoent Grande, 8x9x23 4° CoRoent Grande, 9x9x23 4° CoRoent Grande, 11x9x23 4° CoRoent Grande, 13x9x23 4° CoRoent Grande, 14x9x23 4° CoRoent Grande, 8x9x28 4° CoRoent Grande, 9x9x28 4° CoRoent Grande, 10x9x28 4° CoRoent Grande, 11x9x28 4° CoRoent Grande, 12x9x28 4° CoRoent Grande, 13x9x28 4° CoRoent Grande, 14x9x28 4° CoRoent Grande, 8x9x23 8° CoRoent Grande, 9x9x23 8° CoRoent Grande, 10x9x23 8° CoRoent Grande, 12x9x23 8° CoRoent Grande, 13x9x23 8° CoRoent Grande, 14x9x23 8° CoRoent Grande, 8x9x28 8° CoRoent Grande, 9x9x28 8° CoRoent Grande,	6170855 CoRoent XLFW, 8x22x55mm Lordótica 6170860 CoRoent XLFW, 8x22x60mm Lordótica 6171060 CoRoent XLFW, 10x22x60mm Lordótica 6171255 CoRoent XLFW, 12x22x55mm Lordótica 6171260 CoRoent XLFW, 12x22x60mm Lordótica 6160850 CoRoent XLFW, 8x22x50mm 6160855 CoRoent XLFW, 8x22x55mm 6160860 CoRoent XLFW, 8x22x60mm 6161060 CoRoent XLFW, 10x22x60mm 6161250 CoRoent XLFW, 12x22x50mm 6161255 CoRoent XLFW, 12x22x55mm 6161260 CoRoent XLFW, 12x22x60mm 6161450 CoRoent XLFW, 14x22x50mm 6161455 CoRoent XLFW, 14x22x55mm 6161460 CoRoent XLFW, 14x22x60mm 6170850 CoRoent XLFW, 8x22x50mm Lordótica 6171050 CoRoent XLFW, 10x22x50mm Lordótica 6171250 CoRoent XLFW, 12x22x50mm Lordótica 6171450 CoRoent XLFW, 14x22x50mm Lordótica 6171455 CoRoent XLFW, 14x22x55mm Lordótica 6171460 CoRoent XLFW, 14x22x60mm Lordótica 6200245 CoRoent XL-H, 2x22x45mm 20° 6200445 CoRoent XL-H, 4x22x45mm 20° 6200645 CoRoent XL-H, 6x22x45mm 20° 6200845 CoRoent XL-H, 8x22x45mm 20° 6201045 CoRoent XL-H, 10x22x45mm 20° 6200250 CoRoent XL-H, 2x22x50mm 20° 6200650 CoRoent XL-H, 6x22x50mm 20° 6200850 CoRoent XL-H, 8x22x50mm 20° 6201050 CoRoent XL-H, 10x22x50mm 20°
---	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

13x9x28 8° CoRoent Grande, 14x9x28 8° CoRoent Grande, 8x9x23 12° CoRoent Grande, 10x9x23 12° CoRoent Grande, 12x9x23 12° CoRoent Grande, 8x9x28 12° INSTRUMENTAL ASOCIADO CoRoent LI, 14x11x20mm CoRoent LI, 8x11x26mm CoRoent LI, 9x11x26mm CoRoent LI, 10x11x26mm CoRoent LI, 11x11x26mm CoRoent LI, 12x11x26mm CoRoent LI, 13x11x26mm CoRoent LI, 14x11x26mm CoRoent LI, 8x11x32mm CoRoent LI, 9x11x32mm CoRoent LI, 10x11x32mm CoRoent LI, 11x11x32mm CoRoent LI, 12x11x32mm CoRoent LI, 13x11x32mm CoRoent LI, 14x11x32mm CoRoent LN, 8x9x25mm CoRoent LN, 10x9x25mm CoRoent LN, 12x9x25mm CoRoent LN, 14x9x25mm CoRoent LN, 8x9x30mm CoRoent LN, 10x9x30mm CoRoent LN, 12x9x30mm CoRoent LN, 14x9x30mm CoRoent LW, 8x11x25mm CoRoent LW, 8x11x30mm	6200255 CoRoent XL-H, 2x22x55mm 20° 6200455 CoRoent XL-H, 4x22x55mm 20° 6200855 CoRoent XL-H, 8x22x55mm 20° 6201055 CoRoent XL-H, 10x22x55mm 20° 6200260 CoRoent XL-H, 2x22x60mm 20° 6200460 CoRoent XL-H, 4x22x60mm 20° 6200660 CoRoent XL-H, 6x22x60mm 20° 6201060 CoRoent XL-H, 10x22x60mm 20° 6300245 CoRoent XL-H, 2x22x45mm 30° 6300445 CoRoent XL-H, 4x22x45mm 30° 6300845 CoRoent XL-H, 8x22x45mm 30° 6301045 CoRoent XL-H, 10x22x45mm 30° 6300250 CoRoent XL-H, 2x22x50mm 30° 6300450 CoRoent XL-H, 4x22x50mm 30° 6921488 CoRoent XLR, 14x38x28 8° 6921688 CoRoent XLR, 16x38x28 8° 6921888 CoRoent XLR, 18x38x28 8° 6922088 CoRoent XLR, 20x38x28 8° 6931688 CoRoent XLR, 16x38x28 15° 6931888 CoRoent XLR, 18x38x28 15° 6932088 CoRoent XLR, 20x38x28 15° 6990625 CoRoent XLT, 6x16x25mm 6990630 CoRoent XLT, 6x16x30mm 6990635 CoRoent XLT, 6x16x35mm 6990640 CoRoent XLT, 6x16x40mm 6990825 CoRoent XLT, 8x16x25mm 6990830 CoRoent XLT, 8x16x30mm 6990835 CoRoent XLT, 8x16x35mm 6990840 CoRoent XLT, 8x16x40mm 6991030 CoRoent XLT, 10x16x30mm 6991035 CoRoent XLT, 10x16x35mm 6991225 CoRoent XLT, 12x16x25mm 6991230 CoRoent XLT, 12x16x30mm 6991235 CoRoent XLT, 12x16x35mm 6991240 CoRoent XLT, 12x16x40mm 6208045 CoRoent XL-XW, 8x26x45mm 6208050 CoRoent XL-XW, 8x26x50mm
--	--

2

14





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 A. N. M. A. F.

CoRoent LW, 10x11x25mm	6208055 CoRoent XL-XW, 8x26x55mm
CoRoent LW, 10x11x30mm	6208060 CoRoent XL-XW, 8x26x60mm
CoRoent LW, 12x11x25mm	6210045 CoRoent XL-XW, 10x26x45mm
CoRoent LW, 12x11x30mm	6210050 CoRoent XL-XW, 10x26x50mm
CoRoent LW, 14x11x25mm	6210055 CoRoent XL-XW, 10x26x55mm
CoRoent LW, 14x11x30mm	6210060 CoRoent XL-XW, 10x26x60mm
CoRoent LT, 8x9x20 8°	6212045 CoRoent XL-XW, 12x26x45mm
CoRoent LT, 10x9x20 8°	6212050 CoRoent XL-XW, 12x26x50mm
CoRoent LT, 12x9x20 8°	6212055 CoRoent XL-XW, 12x26x55mm
CoRoent LT, 14x9x20 8°	6212060 CoRoent XL-XW, 12x26x60mm
CoRoent LT, 8x9x20 15°	6214045 CoRoent XL-XW, 14x26x45mm
CoRoent LT, 10x9x20 15°	6214050 CoRoent XL-XW, 14x26x50mm
CoRoent LT, 12x9x20 15°	6214055 CoRoent XL-XW, 14x26x55mm
CoRoent XLF, 8x18x50mm	6214060 CoRoent XL-XW, 14x26x60mm
CoRoent XLF, 8x18x55 10°	6216045 CoRoent XL-XW, 16x26x45mm
CoRoent XLF, 10x18x55 10°	6216050 CoRoent XL-XW, 16x26x50mm
CoRoent XLF, 16x18x60 10°	6216055 CoRoent XL-XW, 16x26x55mm
CoRoent XLFW, 8x22x55mm Lordótica	6216060 CoRoent XL-XW, 16x26x60mm
CoRoent XLFW, 8x22x60mm Lordótica	6208145 CoRoent XL-XW, 8x26x45mm 10°
CoRoent XLFW, 10x22x60mm Lordótica	6208150 CoRoent XL-XW, 8x26x50mm 10°
CoRoent XLFW, 12x22x55mm Lordótica	6208155 CoRoent XL-XW, 8x26x55mm 10°
CoRoent XLFW, 12x22x60mm Lordótica	6208160 CoRoent XL-XW, 8x26x60mm 10°
CoRoent XLFW, 8x22x50mm	6210145 CoRoent XL-XW, 10x26x45mm 10°
CoRoent XLFW, 8x22x55mm	6210150 CoRoent XL-XW, 10x26x50mm 10°
CoRoent XLFW, 8x22x60mm	6210155 CoRoent XL-XW, 10x26x55mm 10°
CoRoent XLFW, 10x22x60mm	6210160 CoRoent XL-XW, 10x26x60mm 10°
CoRoent XLFW, 12x22x50mm	
CoRoent XLFW, 12x22x55mm	
CoRoent XLFW, 12x22x60mm	



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

12x22x60mm CoRoent XLFW, 14x22x50mm CoRoent XLFW, 14x22x55mm CoRoent XLFW, 14x22x60mm CoRoent XLFW, 8x22x50mm Lordótica CoRoent XLFW, 10x22x50mm Lordótica CoRoent XLFW, 12x22x50mm Lordótica CoRoent XLFW, 14x22x50mm Lordótica CoRoent XLFW, 14x22x55mm Lordótica CoRoent XLFW, 14x22x60mm Lordótica CoRoent XL-H, 2x22x45mm 20° CoRoent XL-H, 4x22x45mm 20° CoRoent XL-H, 6x22x45mm 20° CoRoent XL-H, 8x22x45mm 20° CoRoent XL-H, 10x22x45mm 20° CoRoent XL-H, 2x22x50mm 20° CoRoent XL-H, 6x22x50mm 20° CoRoent XL-H, 8x22x50mm 20° CoRoent XL-H, 10x22x50mm 20° CoRoent XL-H, 2x22x55mm 20° CoRoent XL-H, 4x22x55mm 20° CoRoent XL-H, 8x22x55mm 20° CoRoent XL-H, 10x22x55mm 20° CoRoent XL-H, 2x22x60mm 20° CoRoent XL-H, 4x22x60mm 20° CoRoent XL-H, 6x22x60mm 20°	6212145 CoRoent XL-XW, 12x26x45mm 10° 6212150 CoRoent XL-XW, 12x26x50mm 10° 6212155 CoRoent XL-XW, 12x26x55mm 10° 6212160 CoRoent XL-XW, 12x26x60mm 10° 6214145 CoRoent XL-XW, 14x26x45mm 10° 6214150 CoRoent XL-XW, 14x26x50mm 10° 6214155 CoRoent XL-XW, 14x26x55mm 10° 6214160 CoRoent XL-XW, 14x26x60mm 10° 6216145 CoRoent XL-XW, 16x26x45mm 10° 6216150 CoRoent XL-XW, 16x26x50mm 10° 6216155 CoRoent XL-XW, 16x26x55mm 10° 6216160 CoRoent XL-XW, 16x26x60mm 10° 6850104 CoRoent Pequeño Contorneado, S4 6850105 CoRoent Pequeño Contorneado, S5 6850106 CoRoent Pequeño Contorneado, S6 6850107 CoRoent Pequeño Contorneado, S7 6850108 CoRoent Pequeño Contorneado, S8 6850204 CoRoent Pequeño Contorneado, M4 6850205 CoRoent Pequeño Contorneado, M5 6850206 CoRoent Pequeño Contorneado, M6 6850207 CoRoent Pequeño Contorneado, M7 6850208 CoRoent Pequeño Contorneado, M8 6805115 CoRoent Pequeño, 5x11x14mm 6806115 CoRoent Pequeño, 6x11x14mm 6807115 CoRoent Pequeño, 7x11x14mm 6808115 CoRoent Pequeño,
---	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Instrumentos  
 A.N.M.A.T.

CoRoent XL-H, 10x22x60mm 20°	8x11x14mm
CoRoent XL-H, 2x22x45mm 30°	6809115 CoRoent Pequeño, 9x11x14mm
CoRoent XL-H, 4x22x45mm 30°	6810115 CoRoent Pequeño, 10x11x14mm
CoRoent XL-H, 8x22x45mm 30°	6811115 CoRoent Pequeño, 11x11x14mm
CoRoent XL-H, 10x22x45mm 30°	6812115 CoRoent Pequeño, 12x11x14mm
CoRoent XL-H, 2x22x50mm 30°	6805714 CoRoent Pequeño, 5x11x14mm 5° Lordótica
CoRoent XL-H, 4x22x50mm 30°	6806714 CoRoent Pequeño, 6x11x14mm 5° Lordótica
CoRoent XLR, 14x38x28 8°	6807714 CoRoent Pequeño, 7x11x14mm 5° Lordótica
CoRoent XLR, 16x38x28 8°	6808714 CoRoent Pequeño, 8x11x14mm 5° Lordótica
CoRoent XLR, 18x38x28 8°	7861260 CoRoent XLF, 12x18x60mm
CoRoent XLR, 20x38x28 8°	7861850 CoRoent XLF, 18x18x50mm
CoRoent XLR, 16x38x28 15°	7861860 CoRoent XLF, 18x18x60mm
CoRoent XLR, 18x38x28 15°	5486525 Tornillo CoRoent XLF, 6.5x25mm Variable
CoRoent XLR, 20x38x28 15°	5486540 Tornillo CoRoent XLF, 6.5x40mm Variable
CoRoent XLT, 6x16x25mm	5486545 Tornillo CoRoent XLF, 6.5x45mm Variable
CoRoent XLT, 6x16x30mm	5486550 Tornillo CoRoent XLF, 6.5x50mm Variable
CoRoent XLT, 6x16x35mm	5486555 Tornillo CoRoent XLF, 6.5x55mm Variable
CoRoent XLT, 6x16x40mm	5486560 Tornillo CoRoent XLF, 6.5x60mm Variable
CoRoent XLT, 8x16x25mm	5486565 Tornillo CoRoent XLF, 6.5x65mm Variable
CoRoent XLT, 8x16x30mm	5486570 Tornillo CoRoent XLF, 6.5x70mm Variable
CoRoent XLT, 8x16x35mm	5476525 Tornillo CoRoent XLF, 6.5x25mm Fijo
CoRoent XLT, 8x16x40mm	5476540 Tornillo CoRoent XLF, 6.5x40mm Fijo
CoRoent XLT, 10x16x30mm	5476545 Tornillo CoRoent XLF, 6.5x45mm Fijo
CoRoent XLT, 10x16x35mm	5476550 Tornillo CoRoent XLF, 6.5x50mm Fijo
CoRoent XLT, 12x16x25mm	5476555 Tornillo CoRoent XLF, 6.5x55mm Fijo
	5476560 Tornillo CoRoent XLF, 6.5x60mm Fijo
	5476565 Tornillo CoRoent XLF, 6.5x65mm Fijo



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

CoRoent XLT, 12x16x30mm	5476570 Tornillo CoRoent XLF, 6.5x70mm Fijo
CoRoent XLT, 12x16x35mm	5485525 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x25mm Variable
CoRoent XLT, 12x16x40mm	5485540 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x40mm Variable
CoRoent XL-XW, 8x26x45mm	5485545 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x45mm Variable
CoRoent XL-XW, 8x26x50mm	5485550 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x50mm Variable
CoRoent XL-XW, 8x26x55mm	5485555 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x55mm Variable
CoRoent XL-XW, 8x26x60mm	5485560 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x60mm Variable
CoRoent XL-XW, 10x26x45mm	5485565 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x65mm Variable
CoRoent XL-XW, 10x26x50mm	5485570 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x70mm Variable
CoRoent XL-XW, 10x26x55mm	5475525 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x25mm Fijo
CoRoent XL-XW, 10x26x60mm	5475540 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x40mm Fijo
CoRoent XL-XW, 12x26x45mm	5475545 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x45mm Fijo
CoRoent XL-XW, 12x26x50mm	5475550 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x50mm Fijo
CoRoent XL-XW, 12x26x55mm	5475555 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x55mm Fijo
CoRoent XL-XW, 12x26x60mm	5475560 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x60mm Fijo
CoRoent XL-XW, 14x26x45mm	5475565 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x65mm Fijo
CoRoent XL-XW, 14x26x50mm	5475570 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x70mm Fijo
CoRoent XL-XW, 14x26x55mm	6210845 CoRoent XLK, 8x18x45mm
CoRoent XL-XW, 14x26x60mm	6210850 CoRoent XLK, 8x18x50mm
CoRoent XL-XW, 16x26x45mm	6210855 CoRoent XLK, 8x18x55mm
CoRoent XL-XW, 16x26x50mm	6211045 CoRoent XLK, 10x18x45mm
CoRoent XL-XW, 16x26x55mm	6211050 CoRoent XLK, 10x18x50mm
CoRoent XL-XW, 16x26x60mm	6211055 CoRoent XLK, 10x18x55mm
CoRoent XL-XW, 8x26x45mm 10°	6211060 CoRoent XLK, 10x18x60mm
CoRoent XL-XW, 8x26x50mm 10°	6211250 CoRoent XLK, 12x18x50mm
CoRoent XL-XW,	6211255 CoRoent XLK, 12x18x55mm
	6211260 CoRoent XLK, 12x18x60mm
	6211445 CoRoent XLK, 14x18x45mm
	6211450 CoRoent XLK, 14x18x50mm
	6211455 CoRoent XLK, 14x18x55mm
	6211460 CoRoent XLK, 14x18x60mm
	6211645 CoRoent XLK, 16x18x45mm
	6211655 CoRoent XLK, 16x18x55mm
	6211660 CoRoent XLK, 16x18x60mm



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 A. N. M. A. J.

8x26x55mm 10° CoRoent XL-XW, 8x26x60mm 10° CoRoent XL-XW, 10x26x45mm 10° CoRoent XL-XW, 10x26x50mm 10° CoRoent XL-XW, 10x26x55mm 10° CoRoent XL-XW, 10x26x60mm 10° CoRoent XL-XW, 12x26x45mm 10° CoRoent XL-XW, 12x26x50mm 10° CoRoent XL-XW, 12x26x55mm 10° CoRoent XL-XW, 12x26x60mm 10° CoRoent XL-XW, 14x26x45mm 10° CoRoent XL-XW, 14x26x50mm 10° CoRoent XL-XW, 14x26x55mm 10° CoRoent XL-XW, 14x26x60mm 10° CoRoent XL-XW, 16x26x45mm 10° CoRoent XL-XW, 16x26x50mm 10° CoRoent XL-XW, 16x26x55mm 10° CoRoent XL-XW, 16x26x60mm 10° CoRoent Pequeño Contorneado, S4 CoRoent Pequeño Contorneado, S5 CoRoent Pequeño Contorneado, S6 CoRoent Pequeño Contorneado, S7 CoRoent Pequeño Contorneado, S8 CoRoent Pequeño Contorneado, M4 CoRoent Pequeño Contorneado, M5 CoRoent Pequeño	6211845 CoRoent XLK, 18x18x45mm 6211850 CoRoent XLK, 18x18x50mm 6211855 CoRoent XLK, 18x18x55mm 6211860 CoRoent XLK, 18x18x60mm 6220845 CoRoent XLK, 8x18x45mm 10° 6220855 CoRoent XLK, 8x18x55mm 10° 6220860 CoRoent XLK, 8x18x60mm 10° 6221045 CoRoent XLK, 10x18x45mm 10° 6221050 CoRoent XLK, 10x18x50mm 10° 6221060 CoRoent XLK, 10x18x60mm 10° 6221245 CoRoent XLK, 12x18x45mm 10° 6221250 CoRoent XLK, 12x18x50mm 10° 6221255 CoRoent XLK, 12x18x55mm 10° 6221260 CoRoent XLK, 12x18x60mm 10° 6221445 CoRoent XLK, 14x18x45mm 10° 6221450 CoRoent XLK, 14x18x50mm 10° 6221455 CoRoent XLK, 14x18x55mm 10° 6221460 CoRoent XLK, 14x18x60mm 10° 6221645 CoRoent XLK, 16x18x45mm 10° 6221650 CoRoent XLK, 16x18x50mm 10° 6221655 CoRoent XLK, 16x18x55mm 10° 6221660 CoRoent XLK, 16x18x60mm 10° 6221845 CoRoent XLK, 18x18x45mm 10° 6221850 CoRoent XLK, 18x18x50mm 10° 6221855 CoRoent XLK, 18x18x55mm 10° 6221860 CoRoent XLK, 18x18x60mm 10° (Lugar de elaboración: 1- 4670 E. Shelby Dr., Memphis TN 38118,
---	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.S.T.

Contorneado, M6 CoRoent Pequeño Contorneado, M7 CoRoent Pequeño Contorneado, M8 CoRoent Pequeño, 5x11x14mm CoRoent Pequeño, 6x11x14mm CoRoent Pequeño, 7x11x14mm CoRoent Pequeño, 8x11x14mm CoRoent Pequeño, 9x11x14mm CoRoent Pequeño, 10x11x14mm CoRoent Pequeño, 11x11x14mm CoRoent Pequeño, 12x11x14mm CoRoent Pequeño, 5x11x14mm 5° Lordótica CoRoent Pequeño, 6x11x14mm 5° Lordótica CoRoent Pequeño, 7x11x14mm 5° Lordótica CoRoent Pequeño, 8x11x14mm 5° Lordótica CoRoent XLF, 12x18x60mm CoRoent XLF, 18x18x50mm CoRoent XLF, 18x18x60mm Tornillo CoRoent XLF, 6.5x25mm Variable Tornillo CoRoent XLF, 6.5x40mm Variable Tornillo CoRoent XLF, 6.5x45mm Variable Tornillo CoRoent XLF, 6.5x50mm Variable Tornillo CoRoent XLF, 6.5x55mm Variable Tornillo CoRoent XLF, 6.5x60mm Variable Tornillo CoRoent XLF, 6.5x65mm Variable Tornillo CoRoent XLF, 6.5x70mm Variable	Estados Unidos. 2- 7475 Lusk Blvd., San Diego, CA 92121 Estados Unidos.) 6941634 Implante Brigade, 16x34x24mm 8° 6951834 Implante Brigade, 18x34x24mm 12° 6951838 Implante Brigade, 18x38x28mm 12° 6971838 Implante Brigade, 18x38x32mm 12° 6908855 CoRoent XL, 8x18x55mm 6980845 CoRoent XL, 8x18x45mm 10° 6980850 CoRoent XL, 8x18x50mm 10° 6980855 CoRoent XL, 8x18x55mm 10° 6980860 CoRoent XL, 8x18x60mm 10° 6981060 CoRoent XL, 10x18x60mm 10° 6921260 CoRoent XL Ancho, 12x22x60mm Lordótica 7860855 CoRoent XLF, 8x18x55mm 7861450 CoRoent XLF, 14x18x50mm 7861455 CoRoent XLF, 14x18x55mm 7861650 CoRoent XLF, 16x18x50mm 7861655 CoRoent XLF, 16x18x55mm 7871050 CoRoent XLF, 10x18x50 10° 7871250 CoRoent XLF, 12x18x50 10° 7871255 CoRoent XLF, 12x18x55 10° 6171055 CoRoent XLFW, 10x22x55mm Lordótica 6161050 CoRoent XLFW, 10x22x50mm 6161055 CoRoent XLFW, 10x22x55mm 6171055 CoRoent XLFW, 10x22x55mm Lordótica 6200450 CoRoent XL-H, 4x22x50mm 20° 6200655 CoRoent XL-H, 6x22x55mm 20° 6200860 CoRoent XL-H, 8x22x60mm 20° 6300645 CoRoent XL-H, 6x22x45mm 30° 6300850 CoRoent XL-H, 8x22x50mm 30° 6300260 CoRoent XL-H, 2x22x60mm 30° 6908840 CoRoent XL, 8x18x40mm 6908855 CoRoent XL, 8x18x55mm 6914840 CoRoent XL, 14x18x40mm 6916840 CoRoent XL, 16x18x40mm 6916855 CoRoent XL, 16x18x55mm
--	---

E  
74



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 A. N. M. A. T.

Tornillo CoRoent XLF, 6.5x25mm Fijo	6980840 CoRoent XL, 8x18x40mm 10°
Tornillo CoRoent XLF, 6.5x40mm Fijo	6980845 CoRoent XL, 8x18x45mm 10°
Tornillo CoRoent XLF, 6.5x45mm Fijo	6980850 CoRoent XL, 8x18x50mm 10°
Tornillo CoRoent XLF, 6.5x50mm Fijo	6980855 CoRoent XL, 8x18x55mm 10°
Tornillo CoRoent XLF, 6.5x55mm Fijo	6981240 CoRoent XL, 12x18x40mm 10°
Tornillo CoRoent XLF, 6.5x60mm Fijo	6981450 CoRoent XL, 14x18x50mm 10°
Tornillo CoRoent XLF, 6.5x65mm Fijo	6981455 CoRoent XL, 14x18x55mm 10°
Tornillo CoRoent XLF, 6.5x70mm Fijo	6981640 CoRoent XL, 16x18x40mm 10°
Tornillo CoRoent XLF, 5.5x25mm Variable	6981645 CoRoent XL, 16x18x45mm 10°
Tornillo CoRoent XLF, 5.5x40mm Variable	6981655 CoRoent XL, 16x18x55mm 10°
Tornillo CoRoent XLF, 5.5x45mm Variable	6980860 CoRoent XL, 8x18x60mm 10°
Tornillo CoRoent XLF, 5.5x50mm Variable	6981060 CoRoent XL, 10x18x60mm 10°
Tornillo CoRoent XLF, 5.5x55mm Variable	6981260 CoRoent XL, 12x18x60mm 10°
Tornillo CoRoent XLF, 5.5x60mm Variable	6981460 CoRoent XL, 14x18x60mm 10°
Tornillo CoRoent XLF, 5.5x65mm Variable	6981660 CoRoent XL, 16x18x60mm 10°
Tornillo CoRoent XLF, 5.5x70mm Variable	6921260 CoRoent XL Ancho, 12x22x60mm Lordótica
Tornillo CoRoent XLF, 5.5x25mm Fijo	6908840 CoRoent XL, 8x18x40mm
Tornillo CoRoent XLF, 5.5x40mm Fijo	6908855 CoRoent XL, 8x18x55mm
Tornillo CoRoent XLF, 5.5x45mm Fijo	6914840 CoRoent XL, 14x18x40mm
Tornillo CoRoent XLF, 5.5x50mm Fijo	6916840 CoRoent XL, 16x18x40mm
Tornillo CoRoent XLF, 5.5x55mm Fijo	6916855 CoRoent XL, 16x18x55mm
Tornillo CoRoent XLF, 5.5x60mm Fijo	6980840 CoRoent XL, 8x18x40mm 10°
Tornillo CoRoent XLF, 5.5x65mm Fijo	6980845 CoRoent XL, 8x18x45mm 10
Tornillo CoRoent XLF, 5.5x70mm Fijo	6980850 CoRoent XL, 8x18x50mm 10
CoRoent XLK, 8x18x45mm	6980855 CoRoent XL, 8x18x55mm 10
	6981240 CoRoent XL, 12x18x40mm 10
	6981450 CoRoent XL, 14x18x50mm 10
	6981455 CoRoent XL, 14x18x55mm 10
	6981640 CoRoent XL, 16x18x40mm 10
	6981645 CoRoent XL, 16x18x45mm 10
	6981655 CoRoent XL, 16x18x55mm 10
	6931288 CoRoent XLR, 12x38x28 15°
	6931488 CoRoent XLR, 14x38x28 15°
	6991025 CoRoent XLT, 10x16x25mm
	6991040 CoRoent XLT, 10x16x40mm
	6790225 CoRoent Bloque Pequeño, 5x17x14mm 7°
	6790227 CoRoent Bloque Pequeño, 7x17x14mm 7°



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

CoRoent XLK, 8x18x50mm	6790229 CoRoent Bloque Pequeño, 9x17x14mm 7°
CoRoent XLK, 8x18x55mm	6790231 CoRoent Bloque Pequeño, 11x17x14mm 7°
CoRoent XLK, 10x18x45mm	6791305 CoRoent Bloqueo Contorneado, 5x17x14-7°, Medical Superior
CoRoent XLK, 10x18x50mm	6791306 CoRoent Bloqueo Contorneado, 6x17x14-7°, Medical Superior
CoRoent XLK, 10x18x55mm	6791307 CoRoent Bloqueo Contorneado, 7x17x14-7°, Medical Superior
CoRoent XLK, 10x18x60mm	6791308 CoRoent Bloqueo Contorneado, 8x17x14-7°, Medical Superior
CoRoent XLK, 12x18x50mm	6791309 CoRoent Bloqueo Contorneado, 9x17x14-7°, Medical Superior
CoRoent XLK, 12x18x55mm	6791310 CoRoent Bloqueo Contorneado, 10x17x14-7°, Medical Superior
CoRoent XLK, 12x18x60mm	6791311 CoRoent Bloqueo Contorneado, 11x17x14-7°, Medical Superior
CoRoent XLK, 14x18x45mm	6791312 CoRoent Bloqueo Contorneado, 12x17x14-7°, Medical Superior
CoRoent XLK, 14x18x50mm	6791313 CoRoent Bloqueo Contorneado, 13x17x14-7°, Medical Superior
CoRoent XLK, 14x18x55mm	6791314 CoRoent Bloqueo Contorneado, 14x17x14-7°, Medical Superior
CoRoent XLK, 14x18x60mm	6791315 CoRoent Bloqueo Contorneado, 15x17x14-7°, Medical Superior
CoRoent XLK, 16x18x45mm	6791316 CoRoent Bloqueo Contorneado, 16x17x14-7°, Medical Superior
CoRoent XLK, 16x18x55mm	6790905 CoRoent Bloqueo Contorneado, 5x17x14-7°, Medial Inferior
CoRoent XLK, 16x18x60mm	6790906 CoRoent Bloqueo Contorneado, 6x17x14-7°, Medial Inferior
CoRoent XLK, 18x18x45mm	6790907 CoRoent Bloqueo Contorneado, 7x17x14-7°, Medial Inferior
CoRoent XLK, 18x18x50mm	6790908 CoRoent Bloqueo Contorneado, 8x17x14-7°, Medial
CoRoent XLK, 18x18x55mm	
CoRoent XLK, 18x18x60mm	
CoRoent XLK, 8x18x45mm 10°	
CoRoent XLK, 8x18x55mm 10°	
CoRoent XLK, 8x18x60mm 10°	
CoRoent XLK, 10x18x45mm 10°	
CoRoent XLK, 10x18x50mm 10°	
CoRoent XLK, 10x18x50mm 10°	





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 S. N. M. S. J.

10x18x60mm 10° CoRoent XLK, 12x18x45mm 10° CoRoent XLK, 12x18x50mm 10° CoRoent XLK, 12x18x55mm 10° CoRoent XLK, 12x18x60mm 10° CoRoent XLK, 14x18x45mm 10° CoRoent XLK, 14x18x50mm 10° CoRoent XLK, 14x18x55mm 10° CoRoent XLK, 14x18x60mm 10° CoRoent XLK, 16x18x45mm 10° CoRoent XLK, 16x18x50mm 10° CoRoent XLK, 16x18x55mm 10° CoRoent XLK, 16x18x60mm 10° CoRoent XLK, 18x18x45mm 10° CoRoent XLK, 18x18x50mm 10° CoRoent XLK, 18x18x55mm 10° CoRoent XLK, 18x18x60mm 10°	Inferior 6790909 CoRoent Bloqueo Contorneado, 9x17x14-7°, Medial Inferior 6790910 CoRoent Bloqueo Contorneado, 10x17x14-7°, Medial Inferior 6790911 CoRoent Bloqueo Contorneado, 11x17x14-7°, Medial Inferior 6790912 CoRoent Bloqueo Contorneado, 12x17x14-7°, Medial Inferior 6790913 CoRoent Bloqueo Contorneado, 13x17x14-7°, Medial Inferior 6790914 CoRoent Bloqueo Contorneado, 14x17x14-7°, Medial Inferior 6790915 CoRoent Bloqueo Contorneado, 15x17x14-7°, Medial Inferior 6790916 CoRoent Bloqueo Contorneado, 16x17x14-7°, Medial Inferior 6791005 CoRoent Bloqueo Contorneado, 5x17x14-7°, Medical Superior 6791006 CoRoent Bloqueo Contorneado, 6x17x14-7°, Medical Superior 6791007 CoRoent Bloqueo Contorneado, 7x17x14-7°, Medical Superior 6791008 CoRoent Bloqueo Contorneado, 8x17x14-7°, Medical Superior 6791009 CoRoent Bloqueo Contorneado, 9x17x14-7°, Medical Superior 6791010 CoRoent Bloqueo Contorneado, 10x17x14-7°, Medical Superior 6791011 CoRoent Bloqueo Contorneado, 11x17x14-7°, Medical Superior 6791012 CoRoent Bloqueo Contorneado, 12x17x14-7°, Medical Superior 6791013 CoRoent Bloqueo
--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

		Contorneado, 13x17x14-7°, Medical Superior 6791014 CoRoent Bloqueo Contorneado, 14x17x14-7°, Medical Superior 6791015 CoRoent Bloqueo Contorneado, 15x17x14-7°, Medical Superior 6791016 CoRoent Bloqueo Contorneado, 16x17x14-7°, Medical Superior 6101060 CoRoent XLCT, 10x18x60mm 6101250 CoRoent XLCT, 12x18x50mm 6101445 CoRoent XLCT, 14x18x45mm 6101460 CoRoent XLCT, 14x18x60mm 6111045 CoRoent XLCT, 10x18x45mm 10° 6111050 CoRoent XLCT, 10x18x50mm 10° 6111055 CoRoent XLCT, 10x18x55mm 10° 6111245 CoRoent XLCT, 12x18x45mm 10° 6111250 CoRoent XLCT, 12x18x50mm 10° 6111255 CoRoent XLCT, 12x18x55mm 10° 6111260 CoRoent XLCT, 12x18x60mm 10° 6111445 CoRoent XLCT, 14x18x50mm 10° 6111450 CoRoent XLCT, 14x18x45mm 10° 6111455 CoRoent XLCT, 14x18x55mm 10° 6111460 CoRoent XLCT, 14x18x60mm 10° 6111645 CoRoent XLCT, 16x18x45mm 10° 6111650 CoRoent XLCT, 16x18x50mm 10° 6111655 CoRoent XLCT, 16x18x55mm 10° 6111660 CoRoent XLCT, 16x18x60mm 10° 7870845 CoRoent XLF, 8x18x45mm 10° 7871045 CoRoent XLF, 10x18x45mm 10° 7871245 CoRoent XLF, 12x18x45mm 10°
--	--	---

E.  
4



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T.

		7871050 CoRoent XLF, 10x18x50mm 10° 7871250 CoRoent XLF, 12x18x50mm 10° 7871450 CoRoent XLF, 14x18x50mm 10° 7871255 CoRoent XLF, 12x18x55mm 10° 7870860 CoRoent XLF, 8x18x60mm 10° 7871860 CoRoent XLF, 18x18x60mm 10° 7860845 CoRoent XLF, 8x18x45mm 7861045 CoRoent XLF, 10x18x45mm 7861245 CoRoent XLF, 12x18x45mm 7861645 CoRoent XLF, 16x18x45mm 7861450 CoRoent XLF, 14x18x50mm 7861650 CoRoent XLF, 16x18x50mm 7860855 CoRoent XLF, 8x18x55mm 7861455 CoRoent XLF, 14x18x55mm 7861655 CoRoent XLF, 16x18x55mm 7860860 CoRoent XLF, 8x18x60mm 7861460 CoRoent XLF, 14x18x60mm 7861660 CoRoent XLF, 16x18x60mm 7861845 CoRoent XLF, 18x18x45mm 7861855 CoRoent XLF, 18x18x55mm 5475540 Tornillo CoRoent XLF, 5.5x40mm Fijo 6210860 CoRoent XLK, 8x18x60mm 6211245 CoRoent XLK, 12x18x45mm 6211650 CoRoent XLK, 16x18x50mm 6220850 CoRoent XLK, 8x18x50mm 10° 6221055 CoRoent XLK, 10x18x55mm 10° 6041023 CoRoent Grande, 10x9x23 4° 6041223 CoRoent Grande, 12x9x23 4° 6081123 CoRoent Grande, 11x9x23 8° 6081028 CoRoent Grande, 10x9x28 8° 6081128 CoRoent Grande, 11x9x28 8° 6081228 CoRoent Grande, 12x9x28 8° 6121028 CoRoent Grande, 10x9x28 12° 6121228 CoRoent Grande, 12x9x28 12° 7921034 ENSAYO, 10x34x24, 8 grados 7921038 ENSAYO, 10x38x28, 8 grados 7941038 ENSAYO BRIGADE 10X38X32, 8 GRADOS
--	--	---

*Handwritten marks:*  
 ↙  
 ↘



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A. N. M. A. J.

		7921042 ENSAYO BRIGADE 10X42X30, 8 GRADOS 7921234 ENSAYO, 12x34x24, 8 grados 7921238 ENSAYO, 12x38x28, 8 grados 7941238 ENSAYO BRIGADE 12X38X32, 8 GRADOS 7921242 ENSAYO BRIGADE 12X42X30, 8 GRADOS 7921434 ENSAYO, 14x34x24, 8 grados 7921438 ENSAYO, 14x38x28, 8 grados 7941438 ENSAYO BRIGADE 14X38X32, 8 GRADOS 7921442 ENSAYO BRIGADE 14X42X30, 8 GRADOS 7921634 ENSAYO, 16x34x24, 8 grados 7921638 ENSAYO, 16x38x28, 8 grados 7941638 ENSAYO BRIGADE 16X38X32, 8 GRADOS 7921642 ENSAYO BRIGADE 16X42X30, 8 GRADOS 7921834 ENSAYO, 18x34x24, 8 grados 7921838 ENSAYO, 18x38x28, 8 grados 7941838 ENSAYO BRIGADE 18X38X32, 8 GRADOS 7921842 ENSAYO BRIGADE 18X42X30, 8 GRADOS 7922034 ENSAYO, 20x34x24, 8 grados 7922038 ENSAYO, 20x38x28, 8 grados 7942038 ENSAYO BRIGADE 20X38X32, 8 GRADOS 7922042 ENSAYO BRIGADE 20X42X30, 8 GRADOS 7931034 ENSAYO, 10x34x24, 12 grados 7931234 ENSAYO, 12x34x24, 12 grados 7931238 ENSAYO, 12x38x28, 12 grados 7951238 ENSAYO BRIGADE 12X38X32, 12 GRADOS 7931242 ENSAYO BRIGADE 12X42X30, 12 GRADOS 7931434 ENSAYO, 14x34x24, 12 grados 7931438 ENSAYO, 14x38x28, 12 grados 7951438 ENSAYO BRIGADE 14X38X32, 12 GRADOS 7931442 ENSAYO BRIGADE 14X42X30, 12 GRADOS 7931634 ENSAYO, 16x34x24, 12
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A. N. M. S. I.

		grados 7931638 ENSAYO, 16x38x28, 12 grados 7951638 ENSAYO BRIGADE 16X38X32, 12 GRADOS 7931642 ENSAYO BRIGADE 16X42X30, 12 GRADOS 7931834 ENSAYO, 18x34x24, 12 grados 7931838 ENSAYO, 18x38x28, 12 grados 7951838 ENSAYO BRIGADE 18X38X32, 12 GRADOS 7931842 ENSAYO BRIGADE 18X42X30, 12 GRADOS 7932034 ENSAYO, 20x34x24, 12 grados 7932038 ENSAYO, 20x38x28, 12 grados 7952038 ENSAYO BRIGADE 20X38X32, 12 GRADOS 7932042 ENSAYO BRIGADE 20X42X30, 12 GRADOS 8801300 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica 1555594 NIVEL SUPERIOR DE BANDEJA DE IMPLANTE BRIGADE 1555595 BASE DE ESTUCHE DE TORNILLO BRIGADE 1555596 TAPA DE ESTUCHE DE TORNILLO BRIGADE 1555597 BASE DE ESTUCHE DE ENSAYO BRIGADE 1555598 TAPA DE ESTUCHE DE ENSAYO BRIGADE - 8 GRADOS 1555599 BASE DE ESTUCHE DE IMPLANTE BRIGADE 1555600 TAPA DE ESTUCHE DE IMPLANTE BRIGADE - 8 GRADOS 1555601 TAPA DE ESTUCHE DE IMPLANTE BRIGADE - 12 GRADOS 1555602 BASE DE BANDEJA DE IMPLANTE BRIGADE 1555609 TAPA DE ESTUCHE DE ENSAYO BRIGADE - 12 GRADOS 7981018 Tornillo Brigade, Ajustable 7981013 PLANTILLA DE CORONA - 34mm 7981014 PLANTILLA DE CORONA - 38mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

		7981015 PLANTILLA DE CORONA - 42mm 7981008 Insertor de Ensayo Brigade 7981001 INSERTOR DE IMPLANTE, CAJA XLR-F 7981002 INSERTOR DE IMPLANTE, CAJA XLR-F GRANDE 7981020 TAMP 6180016 MANGO RECTO 6180019 MANGO CON CAMBIO DE VELOCIDAD 6180018 Mango en T 7981019 ADAPTADOR ENVOY - GRANDE 7981011 ADAPTADOR ENVOY - PEQUEÑO 6590277 INSERTOR DE IMPLANTE ANTEROLATERAL 7981003 INSERTOR DE IMPLANTE ANTEROLATERAL 7981021 TAMP ANTEROLATERAL 7981005 INSERTOR DE IMPLANTE MANGO INTERMEDIO 6590228 Herramienta de Remoción Brigade, Ensayo 7981010 SUJETADOR LATERAL DE RECUPERACIÓN DE IMPLANTE 7981012 SUJETADOR DE RECUPERACIÓN DE IMPLANTE 8801300 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica 1555603 NIVEL SUPERIOR 1 BANDEJA DE INSTRUMENTO BRIGADE 1555604 NIVEL MEDIO 1 BANDEJA DE INSTRUMENTO BRIGADE 1555605 BASE 1 BANDEJA DE INSTRUMENTO BRIGADE 1555606 ESTUCHE DE ADAPTADOR ENVOY BRIGADE 7980001 Llave Recta Guiada 7990011 Llave Brigade, Extremo Esférico Sólido 7990008 Llave Brigade, Auto-retención Sólida 7990009 Llave Brigade, Sin Retención 7980015 Taladro Brigade, Recto 7980003 PUNZÓN, FIJO, XLR-F 6590229 Punzón Brigade, 15mm Angular 7990003 PUNZÓN ANGULAR COROENT XLR-F
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

		7990006 Mango de Par Inverso 7990001 DESTORNILLADOR ANGULAR COROENT XLR-F 7990007 Llave Angular - Retención 7990004 Llave Angular - Sin Retención 7990012 Llave Brigade - Junta Universal Corto 7990013 Llave Brigade - Junta Universal Sin Retención 7990014 Llave Brigade - Junta Universal Retención 7990005 Llave Inglesa Brigade, Allen 8801300 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica 1555607 NIVEL SUPERIOR 2 BANDEJA DE INSTRUMENTO BRIGADE 1555608 BASE 2 BANDEJA DE INSTRUMENTO BRIGADE 1004180 Mango en T Universal, AO con Tornillo de Ajuste 7700621 Insertor CoRoent LX 7710631 CoRoent LX Herramienta de Medición 6mm 7710831 CoRoent LX Herramienta de Medición 8mm 7711031 CoRoent LX Herramienta de Medición 10mm 7711231 CoRoent LX Herramienta de Medición 12mm 7711431 CoRoent LX Herramienta de Medición 14mm 7711631 CoRoent LX Herramienta de Medición 16mm 7711831 CoRoent LX Herramienta de Medición 18mm 7712031 CoRoent LX Herramienta de Medición 20mm 7710100 CoRoent LX Bandeja - Base 7710101 CoRoent LX Bandeja - Inserto de Implante 7710102 CoRoent LX Bandeja - Inserto de Instrumento 7710103 CoRoent LX Bandeja - Tapa 6850120 CoRoent Inserto LO, Extendido 6850119 CoRoent Inserto LO 1001992 Mango en T Hudson 6601071 Gancho Universal, Implante 1009202 Tamp Universal, Autoinjerto Recto
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

		1009203 Tamp Universal, Autoinjerto Angular 6600062 Tamp Bifurcado CoRoent LO 6813108 8x10x25 - 5° Ensayo CoRoent LO 6813110 10x10x25 - 5° Ensayo CoRoent LO 6813112 12x10x25 - 5° Ensayo CoRoent LO 6813114 14x10x25 - 5° Ensayo CoRoent LO 6813208 8x10x30 - 5° Ensayo CoRoent LO 6813210 10x10x30 - 5° Ensayo CoRoent LO 6813212 12x10x30 - 5° Ensayo CoRoent LO 6813214 14x10x30 - 5° Ensayo CoRoent LO 6813308 8x10x35 - 5° Ensayo CoRoent LO 6813310 10x10x35 - 5° Ensayo CoRoent LO 6813312 12x10x35 - 5° Ensayo CoRoent LO 6813314 14x10x35 - 5° Ensayo CoRoent LO 6813408 8x10x40 - 5° Ensayo CoRoent LO 6813410 10x10x40 - 5° Ensayo CoRoent LO 6813412 12x10x40 - 5° Ensayo CoRoent LO 6813414 14x10x40 - 5° Ensayo CoRoent LO 1535695 Base de Estuche de Implante CoRoent LO 1535696 Tapa de Estuche de Implante CoRoent LO 1535697 Tapa de Bandeja de Implante CoRoent LO 1535698 Base de Bandeja de Implante CoRoent LO 1535699 Inserto de Bandeja de Implante CoRoent LO 6990004 CoRoent XL Tapa de Bandeja Set de Implante 6900208 CoRoent XL Ensayo, 8x18x45mm 6910208 CoRoent XL Medidor, 8x18x45mm 10°
--	--	--





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

		6900408 CoRoent XL Ensayo, 8x18x55mm 6910408 CoRoent XL Medidor, 8x18x55mm 10° 6901508 8x22x50mm COR XL Ancho - Ensayo 6910508 8x22x50mm COR XL Ancho - Ensayo 10° 6901608 8x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo 6910608 8x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo 10° 6900210 CoRoent XL Ensayo, 10x18x45mm 6910210 CoRoent XL Medidor, 10x18x45mm 10° 6900410 CoRoent XL Ensayo, 10x18x55mm 6910410 CoRoent XL Medidor, 10x18x55mm 10° 6901510 10x22x50mm COR XL Ancho - Ensayo 6910510 10x22x50mm COR XL Ancho - Ensayo 10° 6901610 10x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo 6910610 10x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo 10° 6900212 CoRoent XL Ensayo, 12x18x45mm 6910212 CoRoent XL Medidor, 12x18x45mm 10° 6900412 CoRoent XL Ensayo, 12x18x55mm 6910412 CoRoent XL Medidor, 12x18x55mm 10° 6901512 12x22x50mm COR XL Ancho - Ensayo 6910512 12x22x50mm COR XL Ancho - Ensayo 10° 6901612 12x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo 6910612 12x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo 10° 6900101 Ensamblaje de Insertor CR-X 6900401 Insertor Ancho COR XL 6600171 Herramienta de Remoción de Implante 1001992 Mango en T Hudson 6990001 Bandeja Set de Implante
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

		CoRoent XL 1 (Superior) 7418106 CoRoent XL Corona de Corte, 6x18mm 7418108 CoRoent XL Corona de Corte, 8x18mm 7418110 CoRoent XL Corona de Corte, 10x18mm 7418112 CoRoent XL Corona de Corte, 12x18mm 6990002 CoRoent XL, Bandeja Set de Implante 2 (Media) 7422106 CoRoent XL Corona de Corte, 6x22mm 7422108 CoRoent XL Corona de Corte, 8x22mm 7422110 CoRoent XL Corona de Corte, 10x22mm 7422112 CoRoent XL Corona de Corte, 12x22mm 6990003 CoRoent XL, Bandeja Set de Implante 3 (Inferior) 6990005 CoRoent XL Base Set Consolidada 6600050 CoRoent L(C) – Insertor 9mm, Recto 6600051 CoRoent L(C) – Insertor 9mm, Angular 6600052 CoRoent L(C) – Insertor 11mm, Recto 6600053 CoRoent L(C) – Insertor 11mm, Angular 1001992 Mango en T Hudson 6600011 Tapa CoRoent LC, Estuche de Esterilización de Implante 6600012 Estuche CoRoent LC, Estuche de Esterilización de Implante 6600013 Base CoRoent LC, Estuche de Esterilización de Implante 6732908 CoRoent LI Ensayo 8x9x32mm – 4 Grados 6732909 CoRoent LI Ensayo 9x9x32mm – 4 Grados 6732910 CoRoent LI Ensayo 10x9x32mm – 4 Grados 6732911 CoRoent LI Ensayo 11x9x32mm – 4 Grados 6732912 CoRoent LI Ensayo 12x9x32mm – 4 Grados 6732913 CoRoent LI Ensayo 13x9x32mm – 4 Grados 6732914 CoRoent LI Ensayo
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 S.N.M.S.P.

		14x9x32mm - 4 Grados 1537955 Tapa de Estuche 9x26mm 6726908 CoRoent LI ENSAYO 8x9x26 - 4 Grados 6726909 CoRoent LI ENSAYO 9x9x26 - 4 Grados 6726910 CoRoent LI ENSAYO 10x9x26 - 4 Grados 6726911 CoRoent LI ENSAYO 11x9x26 - 4 Grados 6726912 CoRoent LI ENSAYO 12x9x26 - 4 Grados 6726913 CoRoent LI ENSAYO 13x9x26 - 4 Grados 6726914 CoRoent LI ENSAYO 14x9x26 - 4 Grados 6720908 CoRoent LI ENSAYO 8x9x20 - 4 Grados 6720909 CoRoent LI ENSAYO 9x9x20 - 4 Grados 6720910 CoRoent LI ENSAYO 10x9x20 - 4 Grados 6720911 CoRoent LI ENSAYO 11x9x20 - 4 Grados 6720912 CoRoent LI ENSAYO 12x9x20 - 4 Grados 6720913 CoRoent LI ENSAYO 13x9x20 - 4 Grados 6720914 CoRoent LI ENSAYO 14x9x20 - 4 Grados 6732108 CoRoent LI ENSAYO 8x11x32 - 4° 6732109 CoRoent LI ENSAYO 9x11x32 - 4° 6732110 CoRoent LI ENSAYO 10x11x32 - 4° 6732111 CoRoent LI ENSAYO 11x11x32 - 4° 6732112 CoRoent LI ENSAYO 12x11x32 - 4° 6732113 CoRoent LI ENSAYO 13x11x32 - 4° 6732114 CoRoent LI ENSAYO 14x11x32 - 4° 6726108 CoRoent LI ENSAYO 8x11x26 - 4 Grados 6726109 CoRoent LI ENSAYO 9x11x26 - 4 Grados 6726110 CoRoent LI ENSAYO 10x11x26 - 4 Grados
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

		6726111 CoRoent LI ENSAYO 11x11x26 - 4 Grados 6726112 CoRoent LI ENSAYO 12x11x26 - 4 Grados 6726113 CoRoent LI ENSAYO 13x11x26 - 4 Grados 6726114 CoRoent LI ENSAYO 14x11x26 - 4 Grados 6720108 CoRoent LI ENSAYO 8x11x20 - 4 Grados 6720109 CoRoent LI ENSAYO 9x11x20 - 4 Grados 6720110 CoRoent LI ENSAYO 10x11x20 - 4 Grados 6720111 CoRoent LI ENSAYO 11x11x20 - 4 Grados 6720112 CoRoent LI ENSAYO 12x11x20 - 4 Grados 6720113 CoRoent LI ENSAYO 13x11x20 - 4 Grados 6720114 CoRoent LI ENSAYO 14x11x20 - 4 Grados 1537952 Base de Estuche 9x20mm 1537953 Tapa de Estuche 9x20mm 1537954 Base de Estuche 9x26mm 1537956 Base de Estuche 9x32mm 1537957 Tapa de Estuche 9x32mm 1537958 Ensayos Li Anchos 9mm - Base 1537959 Ensayos Li Anchos 9mm - Tapa 1537960 Base de Estuche 11x20mm 1537961 Tapa de Estuche 11x20mm 1537962 Base de Estuche 11x26mm 1537963 Tapa de Estuche 11x26mm 1537964 Base de Estuche 11x32mm 1537965 Tapa de Estuche 11x32mm 1537966 Ensayos Li Anchos 11mm - Base 1537967 Ensayos Li Anchos 11mm - Tapa 8801300 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica 1537969 Inserto de Bandeja de Implante 1537970 Base de Bandeja de Implante 1012860 Bandeja de Esterilización CR- L Angosta 1012864 Bandeja de Esterilización CoRoent Grande, Ancha 6700101 Insertor CoRoent LT, 9x20mm
--	--	---



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

		1001992 Mango en T Hudson 1014150 Bandeja de Esterilización CoRoent LT 8801300 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica 6000001 Bandeja 1 CoRoent XL-F, Bandeja de Respaldo XL-FW 5450035 CoRoent XL-F Estuche de Tornillo de Bandeja de Instrumento 7240010 Conector Rápido Universal, Mango Recto 5450065 DESTORNILLADOR ACCIONADOR, CoRoent XL-F 5450031 LLAVE FINAL, CoRoent XL-F 5450032 EXTRACTOR DE TORNILLO, CoRoent XL-F 6180014 PUNZÓN AUTOAJUSTABLE, COROENT XL-FW 6180015 TALADRO AUTOAJUSTABLE, COROENT XL-FW 5450037 INSERTOR DE IMPLANTE 8mm CoRoent XL-F 5450038 INSERTOR DE IMPLANTE 10mm CoRoent XL-F 5450039 INSERTOR DE IMPLANTE 12mm CoRoent XL-F 5450040 INSERTOR DE IMPLANTE 14mm CoRoent XL-F 5450041 INSERTOR DE IMPLANTE 16mm CoRoent XL-F 6000002 Bandeja 2 CoRoent XL-F, Bandeja de Respaldo XL-FW 6000003 Etiqueta Frontal CoRoent XL- F, Bandeja de Respaldo XLFW 6000004 Etiqueta Lateral CoRoent XL- F, Bandeja de Respaldo XLFW 6000000 Base CoRoent XL-F, Bandeja de Respaldo XLFW 6180855 ENSAYO COROENT XL-F ANCHO 8x22x55mm 6181055 ENSAYO COROENT XL-F ANCHO 10x22x55mm 6181255 ENSAYO COROENT XL-F ANCHO 12x22x55mm 6181455 ENSAYO COROENT XL-F ANCHO 14x22x55mm 6185508 ENSAYO COROENT XL-F ANCHO LO 8x22x55mm 6185510 ENSAYO COROENT XL-F ANCHO L 10x22x55mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A. N. M. A. F.

		6185512 ENSAYO COROENT XL-F ANCHO L 12x22x55mm 6185514 ENSAYO COROENT XL-F ANCHO L 14x22x55mm 5450027 INSERTOR, CoRoent XL-F 5450037 INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent XL-F 8mm 5450038 INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent XL-F 10mm 5450039 INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent XL-F 12mm 5450040 INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent XL-F 14mm 1001992 Mango en T Hudson 6180001 TAPA DE BANDEJA DE IMPLANTE COROENT XL-F ANCHO 6180002 INSERTOR ESTÁNDAR DE BANDEJA DE IMPLANTE COROENT XL-F ANCHO 6180003 INSERTOR LORD DE BANDEJA DE IMPLANTE COROENT XL-F ANCHO 6180004 BASE DE BANDEJA DE IMPLANTE COROENT XL-F ANCHO 6180017 BLOQUE DE IMPLANTE XL-FW 6180016 MANGO RECTO 5450031 LLAVE FINAL, CoRoent XL-F 5450065 DESTORNILLADOR ACCIONADOR, CoRoent XL-F 5450009 TAMP, CoRoent XL-F 7510013 Herramienta de Remoción de Osteofitos Universal 6180014 PUNZÓN AUTOAJUSTABLE, COROENT XL-FW 5450032 EXTRACTOR DE TORNILLO, CoRoent XL-F 6180015 TALADRO AUTOAJUSTABLE, COROENT XL-FW 6180011 TAPA DE BANDEJA DE INSTRUMENTO COROENT XL-FW ANCHO 6180012 INSERTO DE BANDEJA DE INSTRUMENTO COROENT XL-FW ANCHO 6180013 BASE DE BANDEJA DE INSTRUMENTO COROENT XL-FW ANCHO 6180026 ESTUCHE DE TORNILLO DE BANDEJA DE INSTRUMENTO COROENT XL-FW ANCHO 6100220 ENSAYO 02MM - 20 GRADOS 6100420 ENSAYO 04MM - 20 GRADOS
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

		6100620 ENSAYO 06MM - 20 GRADOS 6100820 ENSAYO 08MM - 20 GRADOS 6101020 ENSAYO 10MM - 20 GRADOS 6100230 ENSAYO 02MM - 30 GRADOS 6100430 ENSAYO 04MM - 30 GRADOS 6100630 ENSAYO 06MM - 30 GRADOS 6100830 ENSAYO 08MM - 30 GRADOS 6101030 ENSAYO 10MM - 30 GRADOS 1565880 Bandeja de Implante CoRoent XL-H, Base 8801333 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica 1565882 Bandeja de Implante CoRoent, Superior 1565883 Bandeja de Implante CoRoent, Media 1565884 Bandeja de Implante CoRoent, Inferior 1565885 Bandeja de Implante CoRoent, Estera de Tornillos 6020020 INSERTOR GUIADO - 2MM-20 GRADOS 6040020 INSERTOR GUIADO - 4MM-20 GRADOS 2 6060020 INSERTOR GUIADO - 6MM-20 GRADOS 4 6080020 INSERTOR GUIADO - 8MM-20 GRADOS 6 6100020 INSERTOR GUIADO - 10MM- 20 GRADOS 6100030 INSERTOR GUIADO - 10MM- 30 GRADOS 1001992 Mango en T Hudson 1565876 Tapa CoRoent XL-H, Bandeja de Instrumento 1564851 ENSAMBLAJE DE RETRACTOR GENERAL ANCHO, S 1564852 Retractor MaXcess, GENERAL Ancho 1564871 ENSAMBLAJE DE RETRACTOR GENERAL ANGOSTO 1564872 Retractor MaXcess, GENERAL Angosto 6900101 Ensamblaje de Insertor CR-X 1568431 Pieza Kerrison - 3mm, 30 grados 1568432 Pieza Kerrison - 4mm, 30 grados 1568433 Pieza Kerrison - 5mm, 30 grados
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T.

		1568430 Mango Kerrison Rotativo 1565871 Bandeja de Instrumento CoRoent XL-H, Superior 6101210 MEDIDOR DE PALETA 10MM 6101212 MEDIDOR DE PALETA 12MM 6101214 MEDIDOR DE PALETA 14MM 6101216 MEDIDOR DE PALETA 16MM 6101218 MEDIDOR DE PALETA 18MM 6101220 MEDIDOR DE PALETA 20MM 6101222 MEDIDOR DE PALETA 22MM 6200002 LLAVE DE TORNILLO DE FIJACIÓN 6100306 ENSAYOS DISTRACTORES 6100308 ENSAYOS DISTRACTORES 6100310 ENSAYOS DISTRACTORES 6100312 ENSAYOS DISTRACTORES 6100100 CLIP GUIADO FIJO ESTÁNDAR 6100102 CLIP GUIADO VARIABLE ESTÁNDAR 1565874 Tapa CoRoent XL-H, Estuche de Tornillo 6200000 TORNILLO DE FIJACIÓN 1565875 Base CoRoent XL-H, Estuche de Tornillo 1565872 Bandeja de Instrumento CoRoent XL-H, Media 1565877 Estera de Tornillos CoRoent XL-H, Bandeja de Instrumento 1565873 Bandeja de Instrumento CoRoent XL-H, Inferior 1565870 Bandeja de Instrumento CoRoent XL-H, Base 6991004 Tapa de Bandeja de Implante de Reserva CoRoent XL 6991001 Bandeja de Implante de Reserva 1 CoRoent XL (Superior) 6991002 Bandeja de Implante de Reserva 2 CoRoent XL (Media) 6900214 Ensayo CoRoent XL, 14x18x45mm 6900216 Ensayo CoRoent XL, 16x18x45mm 6910214 Medidor CoRoent XL, 14x18x45mm 10° 6910514 14x22x50mm COR XL Ancho - Ensayo - 10° 6910216 Medidor CoRoent XL, 16x18x45mm 10° 6900414 Ensayo CoRoent XL, 14x18x55mm 6901516 16x22x50mm COR XL -
--	--	---





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

		Ancho - Ensayo 6901514 14x22x50mm COR XL - Ancho - Ensayo 6900416 Ensayo CoRoent XL, 16x18x55mm 6910414 Medidor CoRoent XL, 14x18x55mm 10° 6910516 16x22x50mm COR XL Ancho - Ensayo - 10° 6901614 14x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo 6910416 Medidor CoRoent XL, 16x18x55mm 10° 6901616 16x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo 6910614 14x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo - 10° 6910616 16x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo - 10° 6991007 Estuche de Ensayo Set de Reserva CoRoent XL 6991003 Bandeja de Implante de Reserva CoRoent XL 3 (Inferior) 6991005 Base de Bandeja de Implante de Reserva CoRoent XL 6900208 Ensayo CoRoent XL, 8x18x45mm 6900210 Ensayo CoRoent XL, 10x18x45mm 6900212 Ensayo CoRoent XL, 12x18x45mm 6900214 Ensayo CoRoent XL, 14x18x45mm 6900216 Ensayo CoRoent XL, 16x18x45mm 6900408 Ensayo CoRoent XL, 8x18x55mm 6900410 Ensayo CoRoent XL, 10x18x55mm 6900412 Ensayo CoRoent XL, 12x18x55mm 6900414 Ensayo CoRoent XL, 14x18x55mm 6900416 Ensayo CoRoent XL, 16x18x55mm 6910208 Medidor CoRoent XL, 8x18x45mm 10° 6910210 Medidor CoRoent XL, 10x18x45mm 10° 6910212 Medidor CoRoent XL,
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A. N. M. A. F.

		12x18x45mm 10° 6910214 Medidor CoRoent XL, 14x18x45mm 10° 6910216 Medidor CoRoent XL, 16x18x45mm 10° 6910408 Medidor CoRoent XL, 8x18x55mm 10° 6910410 Medidor CoRoent XL, 10x18x55mm 10° 6910412 Medidor CoRoent XL, 12x18x55mm 10° 6910414 Medidor CoRoent XL, 14x18x55mm 10° 6910416 Medidor CoRoent XL, 16x18x55mm 10° 1001992 Mango en T Hudson 6900101 Ensamblaje de Insertor CR-X 6600171 Herramienta de Remoción de Implante 1023501 Bandeja CoRoent XL 6900010 Bandeja de Implante CoRoent XLR 7000630 CoRoent XL- Ensayo Torácico 6x16x30 7000640 CoRoent XL- Ensayo Torácico 6x16x40 7000830 CoRoent XL- Ensayo Torácico 8x16x30 7000840 CoRoent XL- Ensayo Torácico 8x16x40 7001030 CoRoent XL- Ensayo Torácico 10x16x30 7001040 CoRoent XL- Ensayo Torácico 10x16x40 7001230 CoRoent XL- Ensayo Torácico 12x16x30 7001240 CoRoent XL- Ensayo Torácico 12x16x40 1001992 Mango en T Hudson 7000022 CoRoent XL- Instrumento de Rescate Ensayo Torácico 7000001 CoRoent XL- Insertor de Implante Torácico 7000002 CoRoent XL- Insertor de Ensayo 7000024 Tapa de Bandeja de Implante XL-T 7000025 Insertor de Bandeja de Implante Superior XL-T 7000027 Base de Bandeja de Implante XL-T
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T.

		6562083 Bandeja CoRoent XLXW, Tapa 1001992 Mango en T Hudson 6200011 CoRoent XLXW Deslizador, Grande Recto 6201000 CoRoent XLXW Insertor 6200026 CoRoent XLXW Plantilla, 26mm 6562088 CoRoent XLXW Bloque de Carga 6562087 CoRoent XLXW Bandeja, Estera de Tornillos 6562084 CoRoent XLXW Bandeja, Superior 6208000 CoRoent XLXW Ensayo, 8 mm 6210000 CoRoent XLXW Ensayo, 10 mm 6212000 CoRoent XLXW Ensayo, 12 mm 6214000 CoRoent XLXW Ensayo, 14 mm 6216000 CoRoent XLXW Ensayo, 16 mm 6562085 CoRoent XLXW Bandeja, Media 6208100 CoRoent XLXW Ensayo, 8 mm 10° 6210100 CoRoent XLXW Ensayo, 10 mm 10° 6212100 CoRoent XLXW Ensayo, 12 mm 10° 6214100 CoRoent XLXW Ensayo, 14 mm 10° 6216100 CoRoent XLXW Ensayo, 16 mm 10° 6562086 CoRoent XLXW Bandeja, Inferior 6562081 CoRoent XLXW Bandeja, Base 6032007 Rasuradora Paleta CoRoent LI 7mm 6032108 Rasuradora Paleta CoRoent LI-Color Co 7mm 6032009 Rasuradora Paleta CoRoent LI 9mm 6032110 Rasuradora Paleta CoRoent LI-Color C 10mm 6032011 Rasuradora Paleta CoRoent LI 11mm 6032112 Rasuradora Paleta CoRoent LI-Color C 12mm 6032013 Rasuradora Paleta CoRoent LI
--	--	---



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

		13mm 6032114 Rasuradora Paleta CoRoent LI-Color C 14mm 6703207 Fresadora CoRoent LI, 7mm 6713208 Fresadora CoRoent LI, 8mm 6703209 Fresadora CoRoent LI, 9mm 6713210 Fresadora CoRoent LI, 10mm Codificada por Color 6703211 Fresadora CoRoent LI, 11mm 6713212 Fresadora CoRoent LI, 12mm Codificada por Color 6703213 Fresadora CoRoent LI, 13mm 6713214 Fresadora CoRoent LI, 14mm Codificada por Color 6790008 8MM TAPA ESCOFINA LI CoRoent LI 6790009 9MM TAPA ESCOFINA LI CoRoent LI 6790010 10MM TAPA ESCOFINA LI CoRoent LI 6790011 11MM TAPA ESCOFINA LI CoRoent LI 6790012 12MM TAPA ESCOFINA LI CoRoent LI 6790013 13MM TAPA ESCOFINA LI CoRoent LI 6790014 14MM TAPA ESCOFINA LI CoRoent LI 1009202 Tamp Universal, Autoinjerto Recto 1009203 Tamp Universal, Autoinjerto Angular 7000036 CoRoent LI Tamp 6601071 Gancho Universal, Implante 7000029 Insertor CoRoent LI 7000039 Insertor CoRoent LI, Corto 1001992 Mango en T Hudson 7000035 CoRoent LI Herramienta de Rescate, Implante 1537950 CoRoent LI Base, Estuche Escofina de Ensayo 1537951 CoRoent LI Tapa, Estuche Escofina de Ensayo 8801300 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica 1537972 CoRoent LI Inserto, Bandeja de Instrumento 1537973 CoRoent LI Base, Bandeja de Instrumento 6851037 CoRoent Tapa Contorneada Pequeña, Bandeja
--	--	---



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

		6851000 CoRoent Insetor Contorneado Pequeño 1006278 Martillo Cervical 6851002 CoRoent Tamp. Contorneado Pequeño 6852004 CoRoent Ensayo Contorneado Pequeño, S4 6852005 CoRoent Ensayo Contorneado Pequeño, S5 6852006 CoRoent Ensayo Contorneado Pequeño, S6 6852007 CoRoent Ensayo Contorneado Pequeño, S7 6852008 CoRoent Ensayo Contorneado Pequeño, S8 6852014 CoRoent Ensayo Contorneado Pequeño, M4 6852015 CoRoent Ensayo Contorneado Pequeño, M5 6852016 CoRoent Ensayo Contorneado Pequeño, M6 6852017 CoRoent Ensayo Contorneado Pequeño, M7 6852018 CoRoent Ensayo Contorneado Pequeño, M8 6851038 CoRoent Estuche Contorneado Pequeño, Implante 6851039 CoRoent Tapa Contorneada Pequeña, Estuche de Implante 6851036 CoRoent Base Contorneada Pequeña, Bandeja 6840100 CoRoent Cuerpo Insetor Central 1004180 Mango en T Universal, AO con Tornillo de Fijación 6800700 CoRoent Tamp. Pequeño, Implante 1006278 Martillo Cervical 5772000 Triad Insetor Cervical, Aloinjerto Corto 1005449 Triad Insetor Cervical, Aloinjerto 5775114 Triad Medidor Cervical, 5x11x14 5776114 Triad Medidor Cervical, 6x11x14 5777114 Triad Medidor Cervical, 7x11x14 5778114 Triad Medidor Cervical, 8x11x14
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A. N. M. A. F.

		5779114 Medidor Cervical 9x11x14 5770114 Medidor Cervical 10x11x14 5771114 Medidor Cervical 11x11x14 5771214 Medidor Cervical 12x11x14 6800805 CoRoent Ensayo Pequeño - 5X11X14mm, T 6800806 CoRoent Ensayo Pequeño - 6X11X14mm, T 6800807 CoRoent Ensayo Pequeño - 7X11X14mm, T 6800808 CoRoent Ensayo Pequeño - 8X11X14mm, T 6800809 CoRoent Ensayo Pequeño - 9X11X14mm, T 6800810 CoRoent Ensayo Pequeño - 10X11X14mm 6800811 CoRoent Ensayo Pequeño - 11X11X14mm 6800812 CoRoent Ensayo Pequeño - 12X11X14mm 6800405 CoRoent Ensayo SLP - 5x13x15mm 6800406 CoRoent Ensayo SLP - 6x13x15mm 6800407 CoRoent Ensayo SLP - 7x13x15mm 6800408 CoRoent Ensayo SLP - 8x13x15mm 6800409 CoRoent Ensayo SLP - 9x13x15mm 6800410 CoRoent Ensayo SLP - 10x13x15mm 6800411 CoRoent Ensayo SLP - 11x13x15mm 6800412 CoRoent Ensayo SLP - 12x13x15mm 6840002 CoRoent Sistema Pequeño Base de Estuche 6840003 CoRoent Sistema Pequeño Tapa de Estuche 6840004 CoRoent Sistema Pequeño Bandeja Superior 6840005 CoRoent Sistema Pequeño Bandeja Media 6840014 CoRoent Sistema Pequeño Estuche de Implante SL 6840015 CoRoent Sistema Pequeño Estuche de Implante SLP 6840016 CoRoent Sistema Pequeño Estuche de Implante SM 6790105 CoRoent Pequeño Tapa de
--	--	--



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

		Bloqueo Estuche 6790182 CoRoent SI Insertor, manos libres 6790110 CoRoent Pequeño Destornillador de Bloqueo, NV9 6790114 CoRoent Pequeño Llave de Bloqueo, Angular 6790119 CoRoent Pequeño Insertor de Bloqueo, DTS 6790111 CoRoent Pequeño Destornillador de Bloqueo, NV9 6790117 CoRoent Pequeño Llave de Bloqueo, Angular 6790112 CoRoent Pequeño Punzón de Bloqueo, Autoajustable 6790113 CoRoent Pequeño Punzón de Bloqueo, Angular 6790153 CoRoent SI Mango, Par Inverso 6790107 CoRoent Pequeño Estuche de Bloqueo, Implante 6790150 CoRoent Pequeño Tapa de Bloqueo, Estuche de Implante 6790154 CoRoent Pequeño Estuche de Bloqueo, Tornillo 6790102 CoRoent SI Tapa, Estuche de Tornillo 6790121 CoRoent Pequeño Guía de Bloqueo, DTS 6790122 CoRoent Pequeño Guía de Bloqueo, DTS 6790123 CoRoent Pequeño Guía de Bloqueo, DTS 6790124 CoRoent Pequeño Guía de Bloqueo, DTS 6790125 CoRoent Pequeño Guía de Bloqueo, DTS 6790126 CoRoent Pequeño Guía de Bloqueo, DTS 6790127 CoRoent Pequeño Guía de Bloqueo, DTS 6790128 CoRoent Pequeño Guía de Bloqueo, DTS 6790174 CoRoent Pequeño Estuche de Bloqueo, DTS 6790175 CoRoent Pequeño Tapa de Bloqueo, Estuche DTS 6790104 CoRoent Pequeño Superficie de Bloqueo, Bandeja 6790151 CoRoent SI Broca, 2.4x12mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

		6709152 CoRoent SI Broca, 3.5 x12mm 7810600 Mango Universal de Hélice 6790173 CoRoent Pequeño Guía de Bloqueo, Taladro 1006278 Martillo Cervical 6790161 CoRoent SI Ensayo, 5x17x14mm 6790162 CoRoent SI Ensayo, 6x17x14mm 6790163 CoRoent SI Ensayo, 7x17x14mm 6790164 CoRoent SI Ensayo, 8x17x14mm 6790165 CoRoent SI Ensayo, 9x17x14mm 6790166 CoRoent SI Ensayo, 10x17x14mm 6790167 CoRoent SI Ensayo, 11x17x14mm 6790168 CoRoent SI Ensayo, 12x17x14mm 6790141 CoRoent Pequeño Escofina de Bloqueo 17x14 6790142 CoRoent Pequeño Escofina de Bloqueo 17x14 6790143 CoRoent Pequeño Escofina de Bloqueo 17x14 6790144 CoRoent Pequeño Escofina de Bloqueo 17x14 6790145 CoRoent Pequeño Escofina de Bloqueo 17x14 6790146 CoRoent Pequeño Escofina de Bloqueo 17x14 6790147 CoRoent Pequeño Escofina de Bloqueo 17x14 6790148 CoRoent Pequeño Escofina de Bloqueo 17x14 6790101 CoRoent Pequeño Bloqueo Medio, Bandeja 7730072 Extractor de Hélice, Tornillo de Hueso 7674101 Martillo Deslizante PCM 6790106 CoRoent Pequeño Base de Bloqueo, Estuche 6121050 10x50 ENSAYO CoRoent XL-C 6121250 12x50 ENSAYO CoRoent XL-C 6121450 14x50 ENSAYO CoRoent XL-C 6121650 w6x50 [SIC] ENSAYO CoRoent XL-C 6121060 10x18x60 ENSAYO XL-CT4-
--	--	--





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

		ESTÁNDAR 6121260 12x18x60 ENSAYO XL-CT4- ESTÁNDAR 6121460 14x18x60 ENSAYO XL-CT4- ESTÁNDAR 6121660 16x18x60 ENSAYO XL-CT4- ESTÁNDAR 6131050 10x50 Ensayo Lrd CoRoent XL-C 6131250 12x50 Ensayo Lrd CoRoent XL-C 6131450 14x50 Ensayo Lrd CoRoent XL-C 6131650 16x50 Ensayo Lrd CoRoent XL-C 6131060 10x18x60 ENSAYO XL-CT4-10 GRADOS 6131260 12x18x60 ENSAYO XL-CT4-10 GRADOS 6131460 14x18x60 ENSAYO XL-CT4-10 GRADOS 6131660 16x18x60 ENSAYO XL-CT4-10 GRADOS 1001992 Mango en T Hudson 6600171 Herramienta de Remoción de Implante 6900101 Ensamblaje de Insertor CR-X 7000045 CoRoent XL-CT Estuche de Esterilización - Base 7000046 XL-CT Estuche de Esterilización - Tapa 7000047 XL-CT Estuche de Esterilización - Inserto Estándar 7000048 XL-CT Estuche de Esterilización - Inserto 10 grados 5450054 CoRoent XL-F Base de Bandeja de Implante 5450037 8mm INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent XL-F 5450038 10mm INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent XL-F 5450039 12mm INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent XL-F 5450040 14mm INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent XL-F 5450041 16mm INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent XL-F 5450042 18mm INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent XL-F 5450053 CoRoent XL-F Inserto de
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

		<p>Ensayos de Bandeja de Implante 6931508 8X18X50mm XL-F ENSAYO 6931510 10X18X50mm XL-F ENSAYO 6931512 12X18X50mm XL-F ENSAYO 6931514 14X18X50mm XL-F ENSAYO 6931516 16X18X50mm XL-F ENSAYO 6931518 18X18X50mm XL-F ENSAYO 6931708 8X18X60mm XL-F ENSAYO 6931710 10X18X60mm XL-F ENSAYO 6931712 12X18X60mm XL-F ENSAYO 6931714 14X18X60mm XL-F ENSAYO 6931716 16X18X60mm XL-F ENSAYO 6931718 18X18X60mm XL-F ENSAYO 6930508 8x18x50mm - 10° ENSAYO, CoRoent XL- 6930510 10x18x50mm - 10° ENSAYO, CoRoent XL 6930512 12x18x50mm - 10° ENSAYO, CoRoent XL 6930514 14x18x50mm - 10° ENSAYO, CoRoent XL 6930516 16x18x50mm - 10° ENSAYO, CoRoent XL 6930518 18x18x50mm - 10° ENSAYO, CoRoent XL 6930708 8x18x60mm - 10° ENSAYO, CoRoent XL- 6930710 10x18x60mm - 10° ENSAYO, CoRoent XL 6930712 12x18x60mm - 10° ENSAYO, CoRoent XL 6930714 14x18x60mm - 10° ENSAYO, CoRoent XL 6930716 16x18x60mm - 10° ENSAYO, CoRoent XL 6930718 18x18x60mm - 10° ENSAYO, CoRoent XL 1001992 Mango en T Hudson 5450052 CoRoent XL-F Inserto Lordótico de Bandeja de Implante 5450051 CoRoent XL-F Inserto Estándar de Bandeja de Implante 5450055 CoRoent XL-F Tapa de Bandeja de Implante 5450027 INSERTOR, CoRoent XL-F 5450034 XL-F BLOQUE DE IMPLANTE 7240010 Conector Rápido Universal, Mango Recto 7240041 Mango en T Universal, Conector Rápido 5450031 LLAVE FINAL, CoRoent XL-F</p>
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

		5450065 DESTORNILLADOR ACCIONADOR, CoRoent XL-F 5450009 TAMP, CoRoent XL-F 5450025 MANGO DE GUÍA DTS, CoRoent XL-F 5450026 RETENEDOR DE GUÍA DTS, CoRoent XL-F 5450408 8mm ENSAMBLAJE DE GUÍA DTS, CoRoent XL-F 5450410 10mm ENSAMBLAJE DE GUÍA DTS, CoRoent XL-F 5450412 12mm ENSAMBLAJE DE GUÍA DTS, CoRoent XL-F 5450414 14mm ENSAMBLAJE DE GUÍA DTS, CoRoent XL-F 5450416 16mm ENSAMBLAJE DE GUÍA DTS, CoRoent XL-F 5450418 18mm ENSAMBLAJE DE GUÍA DTS, CoRoent XL-F 5450101 MANGO AJUSTABLE DE GUÍA VARIABLE XL-F 5450102 MANGO AJUSTABLE DE GUÍA FIJA CoRoent XL 5450165 LLAVE DE PERNO DE GUÍA DTS XL-F 5450155 TALADRO, BLOQUEO DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE 5450255 ROSCA, BLOQUEO DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE, CoRoent XL 5450006 CoRoent XL-F Guía de Taladro, Punzón 7240076 Adaptador Chuck Cuadrado/Jacobs 1/4" 7510136 Moedor de Hueso Universal, 36mm 7510128 Moedor de Hueso Universal, 38mm 7510120 Moedor de Hueso Universal, 20mm 5450032 EXTRACTOR DE TORNILLO, CoRoent XL-F 7510116 Guía Universal, Moedor de Hueso Tamaño 16 7510112 Guía Universal, Moedor de Hueso Tamaño 12 7510108 Guía Universal, Moedor de Hueso Tamaño 8 5450028 Punzón CoRoent XL-F, Autoajustable Fijo
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A. N. M. A. J.

		7510013 Herramienta de Remoción de Osteofitos Universal 7510101 Mango Universal, Moedor de Hueso 5450035 CoRoent XL-F Estuche de Tornillo de Bandeja de Instrumento 5450061 CoRoent XL-F Bandeja de Instrumento (Bandeja Superior) 5450062 CoRoent XL-F Bandeja de Instrumento (Bandeja Media) 5450063 CoRoent XL-F Bandeja de Instrumento (Bandeja Inferior) 8801300 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica 6600171 Herramienta de Remoción de Implante 6252001 ADAPTADOR HUDSON ROSCADO CoRoent XL-K 1001992 Mango en T Hudson 6900101 Ensamblaje de Inserter CR-X 6900609 Base de Bandeja de Implante, CoRoent XL-K 6900610 Inserto Estándar de Bandeja de Implante, CoRoent XL-K 6900611 Inserto Lordótico de Bandeja de Implante, CoRoent XL-K 6900612 Tapa de Bandeja de Implante, CoRoent XL-K 6230850 8x18x50mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent XL-K 6230860 8x18x60mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent XL-K 6231050 10x18x50mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent XL-K 6231060 10x18x60mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent XL-K 6231250 12x18x50mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent XL-K 6231260 12x18x60mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent XL-K 6231450 14x18x50mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent XL-K 6231460 14x18x60mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent XL-K 6231650 16x18x50mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent XL-K 6231660 16x18x60mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent XL-K 6231850 18x18x50mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent XL-K 6231860 18x18x60mm Ensamblaje de
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 A. N. M. A. T.

		Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent XL-K 6240850 8x18x50mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent XL-K 6240860 8x18x60mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent XL-K 6241050 10x18x50mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent XL-K 6241060 10x18x60mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent XL-K 6241250 12x18x50mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent XL-K 6241260 12x18x60mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent XL-K 6241450 14x18x50mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent XL-K 6241460 14x18x60mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent XL-K 6241650 16x18x50mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent XL-K 6241660 16x18x60mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent XL-K 6241850 18x18x50mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent XL-K 6241860 18x18x60mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent XL-K 6251108 8mm Ensamblaje Corto de Cortadora de Quilla CoRoent XL-K 6251110 10mm Ensamblaje Corto de Cortadora de Quilla CoRoent XL-K 6251112 12mm Ensamblaje Corto de Cortadora de Quilla CoRoent XL-K 6251114 14mm Ensamblaje Corto de Cortadora de Quilla CoRoent XL-K 6251116 16mm Ensamblaje Corto de Cortadora de Quilla CoRoent XL-K 6251118 18mm Ensamblaje Corto de Cortadora de Quilla CoRoent XL-K 6251208 8mm Ensamblaje Largo de Cortadora de Quilla CoRoent XL-K 6251210 10mm Ensamblaje Largo de Cortadora de Quilla CoRoent XL-K 6251212 12mm Ensamblaje Largo de Cortadora de Quilla CoRoent XL-K 6251214 14mm Ensamblaje Largo de Cortadora de Quilla CoRoent XL-K 6251216 16mm Ensamblaje Largo de Cortadora de Quilla CoRoent XL-K 6251218 18mm Ensamblaje Largo de Cortadora de Quilla CoRoent XL-K 6900605 Base de Bandeja de
--	--	---

*E.*  
*un*



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

		Instrumento, CoRoent XL-K 6900606 Inserto Lordótico de Bandeja de Instrumento, CoRoent XL-K 6900607 Inserto Estándar de Bandeja de Instrumento, CoRoent XL-K 6900608 Tapa de Bandeja de Instrumento, CoRoent XL-K 8801333 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica 1599102 Bandeja Nivel 3 Genérica, Base 6020102 MAS PLIF Superior, Bandeja Inter-corporal 6020103 MAS PLIF Medio, Bandeja Inter-corporal 6020104 MAS PLIF Inferior, Bandeja Inter-corporal 6020111 MAS PLIF Placard, Estuche Inter-corporal Grande 6020112 MAS PLIF Placard, Estuche Inter-corporal Pequeño 6020114 MAS PLIF Estuche Inter-corporal 1 6020115 MAS PLIF Estuche Inter-corporal 2 6020116 MAS PLIF Estuche Inter-corporal 3 6020040 MAS PLIF Rasuradora Paleta, 7mm 6020041 MAS PLIF Rasuradora Paleta, 8mm 6020042 MAS PLIF Rasuradora Paleta, 9mm 6020043 MAS PLIF Rasuradora Paleta, 10mm 6020044 MAS PLIF Rasuradora Paleta, 11mm 6020045 MAS PLIF Rasuradora Paleta, 12mm 6020046 MAS PLIF Rasuradora Paleta, 13mm 6020047 MAS PLIF Rasuradora Paleta, 14mm 6020030 MAS PLIF Medidora Paleta, 7mm 6020031 MAS PLIF Medidora Paleta, 8mm 6020032 MAS PLIF Medidora Paleta, 9mm 6020033 MAS PLIF Medidora Paleta, 10mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 S.N.M.S.F.

		6020034 MAS PLIF Medidora Paleta, 11mm 6020035 MAS PLIF Medidora Paleta, 12mm 6020036 MAS PLIF Medidora Paleta, 13mm 6020037 MAS PLIF Medidora Paleta, 14mm 1001992 Mango en T Hudson 6020001 MAS PLIF CoRoent Inserter, Grande 6020501 MAS PLIF Ensayo, 8x23mm 4° y 7x28mm 4° 6020502 MAS PLIF Ensayo, 9x23mm 4° y 8x28mm 4° 6020503 MAS PLIF Ensayo, 10x23mm 4° y 9x28mm 4° 6020504 MAS PLIF Ensayo, 11x23mm 4° y 10x28mm 4° 6020505 MAS PLIF Ensayo, 12x23mm 4° y 11x28mm 4° 6020506 MAS PLIF Ensayo, 13x23mm 4° y 12x28mm 4° 6020507 MAS PLIF Ensayo, 14x23mm 4° y 13x28mm 4° 6020510 MAS PLIF Ensayo, 8x23mm 8° y 6x28mm 8° 6020511 MAS PLIF Ensayo, 9x23mm 8° y 7x28mm 8° 6020512 MAS PLIF Ensayo, 10x23mm 8° y 8x28mm 8° 6020513 MAS PLIF Ensayo, 11x23mm 8° y 9x28mm 8° 6020514 MAS PLIF Ensayo, 12x23mm 8° y 10x28mm 8° 6020515 MAS PLIF Ensayo, 13x23mm 8° y 11x28mm 8° 6020516 MAS PLIF Ensayo, 14x23mm 8° y 12x28mm 8° 6020519 MAS PLIF Ensayo, 8x23mm 12° y 6x28mm 12° 6020521 MAS PLIF Ensayo, 10x23mm 12° y 8x28mm 12° 6020523 MAS PLIF Ensayo, 12x23mm 12° y 10x28mm 12° 6020002 MAS PLIF CoRoent Inserter, Corto 6020005 MAS PLIF Tamp, en Caja 6020004 MAS PLIF Tamp, Bifurcado 6020003 MAS PLIF CoRoent
--	--	--

*Handwritten signature*



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T.

		Herramienta de Remoción, Grande (Lugar de elaboración: 2- 7475 Lusk Blvd., San Diego, CA 92121 Estados Unidos.)
Lugar de elaboración	4670 E. Shelby Dr., Memphis TN 38118, Estados Unidos.	1) 4670 E. Shelby Dr., Memphis TN 38118, Estados Unidos. 2) 7475 Lusk Blvd., San Diego, CA 92121 Estados Unidos.
Proyecto de Rótulo	Aprobado según Disp. Autorizante N°3386/14	A fojas 696 a 697.
Proyecto de Instrucciones de Uso	Aprobado según Disp. Autorizante N°3386/14	A fojas 698 a 702.

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma IMPLANTES FICO S.R.L., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-39, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días.....**15 FEB. 2016**

Expediente N° 1-47-3110-1653-14-1

DISPOSICIÓN N°

**1405**

**Dr. ROBERTO LEDE**  
 Subadministrador Nacional  
 A.N.M.A.T.



1,405

31

Anexo III.B

15 FEB. 2016



Proyecto de rótulo - Implante

**Sistema de cajas intersomaticas toracolumbares y cervical e Instrumental asociado.**

Descripción Producto: XXXXXX

NO ESTERIL

MODELO: xxx

DIAMETRO\DIMENSION: xxx

MATERIAL (MATL): xxx

CODIGO (REF): xxx

LOTE (LOT): xxx

CANTIDAD (QTY): xxx

FECHA DE FABRICACION: xxx

ESTERILIZAR ANTES DE USAR

PRODUCTO DE UN SOLO USO

NO UTILIZAR SI EL IMPLANTE SE ENCUENTRA DAÑADO.

ALMACENAR EN LOCAL LIMPIO, SECO, PROTEGIDOS DE LA LUZ SOLAR Y EXTREMOS DE TEMPERATURA.

ESTERILIZACION: Ver instrucciones de uso.

Fabricante:

Nombre del fabricante:

- Nuvasive, Inc.

Direccion: 4670 E. SHELBY DR. MEMPHIS TN, ESTADOS UNIDOS, 38118.

- Nuvasive, Inc.

Direccion: 7475 Lusk Blvd., SAN DIEGO, CA, ESTADOS UNIDOS, 92121

Importador:

IMPLANTES FICO SRL

Lamadrid 2710, CP: 1653 - Villa Ballester, San Martin, Buenos Aires, Argentina

Teléfono: (54 11) 4768 1136 / 2515 / 9091


Fax: (54 11) 4768 1136 / 2515 / 9091 Int: 104

E-mail: cbcaballedo@implantesfico.com.ar

Director Técnico: Claudia Beatriz Carballado - Directora Técnica - M.P. 18900

PRODUCTO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 14-39

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

  
Claudia Beatriz Carballado  
Directora Técnica  
M.P. 18900

  
Gerardo Sangarini  
Socio Gerente  
IMPLANTES FICO SRL

1405



**Proyecto de rótulo - Instrumental**

**Sistema de cajas intersomaticas toracolumbares y cervical e Instrumental asociado.**

Descripción Producto: XXXXXX

NO ESTERIL

MODELO: xxx

DIAMETRO\DIMENSION: xxx

MATERIAL (MATL): xxx

CODIGO (REF): xxx

LOTE (LOT): xxx

ESTERILIZAR ANTES DE USAR

ALMACENAR EN LOCAL LIMPIO, SECO, PROTEGIDOS DE LA LUZ SOLAR Y EXTREMOS DE TEMPERATURA.

ESTERILIZACION: Ver instrucciones de uso.

Fabricante:

Nombre del fabricante:

- Nuvasive, Inc.

Dirección: 4670 E. SHELBY DR. MEMPHIS, TN, ESTADOS UNIDOS, 38118.

- Nuvasive, Inc.

Dirección: 7475 Lusk Blvd., SAN DIEGO, CA, ESTADOS UNIDOS, 92121

Importador:

IMPLANTES FICO SRL

Lamadrid 2710, CP: 1653 - Villa Ballester, San Martín, Buenos Aires, Argentina

Teléfono: (54 11) 4768 1136 / 2515 / 9091

Fax: (54 11) 4768 1136 / 2515 / 9091 Int: 104

E-mail: cbcarballedo@implantesfico.com.ar

Director Técnico: Claudia Beatriz Carballado - Directora Técnica - M.P. 18900

PRODUCTO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 14-39

Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias



Claudia Beatriz Carballado  
Directora Técnica  
M.P. 18900

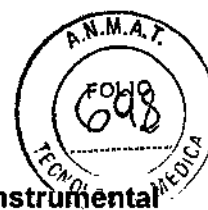


Gerardo R. Angarami  
Socio Gerente  
IMPLANTES FICO SRL



1.4.035

ANEXO III B



Proyecto de Instrucciones de uso

**Descripción Producto:**

**Sistema de cajas intersomaticas toracolumbares y cervical e Instrumental asociado.**

Fabricante:

Nombre del fabricante:

- Nuvasive, Inc.

Dirección: 4670 E. SHELBY DR. MEMPHIS, TN, ESTADOS UNIDOS, 38118.

- Nuvasive, Inc.

Dirección: 7475 Lusk Blvd., SAN DIEGO, CA, ESTADOS UNIDOS, 92121

Importador:

IMPLANTES FICO SRL

Lamadrid 2710, CP: 1653 - Villa Ballester, San Martín, Buenos Aires, Argentina

Teléfono: (54 11) 4768 1136 / 2515 / 9091

Fax: (54 11) 4768 1136 / 2515 / 9091 Int: 104

E-mail: cbcarballedo@implantesfico.com.ar

Director Técnico: Claudia Beatriz Carballedo - Directora Técnica - M.P. 18900

PRODUCTO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 14-39

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

**INDICACIONES**

CoRoent / CoRoent Interlock:

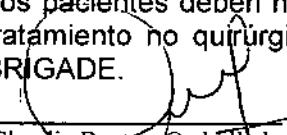
El pequeño Sistema intersomático CoRoent es un sistema independiente de fusión intersomática cervical anterior indicado para el uso en pacientes esqueléticamente maduros con enfermedad degenerativa de disco (EDD) en un nivel del C2-T1. La EDD se define como el dolor de espalda de origen discogénico con degeneración del disco que se confirma con la historia clínica del paciente y estudios radiográficos. Los pacientes deben haberse sometido a un régimen de al menos seis (6) semanas de tratamiento no operatorio antes de tratarse con el pequeño Sistema intersomático CoRoent. El pequeño sistema intersomático CoRoent se utiliza con autoinjerto.

Brigade:


*Cuando se utiliza como dispositivo de fusión del cuerpo intervertebral:*

El sistema independiente BRIGADE es un sistema independiente indicado para procedimientos de fusión vertebral en pacientes con un sistema óseo maduro que padecen discopatías degenerativas (DD) en uno o más niveles contiguos de la columna lumbar (L2 a S1). La DD se define como dolor en la espalda de origen discogénico con degeneración del disco, confirmada por el historial y los estudios radiográficos. Los pacientes con DD también pueden tener espondilolistesis o retrolistesis de hasta Grado I en los niveles afectados. Estos pacientes pueden haber estado sometidos a un procedimiento quirúrgico vertebral anterior que no sea de fusión en los niveles afectados. El sistema independiente BRIGADE está diseñado para ser utilizado con autoinjertos.

Los pacientes deben haberse sometido a un régimen de al menos seis (6) meses de tratamiento no quirúrgico antes de recibir tratamiento con el sistema independiente BRIGADE.

  
 Claudia Beatriz Carballedo  
 Directora Técnica  
 M.P. 18900

  
 Gerardo R. Angarami  
 Socio Gerente  
 IMPLANTES FICO SRL

  
 Pag.: 36 de 40



Quando se utiliza como dispositivo de sustitución parcial del cuerpo vertebral (VBR). El sistema independiente BRIGADE es un sistema independiente indicado para su uso en la espina toracolumbar (T1 a L5) para sustituir un cuerpo vertebral enfermo, seccionado o extirpado como tratamiento de tumores, para conseguir descomprimir la médula espinal y los tejidos neurales y para restablecer la altura de un cuerpo vertebral aplastado.

El sistema independiente BRIGADE también está indicado en el tratamiento de fracturas de la columna torácica y lumbar. El sistema independiente BRIGADE está diseñado para ser utilizado con autoinjertos o aloinjertos

### CONTRAINDICACIONES

Las contraindicaciones incluyen, entre otras:

1. Infección, localizada en la zona a intervenir.
2. Signos de inflamación local.
3. Pacientes con sensibilidad conocida a los materiales implantados.
4. Pacientes reacios a restringir sus actividades o a seguir el consejo médico.
5. Pacientes con cantidad de material óseo o calidad inadecuadas.
6. Pacientes con condiciones físicas o médicas que impidan resultados beneficiosos de la intervención.
7. Utilización con componentes de otros sistemas.
8. Reutilización o uso múltiple.
9. Cualquier caso que no esté expuesto en las indicaciones.
10. Fusión anterior en los niveles a tratar.

### CONTRAINDICACIONES DE LA APLICACIÓN INDEPENDIENTE:

Las contraindicaciones de la aplicación independiente incluyen, entre otras:

1. Espondilolistesis de grado superior a 1.
2. Inestabilidad segmentaria grave.
3. Fusión anterior en los niveles a tratar.

### EFFECTOS SECUNDARIOS Y COMPLICACIONES POTENCIALES

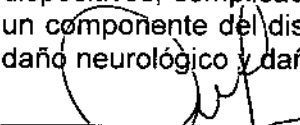
Al igual que ocurre con cualquier otro procedimiento quirúrgico importante, la cirugía ortopédica implica una serie de riesgos. Las complicaciones poco frecuentes durante la operación y postoperatorias conocidas son:

Infección temprana o tardía que podría requerir cirugías adicionales, daño a los vasos sanguíneos, médula espinal o nervios periféricos, émbolos pulmonares, pérdida de función sensorial o motora, impotencia, dolor permanente o deformidad. En raras ocasiones, algunas complicaciones podrían ser fatales.

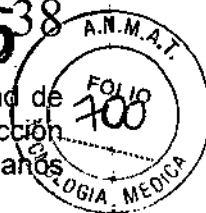
### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

El dispositivo debe utilizarse solo como se indica. Este sistema no debe utilizarse con componentes de ningún otro sistema o fabricante. A menos que se especifique lo contrario, no deben combinarse materiales distintos, como el titanio y el acero inoxidable. La implantación de sistemas para la columna sólo se debería llevar a cabo por parte de cirujanos de columna con formación específica en la utilización de este sistema, ya que es un procedimiento muy exigente técnicamente y que conlleva el riesgo de dañar gravemente al paciente.

Los posibles riesgos que se identifican con la utilización de este sistema de dispositivos, complicaciones que podrían requerir cirugía adicional, incluyen: rotura de un componente del dispositivo, pérdida de fijación, fractura o no unión de la vértebra, daño neurológico y daño vascular o visceral.

  
Claudia Beatriz Carballido  
Directora Técnica  
M.P. 18900

  
Gerardo R. Angarami  
Socio Gerente  
IMPLANTES FICO SRL



La elección correcta del implante es extremadamente importante. La probabilidad de éxito aumenta con la selección del tamaño apropiado del implante. Aunque la elección adecuada puede reducir los riesgos, el tamaño y la forma de los huesos humanos determinan las limitaciones de tamaño y la resistencia de los implantes.

Los dispositivos metálicos de fijación interna no pueden soportar niveles de actividad ni cargas de peso equivalentes a las que soporta el hueso sano normal.

Estos dispositivos no han sido diseñados para soportar por sí solos la tensión del peso completo o la de cargar peso.

Debe actuarse con precaución debido a la posible sensibilidad del paciente a los materiales. No lo implante en pacientes que presenten o puedan presentar sensibilidad a los materiales antes mencionados.

El sistema independiente BRIGADE es un sistema independiente diseñado para utilizarse con los tornillos de hueso incluidos y que no necesita sistemas de fijación complementaria adicionales. Si es menos de la cantidad máxima de tornillos que se usan en el dispositivo, el sistema debe ser utilizado con una fijación adicional para su uso en la columna lumbar.

Estos dispositivos pueden romperse si están sometidos a un aumento de carga asociado con el retraso de la unión o a la falta de la misma. Los dispositivos de fijación interna son dispositivos de distribución de carga que sujetan estructuras óseas alineadas hasta que tenga lugar la cicatrización. Si se retrasa la cicatrización, o no se produce, el implante podría aflojarse, doblarse o romperse. Las cargas sobre el dispositivo debidas al hecho de cargar peso o al nivel de actividad del paciente dictaminarán la duración del implante.

El implante puede sufrir corrosión. La implantación de metales y aleaciones en el organismo humano los somete a un medio constantemente cambiante de sales, ácidos y bases que pueden causar corrosión. Poner metales diferentes en contacto puede acelerar el proceso de corrosión que, a su vez, puede aumentar las fracturas por fatiga en los implantes. Consecuentemente, se deberían hacer todos los esfuerzos posibles por combinar metales y aleaciones compatibles.

Sobre la base de los resultados de la prueba de fatiga, cuando se utiliza el pequeño Sistema intersomático CoRoent, el médico debe considerar los niveles de implantación, el peso del paciente, el nivel de actividad del paciente, otras condiciones del paciente, etc., que puedan tener impacto en el rendimiento de este sistema.

Se deberá poner especial atención para garantizar que todos los componentes están perfectamente fijados antes de proceder a cerrar.

Todos los implantes deben emplearse únicamente con el instrumento diseñado con ese propósito (técnica quirúrgica de referencia).

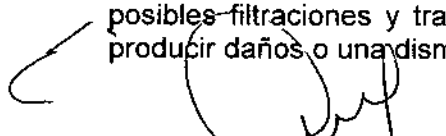
Todos los componentes deben ajustarse al final de acuerdo con las especificaciones de la técnica quirúrgica.

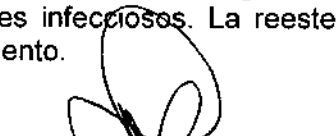
Los implantes no deben apretarse más allá del punto de bloqueo, pues el implante podría dañarse.

Se debe evitar golpear o arañar los implantes o hacer muescas en ellos con cualquier instrumento para evitar el riesgo de rotura.

Los pacientes sometidos a un procedimiento quirúrgico vertebral anterior en los niveles a tratar pueden tener resultados clínicos diferentes a los que no han estado sometidos a un procedimiento quirúrgico anterior.

Un solo uso: La reutilización de un dispositivo de un solo uso que ha estado en contacto con sangre, hueso, tejido u otros fluidos corporales puede producir daños al paciente o usuario. Entre los posibles riesgos asociados con la reutilización de dispositivos de un solo uso se incluyen fallos mecánicos, degradación del material, posibles filtraciones y transmisión de agentes infecciosos. La reesterilización podría producir daños o una disminución del rendimiento.

  
Claudia Beatriz Carballido  
Directora Técnica  
M.P. 18900

  
Gerardo B. Angarami  
Socio Gerente

IMPLANTES FICO SRL

Pag.: 38 de 40



Instrucción del paciente: Las instrucciones preoperatorias dirigidas al paciente son muy importantes. El paciente debe saber las limitaciones y los riesgos potenciales del implante en la intervención.

El paciente debe ser informado de que debe limitar la actividad después de la intervención, ya que así se reducirá el riesgo de curvatura, rotura o pérdida de los componentes del implante. El paciente debe ser informado de que los componentes del implante podrían doblarse, romperse o perderse incluso aunque se hayan seguido las restricciones en la actividad.

Seguridad en resonancia magnética (RM): no se ha evaluado la seguridad y la compatibilidad del pequeño Sistema intersomático CoRoent de NuVasive en el entorno de RM. No se ha probado el calentamiento o la migración del pequeño Sistema intersomático CoRoent de NuVasive en el entorno de RM.

Seguridad en resonancia magnética (RM): no se ha evaluado la seguridad y la compatibilidad del sistema BRIGADE Standalone en el entorno de RM. No se ha probado el calentamiento o la migración del sistema BRIGADE Standalone en el entorno de RM.

Compatibilidad: No utilice el pequeño Sistema intersomático CoRoent/Brigade con componentes de otros sistemas. A menos que se indique lo contrario, los dispositivos NuVasive no deben combinarse con los componentes de otro sistema u otro fabricante.

Al cargar los Tornillos, si el mando rotatorio no está apretando, gire la empuñadura del Atornillador para asegurarse de que el receptáculo para los tornillos esté completamente accionado.

Durante la colocación de los tornillos, utilice la fluoroscopia lateral para asegurarse que el tornillo tenga una trayectoria adecuada a 45° craneal o caudal.

#### **ADVERTENCIAS PREOPERATORIAS**

1. Sólo se deben seleccionar pacientes que cumplan con los requisitos descritos en las indicaciones.
2. Se debe evitar que el paciente presente las condiciones o predisposiciones que se indican en las contraindicaciones anteriormente mencionadas.
3. Se debe tener cuidado al manejar y almacenar los implantes. Los implantes no se deben arañar o dañar. En el proceso de almacenamiento, es conveniente proteger los implantes e instrumentos de ambientes corrosivos.
4. Todas las partes no estériles deberán limpiarse y esterilizarse antes de su uso.
5. Los dispositivos deben revisarse para encontrar posibles daños antes de la implantación.
6. Debe actuarse con precaución durante los procedimientos quirúrgicos para evitar dañar los dispositivos y lesionar al paciente.

#### **ADVERTENCIAS PARA EL POSTOPERATORIO**

Durante la fase postoperatoria, es especialmente importante que el médico mantenga al paciente bien informado de todos los procedimientos y tratamientos.

El daño de las estructuras que soportan peso podría hacer que los componentes se aflojasen y provocar dislocación y migración, así como otras complicaciones.

Para garantizar la detección más temprana posible de esos factores causantes de un mal funcionamiento del dispositivo, los dispositivos deben revisarse periódicamente tras la intervención mediante las técnicas radiográficas adecuadas.

#### **ESTERILIZACIÓN**

Todos los instrumentos e implantes se suministran sin esterilizar y se deben esterilizar antes de su uso. Todos los componentes del pequeño Sistema intersomático CoRoent/Brigade se pueden esterilizar mediante autoclave de vapor siguiendo las

Claudia Beatriz Carballedo  
Directora Técnica  
M.P. 18900

Gerardo R. Angarami  
Socio Gerente

140540



prácticas hospitalarias estándar. En un esterilizador de vapor bien calibrado y que funcione correctamente, se puede conseguir una esterilización efectiva con los parámetros siguientes:

Método: Vapor  
Ciclo: Gravedad  
Temperatura: 132°C (270°F)  
Tiempo de exposición: 30 minutos  
Tiempo min de secado: 10 minutos

Método: Vapor  
Ciclo: Vacío previo  
Temperatura: 132°C (270°F)  
Tiempo de exposición: 6 minutos  
Tiempo de exposición: 10 minutos

Esterilice siempre los dispositivos desmontados y abiertos en posición desbloqueada y evite el enfriamiento repentino de los componentes. Asegúrese de que todas las funciones estén inalteradas antes de la utilización.

Antes de comenzar la cirugía, verifique que todos los dispositivos estén correctamente encajados y que no esté dañado ningún instrumento ni implante.

E

Claudia Beatriz Carballido  
Directora Técnica  
M.P. 18900

Gerardo R. Abgarami  
Socio Gerente

IMPLANTES FICO SRL