



Ministerio de Salud
*Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos*
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 4085

BUENOS AIRES, 26 JUN 2013

VISTO el Expediente N° 1-47-2995/12-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Medic S.A., solicita se autorice la inscripción en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.



Ministerio de Salud
*Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 4085

Por ello;

**EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:**

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca MENTOR, nombre descriptivo Probadores de Implantes Mamarios de Gel Reesterilizables y nombre técnico prótesis de mamas, de acuerdo a lo solicitado, por Medic S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 104 Y 133-147 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-76-60, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscribese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas



DISPOSICIÓN N° 4085

Ministerio de Salud
*Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos*
A.N.M.A.T.

notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-2995/12-7

DISPOSICIÓN N°

4085



Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
*Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos*
A.N.M.A.T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto
en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°4085.....

Nombre descriptivo: Probadores de Implantes Mamarios de Gel Reesterilizables

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-161, prótesis de mamas

Marca del producto médico: MENTOR

Clase de Riesgo: Clase II

Indicación/es autorizada/s: Se usa como ayuda para evaluar el tamaño y la
forma del implante de mama antes de proceder a la colocación de un implante de
mama

Modelo/s:

Para el fabricante de Zernikedreef 2-2333 CL- Leiden – Países Bajos:

- RSZ -1100 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo
Redondo 100cc.

- RSZ -1125 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo
Redondo 125cc

- RSZ -1150 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo
Redondo 150cc.

- RSZ-1175 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo
Redondo 175cc.

- RSZ-1200 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo
Redondo 200cc.

- RSZ-1225 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo
Redondo 225cc.

- RSZ-1250 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo
Redondo 250cc.



Ministerio de Salud
*Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos*
A.N.M.A.T.

- RSZ-1275 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 275cc.
- RSZ-1300 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 300cc.
- RSZ-1325 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 325cc.
- RSZ-1350 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 350cc.
- RSZ-1375 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 375cc.
- RSZ-1400 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 400cc.
- RSZ-1450 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 450cc.
- RSZ-1500 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 500cc.
- RSZ-1550 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 550cc.
- RSZ-1600 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 600cc.
- RSZ- 5135 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 135cc.
- RSZ- 5160 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 160cc.
- RSZ- 5185 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 185cc.
- RSZ- 5215 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 215cc.
- RSZ- 5240 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 240cc.

5





Ministerio de Salud

*Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.*

- RSZ- 5270 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 270cc.
- RSZ- 5295 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 295cc.
- RSZ- 5320 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 320cc.
- RSZ- 5350 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 350cc.
- RSZ- 5375 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 375cc.
- RSZ- 5400 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 400cc.
- RSZ- 5430 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 430cc.
- RSZ- 5455 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 455cc.
- RSZ- 5480 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 480cc.
- RSZ- 5535 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 535cc.
- RSZ- 5590 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 590cc.
- RSZ- 0090 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 100cc.
- RSZ- 0095 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 120cc.
- RSZ- 0100 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 140cc.
- RSZ- 0105 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 160cc.
- RSZ- 0110 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 180cc.
- RSZ- 0115 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 210cc.
- RSZ- 0120 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 235cc.
- RSZ- 0125 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 270cc.

5,



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

- RSZ- 0130 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 300cc.
- RSZ- 0135 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 335cc.
- RSZ- 0140 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 375cc.
- RSZ- 0145 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 415cc.
- RSZ- 0150 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 460cc.
- RSZ- 0155 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 510cc.
- RSZ- 0160 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 560cc.
- RSZ- 0165 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 615cc.
- RSZ- 0907 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 125cc.
- RSZ- 0957 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 145cc.
- RSZ- 1007 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 170cc.
- RSZ- 1057 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 195cc.
- RSZ- 1107 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 225cc.
- RSZ- 1157 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 255cc.
- RSZ- 1207 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 290cc.
- RSZ- 1257 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 330cc.
- RSZ- 1307 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 370cc.
- RSZ- 1357 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 415cc.
- RSZ- 1407 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 465cc.
- RSZ- 1457 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 515cc.
- RSZ- 1507 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 570cc.
- RSZ- 1607 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 690cc.
- RSZ- 0906 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 130cc.
- RSZ- 0956 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 155cc.
- RSZ- 1006 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 180cc.
- RSZ- 1056 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 210cc.
- RSZ- 1106 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 240cc.
- RSZ- 1156 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 270cc.
- RSZ- 1206 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 310cc.
- RSZ- 1256 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 350cc.

J



Ministerio de Salud

*Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.*

- RSZ- 1306 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 395cc.
- RSZ- 1356 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 440cc.
- RSZ- 1406 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable CPG 313 490cc.
- RSZ- 1456 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 545cc.
- RSZ- 1506 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 605cc.
- RSZ- 0908 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 120cc.
- RSZ- 0958 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 135cc.
- RSZ- 1008 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 155cc.
- RSZ- 1058 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 180cc.
- RSZ- 1108 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 215cc.
- RSZ- 1158 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 245cc.
- RSZ- 1208 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 280cc.
- RSZ- 1258 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 315cc.
- RSZ- 1308 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 355cc.
- RSZ- 1358 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 395cc.
- RSZ- 1408 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 440cc.
- RSZ- 1458 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 480cc.
- RSZ- 1508 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 530cc.
- RSZ- 1608 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 640cc.
- RSZ- 1708 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 775cc.
- RSZ- 0905 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 140cc.
- RSZ- 0955 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 165cc.
- RSZ- 1005 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 195cc.
- RSZ- 1055 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 225cc.
- RSZ- 1105 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 255cc.
- RSZ- 1155 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 295cc.
- RSZ- 1205 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 330cc.
- RSZ- 1255 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 375cc.
- RSZ- 1305 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 420cc.
- RSZ- 1355 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 475cc.

5



Ministerio de Salud

*Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.*

- RSZ- 1405 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 525cc.
- RSZ- 1455 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 585cc.
- RSZ- 1505 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 650cc.
- RSZ- 0902 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 165cc
- RSZ- 0952 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 195cc
- RSZ- 1002 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 225cc
- RSZ- 1052 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 260cc
- RSZ- 1102 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 300cc
- RSZ- 1152 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 345cc
- RSZ- 1202 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 390cc
- RSZ- 1252 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 440cc
- RSZ- 1302 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 495cc
- RSZ- 1352 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 555cc
- RSZ- 1402 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 620cc
- RSZ- 1452 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 685cc
- RSZ- 0903 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 125cc.
- RSZ- 0953 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 150cc.
- RSZ- 1003 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 175cc.
- RSZ- 1053 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 200cc.
- RSZ- 1103 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 230cc.
- RSZ- 1153 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 265cc.
- RSZ- 1203 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 300cc.
- RSZ- 1253 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 340cc.
- RSZ- 1303 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 380cc.
- RSZ- 1353 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 425cc.
- RSZ- 1403 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 475cc.
- RSZ- 1453 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 530cc.
- RSZ- 1503 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 585cc.
- RSZ- 1553 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 645cc.
- RSZ- 0909 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 145cc.

5.



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

- RSZ- 0959 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 175cc.
- RSZ- 1009 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 205cc.
- RSZ- 1059 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 235cc.
- RSZ- 1109 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 270cc.
- RSZ- 1159 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 305cc
- RSZ- 1209 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 350cc.
- RSZ- 1259 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 395cc.
- RSZ- 1309 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 445cc.
- RSZ- 1359 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 495cc.
- RSZ- 1409 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 555cc.
- RSZ- 1459 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 615cc.
- RSZ- 1509 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 680cc.
- RSZ- 4090 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 180cc.
- RSZ- 4095 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 215cc.
- RSZ- 4100 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 250cc.
- RSZ- 4105 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 290cc.
- RSZ- 4110 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 330cc.
- RSZ- 4115 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 380cc.
- RSZ- 4120 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 430cc.
- RSZ- 4125 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 485cc.
- RSZ- 4130 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 545cc.
- RSZ- 4135 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 610cc.
- RSZ- 4140 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 680cc.
- RSZ- 4145 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 755cc.

Para el fabricante de 3041 Skyway Circle North Irving, Texas 75038 – USA:

- RSZ- 7130MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 130cc
- RSZ- 7150MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 150cc



Ministerio de Salud
*Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos*
A.N.M.A.T.

- RSZ- 7170MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 170cc
- RSZ- 7190MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 190cc
- RSZ- 7215MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 215cc
- RSZ- 7235MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 235cc
- RSZ- 7255MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 255cc
- RSZ- 7275MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 275cc
- RSZ- 7300MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 300cc
- RSZ- 7320MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 320cc
- RSZ- 7340MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 340cc
- RSZ- 7360MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 360cc
- RSZ- 7385MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 385cc
- RSZ- 7405MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 405cc
- RSZ- 7425MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 425cc
- RSZ- 7445MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 445cc
- RSZ- 7470MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 470cc

8.



Ministerio de Salud

*Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.*

- RSZ- 7490MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 490cc
 - RSZ- 7510MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 510cc
 - RSZ- 7555MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 555cc
 - RSZ- 7595MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 595cc
 - RSZ- 7640MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 640cc
 - RSZ- 7680MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 680cc
 - RSZ- 7750MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 750cc
 - RSZ- 7800MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 800cc
- Para los fabricantes de Zernikedreef 2-2333 CL- Leiden – Países Bajos y 3041 Skyway Circle North Irving, Texas 75038 – USA:
- RSZ- 7100 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 100cc.
 - RSZ- 7125 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 125cc.
 - RSZ- 7150 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 150cc.
 - RSZ- 7175 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 175cc.
 - RSZ- 7200 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 200cc.
 - RSZ- 7225 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 225cc.

5,



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

- RSZ- 7250 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 250cc.
- RSZ- 7275 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 275cc.
- RSZ- 7300 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 300cc.
- RSZ- 7325 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 325cc.
- RSZ- 7350 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 350cc.
- RSZ- 7375 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 375cc.
- RSZ- 7400 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 400cc.
- RSZ- 7450 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 450cc.
- RSZ- 7500 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 500cc.
- 5. - RSZ- 7550 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 550cc.
- RSZ- 7600 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 600cc.
- RSZ- 7700 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 700cc.
- RSZ- 7800 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 800cc.
- RSZ- 1001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo100cc.
- RSZ- 1251 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo125cc.



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

- RSZ- 1501 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 150cc
- RSZ- 1751 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 175cc
- RSZ- 2001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 200cc
- RSZ- 2251 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 225cc
- RSZ- 2501 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 250cc
- RSZ- 2751 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 275cc
- RSZ- 3001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 300cc
- RSZ- 3251 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 325cc
- RSZ- 3501 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 350cc
- RSZ- 3751 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 375cc
- RSZ- 4001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 400cc
- RSZ- 4501 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 450cc
- RSZ- 5001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 500cc
- RSZ- 5501 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 550cc
- RSZ- 6001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 600cc

5,



Ministerio de Salud

*Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.*

- RSZ- 7001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 700cc
- RSZ- 8001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 800cc
- RSZ- 1254 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 125cc.
- RSZ- 1504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 150cc.
- RSZ- 1754 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 175cc.
- RSZ- 2004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 200cc.
- RSZ- 2254 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 225cc.
- RSZ- 2504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 250cc.
- RSZ- 2754 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 275cc.
- 5. - RSZ- 3004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 300cc.
- RSZ- 3254 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 325cc.
- RSZ- 3504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 350cc.
- RSZ- 3754 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 375cc.
- RSZ- 4004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 400cc.
- RSZ- 4254 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 425cc.



Ministerio de Salud

*Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.*

- RSZ- 4504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 450cc.
- RSZ- 5004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 500cc.
- RSZ- 5504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 550cc.
- RSZ- 6004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 600cc.
- RSZ- 6504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 650cc.
- RSZ- 7004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 700cc.
- RSZ- 8004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 800cc.
- RSZ- 7100 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 100cc.
- RSZ- 7125 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 125cc.
- RSZ- 7150 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 150cc.
- RSZ- 7175 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 175cc.
- RSZ- 7200 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 200cc.
- RSZ- 7225 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 225cc.
- RSZ- 7250 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 250cc.
- RSZ- 7275 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 275cc.
- RSZ- 7300 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 300cc.
- RSZ- 7325 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 325cc.
- RSZ- 7350 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 350cc.
- RSZ- 7375 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 375cc.
- RSZ- 7400 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 400cc.
- RSZ- 7450 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 450cc.
- RSZ- 7500 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 500cc.
- RSZ- 7550 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 550cc.

8.



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación

e Institutos

A.N.M.A.T.

- RSZ- 7600 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 600cc.
- RSZ- 7700 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 700cc.
- RSZ- 7800 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 800cc.
- RSZ- 1001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 100cc.
- RSZ- 1251 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 125cc.
- RSZ- 1501 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 150cc
- RSZ- 1751 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 175cc
- RSZ- 2001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 200cc
- RSZ- 2251 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 225cc
- RSZ- 2501 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 250cc
- RSZ- 2751 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 275cc
- RSZ- 3001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 300cc
- RSZ- 3251 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 325cc
- RSZ- 3501 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 350cc
- RSZ- 3751 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 375cc
- RSZ- 4001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 400cc
- RSZ- 4501 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 450cc
- RSZ- 5001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 500cc
- RSZ- 5501 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 550cc
- RSZ- 6001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 600cc
- RSZ- 7001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 700cc
- RSZ- 8001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 800cc
- RSZ- 1254 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 125cc.
- RSZ- 1504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 150cc.
- RSZ- 1754 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 175cc.
- RSZ- 2004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 200cc.
- RSZ- 2254 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 225cc.
- RSZ- 2504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 250cc.
- RSZ- 2754 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 275cc.
- RSZ- 3004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 300cc.

5



Ministerio de Salud

*Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.*

- RSZ- 3254 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 325cc.
- RSZ- 3504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 350cc.
- RSZ- 3754 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 375cc.
- RSZ- 4004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 400cc.
- RSZ- 4254 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 425cc.
- RSZ- 4504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 450cc.
- RSZ- 5004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 500cc.
- RSZ- 5504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 550cc.
- RSZ- 6004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 600cc.
- RSZ- 6504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 650cc.
- RSZ- 7004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 700cc.
- RSZ- 8004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 800cc.

Período de vida útil: Reesterilizable hasta 10 veces.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: MENTOR MEDICAL SYSTEMS B.V

Lugar/es de elaboración: Zernikedreef 2-2333 CL- Leiden – Países Bajos

Nombre del fabricante: MENTOR

Lugar/es de elaboración: 3041 Skyway Circle North Irving, Texas 75038 - USA.

Expediente N° 1-47-2995/12-7

DISPOSICIÓN N° **4085**

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
*Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos*
A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº

4085
.....


Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Importador y Distribuidor
para la República Argentina

4085

MENTOR byron

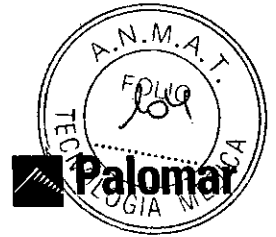

PROBADORES de IMPLANTES MAMARIOS DE GEL ESTERIL REESTERILIZABLES Mentor

PROYECTO DE ROTULO

(Según Disposición 2318/02 (TO 2004) Anexo III B

FABRICANTE: Mentor Medical Systems B.V - Zernikedreef 2 – 2333 CL Leiden – The Netherlands.
Mentor - 3041 Skyway Circle North Irving, Texas 75038 - USA

IMPORTADOR: Medic S.A., Uruguay 775 - 7 A, Capital Federal.

CONTENIDO DEL ENVASE: Un envase individual con doble envoltura estéril y apirógeno.

Producto estéril. Se puede reesterilizar hasta 10 (diez) veces y luego de estas 10 veces se debe desechar.

LOTE ----- SERIE ----- VENCIMIENTO --/--/----

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, CONSERVACION Y MANIPULACION: No se requieren condiciones especiales de almacenamiento.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE USO: Se puede usar como probador de gel de "un sólo uso" o reesterilizar para utilizarlo varias veces.

ADVERTENCIA Y/O PRECAUCION A ADOPTARSE: No utilizar si el envase está dañado.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: calor seco.

CONDICION DE VENTA: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Director Técnico: Solange Sidero Colman. MN: 11.299

AUTORIZADO POR LA ANMAT: PM 76-060

MEDIC S.A.

José Luis Bosch
Apoderado

SOLANGE SIDERO COLMAN
DIRECTORA TÉCNICA
FARMACEUTICA S.A. 11299



Siliconas Grado Médico

4085



PROBADORES de IMPLANTES MAMARIOS DE GEL ESTERIL REESTERILIZABLES Mentor

INSTRUCCIONES DE USO Sumario de informaciones básicas

Según Anexo III B Sección 3 de la Disposición 2318/02 (TO 2004)

1. INDICACIONES CONTEMPLADAS EN EL ROTULO

El probador o medidor de implante mamario, de gel estéril y reesterilizable Mentor es un dispositivo de medición diseñado para la colocación intraoperatoria temporal como ayuda para evaluar el tamaño y la forma del implante de mama para cada paciente, antes de proceder a la colocación del implante de mama Mentor. Se puede usar como probador de gel de "un solo uso" o "reesterilizarlo" para utilizarlo varias veces.

La superficie del probador de gel es lisa y está hecha de una cubierta de elastómero de silicona rellena de gel de silicona. El dispositivo está hecho a base de capas sucesivas reticuladas de elastómero de silicona, de manera que cada capa reticulada se une a la siguiente para proporcionar al dispositivo elasticidad e integridad.

FABRICANTE: Mentor Medical Systems B.V -- Zernikedreef 2 -- 2333 CL Leiden -- The Netherlands.

Mentor - 3041 Skyway Circle North Irving, Texas 75038 - USA

IMPORTADOR: Medic S.A., Uruguay 775- 7ªA, Capital Federal.

CONTIENE: Un envase individual con doble envoltura estéril y apirógeno.

Producto estéril.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, CONSERVACION Y MANIPULACION: No se requieren condiciones especiales de almacenamiento.

USO: Se usa como ayuda para evaluar el tamaño y la forma del implante de mama antes de proceder a la colocación de un implante de mama.

ADVERTENCIA Y/O PRECAUCION A ADOPTARSE: No utilizar si el envase está dañado.

CONDICION DE VENTA: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Director Técnico: Solange Sidero Colman. MN: 11.299

AUTORIZADO POR LA ANMAT: PM 076-060

2. PRESTACIONES Y FUNCIONES QUE LE ATRIBUYE EL FABRICANTE. REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y EFICACIA. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS NO DESEADOS.

2.1. PRESTACIONES Y FUNCIONES QUE LE ATRIBUYE EL FABRICANTE

El probador o medidor de gel está diseñado para su inserción intraoperatoria temporal

MEDIC S.A.
José Luis Bosch
Apoderado

SOLANGE SIDERO COLMAN
DIRECTORA TECNICA
FARMACEUTICA M.N. 11299



Siliconas Grado Médico

4085



Descripción

El probador de implante mamario de gel estéril y reesterilizable Mentor es un dispositivo de medición diseñado para la colocación intraoperatoria temporal como ayuda para evaluar el tamaño y la forma del implante de mama para cada paciente, antes de proceder a la colocación del implante de mama Mentor. Se puede usar como probador de gel de "un solo uso" o "reesterilizar" para utilizarlo varias veces.

La superficie del probador de gel es lisa y está hecha de una cubierta de elastómero de silicona rellena de gel de silicona. El dispositivo está hecho a base de capas sucesivas reticuladas de elastómero de silicona, de manera que cada capa reticulada se une a la siguiente para proporcionar al dispositivo elasticidad e integridad.

El dispositivo se suministra esterilizado. Antes de proceder a su reutilización, se lo debe limpiar bien, desinfectar y esterilizar. No se debe reesterilizar más de 10 veces.

Los probadores de implantes mamaros están disponibles como:

Los probadores de implantes mamaros provenientes de Mentor Holanda:

- RSZ -1100 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 100cc.
- RSZ -1125 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 125cc
- RSZ -1150 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 150cc.
- RSZ-1175 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 175cc.
- RSZ-1200 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 200cc.
- RSZ-1225 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 225cc.
- RSZ-1250 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 250cc.
- RSZ-1275 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 275cc.
- RSZ-1300 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 300cc.
- RSZ-1325 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 325cc.
- RSZ-1350 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 350cc.
- RSZ-1375 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 375cc.
- RSZ-1400 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 400cc.
- RSZ-1450 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 450cc.
- RSZ-1500 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 500cc.
- RSZ-1550 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 550cc.
- RSZ-1600 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 600cc.

- RSZ- 7100 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 100cc.
- RSZ- 7125 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 125cc.
- RSZ- 7150 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 150cc.
- RSZ- 7175 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 175cc.
- RSZ- 7200 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 200cc.
- RSZ- 7225 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 225cc.

MEDIC S.A.

José Luis Bosch
Aprobado

DR. ENGE SIDERO CO.
DIRECTORA TECNICA
FARMACEUTICA M.N. 11299



Siliconas Grado Médico

4085



- RSZ- 7250 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 250cc.
- RSZ- 7275 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 275cc.
- RSZ- 7300 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 300cc.
- RSZ- 7325 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 325cc.
- RSZ- 7350 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 350cc.
- RSZ- 7375 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 375cc.
- RSZ- 7400 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 400cc.
- RSZ- 7450 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 450cc.
- RSZ- 7500 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 500cc.
- RSZ- 7550 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 550cc.
- RSZ- 7600 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 600cc.
- RSZ- 7700 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 700cc.
- RSZ- 7800 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 800cc.

- RSZ- 1001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 100cc.
- RSZ- 1251 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 125cc.
- RSZ- 1501 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 150cc
- RSZ- 1751 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 175cc
- RSZ- 2001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 200cc
- RSZ- 2251 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 225cc
- RSZ- 2501 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 250cc
- RSZ- 2751 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 275cc
- RSZ- 3001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 300cc
- RSZ- 3251 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 325cc
- RSZ- 3501 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 350cc
- RSZ- 3751 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 375cc
- RSZ- 4001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 400cc
- RSZ- 4501 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 450cc
- RSZ- 5001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 500cc
- RSZ- 5501 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 550cc
- RSZ- 6001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 600cc
- RSZ- 7001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 700cc
- RSZ- 8001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 800cc

- RSZ- 1254 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo. 125cc.
- RSZ- 1504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 150cc.
- RSZ- 1754 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 175cc.
- RSZ- 2004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 200cc.
- RSZ- 2254 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 225cc.
- RSZ- 2504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 250cc.
- RSZ- 2754 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 275cc.
- RSZ- 3004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 300cc.
- RSZ- 3254 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 325cc.
- RSZ- 3504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 350cc.
- RSZ- 3754 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 375cc.
- RSZ- 4004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 400cc.



MEDIC S.A.
Jose Luis Bosch
Apoderado

INGE SIDRIS COLMAN
DIRECTORA TECNICA
FARMACEUTICA S.A. 11299



Siliconas Grado Médico

4085




- RSZ- 4254 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 425cc.
- RSZ- 4504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 450cc.
- RSZ- 5004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 500cc.
- RSZ- 5504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 550cc.
- RSZ- 6004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 600cc.
- RSZ- 6504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 650cc.
- RSZ- 7004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 700cc.
- RSZ- 8004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 800cc.

- RSZ- 5135 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 135cc.
- RSZ- 5160 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 160cc.
- RSZ- 5185 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 185cc.
- RSZ- 5215 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 215cc.
- RSZ- 5240 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 240cc.
- RSZ- 5270 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 270cc.
- RSZ- 5295 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 295cc.
- RSZ- 5320 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 320cc.
- RSZ- 5350 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 350cc.
- RSZ- 5375 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 375cc.
- RSZ- 5400 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 400cc.
- RSZ- 5430 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 430cc.
- RSZ- 5455 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 455cc.
- RSZ- 5480 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 480cc.
- RSZ- 5535 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 535cc.
- RSZ- 5590 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 590cc.

- RSZ- 0090 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 100cc.
- RSZ- 0095 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 120cc.
- RSZ- 0100 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 140cc.
- RSZ- 0105 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 160cc.
- RSZ- 0110 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 180cc.
- RSZ- 0115 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 210cc.
- RSZ- 0120 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 235cc.
- RSZ- 0125 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 270cc.
- RSZ- 0130 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 300cc.
- RSZ- 0135 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 335cc.
- RSZ- 0140 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 375cc.
- RSZ- 0145 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 415cc.
- RSZ- 0150 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 460cc.
- RSZ- 0155 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 510cc.
- RSZ- 0160 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 560cc.
- RSZ- 0165 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 615cc.

- RSZ- 0907 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 125cc.
- RSZ- 0957 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 145cc.
- RSZ- 1007 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 170cc.
- RSZ- 1057 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 195cc.

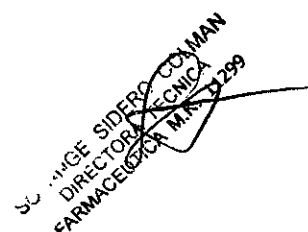

MEDIC S.A.
José Luis Bosch
Apoderado



Siliconas Grado Médico

4085



- RSZ- 1107 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 225cc.
- RSZ- 1157 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 255cc.
- RSZ- 1207 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 290cc.
- RSZ- 1257 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 330cc.
- RSZ- 1307 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 370cc.
- RSZ- 1357 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 415cc.
- RSZ- 1407 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 465cc.
- RSZ- 1457 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 515cc.
- RSZ- 1507 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 570cc.
- RSZ- 1607 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 690cc.

- RSZ- 0906 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 130cc.
- RSZ- 0956 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 155cc.
- RSZ- 1006 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 180cc.
- RSZ- 1056 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 210cc.
- RSZ- 1106 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 240cc.
- RSZ- 1156 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 270cc.
- RSZ- 1206 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 310cc.
- RSZ- 1256 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 350cc.
- RSZ- 1306 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 395cc.
- RSZ- 1356 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 440cc.
- RSZ- 1406 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable CPG 313 490cc.
- RSZ- 1456 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 545cc.
- RSZ- 1506 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 605cc.

- RSZ- 0908 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 120cc.
- RSZ- 0958 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 135cc.
- RSZ- 1008 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 155cc.
- RSZ- 1058 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 180cc.
- RSZ- 1108 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 215cc.
- RSZ- 1158 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 245cc.
- RSZ- 1208 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 280cc.
- RSZ- 1258 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 315cc.
- RSZ- 1308 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 355cc.
- RSZ- 1358 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 395cc.
- RSZ- 1408 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 440cc.
- RSZ- 1458 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 480cc.
- RSZ- 1508 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 530cc.
- RSZ- 1608 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 640cc.
- RSZ- 1708 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 775cc.

- RSZ- 0905 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 140cc.
- RSZ- 0955 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 165cc.
- RSZ- 1005 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 195cc.
- RSZ- 1055 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 225cc.
- RSZ- 1105 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 255cc.



5017 NISE SIDERO COLMAN DIRECTORA TECNICA FARMACIA TECNICA M.M. 11299

MEDIC S.A.
José Luis Bosch
Apoderado



Siliconas Grado Médico

40851



- RSZ- 1155 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 295cc.
- RSZ- 1205 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 330cc.
- RSZ- 1255 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 375cc.
- RSZ- 1305 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 420cc.
- RSZ- 1355 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 475cc.
- RSZ- 1405 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 525cc.
- RSZ- 1455 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 585cc.
- RSZ- 1505 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 650cc.

- RSZ- 0902 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 165cc
- RSZ- 0952 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 195cc
- RSZ- 1002 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 225cc
- RSZ- 1052 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 260cc
- RSZ- 1102 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 300cc
- RSZ- 1152 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 345cc
- RSZ- 1202 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 390cc
- RSZ- 1252 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 440cc
- RSZ- 1302 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 495cc
- RSZ- 1352 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 555cc
- RSZ- 1402 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 620cc
- RSZ- 1452 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable. CPG 323 685cc

- RSZ- 0903 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 125cc.
- RSZ- 0953 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 150cc.
- RSZ- 1003 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 175cc.
- RSZ- 1053 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 200cc.
- RSZ- 1103 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 230cc.
- RSZ- 1153 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 265cc.
- RSZ- 1203 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 300cc.
- RSZ- 1253 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 340cc.
- RSZ- 1303 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 380cc.
- RSZ- 1353 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 425cc.
- RSZ- 1403 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 475cc.
- RSZ- 1453 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 530cc.
- RSZ- 1503 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 585cc.
- RSZ- 1553 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 645cc.

- RSZ- 0909 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 145cc.
- RSZ- 0959 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 175cc.
- RSZ- 1009 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 205cc.
- RSZ- 1059 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 235cc.
- RSZ- 1109 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 270cc.
- RSZ- 1159 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 305cc.
- RSZ- 1209 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 350cc.
- RSZ- 1259 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 395cc.
- RSZ- 1309 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 445cc.



MEDIC S.A.

José Luis Bosch Apoderado

SOCIANICE SINEPO CO. DIRECTORA TECNICA FARMACUTICA M. 11299



Siliconas Grado Médico

4085



- RSZ- 1359 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 495cc.
- RSZ- 1409 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 555cc.
- RSZ- 1459 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 615cc.
- RSZ- 1509 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 680cc.

- RSZ- 4090 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 180cc.
- RSZ- 4095 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 215cc.
- RSZ- 4100 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 250cc.
- RSZ- 4105 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 290cc.
- RSZ- 4110 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 330cc.
- RSZ- 4115 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 380cc.
- RSZ- 4120 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 430cc.
- RSZ- 4125 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 485cc.
- RSZ- 4130 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 545cc.
- RSZ- 4135 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 610cc.
- RSZ- 4140 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 680cc.
- RSZ- 4145 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 755cc.

Los probadores de implantes mamarios provenientes de Mentor USA:

Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable:

- RSZ- 7100 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 100cc.
- RSZ- 7125 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 125cc.
- RSZ- 7150 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 150cc.
- RSZ- 7175 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 175cc.
- RSZ- 7200 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 200cc.
- RSZ- 7225 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 225cc.
- RSZ- 7250 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 250cc.
- RSZ- 7275 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 275cc.
- RSZ- 7300 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 300cc.
- RSZ- 7325 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 325cc.
- RSZ- 7350 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 350cc.
- RSZ- 7375 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 375cc.
- RSZ- 7400 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 400cc.
- RSZ- 7450 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 450cc.
- RSZ- 7500 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 500cc.
- RSZ- 7550 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 550cc.
- RSZ- 7600 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 600cc.
- RSZ- 7700 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 700cc.
- RSZ- 7800 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 800cc.

- RSZ- 1001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 100cc.
- RSZ- 1251 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 125cc.
- RSZ- 1501 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 150cc.

MEDIC S.A.

José Luis Bosch
Apoderado



SOLANGE SIDERO ROZMAN
DIRECTORA GENERAL
FARMACEUTICA A.N. 1369



Siliconas Grado Médico

4085



- RSZ- 1751 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 175cc
- RSZ- 2001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 200cc
- RSZ- 2251 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 225cc
- RSZ- 2501 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 250cc
- RSZ- 2751 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 275cc
- RSZ- 3001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 300cc
- RSZ- 3251 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 325cc
- RSZ- 3501 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 350cc
- RSZ- 3751 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 375cc
- RSZ- 4001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 400cc
- RSZ- 4501 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 450cc
- RSZ- 5001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 500cc
- RSZ- 5501 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 550cc
- RSZ- 6001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 600cc
- RSZ- 7001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 700cc
- RSZ- 8001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 800cc

- RSZ- 1254 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 125cc.
- RSZ- 1504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 150cc.
- RSZ- 1754 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 175cc.
- RSZ- 2004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 200cc.
- RSZ- 2254 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 225cc.
- RSZ- 2504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 250cc.
- RSZ- 2754 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 275cc.
- RSZ- 3004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 300cc.
- RSZ- 3254 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 325cc.
- RSZ- 3504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 350cc.
- RSZ- 3754 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 375cc.
- RSZ- 4004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 400cc.
- RSZ- 4254 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 425cc.
- RSZ- 4504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 450cc.
- RSZ- 5004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 500cc.
- RSZ- 5504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 550cc.
- RSZ- 6004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 600cc.
- RSZ- 6504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 650cc.
- RSZ- 7004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 700cc.
- RSZ- 8004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 800cc.



- RSZ- 7130MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 130cc
- RSZ- 7150MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 150cc
- RSZ- 7170MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 170cc
- RSZ- 7190MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 190cc
- RSZ- 7215MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 215cc
- RSZ- 7235MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 235cc
- RSZ- 7255MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 255cc
- RSZ- 7275MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 275cc

MEDIC S.A.

José Luis Bosch
Anderado

DR. SIDERALDI MAN
DIRECTOR GENERAL
FARMACEUTICA MEDICA



Siliconas Grado Médico

085



- RSZ- 7300MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 300cc
- RSZ- 7320MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 320cc
- RSZ- 7340MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 340cc
- RSZ- 7360MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 360cc
- RSZ- 7385MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 385cc
- RSZ- 7405MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 405cc
- RSZ- 7425MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 425cc
- RSZ- 7445MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 445cc
- RSZ- 7470MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 470cc
- RSZ- 7490MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 490cc
- RSZ- 7510MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 510cc
- RSZ- 7555MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 555cc
- RSZ- 7595MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 595cc
- RSZ- 7640MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 640cc
- RSZ- 7680MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 680cc
- RSZ- 7750MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 750cc
- RSZ- 7800MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 800cc

Este dispositivo se esterilizó por "calor seco".

Indicaciones de Uso

La aplicación del probador de implante mamario de gel requiere el uso de distintas técnicas quirúrgicas. Antes de usar el probador, el médico debe estar familiarizado con toda la información proporcionada asociada a los implantes de mama que se vayan a implantar.

Se debe disponer en el quirófano de varios probadores de gel de distinto tamaño para que el médico tenga mayor flexibilidad al determinar el tamaño y la forma más adecuados para el implante durante la intervención.

Los probadores de gel se suministran en envase individual con doble envoltorio, estéril y apirogeno.

El sistema de doble envoltorio garantiza la esterilidad.

El dispositivo se suministra esterilizado, por lo tanto para su PRIMER USO, no es necesario limpiarlo, desinfectarlo y esterilizarlo.

MEDIC S.A.

José Luis Bosch
Apoderado

INGE SIDERO CERBAN
FABRICA TECNICA
FARMACEUTICA



Siliconas Grado Médico

4085




Importador y Distribuidor para la República Argentina



Para su REUTILIZACION (usos posteriores), se debe limpiar, desinfectar y esterilizar en autoclave de la manera indicada en el diagrama de flujo siguiente:

Uso Posterior (Reutilización)

Inmediatamente después de su uso en el cuerpo

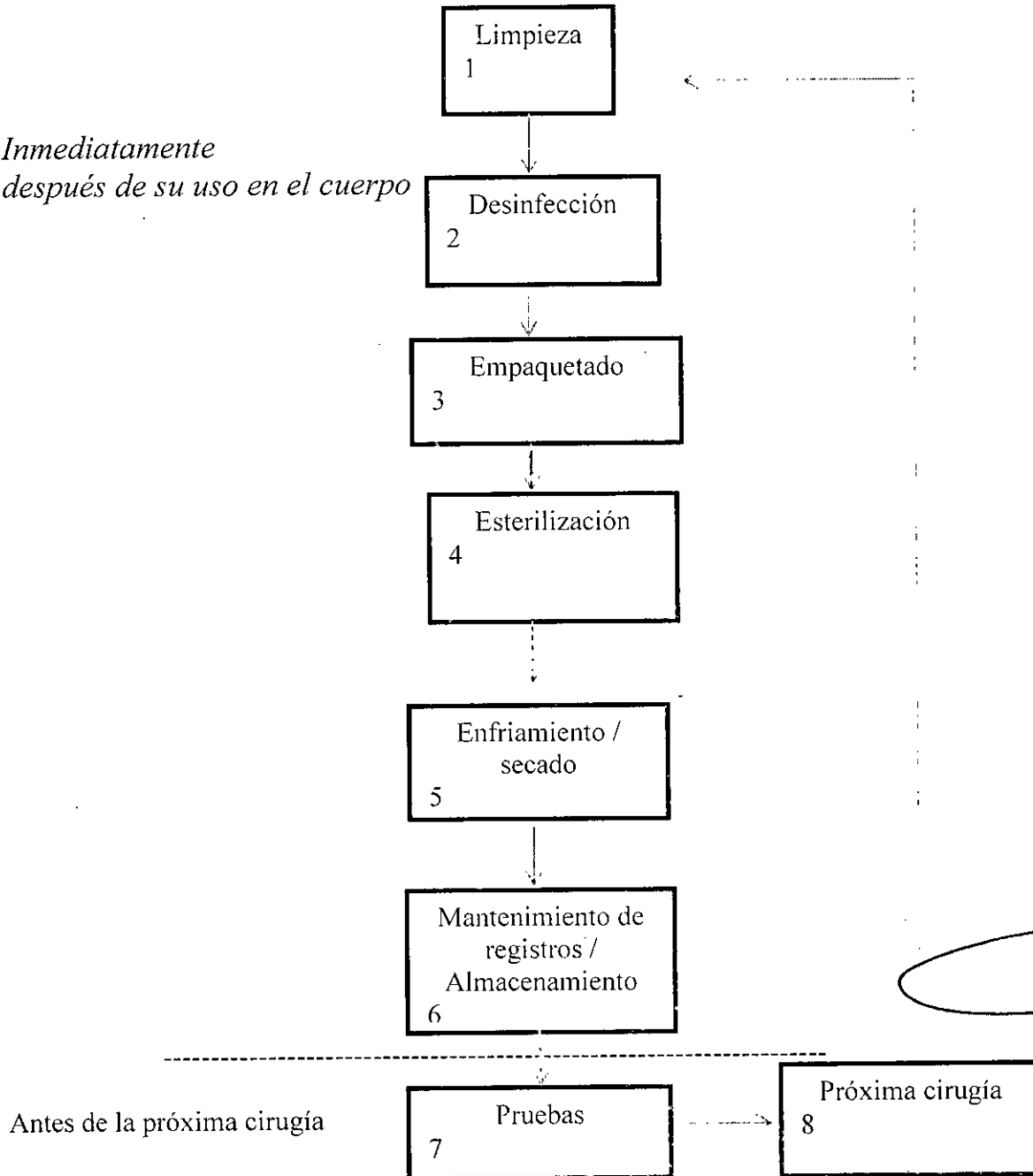

Antes de la próxima cirugía

MEDIC S.A.

José Luis Bosch Apoderado

SU. ENGE SIDERO CORMAN DIRECTORA TECNICA FARMACEUTICA M. 12253



Siliconas Grado Médico

4085



2.2. REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y EFICACIA.

Antes de usar el probador, el médico debe estar familiarizado con toda la información proporcionada asociada a los implantes de mama que se vayan a implantar. El médico es responsable de seleccionar el implante que más se adecúe al sitio de implantación.

Se debe asegurar además la integridad y la limpieza del dispositivo antes de utilizarlo y debe prever un ejemplar de recambio en caso de ruptura, de daño o de contaminación del dispositivo.

Precauciones

- El médico debe tener en cuenta el tamaño, la forma, la firmeza y el perfil del probador de gel, para elegir el tamaño óptimo de la incisión.
- El médico debe estar familiarizado con las técnicas existentes, para realizar la medición de la paciente, determinar el tamaño del implante y hacer la intervención.
- El probador se puede cortar fácilmente con un bisturí o romperse si se aplica una tensión excesiva, si se manipula con objetos romos o si se perfora con una aguja. Por ello, el probador de gel se debe inspeccionar cuidadosamente para comprobar su integridad estructural antes y durante la implantación.
- Si se expone el probador de gel al polvo de los guantes quirúrgicos, polvo ambiental, talco, pelusas de gasas o de fundas, huellas dactilares, grasa cutánea u otros contaminantes de superficie debido a la manipulación inadecuada del mismo, se pueden producir reacciones del organismo ante cuerpos extraños.
- Se deben seguir las técnicas de asepsia y limpieza para prevenir la contaminación del probador y las posibles complicaciones. Se deben limpiar de impurezas los instrumentos quirúrgicos y los guantes antes de iniciar la manipulación del probador de gel.
- Se debe comprobar la permeabilidad de todos los dispositivos antes de la intervención quirúrgica y controlarla periódicamente durante la intervención para comprobar que no se pone en peligro la integridad estructural de los mismos. Las prótesis no se deben implantar si se ha modificado su diseño original o si están dañadas.
- En el momento de la intervención hay que disponer de probadores de gel de distinto tamaño de repuesto.
- Como el probador de gel se puede romper mientras esté caliente después de sacarlo del autoclave, se debe manipular cuidadosamente para evitar dañarlo.
- Luego de la esterilización en autoclave, pueden aparecer burbujas de aire en el gel. Estas burbujas no afectan su integridad ni su finalidad.
- Luego de la esterilización, se debe manipular mediante técnicas asépticas. La unidad esterilizada se debe mantener cubierta hasta su inserción, para evitar que se deposite en su superficie contaminantes presentes en el aire.
- El probador de gel se puede reesterilizar hasta 10 (diez) veces y luego de estas 10 veces se debe desechar.
- Si el dispositivo esta dañado, no se debe usar.

MEDIC S.A.
José Luis Bosch
Apoderado

FARMACÉUTICA S.A. MAN
LITORAL
N.º 1299



Siliconas Grado Médico

4085



2.3. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS NO DESEADOS.

Reacciones adversas previstas

No posee. No se implantan.

Restricciones:

El probador de gel no es un dispositivo para implantación.

3. INFORMACION SOBRE SU INSTALACION, CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PLENA SEGURIDAD

El probador de gel se suministra esterilizado, por lo tanto antes de su primer uso, no es necesario limpiarlo, desinfectarlo y esterilizarlo.

Para reutilizar el probador de gel, se lo debe limpiar, desinfectar y esterilizar (en autoclave) según el diagrama indicado en el punto de indicaciones de uso.

Se deben seguir los siguientes pasos de (1) limpieza y (2) desinfección manual y automática:

MANUAL:

Pasos para la limpieza:

- Se deben usar guantes quirúrgicos en todos los procedimientos
- Se debe hacer una limpieza previa, retirando el exceso de suciedad y luego se coloca el probador de gel bajo el agua fría de la canilla durante 5 minutos.
- Se debe limpiar el probador bajo el agua de la canilla con un cepillo suave hasta eliminar todos los residuos visibles.
- Se debe limpiar el dispositivo durante 3 minutos en una solución de agua y detergente Neodisher US o equivalente para limpieza enzimática a una T° entre 25°C y 32°C (o 77°F y 90°F).
- Luego se debe limpiar el probador con un paño para eliminar todos los residuos hasta que esté limpio a simple vista.
- Luego de la limpieza, se debe sumergir el probador en la solución de detergente durante al menos 10 minutos
- A continuación, se debe pasar el probador de gel (al menos 3 veces) por agua desmineralizada para asegurar que no quede nada de detergente y se debe inspeccionar bien el probador de gel para comprobar su limpieza.
- De ser necesario, se debe repetir el proceso de limpieza hasta que se lo vea limpio a simple vista.

Pasos para la desinfección y el secado:

- Luego de completar los pasos del lavado, el probador de gel se debe limpiar con alcohol isopropílico al 70% para una correcta desinfección.
- Se debe secar el probador con un paño que no deje pelusa.

MEDIC S.A.
José Luis Bosch
Aprobado

... SIDERO COMAN
DIRECTORA TECNICA
FARMACEUTICA M...
[Handwritten signature]



Siliconas Grado Médico

4085



AUTOMÁTICA:

Pasos para la limpieza:

Se debe colocar el probador en una bandeja para instrumentos (Miele E 327-06 o equivalente)

En la máquina de limpieza y desinfección (Miele 7735 CD o equivalente) y se debe iniciar el ciclo:

- Limpieza previa durante 2 minutos con agua fría
- Ciclo de drenaje
- Limpieza durante 5 minutos a 55°C con detergente alcalino al 0.5% (Neodisher FA o equivalente)
- Ciclo de drenaje
- Neutralización durante 3 minutos con agua caliente (>40°C) y neutralizador (Neodisher Z o equivalente)
- Ciclo de drenaje
- Aclarado durante 2 minutos con agua caliente (>40°C)
- Ciclo de drenaje

Pasos para la desinfección y el secado automático:

Se debe aplicar el procedimiento de desinfección térmica automático para la máquina de lavado / desinfección aplicable a los valores requeridos. Se debe secar el probador de gel con el ciclo de secado de la máquina de lavado / desinfección. De ser necesario se puede efectuar un secado manual adicional con un paño que no deje pelusa.

Se debe inspeccionar visualmente el probador de gel para comprobar su limpieza. De ser necesario, se debe repetir el proceso de limpieza y desinfección hasta que esté limpio a simple vista.


(3). Luego se debe realizar el *embalaje*. Para ello se debe envolver dos veces el probador de gel en envoltorio para esterilización quirúrgica para uso en autoclave.

(4). Luego se debe realizar la *esterilización*. Para ello se debe aplicar un proceso de vacío previo fraccionado. Se debe colocar la unidad en una bandeja de autoclave descubierta y limpia, y hacer la esterilización en el autoclave según el método de esterilización por vapor dentro del siguiente rango:

- Parámetros del ciclo de vacío previo (3 fases de vacío previo con al menos 75 milibares),
 - Calentar hasta alcanzar una T° de esterilización mínima de 134° y máxima de 136°C,
 - Mantener durante un mínimo de 3 minutos y un máximo de 40,
 - Seleccionar un tiempo mínimo de secado de 10 minutos.

Alternativamente, se puede usar uno de los siguientes ciclos de esterilización:

- Ciclo de esterilización por vapor alternativo:
 - Ciclo estándar: 20 minutos a 121°C (250°F)
 - Ciclo opcional: 18 minutos a 134°C (273°F)
- Ciclo de esterilización con desplazamiento por gravedad:
 - Ciclo estándar: 30 minutos a 121°C (250°F) y 15 psi
 - Ciclo opcional: 20 minutos a 132°C (273°F) y 30 psi



MEDIC S.A.
 José Luis Bosch
 Apoderado

SOLANGE SIDERO COLMAN
 DIRECTORA TÉCNICA
 FARMACEUTICA M.M. 11289



Siliconas Grado Médico

4085



(5) *Enfriamiento / Secado:*

Luego del procedimiento autoclave, se debe dejar que el dispositivo se enfríe por completo antes de proceder a su uso, para evitar posibles daños al tejido ocasionados por el calor residual. No se debe secar el dispositivo mediante un ciclo de vacío. Una vez que se haya completado el ciclo de autoclave, se debe abrir la puerta del autoclave, para que salga el exceso de vapor y se seque el probador de gel envuelto. Luego se debe cerrar la puerta y dejar el probador de gel en el autoclave hasta que el envoltorio esté completamente seco. Se debe dejar que el probador de gel se enfríe durante al menos 2hs antes de volver a esterilizarlo.

(6) *Registros / Almacenamiento:* Se debe registrar en la tarjeta de esterilización la siguiente información: Fecha de limpieza y esterilización

Nombre de la persona que realizó la esterilización

La tarjeta de esterilización se debe guardar junto con el probador de gel.

(7) *Comprobación:* Se debe comprobar la permeabilidad e integridad de la cápsula del probador de gel inmediatamente antes de cada uso. Para ello, se debe examinar con la mano y los dedos para descubrir posibles filtraciones o anomalías.

(8) *Próxima cirugía:* El probador de gel, se debe limpiar y desinfectar inmediatamente luego de su uso.

4. INFORMACION UTIL PARA EVITAR RIESGOS RELACIONADOS CON LA COLOCACION DEL PRODUCTO MEDICO

El dispositivo se suministra esterilizado, por lo tanto para su PRIMER USO, no es necesario limpiarlo, desinfectarlo y esterilizarlo.

Se debe comprobar la permeabilidad e integridad de la cápsula del probador de gel inmediatamente antes de cada uso.

Para su REUTILIZACION (usos posteriores), se debe limpiar, desinfectar y esterilizar.

Aclaraciones

La aplicación del probador de implante mamario de gel requiere el uso de distintas técnicas quirúrgicas. Antes de usar el probador, el médico debe estar familiarizado con toda la información proporcionada asociada a los implantes de mama que se vayan a implantar.

Se debe disponer en el quirófano de varios probadores de gel de distinto tamaño para que el médico tenga mayor flexibilidad al determinar el tamaño y la forma más adecuados para el implante durante la intervención.

Advertencias

El dispositivo se suministra esterilizado. Antes de proceder a su reutilización, se lo debe limpiar bien, desinfectar y esterilizar.

MEDIC S.A.

José Luis Bosch
Apoderado

SU - NIGÉ SIDERO COYMAN
DIRECTORA TECNICA
FARMACEUTICA M.N. 13799



Siliconas Grado Médico

4085



No se debe reesterilizar más de 10 veces.

No se debe reparar ni intentar reparar ningún probador de gel dañado.

El probador de gel se puede romper durante la cirugía y liberar gel en el bolsillo quirúrgico. Entre las causas de la ruptura se incluyen daños por instrumental quirúrgico y manipulación incorrecta.

5. INSTRUCCIONES EN CASO DE ROTURA DEL ENVASE

En caso de rotura del envase no se debe nunca utilizar el dispositivo.

6. PRECAUCIONES A ADOPTARSE

El probador se puede cortar fácilmente con un bisturí o romperse si se aplica una tensión excesiva, si se manipula con objetos romos o si se perfora con una aguja. El probador de gel se debe inspeccionar cuidadosamente para comprobar su integridad estructural antes y durante la implantación.

El médico debe estar familiarizado con las técnicas existentes, para realizar la medición de la paciente, determinar el tamaño del implante y hacer la intervención.

Se deben seguir las técnicas de asepsia y limpieza para prevenir la contaminación del probador y las posibles complicaciones. Se deben limpiar de impurezas los instrumentos quirúrgicos y los guantes antes de iniciar la manipulación del probador de gel.

En el momento de la intervención hay que disponer de probadores de gel de distinto tamaño de repuesto.

Luego de la esterilización, se debe manipular mediante técnicas asépticas. La unidad esterilizada se debe mantener cubierta hasta su inserción, para evitar que se deposite en su superficie contaminantes presentes en el aire.

Es preciso comprobar la permeabilidad e integridad de la cápsula del probador de gel inmediatamente antes de cada uso. Para ello se debe examinar con la mano y los dedos a fin de descubrir posibles filtraciones o anomalías.

MEDIC S.A.

José Luis Bosch
Aprobado

SOLANGE SIDERO GONZALEZ
DIRECTORA TÉCNICA
FARMACEUTICA M.M. 12299



Ministerio de Salud
*Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos*
A.N.M.A.T.

ANEXO III
CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-2995/12-7

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **4085**, y de acuerdo a lo solicitado por Medic S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Probadores de Implantes Mamarios de Gel Reesterilizables

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-161, prótesis de mamas

Marca del producto médico: MENTOR

Clase de Riesgo: Clase II

Indicación/es autorizada/s: Se usa como ayuda para evaluar el tamaño y la forma del implante de mama antes de proceder a la colocación de un implante de mama

Modelo/s:

Para el fabricante de Zernikedreef 2-2333 CL- Leiden – Países Bajos:

- RSZ -1100 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 100cc.

- RSZ -1125 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 125cc

- RSZ -1150 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 150cc//..

S,

..//

- RSZ-1175 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 175cc.

- RSZ-1200 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 200cc.

- RSZ-1225 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 225cc.

- RSZ-1250 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 250cc.

- RSZ-1275 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 275cc.

- RSZ-1300 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 300cc.

- RSZ-1325 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 325cc.

- RSZ-1350 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 350cc.

- RSZ-1375 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 375cc.

- RSZ-1400 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 400cc.

- RSZ-1450 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 450cc.

- RSZ-1500 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 500cc.

- RSZ-1550 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 550cc.

- RSZ-1600 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Bajo Redondo 600cc.

- RSZ- 5135 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 135cc//..





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- ..// RSZ- 5160 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 160cc.
- RSZ- 5185 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 185cc.
 - RSZ- 5215 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 215cc.
 - RSZ- 5240 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 240cc.
 - RSZ- 5270 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 270cc.
 - RSZ- 5295 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 295cc.
 - RSZ- 5320 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 320cc.
 - RSZ- 5350 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 350cc.
 - RSZ- 5375 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 375cc.
 - RSZ- 5400 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 400cc.
 - RSZ- 5430 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 430cc.
 - RSZ- 5455 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 455cc.
 - RSZ- 5480 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 480cc
 - RSZ- 5535 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 535cc//..

5.

..//

- RSZ- 5590 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Ultra Alto Redondo 590cc.
- RSZ- 0090 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 100cc.
- RSZ- 0095 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 120cc.
- RSZ- 0100 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 140cc.
- RSZ- 0105 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 160cc.
- RSZ- 0110 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 180cc.
- RSZ- 0115 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 210cc.
- RSZ- 0120 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 235cc.
- RSZ- 0125 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 270cc.
- RSZ- 0130 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 300cc.
- RSZ- 0135 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 335cc.
- RSZ- 0140 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 375cc
- RSZ- 0145 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 415cc.
- RSZ- 0150 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 460cc.
- RSZ- 0155 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 510cc.
- RSZ- 0160 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 560cc.
- RSZ- 0165 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 311, 615cc.
- RSZ- 0907 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 125cc.
- RSZ- 0957 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 145cc.
- RSZ- 1007 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 170cc.
- RSZ- 1057 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 195cc.
- RSZ- 1107 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 225cc.
- RSZ- 1157 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 255cc.
- RSZ- 1207 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 290cc.
- RSZ- 1257 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 330cc.
- RSZ- 1307 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 370cc.
- RSZ- 1357 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 415cc.
- RSZ- 1407 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 465cc.
- RSZ- 1457 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 515cc//..




Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- ..//RSZ- 1507 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 570cc.
- RSZ- 1607 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 312 690cc.
- RSZ- 0906 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 130cc.
- RSZ- 0956 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 155cc.
- RSZ- 1006 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 180cc.
- RSZ- 1056 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 210cc.
- RSZ- 1106 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 240cc.
- RSZ- 1156 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 270cc.
- RSZ- 1206 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 310cc.
- RSZ- 1256 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 350cc.
- RSZ- 1306 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 395cc.
- RSZ- 1356 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 440cc.
- RSZ- 1406 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable CPG 313 490cc.
- RSZ- 1456 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 545cc
- RSZ- 1506 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 313 605cc.
- RSZ- 0908 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 120cc.
- RSZ- 0958 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 135cc.
- RSZ- 1008 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 155cc.
- RSZ- 1058 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 180cc.
- RSZ- 1108 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 215cc.
- RSZ- 1158 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 245cc.
- RSZ- 1208 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 280cc.
- RSZ- 1258 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 315cc.
- RSZ- 1308 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 355cc.
- RSZ- 1358 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 395cc.
- RSZ- 1408 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 440cc.
- RSZ- 1458 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 480cc.
- RSZ- 1508 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 530cc//..

S.

..//

- RSZ- 1608 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 640cc.
- RSZ- 1708 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 321 775cc.
- RSZ- 0905 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 140cc.
- RSZ- 0955 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 165cc.
- RSZ- 1005 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 195cc.
- RSZ- 1055 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 225cc.
- RSZ- 1105 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 255cc.
- RSZ- 1155 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 295cc.
- RSZ- 1205 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 330cc.
- RSZ- 1255 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 375cc.
- RSZ- 1305 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 420cc.
- RSZ- 1355 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 475cc.
- RSZ- 1405 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 525cc.
- RSZ- 1455 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 585cc.
- ∫ - RSZ- 1505 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 322 650cc.
- RSZ- 0902 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 165cc
- RSZ- 0952 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 195cc
- RSZ- 1002 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 225cc
- RSZ- 1052 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 260cc
- RSZ- 1102 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 300cc
- RSZ- 1152 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 345cc
- RSZ- 1202 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 390cc
- RSZ- 1252 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 440cc
- RSZ- 1302 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 495cc
- RSZ- 1352 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 555cc
- RSZ- 1402 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 620cc
- RSZ- 1452 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 323 685cc
- RSZ- 0903 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 125cc
- RSZ- 0953 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 150cc.
- RSZ- 1003 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 175cc//..

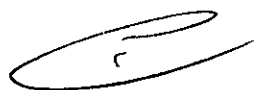



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- ..//RSZ- 1053 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 200cc.
- RSZ- 1103 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 230cc.
 - RSZ- 1153 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 265cc.
 - RSZ- 1203 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 300cc.
 - RSZ- 1253 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 340cc.
 - RSZ- 1303 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 380cc.
 - RSZ- 1353 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 425cc.
 - RSZ- 1403 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 475cc.
 - RSZ- 1453 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 530cc.
 - RSZ- 1503 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 585cc.
 - RSZ- 1553 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 331 645cc.
 - RSZ- 0909 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 145cc.
 - RSZ- 0959 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 175cc.
 - RSZ- 1009 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 205cc.
 - RSZ- 1059 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 235cc.
 - RSZ- 1109 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 270cc.
 - RSZ- 1159 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 305cc.
 - RSZ- 1209 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 350cc.
 - RSZ- 1259 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 395cc.
 - RSZ- 1309 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 445cc.
 - RSZ- 1359 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 495cc.
 - RSZ- 1409 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 555cc.
 - RSZ- 1459 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 615cc.
 - RSZ- 1509 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 332 680cc.
 - RSZ- 4090 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 180cc.
 - RSZ- 4095 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 215cc.
 - RSZ- 4100 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 250cc.
 - RSZ- 4105 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 290cc//..

..//

- RSZ- 4110 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 330cc.
- RSZ- 4115 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 380cc.
- RSZ- 4120 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 430cc.
- RSZ- 4125 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 485cc.
- RSZ- 4130 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 545cc.
- RSZ- 4135 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 610cc.
- RSZ- 4140 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 680cc.
- RSZ- 4145 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, CPG 333 755cc.

Para el fabricante de 3041 Skyway Circle North Irving, Texas 75038 – USA:

- RSZ- 7130MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 130cc
- RSZ- 7150MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 150cc
- RSZ- 7170MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 170cc
- RSZ- 7190MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 190cc
- RSZ- 7215MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 215cc
- RSZ- 7235MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 235cc
- RSZ- 7255MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 255cc
- RSZ- 7275MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 275cc
- RSZ- 7300MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 300cc
- RSZ- 7320MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 320cc//..





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- ../RSZ- 7340MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 340cc
- RSZ- 7360MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 360cc
 - RSZ- 7385MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 385cc
 - RSZ- 7405MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 405cc
 - RSZ- 7425MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 425cc
 - RSZ- 7445MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 445cc
 - RSZ- 7470MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 470cc
 - 5. - RSZ- 7490MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 490cc
 - RSZ- 7510MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 510cc
 - RSZ- 7555MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 555cc
 - RSZ- 7595MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 595cc
 - RSZ- 7640MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 640cc
 - RSZ- 7680MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 680cc
 - RSZ- 7750MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 750cc//..

..//

- RSZ- 7800MC Sizer con Gel Reesterilizable, Sizer Clasicos Moderado Redondo Liso 800cc

Para los fabricantes de Zernikedreef 2-2333 CL- Leiden - Países Bajos y 3041 Skyway Circle North Irving, Texas 75038 - USA:

- RSZ- 7100 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 100cc.

- RSZ- 7125 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 125cc.

- RSZ- 7150 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 150cc.

- RSZ- 7175 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 175cc.

- RSZ- 7200 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 200cc.

- RSZ- 7225 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 225cc.

- RSZ- 7250 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 250cc.

- RSZ- 7275 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 275cc.

- RSZ- 7300 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 300cc.

- RSZ- 7325 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 325cc.

- RSZ- 7350 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 350cc

- RSZ- 7375 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 375cc.

- RSZ- 7400 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 400cc //..





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- ..//RSZ- 7450 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 450cc.
- RSZ- 7500 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 500cc.
 - RSZ- 7550 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 550cc.
 - RSZ- 7600 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 600cc.
 - RSZ- 7700 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 700cc.
 - RSZ- 7800 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 800cc.
 - RSZ- 1001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo100cc.
 - RSZ- 1251 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo125cc.
 - RSZ- 1501 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 150cc
 - RSZ- 1751 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 175cc
 - RSZ- 2001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 200cc
 - RSZ- 2251 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 225cc
 - RSZ- 2501 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 250cc
 - RSZ- 2751 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 275cc//..

..//

- RSZ- 3001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 300cc
- RSZ- 3251 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 325cc
- RSZ- 3501 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 350cc
- RSZ- 3751 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 375cc
- RSZ- 4001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 400cc
- RSZ- 4501 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 450cc
- RSZ- 5001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 500cc
- RSZ- 5501 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 550cc
- RSZ- 6001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 600cc
- RSZ- 7001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 700cc
- RSZ- 8001 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable Perfil Plus Moderado Redondo 800cc
- RSZ- 1254 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 125cc.
- RSZ- 1504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 150cc.
- RSZ- 1754 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 175cc.
- RSZ- 2004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 200cc//..





Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

- ..//RSZ- 2254 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 225cc.
- RSZ- 2504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 250cc.
- RSZ- 2754 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 275cc.
- RSZ- 3004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 300cc.
- RSZ- 3254 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 325cc.
- RSZ- 3504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 350cc.
- RSZ- 3754 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 375cc.
- RSZ- 4004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 400cc.
- RSZ- 4254 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 425cc.
- RSZ- 4504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 450cc.
- RSZ- 5004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 500cc.
- RSZ- 5504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 550cc.
- RSZ- 6004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 600cc.
- RSZ- 6504 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 650cc//..

8

..//

- RSZ- 7004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 700cc.
- RSZ- 8004 Implante Mamario con Gel, Sizer, Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 800cc.
- RSZ- 7100 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 100cc.
- RSZ- 7125 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 125cc.
- RSZ- 7150 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 150cc.
- RSZ- 7175 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 175cc.
- RSZ- 7200 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 200cc.
- RSZ- 7225 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 225cc.
- RSZ- 7250 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 250cc.
- RSZ- 7275 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 275cc.
- RSZ- 7300 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 300cc.
- RSZ- 7325 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 325cc.
- RSZ- 7350 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 350cc.
- RSZ- 7375 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 375cc.
- RSZ- 7400 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 400cc.
- RSZ- 7450 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 450cc.
- RSZ- 7500 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 500cc.
- RSZ- 7550 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 550cc.
- RSZ- 7600 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 600cc.
- RSZ- 7700 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 700cc.
- RSZ- 7800 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Moderado Redondo 800cc.
- RSZ- 1001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 100cc.
- RSZ- 1251 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 125cc.
- RSZ- 1501 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 150cc.
- RSZ- 1751 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 175cc.
- RSZ- 2001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 200cc.
- RSZ- 2251 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 225cc.
- RSZ- 2501 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 250cc//..





Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

- ..//RSZ- 2751 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 275cc
- RSZ- 3001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 300cc
- RSZ- 3251 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 325cc
- RSZ- 3501 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 350cc
- RSZ- 3751 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 375cc
- RSZ- 4001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 400cc
- RSZ- 4501 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 450cc
- RSZ- 5001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 500cc
- RSZ- 5501 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 550cc
- RSZ- 6001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 600cc
- RSZ- 7001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 700cc
- RSZ- 8001 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Plus Moderado Redondo 800cc
- RSZ- 1254 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 125cc.
- RSZ- 1504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 150cc.
- RSZ- 1754 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 175cc.
- RSZ- 2004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 200cc.
- RSZ- 2254 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 225cc.
- RSZ- 2504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 250cc.
- RSZ- 2754 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 275cc.
- RSZ- 3004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 300cc.
- RSZ- 3254 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 325cc.
- RSZ- 3504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 350cc.
- RSZ- 3754 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 375cc.
- RSZ- 4004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 400cc.
- RSZ- 4254 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 425cc.
- RSZ- 4504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 450cc.
- RSZ- 5004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 500cc.
- RSZ- 5504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 550cc//..

S.

..//

- RSZ- 6004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 600cc.
- RSZ- 6504 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 650cc.
- RSZ- 7004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 700cc.
- RSZ- 8004 Sizer con Gel Reesterilizable, Perfil Alto Redondo 800cc.

Período de vida útil: Reesterilizable hasta 10 veces.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: MENTOR MEDICAL SYSTEMS B.V

Lugar/es de elaboración: Zernikedreef 2-2333 CL- Leiden - Países Bajos

Nombre del fabricante: MENTOR

Lugar/es de elaboración: 3041 Skyway Circle North Irving, Texas 75038 - USA

Se extiende a Medic S.A. el Certificado PM-76-60 en la Ciudad de Buenos Aires, a**26 JUN 2013**....., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N° **4085**




Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.