



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-2019-2061-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 1 de Marzo de 2019

Referencia: 1-47-3110-6494-17-1

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-6494-17-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones VASCULART S.A., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de

Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca STAGE nombre descriptivo PRÓTESIS NO CONVENCIONAL CEMENTADA PARA MIEMBROS INFERIORES y nombre técnico PRÓTESIS, DE ARTICULACIÓN PARA CADERA, de acuerdo con lo solicitado por VASCULART S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2018-51048847-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM-317-62", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscribese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Prótesis no Convencional Cementada para Miembros Inferiores

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-166 Prótesis, de Articulación para Cadera

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): STAGE

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: artroplastia parcial o total de cadera, primaria o revisión, causadas por enfermedades como: sustitución del segmento óseo o porción ósea (total o parcial) debido a tumores, artroplastias de revisión de cadera, rodilla, reconstrucción del segmento óseo, trauma con pérdida ósea sustancial, deformidad severa, necrosis vascular de la cabeza femoral, espondilitis anquilosante, secuela de fractura del cuello del fémur, pseudo artrosis del cuello del fémur, revisión de artroplastias segmentadas.

Modelo/s:

PROTESIS NO CONVENCIONAL CEMENTADA PARA MIEMBROS INFERIORES - STAGE

361.BI.26.30; 361.BI.26.40; 361.BI.26.50; 361.BI.26.60; 361.BI.26.70;

361.BI.26.80; 361.BI.26.90; 361.BI.26.100; 361.BI.26.110; 361.BI.26.120; 361.BI.26.130; 361.BI.26.140;
361.BI.26.150; 361.BI.26.160; 361.BI.26.170; 361.BI.26.180; 361.BI.26.190; 361.BI.26.200; 361.BI.28.30;
361.BI.28.40; 361.BI.28.50; 361.BI.28.60; 361.BI.28.70; 361.BI.28.80; 361.BI.28.90;
361.BI.28.100; 361.BI.28.110; 361.BI.28.120; 361.BI.28.130; 361.BI.28.140; 361.BI.28.150; 361.BI.28.160;
361.BI.28.170; 361.BI.28.180; 361.BI.28.190; 361.BI.28.200; 361.BI.32.30; 361.BI.32.40; 361.BI.32.50;
361.BI.32.60; 361.BI.32.70; 361.BI.32.80; 361.BI.32.90; 361.BI.32.100; 361.BI.32.110; 361.BI.32.120;
361.BI.32.130; 361.BI.32.140; 361.BI.32.150; 361.BI.32.160; 361.BI.32.170; 361.BI.32.180;

361.BI.32.190; 361.BI.32.200;

MODULO INTERCAMBIABLE LOBULAR: 361.BIF.26.35; 361.BIF.26.50;

361.BIF.28.35; 361.BIF.28.50; 361.BIF.32.35; 361.BIF.32.50;

CONECTOR LOBULAR INTERCAMBIABLE DIAFISARIO: 361.BIM.26.30;

361.BIM.26.40; 361.BIM.28.30; 361.BIM.28.40; 361.BIM.32.30;

361.BIM.32.40

MODULO LOBULAR INTERCAMBIABLE DIAFISARIO; 365I.26.9.70;

365I.26.9.80; 365I.26.9.90; 365I.26.9.100; 365I.26.9.110; 365I.26.9.120;

365I.26.9.130; 365I.26.9.140; 365I.26.9.150; 365I.26.9.160; 365I.26.9.170;

365I.26.9.180; 365I.26.9.190; 365I.26.9.200; 365I.26.10.70; 365I.26.10.80; 365I.26.10.90; 365I.26.10.100;
365I.26.10.110; 365I.26.10.120;

365I.26.10.130; 365I.26.10.140; 365I.26.10.150; 365I.26.10.160;

365I.26.10.170; 365I.26.10.180; 365I.26.10.190; 365I.26.10.200; 365I.26.10.210; 365I.26.10.220;
365I.26.10.230; 365I.26.10.240; 365I.26.10.250; 365I.26.10.260; 365I.26.10.270; 365I.26.10.280;
365I.26.11.70; 365I.26.11.80; 365I.26.11.90; 365I.26.11.100; 365I.26.11.110; 365I.26.11.120;
365I.26.11.130; 365I.26.11.140; 365I.26.11.150; 365I.26.11.160; 365I.26.11.170; 365I.26.11.180;
365I.26.11.190; 365I.26.11.200; 365I.26.11.210; 365I.26.11.220; 365I.26.11.230; 365I.26.11.240;
365I.26.11.250; 365I.26.11.260; 365I.26.11.270; 365I.26.11.280; 365I.26.11.290; 365I.26.11.300;
365I.26.11.310; 365I.26.11.320; 365I.26.12.70; 365I.26.12.80; 365I.26.12.90; 365I.26.12.100;
365I.26.12.110; 365I.26.12.120; 365I.26.12.130; 365I.26.12.140; 365I.26.12.150; 365I.26.12.160;
365I.26.12.170; 365I.26.12.180; 365I.26.12.190; 365I.26.12.200; 365I.26.12.210; 365I.26.12.220;
365I.26.12.230; 365I.26.12.240; 365I.26.12.250; 365I.26.12.260; 365I.26.12.270; 365I.26.12.280;
365I.26.12.290; 365I.26.12.300; 365I.26.12.310; 365I.26.12.320; 365I.26.13.70; 365I.26.13.80;
365I.26.13.90; 365I.26.13.100; 365I.26.13.110; 365I.26.13.120; 365I.26.13.130; 365I.26.13.140;
365I.26.13.150; 365I.26.13.160; 365I.26.13.170; 365I.26.13.180; 365I.26.13.190; 365I.26.13.200;
365I.26.13.210; 365I.26.13.220; 365I.26.13.230; 365I.26.13.240; 365I.26.13.250; 365I.26.13.260;
365I.26.13.270; 365I.26.13.280; 365I.26.13.290; 365I.26.13.300; 365I.26.13.310; 365I.26.13.320;
365I.26.14.70; 365I.26.14.80; 365I.26.14.90; 365I.26.14.100; 365I.26.14.110; 365I.26.14.120;
365I.26.14.130; 365I.26.14.140; 365I.26.14.150; 365I.26.14.160; 365I.26.14.170; 365I.26.14.180;
365I.26.14.190; 365I.26.14.200; 365I.26.14.210; 365I.26.14.220; 365I.26.14.230; 365I.26.14.240;
365I.26.14.250; 365I.26.14.260; 365I.26.14.270; 365I.26.14.280; 365I.26.14.290; 365I.26.14.300;
365I.26.14.310; 365I.26.14.320; 365I.26.15.70; 365I.26.15.80; 365I.26.15.90; 365I.26.15.100;
365I.26.15.110; 365I.26.15.120; 365I.26.15.130; 365I.26.15.140; 365I.26.15.150; 365I.26.15.160;
365I.26.15.170; 365I.26.15.180; 365I.26.15.190; 365I.26.15.200; 365I.26.15.210; 365I.26.15.220;
365I.26.15.230; 365I.26.15.240; 365I.26.15.250; 365I.26.15.260; 365I.26.15.270; 365I.26.15.280;
365I.26.15.290; 365I.26.15.300; 365I.26.15.310; 365I.26.15.320; 365I.26.16.70; 365I.26.16.80;
365I.26.16.90; 365I.26.16.100; 365I.26.16.110; 365I.26.16.120; 365I.26.16.130; 365I.26.16.140;
365I.26.16.150; 365I.26.16.160; 365I.26.16.170; 365I.26.16.180; 365I.26.16.190; 365I.26.16.200;
365I.26.16.210; 365I.26.16.220; 365I.26.16.230; 365I.26.16.240; 365I.26.16.250; 365I.26.16.260;
365I.26.16.270; 365I.26.16.280; 365I.26.16.290; 365I.26.16.300; 365I.26.16.310; 365I.26.16.320;
365I.26.17.70; 365I.26.17.80; 365I.26.17.90; 365I.26.17.100; 365I.26.17.110; 365I.26.17.120;
365I.26.17.130; 365I.26.17.140; 365I.26.17.150; 365I.26.17.160; 365I.26.17.170; 365I.26.17.180;
365I.26.17.190; 365I.26.17.200; 365I.26.17.210; 365I.26.17.220; 365I.26.17.230; 365I.26.17.240;
365I.26.17.250; 365I.26.17.260; 365I.26.17.270; 365I.26.17.280; 365I.26.17.290; 365I.26.17.300;

365I.40.13.170; 365I.40.13.180; 365I.40.13.190; 365I.40.13.200; 365I.40.13.210; 365I.40.13.220;
365I.40.13.230; 365I.40.13.240; 365I.40.13.250; 365I.40.13.260; 365I.40.13.270; 365I.40.13.280;
365I.40.13.290; 365I.40.13.300; 365I.40.13.310; 365I.40.13.320; 365I.40.14.70; 365I.40.14.80;
365I.40.14.90; 365I.40.14.100; 365I.40.14.110; 365I.40.14.120; 365I.40.14.130; 365I.40.14.140;
365I.40.14.150; 365I.40.14.160; 365I.40.14.170; 365I.40.14.180; 365I.40.14.190; 365I.40.14.200;
365I.40.14.210; 365I.40.14.220; 365I.40.14.230; 365I.40.14.240; 365I.40.14.250; 365I.40.14.260;
365I.40.14.270; 365I.40.14.280; 365I.40.14.290; 365I.40.14.300; 365I.40.14.310; 365I.40.14.320;
365I.40.15.70; 365I.40.15.80; 365I.40.15.90; 365I.40.15.100; 365I.40.15.110; 365I.40.15.120;
365I.40.15.130; 365I.40.15.140; 365I.40.15.150; 365I.40.15.160; 365I.40.15.170; 365I.40.15.180;
365I.40.15.190; 365I.40.15.200; 365I.40.15.210; 365I.40.15.220; 365I.40.15.230; 365I.40.15.240;
365I.40.15.250; 365I.40.15.260; 365I.40.15.270; 365I.40.15.280; 365I.40.15.290; 365I.40.15.300;
365I.40.15.310; 365I.40.15.320; 365I.40.16.70; 365I.40.16.80; 365I.40.16.90; 365I.40.16.100;
365I.40.16.110; 365I.40.16.120; 365I.40.16.130; 365I.40.16.140; 365I.40.16.150; 365I.40.16.160;
365I.40.16.170; 365I.40.16.180; 365I.40.16.190; 365I.40.16.200; 365I.40.16.210; 365I.40.16.220;
365I.40.16.230; 365I.40.16.240; 365I.40.16.250; 365I.40.16.260; 365I.40.16.270; 365I.40.16.280;
365I.40.16.290; 365I.40.16.300; 365I.40.16.310; 365I.40.16.320; 365I.40.17.70; 365I.40.17.80;
365I.40.17.90; 365I.40.17.100; 365I.40.17.110; 365I.40.17.120; 365I.40.17.130; 365I.40.17.140;
365I.40.17.150; 365I.40.17.160; 365I.40.17.170; 365I.40.17.180; 365I.40.17.190; 365I.40.17.200;
365I.40.17.210; 365I.40.17.220; 365I.40.17.230; 365I.40.17.240; 365I.40.17.250; 365I.40.17.260;
365I.40.17.270; 365I.40.17.280; 365I.40.17.290; 365I.40.17.300; 365I.40.17.310; 365I.40.17.320;
365I.40.18.70; 365I.40.18.80; 365I.40.18.90; 365I.40.18.100; 365I.40.18.110; 365I.40.18.120;
365I.40.18.130; 365I.40.18.140; 365I.40.18.150; 365I.40.18.160; 365I.40.18.170; 365I.40.18.180;
365I.40.18.190; 365I.40.18.200; 365I.40.18.210; 365I.40.18.220; 365I.40.18.230; 365I.40.18.240;
365I.40.18.250; 365I.40.18.260; 365I.40.18.270; 365I.40.18.280; 365I.40.18.290; 365I.40.18.300;
365I.40.18.310; 365I.40.18.320; 365I.40.19.70; 365I.40.19.80; 365I.40.19.90; 365I.40.19.100;
365I.40.19.110; 365I.40.19.120; 365I.40.19.130; 365I.40.19.140; 365I.40.19.150; 365I.40.19.160;
365I.40.19.170; 365I.40.19.180; 365I.40.19.190; 365I.40.19.200; 365I.40.19.210; 365I.40.19.220;
365I.40.19.230; 365I.40.19.240; 365I.40.19.250; 365I.40.19.260; 365I.40.19.270; 365I.40.19.280;
365I.40.19.290; 365I.40.19.300; 365I.40.19.310; 365I.40.19.320

ASTA MODULAR LOBULAR: 364.I.26; 364.I.28; 364.I.32

COMPONENTE PROXIMAL DE FEMUR LOBULAR: 385.1.26.D;

385.1.26.E; 385.2.28.D; 385.2.28.E; 385.2.32.D; 385.2.32.E; 385.3.28.D;

385.3.28.E; 385.3.32.D; 385.3.32.E; 385.2.40.D; 385.2.40.E; 385.3.40.D;

385.3.40.E

COMPONENTE DISTAL DE FEMUR Y RODILLA ARTICULADA LOBULAR:

373.IT1.26; 373.IT1.28; 373.IT2.26; 373.IT2.28; 373.IT2.32; 373.IT3.28;

373.IT3.32

COMPONENTE PROXIMAL DE TIBIA Y RODILLA ARTICULADA

LOBULAR: 371.T1.20.9.80; 371.T1.20.9.90; 371.T1.20.9.100;

371.T1.20.9.110; 371.T1.20.9.120; 371.T1.20.9.130; 371.T1.20.9.140; 371.T1.20.9.150; 371.T1.20.10.80;
371.T1.20.10.90; 371.T1.20.10.100; 371.T1.20.10.110; 371.T1.20.10.120;
371.T1.20.10.130; 371.T1.20.10.140; 371.T1.20.10.150; 371.T1.20.10.160;
371.T1.20.10.170; 371.T1.20.10.180; 371.T1.20.10.190; 371.T1.20.10.200; 371.T1.20.11.80;
371.T1.20.11.90; 371.T1.20.11.100; 371.T1.20.11.110; 371.T1.20.11.120; 371.T1.20.11.130;

371.T1.20.11.140; 371.T1.20.11.150; 371.T1.20.11.160;371.T1.20.11.170; 371.T1.20.11.180;
371.T1.20.11.190; 371.T1.20.11.200; 371.T1.20.12.80; 371.T1.20.12.90; 371.T1.20.12.100;
371.T1.20.12.110; 371.T1.20.12.120; 371.T1.20.12.130; 371.T1.20.12.140;
371.T1.20.12.150;371.T1.20.12.160; 371.T1.20.12.170; 371.T1.20.12.180; 371.T1.20.12.190;
371.T1.20.12.200;371.T1.20.13.80; 371.T1.20.13.90; 371.T1.20.13.100; 371.T1.20.13.110;
371.T1.20.13.120;371.T1.20.13.130; 371.T1.20.13.140; 371.T1.20.13.150;371.T1.20.13.160;
371.T1.20.13.170; 371.T1.20.13.180; 371.T1.20.13.190; 371.T1.20.13.200;
371.T1.20.14.80;371.T1.20.14.90; 371.T1.20.14.100; 371.T1.20.14.110;
371.T1.20.14.120;371.T1.20.14.130; 371.T1.20.14.140; 371.T1.20.14.150;
371.T1.20.14.160;371.T1.20.14.170; 371.T1.20.14.180; 371.T1.20.14.190; 371.T1.20.14.200;
371.T1.20.15.80; 371.T1.20.15.90; 371.T1.20.15.100; 371.T1.20.15.110; 371.T1.20.15.120;
371.T1.20.15.130; 371.T1.20.15.140; 371.T1.20.15.150; 371.T1.20.15.160; 371.T1.20.15.170;
371.T1.20.15.180;371.T1.20.15.190;

371.T1.20.15.200; 371.T1.20.16.80; 371.T1.20.16.90; 371.T1.20.16.100;

371.T1.20.16.110; 371.T1.20.16.120; 371.T1.20.16.130;371.T1.20.16.140;

371.T1.20.16.150; 371.T1.20.16.160; 371.T1.20.16.170;371.T1.20.16.180; 371.T1.20.16.190;
371.T1.20.16.200; 371.T2.20.9.80; 371.T2.20.9.90; 371.T2.20.9.100; 371.T2.20.9.110; 371.T2.20.9.120;
371.T2.20.9.130; 371.T2.20.9.140; 371.T2.20.9.150; 371.T2.20.10.80; 371.T2.20.10.90; 371.T2.20.10.100;
371.T2.20.10.110; 371.T2.20.10.120;371.T2.20.10.130; 371.T2.20.10.140;
371.T2.20.10.150;371.T2.20.10.160; 371.T2.20.10.170; 371.T2.20.10.180;
371.T2.20.10.190;371.T2.20.10.200; 371.T2.20.11.80; 371.T2.20.11.90; 371.T2.20.11.100;
371.T2.20.11.110; 371.T2.20.11.120; 371.T2.20.11.130; 371.T2.20.11.140;
371.T2.20.11.150;371.T2.20.11.160; 371.T2.20.11.170; 371.T2.20.11.180;
371.T2.20.11.190;371.T2.20.11.200; 371.T2.20.12.80; 371.T2.20.12.90; 371.T2.20.12.100;
371.T2.20.12.110; 371.T2.20.12.120; 371.T2.20.12.130; 371.T2.20.12.140;371.T2.20.12.150;

371.T2.20.12.160; 371.T2.20.12.170; 371.T2.20.12.180;371.T2.20.12.190; 371.T2.20.12.200;
371.T2.20.13.80; 371.T2.20.13.90; 371.T2.20.13.100; 371.T2.20.13.110;
371.T2.20.13.120;371.T2.20.13.130; 371.T2.20.13.140; 371.T2.20.13.150;
371.T2.20.13.160;371.T2.20.13.170; 371.T2.20.13.180; 371.T2.20.13.190; 371.T2.20.13.200;
371.T2.20.14.80; 371.T2.20.14.90; 371.T2.20.14.100; 371.T2.20.14.110;
371.T2.20.14.120;371.T2.20.14.130; 371.T2.20.14.140; 371.T2.20.14.150;
371.T2.20.14.160;371.T2.20.14.170; 371.T2.20.14.180;371.T2.20.14.190; 371.T2.20.14.200;
371.T2.20.15.80;

371.T2.20.15.90; 371.T2.20.15.100; 371.T2.20.15.110; 371.T2.20.15.120;

371.T2.20.15.130; 371.T2.20.15.140; 371.T2.20.15.150;371.T2.20.15.160; 371.T2.20.15.170;
371.T2.20.15.180; 371.T2.20.15.190;371.T2.20.15.200; 371.T2.20.16.80; 371.T2.20.16.90;
371.T2.20.16.100; 371.T2.20.16.110; 371.T2.20.16.120;371.T2.20.16.130; 371.T2.20.16.140;
371.T2.20.16.150; 371.T2.20.16.160; 371.T2.20.16.170; 371.T2.20.16.180;371.T2.20.16.190;

371.T2.20.16.200; 371.T3.20.9.80; 371.T3.20.9.90; 371.T3.20.9.100;

371.T3.20.9.110; 371.T3.20.9.120; 371.T3.20.9.130; 371.T3.20.9.140;

371.T3.20.9.150; 371.T3.20.10.80; 371.T3.20.10.90; 371.T3.20.10.100;

371.T3.20.10.110; 371.T3.20.10.120; 371.T3.20.10.130;371.T3.20.10.140; 371.T3.20.10.150;
371.T3.20.10.160; 371.T3.20.10.170;371.T3.20.10.180; 371.T3.20.10.190; 371.T3.20.10.200;
371.T3.20.11.80; 371.T3.20.11.90;

371.T3.20.11.100; 371.T3.20.11.110; 371.T3.20.11.120;371.T3.20.11.130; 371.T3.20.11.140;
371.T3.20.11.150; 371.T3.20.11.160;371.T3.20.11.170; 371.T3.20.11.180; 371.T3.20.11.190;
371.T3.20.11.200; 371.T3.20.12.80;

371.T3.20.12.90; 371.T3.20.12.100; 371.T3.20.12.110; 371.T3.20.12.120;

371.T3.20.12.130; 371.T3.20.12.140; 371.T3.20.12.150;371.T3.20.12.160; 371.T3.20.12.170;
371.T3.20.12.180; 371.T3.20.12.190;371.T3.20.12.200; 371.T3.20.13.80; 371.T3.20.13.90;
371.T3.20.13.100; 371.T3.20.13.110; 371.T3.20.13.120; 371.T3.20.13.130;
371.T3.20.13.140;371.T3.20.13.150;

371.T3.20.13.160; 371.T3.20.13.170; 371.T3.20.13.180;371.T3.20.13.190; 371.T3.20.13.200;
371.T3.20.14.80; 371.T3.20.14.90; 371.T3.20.14.100; 371.T3.20.14.110;
371.T3.20.14.120;371.T3.20.14.130; 371.T3.20.14.140; 371.T3.20.14.150;
371.T3.20.14.160;371.T3.20.14.170; 371.T3.20.14.180; 371.T3.20.14.190; 371.T3.20.14.200;
371.T3.20.15.80; 371.T3.20.15.90; 371.T3.20.15.100; 371.T3.20.15.110;
371.T3.20.15.120;371.T3.20.15.130; 371.T3.20.15.140; 371.T3.20.15.150;
371.T3.20.15.160;371.T3.20.15.170; 371.T3.20.15.180; 371.T3.20.15.190; 371.T3.20.15.200;
371.T3.20.16.80;

371.T3.20.16.90; 371.T3.20.16.100; 371.T3.20.16.110; 371.T3.20.16.120;

371.T3.20.16.130; 371.T3.20.16.140; 371.T3.20.16.150;371.T3.20.16.160;

371.T3.20.16.170; 371.T3.20.16.180; 371.T3.20.16.190;371.T3.20.16.200; 371.T1.30.9.80; 371.T1.30.9.90;
371.T1.30.9.100; 371.T1.30.9.110; 371.T1.30.9.120; 371.T1.30.9.130; 371.T1.30.9.140; 371.T1.30.9.150;
371.T1.30.10.80; 371.T1.30.10.90; 371.T1.30.10.100; 371.T1.30.10.110; 371.T1.30.10.120;
371.T1.30.10.130; 371.T1.30.10.140;371.T1.30.10.150; 371.T1.30.10.160; 371.T1.30.10.170;
371.T1.30.10.180;371.T1.30.10.190;

371.T1.30.10.200; 371.T1.30.11.80; 371.T1.30.11.90; 371.T1.30.11.100;

371.T1.30.11.110; 371.T1.30.11.120; 371.T1.30.11.130;371.T1.30.11.140; 371.T1.30.11.150;
371.T1.30.11.160;371.T1.30.11.170; 371.T1.30.11.180; 371.T1.30.11.190; 371.T1.30.11.200;
371.T1.30.12.80; 371.T1.30.12.90;
371.T1.30.12.100;371.T1.30.12.110;371.T1.30.12.120;371.T1.30.12.130; 371.T1.30.12.140;
371.T1.30.12.150; 371.T1.30.12.160;371.T1.30.12.170; 371.T1.30.12.180; 371.T1.30.12.190;
371.T1.30.12.200; 371.T1.30.13.80; 371.T1.30.13.90; 371.T1.30.13.100; 371.T1.30.13.110;
371.T1.30.13.120; 371.T1.30.13.130;371.T1.30.13.140; 371.T1.30.13.150;371.T1.30.13.160;
371.T1.30.13.170; 371.T1.30.13.180; 371.T1.30.13.190;371.T1.30.13.200; 371.T1.30.14.80;
371.T1.30.14.90; 371.T1.30.14.100; 371.T1.30.14.110; 371.T1.30.14.120; 371.T1.30.14.130;
371.T1.30.14.140;371.T1.30.14.150; 371.T1.30.14.160; 371.T1.30.14.170;
371.T1.30.14.180;371.T1.30.14.190; 371.T1.30.14.200; 371.T1.30.15.80; 371.T1.30.15.90;
371.T1.30.15.100; 371.T1.30.15.110; 371.T1.30.15.120; 371.T1.30.15.130;371.T1.30.15.140;
371.T1.30.15.150; 371.T1.30.15.160; 371.T1.30.15.170;371.T1.30.15.180; 371.T1.30.15.190;
371.T1.30.15.200; 371.T1.30.16.80; 371.T1.30.16.90; 371.T1.30.16.100; 371.T1.30.16.110;
371.T1.30.16.120;371.T1.30.16.130; 371.T1.30.16.140; 371.T1.30.16.150;
371.T1.30.16.160;371.T1.30.16.170; 371.T1.30.16.180; 371.T1.30.16.190; 371.T1.30.16.200;
371.T2.30.9.80; 371.T2.30.9.90; 371.T2.30.9.100; 371.T2.30.9.110; 371.T2.30.9.120; 371.T2.30.9.130;
371.T2.30.9.140; 371.T2.30.9.150; 371.T2.30.10.80; 371.T2.30.10.90; 371.T2.30.10.100;
371.T2.30.10.110; 371.T2.30.10.120; 371.T2.30.10.130; 371.T2.30.10.140;
371.T2.30.10.150;371.T2.30.10.160;

371.T2.30.10.170; 371.T2.30.10.180; 371.T2.30.10.190;371.T2.30.10.200;

371.T2.30.11.80; 371.T2.30.11.90; 371.T2.30.11.100; 371.T2.30.11.110;
371.T2.30.11.120; 371.T2.30.11.130; 371.T2.30.11.140;371.T2.30.11.150;
371.T2.30.11.160; 371.T2.30.11.170; 371.T2.30.11.180;371.T2.30.11.190; 371.T2.30.11.200;
371.T2.30.12.80; 371.T2.30.12.90; 371.T2.30.12.100; 371.T2.30.12.110; 371.T2.30.12.120;
371.T2.30.12.130;371.T2.30.12.140; 371.T2.30.12.150; 371.T2.30.12.160;
371.T2.30.12.170;371.T2.30.12.180;
371.T2.30.12.190; 371.T2.30.12.200; 371.T2.30.13.80; 371.T2.30.13.90;
371.T2.30.13.100; 371.T2.30.13.110; 371.T2.30.13.120;371.T2.30.13.130; 371.T2.30.13.140;
371.T2.30.13.150; 371.T2.30.13.160;371.T2.30.13.170; 371.T2.30.13.180; 371.T2.30.13.190;
371.T2.30.13.200; 371.T2.30.14.80;
371.T2.30.14.90; 371.T2.30.14.100; 371.T2.30.14.110; 371.T2.30.14.120;
371.T2.30.14.130; 371.T2.30.14.140; 371.T2.30.14.150;371.T2.30.14.160; 371.T2.30.14.170;
371.T2.30.14.180;371.T2.30.14.190; 371.T2.30.14.200; 371.T2.30.15.80; 371.T2.30.15.90;
371.T2.30.15.100; 371.T2.30.15.110; 371.T2.30.15.120; 371.T2.30.15.130;
371.T2.30.15.140;371.T2.30.15.150; 371.T2.30.15.160; 371.T2.30.15.170;
371.T2.30.15.180;371.T2.30.15.190;
371.T2.30.15.200; 371.T2.30.16.80; 371.T2.30.16.90; 371.T2.30.16.100;
371.T2.30.16.110; 371.T2.30.16.120; 371.T2.30.16.130;371.T2.30.16.140;
371.T2.30.16.150; 371.T2.30.16.160; 371.T2.30.16.170;371.T2.30.16.180; 371.T2.30.16.190;
371.T2.30.16.200; 371.T3.30.9.80; 371.T3.30.9.90; 371.T3.30.9.100; 371.T3.30.9.110; 371.T3.30.9.120;
371.T3.30.9.130; 371.T3.30.9.140; 371.T3.30.9.150; 371.T3.30.10.80; 371.T3.30.10.90; 371.T3.30.10.100;
371.T3.30.10.110; 371.T3.30.10.120;371.T3.30.10.130; 371.T3.30.10.140; 371.T3.30.10.150;
371.T3.30.10.160;371.T3.30.10.170; 371.T3.30.10.180; 371.T3.30.10.190; 371.T3.30.10.200;
371.T3.30.11.80;
371.T3.30.11.90; 371.T3.30.11.100; 371.T3.30.11.110; 371.T3.30.11.120;
371.T3.30.11.130; 371.T3.30.11.140; 371.T3.30.11.150;371.T3.30.11.160; 371.T3.30.11.170;
371.T3.30.11.180; 371.T3.30.11.190;371.T3.30.11.200; 371.T3.30.12.80; 371.T3.30.12.90;
371.T3.30.12.100; 371.T3.30.12.110; 371.T3.30.12.120; 371.T3.30.12.130;
371.T3.30.12.140;371.T3.30.12.150;
371.T3.30.12.160; 371.T3.30.12.170; 371.T3.30.12.180;371.T3.30.12.190;
371.T3.30.12.200; 371.T3.30.13.80; 371.T3.30.13.90; 371.T3.30.13.100;
371.T3.30.13.110; 371.T3.30.13.120; 371.T3.30.13.130;371.T3.30.13.140;
371.T3.30.13.150; 371.T3.30.13.160; 371.T3.30.13.170;371.T3.30.13.180; 371.T3.30.13.190;
371.T3.30.13.200; 371.T3.30.14.80; 371.T3.30.14.90; 371.T3.30.14.100; 371.T3.30.14.110;
371.T3.30.14.120; 371.T3.30.14.130;371.T3.30.14.140; 371.T3.30.14.150;
371.T3.30.14.160;371.T3.30.14.170; 371.T3.30.14.180;371.T3.30.14.190;
371.T3.30.14.200;371.T3.30.15.80; 371.T3.30.15.90; 371.T3.30.15.100; 371.T3.30.15.110;
371.T3.30.15.120; 371.T3.30.15.130;371.T3.30.15.140; 371.T3.30.15.150; 371.T3.30.15.160;
371.T3.30.15.170;371.T3.30.15.180; 371.T3.30.15.190;371.T3.30.15.200; 371.T3.30.16.80;
371.T3.30.16.90; 371.T3.30.16.100; 371.T3.30.16.110; 371.T3.30.16.120;371.T3.30.16.130;

371.T3.30.16.140;371.T3.30.16.150; 371.T3.30.16.160; 371.T3.30.16.170; 371.T3.30.16.180;
371.T3.30.16.190; 371.T3.30.16.200; 371.T1.40.9.80; 371.T1.40.9.90; 371.T1.40.9.100; 371.T1.40.9.110;
371.T1.40.9.120; 371.T1.40.9.130; 371.T1.40.9.140; 371.T1.40.9.150; 371.T1.40.10.80;
371.T1.40.10.90;371.T1.40.10.100;371.T1.40.10.110;371.T1.40.10.120;371.T1.40.10.130;37
1.T1.40.10.140; 371.T1.40.10.150; 371.T1.40.10.160; 371.T1.40.10.170; 371.T1.40.10.180;
371.T1.40.10.190; 371.T1.40.10.200; 371.T1.40.11.80; 371.T1.40.11.90; 371.T1.40.11.100;
371.T1.40.11.110; 371.T1.40.11.120; 371.T1.40.11.130;371.T1.40.11.140; 371.T1.40.11.150;
371.T1.40.11.160; 371.T1.40.11.170; 371.T1.40.11.180; 371.T1.40.11.190;371.T1.40.11.200;
371.T1.40.12.80; 371.T1.40.12.90; 371.T1.40.12.100; 371.T1.40.12.110;
371.T1.40.12.120;371.T1.40.12.130; 371.T1.40.12.140;371.T1.40.12.150; 371.T1.40.12.160;
371.T1.40.12.170; 371.T1.40.12.180;371.T1.40.12.190; 371.T1.40.12.200; 371.T1.40.13.80;
371.T1.40.13.90; 371.T1.40.13.100; 371.T1.40.13.110; 371.T1.40.13.120; 371.T1.40.13.130;
371.T1.40.13.140;371.T1.40.13.150; 371.T1.40.13.160; 371.T1.40.13.170; 371.T1.40.13.180;
371.T1.40.13.190;371.T1.40.13.200; 371.T1.40.14.80; 371.T1.40.14.90; 371.T1.40.14.100;
371.T1.40.14.110; 371.T1.40.14.120; 371.T1.40.14.130;
371.T1.40.14.140;371.T1.40.14.150; 371.T1.40.14.160; 371.T1.40.14.170; 371.T1.40.14.180;
371.T1.40.14.190; 371.T1.40.14.200; 371.T1.40.15.80; 371.T1.40.15.90; 371.T1.40.15.100;
371.T1.40.15.110; 371.T1.40.15.120; 371.T1.40.15.130;371.T1.40.15.140;
371.T1.40.15.150; 371.T1.40.15.160; 371.T1.40.15.170;371.T1.40.15.180; 371.T1.40.15.190;
371.T1.40.15.200; 371.T1.40.16.80; 371.T1.40.16.90;
371.T1.40.16.100;371.T1.40.16.110;371.T1.40.16.120;371.T1.40.16.130;371.T1.40.16.140;
371.T1.40.16.150;371.T1.40.16.160; 371.T1.40.16.170; 371.T1.40.16.180;
371.T1.40.16.190;371.T1.40.16.200; 371.T2.40.9.80; 371.T2.40.9.90; 371.T2.40.9.100; 371.T2.40.9.110;
371.T2.40.9.120; 371.T2.40.9.130; 371.T2.40.9.140; 371.T2.40.9.150; 371.T2.40.10.80; 371.T2.40.10.90;
371.T2.40.10.100; 371.T2.40.10.110; 371.T2.40.10.120; 371.T2.40.10.130;
371.T2.40.10.140;371.T2.40.10.150; 371.T2.40.10.160; 371.T2.40.10.170; 371.T2.40.10.180;
371.T2.40.10.190;371.T2.40.10.200; 371.T2.40.11.80; 371.T2.40.11.90; 371.T2.40.11.100;
371.T2.40.11.110; 371.T2.40.11.120; 371.T2.40.11.130; 371.T2.40.11.140;371.T2.40.11.150;
371.T2.40.11.160;371.T2.40.11.170; 371.T2.40.11.180; 371.T2.40.11.190; 371.T2.40.11.200;
371.T2.40.12.80; 371.T2.40.12.90; 371.T2.40.12.100; 371.T2.40.12.110; 371.T2.40.12.120;
371.T2.40.12.130;371.T2.40.12.140; 371.T2.40.12.150; 371.T2.40.12.160;
371.T2.40.12.170;371.T2.40.12.180; 371.T2.40.12.190; 371.T2.40.12.200; 371.T2.40.13.80;
371.T2.40.13.90; 371.T2.40.13.100; 371.T2.40.13.110;371.T2.40.13.120; 371.T2.40.13.130;
371.T2.40.13.140; 371.T2.40.13.150; 371.T2.40.13.160;371.T2.40.13.170; 371.T2.40.13.180;
371.T2.40.13.190; 371.T2.40.13.200; 371.T2.40.14.80; 371.T2.40.14.90; 371.T2.40.14.100;
371.T2.40.14.110; 371.T2.40.14.120; 371.T2.40.14.130; 371.T2.40.14.140;
371.T2.40.14.150;371.T2.40.14.160; 371.T2.40.14.170; 371.T2.40.14.180;371.T2.40.14.190;
371.T2.40.14.200; 371.T2.40.15.80; 371.T2.40.15.90;371.T2.40.15.100; 371.T2.40.15.110;
371.T2.40.15.120; 371.T2.40.15.130; 371.T2.40.15.140;371.T2.40.15.150; 371.T2.40.15.160;
371.T2.40.15.170; 371.T2.40.15.180;371.T2.40.15.190; 371.T2.40.15.200; 371.T2.40.16.80;
371.T2.40.16.90;371.T2.40.16.100; 371.T2.40.16.110;371.T2.40.16.120; 371.T2.40.16.130;
371.T2.40.16.140; 371.T2.40.16.150; 371.T2.40.16.160;371.T2.40.16.170; 371.T2.40.16.180;
371.T2.40.16.190; 371.T2.40.16.200;371.T3.40.9.80; 371.T3.40.9.90; 371.T3.40.9.100; 371.T3.40.9.110;
371.T3.40.9.120; 371.T3.40.9.130; 371.T3.40.9.140; 371.T3.40.9.150; 371.T3.40.10.80; 371.T3.40.10.90;
371.T3.40.10.100; 371.T3.40.10.110;371.T3.40.10.120; 371.T3.40.10.130; 371.T3.40.10.140;
371.T3.40.10.150;371.T3.40.10.160; 371.T3.40.10.170; 371.T3.40.10.180; 371.T3.40.10.190;
371.T3.40.10.200; 371.T3.40.11.80; 371.T3.40.11.90; 371.T3.40.11.100; 371.T3.40.11.110;
371.T3.40.11.120; 371.T3.40.11.130; 371.T3.40.11.140; 371.T3.40.11.150;371.T3.40.11.160;
371.T3.40.11.170; 371.T3.40.11.180;371.T3.40.11.190; 371.T3.40.11.200; 371.T3.40.12.80;
371.T3.40.12.90; 371.T3.40.12.100; 371.T3.40.12.110; 371.T3.40.12.120;
371.T3.40.12.130;371.T3.40.12.140; 371.T3.40.12.150; 371.T3.40.12.160; 371.T3.40.12.170;
371.T3.40.12.180;371.T3.40.12.190; 371.T3.40.12.200; 371.T3.40.13.80; 371.T3.40.13.90;
371.T3.40.13.100; 371.T3.40.13.110; 371.T3.40.13.120; 371.T3.40.13.130;371.T3.40.13.140;
371.T3.40.13.150; 371.T3.40.13.160; 371.T3.40.13.170;371.T3.40.13.180; 371.T3.40.13.190;

371.T3.40.13.200; 371.T3.40.14.80; 371.T3.40.14.90; 371.T3.40.14.100;
371.T3.40.14.110;371.T3.40.14.120; 371.T3.40.14.130; 371.T3.40.14.140;
371.T3.40.14.150;371.T3.40.14.160; 371.T3.40.14.170; 371.T3.40.14.180; 371.T3.40.14.190;
371.T3.40.14.200; 371.T3.40.15.80; 371.T3.40.15.90; 371.T3.40.15.100; 371.T3.40.15.110;
371.T3.40.15.120; 371.T3.40.15.130;371.T3.40.15.140; 371.T3.40.15.150; 371.T3.40.15.160;
371.T3.40.15.170;371.T3.40.15.180; 371.T3.40.15.190; 371.T3.40.15.200; 371.T3.40.16.80;
371.T3.40.16.90; 371.T3.40.16.100; 371.T3.40.16.110; 371.T3.40.16.120;
371.T3.40.16.130;371.T3.40.16.140; 371.T3.40.16.150;
371.T3.40.16.160;371.T3.40.16.170;371.T3.40.16.180;371.T3.40.16.190;371.T3.40.16.200

COMPONENTE PROXIMAL DE TIBIA Y RODILLA ARTICULADA –

RESSECCIÓN MEDIA DE TIBIA PROXIMAL: 383.1; 383.2; 383.3

COMPONENTE ARTICULAR: 361.BR.26.30.5D; 361. BR .26.40.5D;

361.BR.26.50.5D; 361.BR.28.30.5D; 361.BR .28.40.5D; 361.BR .28.50.5D; 361.BR 32.30.5D;
361.BR.32.40.5D; 361.BR.32.50.5D; 361.BR.26.30.5E; 361.BR.26.40.5E; 361. BR.26.50.5E;
361.BR.28.30.5E; 361.BR .28.40.5E; 361.BR .28.50.5E; 361.BR.32.30.5E; 361. BR.32.40.5E;
361.BR.32.50.5E; 361.BR.26.30.10D; 361.BR.26.40.10D; 361.BR.26.50.10D;
361.BR.28.30.10D;361.BR.28.40.10D;361.BR.28.50.10D;361.BR.32.30.10; 361.BR.32.40.10D;
361.BR.32.50.10D; 361.BR.26.30.10E; 361.BR.26.40.10E;361.BR.26.50.10E; 361.BR.28.30.10E;
361.BR.28.40.10E; 361.BR.28.50.10E; 361.BR.32.30.10E; 361.BR.32.40.10E; 361.BR.32.50.10E;
361.BR.26.30.15D; 361.BR.26.40.15D; 361.BR.26.50.15D;361.BR.28.30.15D; 361.BR.28.40.15D;
361.BR.28.50.15D; 361.BR.32.30.15D; 361.BR.32.40.15D; 361.BR.32.50.15D; 361.BR.26.30.15E;
361.BR.26.40.15E; 361.BR.26.50.15E; 361.BR.28.30.15E; 361.BR.28.40.15E; 361.BR.28.50.15E;
361.BR.32.30.15E; 361.BR.32.40.15E; 361.BR.32.50.15E; 361.BR.26.30.20D; 361.BR.26.40.20D;
361.BR.26.50.20D; 361.BR.28.30.20D; 361.BR.28.40.20D; 361.BR.28.50.20D; 361.BR.32.30.20D;

361.BR.32.40.20D; 361.BR.32.50.20D; 361.BR.26.30.20E; 361.BR.26.40.20E; 361.BR.26.50.20E;
361.BR.28.30.20E; 361.BR.28.40.20E; 361.BR.28.50.20E; 361.BR.32.30.20E; 361.BR.32.40.20E;
361.BR.32.50.20E

MODULO INTERCAMBIABLE PARA ALINEAMIENTO AXIAL:

361.BF.26.35; 361.BF.26.50; 361.BF.28.35; 361.BF.28.50; 361.BF.32.35;

361.BF.32.50

CONECTOR INTERCAMBIABLE DIAFISARIO: 361.BM.26.30;

361.BM.26.40; 361.BM.28.30; 361.BM.28.40; 361.BM.32.30; 361.BM.32.40

MODULO INTERCAMBIABLE DÍAFISARIO: 361.BH.26.30; 361.BH.26.40;

361.BH.26.50; 361.BH.28.30; 361.BH.28.40; 361.BH.28.50; 361.BH.32.30;

361.BH.32.40; 361.BH.32.50

MODULO INTERCAMBIABLE HIBRIDO: 361.BEM.26.40; 361.BEM.26.50;

361.BEM.26.60; 361.BEM.28.40; 361.BEM.28.50; 361.BEM.28.60;

361.BEM.32.40; 361.BEM.32.50; 361.BEM.32.60

CONECTOR EXPANSIVO MACHO: 361.BEF.26.45; 361.BEF.26.55;

361.BEF.26.65; 361.BEF.28.45; 361.BEF.28.55; 361.BEF.28.65;

361.BEF.32.45; 361.BEF.32.55; 361.BEF.32.65

CONECTOR EXPANSIVO HEMBRA: 361.M16.26.20; 361.M16.26.30;

361.M16.26.40; 361.M16.28.20; 361.M16.28.30; 361.M16.28.40;

361.M16.32.20; 361.M16.32.30; 361.M16.32.40

EXPANSOR: 361.ESP.26.2; 361.ESP.26.5; 361.ESP.26.7; 361.ESP.26.10;

361.ESP.26.12; 361.ESP.26.15; 361.ESP.26.17; 361.ESP.26.20; 361.ESP.28.2; 361.ESP.28.5; 361.ESP.28.7;
361.ESP.28.10;

361.ESP.28.12; 361.ESP.28.15; 361.ESP.28.17; 361.ESP.28.20;

361.ESP.32.2; 361.ESP.32.5; 361.ESP.32.7; 361.ESP.32.10;

361.ESP.32.12; 361.ESP.32.15; 361.ESP.32.17; 361.ESP.32.20

ESPACIADOR: 361.B.26.30; 361.B.26.40; 361.B.26.50; 361.B.26.60;

361.B.26.70; 361.B.26.80; 361.B.26.90; 361.B.26.100; 361.B.26.110; 361.B.26.120; 361.B.26.130;
361.B.26.140; 361.B.26.150; 361.B.26.160; 361.B.26.170; 361.B.26.180; 361.B.26.190; 361.B.26.200;
361.B.28.30; 361.B.28.40; 361.B.28.50; 361.B.28.60; 361.B.28.70; 361.B.28.80; 361.B.28.90;
361.B.28.100; 361.B.28.110; 361.B.28.120; 361.B.28.130; 361.B.28.140; 361.B.28.150; 361.B.28.160;
361.B.28.170; 361.B.28.180; 361.B.28.190; 361.B.28.200; 361.B.32.30; 361.B.32.40; 361.B.32.50;
361.B.32.60; 361.B.32.70; 361.B.32.80; 361.B.32.90; 361.B.32.100; 361.B.32.110; 361.B.32.120;
361.B.32.130; 361.B.32.140; 361.B.32.150; 361.B.32.160; 361.B.32.170; 361.B.32.180; 361.B.32.190;
361.B.32.200

MODULO INTERCAMBIABLE: 365.26.9.70; 365.26.9.80; 365.26.9.90; 365.26.9.100; 365.26.9.110;
365.26.9.120; 365.26.9.130; 365.26.9.140; 365.26.9.150; 365.26.9.160; 365.26.9.170; 365.26.9.180;
365.26.9.190; 365.26.9.200; 365.26.10.70; 365.26.10.80; 365.26.10.90; 365.26.10.100; 365.26.10.110;
365.26.10.120; 365.26.10.130; 365.26.10.140; 365.26.10.150; 365.26.10.160; 365.26.10.170;
365.26.10.180; 365.26.10.190; 365.26.10.200; 365.26.10.210; 365.26.10.220; 365.26.10.230; 365.26.10.240;
365.26.10.250; 365.26.10.260; 365.26.10.270; 365.26.10.280; 365.26.11.70; 365.26.11.80; 365.26.11.90;
365.26.11.100; 365.26.11.110; 365.26.11.120; 365.26.11.130; 365.26.11.140; 365.26.11.150;
365.26.11.160; 365.26.11.170; 365.26.11.180; 365.26.11.190; 365.26.11.200; 365.26.11.210;
365.26.11.220; 365.26.11.230; 365.26.11.240; 365.26.11.250; 365.26.11.260; 365.26.11.270; 365.26.11.280;
365.26.11.290; 365.26.11.270; 365.26.11.280; 365.26.11.290; 365.26.11.300; 365.26.11.310; 365.26.11.320;
365.26.12.70; 365.26.12.80; 365.26.12.90; 365.26.12.100; 365.26.12.110; 365.26.12.120; 365.26.12.130;
365.26.12.140; 365.26.12.150; 365.26.12.160; 365.26.12.170; 365.26.12.180; 365.26.12.190; 365.26.12.200;
365.26.12.210; 365.26.12.220; 365.26.12.230; 365.26.12.240; 365.26.12.250; 365.26.12.260;
365.26.12.270; 365.26.12.280; 365.26.12.290; 365.26.12.300; 365.26.12.310; 365.26.12.320; 365.26.13.70;
365.26.13.80; 365.26.13.90; 365.26.13.100; 365.26.13.110; 365.26.13.120; 365.26.13.130; 365.26.13.140;
365.26.13.150; 365.26.13.160; 365.26.13.170; 365.26.13.180; 365.26.13.190; 365.26.13.200;
365.26.13.210; 365.26.13.220; 365.26.13.230; 365.26.13.240; 365.26.13.250; 365.26.13.260;
365.26.13.270; 365.26.13.280; 365.26.13.290; 365.26.13.300; 365.26.13.310; 365.26.13.320; 365.26.14.70;
365.26.14.80; 365.26.14.90; 365.26.14.100; 365.26.14.110; 365.26.14.120; 365.26.14.130;
365.26.14.140; 365.26.14.150; 365.26.14.160; 365.26.14.170; 365.26.14.180; 365.26.14.190;
365.26.14.200; 365.26.14.210; 365.26.14.220; 365.26.14.230; 365.26.14.240; 365.26.14.250; 365.26.14.260;
365.26.14.270; 365.26.14.280; 365.26.14.290; 365.26.14.300; 365.26.14.310; 365.26.14.320; 365.26.15.70;

365.40.18.140; 365.40.18.150; 365.40.18.160; 365.40.18.170; 365.40.18.180; 365.40.18.190;
365.40.18.200; 365.40.18.210; 365.40.18.220; 365.40.18.230; 365.40.18.240; 365.40.18.250;

365.40.18.260; 365.40.18.270; 365.40.18.280; 365.40.18.290; 365.40.18.300; 365.40.18.310;
365.40.18.320; 365.40.19.70; 365.40.19.80; 365.40.19.90; 365.40.19.100; 365.40.19.110;

365.40.19.120; 365.40.19.130; 365.40.19.140; 365.40.19.150; 365.40.19.160; 365.40.19.170;
365.40.19.180; 365.40.19.190; 365.40.19.200; 365.40.19.210; 365.40.19.220; 365.40.19.230;

365.40.19.240; 365.40.19.250; 365.40.19.260; 365.40.19.270; 365.40.19.280; 365.40.19.290;
365.40.19.300; 365.40.19.310; 365.40.19.320

ASTAS MODULARES: 364.26; 364.28; 364.32

COMPONENTE PROXIMAL DE FÉMUR: 370.F1.E.26; 370.F1.E.28; 370.F2.E.26;
370.F2.E.28; 370.F2.E.32; 370.F3.E.28; 370.F3.E.32; 370.F1.D.26; 370.F1.D.28; 370.F2.D.26;
370.F2.D.28; 370.F2.D.32; 370.F3.D.28; 370.F3.D.32

COMPONENTE DISTAL DE FEMUR PARCIAL Y RODILLA:

372.T1.26; 372.T1.28; 372.T2.26; 372.T2.28; 372.T2.32; 372.T3.28; 372.T3.32

COMPONENTE PROXIMAL DE TÍBIA PARCIAL DE RODILLA. 380.1; 380.2; 380.3

COMPONENTE DISTAL DE FEMUR PARCIAL RODILLA ARTICULADA: 380.A.9.70; 380.A.9.80;
380.A.9.90; 380.A.9.100; 380.A.9.110; 380.A.9.120; 380.A.9.130; 380.A.9.140; 380.A.9.150; 380.A.9.160;

380.A.9.170; 380.A.9.180; 380.A.9.190; 380.A.9.200; 380.A.10.70; 380.A.10.80; 380.A.10.90;
380.A.10.100; 380.A.10.110; 380.A.10.120; 380.A.10.130; 380.A.10.140; 380.A.10.150; 380.A.10.160;
380.A.10.170; 380.A.10.180; 380.A.10.190; 380.A.10.200; 380.A.11.70; 380.A.11.80; 380.A.11.90;
380.A.11.100; 380.A.11.110; 380.A.11.120; 380.A.11.130;

380.A.11.140; 380.A.11.150; 380.A.11.160; 380.A.11.170; 380.A.11.180; 380.A.11.190; 380.A.11.200;
380.A.12.70; 380.A.12.80; 380.A.12.90; 380.A.12.100; 380.A.12.110; 380.A.12.120; 380.A.12.130;
380.A.12.140; 380.A.12.150; 380.A.12.160; 380.A.12.170; 380.A.12.180; 380.A.12.190; 380.A.12.200;
380.A.13.70; 380.A.13.80; 380.A.13.90; 380.A.13.100;

380.A.13.110; 380.A.13.120; 380.A.13.130; 380.A.13.140; 380.A.13.150; 380.A.13.160; 380.A.13.170;
380.A.13.180; 380.A.13.190; 380.A.13.200; 380.A.14.70; 380.A.14.80; 380.A.14.90; 380.A.14.100;
380.A.14.110; 380.A.14.120; 380.A.14.130; 380.A.14.140; 380.A.14.150; 380.A.14.160; 380.A.14.170;
380.A.14.180; 380.A.14.190; 380.A.14.200; 380.A.15.70; 380.A.15.80; 380.A.15.90; 380.A.15.100;
380.A.15.110; 380.A.15.120; 380.A.15.130; 380.A.15.140; 380.A.15.150; 380.A.15.160; 380.A.15.170;
380.A.15.180; 380.A.15.190; 380.A.15.200; 380.A.16.70; 380.A.16.80; 380.A.16.90; 380.A.16.100;
380.A.16.110; 380.A.16.120; 380.A.16.130; 380.A.16.140; 380.A.16.150; 380.A.16.160; 380.A.16.170;
380.A.16.180; 380.A.16.190; 380.A.16.200; 380.A.17.70; 380.A.17.80; 380.A.17.90; 380.A.17.100;
380.A.17.110; 380.A.17.120; 380.A.17.130; 380.A.17.140; 380.A.17.150; 380.A.17.160; 380.A.17.170;
380.A.17.180; 380.A.17.190; 380.A.17.200;

ASTA FEMORAL PARA COMPONENTE DISTAL DE FEMUR PARCIAL

JOELHO ARTICULADO. 362.1.26.D; 362.1.26.E; 362.2.28.D; 362.2.28.E; 362.2.32.D;
362.2.32.E; 362.3.28.D; 362.3.28.E; 362.3.32.D; 362.3.32.E; 362.2.40.D; 362.2.40.E; 362.3.40.D; 362.3.40.E

COMPONENTE DISTAL DE FEMUR Y RODILLA ARTICULADA: 373.T1.26; 373.T1.28; 373.T2.26;
373.T2.28; 373.T2.32; 373.T3.28; 373.T3.32

COMPONENTE PROXIMAL DE TÍBIA Y RODILLA ARTICULADA: 362.T1.9.80; 362.T1.9.90; 362.T1.9.100; 362.T1.9.110; 362.T1.9.120; 362.T1.9.130; 362.T1.9.140; 362.T1.9.150; 362.T1.10.80; 362.T1.10.90; 362.T1.10.100; 362.T1.10.110; 362.T1.10.120; 362.T1.10.130; 362.T1.10.140;

362.T1.10.150; 362.T1.10.160; 362.T1.10.170; 362.T1.10.180; 362.T1.10.190; 362.T1.10.200; 362.T1.11.80; 362.T1.11.90; 362.T1.11.100; 362.T1.11.110; 362.T1.11.120; 362.T1.11.130;

362.T1.11.140; 362.T1.11.150; 362.T1.11.160; 362.T1.11.170; 362.T1.11.180; 362.T1.11.190; 362.T1.11.200; 362.T1.12.80; 362.T1.12.90; 362.T1.12.100; 362.T1.12.110; 362.T1.12.120;

362.T1.12.130; 362.T1.12.140; 362.T1.12.150; 362.T1.12.160; 362.T1.12.170; 362.T1.12.180; 362.T1.12.190; 362.T1.12.200; 362.T1.13.80; 362.T1.13.90; 362.T1.13.100; 362.T1.13.110;

362.T1.13.120; 362.T1.13.130; 362.T1.13.140; 362.T1.13.150; 362.T1.13.160; 362.T1.13.170; 362.T1.13.180; 362.T1.13.190; 362.T1.13.200; 362.T1.14.80; 362.T1.14.90; 362.T1.14.100;

362.T1.14.110; 362.T1.14.120; 362.T1.14.130; 362.T1.14.140; 362.T1.14.150; 362.T1.14.160; 362.T1.14.170; 362.T1.14.180; 362.T1.14.190; 362.T1.14.200; 362.T1.15.80; 362.T1.15.90;

362.T1.15.100; 362.T1.15.110; 362.T1.15.120; 362.T1.15.130; 362.T1.15.140; 362.T1.15.150; 362.T1.15.160; 362.T1.15.170; 362.T1.15.180; 362.T1.15.190; 362.T1.15.200; 362.T1.16.80;

362.T1.16.90; 362.T1.16.100; 362.T1.16.110; 362.T1.16.120; 362.T1.16.130; 362.T1.16.140; 362.T1.16.150; 362.T1.16.160; 362.T1.16.170; 362.T1.16.180; 362.T1.16.190; 362.T1.16.200;

362.T2.9.80; 362.T2.9.90; 362.T2.9.100; 362.T2.9.110; 362.T2.9.120; 362.T2.9.130; 362.T2.9.140; 362.T2.9.150; 362.T2.10.80; 362.T2.10.90; 362.T2.10.100; 362.T2.10.110; 362.T2.10.120; 362.T2.10.130; 362.T2.10.140; 362.T2.10.150; 362.T2.10.160; 362.T2.10.170; 362.T2.10.180; 362.T2.10.190; 362.T2.10.200; 362.T2.11.80; 362.T2.11.90; 362.T2.11.100; 362.T2.11.110; 362.T2.11.120; 362.T2.11.130; 362.T2.11.140; 362.T2.11.150; 362.T2.11.160; 362.T2.11.170; 362.T2.11.180; 362.T2.11.190; 362.T2.11.200; 362.T2.12.80; 362.T2.12.90; 362.T2.12.100; 362.T2.12.110; 362.T2.12.120; 362.T2.12.130; 362.T2.12.140; 362.T2.12.150; 362.T2.12.160; 362.T2.12.170; 362.T2.12.180; 362.T2.12.190; 362.T2.12.200; 362.T2.13.80; 362.T2.13.90; 362.T2.13.100; 362.T2.13.110; 362.T2.13.120; 362.T2.13.130; 362.T2.13.140; 362.T2.13.150; 362.T2.13.160; 362.T2.13.170; 362.T2.13.180; 362.T2.13.190; 362.T2.13.200; 362.T2.14.80; 362.T2.14.90; 362.T2.14.100; 362.T2.14.110; 362.T2.14.120; 362.T2.14.130; 362.T2.14.140; 362.T2.14.150; 362.T2.14.160; 362.T2.14.170; 362.T2.14.180; 362.T2.14.190; 362.T2.14.200; 362.T2.15.80; 362.T2.15.90; 362.T2.15.100; 362.T2.15.110; 362.T2.15.120; 362.T2.15.130; 362.T2.15.140; 362.T2.15.150; 362.T2.15.160; 362.T2.15.170; 362.T2.15.180; 362.T2.15.190; 362.T2.15.200; 362.T2.16.80; 362.T2.16.90; 362.T2.16.100; 362.T2.16.110; 362.T2.16.120; 362.T2.16.130; 362.T2.16.140; 362.T2.16.150; 362.T2.16.160; 362.T2.16.170; 362.T2.16.180; 362.T2.16.190; 362.T2.16.200; 362.T3.9.80; 362.T3.9.90; 362.T3.9.100; 362.T3.9.110; 362.T3.9.120; 362.T3.9.130; 362.T3.9.140; 362.T3.9.150; 362.T3.10.80; 362.T3.10.90; 362.T3.10.100; 362.T3.10.110; 362.T3.10.120; 362.T3.10.130; 362.T3.10.140; 362.T3.10.150; 362.T3.10.160;

362.T3.10.170; 362.T3.10.180; 362.T3.10.190; 362.T3.10.200; 362.T3.11.80; 362.T3.11.90; 362.T3.11.100; 362.T3.11.110; 362.T3.11.120; 362.T3.11.130; 362.T3.11.140; 362.T3.11.150; 362.T3.11.160; 362.T3.11.170; 362.T3.11.180; 362.T3.11.190; 362.T3.11.200; 362.T3.12.80; 362.T3.12.90; 362.T3.12.100; 362.T3.12.110; 362.T3.12.120; 362.T3.12.130; 362.T3.12.140;

362.T3.12.150; 362.T3.12.160; 362.T3.12.170; 362.T3.12.180; 362.T3.12.190; 362.T3.12.200; 362.T3.13.80; 362.T3.13.90; 362.T3.13.100; 362.T3.13.110; 362.T3.13.120; 362.T3.13.130;

362.T3.13.140; 362.T3.13.150; 362.T3.13.160; 362.T3.13.170; 362.T3.13.180; 362.T3.13.190; 362.T3.13.200; 362.T3.14.80; 362.T3.14.90; 362.T3.14.100; 362.T3.14.110; 362.T3.14.120;

362.T3.14.130; 362.T3.14.140; 362.T3.14.150; 362.T3.14.160; 362.T3.14.170; 362.T3.14.180;
362.T3.14.190; 362.T3.14.200; 362.T3.15.80; 362.T3.15.90; 362.T3.15.100; 362.T3.15.110;
362.T3.15.120; 362.T3.15.130; 362.T3.15.140; 362.T3.15.150; 362.T3.15.160; 362.T3.15.170;
362.T3.15.180; 362.T3.15.190; 362.T3.15.200; 362.T3.16.80; 362.T3.16.90; 362.T3.16.100;
362.T3.16.110; 362.T3.16.120; 362.T3.16.130; 362.T3.16.140; 362.T3.16.150; 362.T3.16.160;
362.T3.16.170; 362.T3.16.180; 362.T3.16.190; 362.T3.16.200

COMPONENTE PROXIMAL DE TÍBIA Y RODILLA ARTICULADA - RECESIÓN MÍNIMA DE TÍBIA PROXIMAL.

Período de vida útil: 5 años

Forma de presentación: Estéril, por unidad

Método de Esterilización: Óxido de Etileno

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Fabricante:

BAUMER S.

Lugar/es de elaboración: AV. PREFEITO ANTONIO TAVARES LEITE 181

MOGI-MIRIM – SAN PABLO – BRASIL.

Expediente N° 1-47-3110-6494-17-1

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2019.03.01 15:39:30 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR,
ou=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019 03 01 15 39 34 -0300

MODELO DE ROTULO

NOMBRE DEL PRODUCTO:
Prótesis no convencional cementada para miembros inferiores-
STAGE.

- Modelo: XXXX
- Código del Producto: XXXX
- Número de Lote: XXX
- Importador: Vasculart SA
Thames 2485. Piso 13. C.A.B.A. Argentina
- Fabricante: BAUMER S.A
AV. Prefeito Antonio Tavares Leite 181 - Parque
da Empresa - Moji Mirim - San Pablo
- Origen: BRASIL
- D. Técnico: Estela Alejandra Collado Mat. N° 12.029
- AUTORIZADO POR ANMAT PM: 817-62
- ESTERIL POR ETO

ALMACENAR EN LUGAR OSCURO Y SECO A MENOS DE 45°
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES
MÉDICAS
NO USAR SI EL ENVASE ESTÁ ABIERTO O DAÑADO.

VASCULART S.A.
ORLANDO DANIEL FERRETTA
REPRESENTANTE LEGAL

Estela Collado
Directora Técnica
Matricula 12.029

IV. Modelo instrucciones de uso según Anexo III.B de la disposición 2318/02:

1. Datos básicos:

a. Razón Social y dirección del fabricante.

Baumer S.A

Av. Prefeito Antonio Tavares Leite, 181.

Parque da Empresa – Sao Paulo

Brasil.

b. Razón Social y dirección del importador.

Vascularart S.A

Thames 2485. Piso 13

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Argentina.

c. Nombre Comercial del Producto.

Endoprótesis No Convencional Cementada para Miembros Inferiores -STAGE

d. Otras Indicaciones:

ATOXICO – ESTERIL – LIBRE DE PIRETOGENOS

Se especifica "Número de lote" de cada unidad.

Se especifica "Fecha de Fabricación" (Año/Mes)

Se especifica "Fecha de Caducidad" (Año/Mes).

Se especifica "Plazo de Validez" de 5 años.

Se indica la condición de "un solo uso".

Se indica que, en relación a las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación deben verse las "Instrucciones de Uso".

Se indica que en relación a las instrucciones especiales para operación y/o uso del producto médico deben verse las "Instrucciones de uso"

Se indica que las advertencias y precauciones que deben adoptarse en el uso del producto médico están contenidas en las "Instrucciones de Uso".

Se especifica que el método de esterilización es con óxido de etileno y que no se debe re-esterilizar.

e. Responsable Técnico:

Estela Alejandra Collado

Matricula N.º 12.029

Director Técnico

f. Registro del Producto

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 817-62

g. Condición de Venta del Producto:

CONDICIONES/DE VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS


VASCULART S.A.
ORLANDO DANIEL PERRETTA
REPRESENTANTE LEGAL


Estela Collado
Directora Técnica
Matricula 12.029

2. Presentaciones Contempladas:

La Endoprótesis no convencional cementada para miembros inferiores – STAGE es un producto metálico e implantable, biarticulado, desarrollado para casos de sustitución, reconstrucción parcial o total de los segmentos óseos y articulaciones de miembros inferiores (fémur, rodilla y diáfisis), de acuerdo con las indicaciones de uso. Es un producto médico de uso único y suministrado en forma estéril.

Las Endoprótesis existentes en mercado sustituyen el defecto creado después de la recesión del tumor con un margen de seguridad, posibilitando el mantenimiento del miembro con una función satisfactoria y compatible con la vida normal. Con aumento del tiempo de sobrevida de los pacientes, auxiliado por métodos adyacentes, entre ellos la quimioterapia y radioterapia. Además de eso se puede ocurrir una recaída local del tumor con o sin soltura del implante.

Contraindicaciones de Uso:

Las contraindicaciones deben ser fuertemente consideradas por el cirujano. Tales contraindicaciones incluyen, pero no limitan la utilización Endoprótesis no convencional para miembros inferiores, en los casos de:

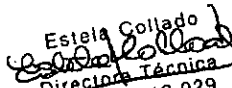
- Histórico reciente de infección sistémica o localizada.
- Señales de inflamación local.
- Inmadurez ósea.
- Osteoporosis grave.
- Obesidad mórbida.
- Fiebre o leucocitosis.
- Sensibilidad o alergia al metal del producto médico
- Todas aquellas conocidas para el uso de este producto médico.
- Pacientes sin voluntad o incapaces de seguir los cuidados y las instrucciones del post-operatorio.
- Cualquier condición médica o quirúrgica que pueda comprometer el éxito del procedimiento quirúrgico.
- Todo paciente debe ser alertado sobre los riesgos de caminar sin el auxilio de muleta o bastón, antes de que ocurra la fijación biológica del producto médico.

Posibles Eventos Adversos:

- Soltura, migración o fractura del producto médico.
- Infección superficial o profunda.
- Desordenes vasculares, incluyendo trombosis y embolia pulmonar.
- Acortamiento de miembro en función de la reabsorción ósea.
- Sensibilidad al metal o reacción alérgica al cuerpo extraño
- Disminución de la sensibilidad ósea.
- Falla precoz o tarda del producto médico.



VASCULART S.A.
ORLANDO DANIEL FERRETTA
REPRESENTANTE LEGAL



Estela Collado
Directora Técnica
Matrícula 12.029

- Dolor, Incomodidad o sensaciones anormales en función de la presencia o migración del producto médico y también en función del procedimiento quirúrgico.
- Daños neurales y neurológicos en función el trauma quirúrgico
- Incapacidad de ejecutar actividades físicas diarias normales.
- Hemorragia en vasos sanguíneos e/o hematomas.
- Escaras
- Cicatriz en el local de inserción del producto médico debido a la vía de acceso.
- Como en todas las intervenciones quirúrgicas hay una incidencia de enfermedades y mortalidad.
- Alergias u otras reacciones debido a partículas o metálicos y/o poliméricos liberados por el producto médico y componentes anclares.

3. Conexión con otros productos médicos:

La Endoprótesis no convencional cementada para miembros inferiores - STAGE no posee accesorios con el propósito de integrar el producto médico, otorgando a ese producto una función o característica técnica complementaria

La Endoprótesis no convencional cementada para miembros inferiores - STAGE es colocado utilizando los principios y fundamentos de su acción consisten básicamente en encaje, con presión "press-fit" los cuales consisten en el encaje del producto médico en la cavidad acetabular ósea (iliaca) por medio de la fijación biológica y/o mecánica siendo **impactada con auxilio del instrumental quirúrgico específico, registro ANMAT Disposición Nro. 4564/10 y 6913/10.**

instrumental

4. Instrucciones relacionadas con la indicación y control del producto médico:

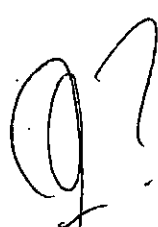
La Endoprótesis no convencional cementada para miembros inferiores - STAGE solo puede ser empleado por médicos familiarizados con el procedimiento quirúrgico artroplástico que cuenten con la suficiente capacitación. Debiendo reconocer situaciones de emergencia, evaluarlas y tratarlas.

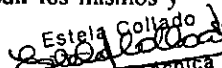
Procedimiento:

Dado que las técnicas usadas por los médicos que practican esta clase de intervenciones artropédicas varían de acuerdo a la diversidad de clínicas, se dan a continuación una serie de recomendaciones del fabricante a fin de minimizar cualquier efecto colateral.

Selección del tamaño del Implante

Los factores clínicos y radiológicos son importantes para la selección del componente, se debe tener en cuenta la funcionalidad, arco de movimiento y estabilidad articular y grado de deformidad articular. Para medir los mismos y


VASCULART S.A.
ORLANDO DANIEL PERRETTA
REPRESENTANTE LEGAL


Estela Collado
Directora Técnica
Matrícula 12.029

obtener una plantilla para el tamaño y selección del implante se necesitan radiografías normales y radiografías computarizadas durante las cuales se colocan marcadores los cuales garantizan la exactitud de las mediciones. También se deben tener imágenes de bipedestación (evaluar las articulaciones de la cadera y rodilla) de toda la extremidad con el fin de encontrar discrepancias de longitud en las extremidades.

Una vez realizado este proceso se procede a la selección del implante.

Las presentes instrucciones sirven de guía técnica, pero no eximen de la necesidad de formación en el uso del dispositivo.

5. Advertencias y precauciones útiles para evitar riesgos relacionados con la implantación de la Endoprótesis no convencional cementada para miembros inferiores – STAGE

- Por seguridad y efectividad el cirujano debe estar familiarizado con los procedimientos y recomendaciones para la implantación.
- Para asegurar la implantación adecuada deben ser utilizados instrumentales quirúrgicos específicos, fabricados por Baumer, por que la variación en el proyecto y dimensiones de instrumentos de otros fabricantes pueden comprometer las medidas críticas requeridas para la implantación precisa.
- El cirujano debe estar atento con la preparación del canal medular, así como en la cavidad acetabular ósea, para obtener el encaje de la Endoprótesis no convencional para miembros inferiores y los componentes ancilares, evitándose la radiolucencia y el surgimiento indeseado de micro-movimientos.
- La Endoprótesis no convencional para miembros inferiores, así como, los componentes ancilares, los accesorios deben estar esterilizados antes del uso quirúrgico.
- Los productos médicos son suministrados esterilizados y para mantener esta condición, el producto deberá ser abierto solamente en el momento de su utilización y manoseo en ambientes esterilizados.
- El paciente debe ser alertado sobre las limitaciones de la sustitución o restricciones de la articulación muslo-femoral (cadera)
- El cirujano debe evitar también producir surcos o arañones en la Endoprótesis no convencional para miembros inferiores, porque estos daños e/o averías pueden producir "stress" interno que podrá transformarse en foco de una posible quiebra.
- Una superficie articular nunca debe ser removida y re-inserida durante el procedimiento quirúrgico. A pesar de parecer estar intacta puede haber sufrido alteraciones que afecten su fijación y su sobrevivencia.
- El uso de la Endoprótesis no convencional para miembros inferiores ha ofrecido medios de sustitución o restitución muslo-femoral (cadera) en artroplastia parcial o total de la cadera, primera o revisión. Para sustituir la articulación dañificada y no las estructuras normales del esqueleto humano.


VASCULART S.A.
ORLANDO DANIEL PERRETTA
REPRESENTANTE LEGAL


Estela Collado
Directora Técnica
Matrícula 12.029

- Factores como el peso del paciente, nivel de actividad, atención a las instrucciones y las limitaciones de estos requisitos ya que tienen efecto en la carga y el número de ciclos a los cuales el producto médico es expuesto.
- El cirujano debe enterarse no solo sobre los aspectos médicos y quirúrgicos del producto médico, como también estar consciente de sus aspectos mecánicos y metalúrgicos.
- La correcta selección del producto médico es extremadamente importante.
- La Endoprótesis no convencional para miembros inferiores no puede soportar niveles de actividad iguales a las soportadas en huesos normales y saludables.
- A pesar de todo el desarrollo científico y tecnológico, los metales y sus ligas cuando implantados en el organismo humano están sujetos a constantes cambios ambientales (concentración de sales, ácidos y alcaloides) lo que causa corrosión. La colocación de metales puede acelerar el proceso de corrosión que por su vez acentúa la fractura por fatiga del producto médico.
- La mezcla de diferentes materiales biomédicos en un mismo paciente, excepto cuando sean compatibles o similares puede elevar el riesgo de corrosión.
- El cirujano debe estar atento cuando se realizan exámenes de resonancia magnética, caso el paciente ya posee implantes fabricados en acero inoxidable.
- La Endoprótesis no convencional para miembros inferiores se puede soltar, quebrar, sufrir corrosión, causar dolor, y también debilitar el hueso en pacientes jóvenes y activos.
- La actividad física excesiva y traumatismos que afecten la articulación substituida ha causa de falla perpetua en la artroplastia de la cadera, sea por perdida, fractura o desgaste del producto médico y sus componentes ancilares.

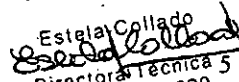
6. Información relativa a los riesgos de interferencia recíproca relacionados con la presencia del producto médico en investigaciones (estudios) o tratamientos específicos:

La Endoprótesis no convencional cementada para miembros inferiores - STAGE es compatible con todos los procedimientos de diagnósticos, tratamientos e investigaciones científicas.

7. Instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la estabilidad y advertencias sobre su reesterilización.

- La Endoprótesis no convencional cementada para miembros inferiores - STAGE es suministrada en condición estéril, siendo el método de esterilización empleado el Óxido de de etileno (E.T.O). Para mantener la


VASCULART S.A.
ORLANDO DANIEL PERRETTA
REPRESENTANTE LEGAL


Estelita Collado
Directora Técnica 5
Matricula 12.029

esterilidad, el producto médico deberá ser abierto solamente en el momento de su utilización y manoseo en ambientes estériles. Antes de usar verifique la validez de la esterilización. No utilice el producto médico en caso de que el embalaje esté violado o con la validez de esterilización vencida.

- No reprocesar o reesterilizar. La reesterilización puede comprometer la integridad estructural del dispositivo y/ o causar su fallo, lo que a su vez puede resultar en lesiones al paciente, enfermedad o muerte.

8. Advertencias sobre la reutilización

- La Endoprótesis no convencional cementada para miembros inferiores - STAGE es para uso en un solo paciente y por una única vez.
- No rehusar, reprocesar o reesterilizar.
- Baumer S.A. y su representante no se responsabilizarán de ningún daño respecto a dispositivos que se reutilicen, reprocenen o reesterilicen.

9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico:

La Endoprótesis no convencional cementada para miembros inferiores - STAGE no requiere de ningún tratamiento o procedimiento adicional y/o especial, previo al procedimiento de implante. Lea atentamente las "Instrucciones relacionadas con la implantación y control del producto médico" donde constan los pasos a seguir antes, durante y después del implante del dispositivo.

10. Emisión de radiaciones:

La Endoprótesis no convencional cementada para miembros inferiores - STAGE no emite ningún tipo de radiación.

11. Cambios del funcionamiento del producto médico:

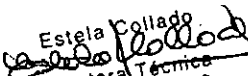
La Endoprótesis no convencional cementada para miembros inferiores - STAGE tiene como función la sustitución o restitución total o parcial de la articulación muslo-femoral (cadera).

Dicha función solo puede verse alterada si se producen algunas de las siguientes situaciones:

- Durante la inspección previa a su uso se detecta el compromiso de la integridad del envase estéril del producto.
- Se reusa, reprocesa o reesterilización el dispositivo.

En tales casos la única precaución indicada es la de DESECHAR el producto e inmediata devolución al representante local de Baumer S.A. para su remisión al fabricante


VASCULART S.A.
ORLANDO DANIEL FERRETTA
REPRESENTANTE LEGAL


Estela Collado
Directora Técnica
Matricula 12.029

12. Precauciones relacionadas con condiciones ambientales:

El dispositivo de restitución o sustitución total o parcial de articulación muslo-femoral (cadera) "La Endoprótesis no convencional cementada para miembros inferiores - STAGE" debe conservarse a temperatura ambiente, protegidos de la humedad y la exposición al sol.

Evite que los productos sean sometidos a golpes y/o vibraciones.

13. Medicamento incluido en el producto médico como parte integrante del mismo o al que estuviera destinado a administrar:

El dispositivo de restitución o sustitución total o parcial de la articulación muslo-femoral (cadera) "La Endoprótesis no convencional cementada para miembros inferiores - STAGE" no incluye ningún medicamento como parte integrante del mismo, ni está destinado a la provisión o suministro de droga alguna.

14. Precauciones que deben adoptarse relacionadas con la eliminación del producto médico:

- Si el Producto no ha sido utilizado.

Si en la "Inspección previa al uso" se observa algún defecto o ha superado la "fecha de vencimiento" señalada en el rótulo, se debe proceder a la inmediata devolución del producto al representante local para su reintegro al fabricante o a la destrucción según las normas sanitarias y ambientales vigentes, según corresponda.

- Si el producto debió ser retirado durante el procedimiento de implante.

Si en cualquier momento durante el uso del dispositivo de restitución o sustitución de articulación "La Endoprótesis no convencional cementada para miembros inferiores - STAGE" se detecta algún defecto o comportamiento no habitual, no continúe usándolo, proceda al remplazo del sistema y proceda a la devolución al representante local para su reintegro al fabricante, a los efectos de realizar análisis correspondientes y producir el informe pertinente.

VASCULART S.A.
ORLANDO DANJEL PERRETTA
REPRESENTANTE LEGAL

Estela Collado
Estela Collado
Directora Técnica
Matricula 12.029



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-51048847-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 11 de Octubre de 2018

Referencia: 147-3110-6494-17-1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.11 10:02:22 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.10.11 10:09:23 -03'00'



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-3110-6494-17-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por VASCULART S.A., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Prótesis no Convencional Cementada para Miembros Inferiores

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-166 Prótesis, de Articulación para Cadera

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): STAGE

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: artroplastia parcial o total de cadera, primaria o revisión, causadas por enfermedades como: sustitución del segmento óseo o porción ósea (total o parcial) debido a tumores, artroplastías de revisión de cadera, rodilla, reconstrucción del segmento óseo, trauma con pérdida ósea sustancial, deformidad severa, necrosis vascular de la cabeza femoral, espondilitis

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635;
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientés

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

anquilosante, secuela de fractura del cuello del fémur, pseudo artrosis del cuello del fémur, revisión de artroplastias segmentadas.

Modelo/s:

PROTESIS NO CONVENCIONAL CEMENTADA PARA MIEMBROS INFERIORES -
STAGE

361.BI.26.30; 361.BI.26.40; 361.BI.26.50; 361.BI.26.60; 361.BI.26.70;

361.BI.26.80; 361.BI.26.90; 361.BI.26.100; 361.BI.26.110; 361.BI.26.120;

361.BI.26.130; 361.BI.26.140; 361.BI.26.150; 361.BI.26.160; 361.BI.26.170;

361.BI.26.180; 361.BI.26.190; 361.BI.26.200; 361.BI.28.30;

361.BI.28.40; 361.BI.28.50; 361.BI.28.60; 361.BI.28.70; 361.BI.28.80;

361.BI.28.90; 361.BI.28.100; 361.BI.28.110; 361.BI.28.120; 361.BI.28.130;

361.BI.28.140; 361.BI.28.150; 361.BI.28.160; 361.BI.28.170; 361.BI.28.180;

361.BI.28.190; 361.BI.28.200; 361.BI.32.30; 361.BI.32.40; 361.BI.32.50;

361.BI.32.60; 361.BI.32.70; 361.BI.32.80; 361.BI.32.90; 361.BI.32.100;

361.BI.32.110; 361.BI.32.120; 361.BI.32.130; 361.BI.32.140; 361.BI.32.150;

361.BI.32.160; 361.BI.32.170; 361.BI.32.180; 361.BI.32.190; 361.BI.32.200;

MODULO INTERCAMBIABLE LOBULAR: 361.BIF.26.35; 361.BIF.26.50;

361.BIF.28.35; 361.BIF.28.50; 361.BIF.32.35; 361.BIF.32.50;

CONECTOR LOBULAR INTERCAMBIABLE DIAFISARIO: 361.BIM.26.30;



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

361.BIM.26.40; 361.BIM.28.30; 361.BIM.28.40; 361.BIM.32.30; 361.BIM.32.40
MODULO LOBULAR INTERCAMBIABLE DIAFISARIO; 365I.26.9.70;
365I.26.9.80; 365I.26.9.90; 365I.26.9.100; 365I.26.9.110; 365I.26.9.120;
365I.26.9.130; 365I.26.9.140; 365I.26.9.150; 365I.26.9.160; 365I.26.9.170;
365I.26.9.180; 365I.26.9.190; 365I.26.9.200; 365I.26.10.70; 365I.26.10.80;
365I.26.10.90; 365I.26.10.100; 365I.26.10.110; 365I.26.10.120;
365I.26.10.130; 365I.26.10.140; 365I.26.10.150; 365I.26.10.160;
365I.26.10.170; 365I.26.10.180; 365I.26.10.190; 365I.26.10.200;
365I.26.10.210; 365I.26.10.220; 365I.26.10.230; 365I.26.10.240;
365I.26.10.250; 365I.26.10.260; 365I.26.10.270; 365I.26.10.280;
365I.26.11.70; 365I.26.11.80; 365I.26.11.90; 365I.26.11.100; 365I.26.11.110;
365I.26.11.120; 365I.26.11.130; 365I.26.11.140; 365I.26.11.150;
365I.26.11.160; 365I.26.11.170; 365I.26.11.180; 365I.26.11.190;
365I.26.11.200; 365I.26.11.210; 365I.26.11.220; 365I.26.11.230;
365I.26.11.240; 365I.26.11.250; 365I.26.11.260; 365I.26.11.270;
365I.26.11.280; 365I.26.11.290; 365I.26.11.300; 365I.26.11.310;
365I.26.11.320; 365I.26.12.70; 365I.26.12.80; 365I.26.12.90; 365I.26.12.100;
365I.26.12.110; 365I.26.12.120; 365I.26.12.130; 365I.26.12.140;
365I.26.12.150; 365I.26.12.160; 365I.26.12.170; 365I.26.12.180;

WFB

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

365I.26.12.190; 365I.26.12.200; 365I.26.12.210; 365I.26.12.220;
365I.26.12.230; 365I.26.12.240; 365I.26.12.250; 365I.26.12.260;
365I.26.12.270; 365I.26.12.280; 365I.26.12.290; 365I.26.12.300;
365I.26.12.310; 365I.26.12.320; 365I.26.13.70; 365I.26.13.80; 365I.26.13.90;
365I.26.13.100; 365I.26.13.110; 365I.26.13.120; 365I.26.13.130;
365I.26.13.140; 365I.26.13.150; 365I.26.13.160; 365I.26.13.170;
365I.26.13.180; 365I.26.13.190; 365I.26.13.200; 365I.26.13.210;
365I.26.13.220; 365I.26.13.230; 365I.26.13.240; 365I.26.13.250;
365I.26.13.260; 365I.26.13.270; 365I.26.13.280; 365I.26.13.290;
365I.26.13.300; 365I.26.13.310; 365I.26.13.320; 365I.26.14.70; 365I.26.14.80;
365I.26.14.90; 365I.26.14.100; 365I.26.14.110; 365I.26.14.120;
365I.26.14.130; 365I.26.14.140; 365I.26.14.150; 365I.26.14.160;
365I.26.14.170; 365I.26.14.180; 365I.26.14.190; 365I.26.14.200;
365I.26.14.210; 365I.26.14.220; 365I.26.14.230; 365I.26.14.240;
365I.26.14.250; 365I.26.14.260; 365I.26.14.270; 365I.26.14.280;
365I.26.14.290; 365I.26.14.300; 365I.26.14.310; 365I.26.14.320;
365I.26.15.70; 365I.26.15.80; 365I.26.15.90; 365I.26.15.100; 365I.26.15.110;
365I.26.15.120; 365I.26.15.130; 365I.26.15.140; 365I.26.15.150;
365I.26.15.160; 365I.26.15.170; 365I.26.15.180;

MJB



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

365I.26.15.190;365I.26.15.200; 365I.26.15.210; 365I.26.15.220;
365I.26.15.230; 365I.26.15.240; 365I.26.15.250; 365I.26.15.260;
365I.26.15.270; 365I.26.15.280; 365I.26.15.290; 365I.26.15.300;
365I.26.15.310; 365I.26.15.320; 365I.26.16.70; 365I.26.16.80; 365I.26.16.90;
365I.26.16.100; 365I.26.16.110; 365I.26.16.120; 365I.26.16.130;
365I.26.16.140; 365I.26.16.150; 365I.26.16.160; 365I.26.16.170;
365I.26.16.180; 365I.26.16.190; 365I.26.16.200; 365I.26.16.210;
365I.26.16.220; 365I.26.16.230; 365I.26.16.240; 365I.26.16.250;
365I.26.16.260; 365I.26.16.270; 365I.26.16.280; 365I.26.16.290;
365I.26.16.300; 365I.26.16.310; 365I.26.16.320; 365I.26.17.70; 365I.26.17.80;
365I.26.17.90; 365I.26.17.100; 365I.26.17.110; 365I.26.17.120;
365I.26.17.130; 365I.26.17.140; 365I.26.17.150; 365I.26.17.160;
365I.26.17.170; 365I.26.17.180; 365I.26.17.190; 365I.26.17.200;
365I.26.17.210; 365I.26.17.220; 365I.26.17.230; 365I.26.17.240;
365I.26.17.250; 365I.26.17.260; 365I.26.17.270; 365I.26.17.280;
365I.26.17.290; 365I.26.17.300; 365I.26.17.310; 365I.26.17.320; 365I.28.9.70;
365I.28.9.80; 365I.28.9.90; 365I.28.9.100; 365I.28.9.110; 365I.28.9.120;
365I.28.9.130; 365I.28.9.140; 365I.28.9.150; 365I.28.9.160; 365I.28.9.170;

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

365I.28.9.180; 365I.28.9.190; 365I.28.9.200; 365I.28.10.70; 365I.28.10.80;
365I.28.10.90; 365I.28.10.100;
365I.28.10.110; 365I.28.10.120; 365I.28.10.130; 365I.28.10.140;
365I.28.10.150; 365I.28.10.160; 365I.28.10.170; 365I.28.10.180;
365I.28.10.190; 365I.28.10.200; 365I.28.10.210; 365I.28.10.220;
365I.28.10.230; 365I.28.10.240; 365I.28.10.250; 365I.28.10.260;
365I.28.10.270; 365I.28.10.280; 365I.28.11.70; 365I.28.11.80; 365I.28.11.90;
365I.28.11.100; 365I.28.11.110; 365I.28.11.120; 365I.28.11.130;
365I.28.11.140; 365I.28.11.150; 365I.28.11.160; 365I.28.11.170;
365I.28.11.180; 365I.28.11.190; 365I.28.11.200; 365I.28.11.210;
365I.28.11.220; 365I.28.11.230; 365I.28.11.240; 365I.28.11.250;
365I.28.11.260; 365I.28.11.270; 365I.28.11.280; 365I.28.11.290;
365I.28.11.300; 365I.28.11.310; 365I.28.11.320; 365I.28.12.70; 365I.28.12.80;
365I.28.12.90; 365I.28.12.100; 365I.28.12.110; 365I.28.12.120;
365I.28.12.130; 365I.28.12.140; 365I.28.12.150; 365I.28.12.160;
365I.28.12.170; 365I.28.12.180; 365I.28.12.190; 365I.28.12.200;
365I.28.12.210; 365I.28.12.220; 365I.28.12.230; 365I.28.12.240;
365I.28.12.250; 365I.28.12.260; 365I.28.12.270; 365I.28.12.280;
365I.28.12.290; 365I.28.12.300; 365I.28.12.310; 365I.28.12.320;





Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

365I.28.13.70; 365I.28.13.80; 365I.28.13.90; 365I.28.13.100; 365I.28.13.110;
 365I.28.13.120; 365I.28.13.130; 365I.28.13.140; 365I.28.13.150;
 365I.28.13.160; 365I.28.13.170; 365I.28.13.180; 365I.28.13.190;
 365I.28.13.200; 365I.28.13.210; 365I.28.13.220; 365I.28.13.230;
 365I.28.13.240; 365I.28.13.250; 365I.28.13.260; 365I.28.13.270;
 365I.28.13.280; 365I.28.13.290; 365I.28.13.300; 365I.28.13.310;
 365I.28.13.320; 365I.28.14.70; 365I.28.14.80; 365I.28.14.90; 365I.28.14.100;
 365I.28.14.110; 365I.28.14.120; 365I.28.14.130; 365I.28.14.140;
 365I.28.14.150; 365I.28.14.160; 365I.28.14.170; 365I.28.14.180;
 365I.28.14.190; 365I.28.14.200; 365I.28.14.210; 365I.28.14.220;
 365I.28.14.230; 365I.28.14.240; 365I.28.14.250; 365I.28.14.260;
 365I.28.14.270; 365I.28.14.280; 365I.28.14.290; 365I.28.14.300;
 365I.28.14.310; 365I.28.14.320; 365I.28.15.70; 365I.28.15.80; 365I.28.15.90;
 365I.28.15.100; 365I.28.15.110; 365I.28.15.120; 365I.28.15.130;
 365I.28.15.140; 365I.28.15.150; 365I.28.15.160; 365I.28.15.170;
 365I.28.15.180; 365I.28.15.190; 365I.28.15.200; 365I.28.15.210;
 365I.28.15.220; 365I.28.15.230; 365I.28.15.240; 365I.28.15.250;
 365I.28.15.260; 365I.28.15.270; 365I.28.15.280; 365I.28.15.290;
 365I.28.15.300; 365I.28.15.310; 365I.28.15.320; 365I.28.16.70; 365I.28.16.80;

WAR

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

365I.28.16.90; 365I.28.16.100; 365I.28.16.110; 365I.28.16.120;
365I.28.16.130; 365I.28.16.140; 365I.28.16.150; 365I.28.16.160;
365I.28.16.170; 365I.28.16.180; 365I.28.16.190; 365I.28.16.200;
365I.28.16.210; 365I.28.16.220; 365I.28.16.230; 365I.28.16.240;
365I.28.16.250; 365I.28.16.260; 365I.28.16.270; 365I.28.16.280;
365I.28.16.290; 365I.28.16.300; 365I.28.16.310; 365I.28.16.320;
365I.28.17.70; 365I.28.17.80; 365I.28.17.90; 365I.28.17.100; 365I.28.17.110;
365I.28.17.120; 365I.28.17.130; 365I.28.17.140; 365I.28.17.150;
365I.28.17.160; 365I.28.17.170; 365I.28.17.180; 365I.28.17.190;
365I.28.17.200; 365I.28.17.210; 365I.28.17.220; 365I.28.17.230;
365I.28.17.240; 365I.28.17.250; 365I.28.17.260; 365I.28.17.270;
365I.28.17.280; 365I.28.17.290; 365I.28.17.300; 365I.28.17.310;
365I.28.17.320; 365I.28.18.70; 365I.28.18.80; 365I.28.18.90; 365I.28.18.100;
365I.28.18.110; 365I.28.18.120; 365I.28.18.130; 365I.28.18.140;
365I.28.18.150; 365I.28.18.160; 365I.28.18.170; 365I.28.18.180;
365I.28.18.190; 365I.28.18.200; 365I.28.18.210; 365I.28.18.220;
365I.28.18.230; 365I.28.18.240; 365I.28.18.250; 365I.28.18.260;
365I.28.18.270; 365I.28.18.280; 365I.28.18.290; 365I.28.18.300;
365I.28.18.310; 365I.28.18.320; 365I.28.19.70; 365I.28.19.80; 365I.28.19.90;

MAR



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

365I.28.19.100; 365I.28.19.110; 365I.28.19.120; 365I.28.19.130;
365I.28.19.140; 365I.28.19.150; 365I.28.19.160; 365I.28.19.170;
365I.28.19.180; 365I.28.19.190; 365I.28.19.200; 365I.28.19.210;
365I.28.19.220; 365I.28.19.230; 365I.28.19.240; 365I.28.19.250;
365I.28.19.260; 365I.28.19.270; 365I.28.19.280; 365I.28.19.290;
365I.28.19.300; 365I.28.19.310; 365I.28.19.320; 365I.32.9.70; 365I.32.9.80;
365I.32.9.90; 365I.32.9.100; 365I.32.9.110; 365I.32.9.120; 365I.32.9.130;
365I.32.9.140; 365I.32.9.150; 365I.32.9.160; 365I.32.9.170; 365I.32.9.180;
365I.32.9.190; 365I.32.9.200; 365I.32.10.70; 365I.32.10.80; 365I.32.10.90;
365I.32.10.100; 365I.32.10.110; 365I.32.10.120; 365I.32.10.130;
365I.32.10.140; 365I.32.10.150; 365I.32.10.160; 365I.32.10.170;
365I.32.10.180; 365I.32.10.190; 365I.32.10.200; 365I.32.10.210;
365I.32.10.220; 365I.32.10.230; 365I.32.10.240; 365I.32.10.250;
365I.32.10.260; 365I.32.10.270; 365I.32.10.280; 365I.32.11.70; 365I.32.11.80;
365I.32.11.90; 365I.32.11.100; 365I.32.11.110; 365I.32.11.120;
365I.32.11.130; 365I.32.11.140; 365I.32.11.150; 365I.32.11.160;
365I.32.11.170; 365I.32.11.180; 365I.32.11.190; 365I.32.11.200;
365I.32.11.210; 365I.32.11.220; 365I.32.11.230; 365I.32.11.240;
365I.32.11.250; 365I.32.11.260; 365I.32.11.270; 365I.32.11.280;

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

365I.32.11.290; 365I.32.11.300; 365I.32.11.310; 365I.32.11.320;
365I.32.12.70; 365I.32.12.80;365I.32.12.90; 365I.32.12.100;
365I.32.12.110;365I.32.12.120; 365I.32.12.130; 365I.32.12.140;
365I.32.12.150; 365I.32.12.160; 365I.32.12.170; 365I.32.12.180;
365I.32.12.190; 365I.32.12.200; 365I.32.12.210; 365I.32.12.220;
365I.32.12.230; 365I.32.12.240; 365I.32.12.250; 365I.32.12.260;
365I.32.12.270; 365I.32.12.280; 365I.32.12.290; 365I.32.12.300;
365I.32.12.310; 365I.32.12.320; 365I.32.13.70; 365I.32.13.80; 365I.32.13.90;
365I.32.13.100; 365I.32.13.110; 365I.32.13.120; 365I.32.13.130;
365I.32.13.140; 365I.32.13.150; 365I.32.13.160; 365I.32.13.170;
365I.32.13.180; 365I.32.13.190; 365I.32.13.200;
365I.32.13.210;365I.32.13.220; 365I.32.13.230; 365I.32.13.240;
365I.32.13.250; 365I.32.13.260; 365I.32.13.270; 365I.32.13.280;
365I.32.13.290; 365I.32.13.300; 365I.32.13.310; 365I.32.13.320;
365I.32.14.70; 365I.32.14.80; 365I.32.14.90; 365I.32.14.100; 365I.32.14.110;
365I.32.14.120; 365I.32.14.130; 365I.32.14.140; 365I.32.14.150;
365I.32.14.160; 365I.32.14.170; 365I.32.14.180; 365I.32.14.190;
365I.32.14.200; 365I.32.14.210; 365I.32.14.220; 365I.32.14.230;
365I.32.14.240; 365I.32.14.250; 365I.32.14.260; 365I.32.14.270;

WKS



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

365I.32.14.280; 365I.32.14.290; 365I.32.14.300;
365I.32.14.310;365I.32.14.320; 365I.32.15.70; 365I.32.15.80; 365I.32.15.90;
365I.32.15.100; 365I.32.15.110; 365I.32.15.120; 365I.32.15.130;
365I.32.15.140; 365I.32.15.150; 365I.32.15.160; 365I.32.15.170;
365I.32.15.180; 365I.32.15.190; 365I.32.15.200; 365I.32.15.210;
365I.32.15.220; 365I.32.15.230; 365I.32.15.240; 365I.32.15.250;
365I.32.15.260; 365I.32.15.270; 365I.32.15.280; 365I.32.15.290;
365I.32.15.300; 365I.32.15.310; 365I.32.15.320; 365I.32.16.70; 365I.32.16.80;
365I.32.16.90; 365I.32.16.100; 365I.32.16.110; 365I.32.16.120;
365I.32.16.130; 365I.32.16.140; 365I.32.16.150;
365I.32.16.160;365I.32.16.170; 365I.32.16.180; 365I.32.16.190;
365I.32.16.200; 365I.32.16.210; 365I.32.16.220; 365I.32.16.230;
365I.32.16.240; 365I.32.16.250; 365I.32.16.260; 365I.32.16.270;
365I.32.16.280; 365I.32.16.290; 365I.32.16.300; 365I.32.16.310;
365I.32.16.320; 365I.32.17.70; 365I.32.17.80; 365I.32.17.90; 365I.32.17.100;
365I.32.17.110; 365I.32.17.120; 365I.32.17.130; 365I.32.17.140;
365I.32.17.150; 365I.32.17.160; 365I.32.17.170; 365I.32.17.180;
365I.32.17.190; 365I.32.17.200; 365I.32.17.210; 365I.32.17.220;
365I.32.17.230; 365I.32.17.240; 365I.32.17.250;365I.32.17.260;

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

365I.32.17.270; 365I.32.17.280; 365I.32.17.290; 365I.32.17.300;
365I.32.17.310; 365I.32.17.320; 365I.32.18.70; 365I.32.18.80; 365I.32.18.90;
365I.32.18.100; 365I.32.18.110; 365I.32.18.120; 365I.32.18.130;
365I.32.18.140; 365I.32.18.150; 365I.32.18.160; 365I.32.18.170;
365I.32.18.180; 365I.32.18.190; 365I.32.18.200; 365I.32.18.210;
365I.32.18.220; 365I.32.18.230; 365I.32.18.240; 365I.32.18.250;
365I.32.18.260; 365I.32.18.270; 365I.32.18.280; 365I.32.18.290;
365I.32.18.300; 365I.32.18.310; 365I.32.18.320; 365I.32.19.70; 365I.32.19.80;
365I.32.19.90; 365I.32.19.100; 365I.32.19.110; 365I.32.19.120;
365I.32.19.130; 365I.32.19.140; 365I.32.19.150; 365I.32.19.160;
365I.32.19.170; 365I.32.19.180; 365I.32.19.190; 365I.32.19.200;
365I.32.19.210; 365I.32.19.220; 365I.32.19.230; 365I.32.19.240;
365I.32.19.250; 365I.32.19.260; 365I.32.19.270; 365I.32.19.280;
365I.32.19.290; 365I.32.19.300; 365I.32.19.310; 365I.32.19.320; 365I.40.9.70;
365I.40.9.80; 365I.40.9.90; 365I.40.9.100; 365I.40.9.110; 365I.40.9.120;
365I.40.9.130; 365I.40.9.140; 365I.40.9.150; 365I.40.9.160; 365I.40.9.170;
365I.40.9.180; 365I.40.9.190; 365I.40.9.200; 365I.40.10.70; 365I.40.10.80;
365I.40.10.90; 365I.40.10.100; 365I.40.10.110; 365I.40.10.120;
365I.40.10.130; 365I.40.10.140; 365I.40.10.150; 365I.40.10.160;





Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

365I.40.10.170; 365I.40.10.180; 365I.40.10.190; 365I.40.10.200;
365I.40.10.210; 365I.40.10.220; 365I.40.10.230; 365I.40.10.240;
365I.40.10.250; 365I.40.10.260; 365I.40.10.270; 365I.40.10.280;
365I.40.11.70; 365I.40.11.80; 365I.40.11.90; 365I.40.11.100; 365I.40.11.110;
365I.40.11.120; 365I.40.11.130; 365I.40.11.140; 365I.40.11.150;
365I.40.11.160; 365I.40.11.170; 365I.40.11.180; 365I.40.11.190;
365I.40.11.200; 365I.40.11.210; 365I.40.11.220; 365I.40.11.230;
365I.40.11.240; 365I.40.11.250; 365I.40.11.260; 365I.40.11.270;
365I.40.11.280; 365I.40.11.290; 365I.40.11.300; 365I.40.11.310;
365I.40.11.320; 365I.40.12.70; 365I.40.12.80; 365I.40.12.90; 365I.40.12.100;
365I.40.12.110; 365I.40.12.120; 365I.40.12.130; 365I.40.12.140;
365I.40.12.150; 365I.40.12.160; 365I.40.12.170; 365I.40.12.180;
365I.40.12.190; 365I.40.12.200; 365I.40.12.210; 365I.40.12.220;
365I.40.12.230; 365I.40.12.240; 365I.40.12.250; 365I.40.12.260;
365I.40.12.270; 365I.40.12.280; 365I.40.12.290; 365I.40.12.300;
365I.40.12.310; 365I.40.12.320; 365I.40.13.70; 365I.40.13.80; 365I.40.13.90;
365I.40.13.100; 365I.40.13.110; 365I.40.13.120; 365I.40.13.130;
365I.40.13.140; 365I.40.13.150; 365I.40.13.160; 365I.40.13.170;
365I.40.13.180; 365I.40.13.190; 365I.40.13.200; 365I.40.13.210;

CMS

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

365I.40.13.220; 365I.40.13.230; 365I.40.13.240; 365I.40.13.250;
365I.40.13.260; 365I.40.13.270; 365I.40.13.280; 365I.40.13.290;
365I.40.13.300; 365I.40.13.310; 365I.40.13.320; 365I.40.14.70; 365I.40.14.80;
365I.40.14.90; 365I.40.14.100; 365I.40.14.110; 365I.40.14.120;
365I.40.14.130; 365I.40.14.140; 365I.40.14.150; 365I.40.14.160;
365I.40.14.170; 365I.40.14.180; 365I.40.14.190; 365I.40.14.200;
365I.40.14.210; 365I.40.14.220; 365I.40.14.230; 365I.40.14.240;
365I.40.14.250; 365I.40.14.260; 365I.40.14.270; 365I.40.14.280;
365I.40.14.290; 365I.40.14.300; 365I.40.14.310; 365I.40.14.320;
365I.40.15.70; 365I.40.15.80; 365I.40.15.90; 365I.40.15.100; 365I.40.15.110;
365I.40.15.120; 365I.40.15.130; 365I.40.15.140; 365I.40.15.150;
365I.40.15.160; 365I.40.15.170; 365I.40.15.180; 365I.40.15.190;
365I.40.15.200; 365I.40.15.210; 365I.40.15.220; 365I.40.15.230;
365I.40.15.240; 365I.40.15.250; 365I.40.15.260; 365I.40.15.270;
365I.40.15.280; 365I.40.15.290; 365I.40.15.300; 365I.40.15.310;
365I.40.15.320; 365I.40.16.70; 365I.40.16.80; 365I.40.16.90; 365I.40.16.100;
365I.40.16.110; 365I.40.16.120; 365I.40.16.130; 365I.40.16.140;
365I.40.16.150; 365I.40.16.160; 365I.40.16.170; 365I.40.16.180;
365I.40.16.190; 365I.40.16.200; 365I.40.16.210; 365I.40.16.220;

MAP



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

365I.40.16.230; 365I.40.16.240; 365I.40.16.250; 365I.40.16.260;
 365I.40.16.270; 365I.40.16.280; 365I.40.16.290; 365I.40.16.300;
 365I.40.16.310; 365I.40.16.320; 365I.40.17.70; 365I.40.17.80; 365I.40.17.90;
 365I.40.17.100; 365I.40.17.110; 365I.40.17.120; 365I.40.17.130;
 365I.40.17.140; 365I.40.17.150; 365I.40.17.160; 365I.40.17.170;
 365I.40.17.180; 365I.40.17.190; 365I.40.17.200; 365I.40.17.210;
 365I.40.17.220; 365I.40.17.230; 365I.40.17.240; 365I.40.17.250;
 365I.40.17.260; 365I.40.17.270; 365I.40.17.280; 365I.40.17.290;
 365I.40.17.300; 365I.40.17.310; 365I.40.17.320; 365I.40.18.70; 365I.40.18.80;
 365I.40.18.90; 365I.40.18.100; 365I.40.18.110; 365I.40.18.120;
 365I.40.18.130; 365I.40.18.140; 365I.40.18.150; 365I.40.18.160;
 365I.40.18.170; 365I.40.18.180; 365I.40.18.190; 365I.40.18.200;
 365I.40.18.210; 365I.40.18.220; 365I.40.18.230; 365I.40.18.240;
 365I.40.18.250; 365I.40.18.260; 365I.40.18.270; 365I.40.18.280;
 365I.40.18.290; 365I.40.18.300; 365I.40.18.310; 365I.40.18.320;
 365I.40.19.70; 365I.40.19.80; 365I.40.19.90; 365I.40.19.100; 365I.40.19.110;
 365I.40.19.120; 365I.40.19.130; 365I.40.19.140; 365I.40.19.150;
 365I.40.19.160; 365I.40.19.170; 365I.40.19.180; 365I.40.19.190;
 365I.40.19.200; 365I.40.19.210; 365I.40.19.220; 365I.40.19.230;

WAB

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

365I.40.19.240; 365I.40.19.250; 365I.40.19.260;
365I.40.19.270;365I.40.19.280; 365I.40.19.290; 365I.40.19.300;
365I.40.19.310; 365I.40.19.320

ASTA MODULAR LOBULAR: 364.I.26; 364.I.28; 364.I.32

COMPONENTE PROXIMAL DE FEMUR LOBULAR: 385.1.26.D;

385.1.26.E; 385.2.28.D; 385.2.28.E; 385.2.32.D; 385.2.32.E; 385.3.28.D;
385.3.28.E; 385.3.32.D; 385.3.32.E; 385.2.40.D; 385.2.40.E; 385.3.40.D;
385.3.40.E

COMPONENTE DISTAL DE FEMUR Y RODILLA ARTICULADA LOBULAR:

373.IT1.26; 373.IT1.28; 373.IT2.26; 373.IT2.28; 373.IT2.32; 373.IT3.28;
373.IT3.32

COMPONENTE PROXIMAL DE TIBIA Y RODILLA ARTICULADA

LOBULAR: 371.T1.20.9.80; 371.T1.20.9.90; 371.T1.20.9.100;
371.T1.20.9.110; 371.T1.20.9.120; 371.T1.20.9.130;371.T1.20.9.140;
371.T1.20.9.150; 371.T1.20.10.80; 371.T1.20.10.90; 371.T1.20.10.100;
371.T1.20.10.110; 371.T1.20.10.120; 371.T1.20.10.130;371.T1.20.10.140;
371.T1.20.10.150; 371.T1.20.10.160; 371.T1.20.10.170;371.T1.20.10.180;
371.T1.20.10.190; 371.T1.20.10.200;371.T1.20.11.80; 371.T1.20.11.90;
371.T1.20.11.100; 371.T1.20.11.110; 371.T1.20.11.120;371.T1.20.11.130;





Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

371.T1.20.11.140; 371.T1.20.11.150; 371.T1.20.11.160;371.T1.20.11.170;
371.T1.20.11.180; 371.T1.20.11.190; 371.T1.20.11.200; 371.T1.20.12.80;
371.T1.20.12.90; 371.T1.20.12.100; 371.T1.20.12.110; 371.T1.20.12.120;
371.T1.20.12.130; 371.T1.20.12.140; 371.T1.20.12.150;371.T1.20.12.160;
371.T1.20.12.170; 371.T1.20.12.180; 371.T1.20.12.190;
371.T1.20.12.200;371.T1.20.13.80; 371.T1.20.13.90; 371.T1.20.13.100;
371.T1.20.13.110; 371.T1.20.13.120;371.T1.20.13.130; 371.T1.20.13.140;
371.T1.20.13.150;371.T1.20.13.160; 371.T1.20.13.170; 371.T1.20.13.180;
371.T1.20.13.190; 371.T1.20.13.200; 371.T1.20.14.80;371.T1.20.14.90;
371.T1.20.14.100; 371.T1.20.14.110; 371.T1.20.14.120;371.T1.20.14.130;
371.T1.20.14.140; 371.T1.20.14.150; 371.T1.20.14.160;371.T1.20.14.170;
371.T1.20.14.180; 371.T1.20.14.190; 371.T1.20.14.200; 371.T1.20.15.80;
371.T1.20.15.90; 371.T1.20.15.100; 371.T1.20.15.110; 371.T1.20.15.120;
371.T1.20.15.130; 371.T1.20.15.140; 371.T1.20.15.150; 371.T1.20.15.160;
371.T1.20.15.170; 371.T1.20.15.180;371.T1.20.15.190;
371.T1.20.15.200; 371.T1.20.16.80; 371.T1.20.16.90; 371.T1.20.16.100;
371.T1.20.16.110; 371.T1.20.16.120; 371.T1.20.16.130;371.T1.20.16.140;
371.T1.20.16.150; 371.T1.20.16.160; 371.T1.20.16.170;371.T1.20.16.180;
371.T1.20.16.190; 371.T1.20.16.200; 371.T2.20.9.80; 371.T2.20.9.90;

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

371.T2.20.9.100; 371.T2.20.9.110; 371.T2.20.9.120; 371.T2.20.9.130;
371.T2.20.9.140; 371.T2.20.9.150; 371.T2.20.10.80; 371.T2.20.10.90;
371.T2.20.10.100; 371.T2.20.10.110; 371.T2.20.10.120;371.T2.20.10.130;
371.T2.20.10.140; 371.T2.20.10.150;371.T2.20.10.160; 371.T2.20.10.170;
371.T2.20.10.180; 371.T2.20.10.190;371.T2.20.10.200; 371.T2.20.11.80;
371.T2.20.11.90; 371.T2.20.11.100; 371.T2.20.11.110; 371.T2.20.11.120;
371.T2.20.11.130; 371.T2.20.11.140; 371.T2.20.11.150;371.T2.20.11.160;
371.T2.20.11.170; 371.T2.20.11.180; 371.T2.20.11.190;371.T2.20.11.200;
371.T2.20.12.80; 371.T2.20.12.90; 371.T2.20.12.100; 371.T2.20.12.110;
371.T2.20.12.120; 371.T2.20.12.130; 371.T2.20.12.140;371.T2.20.12.150;
371.T2.20.12.160; 371.T2.20.12.170; 371.T2.20.12.180;371.T2.20.12.190;
371.T2.20.12.200; 371.T2.20.13.80; 371.T2.20.13.90; 371.T2.20.13.100;
371.T2.20.13.110; 371.T2.20.13.120;371.T2.20.13.130; 371.T2.20.13.140;
371.T2.20.13.150; 371.T2.20.13.160;371.T2.20.13.170; 371.T2.20.13.180;
371.T2.20.13.190; 371.T2.20.13.200; 371.T2.20.14.80; 371.T2.20.14.90;
371.T2.20.14.100; 371.T2.20.14.110; 371.T2.20.14.120;371.T2.20.14.130;
371.T2.20.14.140; 371.T2.20.14.150; 371.T2.20.14.160;371.T2.20.14.170;
371.T2.20.14.180;371.T2.20.14.190; 371.T2.20.14.200; 371.T2.20.15.80;
371.T2.20.15.90; 371.T2.20.15.100; 371.T2.20.15.110; 371.T2.20.15.120;

WAB



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

371.T2.20.15.130; 371.T2.20.15.140; 371.T2.20.15.150;371.T2.20.15.160;
371.T2.20.15.170; 371.T2.20.15.180; 371.T2.20.15.190;371.T2.20.15.200;
371.T2.20.16.80; 371.T2.20.16.90; 371.T2.20.16.100; 371.T2.20.16.110;
371.T2.20.16.120;371.T2.20.16.130; 371.T2.20.16.140; 371.T2.20.16.150;
371.T2.20.16.160; 371.T2.20.16.170; 371.T2.20.16.180;371.T2.20.16.190;
371.T2.20.16.200; 371.T3.20.9.80; 371.T3.20.9.90; 371.T3.20.9.100;
371.T3.20.9.110; 371.T3.20.9.120; 371.T3.20.9.130; 371.T3.20.9.140;
371.T3.20.9.150; 371.T3.20.10.80; 371.T3.20.10.90; 371.T3.20.10.100;
371.T3.20.10.110; 371.T3.20.10.120; 371.T3.20.10.130;371.T3.20.10.140;
371.T3.20.10.150; 371.T3.20.10.160; 371.T3.20.10.170;371.T3.20.10.180;
371.T3.20.10.190; 371.T3.20.10.200; 371.T3.20.11.80; 371.T3.20.11.90;
371.T3.20.11.100; 371.T3.20.11.110; 371.T3.20.11.120;371.T3.20.11.130;
371.T3.20.11.140; 371.T3.20.11.150; 371.T3.20.11.160;371.T3.20.11.170;
371.T3.20.11.180; 371.T3.20.11.190; 371.T3.20.11.200; 371.T3.20.12.80;
371.T3.20.12.90; 371.T3.20.12.100; 371.T3.20.12.110; 371.T3.20.12.120;
371.T3.20.12.130; 371.T3.20.12.140; 371.T3.20.12.150;371.T3.20.12.160;
371.T3.20.12.170; 371.T3.20.12.180; 371.T3.20.12.190;371.T3.20.12.200;
371.T3.20.13.80; 371.T3.20.13.90; 371.T3.20.13.100; 371.T3.20.13.110;
371.T3.20.13.120; 371.T3.20.13.130; 371.T3.20.13.140;371.T3.20.13.150;

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

371.T3.20.13.160; 371.T3.20.13.170; 371.T3.20.13.180;371.T3.20.13.190;
371.T3.20.13.200; 371.T3.20.14.80; 371.T3.20.14.90; 371.T3.20.14.100;
371.T3.20.14.110; 371.T3.20.14.120;371.T3.20.14.130; 371.T3.20.14.140;
371.T3.20.14.150; 371.T3.20.14.160;371.T3.20.14.170; 371.T3.20.14.180;
371.T3.20.14.190; 371.T3.20.14.200; 371.T3.20.15.80; 371.T3.20.15.90;
371.T3.20.15.100; 371.T3.20.15.110; 371.T3.20.15.120;371.T3.20.15.130;
371.T3.20.15.140; 371.T3.20.15.150; 371.T3.20.15.160;371.T3.20.15.170;
371.T3.20.15.180; 371.T3.20.15.190; 371.T3.20.15.200; 371.T3.20.16.80;
371.T3.20.16.90; 371.T3.20.16.100; 371.T3.20.16.110; 371.T3.20.16.120;
371.T3.20.16.130; 371.T3.20.16.140; 371.T3.20.16.150;371.T3.20.16.160;
371.T3.20.16.170; 371.T3.20.16.180; 371.T3.20.16.190;371.T3.20.16.200;
371.T1.30.9.80; 371.T1.30.9.90; 371.T1.30.9.100; 371.T1.30.9.110;
371.T1.30.9.120; 371.T1.30.9.130; 371.T1.30.9.140; 371.T1.30.9.150;
371.T1.30.10.80; 371.T1.30.10.90; 371.T1.30.10.100; 371.T1.30.10.110;
371.T1.30.10.120; 371.T1.30.10.130; 371.T1.30.10.140;371.T1.30.10.150;
371.T1.30.10.160; 371.T1.30.10.170; 371.T1.30.10.180;371.T1.30.10.190;
371.T1.30.10.200; 371.T1.30.11.80; 371.T1.30.11.90; 371.T1.30.11.100;
371.T1.30.11.110; 371.T1.30.11.120; 371.T1.30.11.130;371.T1.30.11.140;
371.T1.30.11.150; 371.T1.30.11.160;371.T1.30.11.170; 371.T1.30.11.180;





371.T1.30.11.190; 371.T1.30.11.200; 371.T1.30.12.80; 371.T1.30.12.90;
371.T1.30.12.100;371.T1.30.12.110;371.T1.30.12.120;371.T1.30.12.130;
371.T1.30.12.140; 371.T1.30.12.150; 371.T1.30.12.160;371.T1.30.12.170;
371.T1.30.12.180; 371.T1.30.12.190; 371.T1.30.12.200; 371.T1.30.13.80;
371.T1.30.13.90; 371.T1.30.13.100; 371.T1.30.13.110; 371.T1.30.13.120;
371.T1.30.13.130;371.T1.30.13.140; 371.T1.30.13.150;371.T1.30.13.160;
371.T1.30.13.170; 371.T1.30.13.180; 371.T1.30.13.190;371.T1.30.13.200;
371.T1.30.14.80; 371.T1.30.14.90; 371.T1.30.14.100; 371.T1.30.14.110;
371.T1.30.14.120; 371.T1.30.14.130; 371.T1.30.14.140;371.T1.30.14.150;
371.T1.30.14.160; 371.T1.30.14.170; 371.T1.30.14.180;371.T1.30.14.190;
371.T1.30.14.200; 371.T1.30.15.80; 371.T1.30.15.90; 371.T1.30.15.100;
371.T1.30.15.110; 371.T1.30.15.120; 371.T1.30.15.130;371.T1.30.15.140;
371.T1.30.15.150; 371.T1.30.15.160; 371.T1.30.15.170;371.T1.30.15.180;
371.T1.30.15.190; 371.T1.30.15.200; 371.T1.30.16.80; 371.T1.30.16.90;
371.T1.30.16.100; 371.T1.30.16.110; 371.T1.30.16.120;371.T1.30.16.130;
371.T1.30.16.140; 371.T1.30.16.150; 371.T1.30.16.160;371.T1.30.16.170;
371.T1.30.16.180; 371.T1.30.16.190; 371.T1.30.16.200; 371.T2.30.9.80;
371.T2.30.9.90; 371.T2.30.9.100; 371.T2.30.9.110; 371.T2.30.9.120;
371.T2.30.9.130; 371.T2.30.9.140; 371.T2.30.9.150; 371.T2.30.10.80;

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

371.T2.30.10.90; 371.T2.30.10.100; 371.T2.30.10.110; 371.T2.30.10.120;
371.T2.30.10.130; 371.T2.30.10.140; 371.T2.30.10.150; 371.T2.30.10.160;
371.T2.30.10.170; 371.T2.30.10.180; 371.T2.30.10.190; 371.T2.30.10.200;
371.T2.30.11.80; 371.T2.30.11.90; 371.T2.30.11.100; 371.T2.30.11.110;
371.T2.30.11.120; 371.T2.30.11.130; 371.T2.30.11.140; 371.T2.30.11.150;
371.T2.30.11.160; 371.T2.30.11.170; 371.T2.30.11.180; 371.T2.30.11.190;
371.T2.30.11.200; 371.T2.30.12.80; 371.T2.30.12.90; 371.T2.30.12.100;
371.T2.30.12.110; 371.T2.30.12.120; 371.T2.30.12.130; 371.T2.30.12.140;
371.T2.30.12.150; 371.T2.30.12.160; 371.T2.30.12.170; 371.T2.30.12.180;
371.T2.30.12.190; 371.T2.30.12.200; 371.T2.30.13.80; 371.T2.30.13.90;
371.T2.30.13.100; 371.T2.30.13.110; 371.T2.30.13.120; 371.T2.30.13.130;
371.T2.30.13.140; 371.T2.30.13.150; 371.T2.30.13.160; 371.T2.30.13.170;
371.T2.30.13.180; 371.T2.30.13.190; 371.T2.30.13.200; 371.T2.30.14.80;
371.T2.30.14.90; 371.T2.30.14.100; 371.T2.30.14.110; 371.T2.30.14.120;
371.T2.30.14.130; 371.T2.30.14.140; 371.T2.30.14.150; 371.T2.30.14.160;
371.T2.30.14.170; 371.T2.30.14.180; 371.T2.30.14.190; 371.T2.30.14.200;
371.T2.30.15.80; 371.T2.30.15.90; 371.T2.30.15.100; 371.T2.30.15.110;
371.T2.30.15.120; 371.T2.30.15.130; 371.T2.30.15.140; 371.T2.30.15.150;
371.T2.30.15.160; 371.T2.30.15.170; 371.T2.30.15.180; 371.T2.30.15.190;





Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

371.T2.30.15.200; 371.T2.30.16.80; 371.T2.30.16.90; 371.T2.30.16.100;
371.T2.30.16.110; 371.T2.30.16.120; 371.T2.30.16.130; 371.T2.30.16.140;
371.T2.30.16.150; 371.T2.30.16.160; 371.T2.30.16.170; 371.T2.30.16.180;
371.T2.30.16.190; 371.T2.30.16.200; 371.T3.30.9.80; 371.T3.30.9.90;
371.T3.30.9.100; 371.T3.30.9.110; 371.T3.30.9.120; 371.T3.30.9.130;
371.T3.30.9.140; 371.T3.30.9.150; 371.T3.30.10.80; 371.T3.30.10.90;
371.T3.30.10.100; 371.T3.30.10.110; 371.T3.30.10.120; 371.T3.30.10.130;
371.T3.30.10.140; 371.T3.30.10.150; 371.T3.30.10.160; 371.T3.30.10.170;
371.T3.30.10.180; 371.T3.30.10.190; 371.T3.30.10.200; 371.T3.30.11.80;
371.T3.30.11.90; 371.T3.30.11.100; 371.T3.30.11.110; 371.T3.30.11.120;
371.T3.30.11.130; 371.T3.30.11.140; 371.T3.30.11.150; 371.T3.30.11.160;
371.T3.30.11.170; 371.T3.30.11.180; 371.T3.30.11.190; 371.T3.30.11.200;
371.T3.30.12.80; 371.T3.30.12.90; 371.T3.30.12.100; 371.T3.30.12.110;
371.T3.30.12.120; 371.T3.30.12.130; 371.T3.30.12.140; 371.T3.30.12.150;
371.T3.30.12.160; 371.T3.30.12.170; 371.T3.30.12.180; 371.T3.30.12.190;
371.T3.30.12.200; 371.T3.30.13.80; 371.T3.30.13.90; 371.T3.30.13.100;
371.T3.30.13.110; 371.T3.30.13.120; 371.T3.30.13.130; 371.T3.30.13.140;
371.T3.30.13.150; 371.T3.30.13.160; 371.T3.30.13.170; 371.T3.30.13.180;
371.T3.30.13.190; 371.T3.30.13.200; 371.T3.30.14.80; 371.T3.30.14.90;

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

371.T3.30.14.100; 371.T3.30.14.110; 371.T3.30.14.120;
371.T3.30.14.130;371.T3.30.14.140; 371.T3.30.14.150;
371.T3.30.14.160;371.T3.30.14.170; 371.T3.30.14.180;371.T3.30.14.190;
371.T3.30.14.200;371.T3.30.15.80; 371.T3.30.15.90; 371.T3.30.15.100;
371.T3.30.15.110; 371.T3.30.15.120; 371.T3.30.15.130;371.T3.30.15.140;
371.T3.30.15.150; 371.T3.30.15.160; 371.T3.30.15.170;371.T3.30.15.180;
371.T3.30.15.190;371.T3.30.15.200; 371.T3.30.16.80; 371.T3.30.16.90;
371.T3.30.16.100; 371.T3.30.16.110; 371.T3.30.16.120;371.T3.30.16.130;
371.T3.30.16.140;371.T3.30.16.150; 371.T3.30.16.160; 371.T3.30.16.170;
371.T3.30.16.180; 371.T3.30.16.190; 371.T3.30.16.200; 371.T1.40.9.80;
371.T1.40.9.90; 371.T1.40.9.100; 371.T1.40.9.110; 371.T1.40.9.120;
371.T1.40.9.130; 371.T1.40.9.140; 371.T1.40.9.150; 371.T1.40.10.80;
371.T1.40.10.90;371.T1.40.10.100;371.T1.40.10.110;371.T1.40.10.120;
371.T1.40.10.130; 371.T1.40.10.140; 371.T1.40.10.150; 371.T1.40.10.160;
371.T1.40.10.170; 371.T1.40.10.180; 371.T1.40.10.190; 371.T1.40.10.200;
371.T1.40.11.80; 371.T1.40.11.90; 371.T1.40.11.100; 371.T1.40.11.110;
371.T1.40.11.120; 371.T1.40.11.130;371.T1.40.11.140; 371.T1.40.11.150;
371.T1.40.11.160; 371.T1.40.11.170; 371.T1.40.11.180; 371.T1.40.11.190;
371.T1.40.11.200; 371.T1.40.12.80; 371.T1.40.12.90; 371.T1.40.12.100;





Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

371.T1.40.12.110; 371.T1.40.12.120; 371.T1.40.12.130; 371.T1.40.12.140;
 371.T1.40.12.150; 371.T1.40.12.160; 371.T1.40.12.170; 371.T1.40.12.180;
 371.T1.40.12.190; 371.T1.40.12.200; 371.T1.40.13.80; 371.T1.40.13.90;
 371.T1.40.13.100; 371.T1.40.13.110; 371.T1.40.13.120; 371.T1.40.13.130;
 371.T1.40.13.140; 371.T1.40.13.150; 371.T1.40.13.160; 371.T1.40.13.170;
 371.T1.40.13.180; 371.T1.40.13.190; 371.T1.40.13.200; 371.T1.40.14.80;
 371.T1.40.14.90; 371.T1.40.14.100; 371.T1.40.14.110; 371.T1.40.14.120;
 371.T1.40.14.130; 371.T1.40.14.140; 371.T1.40.14.150; 371.T1.40.14.160;
 371.T1.40.14.170; 371.T1.40.14.180; 371.T1.40.14.190; 371.T1.40.14.200;
 371.T1.40.15.80; 371.T1.40.15.90; 371.T1.40.15.100; 371.T1.40.15.110;
 371.T1.40.15.120; 371.T1.40.15.130; 371.T1.40.15.140; 371.T1.40.15.150;
 371.T1.40.15.160; 371.T1.40.15.170; 371.T1.40.15.180; 371.T1.40.15.190;
 371.T1.40.15.200; 371.T1.40.16.80; 371.T1.40.16.90; 371.T1.40.16.100;
 371.T1.40.16.110; 371.T1.40.16.120; 371.T1.40.16.130; 371.T1.40.16.140;
 371.T1.40.16.150; 371.T1.40.16.160; 371.T1.40.16.170; 371.T1.40.16.180;
 371.T1.40.16.190; 371.T1.40.16.200; 371.T2.40.9.80; 371.T2.40.9.90;
 371.T2.40.9.100; 371.T2.40.9.110; 371.T2.40.9.120; 371.T2.40.9.130;
 371.T2.40.9.140; 371.T2.40.9.150; 371.T2.40.10.80; 371.T2.40.10.90;
 371.T2.40.10.100; 371.T2.40.10.110; 371.T2.40.10.120; 371.T2.40.10.130;

WAS

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

371.T2.40.10.140;371.T2.40.10.150; 371.T2.40.10.160; 371.T2.40.10.170;
371.T2.40.10.180; 371.T2.40.10.190;371.T2.40.10.200; 371.T2.40.11.80;
371.T2.40.11.90; 371.T2.40.11.100; 371.T2.40.11.110; 371.T2.40.11.120;
371.T2.40.11.130; 371.T2.40.11.140;371.T2.40.11.150;
371.T2.40.11.160;371.T2.40.11.170; 371.T2.40.11.180; 371.T2.40.11.190;
371.T2.40.11.200; 371.T2.40.12.80; 371.T2.40.12.90; 371.T2.40.12.100;
371.T2.40.12.110; 371.T2.40.12.120; 371.T2.40.12.130;371.T2.40.12.140;
371.T2.40.12.150; 371.T2.40.12.160; 371.T2.40.12.170;371.T2.40.12.180;
371.T2.40.12.190; 371.T2.40.12.200; 371.T2.40.13.80; 371.T2.40.13.90;
371.T2.40.13.100; 371.T2.40.13.110;371.T2.40.13.120; 371.T2.40.13.130;
371.T2.40.13.140; 371.T2.40.13.150; 371.T2.40.13.160;371.T2.40.13.170;
371.T2.40.13.180; 371.T2.40.13.190; 371.T2.40.13.200; 371.T2.40.14.80;
371.T2.40.14.90; 371.T2.40.14.100; 371.T2.40.14.110; 371.T2.40.14.120;
371.T2.40.14.130; 371.T2.40.14.140; 371.T2.40.14.150;371.T2.40.14.160;
371.T2.40.14.170; 371.T2.40.14.180;371.T2.40.14.190; 371.T2.40.14.200;
371.T2.40.15.80; 371.T2.40.15.90;371.T2.40.15.100; 371.T2.40.15.110;
371.T2.40.15.120; 371.T2.40.15.130; 371.T2.40.15.140;371.T2.40.15.150;
371.T2.40.15.160; 371.T2.40.15.170; 371.T2.40.15.180;371.T2.40.15.190;
371.T2.40.15.200; 371.T2.40.16.80; 371.T2.40.16.90;371.T2.40.16.100;

WAB



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

371.T2.40.16.110;371.T2.40.16.120; 371.T2.40.16.130; 371.T2.40.16.140;
 371.T2.40.16.150; 371.T2.40.16.160;371.T2.40.16.170; 371.T2.40.16.180;
 371.T2.40.16.190; 371.T2.40.16.200;371.T3.40.9.80; 371.T3.40.9.90;
 371.T3.40.9.100; 371.T3.40.9.110; 371.T3.40.9.120; 371.T3.40.9.130;
 371.T3.40.9.140; 371.T3.40.9.150; 371.T3.40.10.80; 371.T3.40.10.90;
 371.T3.40.10.100; 371.T3.40.10.110;371.T3.40.10.120; 371.T3.40.10.130;
 371.T3.40.10.140; 371.T3.40.10.150;371.T3.40.10.160; 371.T3.40.10.170;
 371.T3.40.10.180; 371.T3.40.10.190; 371.T3.40.10.200; 371.T3.40.11.80;
 371.T3.40.11.90; 371.T3.40.11.100; 371.T3.40.11.110; 371.T3.40.11.120;
 371.T3.40.11.130; 371.T3.40.11.140; 371.T3.40.11.150;371.T3.40.11.160;
 371.T3.40.11.170; 371.T3.40.11.180;371.T3.40.11.190; 371.T3.40.11.200;
 371.T3.40.12.80; 371.T3.40.12.90; 371.T3.40.12.100; 371.T3.40.12.110;
 371.T3.40.12.120; 371.T3.40.12.130;371.T3.40.12.140; 371.T3.40.12.150;
 371.T3.40.12.160; 371.T3.40.12.170; 371.T3.40.12.180;371.T3.40.12.190;
 371.T3.40.12.200; 371.T3.40.13.80; 371.T3.40.13.90; 371.T3.40.13.100;
 371.T3.40.13.110; 371.T3.40.13.120; 371.T3.40.13.130;371.T3.40.13.140;
 371.T3.40.13.150; 371.T3.40.13.160; 371.T3.40.13.170;371.T3.40.13.180;
 371.T3.40.13.190; 371.T3.40.13.200; 371.T3.40.14.80; 371.T3.40.14.90;
 371.T3.40.14.100; 371.T3.40.14.110;371.T3.40.14.120; 371.T3.40.14.130;

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

371.T3.40.14.140; 371.T3.40.14.150;371.T3.40.14.160; 371.T3.40.14.170;
371.T3.40.14.180; 371.T3.40.14.190; 371.T3.40.14.200; 371.T3.40.15.80;
371.T3.40.15.90; 371.T3.40.15.100; 371.T3.40.15.110; 371.T3.40.15.120;
371.T3.40.15.130;371.T3.40.15.140; 371.T3.40.15.150; 371.T3.40.15.160;
371.T3.40.15.170;371.T3.40.15.180; 371.T3.40.15.190; 371.T3.40.15.200;
371.T3.40.16.80; 371.T3.40.16.90; 371.T3.40.16.100; 371.T3.40.16.110;
371.T3.40.16.120; 371.T3.40.16.130;371.T3.40.16.140; 371.T3.40.16.150;
371.T3.40.16.160;371.T3.40.16.170;371.T3.40.16.180;371.T3.40.16.190;371.T3
.40.16.200

COMPONENTE PROXIMAL DE TIBIA Y RODILLA ARTICULADA -

RESSECCIÓN MEDIA DE TIBIA PROXIMAL: 383.1; 383.2; 383.3

COMPONENTE ARTICULAR: 361.BR.26.30.5D; 361. BR .26.40.5D;

361.BR.26.50.5D; 361.BR.28.30.5D; 361.BR .28.40.5D; 361.BR .28.50.5D;

361.BR.32.30.5D; 361.BR.32.40.5D; 361.BR.32.50.5D; 361.BR.26.30.5E;

361.BR.26.40.5E; 361. BR.26.50.5E; 361.BR.28.30.5E; 361.BR .28.40.5E;

361.BR.28.50.5E; 361.BR.32.30.5E; 361.BR.32.40.5E; 361.BR.32.50.5E;

361.BR.26.30.10D; 361.BR.26.40.10D; 361.BR.26.50.10D; 361.BR.28.30.10D;

361.BR.28.40.10D;361.BR.28.50.10D;361.BR.32.30.10; 361.BR.32.40.10D;

361.BR.32.50.10D; 361.BR.26.30.10E; 361.BR.26.40.10E;361.BR.26.50.10E;

WAB



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

361.BR.28.30.10E; 361.BR.28.40.10E; 361.BR.28.50.10E; 361.BR.32.30.10E;
361.BR.32.40.10E; 361.BR.32.50.10E; 361.BR.26.30.15D; 361.BR.26.40.15D;
361.BR.26.50.15D; 361.BR.28.30.15D; 361.BR.28.40.15D; 361.BR.28.50.15D;
361.BR.32.30.15D; 361.BR.32.40.15D; 361.BR.32.50.15D; 361.BR.26.30.15E;
361.BR.26.40.15E; 361.BR.26.50.15E; 361.BR.28.30.15E; 361.BR.28.40.15E;
361.BR.28.50.15E; 361.BR.32.30.15E; 361.BR.32.40.15E; 361.BR.32.50.15E;
361.BR.26.30.20D; 361.BR.26.40.20D; 361.BR.26.50.20D; 361.BR.28.30.20D;
361.BR.28.40.20D; 361.BR.28.50.20D; 361.BR.32.30.20D; 361.BR.32.40.20D;
361.BR.32.50.20D; 361.BR.26.30.20E; 361.BR.26.40.20E; 361.BR.26.50.20E;
361.BR.28.30.20E; 361.BR.28.40.20E; 361.BR.28.50.20E; 361.BR.32.30.20E;
361.BR.32.40.20E; 361.BR.32.50.20E

MODULO INTERCAMBIABLE PARA ALINEAMIENTO AXIAL:

361.BF.26.35; 361.BF.26.50; 361.BF.28.35; 361.BF.28.50; 361.BF.32.35;
361.BF.32.50

CONECTOR INTERCAMBIABLE DIAFISARIO: 361.BM.26.30;

361.BM.26.40; 361.BM.28.30; 361.BM.28.40; 361.BM.32.30; 361.BM.32.40

MODULO INTERCAMBIABLE DÍAFISARIO: 361.BH.26.30; 361.BH.26.40;

361.BH.26.50; 361.BH.28.30; 361.BH.28.40; 361.BH.28.50; 361.BH.32.30;

361.BH.32.40; 361.BH.32.50

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

MODULO INTERCAMBIABLE HIBRIDO: 361.BEM.26.40; 361.BEM.26.50;

361.BEM.26.60; 361.BEM.28.40; 361.BEM.28.50; 361.BEM.28.60;

361.BEM.32.40; 361.BEM.32.50; 361.BEM.32.60

CONECTOR EXPANSIVO MACHO: 361.BEF.26.45; 361.BEF.26.55;

361.BEF.26.65; 361.BEF.28.45; 361.BEF.28.55; 361.BEF.28.65;

361.BEF.32.45; 361.BEF.32.55; 361.BEF.32.65

CONECTOR EXPANSIVO HEMBRA: 361.M16.26.20; 361.M16.26.30;

361.M16.26.40; 361.M16.28.20; 361.M16.28.30; 361.M16.28.40;

361.M16.32.20; 361.M16.32.30; 361.M16.32.40

EXPANSOR: 361.ESP.26.2; 361.ESP.26.5; 361.ESP.26.7; 361.ESP.26.10;

361.ESP.26.12; 361.ESP.26.15; 361.ESP.26.17; 361.ESP.26.20; 361.ESP.28.2;

361.ESP.28.5; 361.ESP.28.7; 361.ESP.28.10;

361.ESP.28.12; 361.ESP.28.15; 361.ESP.28.17; 361.ESP.28.20;

361.ESP.32.2; 361.ESP.32.5; 361.ESP.32.7; 361.ESP.32.10;

361.ESP.32.12; 361.ESP.32.15; 361.ESP.32.17; 361.ESP.32.20

ESPACIADOR: 361.B.26.30; 361.B.26.40; 361.B.26.50; 361.B.26.60;

361.B.26.70; 361.B.26.80; 361.B.26.90; 361.B.26.100; 361.B.26.110;

361.B.26.120; 361.B.26.130; 361.B.26.140; 361.B.26.150; 361.B.26.160;

361.B.26.170; 361.B.26.180; 361.B.26.190; 361.B.26.200; 361.B.28.30;





Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

361.B.28.40; 361.B.28.50; 361.B.28.60; 361.B.28.70; 361.B.28.80; 361.B.28.90;
 361.B.28.100; 361.B.28.110; 361.B.28.120; 361.B.28.130; 361.B.28.140;
 361.B.28.150; 361.B.28.160; 361.B.28.170; 361.B.28.180; 361.B.28.190;
 361.B.28.200; 361.B.32.30; 361.B.32.40; 361.B.32.50; 361.B.32.60;
 361.B.32.70; 361.B.32.80; 361.B.32.90; 361.B.32.100; 361.B.32.110;
 361.B.32.120; 361.B.32.130; 361.B.32.140; 361.B.32.150; 361.B.32.160;
 361.B.32.170; 361.B.32.180; 361.B.32.190; 361.B.32.200

MODULO INTERCAMBIABLE: 365.26.9.70;
 365.26.9.80; 365.26.9.90; 365.26.9.100; 365.26.9.110; 365.26.9.120;
 365.26.9.130; 365.26.9.140; 365.26.9.150; 365.26.9.160; 365.26.9.170;
 365.26.9.180; 365.26.9.190; 365.26.9.200; 365.26.10.70; 365.26.10.80;
 365.26.10.90; 365.26.10.100; 365.26.10.110; 365.26.10.120; 365.26.10.130;
 365.26.10.140; 365.26.10.150; 365.26.10.160; 365.26.10.170; 365.26.10.180;
 365.26.10.190; 365.26.10.200; 365.26.10.210; 365.26.10.220; 365.26.10.230;
 365.26.10.240; 365.26.10.250; 365.26.10.260; 365.26.10.270; 365.26.10.280;
 365.26.11.70; 365.26.11.80; 365.26.11.90; 365.26.11.100; 365.26.11.110;
 365.26.11.120; 365.26.11.130; 365.26.11.140; 365.26.11.150; 365.26.11.160;
 365.26.11.170; 365.26.11.180; 365.26.11.190; 365.26.11.200; 365.26.11.210;
 365.26.11.220; 365.26.11.230; 365.26.11.240; 365.26.11.250; 365.26.11.260;

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central	Sede Alsina	Sede INAME	Sede INAL	Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869, CABA	Alsina 665/671, CABA	Av. Caseros 2161, CABA	Estados Unidos 25, CABA	Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Remedios de Escalada de San Martín 1909, Mendoza Prov. de Mendoza	Deleg. Córdoba Obispo Trejo 635, Córdoba, Prov. de Córdoba	Deleg. Paso de los Libres Ruta Nacional 117, km.10, CO.TE.CAR., Paso de los Libres, Prov. de Corrientes	Deleg. Posadas Roque González 1137, Posadas, Prov. de Misiones	Deleg. Santa Fé Eva Perón 2456, Santa Fé, Prov. de Santa Fé

365.26.11.270; 365.26.11.280; 365.26.11.290;365.26.11.270; 365.26.11.280;
365.26.11.290; 365.26.11.300; 365.26.11.310; 365.26.11.320; 365.26.12.70;
365.26.12.80; 365.26.12.90; 365.26.12.100; 365.26.12.110;
365.26.12.120;365.26.12.130; 365.26.12.140; 365.26.12.150; 365.26.12.160;
365.26.12.170; 365.26.12.180; 365.26.12.190; 365.26.12.200; 365.26.12.210;
365.26.12.220; 365.26.12.230; 365.26.12.240; 365.26.12.250; 365.26.12.260;
365.26.12.270; 365.26.12.280; 365.26.12.290; 365.26.12.300;365.26.12.310;
365.26.12.320; 365.26.13.70; 365.26.13.80; 365.26.13.90;
365.26.13.100;365.26.13.110; 365.26.13.120; 365.26.13.130; 365.26.13.140;
365.26.13.150; 365.26.13.160; 365.26.13.170; 365.26.13.180; 365.26.13.190;
365.26.13.200; 365.26.13.210; 365.26.13.220; 365.26.13.230; 365.26.13.240;
365.26.13.250; 365.26.13.260; 365.26.13.270; 365.26.13.280; 365.26.13.290;
365.26.13.300; 365.26.13.310; 365.26.13.320; 365.26.14.70; 365.26.14.80;
365.26.14.90; 365.26.14.100; 365.26.14.110; 365.26.14.120; 365.26.14.130;
365.26.14.140;365.26.14.150; 365.26.14.160; 365.26.14.170; 365.26.14.180;
365.26.14.190; 365.26.14.200; 365.26.14.210; 365.26.14.220; 365.26.14.230;
365.26.14.240; 365.26.14.250; 365.26.14.260; 365.26.14.270; 365.26.14.280;
365.26.14.290; 365.26.14.300; 365.26.14.310; 365.26.14.320;365.26.15.70;
365.26.15.80; 365.26.15.90; 365.26.15.100; 365.26.15.110; 365.26.15.120;

WAR



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

365.26.15.130; 365.26.15.140; 365.26.15.150; 365.26.15.160; 365.26.15.170;
365.26.15.180; 365.26.15.190; 365.26.15.200; 365.26.15.210; 365.26.15.220;
365.26.15.230; 365.26.15.240; 365.26.15.250; 365.26.15.260; 365.26.15.270;
365.26.15.280; 365.26.15.290; 365.26.15.300; 365.26.15.310; 365.26.15.320;
365.26.16.70; 365.26.16.80; 365.26.16.90; 365.26.16.100; 365.26.16.110;
365.26.16.120; 365.26.16.130; 365.26.16.140; 365.26.16.150; 365.26.16.160;
365.26.16.170; 365.26.16.180; 365.26.16.190; 365.26.16.200; 365.26.16.210;
365.26.16.220; 365.26.16.230; 365.26.16.240; 365.26.16.250; 365.26.16.260;
365.26.16.270; 365.26.16.280; 365.26.16.290; 365.26.16.300; 365.26.16.310;
365.26.16.320; 365.26.17.70; 365.26.17.80; 365.26.17.90; 365.26.17.100;
365.26.17.110; 365.26.17.120; 365.26.17.130; 365.26.17.140; 365.26.17.150;
365.26.17.160; 365.26.17.170; 365.26.17.180; 365.26.17.190; 365.26.17.200;
365.26.17.210; 365.26.17.220; 365.26.17.230; 365.26.17.240; 365.26.17.250;
365.26.17.260; 365.26.17.270; 365.26.17.280; 365.26.17.290; 365.26.17.300;
365.26.17.310; 365.26.17.320; 365.28.9.70; 365.28.9.80; 365.28.9.90;
365.28.9.100; 365.28.9.110; 365.28.9.120; 365.28.9.130; 365.28.9.140;
365.28.9.150; 365.28.9.160; 365.28.9.170; 365.28.9.180; 365.28.9.190;
365.28.9.200; 365.28.10.70; 365.28.10.80; 365.28.10.90; 365.28.10.100;
365.28.10.110; 365.28.10.120; 365.28.10.130; 365.28.10.140; 365.28.10.150;

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa.Fé,
Prov. de Santa.Fé

365.28.10.160; 365.28.10.170; 365.28.10.180; 365.28.10.190; 365.28.10.200;
365.28.10.210; 365.28.10.220; 365.28.10.230; 365.28.10.240; 365.28.10.250;
365.28.10.260; 365.28.10.270; 365.28.10.280; 365.28.11.70; 365.28.11.80;
365.28.11.90; 365.28.11.100; 365.28.11.110; 365.28.11.120; 365.28.11.130;
365.28.11.140; 365.28.11.150; 365.28.11.160; 365.28.11.170; 365.28.11.180;
365.28.11.190; 365.28.11.200; 365.28.11.210; 365.28.11.220; 365.28.11.230;
365.28.11.240; 365.28.11.250; 365.28.11.260; 365.28.11.270; 365.28.11.280;
365.28.11.290; 365.28.11.300; 365.28.11.310; 365.28.11.320; 365.28.12.70;
365.28.12.80; 365.28.12.90; 365.28.12.100; 365.28.12.110; 365.28.12.120;
365.28.12.130; 365.28.12.140; 365.28.12.150; 365.28.12.160; 365.28.12.170;
365.28.12.180; 365.28.12.190; 365.28.12.200; 365.28.12.210; 365.28.12.220;
365.28.12.230; 365.28.12.240; 365.28.12.250; 365.28.12.260; 365.28.12.270;
365.28.12.280; 365.28.12.290; 365.28.12.300; 365.28.12.280; 365.28.12.290;
365.28.12.300; 365.28.12.310; 365.28.12.320; 365.28.13.70; 365.28.13.80;
365.28.13.90; 365.28.13.100; 365.28.13.110; 365.28.13.120; 365.28.13.130;
365.28.13.140; 365.28.13.150; 365.28.13.160; 365.28.13.170; 365.28.13.180;
365.28.13.190; 365.28.13.200; 365.28.13.210; 365.28.13.220; 365.28.13.230;
365.28.13.240; 365.28.13.250; 365.28.13.260; 365.28.13.270; 365.28.13.280;
365.28.13.290; 365.28.13.300; 365.28.13.310; 365.28.13.320; 365.28.14.70;





Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

365.28.14.80; 365.28.14.90; 365.28.14.100; 365.28.14.110; 365.28.14.120;
365.28.14.130; 365.28.14.140; 365.28.14.150; 365.28.14.160; 365.28.14.170;
365.28.14.180; 365.28.14.190; 365.28.14.200; 365.28.14.210; 365.28.14.220;
365.28.14.230; 365.28.14.240; 365.28.14.250; 365.28.14.260; 365.28.14.270;
365.28.14.280; 365.28.14.290; 365.28.14.300; 365.28.14.310; 365.28.14.320;
365.28.15.70; 365.28.15.80; 365.28.15.90; 365.28.15.100; 365.28.15.110;
365.28.15.120; 365.28.15.130; 365.28.15.140; 365.28.15.150; 365.28.15.160;
365.28.15.170; 365.28.15.180; 365.28.15.190; 365.28.15.200; 365.28.15.210;
365.28.15.220; 365.28.15.230; 365.28.15.240; 365.28.15.250; 365.28.15.260;
365.28.15.270; 365.28.15.280; 365.28.15.290; 365.28.15.300; 365.28.15.310;
365.28.15.320; 365.28.16.70; 365.28.16.80; 365.28.16.90; 365.28.16.100;
365.28.16.110; 365.28.16.120; 365.28.16.130; 365.28.16.140; 365.28.16.150;
365.28.16.160; 365.28.16.170; 365.28.16.180; 365.28.16.190; 365.28.16.200;
365.28.16.210; 365.28.16.220; 365.28.16.230; 365.28.16.240; 365.28.16.250;
365.28.16.260; 365.28.16.270; 365.28.16.280; 365.28.16.290; 365.28.16.300;
365.28.16.310; 365.28.16.320; 365.28.17.70; 365.28.17.80; 365.28.17.90;
365.28.17.100; 365.28.17.110; 365.28.17.120; 365.28.17.130; 365.28.17.140;
365.28.17.150; 365.28.17.160; 365.28.17.170; 365.28.17.180; 365.28.17.190;
365.28.17.200; 365.28.17.210; 365.28.17.220; 365.28.17.230; 365.28.17.240;

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

365.28.17.250; 365.28.17.260; 365.28.17.270; 365.28.17.280; 365.28.17.290;
365.28.17.300; 365.28.17.310; 365.28.17.320; 365.28.18.70; 365.28.18.80;
365.28.18.90; 365.28.18.100; 365.28.18.110; 365.28.18.120; 365.28.18.130;
365.28.18.140; 365.28.18.150; 365.28.18.160; 365.28.18.170; 365.28.18.180;
365.28.18.190; 365.28.18.200; 365.28.18.210; 365.28.18.220; 365.28.18.230;
365.28.18.240; 365.28.18.250; 365.28.18.260; 365.28.18.270; 365.28.18.280;
365.28.18.290; 365.28.18.300; 365.28.18.310; 365.28.18.320;
365.28.19.70; 365.28.19.80; 365.28.19.90; 365.28.19.100; 365.28.19.110;
365.28.19.120; 365.28.19.130; 365.28.19.140; 365.28.19.150; 365.28.19.160;
365.28.19.170; 365.28.19.180; 365.28.19.190; 365.28.19.200; 365.28.19.210;
365.28.19.220; 365.28.19.230; 365.28.19.240; 365.28.19.250; 365.28.19.260;
365.28.19.270; 365.28.19.280; 365.28.19.290; 365.28.19.300; 365.28.19.310;
365.28.19.320; 365.32.9.70; 365.32.9.80; 365.32.9.90; 365.32.9.100;
365.32.9.110; 365.32.9.120; 365.32.9.130; 365.32.9.140; 365.32.9.150;
365.32.9.160; 365.32.9.170; 365.32.9.180; 365.32.9.190; 365.32.9.200;
365.32.10.70; 365.32.10.80; 365.32.10.90; 365.32.10.100; 365.32.10.110;
365.32.10.120; 365.32.10.130; 365.32.10.140; 365.32.10.150; 365.32.10.160;
365.32.10.170; 365.32.10.180; 365.32.10.190; 365.32.10.200; 365.32.10.210;
365.32.10.220; 365.32.10.230; 365.32.10.240; 365.32.10.250; 365.32.10.260;

WAB



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

365.32.10.270; 365.32.10.280; 365.32.11.70; 365.32.11.80; 365.32.11.90;
365.32.11.100; 365.32.11.110; 365.32.11.120; 365.32.11.130; 365.32.11.140;
365.32.11.150; 365.32.11.160; 365.32.11.170; 365.32.11.180;
365.32.11.190; 365.32.11.200; 365.32.11.210; 365.32.11.220; 365.32.11.230;
365.32.11.240; 365.32.11.250; 365.32.11.260; 365.32.11.270; 365.32.11.280;
365.32.11.290; 365.32.11.300; 365.32.11.310; 365.32.11.320; 365.32.12.70;
365.32.12.80; 365.32.12.90; 365.32.12.100; 365.32.12.110; 365.32.12.120;
365.32.12.130; 365.32.12.140; 365.32.12.150; 365.32.12.160; 365.32.12.170;
365.32.12.180; 365.32.12.190; 365.32.12.200; 365.32.12.210; 365.32.12.220;
365.32.12.230; 365.32.12.240; 365.32.12.250; 365.32.12.260; 365.32.12.270;
365.32.12.280; 365.32.12.290; 365.32.12.300; 365.32.12.310; 365.32.12.320;
365.32.13.70; 365.32.13.80; 365.32.13.90; 365.32.13.100; 365.32.13.110;
365.32.13.120; 365.32.13.130; 365.32.13.140; 365.32.13.150; 365.32.13.160;
365.32.13.170; 365.32.13.180; 365.32.13.190; 365.32.13.200; 365.32.13.210;
365.32.13.220; 365.32.13.230; 365.32.13.240; 365.32.13.250; 365.32.13.260;
365.32.13.270; 365.32.13.280; 365.32.13.290; 365.32.13.300; 365.32.13.310;
365.32.13.320; 365.32.14.70; 365.32.14.80; 365.32.14.90; 365.32.14.100;
365.32.14.110; 365.32.14.120; 365.32.14.130; 365.32.14.140; 365.32.14.150;
365.32.14.160; 365.32.14.170; 365.32.14.180; 365.32.14.190; 365.32.14.200;

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

365.32.14.210; 365.32.14.220; 365.32.14.230; 365.32.14.240;
365.32.14.250;365.32.14.260; 365.32.14.270; 365.32.14.280; 365.32.14.290;
365.32.14.300; 365.32.14.310; 365.32.14.320; 365.32.15.70; 365.32.15.80;
365.32.15.90; 365.32.15.100; 365.32.15.110; 365.32.15.120; 365.32.15.130;
365.32.15.140; 365.32.15.150; 365.32.15.160; 365.32.15.170; 365.32.15.180;
365.32.15.190; 365.32.15.200; 365.32.15.210; 365.32.15.220; 365.32.15.230;
365.32.15.240; 365.32.15.250; 365.32.15.260; 365.32.15.270; 365.32.15.280;
365.32.15.290; 365.32.15.300; 365.32.15.310; 365.32.15.320; 365.32.16.70;
365.32.16.80; 365.32.16.90; 365.32.16.100; 365.32.16.110; 365.32.16.120;
365.32.16.130; 365.32.16.140; 365.32.16.150; 365.32.16.160; 365.32.16.170;
365.32.16.180; 365.32.16.190; 365.32.16.200; 365.32.16.210; 365.32.16.220;
365.32.16.230; 365.32.16.240; 365.32.16.250; 365.32.16.260; 365.32.16.270;
365.32.16.280; 365.32.16.290; 365.32.16.300; 365.32.16.310; 365.32.16.320;
365.32.17.70; 365.32.17.80; 365.32.17.90; 365.32.17.100; 365.32.17.110;
365.32.17.120; 365.32.17.130; 365.32.17.140; 365.32.17.150; 365.32.17.160;
365.32.17.170; 365.32.17.180; 365.32.17.190; 365.32.17.200; 365.32.17.210;
365.32.17.220; 365.32.17.230; 365.32.17.240; 365.32.17.250365.32.17.260;
365.32.17.270; 365.32.17.280; 365.32.17.290; 365.32.17.300; 365.32.17.310;
365.32.17.320; 365.32.18.70; 365.32.18.80; 365.32.18.90; 365.32.18.100;

WAB



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

365.32.18.110; 365.32.18.120; 365.32.18.130; 365.32.18.140; 365.32.18.150;
365.32.18.160; 365.32.18.170; 365.32.18.180; 365.32.18.190; 365.32.18.200;
365.32.18.210; 365.32.18.220; 365.32.18.230; 365.32.18.240; 365.32.18.250;
365.32.18.260; 365.32.18.270; 365.32.18.280; 365.32.18.290; 365.32.18.300;
365.32.18.310; 365.32.18.320; 365.32.19.70; 365.32.19.80; 365.32.19.90;
365.32.19.100; 365.32.19.110; 365.32.19.120; 365.32.19.130; 365.32.19.140;
365.32.19.150; 365.32.19.160; 365.32.19.170; 365.32.19.180; 365.32.19.190;
365.32.19.200; 365.32.19.210; 365.32.19.220; 365.32.19.230;
365.32.19.240; 365.32.19.250; 365.32.19.260; 365.32.19.270; 365.32.19.280;
365.32.19.290; 365.32.19.300; 365.32.19.310; 365.32.19.320; 365.40.9.70;
365.40.9.80; 365.40.9.90; 365.40.9.100; 365.40.9.110; 365.40.9.120;
365.40.9.130; 365.40.9.140; 365.40.9.150; 365.40.9.160; 365.40.9.170;
365.40.9.180; 365.40.9.190; 365.40.9.200; 365.40.10.70; 365.40.10.80;
365.40.10.90; 365.40.10.100; 365.40.10.110; 365.40.10.120; 365.40.10.130;
365.40.10.140; 365.40.10.150; 365.40.10.160; 365.40.10.170; 365.40.10.180;
365.40.10.190; 365.40.10.200; 365.40.10.210; 365.40.10.220; 365.40.10.230;
365.40.10.240; 365.40.10.250; 365.40.10.260; 365.40.10.270; 365.40.10.280;
365.40.11.70; 365.40.11.80; 365.40.11.90; 365.40.11.100; 365.40.11.110;
365.40.11.120; 365.40.11.130; 365.40.11.140; 365.40.11.150; 365.40.11.160;

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

365.40.11.170; 365.40.11.180; 365.40.11.190; 365.40.11.200; 365.40.11.210;
365.40.11.220; 365.40.11.230; 365.40.11.240; 365.40.11.250; 365.40.11.260;
365.40.11.270; 365.40.11.280; 365.40.11.290; 365.40.11.300; 365.40.11.310;
365.40.11.320; 365.40.12.70; 365.40.12.80; 365.40.12.90; 365.40.12.100;
365.40.12.110; 365.40.12.120; 365.40.12.130; 365.40.12.140; 365.40.12.150;
365.40.12.160; 365.40.12.170; 365.40.12.180; 365.40.12.190; 365.40.12.200;
365.40.12.210; 365.40.12.220; 365.40.12.230; 365.40.12.240; 365.40.12.250;
365.40.12.260; 365.40.12.270; 365.40.12.280; 365.40.12.290; 365.40.12.300;
365.40.12.310; 365.40.12.320; 365.40.13.70; 365.40.13.80; 365.40.13.90;
365.40.13.100; 365.40.13.110; 365.40.13.120; 365.40.13.130; 365.40.13.140;
365.40.13.150; 365.40.13.160; 365.40.13.170; 365.40.13.180; 365.40.13.190;
365.40.13.200; 365.40.13.210; 365.40.13.220; 365.40.13.230; 365.40.13.240;
365.40.13.250; 365.40.13.260; 365.40.13.270; 365.40.13.280; 365.40.13.290;
365.40.13.300; 365.40.13.310; 365.40.13.320; 365.40.14.70; 365.40.14.80;
365.40.14.90; 365.40.14.100; 365.40.14.110; 365.40.14.120; 365.40.14.130;
365.40.14.140; 365.40.14.150; 365.40.14.160; 365.40.14.170; 365.40.14.180;
365.40.14.190; 365.40.14.200; 365.40.14.210; 365.40.14.220; 365.40.14.230;
365.40.14.240; 365.40.14.250; 365.40.14.260; 365.40.14.270; 365.40.14.280;
365.40.14.290; 365.40.14.300; 365.40.14.310; 365.40.14.320; 365.40.15.70;

WAR



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

365.40.15.80; 365.40.15.90; 365.40.15.100; 365.40.15.110; 365.40.15.120;
365.40.15.130; 365.40.15.140; 365.40.15.150; 365.40.15.160; 365.40.15.170;
365.40.15.180; 365.40.15.190; 365.40.15.200; 365.40.15.210; 365.40.15.220;
365.40.15.230; 365.40.15.240; 365.40.15.250; 365.40.15.260; 365.40.15.270;
365.40.15.280; 365.40.15.290; 365.40.15.300; 365.40.15.310; 365.40.15.320;
365.40.16.70; 365.40.16.80; 365.40.16.90; 365.40.16.100; 365.40.16.110;
365.40.16.120; 365.40.16.130; 365.40.16.140; 365.40.16.150; 365.40.16.160;
365.40.16.170; 365.40.16.180; 365.40.16.190; 365.40.16.200; 365.40.16.210;
365.40.16.220; 365.40.16.230; 365.40.16.240; 365.40.16.250; 365.40.16.260;
365.40.16.270; 365.40.16.280; 365.40.16.290; 365.40.16.300; 365.40.16.310;
365.40.16.320; 365.40.17.70; 365.40.17.80; 365.40.17.90; 365.40.17.100;
365.40.17.110; 365.40.17.120; 365.40.17.130; 365.40.17.140; 365.40.17.150;
365.40.17.160; 365.40.17.170; 365.40.17.180; 365.40.17.190; 365.40.17.200;
365.40.17.210; 365.40.17.220; 365.40.17.230; 365.40.17.240; 365.40.17.250;
365.40.17.260; 365.40.17.270; 365.40.17.280; 365.40.17.290; 365.40.17.300;
365.40.17.310; 365.40.17.320; 365.40.18.70; 365.40.18.80; 365.40.18.90;
365.40.18.100; 365.40.18.110; 365.40.18.120; 365.40.18.130; 365.40.18.140;
365.40.18.150; 365.40.18.160; 365.40.18.170; 365.40.18.180; 365.40.18.190;
365.40.18.200; 365.40.18.210; 365.40.18.220; 365.40.18.230; 365.40.18.240;

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

365.40.18.250; 365.40.18.260; 365.40.18.270; 365.40.18.280; 365.40.18.290;
365.40.18.300; 365.40.18.310; 365.40.18.320; 365.40.19.70; 365.40.19.80;
365.40.19.90; 365.40.19.100; 365.40.19.110; 365.40.19.120; 365.40.19.130;
365.40.19.140; 365.40.19.150; 365.40.19.160; 365.40.19.170; 365.40.19.180;
365.40.19.190; 365.40.19.200; 365.40.19.210; 365.40.19.220; 365.40.19.230;
365.40.19.240; 365.40.19.250; 365.40.19.260; 365.40.19.270; 365.40.19.280;
365.40.19.290; 365.40.19.300; 365.40.19.310; 365.40.19.320

ASTAS MODULARES: 364.26; 364.28; 364.32

COMPONENTE PROXIMAL DE FÉMUR: 370.F1.E.26; 370.F1.E.28; 370.F2.E.26;
370.F2.E.28; 370.F2.E.32; 370.F3.E.28; 370.F3.E.32; 370.F1.D.26; 370.F1.D.28;
370.F2.D.26; 370.F2.D.28; 370.F2.D.32; 370.F3.D.28; 370.F3.D.32

COMPONENTE DISTAL DE FEMUR PARCIAL Y RODILLA:

372.T1.26; 372.T1.28; 372.T2.26; 372.T2.28; 372.T2.32; 372.T3.28; 372.T3.32

COMPONENTE PROXIMAL DE TÍBIA PARCIAL DE RODILLA. 380.1; 380.2; 380.3

COMPONENTE DISTAL DE FEMUR PARCIAL RODILLA ARTICULADA: 380.A.9.70;
380.A.9.80; 380.A.9.90; 380.A.9.100; 380.A.9.110; 380.A.9.120; 380.A.9.130;
380.A.9.140; 380.A.9.150; 380.A.9.160; 380.A.9.170; 380.A.9.180; 380.A.9.190;
380.A.9.200; 380.A.10.70; 380.A.10.80; 380.A.10.90; 380.A.10.100;
380.A.10.110; 380.A.10.120; 380.A.10.130; 380.A.10.140; 380.A.10.150;

WAB



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

380.A.10.160; 380.A.10.170; 380.A.10.180; 380.A.10.190; 380.A.10.200;
380.A.11.70; 380.A.11.80; 380.A.11.90; 380.A.11.100; 380.A.11.110;
380.A.11.120; 380.A.11.130;
380.A.11.140; 380.A.11.150; 380.A.11.160; 380.A.11.170; 380.A.11.180;
380.A.11.190; 380.A.11.200; 380.A.12.70; 380.A.12.80; 380.A.12.90;
380.A.12.100; 380.A.12.110; 380.A.12.120; 380.A.12.130; 380.A.12.140;
380.A.12.150; 380.A.12.160; 380.A.12.170; 380.A.12.180; 380.A.12.190;
380.A.12.200; 380.A.13.70; 380.A.13.80; 380.A.13.90; 380.A.13.100;
380.A.13.110; 380.A.13.120; 380.A.13.130; 380.A.13.140; 380.A.13.150;
380.A.13.160; 380.A.13.170; 380.A.13.180; 380.A.13.190; 380.A.13.200;
380.A.14.70; 380.A.14.80; 380.A.14.90; 380.A.14.100; 380.A.14.110;
380.A.14.120; 380.A.14.130; 380.A.14.140; 380.A.14.150; 380.A.14.160;
380.A.14.170; 380.A.14.180; 380.A.14.190; 380.A.14.200; 380.A.15.70;
380.A.15.80; 380.A.15.90; 380.A.15.100; 380.A.15.110; 380.A.15.120;
380.A.15.130; 380.A.15.140; 380.A.15.150; 380.A.15.160; 380.A.15.170;
380.A.15.180; 380.A.15.190; 380.A.15.200; 380.A.16.70; 380.A.16.80;
380.A.16.90; 380.A.16.100; 380.A.16.110; 380.A.16.120; 380.A.16.130;
380.A.16.140; 380.A.16.150; 380.A.16.160; 380.A.16.170; 380.A.16.180;
380.A.16.190; 380.A.16.200; 380.A.17.70; 380.A.17.80; 380.A.17.90;

WAS

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

380.A.17.100; 380.A.17.110; 380.A.17.120; 380.A.17.130; 380.A.17.140;
380.A.17.150; 380.A.17.160; 380.A.17.170; 380.A.17.180;380.A.17.190;
380.A.17.20;

ASTA FEMORAL PARA COMPONENTE DISTAL DE FEMUR PARCIAL

JOELHO ARTICULADO. 362.1.26.D; 362.1.26.E; 362.2.28.D; 362.2.28.E;
362.2.32.D; 362.2.32.E;362.3.28.D; 362.3.28.E; 362.3.32.D; 362.3.32.E;
362.2.40.D; 362.2.40.E; 362.3.40.D;362.3.40.E

COMPONENTE DISTAL DE FEMUR Y RODILLA ARTICULADA: 373.T1.26; 373.T1.28;
373.T2.26; 373.T2.28; 373.T2.32; 373.T3.28; 373.T3.32

COMPONENTE PROXIMAL DE TÍBIA Y RODILLA ARTICULADA: 362.T1.9.80;
362.T1.9.90; 362.T1.9.100; 362.T1.9.110;362.T1.9.120; 362.T1.9.130;
362.T1.9.140; 362.T1.9.150; 362.T1.10.80; 362.T1.10.90; 362.T1.10.100;
362.T1.10.110; 362.T1.10.120; 362.T1.10.130; 362.T1.10.140; 362.T1.10.150;
362.T1.10.160; 362.T1.10.170; 362.T1.10.180; 362.T1.10.190; 362.T1.10.200;
362.T1.11.80; 362.T1.11.90; 362.T1.11.100; 362.T1.11.110; 362.T1.11.120;
362.T1.11.130; 362.T1.11.140; 362.T1.11.150; 362.T1.11.160; 362.T1.11.170;
362.T1.11.180; 362.T1.11.190; 362.T1.11.200; 362.T1.12.80; 362.T1.12.90;
362.T1.12.100; 362.T1.12.110; 362.T1.12.120; 362.T1.12.130; 362.T1.12.140;
362.T1.12.150; 362.T1.12.160; 362.T1.12.170; 362.T1.12.180; 362.T1.12.190;

WAS



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

362.T1.12.200; 362.T1.13.80; 362.T1.13.90; 362.T1.13.100; 362.T1.13.110;
362.T1.13.120; 362.T1.13.130; 362.T1.13.140; 362.T1.13.150; 362.T1.13.160;
362.T1.13.170; 362.T1.13.180; 362.T1.13.190; 362.T1.13.200; 362.T1.14.80;
362.T1.14.90; 362.T1.14.100; 362.T1.14.110; 362.T1.14.120; 362.T1.14.130;
362.T1.14.140; 362.T1.14.150; 362.T1.14.160; 362.T1.14.170; 362.T1.14.180;
362.T1.14.190; 362.T1.14.200; 362.T1.15.80; 362.T1.15.90; 362.T1.15.100;
362.T1.15.110; 362.T1.15.120; 362.T1.15.130; 362.T1.15.140; 362.T1.15.150;
362.T1.15.160; 362.T1.15.170; 362.T1.15.180; 362.T1.15.190; 362.T1.15.200;
362.T1.16.80; 362.T1.16.90; 362.T1.16.100; 362.T1.16.110; 362.T1.16.120;
362.T1.16.130; 362.T1.16.140; 362.T1.16.150; 362.T1.16.160; 362.T1.16.170;
362.T1.16.180; 362.T1.16.190; 362.T1.16.200; 362.T2.9.80; 362.T2.9.90;
362.T2.9.100; 362.T2.9.110; 362.T2.9.120; 362.T2.9.130; 362.T2.9.140;
362.T2.9.150; 362.T2.10.80; 362.T2.10.90; 362.T2.10.100; 362.T2.10.110;
362.T2.10.120; 362.T2.10.130; 362.T2.10.140; 362.T2.10.150; 362.T2.10.160;
362.T2.10.170; 362.T2.10.180; 362.T2.10.190; 362.T2.10.200; 362.T2.11.80;
362.T2.11.90; 362.T2.11.100; 362.T2.11.110; 362.T2.11.120; 362.T2.11.130;
362.T2.11.140; 362.T2.11.150; 362.T2.11.160; 362.T2.11.170; 362.T2.11.180;
362.T2.11.190; 362.T2.11.200; 362.T2.12.80; 362.T2.12.90; 362.T2.12.100;
362.T2.12.110; 362.T2.12.120; 362.T2.12.130; 362.T2.12.140; 362.T2.12.150;

WAB

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

362.T2.12.160; 362.T2.12.170; 362.T2.12.180; 362.T2.12.190; 362.T2.12.200;
362.T2.13.80; 362.T2.13.90; 362.T2.13.100; 362.T2.13.110; 362.T2.13.120;
362.T2.13.130; 362.T2.13.140; 362.T2.13.150; 362.T2.13.160; 362.T2.13.170;
362.T2.13.180; 362.T2.13.190; 362.T2.13.200; 362.T2.14.80; 362.T2.14.90;
362.T2.14.100; 362.T2.14.110; 362.T2.14.120; 362.T2.14.130; 362.T2.14.140;
362.T2.14.150; 362.T2.14.160; 362.T2.14.170; 362.T2.14.180; 362.T2.14.190;
362.T2.14.200; 362.T2.15.80; 362.T2.15.90; 362.T2.15.100; 362.T2.15.110;
362.T2.15.120; 362.T2.15.130; 362.T2.15.140; 362.T2.15.150; 362.T2.15.160;
362.T2.15.170; 362.T2.15.180; 362.T2.15.190; 362.T2.15.200; 362.T2.16.80;
362.T2.16.90; 362.T2.16.100; 362.T2.16.110; 362.T2.16.120; 362.T2.16.130;
362.T2.16.140; 362.T2.16.150; 362.T2.16.160; 362.T2.16.170; 362.T2.16.180;
362.T2.16.190; 362.T2.16.200; 362.T3.9.80; 362.T3.9.90; 362.T3.9.100;
362.T3.9.110; 362.T3.9.120; 362.T3.9.130; 362.T3.9.140; 362.T3.9.150;
362.T3.10.80; 362.T3.10.90; 362.T3.10.100; 362.T3.10.110; 362.T3.10.120;
362.T3.10.130; 362.T3.10.140; 362.T3.10.150; 362.T3.10.160; 362.T3.10.170;
362.T3.10.180; 362.T3.10.190; 362.T3.10.200; 362.T3.11.80; 362.T3.11.90;
362.T3.11.100; 362.T3.11.110; 362.T3.11.120; 362.T3.11.130; 362.T3.11.140;
362.T3.11.150; 362.T3.11.160; 362.T3.11.170; 362.T3.11.180; 362.T3.11.190;
362.T3.11.200; 362.T3.12.80; 362.T3.12.90; 362.T3.12.100; 362.T3.12.110;

WAS



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

362.T3.12.120; 362.T3.12.130; 362.T3.12.140; 362.T3.12.150; 362.T3.12.160;
362.T3.12.170; 362.T3.12.180; 362.T3.12.190; 362.T3.12.200; 362.T3.13.80;
362.T3.13.90; 362.T3.13.100; 362.T3.13.110; 362.T3.13.120;
362.T3.13.130; 362.T3.13.140; 362.T3.13.150; 362.T3.13.160; 362.T3.13.170;
362.T3.13.180; 362.T3.13.190; 362.T3.13.200; 362.T3.14.80; 362.T3.14.90;
362.T3.14.100; 362.T3.14.110; 362.T3.14.120; 362.T3.14.130; 362.T3.14.140;
362.T3.14.150; 362.T3.14.160; 362.T3.14.170; 362.T3.14.180; 362.T3.14.190;
362.T3.14.200; 362.T3.15.80; 362.T3.15.90; 362.T3.15.100; 362.T3.15.110;
362.T3.15.120; 362.T3.15.130; 362.T3.15.140; 362.T3.15.150; 362.T3.15.160;
362.T3.15.170; 362.T3.15.180; 362.T3.15.190; 362.T3.15.200; 362.T3.16.80;
362.T3.16.90; 362.T3.16.100; 362.T3.16.110; 362.T3.16.120; 362.T3.16.130;
362.T3.16.140; 362.T3.16.150; 362.T3.16.160; 362.T3.16.170; 362.T3.16.180;
362.T3.16.190; 362.T3.16.200

COMPONENTE PROXIMAL DE TÍBIA Y RODILLA ARTICULADA - RECCESIÓN
MÍNIMA DE TÍBIA PROXIMAL.

Período de vida útil: 5 años

Forma de presentación: Estéril, por unidad

Método de Esterilización: Óxido de Etileno

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

Fabricante: BAUMER S.A.

Lugar/es de elaboración: AV. PREFEITO ANTONIO TAVARES LEITE 181

MOGI-MIRIM - SAN PABLO - BRASIL.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-817-62, con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente Nº 1-47-3110-6494-17-1

Disposición Nº

20611

01 MAR 2019


Dr. Waldo Beloso
Subadministrador Nacional
ANMAT