



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 3593

BUENOS AIRES, 05 MAY 2015

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-130-15-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Unic Company S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

DISPOSICIÓN N° 3593

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 1490/92 y 1886/14.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Intersurgical , nombre descriptivo Máscaras para traqueostomía y nombre técnico Mascarillas para Traqueostomias, de Administración de Aerosoles, de acuerdo a lo solicitado por Unic Company S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 19 a 20 y 21 a 26 respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-261-179, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.



DISPOSICIÓN Nº **3593**

*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.


Expediente Nº 1-47-3110-130-15-1


DISPOSICIÓN Nº **3593**

P.B.

Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

05 MAY 2015

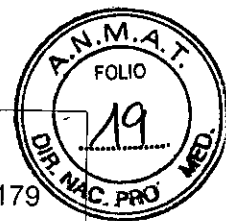

 <p>unic Unic Company S.R.L. Productos Médicos Especializados</p>	<p style="font-size: 2em; text-align: center;">3593</p> <p style="text-align: center;">Mascarillas para Traqueostomía</p>	<p style="text-align: right;">PM: 261-179</p>
---	---	---


Información de los Rótulos


Mascarillas para Traqueostomía

Nº de Lote:

Modelos: Marca: Intersurgical

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 261- 179.

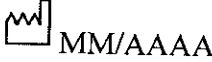Importado por: 
 Unic Company SRL
 Gral. Ferré 1156. (1872) Sarandí, Avellaneda.
 Buenos Aires. Argentina

Fabricado por: 
 (1) Intersurgical Limited.
 Crane House, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, Reino Unido.

(2) Intersurgical (Guernsey) Limited
 Circuit House, Pitronnerie Road Industrial Estate, St. Peter Port Guernsey, GY1 2RL, Islas Británicas.

(3) Intersurgical UAB
 Arnioniu 60/28-1, 18170 Pabrade, Lithuania.

(4) Intersurgical S.p.A
 Via Morandi, 12, 41037 Mirandola MO, Italia

Fabricante contratado:
 (1) Haiyan Kangyuan Medical Instrument
 Songpodong Rd, Shendang Town, Haiyan, Zhejiang 314311, Republic Of China

(2) Well Lead Medical Co Ltd
 C-4 Jinhua Industrial Estate, Hualong, 511434 Panyu, Guangzhou, Republic of China


(3) Suzhou Weikang Medical Apparatus Co Ltd
 No 89 Wangmi Street, Jianlin Rd, Suzhou New District, Jiangsu, China, 215129

(4) Foremount Enterprise Co Ltd
 No 17 Alley 15 Lane, 5 Shenan Street, Shengang Hsiang, Taichung, Taiwan, Republic Of China.

(5) Hsiner
 No. 312, Zhongshang Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan

(6) Vitaltec Corporation
 No. 12. Lane 4-30, Chyuan-Zhou Rd, Hou-Li Hsiang, Taichung, Taiwan Republic Of China

(7) Scope Medical Devices Private Limited
 Plot No. 11/10, Jaraut Road, Mandour, Ambala City - 134 003 India

Cantidad: 

Responsable Técnico: **Farm. Mariana Musse M.N: 13315**

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias


Fig. 2.1.1: Modelo de Rótulo.

UNIC COMPANY S.R.L.
 Gabriel O. Federico
 SOCIO GERENTE

Farm. MARIANA MUSSE
 M.N. 13315
 DIRECTORA TÉCNICA
 UNIC COMPANY S.R.L.

3593



 <p>unic Unic Company S.r.l. Productos Médicos Especializados</p>	<p>Mascarillas para Traqueostomía</p>	<p>PM: 261-179</p>
---	---------------------------------------	--------------------

REF 1200

QTY 30

LOT SAMPLE




(01)05030267001791(10)SAMPLE

- 01 TRACHEOSTOMY MASK, ADULT, LATEX FREE
- 02 MASQUE TRACHEOSTOMIE, ADULTE, SANS LATEX
- 03 TRACHEOSTOMIE-MASKE FÜR ERWACHSENE, LATEX-FREI
- 04 MASCARILLA TRACHEOSTOMIA ADULTO, NO CONTIENE LATEX
- 05 MÁSCARA TRACHEOSTOMIA ADULTO, ISENTO DE LATEX
- 06 MASCHERA PER TRACHEOSTOMIA ADULTI, NON CONTIENE LATEX
- 07 TRACHEOSTOMY MASKER VOÜWASSEREN, ZONDER LATEX
- 08 TRACHEOSTOM MASKE, VOKSEN INNEHOLER IKKE LATEX
- 09 AIKUJSTEN TRACHEOSTOMIA MASKI, EI SISÄLLÄ LATEKSIÄ
- 10 TRACHEOSTOM MASK, VUXEN, LATEXFRI
- 11 TRACHEOSTOM MASKE VOKSEN INNEHOLER IKKE LATEX
- 12 MASKA TRACHEOSTOMIAZ ENHNKON, MH LATEX
- 13 TRACHEOSTOMINE KAUKE SUJUGUSEMS BE LATEKSO
- 14 MASKA TRACHEOSTOMIKA DLA OSOBY DOROSLEJ, BEZ LATEKSI
- 15 MASKA TRACHEOSTOMIČEKÁJ, BPOČIJAJ, BEZ LATEKSI
- 16 TRACHEOSTOMY MASKA PRO DOSPÉLÉ, NEODSAHUJE LATEX
- 17 TRACHEOSTOMIÁS MASZK, FELNÖTT, LATEXMENTES
- 18 MASKA TRACHEOSTOMIČNA ZA ODRASLE
- 19 TRACHEOSTOMIJAŠ MASKA, PIAUČUŠIEM BEZ LATEKSI
- 20 TRACHEOSTOMIJAŠ MASKA, TĀISKASVANŪTELE, KĀJA LATEKSI

REF 1200

QTY 30

LOT SAMPLE

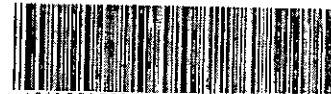

(01)05030267001791(10)SAMPLE

- 01 TRACHEOSTOMY MASK, ADULT, LATEX FREE
- 02 MASQUE TRACHEOSTOMIE, ADULTE, SANS LATEX
- 03 TRACHEOSTOMIE-MASKE FÜR ERWACHSENE, LATEX-FREI
- 04 MASCARILLA TRACHEOSTOMIA ADULTO, NO CONTIENE LATEX
- 05 MÁSCARA TRACHEOSTOMIA ADULTO, ISENTO DE LATEX
- 06 MASCHERA PER TRACHEOSTOMIA ADULTI, NON CONTIENE LATEX
- 07 TRACHEOSTOMY MASKER VOÜWASSEREN, ZONDER LATEX
- 08 TRACHEOSTOM MASKE, VOKSEN INNEHOLER IKKE LATEX
- 09 AIKUJSTEN TRACHEOSTOMIA MASKI, EI SISÄLLÄ LATEKSIÄ
- 10 TRACHEOSTOM MASK, VUXEN, LATEXFRI
- 11 TRACHEOSTOM MASKE VOKSEN INNEHOLER IKKE LATEX
- 12 MASKA TRACHEOSTOMIAZ ENHNKON, MH LATEX
- 13 TRACHEOSTOMINE KAUKE SUJUGUSEMS BE LATEKSO
- 14 MASKA TRACHEOSTOMIKA DLA OSOBY DOROSLEJ, BEZ LATEKSI
- 15 MASKA TRACHEOSTOMIČEKÁJ, BPOČIJAJ, BEZ LATEKSI
- 16 TRACHEOSTOMY MASKA PRO DOSPÉLÉ, NEODSAHUJE LATEX
- 17 TRACHEOSTOMIÁS MASZK, FELNÖTT, LATEXMENTES
- 18 MASKA TRACHEOSTOMIČNA ZA ODRASLE
- 19 TRACHEOSTOMIJAŠ MASKA, PIAUČUŠIEM BEZ LATEKSI
- 20 TRACHEOSTOMIJAŠ MASKA, TĀISKASVANŪTELE, KĀJA LATEKSI



UNIC

UNIC

UNIC


Figura 2.1.2: - Rótulo provisto por el Fabricante

UNIC COMPANY S.R.L.
Gabriel O. Federico
SOCIO GERENTE

Earm. MARIANA MUSSE
M.N. 13315
DIRECTORA TÉCNICA 2
UNIC COMPANY S.R.L.

3593



 unic Unic Company S.R.L. Productos Médicos Hospitalarios	Mascarillas para Traqueostomía	PM: 261-179
--	---------------------------------------	-------------

INSTRUCCIONES DE USO

3.1 Indicaciones del Rótulo

Razón Social y Dirección (Rótulo del Fabricante):

Intersurgical Limited.

Crane House, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, Reino Unido.

Razón Social y Dirección (Rótulo del Fabricante):

Intersurgical Gsy Limited

Circuit House, Pitronnerie Road Industrial Estate, St. Peter Port Guernsey, GY1 2RL, Islas Británicas.

Razón Social y Dirección (Rótulo del Fabricante):

Intersurgical UAB

Arnioniu 60/28-1, 18170 Pabrade, Lithuania

Razón Social y Dirección (Rótulo del Fabricante):

Intersurgical S.p.A

Via Morandi, 12, 41037 Mirandola MO, Italia

Razón Social y Dirección (Rótulo del Fabricante Contratado):

Haiyan Kangyuan Medical Instrument

Songpodong Rd, Shendang Town, Haiyan, Zhejiang 314311, Republic Of China

Razón Social y Dirección (Rótulo del Fabricante Contratado):

Well Lead Medical Co Ltd

C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong, 511434 Panyu, Guangzhou, Republic of China

Razón Social y Dirección (Rótulo del Fabricante Contratado):

Suzhou Weikang Medical Apparatus Co Ltd

No 89 Wangmi Street, Jianlin Rd, Suzhou New District, Jiangsu, China, 215129

Razón Social y Dirección (Rótulo del Fabricante Contratado):


Foremount Enterprise Co Ltd

No 17 Alley 15 Lane, 5 Shenan Street, Shengang Hsiang, Taichung, Taiwan, Republic Of China.

Razón Social y Dirección (Rótulo del Fabricante Contratado):


Hsiner


No. 312, Jhongshang Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan

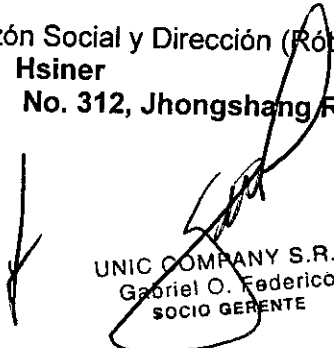
UNIC COMPANY S.R.L.
Gabriel O. Federico
SOCIO GERENTE


3
Firm. MARIANA MUSSE
M.N. 13315
DIRECTORA TÉCNICA
UNIC COMPANY S.R.L.

3593

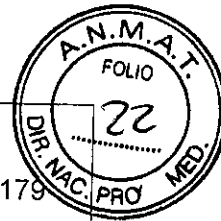

	Mascarillas para Traqueostomía	PM: 261-179
---	---------------------------------------	-------------

Razón Social y Dirección (Rótulo del Fabricante Contratado):

Vitaltec Corporation

**No. 12. Lane 4-30, Chyuan-Zhou Rd, Hou-Li Hsiang, Taichung, Taiwan
Republic Of China**

Razón Social y Dirección (Rótulo del Fabricante Contratado):

Scope Medical Devices Private Limited

Plot No. 11/10, Jaraut Road, Mandour, Ambala City – 134 003 India

Razón Social y Dirección (Rótulo del Importador):

Unic Company SRL

Gral. Ferré 1156. (1872) Sarandí, Avellaneda

Buenos Aires. Argentina

Identificación del Producto:

En Rótulo del Fabricante:

Producto: Mascarillas para Traqueostomía

Marca: Intersurgical.

Modelos: Según corresponda

Condiciones de Almacenamiento, Conservación y/o Manipulación del producto:

Almacenar en un lugar oscuro y fresco.


Precauciones y advertencias


- Comprobar la identidad del paciente.
- Mantener la piel de la cara limpia y seca para evitar la irritación cutánea.
- Colocar al paciente incorporado o semi-incorporado para permitir la máxima expansión torácica.
- Comprobar que el paciente, la terapia, la hora, la vía de administración y la dosis son los establecidos en la prescripción médica.
- Verificar la no existencia de alergias al cloruro a administrar.
- Facilitar una cámara de inhalación a los pacientes que tengan dificultad para realizar la técnica.

UNIC COMPANY S.R.L.
Gabriel O. Federico
SOCIO GERENTE

Farm. MARIANA MUSSE
M.N. 13315
DIRECTORA TÉCNICA
UNIC COMPANY S.R.L.

3593

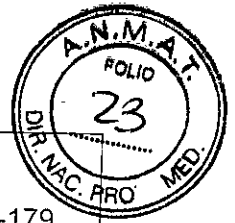

	Mascarillas para Traqueostomía	PM: 261-179
---	--------------------------------	-------------

Responsable Técnico de Unic Company SRL legalmente habilitado:

Farm. Mariana Musse M.N. 13.315

Número de Registro del Producto Médico: "Autorizado por la ANMAT PM 261-179".


Condición de venta: "venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias".


3.2 Prestaciones atribuidas por el Fabricante

Las mascarillas para traqueotomias se utilizan para la administración de terapias inhalatorias a pacientes a los que se les realizó una traqueotomía.


Características y Beneficios

La aerosolterapia es un método de atención primaria de salud, para prevenir y tratar las afecciones respiratorias altas y bajas. Permite llevar directamente proporciones y concentraciones de aire u oxígeno junto con aerosoles de partículas de agua.

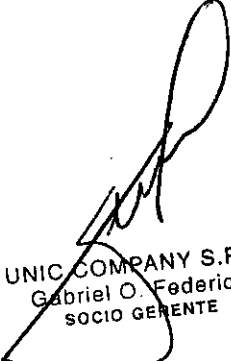
UNIC COMPANY S.R.L.
Gabriel O. Federico
SOCIO GERENTE


Farm. MARIANA MUSSE 5
M.N. 13315
DIRECTORA TÉCNICA
UNIC COMPANY S.R.L.



	Mascarillas para Traqueostomía	PM: 261-179
---	---------------------------------------	-------------

3.3 Combinación del Producto Médico con otros productos

Las mascarillas de traqueostomía trabajan conectadas a un tubo de traqueotomía y pueden utilizarse con humidificadores nebulizadores.

3.4 Instalación y mantenimiento del Producto Médico

La instalación de estos productos médicos consiste básicamente en el conocimiento de la terapia inhalatoria y sus características. Podemos indicar las siguientes recomendaciones de instalación y mantenimiento

- Realizar lavado de manos.
- Preparar el equipo y llevarlos al lado del paciente.
- Informar al paciente del procedimiento, pidiendo su colaboración.
- Colocar al paciente sentado o incorporarle la cabecera si está encamado.
- Colocar el caudalímetro en la toma adecuada y enroscar en éste la conexión.
- Introducir el suero fisiológico en el vaso nebulizador.
- Enroscar el vaso a la mascarilla, conectar la alargadera al vaso nebulizador y a la conexión que tenemos colocada en el tubo de aire o de oxígeno.
- Regular el flujo de aire o de oxígeno hasta conseguir una fina nebulización / humidificación.
- Comprobar la correcta salida de vaho por la mascarilla.
- Colocar la mascarilla al usuario.
- Mantener la nebulización de 10 a 15 minutos.
- Retirar el equipo.
- Proporcionar agua para enjuagar la cavidad oral.
- Acomodar al paciente si este estuviera encamado.
- Limpiar y recoger el material reutilizable.
- Lavado de manos.
- Informar al paciente, en el caso de que sea un paciente ambulatorio cuyo tratamiento va a durar varias sesiones, que debe limpiar el equipo con agua caliente para mejor cuidado y mantenimiento del mismo.

3.5 Implantación del Producto Médico

No Corresponde (no es un Producto Médico implantable).


3.6 Riesgos de interferencia recíproca


No Corresponde (no es un producto médico activo).

UNIC COMPANY S.R.L.
Gabriel O. Federico
SOCIO GERENTE

Firm. MARIANA MUSSE
M.N. 13315
DIRECTORA TÉCNICA
UNIC COMPANY S.R.L.

3593

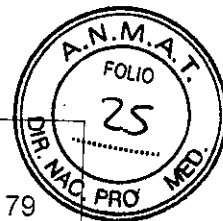

	Mascarillas para Traqueostomía	PM: 261-179
---	--------------------------------	-------------

3.7 Rotura del envase e indicación de los métodos adecuados de re esterilización

No Corresponde (no es un producto médico estéril no posee envase protector de la esterilidad, por lo tanto, no corresponde la indicación de los métodos adecuados de reesterilización).

3.8 Limpieza, desinfección, acondicionamiento y método de esterilización

Es recomendable la limpieza diaria de: mascarillas, vasos y humidificadores con agua caliente o tibia con jabón detergente, dejándolo empapar aproximadamente durante 15 minutos. Posteriormente quite cualquier cosa que se haya pegado en el equipo. Enjuáguelo con agua caliente. Sacuda el agua y déjelo secar. No poseen métodos de esterilización.

3.9 Tratamiento y procedimiento adicional antes de utilizar el Producto Médico Utilización

Preparación del paciente

- Informar al paciente, teniendo en cuenta su nivel de comprensión, la razón de la administración terapias inhalatorias.
- Explicarle que, la duración del tratamiento, dependerá de la evolución de su proceso.
- Comprobar que el paciente, la hora, la vía de administración son los establecidos en la prescripción médica.
- Verificar la no existencia de alergias.

3.10 Naturaleza, tipo, intensidad y distribución de la radiación con fines médicos

No Corresponde (el Producto Médico no emite radiaciones con fines médicos).


3.11 Precauciones en caso de cambio de funcionamiento


En caso de algún cambio de funcionamiento en el producto, el operador debe comunicarse con el representante oficial de Intersurgical.


UNIC COMPANY S.R.L.
Gabriel C. Federico
SOCIO GERENTE


Ej. M. MARIANA MUSSE 7
M.N. 13315
DIRECTORA TÉCNICA
UNIC COMPANY S.R.L.

3593

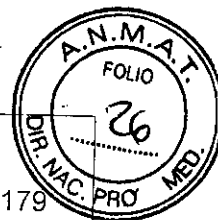

	Mascarillas para Traqueostomía	PM: 261-179
---	--------------------------------	-------------

3.12 Precauciones que deben adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o variaciones de presión, entre otras.

No Corresponde (el Producto Médico no presenta riesgo en lo que respecta a la exposición a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o sus variaciones).

3.13 Medicamentos que el Producto Médico está destinado a administrar

No administra medicamentos.

3.14 Precauciones en la eliminación del Producto Médico

No Corresponde (el Producto Médico no presenta un riesgo no habitual específico asociado a su eliminación).

3.15 Medicamentos incluidos en el Producto Médico

No Corresponde (el Producto Médico no incluye medicamento como parte integrante del mismo).

3.16 Grado de precisión atribuido a los Productos Médicos de medición

No corresponde (el producto Médico no ha sido diseñado para realizar mediciones).

UNIC COMPANY S.R.L.
Gabriel O. Federico
SOCIO GERENTE


Farm. MARIANA MUSSE
M.N. 13315
DIRECTORA TÉCNICA
UNIC COMPANY S.R.L.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT*

ANEXO
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N°: 1-47-3110-130-15-1

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° **3593**, y de acuerdo con lo solicitado por Unic Company S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Máscaras para traqueostomía

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 12-460, Mascarillas para Traqueostomias, de Administración de Aerosoles

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Intersurgical

Clase de Riesgo: II

Indicación/es autorizada/s: Las mascarillas se utilizan para la administración de terapias inhalatorias a pacientes con traqueostomía, con fines terapéuticos y de humidificación.

Las indicaciones de la terapia con aerosoles son muchas, sin embargo, algunas de las principales que podemos encontrar son:

- Inflamación de vías aéreas superiores
- Enfermedades de la vía aérea inferior

- Humidificación del gas entregado
- Fluidificación de secreciones.
- Modelo/s:
- 1200000: Mascarilla Traqueostomia Adulto
- 1200050: Eco Mascarilla Traqueostomia Adulto
- 1206000: Mascarilla Traqueostomia Pediátrica

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante:


- 1- Intersurgical Ltd
- 2- Intersurgical (Guernsey) Limited
- 3- Intersurgical UAB
- 4- Intersurgical S.p.A.

Lugar/ es de elaboración:

- 1- Crane House, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire RG41 2RZ,
Reino Unido
- 2- Circuit House, Pitronnerie Road Industrial Estate, St. Peter Port, Guernsey
GY1 2RL Reino Unido
- 3- Arnioniu 60/28-1, 18170 Pabrade, Lithuania
- 4- Via Morandi, 12, 41037 Mirandola MO, Italia

Nombre del fabricante contratado:

- 1-Haiyan Kangyuan Medical Instrument
- 2-Well Lead Medical Co Ltd
- 3- Suzhou Weikang Medical Apparatus Co Ltd.

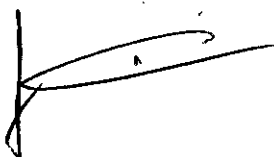



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

- 4- Foremount Enterprise Co Ltd
- 5- Hsiner
- 6- Vitaltec Corporation
- 7- Scope Medical Devices Private Limited

Dirección (incluyendo Ciudad y País)

- 1- Songpodong Rd, Shendang Town , Haiyan, Zhejiang 314311, China
- 2- C-4 Jinhui Industrial Estate, Hualong, 511434 Panyu, Guangzhou, China
- 3- No 89 Wangmi Street, Jianlin Rd, Suzhou New District, Jiangsu, China
215129
- 4- No 17 Alley 15 Lane, 5 Shenan Street, Shengang Hsiang, Taichung,
Taiwan, China
- 5- No. 312, Jhongshang Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan
- 6- No. 12. Lane 4-30, Chyuan-Zhou Rd, Hou-Li Hsiang, Taichung, Taiwan,
China
- 7- Plot No. 11/10, Jaraut Road, Mandour, Ambala City - 134 003, India

Se extiende a Unic Company S.R.L. el Certificado de Autorización e Inscripción
del PM-261-179, en la Ciudad de Buenos Aires, a 05 MAY 2015
siendo su
vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº **3593**


Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.