



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° **7433**

BUENOS AIRES, 14 SEP 2015

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-3020-14-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma CROSMED S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1552-40, denominado PRÓTESIS DE RODILLA, marca WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 1490/92, 1886/14 y 1368/15.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1552-40, correspondiente al producto médico denominado: PRÓTESIS DE RODILLA, marca WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY, propiedad de la firma CROSMED S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 3181 de

f LV



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 7433

fecha 18 de junio de 2010 y sus rectificatorias y modificatorias, según lo establecido en el Anexo que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1552-40, denominado: PRÓTESIS DE RODILLA, marca WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY.

ARTÍCULO 3º.- Acéptese el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1552-40.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Autorización de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-3020-14-7

DISPOSICIÓN N°

msm

DR. LEONARDO YERNA
SUBADMINISTRADOR NACIONAL
DECRETO N° 1368/2015
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° 3181/10, a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1552-40 y de acuerdo a lo solicitado por la firma CROSMED S.A., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: PRÓTESIS DE RODILLA.

Marca: WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 3181/10.

Tramitado por expediente N° 1-47-9658-9-8.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	18 de junio de 2015	18 de junio de 2020
Nombre del Fabricante	Wright Medical Technology Inc.	Microport Orthopedics Inc.
Marca	Wright Medical Technology	Microport Orthopedics Inc.
Modelos	KITC520L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 5, 20 MM IZQUIERDO KITC520R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 5, 20 MM DERECHO KIDH214R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 2, DERECHO 14 MM KIPS1412 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 12 MM KITC314L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 3, 14 MM IZQUIERDO KITC410L INSERTO PIVOTANTE	KFTCPC1L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO, IZQUIERDO # 1 KFTCPC1R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO, DERECHO # 1 KFTCPC2L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO, IZQUIERDO # 2 KFTCPC2R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO, DERECHO # 2

✓ LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

MEDIAL NRO 4, 10 MM IZQUIERDO KTPSA420 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 20 MM KIPS0120 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1, 20 MM KIPS0125 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1, 25 MM KIPS1210 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 2, 10 MM KIPS1212 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 2, 12 MM KIPS0214 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 2, 14 MM KIPS0217 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 2, 17 MM KTAGB210 AUMENTO TIBIAL SZ. 2 X 10 MM KTAGB215 AUMENTO TIBIAL SZ. 2 X 15 MM KTAGB305 AUMENTO TIBIAL SZ. 3 X 5 MM KTAGB310 AUMENTO TIBIAL SZ. 3 X 10 MM KTAGB315 AUMENTO TIBIAL SZ. 3 X 15 MM KTAGB405 AUMENTO TIBIAL SZ. 4 X 5 MM KTAGB410 AUMENTO TIBIAL SZ. 4 X 10 MM KTAGB415 AUMENTO TIBIAL SZ. 4 X 15 MM KTAGB505 AUMENTO TIBIAL SZ. 5 X 5 MM KSC16100 TALLO MODULAR 16 X 100 MM KSC18100 TALLO MODULAR 18 X 100 MM KTTIPC11 BASE TIBIAL MODULAR POROSA TI NRO 1+ KTTIPC21 BASE TIBIAL MODULAR POROSA TI NRO 2+ KTTIPC31 BASE TIBIAL	KFTCPC3L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO, IZQUIERDO # 3 KFTCPC3R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO, DERECHO # 3 KFTCPC4L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO, IZQUIERDO # 4 KFTCPC4R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO, DERECHO # 4 KFTCPC5L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO, IZQUIERDO # 5 KFTCPC5R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO, DERECHO # 5 KFTCPC6L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO, IZQUIERDO # 6 KFTCPC6R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO, DERECHO # 6 KFCPC15L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO, IZQUIERDO # 1.5 KFCPC15R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO, DERECHO # 1.5 KFTCNP1L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO, IZQUIERDO # 1 KFTCNP1R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO, DERECHO # 1 KFTCNP2L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL
---	--

LV



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.N.M.I.T.*

MODULAR POROSA TI NRO 3+ KTTIPC41 BASE TIBIAL MODULAR POROSA TI NRO 4+ KTTIPC51 BASE TIBIAL MODULAR POROSA TI NRO 5+ KTCCNP10 BASE TIBIAL COCR NO POROSO # 1 ESTÁNDAR KTCCNP11 BASE TIBIAL COCR NO POROSO # 1+ KTCCNP20 BASE TIBIAL COCR NO POROSO # 2 ESTÁNDAR KTCCNP21 BASE TIBIAL COCR NO POROSO # 2+ KMPL1514 INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1.5, 14 MM KSP14140 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 15 X 140 MM KITC325L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 3, 25 MM IZQUIERDO KIRV112S INSERTO DE REVISIÓN SZ 1 ESTANDAR 12 MM KIRV114S INSERTO DE REVISIÓN SZ 1 ESTANDAR 14 MM KIRV610S INSERTO DE REVISION SZ 6 ESTANDAR 10 MM KIRV612S INSERTO DE REVISION SZ 6 ESTANDAR 12 MM KIRV614S INSERTO DE REVISION SZ 6 ESTANDAR 14 MM KITC3510 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 5, 10 MM KIRV220S INSERTO DE REVISIÓN SZ 2 ESTANDAR 20 MM KFCCNP4R COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN SZ. 4 NO POROSO KITC214R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 2, 14 MM DERECHO KITC620L INSERTO PIVOTANTE	PRIMARIO NO POROSO, IZQUIERDO # 2 KFTCNP2R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO, DERECHO # 2 KFTCNP3L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO, IZQUIERDO # 3 KFTCNP3R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO, DERECHO # 3 KFTCNP4L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO, IZQUIERDO # 4 KFTCNP4R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO, DERECHO # 4 KFTCNP5L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO, IZQUIERDO # 5 KFTCNP5R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO, DERECHO # 5 KFTCNP6L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO, IZQUIERDO # 6 KFTCNP6R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO, DERECHO # 6 KFCNP15L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO, IZQUIERDO # 1.5 KFCNP15R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO, DERECHO # 1.5 KFPSNP10 ADVANCE COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 1,
--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.*

MEDIAL NRO 6, 20 MM IZQUIERDO KITC620R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 6, 20 MM DERECHO KITC625L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 6, 25 MM IZQUIERDO KITC625R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 6, 25 MM DERECHO KITC217L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 2, 17 MM IZQUIERDO KITC217R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 2, 17 MM DERECHO KITC220L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 2, 20 MM IZQUIERDO KITC220R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 2, 20 MM DERECHO KFTCHA4L COMPONENTE FEMORAL CUBIERTO HA 4 IZQUIERDO KFTCHA4R COMPONENTE FEMORAL CUBIERTO HA 4 DERECHO KFTCHA5L COMPONENTE0 FEMORAL CUBIERTO HA 5 IZQUIERDO KFTCHA5R COMPONENTE FEMORAL CUBIERTO HA 5 DERECHO KFTCHA6L COMPONENTE FEMORAL CUBIERTO HA 6 IZQUIERDO KFTCHA6R COMPONENTE FEMORAL CUBIERTO HA 6 DERECHO KTTIHA10 COMPONENTE TIBIAL CUBIERTO HA NRO 1 KTTIHA11 COMPONENTE TIBIAL CUBIERTO HA NRO 1+ KTTIHA20 COMPONENTE TIBIAL CUBIERTO HA NRO 2 KIRV117M INSERTO DE REVISION SZ 1, 17 MM KITC310L INSERTO PIVOTANTE	NO POROSO KFPSNP20 ADVANCE COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 2, NO POROSO KFPSNP30 ADVANCE COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 3, NO POROSO KFPSNP40 ADVANCE COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 4, NO POROSO KFPSNP50 ADVANCE COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 5, NO POROSO KFPSNP60 ADVANCE COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 6, NO POROSO KFPSNP1U ADVANCE COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 1, NO POROSO KFPSNP2U ADVANCE COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 2, NO POROSO KFPSNP3U ADVANCE COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 3, NO POROSO KFPSNP4U ADVANCE COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 4, NO POROSO KFPSNP5U ADVANCE COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 5, NO POROSO KFPSNP6U ADVANCE COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 6, NO POROSO KFRVNP1L ADVANCE CCK COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO # 1 IZQUIERDO KFRVNP2L ADVANCE CCK
--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

MEDIAL NRO 3, 10 MM IZQUIERDO KITC310R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 3, 10 MM DERECHO KTSPNP10 BASE TIBIAL NO POROSA NRO 1 KTSPNP11 BASE TIBIAL NO POROSA NRO 1+ KTAOB610 AUMENTO TIBIAL OFFSET 6 X 10 MM KTAOB615 AUMENTO TIBIAL OFFSET 6 X 15 MM KIDH112L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 1, IZQ. 12 MM KIDH220R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 2, DERECHO 20 MM KIDH225L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 2, IZQ. 25 MM KIDH225R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 2, DERECHO 25 MM KIDH310L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 3, IZQ. 10 MM KIDH310R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 3, DERECHO 10 MM KIDH312L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 3, IZQ. 12 MM KSC20100 TALLO MODULAR 20 X 100 MM KSC22100 TALLO MODULAR 22 X 100 MM KSC10140 TALLO MODULAR 10 X 140 MM KSC12140 TALLO MODULAR 12 X 140 MM KSC14140 TALLO MODULAR 14 X 140 MM KDHR1510 INSERTO TIBIAL DOBLE ADVANCE SIZE 1.5 DERECHO 10 MM KPONTP35ST PATELA 35 MM X 10 MM SINGLE PEG	COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO # 2 IZQUIERDO KFRVNP3L ADVANCE CKK COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO # 3 IZQUIERDO KFRVNP4L ADVANCE CKK COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO # 4 IZQUIERDO KFRVNP5L ADVANCE CKK COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO # 5 IZQUIERDO KFRVNP6L ADVANCE CKK COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO # 6 IZQUIERDO KFRVNP1R ADVANCE CKK COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO # 1 DERECHO KFRVNP2R ADVANCE CKK COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO # 2 DERECHO KFRVNP3R ADVANCE CKK COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO # 3 DERECHO KFRVNP4R ADVANCE CKK COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO # 4 DERECHO KFRVNP5R ADVANCE CKK COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO # 5 DERECHO KFRVNP6R ADVANCE CKK COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO # 6 DERECHO KFCCNP1L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL DE REVISION # 1 NO POROSO, IZQUIERDO KFCCNP1R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL DE
--	--

f LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

KPONT38SP PATELA 38 MM X 10 MM SINGLE PEG KIDH417R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 4, DERECHO 17 MM KITC120R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 1, 20 MM DERECHO KTNPUN40 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METAL NRO 4 KIUN0108 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 1 X 8 MM KIUN0109 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 1 X 9 MM KIUN0110 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 1 X 10 MM KIUN0111 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 1 X 11 MM KIUN0112 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 1 X 12 MM KIUN0208 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 2 X 8 MM KIPS2325 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 22 MM KFPSNP20 COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 2 KIRV317S INSERTO DE REVISIÓN SZ 3 ESTANDAR 17 MM KITC610L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 6, 10 MM IZQUIERDO KITC610R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 6, 10 MM DERECHO KSP16140 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 17 X 140 MM KIPS0314 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 14 MM KITC314R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 3, 14 MM DERECHO	REVISIÓN # 1 NO POROSO, DERECHO KFCCNP2L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN # 2 NO POROSO, IZQUIERDO KFCCNP2R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN # 2 NO POROSO, DERECHO KFCCNP3L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN # 3 NO POROSO, IZQUIERDO KFCCNP3R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN # 3 NO POROSO, DERECHO KFCCNP4L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN # 4 NO POROSO, IZQUIERDO KFCCNP4R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN # 4 NO POROSO, DERECHO KFCCNP5L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN # 5 NO POROSO, IZQUIERDO KFCCNP5R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN # 5 NO POROSO, DERECHO KFCCNP6L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN # 6 NO POROSO, IZQUIERDO KFCCNP6R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN # 6 NO POROSO, DERECHO KFPAN105 ADVANCE AUMENTO FEMORAL POSTERIOR # 1 X 5 MM KFPAN110 ADVANCE AUMENTO FEMORAL POSTERIOR # 1 X 10 MM KFPAN205 ADVANCE AUMENTO FEMORAL POSTERIOR # 2 X 5
--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

KFSCNP6L COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO C/VÁSTAGO SZ 6 IZQ KIDH425R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 4, DERECHO 25 MM KFTCHA2R COMPONENTE FEMORAL CUBIERTO HA 2 DERECHO KFTCHA3L COMPONENTE FEMORAL CUBIERTO HA 3 IZQUIERDO KFTCHA3R COMPONENTE FEMORAL CUBIERTO HA 3 DERECHO KIDH212L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 2, IZQ. 12 MM KSP20140 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 21 X 140 MM KTTIPC5U BASE TIBIAL POROSA TI NRO 5 KTTIPC5P BASE TIBIAL POROSA TI NRO 5+ KTTIPC6U BASE TIBIAL POROSA TI NRO 6 KPONTP41SP PATELA 41 MM X 11 MM SINGLE PEG KIDH410L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 4, IZQ. 10 MM KIMP620R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 6, 20 MM KDHR1525 INSERTO TIBIAL DOBLE ADVANCE SIZE 1.5 DERECHO 25 MM KITC514L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 5, 14 MM IZQUIERDO KFSCPC5R COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO NRO 5 DCHO KFSCPC6L COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO NRO 6 IZQ	MM KFPAN210 ADVANCE AUMENTO FEMORAL POSTERIOR # 2 X 10 MM KFPAN305 ADVANCE AUMENTO FEMORAL POSTERIOR # 3 X 5 MM KFPAN310 ADVANCE AUMENTO FEMORAL POSTERIOR # 3 X 10 MM KFPAN405 ADVANCE AUMENTO FEMORAL POSTERIOR # 4 X 5 MM KFPAN410 ADVANCE AUMENTO FEMORAL POSTERIOR # 4 X 10 MM KFPAN505 ADVANCE AUMENTO FEMORAL POSTERIOR # 5 X 5 MM KFPAN510 ADVANCE AUMENTO FEMORAL POSTERIOR # 5 X 10 MM KFPAN605 ADVANCE AUMENTO FEMORAL POSTERIOR # 6 X 5 MM KFPAN610 ADVANCE AUMENTO FEMORAL POSTERIOR # 6 X 10 MM KFDAN105 ADVANCE AUMENTO FEMORAL DISTAL # 1 X 5 MM KFDAN110 ADVANCE AUMENTO FEMORAL DISTAL # 1 X 10 MM KFDAN205 ADVANCE AUMENTO FEMORAL DISTAL # 2 X 5 MM KFDAN210 ADVANCE AUMENTO FEMORAL DISTAL # 2 X 10 MM KFDAN305 ADVANCE AUMENTO FEMORAL DISTAL # 3 X 5 MM KFDAN310 ADVANCE AUMENTO FEMORAL DISTAL # 3 X 10 MM KFDAN405 ADVANCE AUMENTO FEMORAL DISTAL # 4 X 5 MM KFDAN410 ADVANCE AUMENTO FEMORAL DISTAL # 4 X 10 MM KFDAN505 ADVANCE AUMENTO FEMORAL DISTAL # 5 X 5 MM KFDAN510 ADVANCE AUMENTO FEMORAL DISTAL # 5 X 10 MM KFDAN605 ADVANCE AUMENTO
---	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

KFSCPC6R COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO NRO 6 DCHO	FEMORAL DISTAL # 6 X 5 MM
KFNPUN1L COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL NRO 1 IZQUIERDO	KFDAN610 ADVANCE AUMENTO FEMORAL DISTAL # 6 X 10 MM
KTTIHA50 COMPONENTE TIBIAL CUBIERTO HA NRO 5	KITC110L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 1, 10 MM, IZQUIERDO
KTTIHA51 COMPONENTE TIBIAL CUBIERTO HA NRO 5+	KITC110R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 1, 10 MM, DERECHO
KPRC25HI PATELA ALL POLLY 25 MM	KITC112L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 1, 12 MM, IZQUIERDO
KPRC25LO PATELA ALL POLLY 25 MM	KITC112R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 1, 12 MM, DERECHO
KPRC28HI PATELA ALL POLLY 28 MM	KITC114L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 1, 14 MM, IZQUIERDO
KPRC28LO PATELA ALL POLLY 28 MM	KITC114R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 1, 14 MM, DERECHO
KSP10100 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 11 X 100 MM	KITC117L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 1, 17 MM, IZQUIERDO
KSP10140 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 11 X 140 MM	KITC117R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 1, 17 MM, DERECHO
KSP10200 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 11 X 200 MM	KITC120L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 1, 20 MM, IZQUIERDO
KSP11100 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 12 X 100 MM	KITC120R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 1, 20 MM, DERECHO
KSP11140 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 12 X 140 MM	KITC125L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 1, 25 MM, IZQUIERDO
KSP11200 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 12 X 200 MM	KITC125R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 1, 25 MM, DERECHO
KSC10100 TALLO MODULAR 10 X 100 MM	KITC210L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 2, 10 MM, IZQUIERDO
KSC12100 TALLO MODULAR 12 X 100 MM	KITC210R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 2, 10 MM, DERECHO
KIDH120R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 1, DCHO 20 MM	KITC212L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 2, 12 MM, IZQUIERDO
KIDH125L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 1, IZQ. 25 MM	KITC212R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 2, 12 MM,
KIRV412S INSERTO DE REVISIÓN SZ 4 ESTANDAR 12 MM	



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
A.N.M.H.T.*

KIPS2520 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5, 20 MM KIPS2525 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5, 25 MM KIPS2610 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6, 10 MM KITC614R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 6, 14 MM DERECHO KITC617L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 6, 17 MM IZQUIERDO KITC617R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL 6, 17 MM DERECHO KITC3110 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 1, 10 MM KTPSA312 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 12 MM KTPSA314 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 14 MM KTPSA317 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 17 MM KTPSA320 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 20 MM KIPS0325 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 25 MM KFPAN510 AUMENTO FEMORAL POSTERIOR 5 X 10 MM KIPS0414 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 14 MM KMPL1520 INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1.5, 20 MM KTTIPC4U BASE TIBIAL POROSA TI NRO 4 SPKT0044 TALLO MODULAR CRUCIFORME 5-6 CUBIERTA HA KIPS0114 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1, 14 MM	DERECHO KITC214L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 2, 14 MM, IZQUIERDO KITC214R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 2, 14 MM, DERECHO KITC217L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 2, 17 MM, IZQUIERDO KITC217R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 2, 17 MM, DERECHO KITC220L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 2, 20 MM, IZQUIERDO KITC220R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 2, 20 MM, DERECHO KITC225L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 2, 25 MM, IZQUIERDO KITC225R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 2, 25 MM, DERECHO KITC310L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 3, 10 MM, IZQUIERDO KITC310R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 3, 10 DERECHO KITC312L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 3, 12 MM, IZQUIERDO KITC312R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 3, 12 MM, DERECHO KITC314L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 3, 14 MM, IZQUIERDO KITC314R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 3, 14 MM, DERECHO KITC317L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 3, 17 MM, IZQUIERDO KITC317R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 3, 17 MM, DERECHO
---	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

KTIP20 BASE TIBIAL MODULAR POROSA TI NRO 2 KFDAN205 AUMENTO FEMORAL DISTAL 2 X 5 MM KFDAN210 AUMENTO FEMORAL DISTAL 2 X 10 MM KFDAN305 AUMENTO FEMORAL DISTAL 3 X 5 MM KFDAN310 AUMENTO FEMORAL DISTAL 3 X 10 MM KFDAN405 AUMENTO FEMORAL DISTAL 4 X 5 MM KFDAN410 AUMENTO FEMORAL DISTAL 4 X 10 MM KFDAN505 AUMENTO FEMORAL DISTAL 5 X 5 MM KIRV110M INSERTO DE REVISION SZ 1, 10 MM KIRV112M INSERTO DE REVISION SZ 1, 12 MM KIRV114M INSERTO DE REVISION SZ 1, 14 MM KFSCPCS5L COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO NRO 5 IZQ KIRV625S INSERTO DE REVISION SZ 6 ESTANDAR 25 MM KFPSNP40 COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4 KFPSNP50 COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5 KIPS2325 INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 25 MM KIPS1612 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6, 12 MM KIDH217R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 2, DERECHO 17 MM KTPSP110 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1, 10 MM KTPSP112 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1, 12 MM	KITC320L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 3, 20 MM, IZQUIERDO KITC320R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 3, 20 MM, DERECHO KITC325L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 3, 25 MM, IZQUIERDO KITC325R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 3, 25 MM, DERECHO KITC410L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 4, 10 MM, IZQUIERDO KITC410R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 4, 10 MM, DERECHO KITC412L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 4, 12 MM, IZQUIERDO KITC412R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 4, 12 MM, DERECHO KITC414L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 4, 14 MM, IZQUIERDO KITC414R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 4, 14 MM, DERECHO KITC417L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 4, 17 MM, IZQUIERDO KITC417R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 4, 17 MM, DERECHO KITC420L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 4, 20 MM, IZQUIERDO KITC420R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 4, 20 MM, DERECHO KITC425L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 4, 25 MM, IZQUIERDO KITC425R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 4, 25 MM, DERECHO KITC510L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 5, 10 MM,
--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

KTPSP114 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1, 14 MM KTPSP117 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1, 17 MM KTPSP120 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1, 20 MM KTTINP10 BASE TIBIAL MODULAR NO POROSA TI SZ.1 KTTINP20 BASE TIBIAL MODULAR NO POROSA TI SZ.2 KTTINP25 BASE TIBIAL MODULAR NO POROSA TI SZ.2.5 KTTINP30 BASE TIBIAL MODULAR NO POROSA TI SZ.3 KTTINP40 BASE TIBIAL MODULAR NO POROSA TI SZ.4 KTTINP50 BASE TIBIAL MODULAR NO POROSA TI SZ.5 KTTINP60 BASE TIBIAL MODULAR NO POROSA TI SZ.6 KTTINP11 BASE TIBIAL MODULAR NO POROSA TI SZ.1+ KTTINP21 BASE TIBIAL MODULAR NO POROSA TI SZ.2+ KTTINP31 BASE TIBIAL MODULAR NO POROSA TI SZ.3+ KIDH525L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 5, IZQ. 25 MM KIDH525R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 5, DERECHO 25 MM KITC3317 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 3, 17 MM KITC3320 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 3, 20 MM KITC3325 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 3, 25 MM KIDH412R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 4, DERECHO 12 MM KIDH414L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 4, IZQ. 14 MM KIDH414R INSERTO TIBIAL	IZQUIERDO KITC510R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 5, 10 MM, DERECHO KITC512L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 5, 12 MM, IZQUIERDO KITC512R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 5, 12 MM, DERECHO KITC514L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 5, 14 MM, IZQUIERDO KITC514R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 5, 14 MM, DERECHO KITC517L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 5, 17 MM, IZQUIERDO KITC517R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 5, 17 MM, DERECHO KITC520L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 5, 20 MM, IZQUIERDO KITC520R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 5, 20 MM, DERECHO KITC525L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 5, 25 MM, IZQUIERDO KITC525R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 5, 25 MM, DERECHO KITC610L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 6, 10 MM, IZQUIERDO KITC610R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 6, 10 MM, DERECHO KITC612L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 6, 12 MM, IZQUIERDO KITC612R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 6, 12 MM, DERECHO KITC614L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 6, 14 MM, IZQUIERDO
--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.

ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 4, DERECHO 14 MM KTAGW425 AUMENTO TIBIAL 25º, SZ. 4 KTAGW525 AUMENTO TIBIAL 25º, SZ. 5 KTAGW625 AUMENTO TIBIAL 25º, SZ. 6 KITC3410 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 4, 10 MM KITC3412 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 4, 12 MM KITC3414 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 4, 14 MM KITC3417 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 4, 17 MM KITC3420 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 4, 20 MM SPKIO036 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METALICO 1 X 10 MM KFTCHA1R COMPONENTE FEMORAL CUBIERTO HA 1 DERECHO KFTCHA2L COMPONENTE FEMORAL CUBIERTO HA 2 IZQUIERDO KMPL1510 INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1.5, 10 MM KIMP410R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 4, 10 MM KIMP412L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 4, 12 MM KFSCNP3R COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO C/VÁSTAGO SZ 3DCHA KTTIPC1P BASE TIBIAL POROSA TI NRO 1+ KIMP320R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 3, 20 MM KIMP114L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1, 14 MM KIUN0411 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 4 X 11 MM	KITC614R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 6, 14 MM, DERECHO KITC617L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 6, 17 MM, IZQUIERDO KITC617R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 6, 17 MM, DERECHO KITC620L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 6, 20 MM, IZQUIERDO KITC620R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 6, 20 MM, DERECHO KITC625L ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 6, 25 MM, IZQUIERDO KITC625R ADVANCE INSERTO PIVOTANTE MEDIAL # 6, 25 MM, DERECHO KITC3110 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 1, 10 MM KITC3112 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 1, 12 MM KITC3114 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 1, 14 MM KITC3117 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 1, 17 MM KITC3120 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 1, 20 MM KITC3125 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 1, 25 MM KITC3210 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 2, 10 MM KITC3212 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 2, 12 MM KITC3214 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 2, 14 MM KITC3217 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 2, 17 MM KITC3220 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 2, 20 MM KITC3225 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 2, 25 MM KITC3310 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 3, 10 MM KITC3312 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 3, 12 MM KITC3314 INSERTO TIBIAL
--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

KIUN0412 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 4 X 12 MM KTAGW215 AUMENTO TIBIAL 15°, SZ. 2 KFRVNP3R COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO NRO 3 DERECHO KIMP314L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 3, 14 MM KTCCNP30 BASE TIBIAL COCR NO POROSO # 3 ESTÁNDAR KTCCNP31 BASE TIBIAL COCR NO POROSO # 3+ KITC114L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 1, 14 MM IZQUIERDO KITC114R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 1, 14 MM DERECHO KITC517R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 5, 17 MM DERECHO KFRVNP6R COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO NRO 6 DERECHO KITP2510 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 5, 10 MM KITP2512 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 5, 12 MM KITP2514 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 5, 14 MM KITP2517 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 5, 17 MM KITP2520 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 5, 20 MM KITP2525 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 5, 25 MM KFTCPC5L COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO IZQUIERDO NRO 5 KFTCPC5R COMPONENTE	TRADICIONAL # 3, 14 MM KITC3317 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 3, 17 MM KITC3320 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 3, 20 MM KITC3325 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 3, 25 MM KITC3410 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 4, 10 MM KITC3412 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 4, 12 MM KITC3414 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 4, 14 MM KITC3417 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 4, 17 MM KITC3420 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 4, 20 MM KITC3425 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 4, 25 MM KITC3510 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 5, 10 MM KITC3512 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 5, 12 MM KITC3514 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 5, 14 MM KITC3517 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 5, 17 MM KITC3520 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 5, 20 MM KITC3525 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 5, 25 MM KITC3610 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 6, 10 MM KITC3612 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 6, 12 MM KITC3614 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 6, 14 MM KITC3617 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 6, 17 MM KITC3620 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 6, 20 MM KITC3625 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL # 6, 25 MM KIMP110L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1, 10 MM KIMP110R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 1, 10 MM
--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

FEMORAL PRIMARIO POROSO DERECHO NRO 5 KFTCPC6L COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO IZQUIERDO NRO 6 KFTCPC6R COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO DERECHO NRO 6 KFCPC15L COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO IZQUIERDO NRO 1.5 KFCPC15R COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO DERECHO NRO 1.5 KFTCPC1L COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO IZQUIERDO NRO 1 KFTCPC1R COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO DERECHO NRO 1 KFTCPC2L COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO IZQUIERDO NRO 2 KFTCPC2R COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO DERECHO NRO 2 KFTCPC3L COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO IZQUIERDO NRO 3 KFTCPC3R COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO DERECHO NRO 3 KFTCPC4L COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO IZQUIERDO NRO 1 KFTCPC4R COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO POROSO DERECHO NRO 4 KFTCNP1L COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO IZQUIERDO # 1 KFTCNP1R COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO DERECHO # 1 KIRV512S INSERTO DE REVISION SZ 5 ESTANDAR 12 MM KIRV514S INSERTO DE REVISION SZ 5 ESTANDAR 14 MM	KMPL1510 ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE. IZQUIERDO # 1.5, 10 MM KMPL1510 ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 1.5, 10 MM KMPL1512 ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1.5, 12 MM KMPL1512 ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 1.5, 12 MM KMPL1514 ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1.5, 14 MM KMPL1514 ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 1.5, 14 MM KMPL1517 ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1.5, 17 MM KMPL1517 ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 1.5, 17 MM KMPL1520 ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1.5, 20 MM KMPL1520 ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 1.5, 20 MM KIMP112L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1, 12 MM KIMP112R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 1, 12 MM KIMP114L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1, 14 MM KIMP114R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 1, 14 MM KIMP117L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1, 17 MM KIMP117R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 1, 17 MM KIMP120L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE
--	---

LV



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
I.N.M.H.T.*

KIPS2410 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 10 MM KIPS2412 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 12 MM KTONP51L BASE TIBIAL OFFSET 5 + IZQUIERDA NO POROSA KTONP51R BASE TIBIAL OFFSET 5 + DERECHA NO POROSA KIDH210L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 2, IZQ. 10 MM KIMP514L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 5, 14 MM KIUN0308 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 3 X 8 MM KFSCNP3L COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO C/VÁSTAGO SZ 3 IZQ KIRV520S INSERTO DE REVISION SZ 5 ESTANDAR 20 MM KTTIPC2U BASE TIBIAL POROSA TI NRO 2 KFDAN110 AUMENTO FEMORAL DISTAL 1 X 10 MM KTAOB115 AUMENTO TIBIAL OFFSET 1 X 15 MM KTAOB205 AUMENTO TIBIAL OFFSET 2 X 5 MM KTAOB210 AUMENTO TIBIAL OFFSET 2 X 10 MM KTAOB215 AUMENTO TIBIAL OFFSET 2 X 15 MM KTAOB305 AUMENTO TIBIAL OFFSET 3 X 5 MM KTAOB310 AUMENTO TIBIAL OFFSET 3 X 10 MM KTAOB315 AUMENTO TIBIAL OFFSET 3 X 15 MM KTSPPC31 BASE TIBIAL POROSA CUBIERTA NRO 3+1 KTSPPC40 BASE TIBIAL POROSA CUBIERTA NRO 4 KSTMSP12 TALLO TIBIAL ADVANCE DE FIJACIÓN CON	IZQUIERDO # 1, 20 MM KIMP120R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 1, 20 MM KIMP125L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1, 25 MM KIMP125R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 1, 25 MM KIMP210L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 2, 10 MM KIMP210R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 2, 10 MM KIMP212L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 2, 12 MM KIMP212R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 2, 12 MM KIMP214L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 2, 14 MM KIMP214R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 2, 14 MM KIMP217L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 2, 17 MM KIMP217R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 2, 17 MM KIMP220L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 2, 20 MM KIMP220R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 2, 20 MM KIMP225L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 2, 25 MM KIMP225R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 2, 25 MM KIMP310L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 3, 10 MM
---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

PÚA KSPM1512 QUILLA MODULAR, 15 MM X 1/2 KSPM1534 QUILLA MODULAR 15 MM X 3/4 KSPM1556 QUILLA MODULAR DE FIJACIÓN A PRESIÓN 15 MM X 5/6 KFNPN2L COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL NRO 2 IZQUIERDO KTAPUN18 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 1 X 8 MM KIMP220L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 2, 20 MM KIMP220R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 2, 20 MM KIMP225L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 2, 25 MM KIMP225R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 2, 25 MM KIMP310L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 3, 10 MM KIMP310R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 3, 10 MM KFCCNP3R COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN SZ. 3 NO POROSO KITC225L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 2, 25 MM IZQUIERDO KTTINP51 BASE TIBIAL MODULAR NO POROSA TI SZ.5+ KFCCNP4L COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN SZ. 4 NO POROSO KITC420R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 4, 20 MM DERECHO KITC425L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 4, 25 MM IZQUIERDO KITC425R INSERTO PIVOTANTE	KIMP310R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 3, 10 MM KIMP312L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 3, 12 MM KIMP312R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 3, 12 MM KIMP314L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 3, 14 MM KIMP314R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 3, 14 MM KIMP317L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 3, 17 MM KIMP317R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 3, 17 MM KIMP320L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 3, 20 MM KIMP320R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 3, 20 MM KIMP325L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 3, 25 MM KIMP325R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 3, 25 MM KIMP410L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 4, 10 MM KIMP410R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 4, 10 MM KIMP412L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 4, 12 MM KIMP412R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 4, 12 MM KIMP414L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 4, 14 MM KIMP414R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE
--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

MEDIALNRO 4, 25 MM DERECHO KITC510L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 5, 10 MM IZQUIERDO KTAGB105 AUMENTO TIBIAL SZ. 1 X 5 MM KTAGB110 AUMENTO TIBIAL SZ. 1 X 10 MM KTAGB115 AUMENTO TIBIAL SZ. 1 X 15 MM KTAGB205 AUMENTO TIBIAL SZ. 2 X 5 MM KFPSNP60 COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6 KIPS2414 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 14 MM KIPS2417 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 17 MM KIUN0309 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 3 X 9 MM KIUN0310 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 3 X 10 MM KIUN0209 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 2 X 9 MM KIUN0210 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 2 X10 MM KIUN0211 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 2 X 11 MM KIUN0212 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 2 X 12 MM KFCCNP3L COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN SZ. 3 NO POROSO KIPS2420 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 20 MM KITC317L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 3, 17 MM IZQUIERDO KITC317R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 3, 17 MM DERECHO	DERECHO # 4, 14 MM KIMP417L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 4, 17 MM KIMP417R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 4, 17 MM KIMP420L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 4, 20 MM KIMP420R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 4, 20 MM KIMP425L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 4, 25 MM KIMP425R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 4, 25 MM KIMP510L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTATE IZQUIERDO # 5, 10 MM KIMP610L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 6, 10 MM KIMP610R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 6, 10 MM KIMP612L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 6, 12 MM KIMP612R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 6, 12 MM KIMP614L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 6, 14 MM KIMP614R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 6, 14 MM KIMP617L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 6, 17 MM KIMP617R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 6, 17 MM KIMP620L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 6, 20 MM
--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

KIDH620R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 6, DERECHO 20 MM KIRV517S INSERTO DE REVISION SZ 5 ESTANDAR 17 MM KFSCNP2R COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO C/VÁSTAGO SZ 2 DCHA KIMP625R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 6, 25 MM KITC312L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 3, 12 MM IZQUIERDO KIMP114R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 1, 14 MM KIMP117L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1, 17 MM KDHL1510 INSERTO TIBIAL DOBLE ADVANCE SIZE 1.5 IZQUIERDO 10 MM KDHL1512 INSERTO TIBIAL DOBLE ADVANCE SIZE 1.5 IZQUIERDO 12 MM KDHL1514 INSERTO TIBIAL DOBLE ADVANCE SIZE 1.5 IZQUIERDO 14 MM KDHL1517 INSERTO TIBIAL DOBLE ADVANCE SIZE 1.5 IZQUIERDO 17 MM KDHL1520 INSERTO TIBIAL DOBLE ADVANCE SIZE 1.5 IZQUIERDO 20 MM KFTCPN3R COMPONENTE FEMORAL NRO 3 DERECHO POROSO KFTCPN4R COMPONENTE FEMORAL NRO 4 DERECHO POROSO KIRV120M INSERTO DE REVISION SZ 1, 20 MM KIRV125M INSERTO DE REVISION SZ 1 MINUSR 25 MM KIRV130M INSERTO DE REVISION SZ 1, 30 MM KIPS1610 INSERTO TIBIAL	KIMP620R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 6, 20 MM KIMP625L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 6, 25 MM KIMP625R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 6, 25 MM KIMP510R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 5, 10 MM KIMP512L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 5, 12 MM KIMP512R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 5, 12 MM KIMP514L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 5, 14 MM KIMP514R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 5, 14 MM KIMP517L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 5, 17 MM KIMP517R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 5, 17 MM KIMP520L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 5, 20 MM KIMP520R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 5, 20 MM KIMP525L ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 5, 25 MM KIMP525R ADVANCE II INSERTO TIBIAL MEDIAL PIVOTANTE DERECHO # 5, 25 MM KIPS1110 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 1, 10 MM KIPS1112 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 1, 12 MM KIPS0114 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR
--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6, 10 MM KIMP120L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO 1, 20 MM KIMP120R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 1, 20 MM KMPR1512 INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 1.5, 12 MM KTPSA510 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5, 10 MM KIRV217M INSERTO DE REVISION SZ 2, 17 MM KIRV220M INSERTO DE REVISION SZ 2, 20 MM KIRV225M INSERTO DE REVISION SZ 2 MINUSR 25 MM KIRV230M INSERTO DE REVISION SZ 2, 30 MM KIRV310M INSERTO DE REVISION SZ 3, 10 MM KIRV312M INSERTO DE REVISION SZ 3, 12 MM KIRV314M INSERTO DE REVISION SZ 3, 14 MM KIRV317M INSERTO DE REVISION SZ 3, 17 MM KIRV320M INSERTO DE REVISION SZ 3, 20 MM KIRV325M INSERTO DE REVISION SZ 3, 25 MM KIRV330M INSERTO DE REVISION SZ 3, 30 MM KIRV410M INSERTO DE REVISION SZ 4, 10 MM KIRV412M INSERTO DE REVISION SZ 4, 12 MM KIRV414M INSERTO DE REVISION SZ 4, 14 MM KIRV417M INSERTO DE REVISION SZ 4, 17 MM KIRV420M INSERTO DE REVISION SZ 4, 20 MM KIRV425M INSERTO DE REVISION SZ 4, 25 MM KITC3620 INSERTO TIBIAL	ESTABILIZADO # 1, 14 MM KIPS0117 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 1, 17 MM KIPS0120 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 1, 20 MM KIPS0125 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 1, 25 MM KIPS1210 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 2, 10 MM KIPS1212 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 2, 12 MM KIPS0214 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 2, 14 MM KIPS0217 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 2, 17 MM KIPS0220 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 2, 20 MM KIPS0225 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 2, 25 MM KIPS1310 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 3, 10 MM KIPS1312 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 3, 12 MM KIPS0314 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 3, 14 MM KIPS0317 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 3, 17 MM KIPS0320 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 3, 20 MM KIPS0325 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 3, 25 MM KIPS1410 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 4, 10 MM
--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

TRADICIONAL NRO 6, 20 MM KITC3625 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 6, 25 MM KIDH412L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 4, IZQ. 12 MM KITC120L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 1, 20 MM IZQUIERDO KIDH217L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 2, IZQ. 17 MM KIRV210M INSERTO DE REVISION SZ 2, 10 MM KITC125L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 1, 25 MM IZQUIERDO KITC3112 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 1, 12 MM KITC3114 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 1, 14 MM KITC3117 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 1, 17 MM KITC3120 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 1, 20 MM KIMP210L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 2, 10 MM KIDH214L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 2, IZQ. 14 MM KIPS1410 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 10 MM SPKT0042 TALLO MODULAR CRUCIFORME 1-2 CUBIERTA HA KIPS0317 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 17 MM KIPS0320 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 20 MM KMPR1510 INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 1.5, 10 MM KSP13140 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 14 X 140 MM KIRV525S INSERTO DE REVISION SZ 5 ESTANDAR 25	KIPS1412 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 4, 12 MM KIPS0414 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 4, 14 MM KIPS0417 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 4, 17 MM KIPS0420 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 4, 20 MM KIPS0425 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 4, 25 MM KIPS1510 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 5, 10 MM KIPS1512 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 5, 12 MM KIPS0514 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 5, 14 MM KIPS0517 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 5, 17 MM KIPS0520 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 5, 20 MM KIPS0525 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 5, 25 MM KIPS1610 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 6, 10 MM KIPS1612 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 6, 12 MM KIPS0614 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 6, 14 MM KIPS0617 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 6, 17 MM KIPS0620 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 6, 20 MM KIPS0625 ADVANCE INSERTO TIBIAL POSTERIOR
---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

MM KIRV530S INSERTO DE REVISION SZ 5 ESTANDAR 30 MM KTAGW115 AUMENTO TIBIAL 15°, SZ. 1 KTTIPC50 BASE TIBIAL MODULAR POROSA TI NRO 5 KTTIPC60 BASE TIBIAL MODULAR POROSA TI NRO 6 KTSPPC10 BASE TIBIAL POROSA CUBIERTA NRO 1 KTSPPC11 BASE TIBIAL POROSA CUBIERTA NRO 1+ KTSPPC20 BASE TIBIAL POROSA CUBIERTA NRO 2 KTSPPC21 BASE TIBIAL POROSA CUBIERTA NRO 2+ KTSPPC30 BASE TIBIAL POROSA CUBIERTA NRO 3 KTTIHA21 COMPONENTE TIBIAL CUBIERTO HA NRO 2+ KTTIHA30 COMPONENTE TIBIAL CUBIERTO HA NRO 3 KTTIHA31 COMPONENTE TIBIAL CUBIERTO HA NRO 3+ KTTIHA40 COMPONENTE TIBIAL CUBIERTO HA NRO 4 KTTIHA41 COMPONENTE TIBIAL CUBIERTO HA NRO 4+ KIDH110L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 1, IZQ. 10 MM KIDH110R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 1, DCHO 10 MM KIPS0520 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5, 20 MM KFPSNP1U COMPONENTE FEMORAL POSTEROR ESTABILIZADO NRO 1 NO POROSO KIMP512L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 5, 12 MM KIRV520M INSERTO DE REVISION SZ 5, 20 MM KIRV525M INSERTO DE	ESTABILIZADO # 6, 25 MM KIPS2110 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 1, 10 MM KIPS2112 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 1, 12 MM KIPS2114 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 1, 14 MM KIPS2117 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 1, 17 MM KIPS2120 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 1, 20 MM KIPS2220 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 2, 20 MM KIPS2225 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 2, 25 MM KIPS2310 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 3, 10 MM KIPS2320 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 3, 20 MM KIPS2325 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 3, 25 MM KIPS2410 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 4, 10 MM KIPS2412 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 4, 12 MM KIPS2414 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 4, 14 MM KIPS2417 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 4, 17 MM KIPS2420 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 4, 20 MM KIPS2425 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 4, 25 MM
---	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

REVISION SZ 5, 25 MM KTPSA512 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5, 12 MM KTPSA514 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5, 14 MM KTPSA517 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5, 17 MM KTPSA520 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5, 20 MM KTCONP10 BASE TIBIAL METAL NO POROSA NRO 1 KTCONP11 BASE TIBIAL METAL NO POROSA NRO 1+ KTCONP20 BASE TIBIAL METAL NO POROSA NRO 2 KTCONP21 BASE TIBIAL METAL NO POROSA NRO 2+ KTCONP30 BASE TIBIAL METAL NO POROSA NRO 3 KTCONP31 BASE TIBIAL METAL NO POROSA NRO 3+ KTCONP40 BASE TIBIAL METAL NO POROSA NRO 4 KTCONP41 BASE TIBIAL METAL NO POROSA NRO 4+ KTCONP50 BASE TIBIAL METAL NO POROSA NRO 5 KTCONP51 BASE TIBIAL METAL NO POROSA NRO 5+ KTCONP60 BASE TIBIAL METAL NO POROSA NRO 6 KIMP210R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 2, 10 MM KIDH614R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 6, DERECHO 14 MM KIRV117S INSERTO DE REVISIÓN SZ 1 ESTANDAR 17 MM KIRV120S INSERTO DE REVISIÓN SZ 1 ESTANDAR 20 MM KFTCNP2L COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO IZQUIERDO # 2	KIPS2510 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 5, 10 MM KIPS2512 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 5, 12 MM KIPS2514 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 5, 14 MM KIPS2517 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 5, 17 MM KIPS2520 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 5, 20 MM KIPS2525 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 5, 25 MM KIPS2610 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 6, 10 MM KIPS2612 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 6, 12 MM KIPS2614 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 6, 14 MM KIPS2617 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 6, 17 MM KIPS2620 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 6, 20 MM KIPS2625 ADVANCE II INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO # 6, 25 MM KIRV110S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #1 STANDARD - 10 MM KIRV112S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #1 STANDARD - 12 MM KIRV114S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #1 STANDARD - 14 MM KIRV117S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #1 STANDARD - 17 MM KIRV120S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #1 STANDARD -
---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

KFTCNP2R COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO DERECHO # 2	20 MM
KFTCNP3L COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO IZQUIERDO # 3	KIRV125S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #1 STANDARD - 25 MM
KFTCNP3R COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO DERECHO # 3	KIRV130S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #1 STANDARD - 30 MM
KFTCNP4L COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO IZQUIERDO # 4	KIRV210S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #2 STANDARD - 10 MM
KFTCNP4R COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO DERECHO # 4	KIRV212S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #2 STANDARD - 12 MM
KFTCNP5L COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO IZQUIERDO # 5	KIRV214S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #2 STANDARD - 14 MM
KFTCHA1L COMPONENTE FEMORAL CUBIERTO HA 1 IZQUIERDO	KIRV217S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #2 STANDARD - 17 MM
KFSCNP1R COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO C/VÁSTAGO SZ 1 DCHA	KIRV220S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #2 STANDARD - 20 MM
KFSCNP2L COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO C/VÁSTAGO SZ 2 IZQ	KIRV225S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #2 STANDARD - 25 MM
KITC312R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 3, 12 MM DERECHO	KIRV230S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #2 STANDARD - 30 MM
KIMP520R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 5, 20 MM	KIRV310S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #3 STANDARD - 10 MM
KITC525L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 5, 25 MM IZQUIERDO	KIRV312S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #3 STANDARD - 12 MM
KFSCPC2L COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO NRO 2 IZQ	KIRV314S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #3 STANDARD - 14 MM
KFSCPC2R COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO NRO 2 DCHO	KIRV317S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #3 STANDARD - 17 MM
KFSCPC3L COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO NRO 3 IZQ	KIRV320S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #3 STANDARD - 20 MM
	KIRV325S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #3 STANDARD - 25 MM
	KIRV330S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #3 STANDARD - 30 MM



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

KFSCPC3R COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO NRO 3 DCHO	KIRV410S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #4 STANDARD - 10 MM
KFSCPC4L COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO NRO 4 IZQ	KIRV412S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #4 STANDARD - 12 MM
KFSCPC4R COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO NRO 4 DCHO	KIRV414S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #4 STANDARD - 14 MM
KIPS2225 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 2, 25 MM	KIRV417S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #4 STANDARD - 17 MM
KTAOB415 AUMENTO TIBIAL OFFSET 4 X 15 MM	KIRV420S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #4 STANDARD - 20 MM
KTAOB505 AUMENTO TIBIAL OFFSET 5 X 5 MM	KIRV425S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #4 STANDARD - 25 MM
KTAOB510 AUMENTO TIBIAL OFFSET 5 X 10 MM	KIRV430S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #4 STANDARD - 30 MM
KTAOB515 AUMENTO TIBIAL OFFSET 5 X 15 MM	KIRV510S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #5 STANDARD - 10 MM
KTAOB605 AUMENTO TIBIAL OFFSET 6 X 5 MM	KIRV512S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #5 STANDARD - 12 MM
KIRV212M INSERTO DE REVISION SZ 2, 12 MM	KIRV514S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #5 STANDARD - 14 MM
KIRV214M INSERTO DE REVISION SZ 2, 14 MM	KIRV517S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #5 STANDARD - 17 MM
KIDH220L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 2, IZQ. 20 MM	KIRV520S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #5 STANDARD - 20 MM
KSPPI534 QUILLA MODULAR DE FIJACIÓN A PRESIÓN 15 MM X 3/4	KIRV525S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #5 STANDARD - 25 MM
KSPPI556 QUILLA MODULAR DE FIJACIÓN PRIMARIA 15 MM X 5/6	KIRV530S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #5 STANDARD - 30 MM
SPKF0066 COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO C/ENCAJE ABIERTO NRO 2	KIRV610S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #6 STANDARD - 10 MM
SPKF0067 COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN NO POROSO C/ENCAJE ABIERTO NRO 3	KIRV612S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #6 STANDARD - 12 MM
SPKF0068 COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO C/ENCAJE ABIERTO NRO 4	KIRV614S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #6 STANDARD -



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

SPKF0069 COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN NO POROSO C/ENCAJE ABIERTO NRO 5	14 MM
KTSSFM10 BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO NRO 1	KIRV617S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #6 STANDARD - 17 MM
KTSSFM11 BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO NRO 1+	KIRV620S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #6 STANDARD - 20 MM
KTSSFM20 BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO NRO 2	KIRV625S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #6 STANDARD - 25 MM
KTSSFM21 BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO NRO 2+	KIRV630S ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, #6 STANDARD - 30 MM
KTSSFM25 BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO NRO 2.5	KIRV110M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 1 MINUS -10 MM
KTSSFM30 BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO NRO 3	KIRV112M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 1 MINUS -12 MM
KTSSFM31 BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO NRO 3+	KIRV114M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 1 MINUS -14 MM
KTSSFM40 BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO NRO 4	KIRV117M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 1 MINUS -17 MM
KTSSFM41 BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO NRO 4+	KIRV120M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 1 MINUS -20 MM
KTSSFM50 BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO NRO 5	KIRV125M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 1 MINUS -25 MM
KTSSFM51 BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO NRO 5+	KIRV130M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 1 MINUS -10 MM
KTSSFM60 BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO NRO 6	KIRV210M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 2 MINUS -10 MM
KTSLFM10 BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO NRO 1	KIRV212M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 2 MINUS -12 MM
KTSLFM11 BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO NRO 1+	KIRV214M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 2 MINUS -14 MM
KTSLFM20 BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO NRO 2	KIRV217M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 2 MINUS -17 MM
	KIRV220M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 2 MINUS -20 MM



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

KITC125R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 1, 25 MM DERECHO KITC210L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 2, 10 MM IZQUIERDO KITC210R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 2, 10 MM DERECHO KITC212L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 2, 12 MM IZQUIERDO KITC212R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 2, 12 MM DERECHO KITC214L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 2, 14 MM IZQUIERDO KFRVNP6L COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO NRO 6 IZQUIERDO KIMP512R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 5, 12 MM KIDH125R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 1, DCHO 25 MM KFTCNP15L COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO IZQUIERDO 1.5 KFTCNP15R COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO DERECHO 1.5 KFPSNP10 COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1 KFPSNP2U COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 2 NO POROSO KFPSNP3U COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3 NO POROSO KFPSNP4U COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4 NO POROSO KFPSNP5U COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR	KIRV225M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 2 MINUS -25 MM KIRV230M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 2 MINUS -30 MM KIRV310M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 3 MINUS -10 MM KIRV312M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 3 MINUS -12 MM KIRV314M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 3 MINUS -14 MM KIRV317M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 3 MINUS -17 MM KIRV320M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 3 MINUS -20 MM KIRV325M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 3 MINUS -25 MM KIRV330M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 3 MINUS -30 MM KIRV410M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 4 MINUS -10 MM KIRV412M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 4 MINUS -12 MM. KIRV414M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 4 MINUS -14 MM KIRV417M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 4 MINUS -17 MM KIRV420M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 4 MINUS -20 MM KIRV425M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 4 MINUS -25 MM KIRV430M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 4 MINUS -30 MM KIRV510M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 5 MINUS -10
--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ESTABILIZADO NRO 5 NO POROSO KFPSNP6U COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6 NO POROSO KFRVNP1L COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO NRO 1 IZQUIERDO KIRV510M INSERTO DE REVISION SZ 5, 10 MM KIRV512M INSERTO DE REVISION SZ 5, 12 MM KIPS2310 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 10 MM KIPS2312 INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 12 MM KIPS2314 INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 14 MM KIMP117R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 1, 17 MM KTSPNP20 BASE TIBIAL NO POROSA NRO 2 KTSPNP21 BASE TIBIAL NO POROSA NRO 2+ KIDH112R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 1, DCHO 12 MM KIDH114L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 1, IZQ. 14 MM KIDH114R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 1, DCHO 14 MM KIDH512R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 5, DERECHO 12 MM KIDH514L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 5, IZQ. 14 MM KIDH514R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 5, DERECHO 14 MM KIDH517L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO	MM KIRV512M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 5 MINUS -12 MM KIRV514M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 5 MINUS -14 MM KIRV517M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 5 MINUS -17 MM KIRV520M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 5 MINUS -20 MM KIRV525M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 5 MINUS -25 MM KIRV530M ADVANCE INSERTO DE REVISIÓN, # 5 MINUS -30 MM KDHL1510 ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1.5 , IZQUIERDO, 10 MM KDHL1512 ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1.5 , IZQUIERDO, 12 MM KDHL1514 ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1.5 , IZQUIERDO, 14 MM KDHL1517 ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1.5 , IZQUIERDO, 17 MM KDHL1520 ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1.5 , IZQUIERDO, 20 MM KDHL1525 ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1.5 , IZQUIERDO, 25 MM KDHR1510 ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1.5 , DERECHO, 10 MM KDHR1512 ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1.5 , DERECHO, 12 MM KDHR1514 ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1.5 , DERECHO, 14 MM KDHR1517 ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1.5 , DERECHO, 17 MM
--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

5, IZQ. 17 MM KIMP110L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1, 10 MM KIPS0614 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6, 14 MM KIPS0617 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6, 17 MM KIPS0620 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6, 20 MM KIPS0625 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6, 25 MM KIPS2110 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1, 10 MM KIPS2112 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1, 12 MM KIPS2114 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1, 14 MM KITC3312 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 3, 12 MM KITC3314 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 3, 14 MM KITC225R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 2, 25 MM DERECHO KFRVNP4R COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO NRO 4 DERECHO KFRVNP5R COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO NRO 5 DERECHO KIUN0311 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 3 X 11 MM KIUN0312 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 3 X 12 MM. KIUN0408 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 4 X 8 MM KIUN0409 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 4 X 9 MM KTAPUN47 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL	KDHR1520 ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1.5 , DERECHO, 20 MM KDHR1525 ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1.5 , DERECHO, 25 MM KIDH110L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1 , IZQUIERDO, 10 MM KIDH110R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1 , DERECHO, 10 MM KIDH112L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1 , IZQUIERDO, 12 MM KIDH112R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1 , DERECHO, 12 MM KIDH114L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1 , IZQUIERDO, 14 MM KIDH114R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1 , DERECHO, 14 MM KIDH117L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1 , IZQUIERDO, 17 MM KIDH117R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1 , DERECHO, 17 MM KIDH120L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1 , IZQUIERDO, 20 MM KIDH120R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1 , DERECHO, 20 MM KIDH125L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1 , IZQUIERDO, 25 MM KIDH125R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 1 , DERECHO, 25 MM KIDH210L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 2 , IZQUIERDO, 10 MM KIDH210R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 2 , DERECHO, 10 MM KIDH212L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 2 ,
---	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

ALL POLLY 4 X 7 MM KFRVNP2R COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO NRO 2 DERECHO KIDH625L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 6, IZQ. 25 MM KFSCNP5R COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO C/VÁSTAGO SZ 5 DCHA KIMP325L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 3, 25 MM KTPSA417 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 17 MM KTTIPC1U BASE TIBIAL POROSA TI NRO 1 KTPSA620 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6, 20 MM KDHR1517 INSERTO TIBIAL DOBLE ADVANCE SIZE 1.5 DERECHO 17 MM KTCCNP25 BASE TIBIAL COCR NO POROSO # 2.5 ESTÁNDAR KFTCNN4L COMPONENTE FEMORAL NRO 4 IZQUIERDO NO POROSO KFTCNN2R COMPONENTE FEMORAL NRO 2 DERECHO NO POROSO KFTCNN3R COMPONENTE FEMORAL NRO 3 DERECHO NO POROSO KFTCNN4R COMPONENTE FEMORAL NRO 4 DERECHO NO POROSO KFTCPN2L COMPONENTE FEMORAL NRO 2 IZQ. POROSO KFTCPN3L COMPONENTE FEMORAL NRO 3 IZQ. POROSO KFTCPN4L COMPONENTE FEMORAL NRO 4 IZQ. POROSO KFTCPN2R COMPONENTE FEMORAL NRO 2 DERECHO POROSO KIDH117R INSERTO TIBIAL	IZQUIERDO, 12 MM KIDH212R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 2 , DERECHO, 12 MM KIDH214L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 2 , IZQUIERDO, 14 MM KIDH214R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 2 , DERECHO, 14 MM KIDH217L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 2 , IZQUIERDO, 17 MM KIDH217R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 2 , DERECHO, 17 MM KIDH220L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 2 , IZQUIERDO, 20 MM KIDH220R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 2 , DERECHO, 20 MM KIDH225L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 2 , IZQUIERDO, 25 MM KIDH225R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 2 , DERECHO, 25 MM KIDH310L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 3 , IZQUIERDO, 10 MM KIDH310R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 3 , DERECHO, 10 MM KIDH312L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 3 , IZQUIERDO, 12 MM KIDH312R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 3 , DERECHO, 12 MM KIDH314L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 3 , IZQUIERDO, 14 MM KIDH314R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 3 , DERECHO, 14 MM KIDH317L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 3 , IZQUIERDO, 17 MM
---	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.*

ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 1, DCHO 17 MM KITC3610 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 6, 10 MM KIMP510R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 5, 10 MM KIPS1110 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1, 10 MM KTPSP210 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 2, 10 MM KIRV517M INSERTO DE REVISION SZ 5, 17 MM KMPL1512 INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1.5, 12 MM KTAPUN19 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 1 X 9 MM KTAPU110 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 1 X 10 MM KTAPU112 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 1 X 12 MM KTAPUN27 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 2 X 7 MM KTAPUN28 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 2 X 8 MM KTAPUN29 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 2 X 9 MM KTAPU210 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 2 X 10 MM KTAPU212 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 2 X 12 MM KTAPUN37 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 3 X 7 MM KTAPUN38 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 3 X 8 MM KTAPUN39 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL	KIDH317R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 3, DERECHO, 17 MM KIDH320L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 3, IZQUIERDO, 20 MM KIDH320R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 3, DERECHO, 20 MM KIDH325L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 3, IZQUIERDO, 25 MM KIDH325R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 3, DERECHO, 25 MM KIDH410L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 4, IZQUIERDO, 10 MM KIDH410R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 4, DERECHO, 10 MM KIDH412L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 4, IZQUIERDO, 12 MM KIDH412R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 4, DERECHO, 12 MM KIDH414L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 4, IZQUIERDO, 14 MM KIDH414R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 4, DERECHO, 14 MM KIDH417L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 4, IZQUIERDO, 17 MM KIDH417R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 4, DERECHO, 17 MM KIDH420L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 4, IZQUIERDO, 20 MM KIDH420R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 4, DERECHO, 20 MM KIDH425L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 4, IZQUIERDO, 25 MM KIDH425R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 4,
---	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ALL POLLY 3 X 9 MM KTAPU310 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 3 X 10 MM KTAPU312 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 3 X 12 MM SPKT4C10 BASE TIBIAL ADVANCE II SPIKED POROSA CUBIERTA HA NRO 1 SPKT4C11 BASE TIBIAL ADVANCE II SPIKED POROSA CUBIERTA HA NRO 1+ SPKT4C20 BASE TIBIAL ADVANCE II SPIKED POROSA CUBIERTA HA NRO 2 KFPAN505 AUMENTO FEMORAL POSTERIOR 5 X 5 MM KTPSA410 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 10 MM KIPS1112 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1, 12 MM KIMP112R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 1, 12 MM KFCCNP1L COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN SZ. 1 NO POROSO KFCCNP1R COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN SZ. 1 NO POROSO KITC10L INSERTO PIVOTANTE MEDIALNRO 1, 10 MM IZQUIERDO KITC110R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 1, 10 MM DERECHO KITC112L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 1, 12 MM IZQUIERDO KIPS0420 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 20 MM KIPS0425 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 25 MM KMPR1520 INSERTO TIBIAL	DERECHO, 25 MM KIDH510L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 5, IZQUIERDO, 10 MM KIDH510R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 5, DERECHO, 10 MM KIDH512L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 5, IZQUIERDO, 12 MM KIDH512R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 5, DERECHO, 12 MM KIDH514L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 5, IZQUIERDO, 14 MM KIDH514R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 5, DERECHO, 14 MM KIDH517L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 5, IZQUIERDO, 17 MM KIDH517R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 5, DERECHO, 17 MM KIDH520L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 5, IZQUIERDO, 20 MM KIDH520R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 5, DERECHO, 20 MM KIDH525L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 5, IZQUIERDO, 25 MM KIDH525R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 5, DERECHO, 25 MM KIDH610L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 6, IZQUIERDO, 10 MM KIDH610R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 6, DERECHO, 10 MM KIDH612L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 6, IZQUIERDO, 12 MM KIDH612R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 6, DERECHO, 12 MM
--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

PIVOTANTE IDERECHO # 1.5, 20 MM KITC3425 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 4, 25 MM KFTCNP6L COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO IZQUIERDO # 6 KFTCNP6R COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO DERECHO # 6 KFSCPC1L COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO NRO 1 IZQ KFSCPC1R COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO NRO 1 DCHO KIMP110R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 1, 10 MM KTAGB615 AUMENTO TIBIAL SZ. 6 X 15 MM KIMP325R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 3, 25 MM KTTIPC3U BASE TIBIAL POROSA TI NRO 3 KTTIPC3P BASE TIBIAL POROSA TI NRO 3+ KSP13200 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANA EXTENSIÓN 14 X 200 MM KSP14100 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSION 15 X 100 MM KIPS1512 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5, 12 MM KTAOB405 AUMENTO TIBIAL OFFSET 4 X 5 MM KTAOB410 AUMENTO TIBIAL OFFSET 4 X 10 MM KFDAN605 AUMENTO FEMORAL DISTAL 6 X 5 MM KFDAN610 AUMENTO FEMORAL DISTAL 6 X 10 MM KFRVNP1R COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO NRO 1 DERECHO	KIDH614L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 6, IZQUIERDO, 14 MM KIDH614R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 6, DERECHO, 14 MM KIDH617L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 6, IZQUIERDO, 17 MM KIDH617R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 6, DERECHO, 17 MM KIDH620L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 6, IZQUIERDO, 20 MM KIDH620R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 6, DERECHO, 20 MM KIDH625L ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 6, IZQUIERDO, 25 MM KIDH625R ADVANCE INSERTO TIBIAL DOBLE ALTURA # 6, DERECHO, 25 MM KPONTP32 ADVANCE PATELLA ALL-POLY (SIC) ON LAY (SIC), 32 MM , CLAVIJA TRIPLE KPONTP35 ADVANCE PATELLA ALL-POLY (SIC) ON LAY (SIC), 35 MM , CLAVIJA TRIPLE KPONTP38 ADVANCE PATELLA ALL-POLY (SIC) ON LAY (SIC), 38 MM , CLAVIJA TRIPLE KPONTP41 ADVANCE PATELLA ALL-POLY (SIC) ON LAY (SIC), 41 MM , CLAVIJA TRIPLE KPONTP26 ADVANCE PATELLA ALL-POLY (SIC) ON LAY (SIC), 26 MM , CLAVIJA TRIPLE KPONTP29 ADVANCE PATELLA ALL-POLY (SIC) ON LAY (SIC), 29 MM , CLAVIJA TRIPLE KPON32ST ADVANCE PATELLA ALL-POLY (SIC) ON LAY (SIC), 32 MM , CLAVIJA SIMPLE KPON35ST ADVANCE PATELLA ALL-POLY (SIC) ON LAY (SIC), 35 MM , CLAVIJA SIMPLE KPON38SP ADVANCE PATELLA ALL-POLY (SIC) ON LAY (SIC),
--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

KIDH212R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 2, DERECHO 12 MM KSP17140 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 18 X 140 MM KIMP125L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO 1, 25 MM KSP18100 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSION 19 X 100 MM KIDH312R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 3, DERECHO 12 MM KIDH314L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 3, IZQ. 14 MM KIDH314R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 3, DERECHO 14 MM KSC16140 TALLO MODULAR 16 X 140 MM KSC18140 TALLO MODULAR 18 X 140 MM KSC20140 TALLO MODULAR 20 X 140 MM KIDH612R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 6, DERECHO 12 MM KIRV314S INSERTO DE REVISIÓN SZ 3 ESTANDAR 14 MM KMPL1517 INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1.5, 17 MM KMPR1517 INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 1.5, 17 MM KIRV530M INSERTO DE REVISION SZ 5, 30 MM KIMP314R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 3, 14 MM KIMP317L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 3, 17 MM KIPS2625 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR	38 MM , CLAVIJA SIMPLE KPON41SP ADVANCE PATELLA ALL-POLY (SIC) ON LAY (SIC), 41 MM , CLAVIJA SIMPLE KPRC25HI COMPONENTE PATELAR CON ESCOTADURA, POSICIÓN ÚNICA, ALL-POLY (SIC), 25 MM, DOMO ALTO KPRC25LO COMPONENTE PATELAR CON ESCOTADURA, POSICIÓN ÚNICA, ALL-POLY (SIC), 25 MM, DOMO BAJO KPRC28HI COMPONENTE PATELAR CON ESCOTADURA, POSICIÓN ÚNICA, ALL-POLY (SIC), 28 MM, DOMO ALTO KPRC28LO COMPONENTE PATELAR CON ESCOTADURA, POSICIÓN ÚNICA, ALL-POLY (SIC), 28 MM, DOMO ALTO (SIC) KSP10100 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 11 MM X 100 MM KSP10140 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 11 MM X 140 MM KPS10200 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 11 MM X 200 MM KSP11100 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 12 MM X 100 MM KSP11140 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 12 MM X 140 MM KSP11200 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 12 MM X 200 MM KSP12100 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 13 MM X 100 MM KSP12140 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 13 MM X 140 MM KSP12200 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 13 MM X 200 MM KSP13100 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE
---	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

ESTABILIZADO NRO 6, 25 MM KITC117L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 1, 17 MM IZQUIERDO KITC117R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 1, 17 MM DERECHO KIRV225S INSERTO DE REVISIÓN SZ 2 ESTANDAR 25 MM KIRV230S INSERTO DE REVISIÓN SZ 2 ESTANDAR 30 MM KIRV310S INSERTO DE REVISIÓN SZ 3 ESTANDAR 10 MM KIRV312S INSERTO DE REVISIÓN SZ 3 ESTANDAR 12 MM KIMP414R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 4, 14 MM KIMP417L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 4, 17 MM 7552005500 TORNILLO ESPONJOSO 6.5 MM X 55 MM 7552006000 TORNILLO ESPONJOSO 6.5 MM X 60 MM 7552006500 TORNILLO ESPONJOSO 6.5 MM X 65 MM 7552007000 TORNILLO ESPONJOSO 6.5 MM X 70 MM 7552007500 TORNILLO ESPONJOSO 6.5 MM X 75 MM 7552008000 TORNILLO ESPONJOSO 6.5 MM X 80 MM SPKI0035 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METALICO 1 X 9 MM SPKT0043 TALLO MODULAR CRUCIFORME 3-4 CUBIERTA HA KFSCNP1L COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO C/VÁSTAGO SZ 1 IZQ KFCCNP2R COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN SZ. 2 NO POROSO KIMP510L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 5, 10	CANAL, 14 MM X 100 MM KSP13140 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 14 MM X 140 MM KSP13200 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 14 MM X 200 MM KSP14100 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 15 MM X 100 MM KSP14140 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 15 MM X 140 MM KSP14200 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 15 MM X 200 MM KSP15100 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 16 MM X 100 MM KSP15140 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 16 MM X 140 MM KSP15200 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 16 MM X 200 MM KSP16100 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 17 MM X 100 MM KSP16140 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 17 MM X 140 MM KSP16200 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 17 MM X 200 MM KSP17100 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 18 MM X 100 MM KSP17140 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 18 MM X 140 MM KSP18100 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 19 MM X 100 MM KSP18140 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 19 MM X 140 MM KSP18200 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 19 MM X 200 MM KSP20100 ADVANCE EXTENSIÓN
--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

MM KIMP410L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 4, 10 MM KFSCNP4L COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO C/VÁSTAGO SZ 4 IZQ KPONTP35 PATELA 35 MM X 8 MM TRI PEG KPONTP38 PATELA 38 MM X 10 MM TRI PEG KPONTP41 PATELA 41 MM X 11 MM TRI PEG KPONTP26 PATELA 26 MM TRI PEG KPONTP29 PATELA 29 MM TRI PEG KPONTP32ST PATELA 32 MM X 10 MM SINGLE PEG KIDH320L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 3, IZQ. 20 MM KIDH320R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 3, DERECHO 20 MM KFRVNP2L COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO NRO 2 IZQUIERDO KFRVNP3L COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO NRO 3 IZQUIERDO KTCCNP40 BASE TIBIAL COCR NO POROSO # 4 ESTÁNDAR KTCCNP41 BASE TIBIAL COCR NO POROSO # 4+ KTCCNP50 BASE TIBIAL COCR NO POROSO # 5 ESTÁNDAR KTCCNP51 BASE TIBIAL COCR NO POROSO # 5+ KTCCNP60 BASE TIBIAL COCR NO POROSO # 6 ESTÁNDAR KMPR1514 INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 1.5, 14 MM KSP15100 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 16 X 100 MM KSP15140 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN	DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 21 MM X 100 MM KSP20140 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 21 MM X 140 MM KSP22100 ADVANCE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO PARA RELLENO DE CANAL, 23 MM X 100 MM KSC01065 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO CEMENTADO, 10 MM X 65 MM KSC01265 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO CEMENTADO, 12 MM X 65 MM KSC01465 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO CEMENTADO, 14 MM X 65 MM KSC01530 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO CEMENTADO, 15 MM X 30 MM KSC01665 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO CEMENTADO, 16 MM X 65 MM KSC01865 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO CEMENTADO, 18 MM X 65 MM KSC02065 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO CEMENTADO, 20 MM X 65 MM KSC02265 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO CEMENTADO, 22 MM X 65 MM KSC10100 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO MODULAR, AHUSADO, 10 X 100 MM KSC12100 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO MODULAR, AHUSADO, 12 X 100 MM KSC14100 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO MODULAR, AHUSADO, 14 X 100 MM KSC16100 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO MODULAR, AHUSADO, 16 X 100 MM KSC18100 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO MODULAR, AHUSADO, 18 X 100 MM KSC20100 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO MODULAR, AHUSADO,
--	--

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.A.T.

16 X 140 MM KSP15200 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 16 X 200 MM KSP16100 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 17 X 100 MM KSC01065 EXTENSIÓN DE VÁSTAGO CEMENTADA 10 MM X 65 MM KSC01265 EXTENSIÓN DE VÁSTAGO CEMENTADA 12 MM X 65 MM KSC01465 EXTENSIÓN DE VÁSTAGO CEMENTADA 14 MM X 65 MM KSC01530 EXTENSIÓN DE VÁSTAGO CEMENTADA 15 MM X 30 MM KSC01665 EXTENSIÓN DE VÁSTAGO CEMENTADA 16 MM X 65 MM KSC01865 EXTENSIÓN DE VÁSTAGO CEMENTADA 18 MM X 65 MM KSC02065 EXTENSIÓN DE VÁSTAGO CEMENTADA 20 MM X 65 MM KSC02265 EXTENSIÓN DE VÁSTAGO CEMENTADA 22 MM X 65 MM KIDH120L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 1, IZQ. 20 MM KIMP412R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 4, 12 MM KIMP414L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 4, 14 MM KIDH520L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 5, IZQ. 20 MM KIDH520R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 5, DERECHO 20 MM KIRV617S INSERTO DE REVISION SZ 6 ESTANDAR 17 MM KIDH410R INSERTO TIBIAL	20 X 100 MM KSC22100 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO MODULAR, AHUSADO, 22 X 100 MM KSC10140 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO MODULAR, AHUSADO, 10 X 140 MM KSC12140 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO MODULAR, AHUSADO, 12 X 140 MM KSC14140 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO MODULAR, AHUSADO, 14 X 140 MM KSC16140 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO MODULAR, AHUSADO, 16 X 140 MM KSC18140 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO MODULAR, AHUSADO, 18 X 140 MM KSC20140 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO MODULAR, AHUSADO, 20 X 140 MM KSC22140 ADVANCE EXTENSIÓN VÁSTAGO MODULAR, AHUSADO, 22 X 140 MM KTAGB105 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 1 X 5 MM KTAGB110 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 1 X 10 MM KTAGB115 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 1 X 15 MM KTAGB205 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 2 X 5 MM KTAGB210 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 2 X 10 MM KTAGB215 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 2 X 15 MM KTAGB305 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 3 X 5 MM KTAGB310 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 3 X 10 MM KTAGB315 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 3 X 15 MM KTAGB405 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 4 X 5 MM KTAGB410 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 4 X 10 MM KTAGB415 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 4 X 15 MM KTAGB505 ADVANCE AUMENTO
---	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 4, DERECHO 10 MM KTPSP217 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 2, 17 MM KTPSP220 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 2, 20 MM KTPSA310 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 10 MM KIMP417R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 4, 17 MM KIMP420L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 4, 20 MM KIMP420R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 4, 20 MM KIMP425L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 4, 25 MM KIMP425R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 4, 25 MM KTPSA412 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 12 MM KTPSA414 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 14 MM KTTIPC10 BASE TIBIAL MODULAR POROSA TI NRO 1 KIMP517R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 5, 17 MM KFSCNP6R COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO C/VÁSTAGO SZ 6 DCHA SPKT2060 TALLO TIBIAL 20 X 60 MM KFTCNN2L COMPONENTE FEMORAL NRO 2 IZQUIERDO NO POROSO KFTCNN3L COMPONENTE FEMORAL NRO 3 IZQUIERDO NO POROSO	TIBIAL, BLOQUE, # 5 X 5 MM KTAGB510 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 5 X 10 MM KTAGB515 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 5 X 15 MM KTAGB605 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 6 X 5 MM KTAGB610 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 6 X 10 MM KTAGB615 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, BLOQUE, # 6 X 15 MM KTAGW115 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, 15° CUÑA, # 1 KTAGW215 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, 15° CUÑA, # 2 KTAGW315 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, 15° CUÑA, # 3 KTAGW415 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, 15° CUÑA, # 4 KTAGW515 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, 15° CUÑA, # 5 KTAGW615 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, 15° CUÑA, # 6 KTAGW225 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, 25° CUÑA, # 2 KTAGW325 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, 25° CUÑA, # 3 KTAGW425 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, 25° CUÑA, # 4 KTAGW525 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, 25° CUÑA, # 5 KTAGW625 ADVANCE AUMENTO TIBIAL, 25° CUÑA, # 6 KTAOB105 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 1 X 5 MM KTAOB110 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 1 X 10 MM KTAOB115 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 1 X 15 MM KTAOB205 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 1+1/2 X 5 MM KTAOB210 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 1+1/2 X 10 MM KTAOB215 ADVANCE AUMENTO
---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

KIDH317R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 3, DERECHO 17 MM KIDH210R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 2, DERECHO 10 MM KITC3612 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 6, 12 MM KITC3614 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 6, 14 MM KITC3617 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 6, 17 MM KSP18140 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 19 X 140 MM KSP18200 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 19 X 200 MM KSP20100 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 21 X 100 MM KITC514R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 5, 14 MM DERECHO KIMP125R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 1, 25 MM KIPS0220 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 2, 20 MM KIPS0225 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 2, 25 MM KSPP1512 QUILLA MODULAR DE FIJACION A PRESIÓN 15 MM X 1/2 KIMP217R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 2, 17 MM KIPS1510 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5, 10 MM KTPSP212 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 2, 12 MM KIDH617L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 6, IZQ. 17 MM KIPS2614 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR	BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 1+1/2 X 15 MM KTAOB305 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 2+1/3 X 5 MM KTAOB310 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 2+1/3 X 10 MM KTAOB315 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 2+1/3 X 15 MM KTAOB405 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 3+1/4 X 5 MM KTAOB410 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 3+1/4 X 10 MM KTAOB415 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 3+1/4 X 15 MM KTAOB505 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 4+1/5 X 5 MM KTAOB510 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 4+1/5 X 10 MM KTAOB515 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 4+1/5 X 15 MM KTAOB605 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 5+1/6 X 5 MM KTAOB610 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 5+1/6 X 10 MM KTAOB615 ADVANCE AUMENTO BLOQUE BASE TIBIAL OFFSET (SIC), # 5+1/6 X 15 MM KTPSP110 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 1, 10 MM KTPSP112 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 1, 12 MM KTPSP114 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 1, 14 MM KTPSP117 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 1, 17 MM
--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ESTABILIZADO NRO 6, 14 MM KIPS2617 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6, 17 MM KIPS2620 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6, 20 MM KITC517L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 5, 17 MM IZQUIERDO KITC3125 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 1, 25 MM KITC3210 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 2, 10 MM KITC3212 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 2, 12 MM KITC3214 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 2, 14 MM KITC3217 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 2, 17 MM KITC3220 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 2, 20 MM KITC3225 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 2, 25 MM KITC3310 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 3, 10 MM KIPS2517 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5, 17 MM KIDH610L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 6, IZQ. 12 MM KIMP610R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 6, 10 MM KIPS2510 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5, 10 MM KIPS2512 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5, 12 MM KIPS2514 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5, 14 MM KTSLFM21 BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO NRO 2+ KIRV320S INSERTO DE REVISIÓN SZ 3 ESTANDAR 20	KTPSP120 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 1, 20 MM KTPSP210 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 2, 10 MM KTPSP212 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 2, 12 MM KTPSP214 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 2, 14 MM KTPSP217 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 2, 17 MM KTPSP220 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 2, 20 MM KTPSA310 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 3, 10 MM KTPSA312 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 3, 12 MM KTPSA314 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 3, 14 MM KTPSA317 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 3, 17 MM KTPSA320 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 3, 20 MM KTPSA410 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 4, 10 MM KTPSA412 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 4, 12 MM KTPSA414 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 4, 14 MM KTPSA417 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 4, 17 MM KTPSA420 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 4, 20 MM KTPSA510 IMPLANTE TIBIAL
--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

MM KTAGW325 AUMENTO TIBIAL 25°, SZ. 3 KIMP625L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 6, 25 MM KIPS2425 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 25 MM KITC325R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 3, 25 MM DERECHO KTAGB515 AUMENTO TIBIAL SZ. 5 X 15 MM KFDAN105 AUMENTO FEMORAL DISTAL 1 X 5 MM KIDH620L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 6, IZQ. 20 MM KFPAN605 AUMENTO FEMORAL POSTERIOR 6 X 5 MM KIMP212L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 2, 12 MM KTAGB605 AUMENTO TIBIAL SZ. 6 X 5 MM KTAPUN48 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 4 X 8 MM KFPAN610 AUMENTO FEMORAL POSTERIOR 6 X 10 MM SPKI0043 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METALICO 3 X 9 MM SPKI0044 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METALICO 3 X 10 MM SPKI0045 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METALICO 3 X 11 MM SPKI0046 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METALICO 3 X 12 MM SPKI0047 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METALICO 4 X 9 MM SPKI0048 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METALICO 4 X 10 MM SPKI0049 INSERTO TIBIAL	POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 5, 10 MM KTPSA512 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 5, 12 MM KTPSA514 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 5, 14 MM KTPSA517 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 5, 17 MM KTPSA520 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 5, 20 MM KTPSA610 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 6, 10 MM KTPSA612 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 6, 12 MM KTPSA614 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 6, 14 MM KTPSA617 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 6, 17 MM KTPSA620 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO, ALL- POLY (SIC), # 6, 20 MM KTCONP10 ADVANCE BASE TIBIAL METÀLICA, NO POROSA, # 1 KTCONP11 ADVANCE BASE TIBIAL METÀLICA, NO POROSA, # 1+ KTCONP20 ADVANCE BASE TIBIAL METÀLICA, NO POROSA, # 2 KTCONP21 ADVANCE BASE TIBIAL METÀLICA, NO POROSA, # 2+ KTCONP30 ADVANCE BASE TIBIAL METÀLICA, NO POROSA, # 3 KTCONP31 ADVANCE BASE TIBIAL METÀLICA, NO POROSA, # 3+ KTCONP40 ADVANCE BASE TIBIAL METÀLICA, NO POROSA, # 4
--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

UNCIMPARTIMENTAL METALICO 4 X 1MM KITP2320 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 3, 20 MM KITP2325 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 3, 25 MM SPKP4338 COMPONENTE PATELAR ALL POLLY 38 MM EXPANSIBLE SPKP4341 COMPONENTE PATELAR ALL POLLY 41 MM EXPANSIBLE KTTIPC25 BASE TIBIAL MODULAR POROSA TI NRO 2.5 KTTIPC30 BASE TIBIAL MODULAR POROSA TI NRO 3 KIPS1312 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 12 MM KITC320L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 3, 20 MM IZQUIERDO KITC320R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 3, 20 MM DERECHO KIMP612L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 6, 12 MM KIMP612R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 6, 12 MM KIMP614L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 6, 14 MM KIMP614R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 6, 14 MM KIMP617L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 6, 17 MM KIMP617R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 6, 17 MM KIMP620L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 6, 20 MM KIDH420R INSERTO TIBIAL	KTCONP41 ADVANCE BASE TIBIAL METÁLICA, NO POROSA, # 4+ KTCONP50 ADVANCE BASE TIBIAL METÁLICA, NO POROSA, # 5 KTCONP51 ADVANCE BASE TIBIAL METÁLICA, NO POROSA, # 5+ KTCONP60 ADVANCE BASE TIBIAL METÁLICA, NO POROSA, # 6 KTTIPC1U ADVANCE BASE TIBIAL POROSA, COBERTURA TITANIO, # 1 KTTIPC1P ADVANCE BASE TIBIAL POROSA, COBERTURA TITANIO, # 1+ KTTIPC2U ADVANCE BASE TIBIAL POROSA, COBERTURA TITANIO, # 2 KTTIPC2P ADVANCE BASE TIBIAL POROSA, COBERTURA TITANIO, # 2+ KTTIPC3U ADVANCE BASE TIBIAL POROSA, COBERTURA TITANIO, # 3 KTTIPC3P ADVANCE BASE TIBIAL POROSA, COBERTURA TITANIO, # 3+ KTTIPC4U ADVANCE BASE TIBIAL POROSA, COBERTURA TITANIO, # 4 KTTIPC4P ADVANCE BASE TIBIAL POROSA, COBERTURA TITANIO, # 4+ KTTIPC5U ADVANCE BASE TIBIAL POROSA, COBERTURA TITANIO, # 5 KTTIPC5P ADVANCE BASE TIBIAL POROSA, COBERTURA TITANIO, # 5+ KTTIPC6U ADVANCE BASE TIBIAL POROSA, COBERTURA TITANIO, # 6 KTTINP10 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, NO POROSA, # 1 KTTINP20 ADVANCE BASE
--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 4, DERECHO 20 MM KIDH614L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 6, IZQ. 14 MM KITC612L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 6, 12 MM IZQUIERDO KITC612R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 6, 12 MM DERECHO KITC614L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 6, 14 MM. IZQUIERDO KITC510R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 5, 10 MM DERECHO KITC512L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 5, 12 MM IZQUIERDO KITC512R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 5, 12 MM DERECHO KIPS2320 INSERTO TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 20 MM KFPAN305 AUMENTO FEMORAL POSTERIOR 3 X 5 MM KFPAN310 AUMENTO FEMORAL POSTERIOR 3 X 10 MM KFPAN405 AUMENTO FEMORAL POSTERIOR 4 X 5 MM KFPAN410 AUMENTO FEMORAL POSTERIOR 4 X 10 MM 7552005000 TORNILLO ESPONJOSO 6.5 MM X 50 MM KIDH417L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 4, IZQ. 17 MM SPKT4C30 BASE TIBIAL ADVANCE II SPIKED POROSA CUBIERTA HA NRO 3 SPKT4C31 BASE TIBIAL ADVANCE II SPIKED POROSA CUBIERTA HA NRO 3+ SPKT4C40 BASE TIBIAL ADVANCE II SPIKED POROSA CUBIERTA HA NRO 4 SPKT4C41 BASE TIBIAL ADVANCE II SPIKED POROSA	TIBIAL MODULAR, NO POROSA, # 2 KTTINP25 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, NO POROSA, # 2.5 KTTINP30 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, NO POROSA, # 3 KTTINP40 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, NO POROSA, # 4 KTTINP50 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, NO POROSA, # 5 KTTINP60 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, NO POROSA, # 6 KTTINP11 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, NO POROSA, # 1 PLUS KTTINP21 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, NO POROSA, # 2 PLUS KTTINP31 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, NO POROSA, # 3 PLUS KTTINP41 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, NO POROSA, # 4 PLUS KTTINP51 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, NO POROSA, # 5 PLUS KTTIPC10 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, POROSA, # 1 KTTIPC20 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, POROSA, # 2 KTTIPC25 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, POROSA, # 2.5 KTTIPC30 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, POROSA, # 3 KTTIPC40 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, POROSA, # 4 KTTIPC50 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, POROSA, # 5 KTTIPC60 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, POROSA, # 6 KTTIPC11 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, POROSA, # 1 PLUS
---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
A.N.M.A.T.

CUBIERTA HA NRO 4+ SPKT4C50 BASE TIBIAL ADVANCE II SPIKED POROSA CUBIERTA HA NRO 5 SPKT4C51 BASE TIBIAL ADVANCE II SPIKED POROSA CUBIERTA HA NRO 5+ SPKT4C60 BASE TIBIAL ADVANCE II SPIKED POROSA CUBIERTA HA NRO 6 KFTCNP5R COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO NO POROSO DERECHO # 5 SPKI0037 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METALICO 1 X 11 MM SPKT1855 TALLO TIBIAL 18 X 55 MM KIMP525R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 5, 25 MM KIDH625R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 6, DCHO 25 MM KPONTP32 PATELA 32 MM X 8 MM TRI PEG KSP16200 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 17 X 200 MM KIMP514R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 5, 14 MM KIMP517L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 5, 17 MM KIMP317R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 3, 17 MM KTAGB610 AUMENTO TIBIAL SZ. 6 X 10 MM KIDH117L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 1, IZQ. 17 MM KIMP525L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 5, 25 MM KTAGW315 AUMENTO TIBIAL 15°, SZ. 3 KTAGW415 AUMENTO TIBIAL	KTTPC21 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, POROSA, # 2 PLUS KTTPC31 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, POROSA, # 3 PLUS KTTPC41 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, POROSA, # 4 PLUS KTTPC51 ADVANCE BASE TIBIAL MODULAR, POROSA, # 5 PLUS KTCCNP10 ADVANCE II BASE TIBIAL COCR NO POROSA, # 1 STANDARD KTCCNP11 ADVANCE II BASE TIBIAL COCR NO POROSA, # 1 PLUS KTCCNP20 ADVANCE II BASE TIBIAL COCR NO POROSA, # 2 STANDARD KTCCNP21 ADVANCE II BASE TIBIAL COCR NO POROSA, # 2 PLUS KTCCNP25 ADVANCE II BASE TIBIAL COCR NO POROSA, # 2.5 STANDARD KTCCNP30 ADVANCE II BASE TIBIAL COCR NO POROSA, # 3 STANDARD KTCCNP31 ADVANCE II BASE TIBIAL COCR NO POROSA, # 3 PLUS KTCCNP40 ADVANCE II BASE TIBIAL COCR NO POROSA, # 4 STANDARD KTCCNP41 ADVANCE II BASE TIBIAL COCR NO POROSA, # 4 PLUS KTCCNP50 ADVANCE II BASE TIBIAL COCR NO POROSA, # 5 STANDARD KTCCNP51 ADVANCE II BASE TIBIAL COCR NO POROSA, # 5 PLUS KTCCNP60 ADVANCE II BASE TIBIAL COCR NO POROSA, # 6 STANDARD KTSPPC10 ADVANCE II BASE
--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

15º, SZ. 4 KTAGW515 AUMENTO TIBIAL 15º, SZ. 5 KTAGW615 AUMENTO TIBIAL 15º, SZ. 6 KIDH612L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 6, IZQ. 12 MM KTPSA610 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6, 10 MM KTPSA612 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6, 12 MM KTPSA614 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6, 14 MM KTPSA617 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6, 17 MM KTSPNP30 BASE TIBIAL NO POROSA NRO 3 KTSPNP31 BASE TIBIAL NO POROSA NRO 3+ KTSPNP40 BASE TIBIAL NO POROSA NRO 4 KTSPNP41 BASE TIBIAL NO POROSA NRO 4+ KTSPNP50 BASE TIBIAL NO POROSA NRO 5 KTSPNP51 BASE TIBIAL NO POROSA NRO 5+ KTSPNP60 BASE TIBIAL NO POROSA NRO 6 KTONP10L BASE TIBIAL OFFSET 1 IZQUIERDA NO POROSA KTONP10R BASE TIBIAL OFFSET 1 DERECHA NO POROSA KTONP11L BASE TIBIAL OFFSET 1 + IZQUIERDA NO POROSA KTONP11R BASE TIBIAL OFFSET 1 + DERECHA NO POROSA KTONP20L BASE TIBIAL OFFSET 2 IZQUIERDA NO POROSA KTONP20R BASE TIBIAL OFFSET 2 DERECHA NO POROSA KTONP21L BASE TIBIAL OFFSET 2 + IZQUIERDA NO POROSA KTONP21R BASE TIBIAL	TIBIAL POROSA, RECUBIERTA, CON CLAVOS, # 1 KTSPPC11 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, RECUBIERTA, CON CLAVOS, # 1+ KTSPPC20 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, RECUBIERTA, CON CLAVOS, # 2 KTSPPC21 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, RECUBIERTA, CON CLAVOS, # 2+ KTSPPC30 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, RECUBIERTA, CON CLAVOS, # 3 KTSPPC31 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, RECUBIERTA, CON CLAVOS, # 3+ KTSPPC40 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, RECUBIERTA, CON CLAVOS, # 4 KTSPPC41 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, RECUBIERTA, CON CLAVOS, # 4+ KTSPPC50 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, RECUBIERTA, CON CLAVOS, # 5 KTSPPC51 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, RECUBIERTA, CON CLAVOS, # 5+ KTSPPC60 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, RECUBIERTA, CON CLAVOS, # 6 KTSPNP10 ADVANCE II BASE TIBIAL NO POROSA, CON CLAVOS, # 1 KTSPNP11 ADVANCE II BASE TIBIAL NO POROSA, CON CLAVOS, # 1+ KTSPNP20 ADVANCE II BASE TIBIAL NO POROSA, CON CLAVOS, # 2 KTSPNP21 ADVANCE II BASE TIBIAL NO POROSA, CON CLAVOS, # 2+ KTSPNP30 ADVANCE II BASE TIBIAL NO POROSA, CON CLAVOS, # 3 KTSPNP31 ADVANCE II BASE TIBIAL NO POROSA, CON CLAVOS, # 3+
---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

OFFSET 2 + DERECHA NO POROSA KTONP25L BASE TIBIAL OFFSET 2.5 IZQUIERDA NO POROSA KTONP25R BASE TIBIAL OFFSET 2.5 DERECHA NO POROSA KTONP30L BASE TIBIAL OFFSET 3 IZQUIERDA NO POROSA KTTINP41 BASE TIBIAL MODULAR NO POROSA TI SZ.4+ KIPS2117 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1, 17 MM KIPS2120 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1, 20 MM KIRV425S INSERTO DE REVISION SZ 4 ESTANDAR 25 MM KIRV430S INSERTO DE REVISION SZ 4 ESTANDAR 30 MM KIRV510S INSERTO DE REVISION SZ 5 ESTANDAR 10 MM KIPS0417 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 4, 17 MM KIMP320L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 3, 20 MM KFSCNP4R COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO C/VÁSTAGO SZ 4 DCHA KFSCNP5L COMPONENTE FEM.PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO C/VÁSTAGO SZ 5 IZQ KTTIPC4P BASE TIBIAL POROSA TI NRO 4+ KTAU410 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 4 X 10 MM KTAU412 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 4 X 12 MM KFCCNP2L COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN SZ. 2	KTSPNP40 ADVANCE II BASE TIBIAL NO POROSA, CON CLAVOS, # 4 KTSPNP41 ADVANCE II BASE TIBIAL NO POROSA, CON CLAVOS, # 4+ KTSPNP50 ADVANCE II BASE TIBIAL NO POROSA, CON CLAVOS, # 5 KTSPNP51 ADVANCE II BASE TIBIAL NO POROSA, CON CLAVOS, # 5+ KTSPNP60 ADVANCE II BASE TIBIAL NO POROSA, CON CLAVOS, # 6 KTONP10L ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 1 IZQUIERDO KTONP10R ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 1 DERECHO KTONP11L ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 1+ IZQUIERDO KTONP11R ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 1+ DERECHO KTONP20L ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 2 IZQUIERDO KTONP20R ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 2 DERECHO KTONP21L ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 2+ IZQUIERDO KTONP21R ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 2+ DERECHO KTONP25L ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 2.5 IZQUIERDO KTONP25R ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 2.5 DERECHO KTONP30L ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 3 IZQUIERDO KTONP30R ADVANCE BASE
--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

NO POROSO KIMP520L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 5, 20 MM KIPS0117 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 1, 17 MM KSP22100 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 23 X 100 MM KIRV514M INSERTO DE REVISION SZ 5,14 MM KSP14200 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 15 X 200 MM KTAOB110 AUMENTO TIBIAL OFFSET 1 X 10 MM KIMP610L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 6, 10 MM KSC14100 TALLO MODULAR 14 X 100 MM KIDH610R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 6, DERECHO 12 MM KIPS0514 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5, 14 MM KIPS2220 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 2, 20 MM KDHL1525 INSERTO TIBIAL DOBLE ADVANCE SIZE 1.5 IZQUIERDO 25 MM KFDAN510 AUMENTO FEMORAL DISTAL 5 X 10 MM KTSPPC41 BASE TIBIAL POROSA CUBIERTA NRO 4+ KTSPPC50 BASE TIBIAL POROSA CUBIERTA NRO 5 KTSPPC51 BASE TIBIAL POROSA CUBIERTA NRO 5+ KTSPPC60 BASE TIBIAL POROSA CUBIERTA NRO 6 KIPS1310 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3, 10 MM KIMP214R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 2, 14 MM	TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 3 DERECHO KTONP31L ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 3+ IZQUIERDO KTONP31R ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 3+ DERECHO KTONP40L ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 4 IZQUIERDO KTONP40R ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 4 DERECHO KTONP41L ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 4+ IZQUIERDO KTONP41R ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 4+ DERECHO KTONP50L ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 5 IZQUIERDO KTONP50R ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 5 DERECHO KTONP51L ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 5+ IZQUIERDO KTONP51R ADVANCE BASE TIBIAL NO POROSA, OFFSET (SIC), # 5+ DERECHO KFSCNP1L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO CON VÁSTAGO, # 1 IZQUIERDO KFSCNP1R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO CON VÁSTAGO, # 1 DERECHO KFSCNP2L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO CON VÁSTAGO, # 2 IZQUIERDO KFSCNP2R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO CON VÁSTAGO, # 2 DERECHO KFSCNP3L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL
---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

KIMP217L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 2, 17 MM KFNPN3L COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL NRO 3 IZQUIERDO KFNPN4L COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL NRO 4 IZQUIERDO KFNPN1R COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL NRO 1 DERECHO KFNPN2R COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL NRO 2 DERECHO KFNPN3R COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL NRO 3 DERECHO KFNPN4R COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL NRO 4 DERECHO KTNPN10 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METAL NRO 1 KTNPN20 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METAL NRO 2 KTNPN30 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METAL NRO 3 KIRV414S INSERTO DE REVISIÓN SZ 4 ESTANDAR 14 MM KIRV417S INSERTO DE REVISION SZ 4 ESTANDAR 17 MM KIRV420S INSERTO DE REVISION SZ 4 ESTANDAR 20 MM KTONP30R BASE TIBIAL OFFSET 3 DERECHA NO POROSA KTONP31L BASE TIBIAL OFFSET 3 + IZQUIERDA NO POROSA KTONP31R BASE TIBIAL OFFSET 3 + DERECHA NO POROSA KTONP40L BASE TIBIAL OFFSET 4 IZQUIERDA NOPOROSA KTONP40R BASE TIBIAL	PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO CON VASTAGO, # 3 IZQUIERDO KFSCNP3R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO CON VASTAGO, # 3 DERECHO KFSCNP4L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO CON VASTAGO, # 4 IZQUIERDO KFSCNP4R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO CON VASTAGO, # 4 DERECHO KFSCNP5L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO CON VASTAGO, # 5 IZQUIERDO KFSCNP5R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO CON VASTAGO, # 5 DERECHO KFSCNP6L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO CON VASTAGO, # 6 IZQUIERDO KFSCNP6R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO CON VASTAGO, # 6 DERECHO KFSCPC1L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VASTAGO, # 1 IZQUIERDO KFSCPC1R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VASTAGO, # 1 DERECHO KFSCPC2L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VASTAGO, # 2 IZQUIERDO KFSCPC2R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VASTAGO, # 2 DERECHO KFSCPC3L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL POROSO
---	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

OFFSET 4 DERECHA NO POROSA KTONP41L BASE TIBIAL OFFSET 4 + IZQUIERDA NO POROSA KTONP41R BASE TIBIAL OFFSET 4 + DERECHA NO POROSA KIDH517R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 5, DERECHO 17 MM KTAGW225 AUMENTO TIBIAL 25º, SZ. 2 KSC22140 TALLO MODULAR 22 X 140 MM KIDH1514 INSERTO TIBIAL DOBLE ADVANCE SIZE 1.5 DERECHO 12 MM KIMP112L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 1, 12 MM KSP17100 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 18 X 100 MM KTAGB510 AUMENTO TIBIAL SZ. 5 X 10 MM KIDH617R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 6, DERECHO 17 MM KIDH425L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 4, IZQ. 25 MM KTTIPC2P BASE TIBIAL POROSA TI NRO 2+ KTAPUN49 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 4 X 9 MM SPKI0038 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METALICO 1 X 12 MM SPKI0039 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METALICO 2 X 9 MM SPKI0040 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METALICO 2 X 10 MM SPKI0041 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METALICO 2 X 11 MM SPKI0042 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METALICO 2 X 12 MM	CON VÁSTAGO, # 3 IZQUIERDO KFSCPC3R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO, # 3 DERECHO KFSCPC4L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO, # 4 IZQUIERDO KFSCPC4R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO, # 4 DERECHO KFSCPC5L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO, # 5 IZQUIERDO KFSCPC5R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO, # 5 DERECHO KFSCPC6L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO, # 6 IZQUIERDO KFSCPC6R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PIVOTANTE MEDIAL POROSO CON VÁSTAGO, # 6 DERECHO KFNPN1L COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL NP, # 1 IZQUIERDO KFNPN2L COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL NP, # 2 IZQUIERDO KFNPN3L COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL NP, # 3 IZQUIERDO KFNPN4L COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL NP, # 4 IZQUIERDO KFNPN1R COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL NP, # 1 DERECHO KFNPN2R COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL NP, # 2 DERECHO KFNPN3R COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL NP, # 3 DERECHO
---	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.N.M.S.I.

KIRV330S INSERTO DE REVISIÓN SZ 3 ESTANDAR 30 MM	KFNPN4R COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL NP, # 4 DERECHO
KIRV410S INSERTO DE REVISIÓN SZ 4 ESTANDAR 10 MM	KTNPN10 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPART. NP, METÁLICO, #. 1
KTAOB105 AUMENTO TIBIAL OFFSET 1 X 5 MM	KTNPN20 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPART. NP, METÁLICO, #. 2
KIPS0517 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 5, 17 MM	KTNPN30 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPART. NP, METÁLICO, #. 3
KITC525R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 5, 25 MM	KTNPN40 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPART. NP, METÁLICO, #. 4
DERECHO	KIUN0108 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 1X8 MM
KIRV630S INSERTO DE REVISION SZ 6 ESTANDAR 30 MM	KIUN0109 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 1X9 MM
KDHR1520 INSERTO TIBIAL DOBLE ADVANCE SIZE 1.5 DERECHO 20 MM	KIUN0110 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 1X10 MM
KIDH325L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 3, IZQ. 25 MM	KIUN0111 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 1X11 MM
KIDH325R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 3, DERECHO 25 MM	KIUN0112 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 1X12 MM
KITP2410 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 4, 10 MM	KIUN0208 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 2X8 MM
KITP2412 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 4, 12 MM	KIUN0209 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 2X9 MM
KITP2414 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 4, 14 MM	KIUN0210 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 2X10 MM
KITP2417 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 4, 17 MM	KIUN0211 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 2X11 MM
KITP2420 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 4, 20 MM	KIUN0212 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 2X12 MM
KITP2425 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 4, 25 MM	KIUN0308 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 3X8 MM
KFCCNP5R COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN SZ. 5 NO POROSO	KIUN0309 INSERTO TIBIAL
KFCCNP6L COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN SZ. 6	



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

NO POROSO KFCCNP6R COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN SZ. 6 NO POROSO KFPAN105 AUMENTO FEMORAL POSTERIOR 1 X 5 MM KFPAN110 AUMENTO FEMORAL POSTERIOR 1 X 10 MM KFPAN205 AUMENTO FEMORAL POSTERIOR 2 X 5 MM KFPAN210 AUMENTO FEMORAL POSTERIOR 2 X 10 MM KIDH510L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 5, IZQ. 10 MM KIDH510R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 5, DERECHO 10 MM KIDH512L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 5, IZQ. 12 MM KIMP312L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 3, 12 MM KIMP312R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 3, 12 MM KIPS2612 INSERTO TIBIAL ADVANCE II POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 6, 12 MM KITC3512 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 5, 12 MM KITC3514 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 5, 14 MM KITC3517 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 5, 17 MM KITC3520 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 5, 20 MM KITC3525 INSERTO TIBIAL TRADICIONAL NRO 5, 25 MM KIPS0525 INSERTO TIBIAL ADVANCE POSTERIR ESTABILIZADO NRO 5, 25 MM KDH51512 INSERTO TIBIAL DOBLE ADVANCE SIZE 1.5 DERECHO 12 MM KFPSNP30 COMPONENTE FEMORAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 3 KSP12100 TALLO MODULAR DE	UNICOMPARTIMENTAL, # 3X9 MM KIUN0310 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 3X10 MM KIUN0311 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 3X11 MM KIUN0312 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 3X12 MM KIUN0408 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 4X8 MM KIUN0409 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 4X9 MM KIUN0410 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 4X10 MM KIUN0411 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 4X11 MM KIUN0412 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL, # 4X12 MM KTAPUN17 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 1X7 MM KTAPUN18 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 1X8 MM KTAPUN19 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 1X9 MM KTAPU110 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 1X10 MM KTAPU112 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 1X12 MM KTAPUN27 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 2X7 MM KTAPUN28 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 2X8 MM KTAPUN29 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 2X9 MM
---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 13 X 100 MM KTSLFM41 BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO NRO 4+ KTSLFM50 BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO NRO 5 KTSLFM51 BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO NRO 5+ KTSLFM60 BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO NRO 6 KITP2110 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 1, 10 MM KITP2112 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 1, 12 MM KITP2114 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 1, 14 MM KITP2117 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 1, 17 MM KIDH420L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 4, IZQ. 20 MM KIRV325S INSERTO DE REVISIÓN SZ 3 ESTANDAR 25 MM KIMP212R INSERTO TIBIAL PIVOTANTE DERECHO # 2, 12 MM KTONP50L BASE TIBIAL OFFSET 5 IZQUIERDA NO POROSA KTONP50R BASE TIBIAL OFFSET 5 DERECHA NO POROSA KITP2212 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 2, 12 MM KITP2214 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 2, 14 MM KIMP214L INSERTO TIBIAL PIVOTANTE IZQUIERDO # 2, 14 MM KTTIPC40 BASE TIBIAL	KTAPU210 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 2X10 MM KTAPU212 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 2X12 MM KTAPUN37 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 3X7 MM KTAPUN38 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 3X8 MM KTAPUN39 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 3X9 MM KTAPU310 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 3X10 MM KTAPU312 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 3X12 MM KTAPUN47 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 4X7 MM KTAPUN48 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 4X8 MM KTAPUN49 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 4X9 MM KTAPU410 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 4X10 MM KTAPU412 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL-POLY (SIC), # 4X12 MM KTNPUN10 ADVANCE COMPONENTE TIBIAL UNICOMPART. NO POROSO, METÁLICO, # 1 KTNPUN20 ADVANCE COMPONENTE TIBIAL UNICOMPART. NO POROSO, METÁLICO, # 2 KTNPUN30 ADVANCE COMPONENTE TIBIAL UNICOMPART. NO POROSO, METÁLICO, # 3 KTNPUN40 ADVANCE
---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

MODULAR POROSA TI NRO 4 KTAPUN17 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL ALL POLLY 1 X 7 MM KTTIHA60 COMPONENTE TIBIAL CUBIERTO HA NRO 6 7552001000 TORNILLO ESPONJOSO 6.5 MM X 10 MM 7552001500 TORNILLO ESPONJOSO 6.5 MM X 15 MM 7552002000 TORNILLO ESPONJOSO 6.5 MM X 20 MM 7552002500 TORNILLO ESPONJOSO 6.5 MM X 25 MM KTPPC010 BASE TIBIAL COCR ADVANCE SIZE 1 KTPPC011 BASE TIBIAL COCR ADVANCE SIZE 1+ KTPPC020 BASE TIBIAL COCR ADVANCE SIZE 2 KTPPC021 BASE TIBIAL COCR ADVANCE SIZE 2+ KTPPC030 BASE TIBIAL COCR ADVANCE SIZE 3 KTPPC031 BASE TIBIAL COCR ADVANCE SIZE 3+ KTPPC040 BASE TIBIAL COCR ADVANCE SIZE 4 KTPPC041 BASE TIBIAL COCR ADVANCE SIZE 4+ KTPPC050 BASE TIBIAL COCR ADVANCE SIZE 5 KTPPC051 BASE TIBIAL COCR ADVANCE SIZE 5+ KTPPC060 BASE TIBIAL COCR ADVANCE SIZE 6 KIUN0410 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL 4 X 10 MM 7552003000 TORNILLO ESPONJOSO 6.5 MM X 30 MM 7552003500 TORNILLO ESPONJOSO 6.5 MM X 35 MM 7552004000 TORNILLO ESPONJOSO 6.5 MM X 40 MM KIDH317L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 3 IZQUIERDO, 17MM KFSCNP3L COMPONENTE FEM. PIVOTANTE MEDIAL NO	COMPONENTE TIBIAL UNICOMPART. NO POROSO, METÁLICO, # 4 KFTCHA1L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL COBERTURA HA # 1 , IZQUIERDO KFTCHA1R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL COBERTURA HA # 1 , DERECHO KFTCHA2L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL COBERTURA HA # 2 , IZQUIERDO KFTCHA2R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL COBERTURA HA # 2 , DERECHO KFTCHA3L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL COBERTURA HA # 3 , IZQUIERDO KFTCHA3R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL COBERTURA HA # 3 , DERECHO KFTCHA4L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL COBERTURA HA # 4 , IZQUIERDO KFTCHA4R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL COBERTURA HA # 4 , DERECHO KFTCHA5L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL COBERTURA HA # 5 , IZQUIERDO KFTCHA5R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL COBERTURA HA # 5 , DERECHO KFTCHA6L ADVANCE COMPONENTE FEMORAL COBERTURA HA # 6 , IZQUIERDO KFTCHA6R ADVANCE COMPONENTE FEMORAL COBERTURA HA # 6 , DERECHO KTTIHA10 ADVANCE COMPONENTE TIBIAL, COBERTURA HA, # 1 KTTIHA11 ADVANCE COMPONENTE TIBIAL,
--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

POROSO C/VASTAGO SIZE 3 IZQ KFSCNP3R COMPONENTE FEM. PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO C/VASTAGO SIZE 3 DERECHO KFSCNP4L COMPONENTE FEM. PIVOTANTE MEDIAL NO POROSO C/VASTAGO SIZE 4 IZQUIERDO KITP2120 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 1, 20 MM KITP2217 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 2, 17 MM KITP2220 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 2, 20 MM KITP2225 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 2, 25 MM KITP2310 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 3, 10 MM KITP2312 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 3, 12 MM KITP2314 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 3, 14 MM KITP2317 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 3, 17 MM KIRV217S INSERTO DE REVISIÓN SZ 2 ESTANDAR 17 MM KITC112R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 1, 12 MM DERECHO KFRVNP4L COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO NRO 4 IZQUIERDO KFRVNP6R COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO NRO 6 DERECHO KFRVNP5L COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO NRO 5 IZQUIERDO	COBERTURA HA, # 1 PLUS KTTIHA20 ADVANCE COMPONENTE TIBIAL, COBERTURA HA, # 2 KTTIHA21 ADVANCE COMPONENTE TIBIAL, COBERTURA HA, # 2 PLUS KTTIHA30 ADVANCE COMPONENTE TIBIAL, COBERTURA HA, # 3 KTTIHA31 ADVANCE COMPONENTE TIBIAL, COBERTURA HA, # 3 PLUS KTTIHA40 ADVANCE COMPONENTE TIBIAL, COBERTURA HA, # 4 KTTIHA41 ADVANCE COMPONENTE TIBIAL, COBERTURA HA, # 4 PLUS KTTIHA50 ADVANCE COMPONENTE TIBIAL, COBERTURA HA, # 5 KTTIHA51 ADVANCE COMPONENTE TIBIAL, COBERTURA HA, # 5 PLUS KTTIHA60 ADVANCE COMPONENTE TIBIAL, COBERTURA HA, # 6 7552001000 TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO, 6.5 MM X 10 MM 7552001500 TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO, 6.5 MM X 15 MM 7552002000 TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO, 6.5 MM X 20 MM 7552002500 TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO, 6.5 MM X 25 MM 7552003000 TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO, 6.5 MM X 30 MM 7552003500 TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO, 6.5 MM X 35 MM 7552004000 TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO, 6.5 MM X 40 MM
---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

KFCCNP5L COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN SZ. 5 NO POROSO	7552004500 TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO, 6.5 MM X 45 MM
7552004500 TORNILLO ESPONJOSO 6.5 MM X 45 MM	7552005000 TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO, 6.5 MM X 50 MM
KTSLFM25 BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO NRO 2.5	7552005500 TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO, 6.5 MM X 55 MM
KTSLFM30 BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO NRO 3	7552006000 TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO, 6.5 MM X 60 MM
KTSLFM31 BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO NRO 3+	7552006500 TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO, 6.5 MM X 65 MM
KTSLFM40 BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO NRO 4	7552007000 TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO, 6.5 MM X 70 MM
KIDH125R INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA SIZE 1 DERECHO 25 MM	7552007500 TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO, 6.5 MM X 75 MM
KITC110L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 3, 10 IZQ.	7552008000 TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO, 6.5 MM X 80 MM
KITC310R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 3, 10 DERECHO	SPKI0035 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METÁLICO, 1 X 9 MM
KIRV225S INSERTO DE REVISION NRO 2 ESTANDAR, 25 MM	SPKI0036 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METÁLICO, 1 X 10 MM
KDHR1512 INSERTO TIBIAL DOBLE ADVANCE SIZE 1.5 MM DERECHO 12 MM	SPKI0037 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METÁLICO, 1 X 11 MM
KTNPUN40 COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METAL NRO 4	SPKI0038 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METÁLICO, 1 X 12 MM
KSP12140 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 13 X 140 MM	SPKI0039 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METÁLICO, 2 X 9 MM
KSP12200 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 13 X 200 MM	SPKI0040 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METÁLICO, 2 X 10 MM
KSP13100 TALLO MODULAR DE LLENADO DE CANAL EXTENSIÓN 14 X 100 MM	SPKI0041 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METÁLICO, 2 X 11 MM
KITP2125 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 1, 25 MM	SPKI0042 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METÁLICO, 2 X 12 MM
KITP2210 INSERTO TIBIAL ADVANCE TRADICIONAL NRO 2, 10 MM	SPKI0043 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

KIDH317L INSERTO TIBIAL ADVANCE DOBLE ALTURA NRO 3, IZQ. 17 MM KIRV110S INSERTO DE REVISIÓN SZ 1 ESTANDAR 10 MM KIRV430M INSERTO DE REVISION SZ 4, 30 MM KTPSP214 IMPLANTE TIBIAL POSTERIOR ESTABILIZADO NRO 2, 14 MM KITC410R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 4, 10 MM DERECHO KITC412L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 4, 12 MM IZQUIERDO KITC412R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 4, 12 MM DERECHO KITC414L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 4, 14 MM IZQUIERDO KITC414R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 4, 14 MM DERECHO KITC417L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 4, 17 MM IZQUIERDO KITC417R INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 4, 17 MM DERECHO KITC420L INSERTO PIVOTANTE MEDIAL NRO 4, 20 MM IZQUIERDO KIRV620S INSERTO DE REVISION SZ 6 ESTANDAR 20 MM KIRV125S INSERTO DE REVISIÓN SZ 1 ESTANDAR 25 MM KIRV130S INSERTO DE REVISIÓN SZ 1 ESTANDAR 30 MM KIRV210S INSERTO DE REVISIÓN SZ 2 ESTANDAR 10 MM KIRV212S INSERTO DE REVISIÓN SZ 2 ESTANDAR 12	METÁLICO, 3 X 9 MM SPKI0044 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METÁLICO, 3 X 10 MM SPKI0045 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METÁLICO, 3 X 11 MM SPKI0046 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METÁLICO, 3 X 12 MM SPKI0047 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METÁLICO, 4 X 9 MM SPKI0048 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METÁLICO, 4 X 10 MM SPKI0049 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METÁLICO, 4 X 11 MM SPKI0050 INSERTO TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL METÁLICO, 4 X 12 MM SPKP4335 ADVANCE COMPONENTE PATELAR ALL POLLY (SIC) 35 MM, EXPANSIBLE SPKP4338 ADVANCE COMPONENTE PATELAR ALL POLLY (SIC) 38 MM, EXPANSIBLE SPKP4341 ADVANCE COMPONENTE PATELAR ALL POLLY (SIC) 41 MM, EXPANSIBLE KTTPC010 ADVANCE BASE TIBIAL COCR KTTPC011 ADVANCE BASE TIBIAL COCR KTTPC020 ADVANCE BASE TIBIAL COCR KTTPC021 ADVANCE BASE TIBIAL COCR KTTPC030 ADVANCE BASE TIBIAL COCR KTTPC031 ADVANCE BASE TIBIAL COCR KTTPC040 ADVANCE BASE TIBIAL COCR KTTPC041 ADVANCE BASE
---	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.N.M.S.T.

	MM KIRV214S INSERTO DE REVISIÓN SZ 2 ESTANDAR 14 MM SPKI0050 INSERTO TIBIAL UNCIMPARTIMENTAL METALICO 4 X 12 MM SPKP4335 COMPONENTE PATELAR ALL POLLY 35 MM EXPANSIBLE	TIBIAL COCR KTPPC050 ADVANCE BASE TIBIAL COCR KTPPC051 ADVANCE BASE TIBIAL COCR KTPPC060 ADVANCE BASE TIBIAL COCR SPKT4C10 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, CON CLAVOS, COBERTURA HA, # 1 SPKT4C11 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, CON CLAVOS, COBERTURA HA, # 1+ SPKT4C20 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, CON CLAVOS, COBERTURA HA, # 2 SPKT4C21 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, CON CLAVOS, COBERTURA HA, # 2+ SPKT4C30 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, CON CLAVOS, COBERTURA HA, # 3 SPKT4C31 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, CON CLAVOS, COBERTURA HA, # 3+ SPKT4C40 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, CON CLAVOS, COBERTURA HA, # 4 SPKT4C41 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, CON CLAVOS, COBERTURA HA, # 4+ SPKT4C50 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, CON CLAVOS, COBERTURA HA, # 5 SPKT4C51 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, CON CLAVOS, COBERTURA HA, # 5+ SPKT4C60 ADVANCE II BASE TIBIAL POROSA, CON CLAVOS, COBERTURA HA, # 6 SPKT0042 ADVANCE TALLO MODULAR CRUCIFORME 1-2 CUBIERTA HA (41641) SPKT0043 ADVANCE TALLO MODULAR CRUCIFORME 3-4 CUBIERTA HA (41702) SPKT0044 ADVANCE TALLO MODULAR CRUCIFORME 5-6 CUBIERTA HA (41765) SPKT1855 ADVANCE TALLO
--	---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

		TIBIAL 18 X 55 MM SPKT2060 ADVANCE TALLO TIBIAL 20 X 60 MM KFTCNN2L ADVANCE STATURE™ COMPONENTE FEMORAL # 2 IZQUIERDO NO POROSO KFTCNN3L ADVANCE STATURE™ COMPONENTE FEMORAL # 3 IZQUIERDO NO POROSO KFTCNN4L ADVANCE STATURE™ COMPONENTE FEMORAL # 4 IZQUIERDO NO POROSO KFTCNN2R ADVANCE STATURE™ COMPONENTE FEMORAL # 2 DERECHO NO POROSO KFTCNN3R ADVANCE STATURE™ COMPONENTE FEMORAL # 3 DERECHO NO POROSO KFTCNN4R ADVANCE STATURE™ COMPONENTE FEMORAL # 4 DERECHO NO POROSO KFTCPN2L ADVANCE STATURE™ COMPONENTE FEMORAL # 2 IZQUIERDO, POROSO KFTCPN3L ADVANCE STATURE™ COMPONENTE FEMORAL # 3 IZQUIERDO, POROSO KFTCPN4L ADVANCE STATURE™ COMPONENTE FEMORAL # 4 IZQUIERDO, POROSO KFTCPN2R ADVANCE STATURE™ COMPONENTE FEMORAL # 2 DERECHO, POROSO KFTCPN3R ADVANCE STATURE™ COMPONENTE FEMORAL # 3 DERECHO, POROSO KFTCPN4R ADVANCE STATURE™ COMPONENTE FEMORAL # 4 DERECHO, POROSO KSTMSP12 ADVANCE® TALLO TIBIAL DE FIJACIÓN CON PUA KSPM1512 ADVANCE® PRESSFIT QUILLA MODULAR 15 MM X 1/2 (41641) KSPM1534 ADVANCE® PRESSFIT QUILLA MODULAR 15 MM X 3/4 (41702) KSPM1556 ADVANCE® PRESSFIT QUILLA MODULAR DE
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

		FIJACIÓN A PRESIÓN 15 MM X 5/6 (41765) KSPP1512 ADVANCE® PRESSFIT QUILLA MODULAR DE FIJACION A PRESIÓN, PRIMARIA, 15 MM X 1/2 (41641) KSPP1534 ADVANCE® PRESSFIT QUILLA MODULAR DE FIJACIÓN A PRESIÓN, PRIMARIA, 15 MM X 3/4 (41702) KSPP1556 ADVANCE® PRESSFIT QUILLA MODULAR DE FIJACIÓN A PRESIÓN, PRIMARIA 15 MM X 5/6 (41765) SPKF0066 ADVANCE® COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO C/ENCAJE ABIERTO # 2 SPKF0067 ADVANCE® COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN NO POROSO C/ENCAJE ABIERTO # 3 SPKF0068 ADVANCE® COMPONENTE FEMORAL DE REVISION NO POROSO C/ENCAJE ABIERTO # 4 SPKF0069 ADVANCE® COMPONENTE FEMORAL DE REVISIÓN NO POROSO C/ENCAJE ABIERTO # 5 KTSSFM10 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO # 1 KTSSFM11 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO # 1+ KTSSFM20 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO # 2 KTSSFM21 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO # 2+ KTSSFM25 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO # 2.5 KTSSFM30 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO # 3 KTSSFM31 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL CON
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		AGUJERO PARA TORNILLO # 3+ KTSSFM40 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO # 4 KTSSFM41 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO # 4+ KTSSFM50 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO # 5 KTSSFM51 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO # 5+ KTSSFM60 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL CON AGUJERO PARA TORNILLO # 6 KTSLFM10 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO # 1 KTSLFM11 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO # 1+ KTSLFM20 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO # 2 KTSLFM21 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO # 2+ KTSLFM25 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO, #2.5 KTSLFM30 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO, #3 KTSLFM31 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO, #3+ KTSLFM40 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO, #4 KTSLFM41 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO, #4+ KTSLFM50 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO, #5 KTSLFM51 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO, #5+
--	--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		KTSLFM60 ADVANCE® BIOFOAM® BASE TIBIAL SIN AGUJERO PARA TORNILLO, #6 KITP2110 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 1, 10 MM KITP2112 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 1, 12 MM KITP2114 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 1, 14 MM KITP2117 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 1, 17 MM KITP2120 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 1, 20 MM KITP2125 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 1, 25 MM KITP2210 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 2, 10 MM KITP2212 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 2, 12 MM KITP2214 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 2, 14 MM KITP2217 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 2, 17 MM KITP2220 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 2, 20 MM KITP2225 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 2, 25 MM KITP2310 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 3, 10 MM KITP2312 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 3, 12 MM KITP2314 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 3, 14 MM KITP2317 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS #
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		3, 17 MM KITP2320 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 3, 20 MM KITP2325 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 3, 25 MM KITP2410 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 4, 10 MM KITP2412 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 4, 12 MM KITP2414 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 4, 14 MM KITP2417 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 4, 17 MM KITP2420 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 4, 20 MM KITP2425 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 4, 25 MM KITP2510 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 5, 10 MM KITP2512 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 5, 12 MM KITP2514 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 5, 14 MM KITP2517 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 5, 17 MM KITP2520 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 5, 20 MM KITP2525 ADVANCE® INSERTO TIBIAL TRADICIONAL PLUS # 5, 25 MM KIPS2312 INSERTO TIBIAL POSTERIOR II, # 3, 12 MM KIPS2314 INSERTO TIBIAL POSTERIOR II, # 3, 14 MM
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		INSTRUMENTAL K0060064 UNI FRESA P/CLAVIJA FEMORAL, MED. 1-2 K0060061 UNI FRESA P/CLAVIJA FEMORAL, MED. 3-4 K0060062 UNI TEMPLATE FEMORAL, MED. 1/2 0 K0061080 UNI FRESA P/CLAVIJA TIBIAL 0 K0061101 UNI ESCOFINA ELÉCTRICA, MED. 1 , ESTILO HUB STRYKER K0061102 UNI ESCOFINA ELÉCTRICA, MED. 2 , ESTILO HUB STRYKER K0061103 UNI ESCOFINA ELÉCTRICA, MED. 3 , ESTILO HUB STRYKER K0061104 UNI ESCOFINA ELÉCTRICA, MED. 4 , ESTILO HUB STRYKER K0061201 UNI ESCOFINA ELÉCTRICA, MED. 1 HALL/3M/, ESTILO HUB MICROAIRE K0061202 UNI ESCOFINA ELÉCTRICA, MED. 2 HALL/3M/, ESTILO HUB MICROAIRE K0061203 UNI ESCOFINA ELÉCTRICA, MED. 3 HALL/3M/, ESTILO HUB MICROAIRE K0061204 UNI ESCOFINA ELÉCTRICA, MED. 4 HALL/3M/, ESTILO HUB MICROAIRE K0061017 ADVANCE® UNI TUBO PARA FRESA ESCARIADORA, MED. 1 K0061018 ADVANCE® UNI TUBO PARA FRESA ESCARIADORA, MED. 2 K0061019 ADVANCE® UNI TUBO PARA FRESA ESCARIADORA, MED. 3 K0061020 ADVANCE® UNI TUBO PARA FRESA ESCARIADORA, MED. 4 K0061021 ADVANCE® UNI CORTANTE P/FRESA ESCARIADORA, MED. 1 K0061022 ADVANCE® UNI
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

		CORTANTE P/FRESA ESCARIADORA, MED. 2 K0061023 ADVANCE® UNI CORTANTE P/FRESA ESCARIADORA, MED. 3 K0061024 ADVANCE® UNI CORTANTE P/FRESA ESCARIADORA, MED. 4 K0061025 ADVANCE® UNI HERRAMIENTO ENSAMBLE P/FRESA ESCARIADORA 0 K0061026 ADVANCE® UNI EJE P7FRESA ESCARIADORA 0 94008799 UNI TUBO ESCARIADOR P/FRESA ESCARIADORA, MED. 2 94008800 UNI TUBO ESCARIADOR P/FRESA ESCARIADORA, MED. 3 94008801 UNI PUNTA DE CORTE P/FRESA ESCARIADORA, MED. 2 94008802 UNI PUNTA DE CORTE P/FRESA ESCARIADORA, MED. 3 94008803 UNI EJE CONECTOR P/FRESA ESCARIADORA 94008290 UNI HERRAMIENTA ENSAMBLE FRESA ESCARIADORA 94007721 UNI PORTA INSERTO FEMORAL SIN ALMOHADILLA DE TEFLON 94008456 UNI INTRODUCTOR CON REFUERZO METÁLICO, MED.. 1 94008457 UNI INTRODUCTOR CON REFUERZO METÁLICO, MED.. 2 94008458 UNI INTRODUCTOR CON REFUERZO METÁLICO, MED.. 3 94008459 UNI INTRODUCTOR CON REFUERZO METÁLICO, MED.. 4 94008718 UNI MERAL BACKED INSERTER/INTRODUCTOR 94008717 UNI MERAL BACKED INSERTER SEATER/BASE P/INTRODUCTOR 94008805 UNI IMPACTOR BASE
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		TIBIAL , PEQUEÑO/MEDIANO 94008806 UNI IMPACTOR BASE TIBIAL, GRANDE/EXTRA LG K0051010 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 10MM K0050510 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 10.5MM K0050511 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 11.5MM K0050512 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 12.5MM K0050513 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 13.5MM K0050514 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 14.5MM K0050515 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 15.5MM K0050516 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 16.5MM K0050517 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 17.5MM K0050518 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 18.5MM K0050519 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 19.5MM K0050520 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 20.5MM K0050521 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 21.5MM K0050522 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 22.5MM K0051011 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 11MM K0051012 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR,
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		12MM K0051013 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 13MM K0051014 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 14MM K0051015 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 15MM K0051016 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 16MM K0051017 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 17MM K0051018 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 18MM K0051019 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 19MM K0051020 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 20MM K0051021 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 21MM K0051022 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 22MM K0051023 ADVANCE® , ESCARIADOR INTRAMEDULAR, 23MM SPKPG335 ADVANCE® PATELLA 35MM.GUÍA P/FRESA ESCARIADORA;EXPNDDED TRI- PEG AP ONLAY SPKPG338 ADVANCE® PATELLA 38MM.GUÍA P/FRESA ESCARIADORA;EXPNDDED TRI- PEG AP ONLAY SPKPG341 ADVANCE® PATELLA 41MM.GUÍA P/FRESA ESCARIADORA;EXPNDDED TRI- PEG AP ONLAY K0001296 ODYSSEY® CLAVIJAS ESTÉRILES, PACK 0 K0014620 ODYSSEY® CALIBRE
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		DE MEDICIÓN DCF, MED. 0 PARA ADVANCE® K0014618 ODYSSEY® CALIBRE DE MEDICIÓN DCF TRADICIONAL PARA ADVANCE® K0014700 ODYSSEY® GUÍA RE- PERFORACIÓN DCF PARA BLOQUES ADVANCE® 4-EN-1 K0001017 ODYSSEY® FRESA 1/8 " CON STOP K0001018 ODYSSEY® FRESA 3/16" CON STOP K0001022 ODYSSEY® FRESA TOTALMENTE ACANALADA 3/8" CON QUICK DISCONNECT K0001297 ODYSSEY® CLAVIJA ROSCADA, CON COLLARIN, PACK 2 C/U K0001002 ADVANCE® FRESA 3/8" CON QUICK DISCONNECT K0001005 ADVANCE® FRESA 1/8" CON QUICK DISCONNECT K0001006 ADVANCE® QUICK DISCONNECT PARA FRESA 1/8" K0001014 ADVANCE® FRESA 3/16" CON STOP K0001015 ADVANCE® BROCA 1/8 " X 100M CON QUICK DISCONNECT K0001102 ADVANCE® BROCA ESCALONADA 3/8" CON QUICK DISCONNECT 19910235 ENSAMBLE GUÍA ESCARIADOR PATELAR K0000900 ADVANCE® GUÍA VERIFICACIÓN EXTERNA/GUÍA VERIFICACIÓN EXTERNA (SIC) K0000905 ADVANCE® PORTA VARILLA ALINEACIÓN EXTERNA, ACTUALIZADO K0000901 ADVANCE® VARILLA CHEQUEO EXTERNA/VARILLA CHEQUEO EXTERNA (SIC) K0001009 ADVANCE® ASAS ESTABILIZANTES ROSCADAS K0001010 ADVANCE® ASAS ESTABILIZANTES QUICK DISCONNECT K0001012 ADVANCE® ASAS P/IMPULSOR ROSCADAS CON
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

		BISEL K0001013 ADVANCE® ASA T QUICK DISCONNECT CON FIJACIÓN K0001016 ADVANCE® ASA T QUICK DISCONNECT CON PLATINA ANCHA P/DEDO K0001003 ADVANCE® ASA T QUICK DISCONNECT K0001101 ADVANCE® ESCARIADOR PARA VARILLA 11" CON QUICK DISCONNECT K0001112 ADVANCE® ASA ROSCADA P/IMPULSOR CON BISEL K0002003 CLAVIJA P/FIJACIÓN, SIN CABEZA, 60MM K0002004 CLAVIJA P/FIJACIÓN, SIN CABEZA, 100MM K0002006 ADVANCE® CLAVIJA P/FIJACIÓN CABEZA PLANA, 45MM K0002007 ADVANCE® CLAVIJA FIJACIÓN BASE TIBIAL CON CABEZA AHUSADA K0002008 ADVANCE® EXTRACTOR P/CLAVIJA MARTILLO DE GOMA K0002009 ADVANCE® GANCHO EXTRACTOR MARTILLO DE GOMA K0002010 ADVANCE® EMPUJA CLAVIJA K0002011 ADVANCE® CLAVIJA P/FIJACIÓN, SIN CABEZA, SIN MUESCA, 80MM K0002015 ADVANCE® INTRODUCTOR DE CLAVIJA K0003100 BLOQUE ESPACIADOR MÁGICO (MAGIC) K0003101 VARILLA ALINEACIÓN P/BLOQUE ESPACIADOR MÁGICO (MAGIC) K0003104 FINSBURY, SONDA DE PROFUNDIDAD, 8MM K0003105 FINSBURY, SONDA DE PROFUNDIDAD, 10MM K0003106 FINSBURY, SONDA DE PROFUNDIDAD, 11MM K0003000 ADVANCE®
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		SEPARADORES LAMINARES K0013001 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL 4-EN-1 CON CLAVIJAS, MED. 1 K0013002 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL 4-EN-1 CON CLAVIJAS, MED. 2 K0013004 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL 4-EN-1 CON CLAVIJAS, MED. 4 K0013005 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL 4-EN-1 CON CLAVIJAS, MED. 5 K0013006 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL 4-EN-1 CON CLAVIJAS, MED. 6 K0014001 ADVANCE® BLOQUE L P/RESECCIÓN FEMORAL 4-EN-1 SIN CLAVIJAS, MED.1 K0014002 ADVANCE® BLOQUE L P/RESECCIÓN FEMORAL 4-EN-1 SIN CLAVIJAS, MED.2 K0014003 ADVANCE® BLOQUE L P/RESECCIÓN FEMORAL 4-EN-1 SIN CLAVIJAS, MED.3 K0014004 ADVANCE® BLOQUE L P/RESECCIÓN FEMORAL 4-EN-1 SIN CLAVIJAS, MED.4 K0014005 ADVANCE® BLOQUE L P/RESECCIÓN FEMORAL 4-EN-1 SIN CLAVIJAS, MED.5 K0014006 ADVANCE® BLOQUE L P/RESECCIÓN FEMORAL 4-EN-1 SIN CLAVIJAS, MED.6 K0003010 ADVANCE® BLOQUE PARA FLEXIÓN/EXTENSIÓN 10MM K0003012 ADVANCE® BLOQUE PARA FLEXIÓN/EXTENSIÓN 12MM K0003014 ADVANCE® BLOQUE PARA FLEXIÓN/EXTENSIÓN 14MM K0003017 ADVANCE® BLOQUE PARA FLEXIÓN/EXTENSIÓN 17MM K0003020 ADVANCE® BLOQUE PARA FLEXIÓN/EXTENSIÓN 20MM K0003025 ADVANCE® BLOQUE
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		PARA FLEXIÓN/EXTENSIÓN 25MM K0003030 ADVANCE® BLOQUE PARA FLEXIÓN/EXTENSIÓN 30MM K0003035 ADVANCE® BLOQUE PARA FLEXIÓN/EXTENSIÓN 35MM 18410135 DESTORNILLADOR K0032500 ADVANCE® ESCARIADOR PATELAR MODIFICADO 25MM K0032800 ADVANCE® ESCARIADOR PATELAR MODIFICADO 28MM K0012300 ADVANCE® CALIBRE P/MEDICIÓN, MED. 0-6 K0012301 ADVANCE® PROBADOR INSERTO ROTACIONAL, 0 GRADOS, MED. 0-6 K0012302 ADVANCE® PROBADOR INSERTO ROTACIONAL 3 GRADOS, MED. 0-7 K0012303 ADVANCE® STYLUS AGUZADO, MED. 0-6 K0012304 ADVANCE® STYLUS T-BAR, MED. 0 A 6 K0013200 ADVANCE® SRP® CALIBRE P/MEDICIÓN K0013300 ADVANCE® SRP® CALIBRE P/MEDICIÓN K0013315 ADVANCE® SRP® CALIBRE P/MEDICIÓN, MED. 0 A 6 K0014200 ADVANCE® CALIBRE P/MEDICIÓN C/REFERENCIA POSTERIOR K0016300 ADVANCE® SRP® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL, MED. 0 K0017515 ADVANCE® GUÍA CORTE FEMORAL DUAL FULCRUM, MED. 1.5 K0016415 ADVANCE® SRP® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL A/P, MED. 1.5 K0010015 ADVANCE® STYLUS
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL : K0014150 ADVANCE® BLOQUE L FEMORAL, MED. 1.5 K0017060 ADVANCE® CALIBRE P/MEDICIÓN A/P CORTE ANTERIOR BASTO, MED. 0-6 K0014415 ADVANCE® GUÍA P7RESECCIÓN SULCUS CON PIE POSTERIOR, MED. 1.5 K0014215 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN SULCUS, MED. 1.5 K0017301 ADVANCE® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL FULCRUM DUAL -.035BLDE , MED.1 K0017302 ADVANCE® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL FULCRUM DUAL -.035BLDE , MED.2 K0017303 ADVANCE® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL FULCRUM DUAL -.035BLDE , MED.3 K0017304 ADVANCE® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL FULCRUM DUAL -.035BLDE , MED.4 K0017305 ADVANCE® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL FULCRUM DUAL -.035BLDE , MED.5 K0017306 ADVANCE® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL FULCRUM DUAL -.035BLDE , MED.6 K0017500 ADVANCE® GUÍA DE CORTE FEMORAL FULCRUM DUAL, MED. 0 K0017510 ADVANCE® GUÍA DE CORTE FEMORAL FULCRUM DUAL, MED. 1 K0017520 ADVANCE® GUÍA DE CORTE FEMORAL FULCRUM DUAL, MED. 2 K0017530 ADVANCE® GUÍA DE CORTE FEMORAL FULCRUM DUAL, MED. 3 K0017540 ADVANCE® GUÍA DE CORTE FEMORAL FULCRUM DUAL, MED. 4 K0017550 ADVANCE® GUÍA DE CORTE FEMORAL FULCRUM DUAL, MED. 5 K0017560 ADVANCE® GUÍA DE CORTE FEMORAL FULCRUM DUAL, MED. 6
--	--	---

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		K0018000 ADVANCE® BLOQUE FULCRUM DUAL, MED. 0 CON RANURA .50" K0027010 ADVANCE® PUNZÓN DE QUILLA, PRESS FIT , MED. 0 K0027011 ADVANCE® PUNZÓN DE QUILLA, OVER, MED.D , MED. 0 K0027012 ADVANCE® PUNZÓN DE QUILLA, PUNZÓN DE QUILLA, PRESS FIT , MED. 1 - 2 SMF00867 ADVC.BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL FULCRUM DUAL, MED. 0 K0050008 ADVANCE® BASE TIBIAL/PLATAFORMA ENSAMBLE TALLO K0011250 ADVANCE® GUÍA ROTACIÓN EXTERNA CON GRAPA P/SULCUS K0011251 GUÍA EJE EPICONDILAR PARA GRAPA DE SULCUA ADVANCE® 18410133 GUÍA BROCA TORNILLO BASE TIBIAL 0 K0012611 ADVANCE® PALETA P/GUÍA RESECCIÓN DISTAL K0012612 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN DISTAL CROSSHEAD CON RANURAS ABIERTAS 16100162 CUBRE IMPACTOR DE VARILLA P/VALGUS CON PERFIL REDUCIDO 16100163 CLAVIJA P/IMPACTOR VARILLA VALGUS, CORTA 0 K0021004 ADVANCE® CLIP ESTABILIZACIÓN P/INSERTO DE PRUEBA K0011252 ADVANCE® CROSSHAIR P/ROTACIÓN EXTERNA K0040369 ADVANCE® GUÍA DE CORTE TIBIAL AJUSTABLE K000906 ADVANCE GUÍA ALINEACIÓN EXTERNA PARA TIB IM AJUSTABLE 48020005 MINI BANDEJA P/ESTERILIZACIÓN 0 KS000041 ADVANCE® ONLAY,
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		BANDEJA Y CUBIERTA INSTRUMENTAL KS000071 ADVANCE® SRP® BANDEJA FEMORAL CON CUBIERTA #2 KS000080 ADVANCE® SRP® BANDEJA P/BLOQUES CON CUBIERTA KS001003 ADVANCE® MISC BANDEJA CON CUBIERTA 0 KS001004 ADVANCE® BASE P/PROBADORES TIBIALES & PUNZONES CON CUBIERTA KS001007 ADVANCE® BANDEJA ESTÉRIL P/INSERTO MED-PIV IZQUIERDO, CON CUBIERTA KS001008 ADVANCE® BANDEJA ESTÉRIL P/INSERTO MED-PIV DERECHO, CON CUBIERTA KS001010 ADVANCE® BANDEJA ESTÉRIL 1/2 P/INSERTO FEMORAL DE PRUEBA, CON CUBIERTA KS001005 ADVANCE® BANDEJA Y CUBIERTA INSTRUMENTAL PRIMER CORTE DISTAL KS001000 ADVANCE® TRAD ARC TRAY W/ LID/BANDEJA CON CUBIERTA KS000010 ADVANCE® BANDEJA ESTÉRIL CORE CON CUBIERTA KS000020 ADVANCE® BANDEJA ESTÉRIL TIBIAL CON CUBIERTA KS000021 ADVANCE® BANDEJA ESTÉRIL P/INSERTO CON CUBIERTA KS000030 ADVANCE® BANDEJA ESTÉRIL P/INSERTO FEMORAL CON CUBIERTA KS000031 ADVANCE® PRIMERA BANDEJA ESTÉRIL DISTAL CON CUBIERTA KS000034 ADVANCE® BANDEJA ESTÉRIL P/ESPACIADOR DE BLOQUES, CON CUBIERTA KS000050 ADVANCE® CUBIERTA GENÉRICA 0 K0011000 PORTA INSERTO FEMORAL/IMPULSOR 0 K0011100 ADVANCE® PORTA
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		INSERTO FEMORAL PRIMARIO/IMPULSOR K0011101 ADVANCE® CABEZA FEMORAL POLY DE REEMPLAZO PRIMARIO K0011104 PORTA INSERTO FEMORAL/CABEZA DE REEMPLAZO IMPULSOR K0011200 ADVANCE® PORTA INSERTO FEMORAL/IMPULSOR POST STAB K0011201 ADVANCE® CABEZA FEMORAL POLY DE REEMPLAZO POST STAB K0014136 ADVANCE® GUÍA DE CORTE CON MUESCAS P/REVISIÓN POST STAB, MED. 6 K0014141 ADVANCE® GUÍA PS P/SULCUS CON BISEL, MED. 1 K0014142 ADVANCE® GUÍA PS P/SULCUS CON BISEL, MED. 2 K0014143 ADVANCE® GUÍA PS P/SULCUS CON BISEL, MED. 3 K0014144 ADVANCE® GUÍA PS P/SULCUS CON BISEL, MED. 4 K0014145 ADVANCE® GUÍA PS P/SULCUS CON BISEL, MED. 5 K0014146 ADVANCE® GUÍA PS P/SULCUS CON BISEL, MED. 6 K0015000 ADVANCE® IMPACTOR P/CABEZA FEMORAL K0015100 ADVANCE® IMPACTOR FEMORAL MONOLÍTICO K0015101 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL EN ARCO, BLOQUE L, MED. 1 K0015102 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL EN ARCO, BLOQUE L, MED. 2 K0015103 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL EN ARCO, BLOQUE L, MED. 3 K0015104 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL EN ARCO, BLOQUE L, MED. 4 K0015105 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL EN ARCO, BLOQUE L, MED. 5
--	--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
A.N.M.A.T.*

		K0015106 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL EN ARCO, BLOQUE L, MED. 6 K0015110 ADVANCE® CABEZA REEMPLAZO P/IMPACTOR FEMORAL K0015200 ADVANCE® IMPACTOR FEMORAL MODULAR CON POSICIONES K0015207 ADVANCE® CABEZA REEMPLAZO IMPACTOR MODULAR K0015208 ADVANCE® ASA P/IMPACTOR FEMORAL MODULAR K0015300 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL EN ARCO, BLOQUE L, MED. 0 K0016100 ADVANCE® EXTRACTOR FEMORAL K0016001 ADVANCE® SRP® STYLE , BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL, MED. 1 K0016002 ADVANCE® SRP® STYLE , BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL, MED. 2 K0016003 ADVANCE® SRP® STYLE , BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL, MED. 3 K0016004 ADVANCE® SRP® STYLE , BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL, MED. 4 K0016005 ADVANCE® SRP® STYLE , BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL, MED. 5 K0016006 ADVANCE® SRP® STYLE , BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL, MED. 6 K0016101 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL SRP® , MED. 1 K0016102 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL SRP® , MED. 2 K0016103 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL SRP® , MED. 3 K0016104 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL SRP® , MED. 4
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		K0016105 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL SRP® , MED. 5 K0016106 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL SRP® , MED. 6 19911012 SONDA DE REFERENCIA DE FUNCIÓN DUAL K0014027 ANEXO FULCRUM DUAL K0013101 ADVANCE® BLOQUE PARA RESECCIÓN FEMORAL CON CLAVIJAS, MED. 1 K0013102 ADVANCE® BLOQUE PARA RESECCIÓN FEMORAL CON CLAVIJAS, MED. 2 K0013103 ADVANCE® BLOQUE PARA RESECCIÓN FEMORAL CON CLAVIJAS, MED. 3 K0013104 ADVANCE® BLOQUE PARA RESECCIÓN FEMORAL CON CLAVIJAS, MED. 4 K0013105 ADVANCE® BLOQUE PARA RESECCIÓN FEMORAL CON CLAVIJAS, MED. 5 K0013106 ADVANCE® BLOQUE PARA RESECCIÓN FEMORAL CON CLAVIJAS, MED. 6 K0013201 ADVANCE® BLOQUE SÓLIDO PARA RESECCIÓN FEMORAL CON CLAVIJAS, MED. 1 K0013202 ADVANCE® BLOQUE SÓLIDO PARA RESECCIÓN FEMORAL CON CLAVIJAS, MED. 2 K0013203 ADVANCE® BLOQUE SÓLIDO PARA RESECCIÓN FEMORAL CON CLAVIJAS, MED. 3 K0013204 ADVANCE® BLOQUE SÓLIDO PARA RESECCIÓN FEMORAL CON CLAVIJAS, MED. 4 K0013205 ADVANCE® BLOQUE SÓLIDO PARA RESECCIÓN FEMORAL CON CLAVIJAS, MED. 5 K0013206 ADVANCE® BLOQUE
--	--	---

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		SÓLIDO PARA RESECCIÓN FEMORAL CON CLAVIJAS, MED. 6 K0012001 ADVANCE® CALIBRE P/MEDICIÓN A/P, LEFT K0012002 ADVANCE® CALIBRE P/MEDICIÓN A/P, RIGHT K0012003 ADVANCE® MÓDULO VALGUS A/P, 3 GRADOS K0012005 ADVANCE® MÓDULO VALGUS A/P, 5 GRADOS K0012007 ADVANCE® MÓDULO VALGUS A/P, 7 GRADOS K0012010 ADVANCE® MÓDULO VALGUS A/P, TUERCA DE FIJACIÓN K0013011 ADVANCE® OSTEÓTOMO INTERCONDILAR MED. 1 K0013012 ADVANCE® OSTEÓTOMO INTERCONDILAR MED. 2 K0013013 ADVANCE® OSTEÓTOMO INTERCONDILAR MED. 3 K0013014 ADVANCE® OSTEÓTOMO INTERCONDILAR MED. 4 K0013015 ADVANCE® OSTEÓTOMO INTERCONDILAR MED. 5 K0013016 ADVANCE® OSTEÓTOMO INTERCONDILAR MED. 6 K0012015 ADVANCE® CALIBRE P/MEDICIÓN A/P CON SÓNDA DE AMPLITUD K0012200 ADVANCE® CALIBRE DE MEDICIÓN A/P K0012101 PROBADOR DE INSERTO UNIVERSAL, 0 GRADOS K0012102 PROBADOR DE INSERTO UNIVERSAL, 3 GRADOS K0012105 PROBADOR DE INSERTO UNIVERSAL, 5 GRADOS 2271FA12 IMPACTOR/EXTRACTOR
--	--	--

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Reguladoras e Institutos
A.N.M.A.T.

		P/RODILLA K0012205 ADVANCE® STYLUS T-BAR P/CALIBRE DE MEDICIÓN K0012204 ADVANCE® STYLUS T-BAR P/CALIBRE DE MEDICIÓN K0012203 ADVANCE® STYLUS AGUZADO P/CALIBRE DE MEDICIÓN K0012501 ADVANCE® T-BAR STYLUS PARA CALIBRE DE MEDICIÓN ESTILO AXIOM® K0012500 ADVANCE® CALIBRE DE MEDICIÓN CON CARGA DE RESORTES ESTILO AXIOM® K0012502 ADVANCE® STYLUS AGUZADO PARA CALIBRE DE MEDICIÓN ESTILO AXIOM® K0011002 ADVANCE® CRUCETA RESECCIÓN FEMORAL DISTAL K0011003 ADVANCE® ESPACIADOR RECORTE FEMORAL DISTAL K0014201 ADVANCE® INSERTO P/ROTACIÓN EXTERNA 3 GRADOS, MED. 1 & 4 K0014202 ADVANCE® INSERTO P/ROTACIÓN EXTERNA 3 GRADOS, MED. 2 & 5 K0014203 ADVANCE® INSERTO P/ROTACIÓN EXTERNA 3 GRADOS, MED. 3 & 6 K0011001 ADVANCE® GUÍA ALINEACIÓN VALGUS FEMORAL K0012100 ADVANCE® CALIBRE P/MEDICIÓN UNIVERSAL K0011012 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN FEMORAL DISTAL, 9-13MM K0011013 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN FEMORAL DISTAL, CON TORNILLO FIJACIÓN K0012103 STYLUS P/MEDICIÓN AGUZADO UNIVERSAL K0012104 T-BAR P/STYLUS DE MEDICIÓN UNIVERSAL K0052001 ADVANCE® GUÍA ALINEACIÓN EXTERNA K0050009 ADVANCE® PLATAFORMA ENSAMBLÉ TALLO
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		COMPONENTE FEMORAL K0016201 ADVANCE® BLOCK P/RESECCIÓN FEMORAL SRP® MED. 1 K0016202 ADVANCE® BLOCK P/RESECCIÓN FEMORAL SRP® MED. 2 K0016203 ADVANCE® BLOCK P/RESECCIÓN FEMORAL SRP® MED. 3 K0016204 ADVANCE® BLOCK P/RESECCIÓN FEMORAL SRP® MED. 4 K0016205 ADVANCE® BLOCK P/RESECCIÓN FEMORAL SRP® MED. 5 K0016206 ADVANCE® BLOCK P/RESECCIÓN FEMORAL SRP® MED. 6 K0016401 ADVANCE® SRP® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL A/P, MED. 1 K0016402 ADVANCE® SRP® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL A/P, MED. 2 K0016403 ADVANCE® SRP® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL A/P, MED. 3 K0016404 ADVANCE® SRP® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL A/P, MED. 4 K0016405 ADVANCE® SRP® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL A/P, MED. 5 K0016406 ADVANCE® SRP® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL A/P, MED. 6 K0016301 ADVANCE® SRP® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL, MED. 1 K0016302 ADVANCE® SRP® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL, MED. 2 K0016303 ADVANCE® SRP® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL, MED. 3 K0016304 ADVANCE® SRP® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL, MED. 4 K0016305 ADVANCE® SRP®
--	--	--

F LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

		BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL, MED. 5 K0016306 ADVANCE® SRP® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL, MED. 6 16100011 ORTHOLOC® GUÍA SIERRA FEMORAL DISTAL MODIFICADA 16100014 ORTHOLOC® GUÍA ROTACIÓN EXTERNA 4 GRADOS 16100032 ORTHOLOC® CEPILLO PLATEAU, MEDIUM 16100036 ORTHOLOC® CEPILLO PLATEAU, XLARGE 16100062 ORTHOLOC® IMPACTOR VARILLA IM 18410213 ORTHOLOC® CALIBRE MEDICIÓN CABEZA PATELAR/FEMORAL 18411105 ORTHOLOC® CLAVIJA FIJACIÓN BLOQUE A/P EN BISEL 18411106 ORTHOLOC® EXTRACTOR VARILLA DE FIJACIÓN 18710705 ORTHOLOC® VARILLA IM AFLAUTADA, 5 GRADOS 7" 18710703 ORTHOLOC® VARILLA IM AFLAUTADA, 3 GRADOS 7" 18710707 ORTHOLOC® VARILLA IM AFLAUTADA, 7 GRADOS 7" 18711003 ORTHOLOC® VARILLA IM AFLAUTADA, 3 GRADOS 10" 18711005 ORTHOLOC® VARILLA IM AFLAUTADA, 5 GRADOS 10" 18711007 ORTHOLOC® VARILLA IM AFLAUTADA, 7 GRADOS 10" 18719004 LLAVE CON ASA T, MACHO 18770140 ORTHOLOC® EMPUJA CLAVIJA K0014100 ADVANCE® BLOQUE L FEMORAL, MED. 0 K0014101 ADVANCE® BLOQUE L FEMORAL, MED. 1 K0014102 ADVANCE® BLOQUE L FEMORAL, MED. 2 K0014103 ADVANCE® BLOQUE L FEMORAL, MED. 3 K0014104 ADVANCE® BLOQUE
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		L FEMORAL, MED. 4 K0014105 ADVANCE® BLOQUE L FEMORAL, MED. 5 K0014106 ADVANCE® BLOQUE L FEMORAL, MED. 6 K0012022 ADVANCE® T-BAR STYLUS A/P K0012050 ADVANCE® GUÍA DE CORTO BASTO A/D K0012115 SONDA DE PROFUNDIDAD P/CALIBRE DE MEDICIÓN UNIVERSAL K0012020 ADVANCE® PORTA STYLUS A/P K0012025 ADVANCE® PORTA STYLUS A/P K0012021 ADVANCE® PUNTA STYLUS A/P K0017000 ADVANCE® CALIBRE DE MEDICIÓN A/P PARA CORTE ANTERIOR BASTO K0017008 ADVANCE® FRESA/BARRENO CON STOP, 8MM K0017063 ADVANCE® VARILLA IM, 3 GRADOS 6" K0017065 ADVANCE® VARILLA IM, 5 GRADOS 6" K0017067 ADVANCE® VARILLA IM, 7 GRADOS 6" K0017073 ADVANCE® VARILLA IM, 3 GRADOS 7" K0017075 ADVANCE® VARILLA IM, 5 GRADOS 7" K0017077 ADVANCE® VARILLA IM, 7 GRADOS 7" K0017093 ADVANCE® VARILLA IM, 3 GRADOS 9" K0017095 ADVANCE® VARILLA IM, 5 GRADOS 9" K0017097 ADVANCE® VARILLA IM, 7 GRADOS 9" K0017103 ADVANCE® VARILLA IM, 3 GRADOS 10" K0017105 ADVANCE® VARILLA IM, 5 GRADOS 10" K0017107 ADVANCE® VARILLA IM, 7 GRADOS 10" K0017100 ADVANCE® GUÍA ALINEACIÓN IM
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.M.M.S.F.

		K0017101 ADVANCE® GUÍA ALINEACIÓN IM, VERSIÓN 2 K0017110 ADVANCE® GUÍA CORTE ANTERIOR BASTO K0017120 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN DISTAL K0018001 ADVANCE® UNI GUÍA DE CORTE FEMORAL, MED. 1 K0018002 ADVANCE® UNI GUÍA DE CORTE FEMORAL, MED. 2 K0018003 ADVANCE® UNI GUÍA DE CORTE FEMORAL, MED. 3 K0018004 ADVANCE® UNI GUÍA DE CORTE FEMORAL, MED. 4 K0018005 ADVANCE® UNI GUÍA DE CORTE FEMORAL, MED. 5 K0018006 ADVANCE® UNI GUÍA DE CORTE FEMORAL, MED. 6 K0018007 ADVANCE® UNI GUÍA ROTACIÓN FEMORAL K0056101 ADVANCE® GUÍA DE CORTE A/P DE REVISIÓN, MED. 1 K0056102 ADVANCE® GUÍA DE CORTE A/P DE REVISIÓN, MED. 2 K0056103 ADVANCE® GUÍA DE CORTE A/P DE REVISIÓN, MED. 3 K0056104 ADVANCE® GUÍA DE CORTE A/P DE REVISIÓN, MED. 4 K0056105 ADVANCE® GUÍA DE CORTE A/P DE REVISIÓN, MED. 5 K0017125 ADVANCE® BARRA FIJACIÓN RESECCIÓN DISTAL K0017130 ADVANCE® BLOQUE RECORTE DISTAL K0017200 ADVANCE® POSICIONADOR DE IMPACTOR IM K0017201 ADVANCE® POSICIONADOR DE IMPACTOR IM CON EXTRACTOR ROSCADO K0017210 ADVANCE® CLAVIJA POSICIONADOR IMPACTOR IM KTIBTLS1 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, MED. 1,
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. S. I.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		UNIVERSAL KTIBTLS2 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, MED. 2 , UNIVERSAL KTIBTL3U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, MED. 3 , UNIVERSAL KTIBTL4U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, MED. 4 , UNIVERSAL K00STR00 ADVANCE® BASE MONOLÍTICA DE PRUEBA, : MEDIDA 0 K00STR10 ADVANCE® BASE MONOLÍTICA DE PRUEBA, MEDIDA 1 K00STR20 ADVANCE® BASE MONOLÍTICA DE PRUEBA, MEDIDA 2/1+ K00STR30 ADVANCE® BASE MONOLÍTICA DE PRUEBA, MEDIDA 3/2+ K00STR40 ADVANCE® BASE MONOLÍTICA DE PRUEBA, MEDIDA 4/3+ K00STR50 ADVANCE® BASE MONOLÍTICA DE PRUEBA, : MEDIDA 5/4+ K00STR60 ADVANCE® BASE MONOLÍTICA DE PRUEBA, MEDIDA 6/5+ KTIBTL1U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, MEDIDA 1 , UNIVERSAL KTIBTL2U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, MEDIDA 2 , UNIVERSAL KTIBTR1U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, MEDIDA 1 , UNIVERSAL KTIBTR2U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, MEDIDA 2 , UNIVERSAL KTIBTR3U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, MEDIDA 3 , UNIVERSAL KTIBTR4U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, MEDIDA 4 , UNIVERSAL KTIBTR5U ADVANCE® BASE
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		TIBIAL DE PRUEBA, MEDIDA 5 , UNIVERSAL KTIBTR6U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, MEDIDA 6 , UNIVERSAL KTIBTL5U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, MEDIDA 5 , UNIVERSAL KTIBTL6U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, MEDIDA 6 , UNIVERSAL SMT00227 CUSTOM 0 GRADO, ENSAMBLE GUÍA DE CORTE TIBIAL EXTERNO K0021003 ADVANCE® CLAVIJA P/INSERTO TIBIAL DE PRUEBA K0021012 ADVANCE® ASA P/BASE TIBIAL DE PRUEBA/GUÍA BROCA K0027220 ADVANCE® EXTRACTOR BASE TIBIAL K0027224 ADVANCE® EXTRACTOR BASE TIBIAL II/IMPACTOR K0027210 ADVANCE® IMPACTOR INSERTO TIBIAL K0027021 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA/PUNZÓN PRESS FIT, MED. 1 - 2 K0027034 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA,/PUNZÓN PRESS FIT, MED. 3 - 4 K0027043 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA,/PUNZÓN PRESS FIT, MED. 3 - 4 K0027056 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA,/PUNZÓN PRESS FIT, MED. 5 - 6 K0027065 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA,/PUNZÓN PRESS FIT, MED. 5 - 6 K0027101 ADVANCE® ASA P7GUÍA PUNZÓN EN QUILLA K0027102 ADVANCE® ESCARIADOR EN QUILLA PRESS FIT K0027103 ADVANCE® ESCARIADOR OVERSIZE EN QUILLA
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.I.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		K0027104 ADVANCE® MANGUITO P/ESCARIADOR PRESS FIT K0027105 ADVANCE® MANGUITO P/ESCARIADOR OVERSIZE K0027110 ADVANCE® GUÍA OVERSIZE EN QUILLA P/ALETAS EXTENDIDAS K0027121 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA OVERSIZE, MED. 1 - 2 K0027120 ADVANCE® GUÍA P/PUNZÓN EN QUILLA , CLAVIJAS REDUCIDAS K0027143 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA OVERSIZE, MED. 3 - 4 K0027165 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA OVERSIZE, MED. 5 - 6 K0027222 ADVANCE® EXTRACTOR DE BASE TIBIAL, GUÍA ALINEACIÓN TALLO TIBIAL K0027225 ADVANCE® IMPACTOR TIBIAL MONOLÍTICO K0021011 ADVANCE® ASA P/GUÍA DE BROCA BASE TIBIAL K0026100 ADVANCE® IMPACTOR TIBIAL MONOLÍTICO ALL POLY K0026211 ADVANCE® COMP. TIBIAL ALL POLY/TALLO DE PRUEBA, MED. 1 K0026212 ADVANCE® COMP. TIBIAL ALL POLY/ TALLO DE PRUEBA, MED. 2 KPSMT108 ADVANCE® COMP. TIBIAL MONO ALL POLY DE PRUEBA, 8MM, MED. 1 KPSMT208 ADVANCE® COMP. TIBIAL MONO ALL POLY DE PRUEBA, 8MM, MED. 2 KPSMT308 ADVANCE® COMP. TIBIAL MONO ALL POLY DE PRUEBA, 8MM, MED. 3 KPTRTP26 ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA ALL POLY, 3 CLAVIJAS, 26MM KPTRTP29 ADVANCE® PATELLA
--	--	--

↓

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.I.T.

		DE PRUEBA ALL POLY, 3 CLAVIJAS, 29MM KPTRTP32 ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA ALL POLY, 3 CLAVIJAS, 32MM KPTRTP35 ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA ALL POLY, 3 CLAVIJAS, 35MM KPTRTP38 ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA ALL POLY, 3 CLAVIJAS, 38MM KPTRTP41 ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA ALL POLY, 3 CLAVIJAS, 41MM KPTR25HI ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, CLAVIJA ÚNICA, 25MM, DOMO ELEVADO KPTR25LO ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, CLAVIJA ÚNICA, 25MM, DOMO BAJO KPTR28HI ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, CLAVIJA ÚNICA, 28MM, DOMO ELEVADO KPTR28LO ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, CLAVIJA ÚNICA, 28MM, DOMO BAJO KPTR32ST ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, DELGADA, CLAVIJA ÚNICA, 32MM KPTR35ST ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, DELGADA, CLAVIJA ÚNICA, 35MM KPTR38SP ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, CLAVIJA ÚNICA, 38MM KPTR41SP ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, CLAVIJA ÚNICA, 41MM K0031000 ADVANCE® GRAPA PATELAR PARALELA STREAMLINE K0031006 ANEXO CON GRAPA PARALELA ESPIGADA K0031007 ANEXO CON GRAPA PARALELA LISA K0032501 ADVANCE® BOQUILLA EXTERNA DE REEMPLAZO PARA ESCARIADOR PATELAR 25MM K0032801 ADVANCE®
--	--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.*

		BOQUILLA EXTERNA DE REEMPLAZO PARA ESCARIADOR PATELAR 28MM K0030000 GRAPA DE CEMENTO P/PATELA LIGHTWEIGHT (SUPERLIVIANA) K0031100 GRAPA PATELAR DE CIERRE PARALELO MODULAR K0031202 ADVANCE® GRAPA PATELAR ESTILO BRIDA K0031204 ADVANCE® DISCO P/ESCARIADOR PATELAR, DE REEMPLAZO, ESTILO BRIDA K0031200 ADVANCE® BROCA PATELAR DE INICIO, ESTILO BRIDA K0031003 ADVANCE® FRESA DE ESPIGA ONLAY TRI-PEG ALL POLY PATELAR K0031020 ADVANCE® FRESA DE ESPIGA ONLAY TRI-PEG ALL POLY PATELAR 4 ACANADA K0031021 ADVANCE® FRESA DE ESPIGA POSICIÓN INDIVIDUAL, ALL POLY PATELAR 4 ACANALADA K0031025 FRESA DE ESPIGA, PATELA REBAJADA 25MM K0031028 FRESA DE ESPIGA, PATELA REBAJADA 28MM K0031008 SONDA P/GARGANTE PATELA REBAJADA K0003102 FINSBURY, GUÍA BROCA P/PATELA, 1 CLAVIJA K0003103 FINSBURY, GUÍA BROCA P/PATELA, 3 CLAVIJAS K0030100 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN ONLAY K0030220 GUÍA RESECCIÓN PATELAR ONLAY K0030221 TRI-PEG DRILL GUIDE/GUÍA BROCA TRES CLAVIJAS K0030222 SINGLE-PEG DRILL GUIDE/GUÍA BROCA CLAVIJA ÚNICA K0031125 ADVANCE® GUÍA ESCARIADOR P/PATELA REBAJADA. 25MM K0031128 ADVANCE® GUÍA
--	--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		ESCARIADOR P/PATELA REBAJADA. 28MM K0031201 ADVANCE® GUÍA BROCA PATELAR, ESTILO BRIDA K0032502 ADVANCE® CABEZA REEMPLAZO P/ESCARIADOR P/ESCARIADOR PATELAR 25MM K0032802 ADVANCE® CABEZA REEMPLAZO P/ESCARIADOR P/ESCARIADOR PATELAR 28MM K0030025 ADVANCE® ESCARIADOR PATELAR P/PATELA REBAJADA 25MM K0030028 ADVANCE® ESCARIADOR PATELAR P/PATELA REBAJADA 28MM K0031203 ADVANCE® MÓDULO ESCARIADOR PATELAR, ESTILO BRIDA KPTR2512 ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, ABRIDADA, MED. 1 & 2 X 25MM KPTR2534 ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, ABRIDADA, MED. 3 & 4 X 25MM KPTR2556 ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, ABRIDADA, MED. 5 & 6 X 25MM KPTR29SP ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, CLAVIJA ÚNICA, 29MM KPTR32SP ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, CLAVIJA ÚNICA, 32MM KPTR32TP ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, TRES CLAVIJAS, 32MM KPTR32TT ADVANCE® PATELA DE PRUEBA, DELGADA, TRI-PEG (TRES CLAVIJAS), 32MM KPTR35SP ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, CLAVIJA ÚNICA, 35MM KPTR35TP ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, TRES CLAVIJAS, 35MM KPTR35TT ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, DELGADA, TRES CLAVIJAS, 35MM
--	--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.I.T.*

		KPTR38TP ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, TRES CLAVIJAS, 38MM KPTR41TP ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, TRES CLAVIJAS, 41MM KPTRMB28 ADVANCE® PATELA DE PRUEBA CON REFUERZO DE METAL, 28MM K0031001 ADVANCE® ASIENTO P/GRAPA PATELAR 0 K0031002 ADVANCE® GUÍA FRESA DE ESPIGA PATELA ALL POLY, TRI-PEG K0031004 ADVANCE® GUÍA FRESA DE ESPIGA PATELA ALL POLY, POSICIÓN ÚNICA K0031005 ADVANCE® FRESA DE ESPIGA PATELA ALL POLY, POSICIÓN ÚNICA K0031013 ADVANCE® FRESA DE ESPIGA PATELA ONLAY TRI-PEG ALL POLY 18710165 ADVANTIM® CLAVIJA DE POSICIÓN P/VÍA PATELAR 18810210 SONDA DE RESECCIÓN PATELQAR ONLAY, 10MM 18810220 GUÍA RESECCIÓN PATELAR ONLAY 18810228 SONDA DE PROFUNDIDAD ONLAY PATELAR 8MM 18811210 SONDA ESPESOR MÍNIMO PATELAR ONLAY, 10MM 18811215 SONDA ESPESOR MÍNIMO PATELAR ONLAY, 15MM 18812211 SONDA P/RESECCIÓN PATELAR DE ESPESOR MÍNIMO ONLAY, 11MM 2271PR05 SONDA DE PROFUNDIDAD P/RESECCIÓN PATELAR ONLAY, 11MM 2271PR07 SONDA DE PROFUNDIDAD P/RESECCIÓN PATELAR ONLAY, 10MM 2271PR08 SONDA DE PROFUNDIDAD P/RESECCIÓN PATELAR ONLAY, 15MM KFTCTROL ADVANCE®
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

		PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, MED. 0 , IZQUIERDO KFTCTR0R ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, MED. 0 , DERECHO KFTCTR1L ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, MED. 1 , IZQUIERDO KFTCTR1R ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, MED. 1 , DERECHO KFTCTR15L ADVANCE PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, MED. 1.5 , IZQUIERDO KFTCTR15R ADVANCE PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, MED. 1.5 , DERECHO KFTCTR2L PROBADOR MED. 1.5, DERECHO (SIC) KFTCTR2R PROBADOR MED. 1.5, DERECHO KFTCTR3L ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, MED. 3 , IZQUIERDO KFTCTR3R ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, MED. 3 , DERECHO KFTCTR4L ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, MED. 4 , IZQUIERDO KFTCTR4R ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, MED. 4 , DERECHO KFTCTR5L ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, MED. 5 , IZQUIERDO KFTCTR5R ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, MED. 5 , DERECHO KFTCTR6L ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, MED. 6 , IZQUIERDO KFTCTR6R ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, MED. 6 , DERECHO KFTCTL1L ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, CON CLAVIJAS, MED. 1 , IZQUIERDO
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

		KFTCTL1R ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, CON CLAVIJAS, MED. 1 , DERECHO KFTCTL2L ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, CON CLAVIJAS, MED. 2 , IZQUIERDO KFTCTL2R ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, CON CLAVIJAS, MED. 2 , DERECHO KFTCTL3L ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, CON CLAVIJAS, MED. 3 , IZQUIERDO KFTCTL3R ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, CON CLAVIJAS, MED. 3 , DERECHO KFTCTL4L ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, CON CLAVIJAS, MED. 4 , IZQUIERDO KFTCTL4R ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, CON CLAVIJAS, MED. 4 , DERECHO KFTCTL5L ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, CON CLAVIJAS, MED. 5 , IZQUIERDO KFTCTL5R ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, CON CLAVIJAS, MED. 5 , DERECHO KFTCTL6L ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, CON CLAVIJAS, MED. 6 , IZQUIERDO KFTCTL6R ADVANCE® PROBADOR FEMORAL PRIMARIO, CON CLAVIJAS, MED. 6 , DERECHO KS001009 ADVANCE® COMP. FEMORAL/GUÍA RANURADA, BANDEJA CON CUBIERTA K0014311 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN SULCUS, MED. 1 K0014312 ADVANCE® GUÍA
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		RESECCIÓN SULCUS, MED. 2 K0014313 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN SULCUS, MED. 3 K0014314 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN SULCUS, MED. 4 K0014315 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN SULCUS, MED. 5 K0014316 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN SULCUS, MED. 6 K0014416 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN P/SULCUS CON PIÉ POSTERIOR, MED. 6 K0054101 ADVANCE® GUÍA DE CORTE P/REVISION ENCAJE, MED. 1 K0054102 ADVANCE® GUÍA DE CORTE P/REVISION ENCAJE, MED. 2 K0054103 ADVANCE® GUÍA DE CORTE P/REVISION ENCAJE, MED. 3 K0054104 ADVANCE® GUÍA DE CORTE P/REVISION ENCAJE, MED. 4 K0054105 ADVANCE® GUÍA DE CORTE P/REVISION ENCAJE, MED. 5 K0013017 ADVANCE® GUÍA P/OSTEÓTOMO INTERCONDILAR, MED. 1 & 5 K0013018 ADVANCE® GUÍA P/OSTEÓTOMO INTERCONDILAR, MED. 2 & 6 K0013019 ADVANCE® GUÍA P/OSTEÓTOMO INTERCONDILAR, MED. 3 K0013020 ADVANCE® GUÍA P/OSTEÓTOMO INTERCONDILAR, MED. 4 KITCT110 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 10MM KITCT112 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 12MM KITCT114 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 14MM KITCT117 ADVANCE® INSERTO
--	--	--

1

LV



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 17MM KITCT120 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 20MM KITCT125 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 25MM KITCT210 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 2, 10MM KITCT212 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 2, 12MM KITCT214 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 2, 14MM KITCT217 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 2, 17MM KITCT220 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 2, 20MM KITCT225 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 2, 25MM KITCT310 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 3, 10MM KITCT312 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 3, 12MM KITCT314 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 3, 14MM KITCT317 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 3, 17MM KITCT320 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 3, 20MM KITCT325 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 3, 25MM KITCT410 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 4, 10MM KITCT412 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 4, 12MM
--	--	--

1

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		KITCT414 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 4, 14MM KITCT417 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 4, 17MM KITCT420 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 4, 20MM KITCT425 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 4, 25MM KITCT510 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 5, 10MM KITCT512 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 5, 12MM KITCT514 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 5, 14MM KITCT517 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 5, 17MM KITCT520 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 5, 20MM KITCT525 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 5, 25MM KITCT610 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 6, 10MM KITCT612 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 6, 12MM KITCT614 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 6, 14MM KITCT617 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 6, 17MM KITCT620 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 6, 20MM KITCT625 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 6, 25MM KITCS110 ADVANCE® INSERTO
--	--	--

↓

LV



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.F.*

		DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 10MM KITCS112 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 12MM KITCS114 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 14MM KITCS117 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 17MM KITCS120 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 20MM KITCS125 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 25MM KITCN110 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 10MM KITCN112 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 12MM KITCN114 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 14MM KITCN117 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 17MM KITCN120 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 20MM KITCN125 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 1, 25MM KITCS210 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 2, 10MM KITCS212 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 2, 12MM KITCS214 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 2, 14MM KITCS217 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 2, 17MM KITCS220 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 2, 20MM
--	--	--

F

LV



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		KITCS225 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 2, 25MM KITCS310 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 3, 10MM KITCS312 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 3, 12MM KITCS314 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 3, 14MM KITCS317 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 3, 17MM KITCS320 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 3, 20MM KITCS325 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 3, 25MM KITCS410 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 4, 10MM KITCS412 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 4, 12MM KITCS414 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 4, 14MM KITCS417 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 4, 17MM KITCS420 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 4, 20MM KITCS425 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 4, 25MM KITCS510 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 5 10MM KITCS512 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 5, 12MM KITCS514 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 5, 14MM KITCS517 ADVANCE® INSERTO
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

		DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 5, 17MM KITCS520 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 5, 20MM KITCS525 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 5, 25MM KITCS610 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 6, 10MM KITCS612 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 6, 12MM KITCS614 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 6, 14MM KITCS617 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 6, 17MM KITCS620 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 6, 20MM KITCS625 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, MED. 6, 25MM KITCP110 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 1, 10MM KITCP112 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 1, 12MM KITCP114 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 1, 14MM KITCP117 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 1, 17MM KITCP120 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 1, 20MM KITCP125 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 1, 25MM
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		KITCP210 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 2, 10MM KITCP212 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 2, 12MM KITCP214 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 2, 14MM KITCP217 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 2, 17MM KITCP220 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 2, 20MM KITCP225 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 2, 25MM KITCP310 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 3, 10MM KITCP312 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 3, 12MM KITCP314 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 3, 14MM KITCP317 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 3, 17MM KITCP320 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 3, 20MM KITCP325 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 3, 25MM KITCP410 ADVANCE® INSERTO
--	--	--

f

LV



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 4, 10MM KITCP412 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 4, 12MM KITCP414 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 4, 14MM KITCP417 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 4, 17MM KITCP420 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 4, 20MM KITCP425 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 4, 20MM KITCP510 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 5, 10MM KITCP512 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 5, 12MM KITCP514 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 5, 14MM KITCP517 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 5, 17MM KITCP520 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 5, 20MM KITCP525 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA TRADICIONAL, NUEVA SUPERFICIE, MED. 5, 25MM KPSMT408 ADVANCE® COMP.TIBIAL DE PRUEBA MONO ALL POLY 8MM, MED. 4
--	--	--

1

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		KPSMT508 ADVANCE® COMP.TIBIAL DE PRUEBA MONO ALL POLY 8MM, MED. 5 KPSMT608 ADVANCE® COMP.TIBIAL DE PRUEBA MONO ALL POLY 8MM, MED. 6 K0014301 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN CONDILAR TOTAL ENCAJE CONDILAR, MED. 1 K0014302 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN CONDILAR TOTAL ENCAJE CONDILAR, MED. 2 K0014303 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN CONDILAR TOTAL ENCAJE CONDILAR, MED. 3 K0014304 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN CONDILAR TOTAL ENCAJE CONDILAR, MED. 4 K0014305 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN CONDILAR TOTAL ENCAJE CONDILAR, MED. 5 K0014306 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN CONDILAR TOTAL ENCAJE CONDILAR, MED. 6 KIPT010L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 0, IZQ., 10MM KIPT010R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 0, DERECHO, 10MM KIPT012L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 0, IZQ., 12MM KIPT012R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 0, DERECHO, 12MM KIPT014L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 0, IZQ., 14MM KIPT014R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 0, DERECHO, 14MM KIPT017L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 0, IZQ., 17MM KIPT017R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 0, DERECHO, 17MM KIPT020L ADVANCE® INSERTO
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 0 , IZQ., 20MM KIPT020R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 0 , DERECHO, 20MM KIPT025L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 0 , IZQ., 25MM KIPT025R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 0 , DERECHO, 25MM KIPT110L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , IZQ., 10MM KIPT110R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , DERECHO, 10MM KIPT112L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , IZQ., 12MM KIPT112R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , DERECHO, 12MM KIPT114L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , IZQ., 14MM KIPT114R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , DERECHO, 14MM KIPT117L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , IZQ., 17MM KIPT117R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , DERECHO, 17MM KIPT120L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , IZQ., 20MM KIPT120R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , DERECHO, 20MM KIPT125L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , IZQ., 25MM KIPT125R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , DERECHO, 25MM KIPN110R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , DERECHO, 10MM
--	--	---

1

LV



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		KIPN110L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , IZQ., 10MM KIPN112R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , DERECHO, 12MM KIPN112L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , IZQ., 12MM KIPN114R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , DERECHO, 14MM KIPN114L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , IZQ., 14MM KIPN117R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , DERECHO, 17MM KIPN117L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , IZQ., 17MM KIPN120R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , DERECHO, 20MM KIPN120L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , IZQ., 20MM KIPN125R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , DERECHO, 25MM KIPN125L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1 , IZQ., 25MM KIPT150L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1.5 , IZQ., 10MM KIPT150R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1.5 , DERECHO, 10MM KIPT152L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1.5 , IZQ., 12MM KIPT152R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1.5 , DERECHO, 12MM KIPT154L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1.5 , IZQ., 14MM KIPT154R ADVANCE® INSERTO
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de las Poblaciones Libres"

		DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1.5 , DERECHO, 14MM KIPT157L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1.5 , IZQ., 17MM KIPT157R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1.5 , DERECHO, 17MM KIPT210L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 2 , IZQ., 10MM KIPT210R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 2 , DERECHO, 10MM KIPT212L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 2 , IZQ., 12MM KIPT212R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 2 , DERECHO, 12MM KIPT214L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 2 , IZQ., 14MM KIPT214R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 2 , DERECHO, 14MM KIPT217L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 2 , IZQ., 17MM KIPT217R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 2 , DERECHO, 17MM KIPT220L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 2 , IZQ., 20MM KIPT220R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 2 , DERECHO, 20MM KIPT225L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 2 , IZQ., 25MM KIPT225R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 2 , DERECHO, 25MM KIPT310L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 3 , IZQ., 10MM KIPT310R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 3 , DERECHO, 10MM
--	--	---

LV



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		KIPT312L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 3 , IZQ., 12MM KIPT312R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 3 , DERECHO, 12MM KIPT314L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 3 , IZQ., 14MM KIPT314R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 3 , DERECHO, 14MM KIPT317L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 3 , IZQ., 17MM KIPT317R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 3 , DERECHO, 17MM KIPT320L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 3 , IZQ., 20MM KIPT320R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 3 , DERECHO, 20MM KIPT325L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 3 , IZQ., 25MM KIPT325R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 3 , DERECHO, 25MM KIPT410L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 4 , IZQ., 10MM KIPT410R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 4 , DERECHO, 10MM KIPT412L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 4 , IZQ., 12MM KIPT412R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 4 , DERECHO, 12MM KIPT414L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 4 , IZQ., 14MM KIPT414R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 4 , DERECHO, 14MM KIPT417L ADVANCE® INSERTO
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
A.N.M.A.T.

		DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 4 , IZQ., 17MM KIPT417R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 4 , DERECHO, 17MM KIPT420L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 4 , IZQ., 20MM KIPT420R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 4 , DERECHO, 20MM KIPT425L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 4 , IZQ., 25MM KIPT425R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 4 , DERECHO, 25MM KIPT510L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 5 , IZQ., 10MM KIPT510R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 5 , DERECHO, 10MM KIPT512L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 5 , IZQ., 12MM KIPT512R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 5 , DERECHO, 12MM KIPT514L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 5 , IZQ., 14MM KIPT514R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 5 , DERECHO, 14MM KIPT517L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 5 , IZQ., 17MM KIPT517R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 5 , DERECHO, 17MM KIPT520L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 5 , IZQ., 20MM KIPT520R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 5 , DERECHO, 20MM KIPT525L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 5 , IZQ., 25MM
--	--	--

L
LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.I.

		KIPT525R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 5 , DERECHO, 25MM KIPT610L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 6 , IZQ., 10MM KIPT610R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 6 , DERECHO, 10MM KIPT612L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 6 , IZQ., 12MM KIPT612R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 6 , DERECHO, 12MM KIPT614L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 6 , IZQ., 14MM KIPT614R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 6 , DERECHO, 14MM KIPT617L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 6 , IZQ., 17MM KIPT617R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 6 , DERECHO, 17MM KIPT620L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 6 , IZQ., 20MM KIPT620R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 6 , DERECHO, 20MM KIPT625L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 6 , IZQ., 25MM KIPT625R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 6 , DERECHO, 25MM KPT1520L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1.5 , IZQ., 20MM KPT1520R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA MEDIAL PIVOT, MED. 1.5 , DERECHO, 20MM K0014011 ADVANCE® GUÍA ABIERTA INTERCONDILAR, MED. 1 K0014012 ADVANCE® GUÍA
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

"2015 – Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		ABIERTA INTERCONDILAR, MED. 2 K0014013 ADVANCE® GUÍA ABIERTA INTERCONDILAR, MED. 3 K0014014 ADVANCE® GUÍA ABIERTA INTERCONDILAR, MED. 4 K0014015 ADVANCE® GUÍA ABIERTA INTERCONDILAR, MED. 5 K0014016 ADVANCE® GUÍA ABIERTA INTERCONDILAR, MED. 6 K0014021 NOTCH GUIDE 3 SURFACE SIZE 1/GUÍA RANURADA 3, SUPERFICIE, MED. 1 K0014022 NOTCH GUIDE 3 SURFACE SIZE 1/GUÍA RANURADA 3, SUPERFICIE, MED. 2 K0014023 NOTCH GUIDE 3 SURFACE SIZE 1/GUÍA RANURADA 3, SUPERFICIE, MED. 3 K0014024 NOTCH GUIDE 3 SURFACE SIZE 1/GUÍA RANURADA 3, SUPERFICIE, MED. 4 K0014025 NOTCH GUIDE 3 SURFACE SIZE 1/GUÍA RANURADA 3, SUPERFICIE, MED. 5 K0014026 NOTCH GUIDE 3 SURFACE SIZE 1/GUÍA RANURADA 3, SUPERFICIE, MED. 6 K0014111 ADVANCE® GUÍA ABIERTA CON BISEL, MED. 1 K0014112 ADVANCE® GUÍA ABIERTA CON BISEL, MED. 2 K0014113 ADVANCE® GUÍA ABIERTA CON BISEL, MED. 3 K0014114 ADVANCE® GUÍA ABIERTA CON BISEL, MED. 4 K0014115 ADVANCE® GUÍA ABIERTA CON BISEL, MED. 5 K0014116 ADVANCE® GUÍA ABIERTA CON BISEL, MED. 6
--	--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.*

		K0014121 ADVANCE® GUÍA ABIERTA CON BISEL, MED. 1 K0014122 ADVANCE® GUÍA ABIERTA CON BISEL, MED. 2 K0014123 ADVANCE® GUÍA ABIERTA CON BISEL, MED. 3 K0014124 ADVANCE® GUÍA ABIERTA CON BISEL, MED. 4 K0014125 ADVANCE® GUÍA ABIERTA CON BISEL, MED. 5 K0014126 ADVANCE® GUÍA ABIERTA CON BISEL, MED. 6 KFPSTR10 ADVANCE® COMP. FEMORAL DE PRUEBA POST STAB., MED. 1 KFPSTR20 ADVANCE® COMP. FEMORAL DE PRUEBA POST STAB., MED. 2 KFPSTR30 ADVANCE® COMP. FEMORAL DE PRUEBA POST STAB., MED. 3 KFPSTR40 ADVANCE® COMP. FEMORAL DE PRUEBA POST STAB., MED. 4 KFPSTR50 ADVANCE® COMP. FEMORAL DE PRUEBA POST STAB., MED. 5 KFPSTR60 ADVANCE® COMP. FEMORAL DE PRUEBA POST STAB., MED. 6 KFPSTR1U ADVANCE® COMP. FEMORAL DE PRUEBA POST STAB. UNIVERSAL, MED. 1 KFPSTR2U ADVANCE® COMP. FEMORAL DE PRUEBA POST STAB. UNIVERSAL, MED. 2 KFPSTR3U ADVANCE® COMP. FEMORAL DE PRUEBA POST STAB. UNIVERSAL, MED. 3 KFPSTR4U ADVANCE® COMP. FEMORAL DE PRUEBA POST STAB. UNIVERSAL, MED. 4 KFPSTR5U ADVANCE® COMP. FEMORAL DE PRUEBA POST STAB. UNIVERSAL, MED. 5 KFPSTR6U ADVANCE® COMP. FEMORAL DE PRUEBA POST STAB. UNIVERSAL, MED. 6 KIPST110 ADVANCE® INSERTO
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.F.

		DE PRUEBA POST STAB., MED. 1, 10MM KIPST112 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 1, 12MM KIPST114 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 1, 14MM KIPST117 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 1, 17MM KIPST120 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 1, 20MM KIPST125 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 1, 25MM KIPST210 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 2, 10MM KIPST212 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 2, 12MM KIPST214 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 2, 14MM KIPST217 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 2, 17MM KIPST220 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 2, 20MM KIPST225 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 2, 25MM KIPSS110 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 1, 10MM KIPSS112 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 1, 12MM KIPSS114 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 1, 14MM KIPSS117 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 1, 17MM KIPSS120 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 1, 20MM
--	--	---

1

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		KIPSS125 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 1, 25MM KIPSN110 ADVANCE® NUEVO INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 1, 10MM KIPSN112 ADVANCE® NUEVO INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 1, 12MM KIPSN114 ADVANCE® NUEVO INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 1, 14MM KIPSN117 ADVANCE® NUEVO INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 1, 17MM KIPSN120 ADVANCE® NUEVO INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 1, 20MM KIPSN125 ADVANCE® NUEVO INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 1, 25MM KIPSS210 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 2, 10MM KIPSS212 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 2, 12MM KIPSS214 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 2, 14MM KIPSS217 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 2, 17MM KIPSS220 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 2, 20MM KIPSS225 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 2, 25MM K0040102 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN TIBIAL EM TIBIAL, MORDAZA P/TOBILLO ESTILO ESPIGA
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		K0040104 ADVANCE® CRUCETA P/GUÍA RESECCIÓN TIBIAL, IZQ. K0040105 ADVANCE® CRUCETA P/GUÍA RESECCIÓN TIBIAL, DER. K0040106 ADVANCE® CRUCETA UNIVERSAL P/GUÍA RESECCIÓN TIBIAL K0040107 ADVANCE® STYLUS 2/10MM PARA GUÍA RESECCIÓN TIBIAL K0040109 ADVANCE® REPLACEMENT EM TUNING KNOB/PERILLA REEMPLAZO EM K0040115 ADVANCE® STYLUS 2/10MM PARA GUÍA RESECCIÓN TIBIAL K0041003 ADVANCE® / ADVANTIM® GUÍA RESECCIÓN TIBIAL IM, 3 GRADOS K0041010 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN TIBIAL IM K0041000 ADVANCE® CUERPO P/RESECCIÓN 0 GRADOS K0042001 ADVANCE® GUÍA ALINEACIÓN TIBIAL EXTERNA 2275PN00 CLAVIJAS P/FIJACIÓN BASE TIBIAL K0021002 ADVANCE® CLAVIJA INSERTO TIBIAL DE PRUEBA K0021210 ADVANCE® STYLUS DE PROFUNDIDAD 2MM / 10MM K0016007 ADVANCE® STYLUS P/BLOCK RESECCIÓN FEMORAL KIPSS310 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 3, 10MM KIPSS312 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 3, 12MM KIPSS314 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 3, 14MM KIPSS317 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 3, 17MM KIPSS320 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 3, 20MM KIPSS325 ADVANCE® INSERTO
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

"2015 – Año del Bicentenario del Congreso de las Poblaciones Libres"

		DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 3, 25MM KIPSS410 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 4, 10MM KIPSS412 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 4, 12MM KIPSS414 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 4, 14MM KIPSS417 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 4, 17MM KIPSS420 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 4, 20MM KIPSS425 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 4, 25MM KIPSS510 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 5, 10MM KIPSS512 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 5, 12MM KIPSS514 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 5, 14MM KIPSS517 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 5, 17MM KIPSS520 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 5, 20MM KIPSS525 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 5, 25MM KIPSS610 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 6, 10MM KIPSS612 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 6, 12MM KIPSS614 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 6, 14MM KIPSS617 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		RANURAS, MED. 6, 17MM KIPSS620 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 6, 20MM KIPSS625 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB. CON RANURAS, MED. 6, 25MM KS000021 ADVANCE® BANDEJA CON CUBIERTA ESTÉRIL P/INSERTO KS000030 ADVANCE® BANDEJA CON CUBIERTA ESTÉRIL P/FEM. KS000032 ADVANCE® BANDEJA CON CUBIERTA P/CORTE BASTO ANTERIOR KS000034 ADVANCE® BANDEJA CON CUBIERTA ESTÉRIL P/BLOQUE ESPACIADOR KS000035 ADVANCE® BANDEJA CON CUBIERTA P/GUÍA RESECCIÓN FEM. 1/2 KS000050 ADVANCE® CUBIERTA GENÉRICA KS000051 MEDIA CUBIERTA GENÉRICA - CON SEGURO NELSON PARA BANDEJA KS000000 ADVANCE® BANDEJA CON CUBIERTA ESTÉRIL MP PRIMARIA/MP KIPS110T ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POSTERIOR ESTABILIZADO, MED. 1, 10MM KIPS112T ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POSTERIOR ESTABILIZADO, MED. 1, 12MM KIPS114T ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POSTERIOR ESTABILIZADO, MED. 1, 14MM KIPS117T ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POSTERIOR ESTABILIZADO, MED. 1, 17MM KIPS120T ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POSTERIOR ESTABILIZADO, MED. 1, 20MM KIPS125T ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POSTERIOR ESTABILIZADO, MED. 1, 25MM KIPS210T ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POSTERIOR ESTABILIZADO, MED. 2, 10MM
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		KIPS212T ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POSTERIOR ESTABILIZADO, MED. 2, 12MM KIPS214T ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POSTERIOR ESTABILIZADO, MED. 2, 14MM KIPS217T ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POSTERIOR ESTABILIZADO, MED. 2, 17MM KIPS220T ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POSTERIOR ESTABILIZADO, MED. 2, 20MM KIPS225T ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POSTERIOR ESTABILIZADO, MED. 2, 25MM KIPST310 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 3, 10MM KIPST312 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 3, 12MM KIPST314 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 3, 14MM KIPST317 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 3, 17MM KIPST320 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 3, 20MM KIPST325 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 3, 25MM KIPST410 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 4, 10MM KIPST412 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 4, 12MM KIPST414 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 4, 14MM KIPST417 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 4, 17MM KIPST420 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 4, 20MM KIPST425 ADVANCE® INSERTO
--	--	---

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		DE PRUEBA POST STAB., MED. 4, 25MM KIPST510 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 5, 10MM KIPST512 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 5, 12MM KIPST514 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 5, 14MM KIPST517 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 5, 17MM KIPST520 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 5, 20MM KIPST525 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 5, 25MM KIPST610 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 6, 10MM KIPST612 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 6, 12MM KIPST614 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 6, 14MM KIPST617 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 6, 17MM KIPST620 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 6, 20MM KIPST625 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA POST STAB., MED. 6, 25MM KS001019 ENSAMBLE GUÍA ESCARIADOR PATELAR K0014400 ESCARIADOR PATELAR ALL-POLY, 25MM K0014410 ESCARIADOR PATELAR ALL-POLY, 28MM K0014401 ADVANCE® GUÍA DE RESECCIÓN PARA SULCUS CON PIÉ POSTERIOR, MEDIDA 1 K0014402 ADVANCE® GUÍA DE RESECCIÓN PARA SULCUS CON PIÉ POSTERIOR, MEDIDA 2
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de las Poblaciones Libres"

		K0014403 ADVANCE® GUÍA DE RESECCIÓN PARA SULCUS CON PIÉ POSTERIOR, MEDIDA 3 K0014404 ADVANCE® GUÍA DE RESECCIÓN PARA SULCUS CON PIÉ POSTERIOR, MEDIDA 4 K0014405 ADVANCE® GUÍA DE RESECCIÓN PARA SULCUS CON PIÉ POSTERIOR, MEDIDA 5 K0014406 ADVANCE® GUÍA DE RESECCIÓN PARA SULCUS CON PIÉ POSTERIOR, MEDIDA 6 K0014407 ADVANCE® DUAL REFERENCE GAUGE FOR POWER BURR GUIDE K0017001 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL DUAL FULCRUM, MED. 1 K0017002 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL DUAL FULCRUM, MED. 2 K0017003 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL DUAL FULCRUM, MED. 3 K0017004 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL DUAL FULCRUM, MED. 4 K0017005 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL DUAL FULCRUM, MED. 5 K0017006 ADVANCE® BLOQUE P/RESECCIÓN FEMORAL DUAL FULCRUM, MED. 6 K0017300 ADVANCE® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL DUAL FULCRUM -.035BLDE, MED. 0 K0056006 BLOQUE FEMORAL DE REV. AP, 6 SMF00164 ADVANCE® BLOQUE DUAL FULCRUM, MED. #1 SMF00165 ADVANCE® BLOQUE DUAL FULCRUM, MED. #2 SMF00166 ADVANCE® BLOQUE DUAL FULCRUM, MED. #3 SMF00167 ADVANCE® BLOQUE DUAL FULCRUM, MED. #4 SMF00168 ADVANCE® BLOQUE DUAL FULCRUM, MED. #5 SMF00169 ADVANCE® BLOQUE
--	--	--

✓

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.I.T.

		DUAL FULCRUM, MED. #6 K0041001 ADVANCE® GUÍA ALINEACIÓN TIBIAL INTERNA K0040040 CRUCETA P/RESECCIÓN TIBIAL VARUS/VALGUS (CROSSHEAD) K0020210 ADVANCE® STYLUS DE PROFUNDIDAD, 2MM / 10MM K0020211 ADVANCE® STYLUS DE PROFUNDIDAD, 2MM / 10MM KS000023 ADVANCE® BANDEJA ESTÉRIL TIBIAL CON CUBIERTA KTIBSP10 ADVANCE® BASE TIBIAL PUNTIAGUDA/CON ESPIGA DE PRUEBA, MED. 1 KTIBSP20 ADVANCE® BASE TIBIAL PUNTIAGUDA/CON ESPIGA DE PRUEBA, MED. 2 KTIBSP30 ADVANCE® BASE TIBIAL PUNTIAGUDA/CON ESPIGA DE PRUEBA, MED. 3 KTIBSP40 ADVANCE® BASE TIBIAL PUNTIAGUDA/CON ESPIGA DE PRUEBA, MED. 4 KTIBSP50 ADVANCE® BASE TIBIAL PUNTIAGUDA/CON ESPIGA DE PRUEBA, MED. 5 KTIBSP60 ADVANCE® BASE TIBIAL PUNTIAGUDA/CON ESPIGA DE PRUEBA, MED. 6 KTIBSP11 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, SIN PUNTA, MED. 1 KTIBSP21 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, SIN PUNTA, MED. 1+ / 2 KTIBSP31 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, SIN PUNTA, MED. 2+ / 3 KTIBSP41 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, SIN PUNTA, MED. 3+ / 4 KTIBSP51 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, SIN PUNTA, MED. 4+ / 5 KTIBSP61 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA, SIN PUNTA, MED. 5+ / 6 KPTR28LO ADVANCE® PATELLA DE PRUEBA, CLAVIJA ÚNICA,
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		28MM, DOMO BAJO 19910235 ENSAMBLE GUÍA ESCARIADOR PATELAR 19910220 ESCARIADOR PATELAR ALL POLY, 25MM 19910222 ESCARIADOR PATELAR ALL POLY, 28MM K0056007 ADVANCE® CRUCETA AUMENTO FEMORAL DISTAL (CROSSHEAD) K0056008 ADVANCE® ESPACIADOR DE REVISIÓN, 6MM PARA RESECCIÓN DISTAL 3MM K0056009 ADVANCE® ESPACIADOR DE REVISIÓN, 7MM PARA RESECCIÓN DISTAL 2MM K0056001 ADVANCE® BLOQUE P/REVISIÓN FEMORAL A/P, MED. 1 K0056002 ADVANCE® BLOQUE P/REVISIÓN FEMORAL A/P, MED. 2 K0056003 ADVANCE® BLOQUE P/REVISIÓN FEMORAL A/P, MED. 3 K0056004 ADVANCE® BLOQUE P/REVISIÓN FEMORAL A/P, MED. 4 K0056005 ADVANCE® BLOQUE P/REVISIÓN FEMORAL A/P, MED. 5 K0056010 ADVANCE® REVISION ANGLE LOCATOR FOR A/P BLOCKS K0014131 ADVANCE® GUÍA DE CORTE RANURADA DE REVISIÓN POST STAB, MOD. 1 K0014132 ADVANCE® GUÍA DE CORTE RANURADA DE REVISIÓN POST STAB, MOD. 2 K0014133 ADVANCE® GUÍA DE CORTE RANURADA DE REVISIÓN POST STAB, MOD. 3 K0014134 ADVANCE® GUÍA DE CORTE RANURADA DE REVISIÓN POST STAB, MOD. 4 K0014135 ADVANCE® GUÍA DE
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		CORTE RANURADA DE REVISIÓN POST STAB, MOD. 5 K0056011 ADVANCE® LOCALIZADOR DE ÁNGULO DE REVISIÓN PARA GUÍA RANURADA K0056012 ADVANCE® LOCALIZADOR DE ÁNGULO DE REVISIÓN PARA GUÍA RANURADA K0053301 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 1 , IZQUIERDO K0053302 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 , IZQUIERDO K0053303 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 , IZQUIERDO K0053304 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 , IZQUIERDO K0053305 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 , IZQUIERDO K0053306 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 , IZQUIERDO K0053307 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 1 , DERECHO K0053308 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 , DERECHO K0053309 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 , DERECHO K0053310 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 , DERECHO K0053311 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 , DERECHO K0053312 ADVANCE® INSERTO
--	--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.*

		FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 , DERECHO K0053313 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 1 , IZQUIERDO K0053314 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 , IZQUIERDO K0053315 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 , IZQUIERDO K0053316 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 , IZQUIERDO K0053317 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 , IZQUIERDO K0053318 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 , IZQUIERDO K0053319 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 1 , DERECHO K0053320 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 , DERECHO K0053321 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 , DERECHO K0053322 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 , DERECHO K0053323 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 , DERECHO K0053324 ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 , DERECHO K0055001 ADVANCE® PROBADOR FEMORAL P/REVISIÓN, MED. 1 K0055002 ADVANCE® PROBADOR FEMORAL
--	--	---

4

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.I.T.

		P/REVISIÓN, MED. 2 K0055003 ADVANCE® PROBADOR FEMORAL P/REVISIÓN, MED. 3 K0055004 ADVANCE® PROBADOR FEMORAL P/REVISIÓN, MED. 4 K0055005 ADVANCE® PROBADOR FEMORAL P/REVISIÓN, MED. 5 K0055006 ADVANCE® PROBADOR FEMORAL P/REVISIÓN, MED. 6 KFCTR15L ADVANCE® PRIMARY FEMORAL TRIAL SIZE 1.5 LEFT KFCTR15R ADVANCE® PRIMARY FEMORAL TRIAL SIZE 1.5 RIGHT K0054401 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED.1 STANDARD, 10MM K0054402 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED.1 STANDARD, 12MM K0054403 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED.1 STANDARD, 14MM K0054404 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED.1 STANDARD, 17MM K0054405 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED.1 STANDARD, 20MM K0054406 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED.1 STANDARD, 25MM K0054407 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED.1 STANDARD, 30MM K0054501 ADVANCE® NUEVO INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 1 STANDARD, 10MM K0054502 ADVANCE® NUEVO INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 1 STANDARD, 12MM K0054503 ADVANCE® NUEVO INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 1 STANDARD, 14MM
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		K0054504 ADVANCE® NUEVO INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 1 STANDARD, 17MM K0054505 ADVANCE® NUEVO INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 1 STANDARD, 20MM K0054506 ADVANCE® NUEVO INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 1 STANDARD, 25MM K0054507 ADVANCE® NUEVO INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 1 STANDARD, 30MM K0054508 ADVANCE® NUEVO INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 1 STANDARD, 35MM K0054409 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 STANDARD, 10MM K0054411 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 STANDARD, 12MM K0054413 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 STANDARD, 14MM K0054415 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 STANDARD, 17MM K0054417 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 STANDARD, 20MM K0054419 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 STANDARD, 25MM K0054421 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 STANDARD, 30MM K0054425 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 STANDARD, 10MM K0054427 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 STANDARD, 12MM K0054429 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

		STANDARD, 14MM K0054431 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 STANDARD, 17MM K0054433 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 STANDARD, 20MM K0054435 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 STANDARD, 25MM K0054437 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 STANDARD, 30MM K0054441 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 STANDARD, 10MM K0054443 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 STANDARD, 12MM K0054445 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 STANDARD, 14MM K0054447 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 STANDARD, 17MM K0054449 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 STANDARD, 20MM K0054451 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 STANDARD, 25MM K0054453 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 STANDARD, 30MM K0054457 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 STANDARD, 10MM K0054459 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 STANDARD, 12MM K0054461 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 STANDARD, 14MM K0054463 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 STANDARD, 17MM K0054465 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 STANDARD, 20MM K0054467 ADVANCE® INSERTO
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

		DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 STANDARD, 25MM K0054469 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 STANDARD, 30MM K0054471 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 STANDARD, 35MM K0054410 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 MINUS 10MM K0054412 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 MINUS 12MM K0054414 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 MINUS 14MM K0054416 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 MINUS 17MM K0054418 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 MINUS 20MM K0054420 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 MINUS 25MM K0054422 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 MINUS 30MM K0054423 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 STANDARD, 35MM K0054424 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 2 MINUS 35MM K0054426 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 MINUS 10MM K0054428 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 MINUS 12MM K0054430 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 MINUS 14MM K0054432 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 MINUS 17MM K0054434 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. S. I.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		MINUS 20MM K0054436 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 MINUS 25MM K0054438 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 MINUS 30MM K0054439 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 STANDARD, 35MM K0054440 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 3 MINUS 35MM K0054442 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 MINUS 10MM K0054444 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 MINUS 12MM K0054446 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 MINUS 14MM K0054448 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 MINUS 17MM K0054450 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 MINUS 20MM K0054452 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 MINUS 25MM K0054454 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 MINUS 30MM K0054455 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 STANDARD, 35MM K0054456 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 4 MINUS 35MM K0054458 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 MINUS 10MM K0054460 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 MINUS 12MM K0054462 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 MINUS 14MM K0054464 ADVANCE® INSERTO
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 MINUS 17MM K0054466 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 MINUS 20MM K0054468 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 MINUS 25MM K0054470 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 MINUS 30MM K0054472 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 5 MINUS 35MM K0054473 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 STANDARD, 10MM K0054474 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 MINUS 10MM K0054475 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 STANDARD, 12MM K0054476 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 MINUS 12MM K0054477 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 STANDARD, 14MM K0054478 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 MINUS 14MM K0054479 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 STANDARD, 17MM K0054480 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 MINUS 17MM K0054481 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 STANDARD, 20MM K0054482 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 MINUS 20MM K0054483 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 STANDARD, 25MM K0054484 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6
--	--	--

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

		MINUS 25MM K0054485 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 STANDARD, 30MM K0054486 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 MINUS 30MM K0054487 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 STANDARD, 35MM K0054488 ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA P/REVISIÓN, MED. 6 MINUS 35MM K0054003 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL POSTERIOR DE PRUEBA, MED. 2 X 5MM K0054004 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL POSTERIOR DE PRUEBA, MED. 2 X 10MM K0054007 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL POSTERIOR DE PRUEBA, MED. 4 X 5MM K0054008 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL POSTERIOR DE PRUEBA, MED. 4 X 10MM K0054011 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL POSTERIOR DE PRUEBA, MED. 6 X 5MM K0054012 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL POSTERIOR DE PRUEBA, MED. 6 X 10MM K0054015 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL DISTAL DE PRUEBA, MED. 2 X 5MM K0054016 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL DISTAL DE PRUEBA, MED. 2 X 10MM K0054019 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL DISTAL DE PRUEBA, MED. 4 X 5MM K0054020 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL DISTAL DE PRUEBA, MED. 4 X 10MM K0054023 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL DISTAL DE PRUEBA, MED. 6 X 5MM K0054024 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL DISTAL DE PRUEBA, MED. 6 X 10MM KS000093 ADVANCE® BANDEJA
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

		CON CUBIERTA ESTÉRIL COMPLETA P/REV. FEM. KS000094 ADVANCE® MEDIA BANDEJA CON CUBIERTA ESTÉRIL COMPLETA P/REV. FEM. KS000095 ADVANCE® BANDEJA Y CUBIERTA P/INSTRUMENTAL DE REV. FEM. KS000096 ADVANCE® BANDEJA Y CUBIERTA ESTÉRIL DE REVISIÓN P/INSERTO DE PRUEBA K0027301 ADVANCE® MANDRIL EN QUILLA PRESS-FIT, MED. 1 - 2 K0027302 ADVANCE® MANDRIL EN QUILLA PRESS-FIT, MED. 3 - 4 K0027303 ADVANCE® MANDRIL EN QUILLA PRESS-FIT, MED. 5 - 6 K0027304 ADVANCE® MANDRIL EN QUILLA OVERSIZE, MED. 1 - 2 K0027305 ADVANCE® MANDRIL EN QUILLA OVERSIZE, MED. 3 - 4 K0027306 ADVANCE® MANDRIL EN QUILLA OVERSIZE, MED. 5 - 6 K0051116 ADVANCE® CUELLO/COLLARETA ESTABILIZADORA, 16MM K0051118 ADVANCE® CUELLO/COLLARETA ESTABILIZADORA, 18MM K0051120 ADVANCE® CUELLO/COLLARETA ESTABILIZADORA, 20MM K0051122 ADVANCE® CUELLO/COLLARETA ESTABILIZADORA, 22MM K0051124 ADVANCE® CUELLO/COLLARETA ESTABILIZADORA, 24MM K0050033 ADVANCE® VARILLA TIBIAL DE REVISIÓN EXTERNA, 3 GRADOS K0051001 ADVANCE® GUÍA DE
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		ALINEACIÓN INTRAMEDULAR K0052002 ADVANCE® CRUCETA AUMENTO BLOQUE DE REVISIÓN, DERECHO (CROSSHEAD) K0052003 ADVANCE® CRUCETA AUMENTO BLOQUE DE REVISIÓN, IZQUIERDO (CROSSHEAD) K0052004 ADVANCE® CRUCETA AUMENTO EN CUÑA P7REVISIÓN - DERECHA (ROSSHEAD) K0052005 ADVANCE® CRUCETA AUMENTO EN CUÑA P7REVISIÓN - IZQUIERDA (ROSSHEAD) K0050001 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA PRESS FIT, MED. 1, 1+, & 2 K0050002 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA OVERSIZE, MED. 1, 1+, & 2 K0050003 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA PRESS FIT, MED. 2+, 3, 3+, & 4 K0050004 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA OVERSIZE, MED. 2+, 3, 3+, & 4 K0050005 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA PRESS FIT, MED. 4+, 5, 5+, & 6 K0050006 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA OVERSIZE, MED. 4+, 5, 5+, & 6 K0051416 ADVANCE® TALLO DE PRUEBA EXTENSIÓN/EXTENSIÓN P/TALLO DE PRUEBA, 16 X 140MM K0051418 ADVANCE® TALLO DE PRUEBA EXTENSIÓN/EXTENSIÓN P/TALLO DE PRUEBA, 18 X 140MM K0051419 ADVANCE® TALLO DE PRUEBA EXTENSIÓN/EXTENSIÓN P/TALLO DE PRUEBA, 19 X 140MM K0051420 ADVANCE® TALLO DE PRUEBA EXTENSIÓN/EXTENSIÓN P/TALLO DE PRUEBA, 20 X 140MM K0051421 ADVANCE® TALLO DE
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		PRUEBA EXTENSIÓN/EXTENSIÓN P/TALLO DE PRUEBA, 21 X 140MM K0051422 ADVANCE® TALLO DE PRUEBA EXTENSIÓN/EXTENSIÓN P/TALLO DE PRUEBA, 22 X 140MM K0051417 ADVANCE® TALLO DE PRUEBA EXTENSIÓN/EXTENSIÓN P/TALLO DE PRUEBA, 17 X 140MM K0027212 ADVANCE® PISTOLA P/INTRODUCCIÓN DE INSERTO K0051005 ADVANCE® EXTRACTOR-ADAPTADOR IMPLANE DE TALLO KS000090 ADVANCE® REV TIBIAL INSRT/TRIAL STERILE TRAY W/ LID/BANDEJA CON CUBIERTA ESTÉRIL P/INSERTO TIBIAL DE REVISIÓN KS000091 ADVANCE® BANDEJA CON CUBIERTA P/INSTRUMENTAL ESCARIADOR DE REVISIÓN KS000092 ADVANCE® REV STEM TRIAL STERIL TRAY W/ LID/BANDEJA CON CUBIERTA ESTÉRIL P/TALLO DE PRUEBA DE REVISIÓN 18080288 DESTORNILLADOR FLEXIBLE K0027211 ADVANCE® IMPACTOR P/INSERTO, ANGULADO 45° K0001011 QUICK DISCONNECT ROSCADO K0001113 ADVANCE® ADAPTADOR ASA PUNZÓN TIBIAL, MED. 0 K0050026 ADVANCE® ADAPTADOR P/ENSAMBLE TALLO, 30MM K0050027 ADVANCE® ADAPTADOR P/ENSAMBLE TALLO, 65MM K0050028 ADVANCE® ADAPTADOR P/ENSAMBLE TALLO, 100-140MM
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		K0040114 ADVANCE® REPLACEMENT EM BODY COMPONENT K0041004 ADVANCE® CUERPO P/GUÍA RESECCIÓN TIBIAL IM, 3 GRADOS K0040113 ADVANCE® COMPONENTE DE REEMPLAZO CON GRAPA TOBILLO EM K0040010 CRUCETA UNIVERSAL EXTERNA P/RESECCIÓN TIBIAL (CROSSHEAD) K0040020 CRUCETA RESECCIÓN TIBIAL, DERECHO K0040030 CRUCETA RESECCIÓN TIBIAL, IZQUIERDO K0041020 ADVANCE® CRUCETA RESECCIÓN TIBIAL IM, DERECHO K0041030 ADVANCE® CRUCETA RESECCIÓN TIBIAL IM, IZQUIERDO K0027000 ADVANCE® GUÍA PRESS FIT P/PUNZÓN EN QUILLA K0027100 ADVANCE® GUÍA OVERSIZE P/PUNZÓN EN QUILLA K0027221 ADVANCE® GUÍA ALINEACIÓN P/EXTRACTOR BASE TIBIAL K0040100 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN TIBIAL EM, RESORTE TOBILLO, ESTILO SPIKE K0040101 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN TIBIAL EM, RESORTE TOBILLO, ESTILO STD K0040103 ADVANCE® GUÍA RESECCIÓN TIBIAL EM, PINZA TOBILLO, ESTILO STD K0026110 ADVANCE® CABEZA DE REEMPLAZO P/IMPACTOR TIBIAL ALL POLY K0027215 ADVANCE® CABEZA DE REEMPLAZO P/IMPACTOR INSERTO K0027226 ADVANCE® CABEZA DE REEMPLAZO P/IMPACTOR BASE TIBIAL K0026001 ADVANCE® IMPACTOR ALL POLY
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.N.M.H.T.

		K0027201 POSICIONADOR ROSCADO P/IMPACTOR IM K0027213 ADVANCE® PUNTA MODIFICADA P/PISTOLA INTRODUCTORA K0040108 ADVANCE® PERILLA REEMPLAZO P/GRAPA TOBILLO EM K0027223 ADVANCE® PAD DE TEFLON P/REEMPLAZO IMPACTOR TIBIAL II K0002000 ADVANCE® CLAVIJA FIJACIÓN LONGITUD REDUCIDA P/BASE TIBIAL DE PRUEBA K0002005 ADVANCE® CLAVIJA FIJACIÓN P/BASE TIBIAL DE PRUEBA K0050025 ADVANCE® PLATAFORMA ENSAMBLE VÁSTAGO K0021013 ADVANCE® VARILLA IM INCLINADA POSTERIOR, 3 GRADOS K0040110 ADVANCE® COMPONENTE DE REEMPLAZO EM ESPIGADO K0040112 ADVANCE® COMPONENTE DE REEMPLAZO EM RESORTE TOBILLO K0040111 ADVANCE® COMPONENTE EM STANDARD DE REEMPLAZO K0026201 ADVANCE® ASA TIBIAL ALL POLY/TEMPLATE DE MEDICIÓN, MED. 1 K0026202 ADVANCE® ASA TIBIAL ALL POLY/TEMPLATE DE MEDICIÓN, MED. 2 K0026203 ADVANCE® ASA TIBIAL ALL POLY/TEMPLATE DE MEDICIÓN, MED. 3 K0026204 ADVANCE® ASA TIBIAL ALL POLY/TEMPLATE DE MEDICIÓN, MED. 4 K0026205 ADVANCE® ASA TIBIAL ALL POLY/TEMPLATE DE MEDICIÓN, MED. 5 K0026206 ADVANCE® ASA TIBIAL ALL POLY/TEMPLATE DE
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		MEDICIÓN, MED. 6 K0027227 ADVANCE® II TIB BASE EXT/IMP NEW - REPLACING K0027224/EXTENSIÓN BASE TIBIAL II, EN REEMPLAZO DE K0027224 K0027228 ADVANCE® TIB BASE EXT/IMP RPLS TEFLON PAD NEW - REPL K0027223/EXTENSIÓN BASE TIBIAL TEFLON, EN REEMPLAZO DE K0027223 K0061001 UNI VARILLA VALGUS IM, 3 GRADOS K0061002 UNI VARILLA VALGUS IM, 5 GRADOS K0061003 UNI VARILLA VALGUS IM, 7 GRADOS K0060004 UNI COMPONENTE DE UNIÓN IM, MED. 1/2 K0060005 UNI COMPONENTE DE UNIÓN IM, MED. 3/4 K0061082 UNI TAPA P/VARILLA IM K0061006 UNI BLOQUE RESECCIÓN POSTERIOR P/GUÍA ESCOFINA 1/2 K0061007 UNI BLOQUE RESECCIÓN POSTERIOR P/GUÍA ESCOFINA 3/4 K0061008 UNI GUÍA PARA ESCOFINA FEMORAL, MED. 1 , IZQUIERDO K0061009 UNI GUÍA PARA ESCOFINA FEMORAL, MED. 1 , DERECHO K0061010 UNI GUÍA PARA ESCOFINA FEMORAL, MED. 2 , IZQUIERDO K0061011 UNI GUÍA PARA ESCOFINA FEMORAL, MED. 2 , DERECHO K0061012 UNI GUÍA PARA ESCOFINA FEMORAL, MED. 3 , IZQUIERDO K0061013 UNI GUÍA PARA ESCOFINA FEMORAL, MED. 3 , DERECHO K0061014 UNI GUÍA PARA ESCOFINA FEMORAL, MED. 4 ,
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		IZQUIERDO K0061015 UNI GUÍA PARA ESCOFINA FEMORAL, MED. 4 , DERECHO K0062006 ADVANCE® UNI BLOQUE RESECCIÓN POST. PARA GUÍA ESCOFINA, 1&2 K0062007 ADVANCE® UNI BLOQUE RESECCIÓN POST. PARA GUÍA ESCOFINA, 3&4 K0063006 ADVANCE® LC UNI BLOQUE RESECCIÓN POST. PARA GUÍA ESCOFINA, 1 & 2 K0063007 ADVANCE® LC UNI BLOQUE RESECCIÓN POST. PARA GUÍA ESCOFINA, 3 & 4 K0063008 UNI GUÍA P/ESCOFINA FEMORAL, MED. 1 , IZQUIERDO K0063009 UNI GUÍA P/ESCOFINA FEMORAL, MED. 1 , DERECHO K0063010 UNI GUÍA P/ESCOFINA FEMORAL, MED. 2 , IZQUIERDO K0063011 UNI GUÍA P/ESCOFINA FEMORAL, MED. 2 , DERECHO K0063012 UNI GUÍA P/ESCOFINA FEMORAL, MED. 3 , IZQUIERDO K0063013 UNI GUÍA P/ESCOFINA FEMORAL, MED. 3 , DERECHO K0063014 UNI GUÍA P/ESCOFINA FEMORAL, MED. 4 , IZQUIERDO K0063015 UNI GUÍA P/ESCOFINA FEMORAL, MED. 4 , DERECHO K0061040 UNI COMP. FEMORAL DE PRUEBA P/PREPARACIÓN Aleta CLAVIJA, MED. 1 ; IZQUIERDO K0061041 UNI COMP. FEMORAL DE PRUEBA P/PREPARACIÓN Aleta CLAVIJA, MED. 1 ; DERECHO K0061042 UNI COMP. FEMORAL
--	--	---

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

		DE PRUEBA P/PREPARACIÓN ALETA CLAVIJA, MED. 2 , IZQUIERDO K0061043 UNI COMP. FEMORAL DE PRUEBA P/PREPARACIÓN ALETA CLAVIJA, MED. 2 , DERECHO K0061044 UNI COMP. FEMORAL DE PRUEBA P/PREPARACIÓN ALETA CLAVIJA, MED. 3 , IZQUIERDO K0061045 UNI COMP. FEMORAL DE PRUEBA P/PREPARACIÓN ALETA CLAVIJA, MED. 3 , DERECHO K0061046 UNI COMP. FEMORAL DE PRUEBA P/PREPARACIÓN ALETA CLAVIJA, MED. 4 , IZQUIERDO K0061047 UNI COMP. FEMORAL DE PRUEBA P/PREPARACIÓN ALETA CLAVIJA, MED. 4 , DERECHO K0061048 UNI ASA FEMORAL DE PRUEBA K0060049 UNI PUNZÓN FIN FEMORAL, MED. 1 K0060050 UNI PUNZÓN FIN FEMORAL, MED. 2 K0060051 UNI PUNZÓN FIN FEMORAL, MED. 3 K0060052 UNI PUNZÓN FIN FEMORAL, MED. 4 K0001007 ADVANCE® ASA IMPULSOR QUICK DISCONNECT KFTRUN1L ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA UNICOMPARTIMENTAL, MED. 1 , IZQUIERDO KFTRUN1R ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA UNICOMPARTIMENTAL, MED. 1 , DERECHO KFTRUN2L ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA UNICOMPARTIMENTAL, MED. 2 , IZQUIERDO KFTRUN2R ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA UNICOMPARTIMENTAL, MED. 2 ,
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.N.A.T.

		DERECHO KFTRUN3L ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA UNICOMPARTIMENTAL, MED. 3 , IZQUIERDO KFTRUN3R ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA UNICOMPARTIMENTAL, MED. 3 , DERECHO KFTRUN4L ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA UNICOMPARTIMENTAL, MED. 4 , IZQUIERDO KFTRUN4R ADVANCE® INSERTO FEMORAL DE PRUEBA UNICOMPARTIMENTAL, MED. 4 , DERECHO K0060058 UNI IMPULSOR IMPLANTE FEM. K0061059 UNI GUÍA ALINEACIÓN FEM. 61370000 ESCOFINA ÓSEA K0060063 UNI TEMPLATE FEMORAL, MED. 3/4 K0063020 ADVANCE® UNI PROBADOR DE FEMORAL, MED. 1 & 2 K0063021 ADVANCE® UNI PROBADOR DE FEMORAL, MED. 3 & 4 K0063220 ADVANCE® LC UNI PROBADOR FEMORAL LATERAL, MED. 1 & 2 K0063221 ADVANCE® LC UNI PROBADOR FEMORAL LATERAL, MED. 3 & 4 K0063001 UNI GUÍA ALINEACIÓN TIBIAL EM. K0061070 UNI XHEAD TIBIAL 3 GRADOS, IZQUIERDO K0061071 UNI XHEAD TIBIAL 3 GRADOS, DERECHO K0061072 UNI XHEAD TIBIAL 5 GRADOS, IZQUIERDO K0062072 UNI XHEAD TIBIAL 5 GRADOS, IZQUIERDO K0061073 UNI XHEAD TIBIAL 5 GRADOS, DERECHO K0062073 UNI XHEAD TIBIAL 5
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.F.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		GRADOS, DERECHO K0061074 UNI XHEAD TIBIAL 7 GRADOS, IZQUIERDO K0061075 UNI XHEAD TIBIAL 7 GRADOS, DERECHO K0061076 ADVANCE® STYLUS UNICOMPARTMENTAL EM, 4/6MM KTTLUNIL BASE TIBIAL DE PRUEBA, MED. 1, IZQUIERDO KTTLUNIR BASE TIBIAL DE PRUEBA, MED. 1, DERECHO KITLU107 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 1 X 7MM KITLU108 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 1 X 8MM KITLU109 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 1 X 9MM KITLU110 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 1 X 10MM KITLU111 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 1 X 11MM KITLU112 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 1 X 12MM KITLL107 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 1X7MM KITLL108 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 1X8MM KITLL109 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 1X9MM KITLL110 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 1X10MM KITLL111 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 1X11MM KITLL112 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 1X12MM KTTLUN2L UNI BASE TIBIAL DE PRUEBA, MED. 2 LEFT/MEDIAL KTTLUN2R UNI BASE TIBIAL DE PRUEBA, MED. 2 RIGHT/MEDIAL KITLU207 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 2 X 7MM KITLU208 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 2 X 8MM
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		KITLU209 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 2 X 9MM KITLU210 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 2 X 10MM KITLU211 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 2 X 11MM KITLU212 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 2 X 12MM KITLL207 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 2X7MM KITLL208 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 2X8MM KITLL209 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 2X9MM KITLL210 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 2X10MM KITLL211 ADVANCE® UC UNI INSERTO DE PRUEBA, MED. 2X11MM KITLL212 ADVANCE® UC UNI INSERTO DE PRUEBA, MED. 2X12MM KTTLUN3L UNI BASE TIBIAL DE PRUEBA, MED. 3 IZQUIERDO/MEDIAL KTTLUN3R UNI BASE TIBIAL DE PRUEBA, MED. 3 DERECHO/MEDIAL KITLU307 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 3 X 7MM KITLU308 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 3 X 8MM KITLU309 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 3 X 9MM KITLU310 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 3 X 10MM KITLU311 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 3 X 11MM KITLU312 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 3 X 12MM KITLL307 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 3X7MM KITLL308 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA,
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

		MED. 3X8MM KITLL309 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 3X9MM KITLL310 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 3X10MM KITLL311 ADVANCE® UC UNI INSERTO DE PRUEBA, MED. 3X11MM KITLL312 ADVANCE® UC UNI INSERTO DE PRUEBA, MED. 3X12MM KTTLUN4L UNI BASE TIBIAL DE PRUEBA, MED. 4 IZQUIERDO/MEDIAL KTTLUN4R UNI BASE TIBIAL DE PRUEBA, MED. 4 DERECHO/MEDIAL KITLU407 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 4 X 7MM KITLU408 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 4 X 8MM KITLU409 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 4 X 9MM KITLU410 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 4 X 10MM KITLU411 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 4 X 11MM KITLU412 UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 4 X 12MM KITLL407 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 4X7MM KITLL408 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 4X8MM KITLL409 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 4X9MM KITLL410 ADVANCE® UC UNI INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, MED. 4X10MM KITLL411 ADVANCE® UC UNI INSERTO DE PRUEBA, MED. 4X11MM KITLL412 ADVANCE® UC UNI INSERTO DE PRUEBA, MED. 4X12MM K0061081 ADVANCE® GUÍA
--	--	---

f LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		BROCA TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL KITLUNI1 ADVANCE® INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, UNICOMPARTIMENTAL, CON CLAVIJAS, MED. 1 KITLUNI2 ADVANCE® INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, UNICOMPARTIMENTAL, CON CLAVIJAS, MED. 2 KITLUNI3 ADVANCE® INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, UNICOMPARTIMENTAL, CON CLAVIJAS, MED. 3 KITLUNI4 ADVANCE® INSERTO TIBIAL DE PRUEBA, UNICOMPARTIMENTAL, CON CLAVIJAS, MED. 4 K0002001 CLAVIJA FIJACIÓN, SIN CABEZA, 80MM K0002002 CLAVIJA FIJACIÓN, CON CABEZA, 45MM K0062011 ADVANCE® CLAVIJA FIJACIÓN SIN CABEZA, 50MM K0060096 UNI HERRAMIENTA P/REMOCIÓN CEMENTO K0001001 ADVANCE® VARILLA ESCARIADOR 13" CON QUICK DISCONNECT K015XRUN ADVANCE® UNICOMPARTIMENTAL X-RAY TEMPLATES 15% MAG/TEMPLATES KS006001 ADVANCE® UNI BANDEJA INSTRUMENTAL #1 KS006002 ADVANCE® UNI BANDEJA INSTRUMENTAL #2 KS006004 ADVANCE® UNI BANDEJA Y CUBIERTA P/INSTRUMENTAL LESS CONFORMITY (SIC) K0061035 ADVANCE® UNI RETRACTOR IZQUIERDO K0061036 ADVANCE® UNI RETRACTOR DERECHO KS006003 ADVANCE® UNI BANDEJA P/INSTRUMENTAL INSERTO K0061109 ADVANCE®
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		UNICOMPARTMENTAL ASA P7ESCOFINA ELÉCTRICA K0064003 ADVANCE® UNI TIB FEM LINKING SPACERS 11- 12MM/ESPACIADORES K0064002 ADVANCE® UNI TIB FEM LINKING SPACERS 9- 10MM/ESPACIADORES K0064001 ADVANCE® UNI TIB FEM LINKING SPACERS 7- 8MM/ESPACIADORES K0063002 UNI VARILLA ALINEACIÓN PROXIMAL EM OFFSET K0060097 ADVANCE® UNI HERRAMIENTA P/REMOCIÓN CEMWNTO, PLÁSTICA KFSCTR1L ADVANCE® INSERTO FEMORAL MEDIAL PIVOT DE PRUEBA, EN FORMA DE TALLO, MED. 1 , IZQUIERDO KFSCTR1R ADVANCE® INSERTO FEMORAL MEDIAL PIVOT DE PRUEBA, EN FORMA DE TALLO, MED. 1 , DERECHO KFSCTR2L ADVANCE® INSERTO FEMORAL MEDIAL PIVOT DE PRUEBA, EN FORMA DE TALLO, MED. 2 , IZQUIERDO KFSCTR2R ADVANCE® INSERTO FEMORAL MEDIAL PIVOT DE PRUEBA, EN FORMA DE TALLO, MED. 2 , DERECHO KFSCTR3L ADVANCE® INSERTO FEMORAL MEDIAL PIVOT DE PRUEBA, EN FORMA DE TALLO, MED. 3 , IZQUIERDO KFSCTR3R ADVANCE® INSERTO FEMORAL MEDIAL PIVOT DE PRUEBA, EN FORMA DE TALLO, MED. 3 , DERECHO KFSCTR4L ADVANCE® INSERTO FEMORAL MEDIAL PIVOT DE PRUEBA, EN FORMA DE TALLO, MED. 4 , IZQUIERDO KFSCTR4R ADVANCE® INSERTO FEMORAL MEDIAL PIVOT DE PRUEBA, EN FORMA DE TALLO, MED. 4 , DERECHO KFSCTR5L ADVANCE® INSERTO
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de las Poblaciones Libres"

		FEMORAL MEDIAL PIVOT DE PRUEBA, EN FORMA DE TALLO, MED. 5 , IZQUIERDO KFSCTR5R ADVANCE® INSERTO FEMORAL MEDIAL PIVOT DE PRUEBA, EN FORMA DE TALLO, MED. 5 , DERECHO KFSCTR6L ADVANCE® INSERTO FEMORAL MEDIAL PIVOT DE PRUEBA, EN FORMA DE TALLO, MED. 6 , IZQUIERDO KFSCTR6R ADVANCE® INSERTO FEMORAL MEDIAL PIVOT DE PRUEBA, EN FORMA DE TALLO, MED. 6 , DERECHO K0015601 ADVANCE® GUÍA P/FRESADORA ELÉCTRICA PIVOT MEDIAL EN FORMA DE TALLO, MED.SIZE 1 K0015602 ADVANCE® GUÍA P/FRESADORA ELÉCTRICA PIVOT MEDIAL EN FORMA DE TALLO, MED.SIZE 2 K0015603 ADVANCE® GUÍA P/FRESADORA ELÉCTRICA PIVOT MEDIAL EN FORMA DE TALLO, MED.SIZE 3 K0015604 ADVANCE® GUÍA P/FRESADORA ELÉCTRICA PIVOT MEDIAL EN FORMA DE TALLO, MED.SIZE 4 K0015605 ADVANCE® GUÍA P/FRESADORA ELÉCTRICA PIVOT MEDIAL EN FORMA DE TALLO, MED.SIZE 5 K0015606 ADVANCE® GUÍA P/FRESADORA ELÉCTRICA PIVOT MEDIAL EN FORMA DE TALLO, MED.SIZE 6 K0014601 ADVANCE® GUÍA P/RESECCIÓN SULCUS PIVOT MEDIAL EN FORMA DE TALLO, MED. 1 K0014602 ADVANCE® GUÍA P/RESECCIÓN SULCUS PIVOT MEDIAL EN FORMA DE TALLO, MED. 2 K0014603 ADVANCE® GUÍA P/RESECCIÓN SULCUS PIVOT
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		MEDIAL EN FORMA DE TALLO, MED. 3 K0014604 ADVANCE® GUÍA P/RESECCIÓN SULCUS PIVOT MEDIAL EN FORMA DE TALLO, MED. 4 K0014605 ADVANCE® GUÍA P/RESECCIÓN SULCUS PIVOT MEDIAL EN FORMA DE TALLO, MED. 5 K0014606 ADVANCE® GUÍA P/RESECCIÓN SULCUS PIVOT MEDIAL EN FORMA DE TALLO, MED. 6 KTIBSO10 ADVANCE® BASE OFFSET DE PRUEBA, MED. 1 KTIBSO20 ADVANCE® BASE OFFSET DE PRUEBA, MED. 1+ / 2 KTIBSO25 ADVANCE® BASE OFFSET DE PRUEBA, MED. 2.5 KTIBSO30 ADVANCE® BASE OFFSET DE PRUEBA, MED. 2+ / 3 KTIBSO40 ADVANCE® BASE OFFSET DE PRUEBA, MED. 3+ / 4 KTIBSO50 ADVANCE® BASE OFFSET DE PRUEBA, MED. 4+ / 5 KTIBSO60 ADVANCE® BASE OFFSET DE PRUEBA, MED. 5+ K002711L ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA P/BASE OFFSET, IZQUIERDO MED/RT LAT MED. 1/1+/2 K002711R ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA P/BASE OFFSET, DERECHO MED/LT LAT MED. 1/1+/2 K002712L ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA P/BASE OFFSET, IZQUIERDO MED/RT LAT MED. 2+/3/3+/4 K002712R ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA P/BASE OFFSET, RIGHT MED/RT LAT MED. 2+/3/3+/4 K002713L ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA P/BASE OFFSET, LFT
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		MED/RT LAT MED. 4+/5/5+ K002713R ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA P/BASE OFFSET, DERECHO MED/LT LAT MED. 4+/5/5+ K0027111 ADVANCE® GUÍA PUNZÓN EN QUILLA P/ADAPTADOR BASE TIBIAL K0027106 ADVANCE® MGNUITO P/ESCARIADOR BASE OFFSET, MED. 1/1+/2 K0027107 ADVANCE® MGNUITO P/ESCARIADOR BASE OFFSET, MED. 2+/3/3+/4 K0027108 ADVANCE® MGNUITO P/ESCARIADOR BASE OFFSET, MED. 4+/5/5+ K0027109 ADVANCE® MANGUITO ESCARIAGO CENTRAL BASE TIBIAL OFFSET K0027116 ADVANCE® ADAPTADOR DE BASE TIBIAL OFFSET P/PUNZÓN EN QUILLA K0027113 ADVANCE® LOCALIZADOR TALLO BASE OFFSET, MED. 1/1+/2 K0027114 ADVANCE® LOCALIZADOR TALLO BASE OFFSET, MED. 2+/3/3+/4 K0027115 ADVANCE® LOCALIZADOR TALLO BASE OFFSET, MED. 4+/5/5+ K015XROF ADVANCE® X-RAY TEMPLATES FOR OFFSET TIBIAL BASES/TEMPLATES P/BASE TIBIAL K0001004 ADVANCE® BROCA 3/16" CON QUICK DISCONNECT K0011241 ODYSSEY® ANEXO EXTENSIÓN P/GRAPA ROTACIONAL 1 K0011242 ODYSSEY® EXTENSIÓN P/CRUCETA ROTACIÓN K0012440 ODYSSEY® GUÍA ORIFICIOS CLAVIJAS P/CALIBRE MEDICIÓN K0012442 ODYSSEY® GUÍA ORIFICIOS CLAVIJAS P/CALIBRE
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

		DE MEDICIÓN +/-2MM K0012643 ODYSSEY® GUÍA MEDIO CORTE DISTAL K0014341 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL, MED. 1 K0014342 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL, MED. 2 K0014343 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL, MED. 3 K0014344 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL, MED. 4 K0014345 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL, MED. 5 K0014441 ODYSSEY® GUÍA P/RESECCIÓN SULCUS, MED. 1 K0014442 ODYSSEY® GUÍA P/RESECCIÓN SULCUS, MED. 2 K0014443 ODYSSEY® GUÍA P/RESECCIÓN SULCUS, MED. 3 K0014444 ODYSSEY® GUÍA P/RESECCIÓN SULCUS, MED. 4 K0014445 ODYSSEY® GUÍA P/RESECCIÓN SULCUS, MED. 5 K0027440 ODYSSEY® GUÍA PUNZÓN EN QUILLA PARA ADVANCE® K0031040 ODYSSEY® GRAPA PAELAR PARA ADVANCE® K004004L ODYSSEY® CRUCETA TIBIAL, IZQUIERDO K004004R ODYSSEY® CRUCETA TIBIAL, DERECHO K0061649 ODYSSEY® GUÍA ALINEACIÓN TIBIAL K0071142 ODYSSEY® GUÍA RECORTE 2MM K0027312 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA ESCALONADO, MED. 1-2 K0027334 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA ESCALONADO, MED. 3-4 K0027356 ADVANCE® PUNZÓN EN QUILLA ESCALONADO, MED. 5-6 K0017405 ODYSSEY® PALETA FIJA P/ GUÍA ALINEACIÓN DISTAL IM K0017406 ODYSSEY® GUÍA MODULAR EN ARCO
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		K0012654 ODYSSEY® STYLUS FEMORAL EN ARCO K0017407 ODYSSEY® GUÍA CORTE DISTAL QUICK CONNECT K0012646 ODYSSEY® GUÍA CORTE DISTAL CROSSHAIR K0014351 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL EN ARCO, MED. 1 K0014352 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL EN ARCO, MED. 2 K0014353 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL EN ARCO, MED. 3 K0014354 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL EN ARCO, MED. 4 K0014355 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL EN ARCO, MED. 5 K0014451 ODYSSEY® GUÍA P/CORTE DE SULCUS, MED. 1 K0014452 ODYSSEY® GUÍA P/CORTE DE SULCUS, MED. 2 K0014453 ODYSSEY® GUÍA P/CORTE DE SULCUS, MED. 3 K0014454 ODYSSEY® GUÍA P/CORTE DE SULCUS, MED. 4 K0014455 ODYSSEY® GUÍA P/CORTE DE SULCUS, MED. 5 K0027443 ODYSSEY® GUÍA ALINEACIÓN TIBIAL IM K004005L ODYSSEY® GUÍA TIBIAL 3 GRADOS IZQ. PARA ADVANCE® K004005R ODYSSEY® GUÍA TIBIAL 3 GRADOS DER. PARA ADVANCE® K0040051 ODYSSEY® STYLUS TIBIAL 2MM/10MM 0 K0040052 ODYSSEY® GUÍA ALINEACIÓN EXTERNA K0017401 ODYSSEY® IMPACTOR FEMORAL K0017403 ODYSSEY® EXTRACTOR MARTILLO DE GOMA P/FEMUR DE PRUEBA K0001205 ODYSSEY® EMPUJA
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		CLAVIJAS ROSCADO K0001290 ODYSSEY® CLAVIJA ROSCADA, 65MM K0001287 ODYSSEY® CLAVIJA ROSCADA, 85MM K0001295 ODYSSEY® CLAVIJA ROSCADA CON COLLARÍN, 55MM K0017404 ODYSSEY® PALETA GIRATORIA DISTAL P/GUPIA ALINEACIÓN IM K0017402 ODYSSEY® EXTRACTOR IMPLANTE FEMORAL K0001745 ODYSSEY® IMPULSOR CLAVIJA ROSCADA K0001741 ODYSSEY® CLAVIJAS ROSCADAS CON CABEZA K0001742 ODYSSEY® CLAVIJAS ROSCADAS SIN CABEZA K0003002 ADVANCE® BLOQUE PARA FLEXIÓN/EXTENSIÓN MINUS 2MM 18710209 ORTHOLOC® MODULAR PATELLAR SEATER 32MM K0014321 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL DCF, MED. 1 K0014322 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL DCF, MED. 2 K0014323 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL DCF, MED. 3 K0014324 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL DCF, MED. 4 K0014325 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL DCF, MED. 5 K0017422 ODYSSEY® EXTRACTOR BLOQUE RESECCIÓN DCF PARA ADVANCE® K0010703 ODYSSEY® VARILLA DCF IM 7", 3 GRADOS PARA ADVANCE® K0010103 ODYSSEY® VARILLA DCF IM 10", 3 GRADOS PARA ADVANCE® KIDT014R ADVANCE® INSERTO
--	--	---

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

		DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 0 , DERECHO, 14MM KIDT017R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 0 , DERECHO, 17MM. KIDT020R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 0 , DERECHO, 20MM KIDT025R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 0 , DERECHO, 25MM KIDT110L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 1 , IZQUIERDO, 10MM KIDT112L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 1 , IZQUIERDO, 12MM KIDT114L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 1 , IZQUIERDO, 14MM KIDT117L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 1 , IZQUIERDO, 17MM KIDT120L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 1 , IZQUIERDO, 20MM KIDT125L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 1 , IZQUIERDO, 25MM KIDT110R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 1 , DERECHO, 10MM KIDT112R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 1 , DERECHO, 12MM KIDT114R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 1 , DERECHO, 14MM KIDT117R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 1 , DERECHO, 17MM KIDT120R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 1 , DERECHO, 20MM KIDT125R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 1 , DERECHO, 25MM KIDT210L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA,
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
A.N.M.S.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		MED. 2 , IZQUIERDO, 10MM KIDT212L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 2 , IZQUIERDO, 12MM KIDT214L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 2 , IZQUIERDO, 14MM KIDT217L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 2 , IZQUIERDO, 17MM KIDT220L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 2 , IZQUIERDO, 20MM KIDT225L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 2 , IZQUIERDO, 25MM KIDT210R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 2 , DERECHO, 10MM KIDT214R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 2 , DERECHO, 14MM KIDT217R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 2 , DERECHO, 17MM KIDT220R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 2 , DERECHO, 20MM KIDT225R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 2 , DERECHO, 25MM KIDT212R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 2 , DERECHO, 12MM KIDT310L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 3 , IZQUIERDO, 10MM KIDT312L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 3 , IZQUIERDO, 12MM KIDT314L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 3 , IZQUIERDO, 14MM KIDT317L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 3 , IZQUIERDO, 17MM KIDT320L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 3 , IZQUIERDO, 20MM KIDT325L ADVANCE® INSERTO
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Reguladoras e Institutos
S.A.M.S.T.

		DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 3 , IZQUIERDO, 25MM KIDT310R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 3 , DERECHO, 10MM KIDT312R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 3 , DERECHO, 12MM KIDT314R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 3 , DERECHO, 14MM KIDT317R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 3 , DERECHO, 17MM KIDT320R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 3 , DERECHO, 20MM KIDT325R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 3 , DERECHO, 25MM KIDT410L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 4 , IZQUIERDO, 10MM KIDT412L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 4 , IZQUIERDO, 12MM KIDT414L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 4 , IZQUIERDO, 14MM KIDT417L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 4 , IZQUIERDO, 17MM KIDT420L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 4 , IZQUIERDO, 20MM KIDT425L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 4 , IZQUIERDO, 25MM KIDT410R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 4 , DERECHO, 10MM KIDT412R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 4 , DERECHO, 12MM KIDT414R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 4 , DERECHO, 14MM KIDT417R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA,
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
S.A.M.S.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		MED. 4 , DERECHO, 17MM KIDT420R ADVANCE@ INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 4 , DERECHO, 20MM KIDT425R ADVANCE@ INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 4 , DERECHO, 25MM KIDT510L ADVANCE@ INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 5 , IZQUIERDO, 10MM KIDT512L ADVANCE@ INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 5 , IZQUIERDO, 12MM KIDT514L ADVANCE@ INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 5 , IZQUIERDO, 14MM KIDT517L ADVANCE@ INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 5 , IZQUIERDO, 17MM KIDT520L ADVANCE@ INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 5 , IZQUIERDO, 20MM KIDT525L ADVANCE@ INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 5 , IZQUIERDO, 25MM KIDT510R ADVANCE@ INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 5 , DERECHO, 10MM KIDT512R ADVANCE@ INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 5 , DERECHO, 12MM KIDT514R ADVANCE@ INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 5 , DERECHO, 14MM KIDT517R ADVANCE@ INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 5 , DERECHO, 17MM KIDT520R ADVANCE@ INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 5 , DERECHO, 20MM KIDT525R ADVANCE@ INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 5 , DERECHO, 25MM KIDT610L ADVANCE@ INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 6 , IZQUIERDO, 10MM KIDT612L ADVANCE@ INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 6 , IZQUIERDO, 12MM KIDT614L ADVANCE@ INSERTO
--	--	---

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
A.N.M.A.T.

		DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 6 , IZQUIERDO, 14MM KIDT617L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 6 , IZQUIERDO, 17MM KIDT620L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 6 , IZQUIERDO, 20MM KIDT010L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 0 , IZQUIERDO, 10MM KIDT012L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 0 , IZQUIERDO, 12MM KIDT014L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 0 , IZQUIERDO, 14MM KIDT017L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 0 , IZQUIERDO, 17MM KIDT020L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 0 , IZQUIERDO, 20MM KIDT025L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 0 , IZQUIERDO, 25MM KIDT010R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 0 , DERECHO, 10MM KIDT012R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA DOBLE ALTURA, MED. 0 , DERECHO, 12MM KTIBSL00 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA UNIVERSAL, MED. 0 KTIBSL01 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA UNIVERSAL, MED. 0+ KTIBSL10 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA UNIVERSAL, MED. 1 KTIBSL20 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA UNIVERSAL, MED. 2 / 1+ KTIBSL25 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA UNIVERSAL, MED. 2.5 KITBSL30 BASE TIBIAL DE PRUEBA UNIVERSAL, MED. 3/2+
--	--	--

f LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		KITBSL40 BASE TIBIAL DE PRUEBA UNIVERSAL, MED. 4/3+ KITBSL50 BASE TIBIAL DE PRUEBA UNIVERSAL, MED. 5/4+ KITBSL60 BASE TIBIAL DE PRUEBA UNIVERSAL, MED. 6/5+ K0026221 ADVANCE® COMP. TIBIAL ALL POLY/TALLO DE PRUEBA, MED. 1 K0026222 ADVANCE® COMP. TIBIAL ALL POLY/TALLO DE PRUEBA, MED. 2 K0026213 ADVANCE® COMP. TIBIAL ALL POLY/TALLO DE PRUEBA, MED. 3 K0026214 ADVANCE® COMP. TIBIAL ALL POLY/TALLO DE PRUEBA, MED. 4 K0026215 ADVANCE® COMP. TIBIAL ALL POLY/TALLO DE PRUEBA, MED. 5 K0026216 ADVANCE® COMP. TIBIAL ALL POLY/TALLO DE PRUEBA, MED. 6 KTIBSP1U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA CON CLAVIJAS, MED. 1 KTIBSP2U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA CON CLAVIJAS, MED. 2 KTIBSP3U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA CON CLAVIJAS, MED. 3 KTIBSP4U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA CON CLAVIJAS, MED. 4 KTIBSP5U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA CON CLAVIJAS, MED. 5 KTIBSP6U ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA CON CLAVIJAS, MED. 6 K0054001 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL POSTERIOR DE PRUEBA, MED. 1/2 X 5MM K0054002 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL POSTERIOR DE PRUEBA, MED. 1/2 X 10MM K0054005 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL POSTERIOR DE
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		PRUEBA, MED. 3/4 X 5MM K0054006 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL POSTERIOR DE PRUEBA, MED. 3/4 X 10MM K0054009 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL POSTERIOR DE PRUEBA, MED. 5 X 5MM K0054010 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL POSTERIOR DE PRUEBA, MED. 5 X 10MM K0054013 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL DISTAL DE PRUEBA, MED. 1/2 X 5MM K0054014 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL DISTAL DE PRUEBA, MED. 1/2 X 10MM K0054017 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL DISTAL DE PRUEBA, MED. 3/4 X 5MM K0054021 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL DISTAL DE PRUEBA, MED. 5 X 5MM K0054022 ADVANCE® AUMENTO FEMORAL DISTAL DE PRUEBA, MED. 5 X 10MM K0053001 ADVANCE® CUÑA DE PRUEBA 15° LATERAL IZQUIERDO/MEDIAL DERECHO, MED. 1 K0053002 ADVANCE® CUÑA DE PRUEBA 15° LATERAL DERECHO/MEDIAL IZQUIERDO , MED. 1 K0053003 ADVANCE® CUÑA DE PRUEBA 15° LATERAL IZQUIERDO /MEDIAL DERECHO , MED. 2/1+ K0053004 ADVANCE® CUÑA DE PRUEBA 15° LATERAL DERECHO /MEDIAL IZQUIERDO , MED. 2/1+ K0053005 ADVANCE® CUÑA DE PRUEBA 15° LATERAL IZQUIERDO /MEDIAL DERECHO , MED. 3/2+ K0053006 ADVANCE® CUÑA DE PRUEBA 15° LATERAL DERECHO / MEDIAL IZQUIERDO , MED. 3/2+
--	--	--

f

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		K0053007 ADVANCE® CUÑA DE PRUEBA 15° LATERAL IZQUIERDO /MEDIAL DERECHO , MED. 4/3+ K0053008 ADVANCE® CUÑA DE PRUEBA 15° LATERAL DERECHO / MEDIAL IZQUIERDO , MED. 4/3+ K0053009 ADVANCE® CUÑA DE PRUEBA 15° LATERAL IZQUIERDO /MEDIAL DERECHO , MED. 5/4+ K0053010 ADVANCE® CUÑA DE PRUEBA 15° LATERAL DERECHO / MEDIAL IZQUIERDO , MED. 5/4+ K0053011 ADVANCE® CUÑA DE PRUEBA 15° LATERAL IZQUIERDO / MEDIAL DERECHO , MED. 6/5+ K100KIT7 ADVANCE® MEDIAL PIVOT TRIAL WRIGHT EXPRESS®, KIT INSTRUMENTAL K100KT70 ODYSSEY® DCF MIS KNEE INST FULL SET/INSTRUMENTAL P/RODILLA, SET COMPLETO 2271FA120 0 KNEE IMPACTOR/EXTRACTOR TOMMY BAR P/RODILLA K0012652 ODYSSEY® GUÍA P/RESECCIÓN DISTAL, 11MM K0012653 ODYSSEY® GUÍA P/RESECCIÓN DISTAL, 9MM & 13MM K0012659 ODYSSEY® GUÍA P/RESECCIÓN DISTAL, 9MM K0012660 ODYSSEY® DCF FEMORAL STYLUS W/ SKI TIP/STYLEUS FEMORAL DCF CON PUNTA SKI K0014337 ODYSSEY® SÓNDA 8MM PARA GUÍA RESECCIÓN 1, 4" K0014381 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL DCF CON RANURA ANTERIOR ANCHA, MED. 1 K0014382 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL DCF CON
--	--	---

Y

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

		RANURA ANTERIOR ANCHA, MED. 2 K0014383 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL DCF CON RANURA ANTERIOR ANCHA, MED. 3 K0014384 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL DCF CON RANURA ANTERIOR ANCHA, MED. 4 K0014385 ODYSSEY® BLOQUE RESECCIÓN FEMORAL DCF CON RANURA ANTERIOR ANCHA, MED. 5 K0014627 ODYSSEY® CALIBRE MEDICIÓN FEMORAL DCF CON ORIFICIO CLAVIJA & ASA K0017409 ODYSSEY® EXTRACTOR BLOQUE RESECCIÓN FEM DE PRUEBA PARA MARTILLO DE GOMA K0017418 ODYSSEY® ESPCIADOR P/GUÍA ALINEACIÓN VALGUS DCF, 7MM K0017420 ODYSSEY® GUÍA ALINEACIÓN VALGUS DCF CON CLEARANCE ANTERIOR K0027445 ODYSSEY® ALINEACIÓN TIBIAL IM MODIFICADA K0031041 ODYSSEY® SONDA DE PROFUNDIDAD PATELAR ONLAY 8MM PARA ADVANCE® K0040042 ODYSSEY® MIS TIB STYLUS W/ REDUCED TIP/STYLUS TIBIAL CON PUNTA REDUCIDA K004007L ODYSSEY® GUÍA TIBIAL IZQUIERDA 3 GRADOS, MORE UNIVERSAL K004007R ODYSSEY® GUÍA TIBIAL DERECHA 3 GRADOS, MORE UNIVERSAL K0040116 GUÍA RESECCIÓN TIBIAL EM CON PERILLA AJUSTE PROXIMAL K0040117 ADVANCE® COMPONENTE STANDARD DE REEMPLAZO EM CORTO
--	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T.

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

		KFTCMR1L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA FEMORAL CON RANURA, MED. 1L KFTCMR1R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA FEMORAL CON RANURA, MED. 1R KFTCMR2L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA FEMORAL CON RANURA, MED. 2L KFTCMR2R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA FEMORAL CON RANURA, MED. 2R KFTCMR3L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA FEMORAL CON RANURA, MED. 3L KFTCMR3R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA FEMORAL CON RANURA, MED. 3R KFTCMR4L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA FEMORAL CON RANURA, MED. 4L KFTCMR4R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA FEMORAL CON RANURA, MED. 4R KFTCMR5L ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA FEMORAL CON RANURA, MED. 5L KFTCMR5R ADVANCE® INSERTO DE PRUEBA FEMORAL CON RANURA, MED. 5R KS001051 ODYSSEY® BANDEJA P7FEMORAL DE PRUEBA DCF, NUEVA KS001052 ODYSSEY® DCF EM TRAY NEW O/BANDEJA NUEVA O KS001053 ODYSSEY® DCF FEMORAL GUIDE TRAY NEW/BANDEJA GUÍA FEMORAL DCF NUEVA KS001054 ODYSSEY® DCF 4 IN 1 & SULCUS TRAY NEW/BANDEJA DCF 4" 1 Y SULCUS, NUEVA KS001055 ODYSSEY® BANDEJA PREPARACIÓN PATELAR KS001056 ODYSSEY® BANDEJA GUÍA TIBIAL O KTIBSL30 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA UNIVERSAL, MED. 3 / 2+
--	--	--

f LV



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		KTIBSL40 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA UNIVERSAL, MED. 4 / 3+ KTIBSL50 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA UNIVERSAL, MED. 5 / 4+ KTIBSL60 ADVANCE® BASE TIBIAL DE PRUEBA UNIVERSAL, MED. 6 / 5+
Proyecto de Rótulo	Autorizado según Disposición ANMAT N° 3181/10.	A foja 510 a 511.
Proyecto de Instrucciones de Uso	Autorizado según Disposición ANMAT N° 3181/10.	A fojas 512 a 519.

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma CROSMED S.A., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1552-40, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días.....14. SEP. 2015...

Expediente N° 1-47-3110-3020-14-7


DISPOSICIÓN N°

7433

DR. LEONARDO VERNA
SUBADMINISTRADOR NACIONAL
DECRETO N° 1368/2015
A.N.M.A.T.



7433

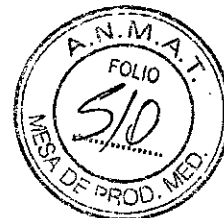

MODELO DEL PROYECTO DEL ROTULO

Importado por:
CROSMED S.A.
Domicilio Legal: Av. Corrientes 1386 Piso 9 Dpto 16, CABA
Deposito: Julián Alvarez 420, CABA
Rep. Argentina

Autorizado por la ANMAT PM 1552-40

PROTESIS DE RODILLA

MARCA: MICROPORT ORTHOPEDICS INC

MODELO: XXXXX

CODIGO: XXXXXX

DESCRIPCION: XXXXXX

LOTE: XXXXXX

VTO: XX-YYYY

Fabricante: MICROPORT ORTHOPEDICS INC
5677 Airline Road
Arlington, TN 38002 (ESTADOS UNIDOS)

ESTERIL (R)

DIRECTOR TECNICO: SILVANA TOCHETTI, Bioingeniera - M.N. 5634
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

NO UTILIZAR SI EL EMPAQUE NO ESTÁ ÍNTEGRO
PRODUCTO MÉDICO DE UN SOLO USO. No reesterilizar


LEER LAS INSTRUCCIONES DE USO

SILVANA TOCHETTI
Bioingeniera - M.N. 5634
Directora Técnica

ROMINA BENTOLINA
Crosmed S.A.
CUIT: 30-70842959-3
Apoderado



7433

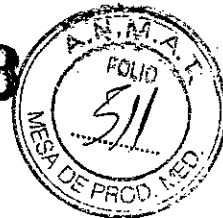

MODELO DEL PROYECTO DEL ROTULO

Importado por:

CROSMED S.A.

Domicilio Legal: Av. Corrientes 1386 Piso 9 Dpto 16, CABA

Deposito: Julián Alvarez 420, CABA

Rep. Argentina

Autorizado por la ANMAT PM 1552-40

INSTRUMENTAL

MARCA: MICROPORT ORTHOPEDICS INC

MODELO: XXXXXX

CODIGO: XXXXXX

DESCRIPCION: XXXXXX

LOTE: XXXXXX

FECHA FABRICACION: XX-YYYY

Fabricante: MICROPORT ORTHOPEDICS INC

5677 Airline Road

Arlington, TN 38002 (ESTADOS UNIDOS)

NO ESTERILDIRECTOR TECNICO: SILVANA TOCHETTI, Bioingeniera - M.N. 5634
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIASPRODUCTO MÉDICO NO ESTERIL REUTILIZABLE
LEER LAS INSTRUCCIONES DE USO
SILVANA TOCHETTI
Bioingeniera - M.N. 5634
Directora Técnica
ROMINA BENIOLILA
Crosmed S.A.
CUIT: 30-70842959-3
Apoderado



7433



MODELO DE INSTRUCCIONES DE USO

Importado por:

CROSMED S.A.

Domicilio Legal: Av. Corrientes 1386 Piso 9 Dpto 16, CABA

Deposito: Julián Alvarez 420, CABA

Rep. Argentina

Autorizado por la ANMAT PM 1552-40

PROTESIS DE RODILLA

MARCA: MICROPORT ORTHOPEDICS INC

MODELO: XXXXX

CODIGO: XXXXXX

DESCRIPCION: XXXXXX

Fabricante: MICROPORT ORTHOPEDICS INC

5677 Airline Road

Arlington, TN 38002 (ESTADOS UNIDOS)

ESTERIL 1R

DIRECTOR TECNICO: SILVANA TOCHETTI, Bioingeniera - M.N. 5634

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

NO UTILIZAR SI EL EMPAQUE NO ESTÁ ÍNTEGRO

PRODUCTO MÉDICO DE UN SOLO USO. No reesterilizar

LEER LAS INSTRUCCIONES DE USO


ROMINA BENTOLILA
Crosmed S.A.
CUIT: 30-70842959-3
Aptoderado


SILVANA TOCHETTI
Bioingeniera - M.N. 5634
Directora Técnica



7433



Importado por:

CROSMED S.A.

Domicilio Legal: Av. Corrientes 1386 Piso 9 Dpto 16, CABA

Deposito: Julián Alvarez 420, CABA

Rep. Argentina

Autorizado por la ANMAT PM 1552-40

INSTRUMENTAL

MARCA: MICROPORT ORTHOPEDICS INC

MODELO: XXXX

CODIGO: XXXXXX

DESCRIPCION: XXXXXX

Fabricante: MICROPORT ORTHOPEDICS INC

5677 Airline Road

Arlington, TN 38002 (ESTADOS UNIDOS)

NO ESTERIL

DIRECTOR TECNICO: SILVANA TOCHETTI, Bioingeniera - M.N. 5634

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTO MÉDICO NO ESTERIL REUTILIZABLE

LEER LAS INSTRUCCIONES DE USO

Solamente deben utilizarse componente protésicos del sistema de rodilla Advance. No deben mezclarse componente de diferentes fabricantes.

INDICACIONES

Este producto está indicado en artroplastias de rodilla, con el objeto de reducir o aliviar el dolor y mejorar la funcionalidad de la rodilla en pacientes con esqueleto maduro que padezcan las siguientes afecciones:

1. Enfermedad articular degenerativa no inflamatoria incluyendo osteoartritis, artritis reumática o necrosis avascular;
2. Enfermedad articular degenerativa inflamatoria incluyendo la artritis reumatoide;
3. Corrección de deformidades funcionales
4. Procedimientos de revisión en casos de fracaso de otros tratamientos o dispositivos
5. Tratamiento de fracturas que son intratables utilizando otras técnicas

Componentes del sistema ADVANCE TOTAL KNEE SYSTEM :

- Componentes femorales
- Componentes de base tibial
- Componentes de inserto tibial
- Componentes patelares
- Componentes de Revisión

SILVANA TOCHETTI
Bioingeniera - M.N. 5634
Directora Técnica

ROMINA BENTOLILA
Crosmed S.A.
CUIT: 30-70842939-3
Apoderado

- Componentes Unicompartimentales
- Tornillos óseos
- Instrumentos

Materiales. Los componentes femoral, tibial y rotuliano están fabricados de diversos materiales tales como aleación de cobalto-cromo-molibdeno, aleación de titanio, titanio no aleado, acero inoxidable, polimetilmetacrilato (PMMA), y polietileno de peso molecular ultraelevado (UHMWPE), cumpliendo todos ellos con las normas ASTM. El material del componente se indica en la etiqueta exterior del envoltorio.

Los componentes de cobalto, cromo y titanio con recubrimiento poroso presentan una cubierta porosa de esferas de cobalto, cromo y titanio sin alear, respectivamente. La capa porosa que se aplica sobre la base tibial ADVANCE® BIOFOAM™ se fabrica comercialmente con titanio puro. Los recubrimientos de hidroxapatita se suministran en superficies porosas o de chorro de arena exclusivamente para aplicaciones no cementadas.

Componentes protésicos. No se deben combinar componentes femorales, tibiales y rotulares de diferentes sistemas protésicos o de fabricantes distintos. Se debe tener en cuenta que no es aconsejable la mezcla de algunos tamaños, aunque pertenezcan al mismo sistema protésico. Los componentes modulares se deben montar de forma segura para prevenir la disociación. No conviene repetir el montaje y el desmontaje de los componentes modulares, pues podría afectar a la acción de bloqueo de dichos componentes. Hay que limpiar los desechos de la cirugía de los componentes antes del montaje ya que pueden impedir un ajuste apropiado e interferir en los mecanismos de bloqueo de los componentes modulares; el resultado podría ser una falla prematura del procedimiento.

INSTRUMENTOS

El sistema de reemplazo total de rodilla ADVANCE también incluye instrumentos. Este instrumental incluye:

- Destornilladores
- Brocas
- Guías de perforación
- Trocar
- Escariadores
- Calibre medidor de profundidad
- Dispositivos para distracción/compresión
- Mango destornillador
- Mechas para tornillos
- Protector de tejidos

Entre las contraindicaciones absolutas se encuentran:

1. Infección manifiesta
2. Focos infecciosos distantes (que pueden extenderse al sitio de implantación por vía hematogénica)
3. Avance patológico rápido evidenciado en radiografías por la destrucción articular o absorción del hueso
4. Pacientes con esqueleto inmaduro
5. Estado neuromuscular inadecuado (ejemplo antecedentes de parálisis, fusión o fuerza insuficiente de los abductores), mala calidad ósea o mala cobertura cutánea alrededor de la articulación de la rodilla, lo cual injustificaría el procedimiento;


SILVANA TOCHETTI
Bioingeniera - M.N. 5634
Directora Técnica
ROMINA BENTOLITA
Crosmed S.A.
CUIT: 30-70842959-3
Apoderado

Entre las condiciones que aumentan el riesgo de fallo protésico se encuentran:

1. Pacientes renuentes a colaborar o con trastornos neurológicos que no sean capaces de seguir instrucciones ;
2. Pérdida ósea marcada, osteoporosis grave o procedimientos de revisión para los cuales no se puede lograr un encaje adecuado de la prótesis;
3. Trastornos metabólicos que podrían dificultar la formación de huesos o causar pérdida ósea;
4. Osteomalacia
5. Impedimentos para lograr una buena cicatrización de la herida (ejemplo úlcera de decúbito, diabetes en fase terminal, grave deficiencia proteica y desnutrición);

POSIBLE COMPLICACIONES

La incorrecta selección, implantación, colocación o fijación de los componentes protésicos puede dar lugar a esfuerzos excesivos en los componentes protésicos y el consiguiente acortamiento de su vida. El cirujano debe estar completamente familiarizado con la prótesis, los instrumentos y la técnica quirúrgica antes de llevar a cabo la cirugía. Se recomienda un seguimiento periódico a largo plazo para monitorizar la posición y el estado de los componentes protésicos así como la condición del hueso adyacente.

Los procedimientos y técnicas quirúrgicas adecuadas son responsabilidad de los profesionales médicos. Cada cirujano debe evaluar la idoneidad del procedimiento realizado basándose en su formación y experiencia médica personal. Aunque no podemos recomendar una determinada técnica quirúrgica que sea idónea para todos los pacientes, ponemos a la disposición del cirujano una técnica quirúrgica detallada con fines de referencia. El médico debe determinar los procedimientos quirúrgicos para lograr la utilización óptima de la prótesis. Sin embargo, se advierte al médico que existe evidencia reciente de que se puede reducir la posibilidad de sepsis profunda tras la artroplastia de rodilla mediante lo siguiente:

- Administrando sistemáticamente antibióticos profilácticos
- Utilizando un sistema de aire limpio por flujo laminar
- Imponiendo el uso de los atuendos correctos a todos el personal adjunto al quirófano
- Protegiendo el instrumental contra la contaminación por patógenos aéreos
- Utilizando coberturas impermeables.

Componentes de metal. Algunas de las aleaciones empleadas para fabricar las prótesis ortopédicas pueden contener elementos carcinogénicos en cultivos tisulares u organismos intactos. Por ello, en algunos textos científicos se plantea la duda de si estas aleaciones son o no carcinogénicas para los receptores reales de las prótesis. Los estudios enfocados en la evaluación de estas cuestiones no han arrojado ninguna prueba convincente de semejante hecho.

Aplicación cementada. Hay que asegurarse de que todos los componentes de la prótesis incrustados en cemento óseo dispongan de un soporte completo con el fin de prevenir concentraciones de tensión que puedan conducir al fracaso del dispositivo o de la capa de cemento. Para prevenir un desgaste acelerado de las superficies articulares de la prótesis, es fundamental realizar una limpieza completa antes del cierre del sitio de la prótesis, lo cual incluye la total eliminación de fragmentos óseos, fragmentos de cemento óseo y desechos metálicos.

Aplicación no cementada. Una fijación precisa en el momento de la cirugía es de vital importancia para el éxito del procedimiento. Los componentes femoral y tibial deben asentarse

SILVANA FOCHETTI
Bioingeniera - M.N. 5634
Directora Técnica

ROMINA BENTONILA
Crosmed S.A.
CUIT: 30.70842959-3
Apoderado

por completo en el fémur y la tibia, respectivamente, lo que implica una técnica quirúrgica de gran precisión y el uso del instrumental especificado. Durante el asentamiento de la prótesis puede producirse la fractura intraoperatoria del fémur o la tibia. Debe existir una adecuada cantidad de hueso para sostener el dispositivo.


PRECAUCIONES

1. Debe informarse al paciente de las limitaciones de la reconstrucción y de la necesidad de evitar esfuerzos de carga total en la prótesis hasta que se hayan producido una fijación y cicatrización adecuadas. El exceso de actividad y traumatismos que afecten la articulación artificial pueden llevar al fracaso de la reconstrucción por aflojamiento, fractura o desgaste de los componentes protésicos. El aflojamiento de los componentes puede generar una mayor cantidad de partículas de desgaste y provocar daños al hueso, dificultando el éxito de la cirugía de revisión.
2. Debe aconsejarse al paciente que restrinja sus actividades y proteja la articulación reemplazada contra esfuerzos irrazonables y que siga las instrucciones del médico en cuanto a los cuidados y el tratamiento postoperatorios. Se debe vigilar de cerca al paciente si se detecta un cambio en lugar de la operación. Se debe evaluar la posibilidad de deterioro de la articulación y se debe considerar posible cirugía de revisión.
3. Debe advertirse al paciente de los riesgos quirúrgicos y los posibles efectos adversos. También debe indicársele que la prótesis no está destinada a reemplazar el hueso sano normal; que la prótesis puede romperse o averiarse como consecuencia de ciertas actividades, traumatismos, que tiene una vida prevista finita y que podría requerir un ulterior reemplazo en algún momento. También debe advertirse al paciente acerca de otros riesgos que el cirujano piense que se deben revelar.
4. Se dispone de los instrumentos especializados que deben utilizarse para garantizar la implantación precisa de los componentes protésicos. No mezcle instrumentos de diferentes fabricantes. Si bien es raro, puede darse la ruptura de instrumentos especialmente con uso extensivo o fuerza excesiva. Por esta razón, antes de la cirugía deben examinarse los instrumentos para descartar la presencia de desgaste o daños.
5. Se deben utilizar también plantillas previas a la operación y prótesis de prueba para garantizar el tamaño adecuado de la prótesis. Utilice solamente componentes protésicos del tamaño adecuado. La mezcla de componentes podría impedir la articulación del componente causando un desgaste y un posible fallo del componente así como contribuir a la laxitud de la articulación.
6. Se recomienda realizar radiografías postoperatorias periódicas a fin de comparar con las condiciones postoperatorias del principio y detectar evidencia a largo plazo de cambios de posición, aflojamiento, doblez o grietas en los componentes.

EFFECTOS ADVERSOS

1. Se ha informado del desgaste de las superficies de articulación del polietileno de los componentes tibial y patelar tras la sustitución de la rodilla. Se pueden iniciar niveles más altos de desgaste por partículas de cemento, metal y otros desechos que pueden causar abrasión de las superficies de articulación. Los índices más altos de desgaste podrían acortar la vida útil de la prótesis y causar que se necesite pronto una cirugía de revisión para reemplazar los componentes protésicos desgastados. El desgaste puede


SILVANA TOCHETTI
Bioingeniera - M.N. 5634
Directora Técnica

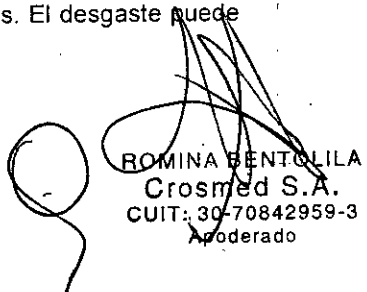
ROMINA BENCIOILILA
Crosmed S.A.
CUIT: 30-70842959-3
Aprobado

hacer que las superficies de articulación de polietileno se separe de los componentes con parte posterior de metal. El desgaste puede llevar a un aumento en la presencia de desechos particulados en la articulación con una reacción histológica asociada a esos desechos.

2. En cualquier reemplazo articular, puede producirse la resorción progresiva, localizada y asintomática del hueso (osteólisis) alrededor de los componente protésicos como consecuencia de la reacción a un cuerpo extraño ante el material particulado. Este material particulado se genera a causa de la fricción entre un componente y otro o entre la prótesis y el hueso, principalmente a través de mecanismos de desgaste como la adhesión, la abrasión y la fatiga. Secundariamente, también puede generarse partículas a causa del desgaste por terceros cuerpos. La osteólisis puede producir dolor, inflamación y complicaciones futuras que requerirían la extracción y el reemplazo de los componentes protésicos.
3. Aunque son poco probables, se han observado reacciones de sensibilidad a los metales en pacientes que se han sometido a un reemplazo articular. La implantación de material extraño en tejidos puede provocar reacciones celulares con participación de linfocitos, macrófagos y fibroblastos.
4. Se han comunicado casos de neuropatía periférica secundarios a un reemplazo articular de rodilla. Se ha informado de daños subclínicos en nervios, probablemente como resultado del traumatismo quirúrgico.
5. Puede producirse la dislocación y subluxación de los componentes protésicos si éstos son colocados en posiciones incorrectas y/o hay migración. La laxitud muscular y fibrosa también pueden contribuir a estos problemas.
6. Los componentes protésicos pueden aflojarse o desalojarse debido a traumatismos o a la pérdida de fijación.
7. La prótesis articular puede fallar a causa de infecciones.
8. Aunque es poco probable, puede producirse la fractura del componente como resultado de un traumatismo, actividad vigorosa, desalineación o duración del servicio.
9. El desequilibrio del tejido blando puede causar desgaste excesivo y/o fallo del implante.
10. La fractura intraoperativa del fémur, tibia o rótula puede ocurrir mientras se preparan los lugares óseos y/o se asientan los componentes.
11. Pueden ocurrir reacciones alérgicas a los materiales del componente protésico.

Entre las complicaciones intraperatorias y postoperatorias tempranas:

- Fractura del componente o hueso femoral, tibial o patelar,
- Daño a los vasos sanguíneos
- Lesiones tempranas o permanentes en los nervios, causantes del dolor o entumecimiento del miembro afectado,
- Una caída repentina de la presión sanguínea intraoperativamente debida al uso del cemento óseo,
- Deformidad vara o valga
- Trastornos cardiovasculares como trombosis venosa, embolismo pulmonar o infarto de miocardio,



SILVANA TOCHETTI
Bioingeniera - M.N. 5634
Directora Técnica



ROMINA BENTOLILA
Crosmed S.A.
CUIT: 30-70842959-3
Apoderado

- Hematoma
- Cicatrización lenta de la herida
- Infección profunda de la herida que podría requerir la extracción de la prótesis. En raras ocasiones puede requerirse una artrodesis de la articulación implicada o amputación del miembro.

Entre las complicaciones postoperatorias tardías se encuentran :

- Fractura patelar como resultado de tensión excesiva, traumatismo o debilidad intraoperatoria inadvertida,
- Problemas agravados del miembro afectado o extremidad contralateral debidos a la discrepancia de longitud de la pierna,
- Calcificación u osificación periarticulares, con o sin impedimento de la movilidad de la articulación
- Amplitud de movimientos inadecuada debido a la incorrecta selección o colocación de los componentes, presión y calcificación periarticular,
- El aflojamiento tardío o temprano, cambio de posición de los componentes, desgaste y doblez o grietas de uno o más componentes protésicos representan posibles efectos adversos,
- Se ha informado de fracturas de huesos, dislocación, subluxación, contractura de flexión, disminución en la amplitud de movimientos o alargamiento o acortamiento de la pierna asociados con la sustitución de rodilla.

MANEJO y ESTERILIZACION

La prótesis no debe ser reutilizada bajo ninguna circunstancia. Aunque la prótesis aparente estar en buenas condiciones, puede contener imperfecciones microscópicas que acortarian su vida útil. No debe reesterilizarse ni reutilizarse una prótesis que haya entrado en contacto con tejidos o líquidos corporales; en tales casos el dispositivo debe desecharse.

Advertencia: nunca esterilice o reesterilice al vapor los componentes de plástico o metal/plástico.

Los instrumentos quirúrgicos se deben limpiar y esterilizar de acuerdo con los siguientes parámetros:

Limpieza y desinfección

Limpie los instrumentos para eliminar la contaminación excesiva y desinféctelos para así reducir el número de microorganismos viables.

1. Desmonte todos los componentes si es necesario (use una técnica quirúrgica para dilucidar qué componentes pueden separarse).
2. Aclárelos con agua fría para eliminar cualquier exceso de contaminación.
3. Lave con un detergente a un pH de 7,0 a 10,0.
 - Si la contaminación incluye abundantes desechos orgánicos, utilice un detergente enzimático.
4. Sumerja durante 5 minutos en una solución enzimática preparada con arreglo a las instrucciones del fabricante.
5. Frote los componentes con un cepillo suave.
6. Aclare abundantemente con agua desionizada o depurada por ósmosis inversa.
7. Sumerja durante 5 minutos en una solución de detergente preparada con arreglo a las instrucciones del fabricante.
8. Frote con un cepillo suave.
9. Enjuague con agua desionizada.

SILVANA BOCHETTI
Bioingeniera - M.N. 5634
Directora Técnica

ROMINA BENTOLILA
Crosmed S.A.
CUIT: 30-70842959-3
Apoderado

10. Seque con un paño limpio, desechable y absorbente.
11. Inspeccione visualmente para comprobar que todo esté limpio. Inspeccione visualmente todas las superficies visibles internas y externas. Si es necesario, vuelva a limpiar/desinfectar los instrumentos hasta que queden visiblemente limpios.

Esterilización

1. Si utiliza un ciclo de esterilización por gravedad a 250°F (120 °C) o por pulsos de vacío a 270°F (132 °C), envuelva doblemente cada elemento en un envoltorio CSR o en otro envoltorio similar de un material no tejido de uso médico para envolver.
2. Esterilice en autoclave de acuerdo con los siguientes parámetros:

Esterilización con vapor		
Tipo de ciclo	Parámetro	Punto de referencia
Desplazamiento por la gravedad a 250 °F (121,1 °C)	Temperatura de exposición	250-254 °F (121-123 °C)
	Tiempo de exposición	30 minutos
	Tiempo de secado	15 minutos
Desplazamiento por la gravedad a 270 °F (132,2 °C)	Temperatura de exposición	270-275 °F (132-135 °C)
	Tiempo de exposición	10 minutos
	Tiempo de secado	15 minutos
Prevacío 270 °F (132,2 °C)	Temperatura de exposición	270-275 °F (132-135 °C)
	Tiempo de exposición	4 minutos
	Tiempo de secado	20 minutos

Estas recomendaciones han sido desarrolladas y probadas mediante el equipo específico. Debido a las variaciones en el medio ambiente y en el equipo, debe demostrarse que estas recomendaciones produzcan esterilidad en su ambiente. Si se producen cambios en las condiciones del proceso, materiales de envoltura o cambios en el equipo, deberá demostrarse la eficacia del proceso de esterilización.

Después de la esterilización, retire el componente de su envase o de la bandeja de esterilización con la técnica estéril aceptada y con guantes sin polvo. Asegúrese de que el componente se encuentre a temperatura ambiente antes del implante. Evite el contacto con objetos duros que puedan causar daños.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Estos productos no requieren condiciones especiales de almacenamiento más que las que deben ser almacenados bajo condiciones razonables como ser un ambiente limpio y seco, protegido de la luz del sol y de temperaturas extremas.

SILVANA TOCHETTI
Bioingeniera - M.N. 5634
Directora Técnica

ROMINA BENTONIA
Crosméd S.A.
CUIT: 30-70842959-7
Apoderado