



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 9903

BUENOS AIRES, 06 SET. 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-1188-16-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma ACRYL-AR S.R.L. solicita la revalidación y modificación del certificado de inscripción del producto médico PM-1042-19, denominado MATERIALES PARA ORTODONCIA, marca: GLENROE.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Revalídese la fecha de vigencia del certificado de inscripción en el RPPTM N° PM-1042-19 correspondiente al producto denominado: MATERIALES PARA ORTODONCIA, marca: GLENROE, propiedad de la firma ACRYL-AR S.R.L., obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 4142/11 de fecha 15 de junio de 2011, según lo establecido en el Anexo que forma parte de la presente Disposición.

E. A.



DISPOSICIÓN N° 9903

*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1042-19, denominado MATERIALES PARA ORTODONCIA, marca: GLENROE.

ARTÍCULO 3°.- Acéptese el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1042-19.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Autorización de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-1188-16-1

DISPOSICION N° 9903
gsch

E°

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. S. P.

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **9903**, a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1042-19 y de acuerdo a lo solicitado por la firma ACRYL-AR S.R.L. , la modificación de los datos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en (RPPTM) bajo:

Nombre Genérico aprobado: MATERIALES PARA ORTODONCIA.

Marca: GLENROE.

Autorizado por Disposición ANMAT N° 4142/11 de fecha 15 de junio de 2011.

Tramitado por expediente N° 1-47-9056-10-4.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado:	15 de junio de 2016.	15 de junio de 2021.
Rótulo:	Aprobado según Disp. ANMAT 4142/11.	A fojas 85.
Instrucciones de uso:	Aprobadas según Disp. ANMAT 4142/11.	A fojas 86 a 89.
Nombre del fabricante:	Dentsply Raintree Essix Glenroe	Dentsply International Raintree Essix
Lugar /es de elaboración:	1912, 44th Ave. E - Bradenton - FL 34203 - USA.	7290 26th Court East, Sarasota, FL 34243 Estados Unidos.
Modelo/s:	JT-1 (código de color)Lazos "S" - tonos rubí TT-1 (código de color)Lazos "S" - colores estándar TTM-1 (código de color)Lazos "S" - colores metálicos JT-3 (código de color)Lazos "O" - tonos rubí TT-3 (código de	GCC-AC Glenroe - Cadena color agua, cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-AO Glenroe - Cadena color agua, abierta con bobina de color de 15 pies. GCC-AZC Glenroe - Cadena azul cerrada con bobina de color de 15 pies. GCC-AZO Glenroe - Cadena azul abierta con bobina de color de 15 pies GCC-AZOL Glenroe - Cadena

6 1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>color)Lazos "O" - colores estándar TTM-3 (código de color)Lazos "O" - colores metálicos JTS-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,110" - tono rubí TTS-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,110" - colores estándar TTSM-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,110" - colores metálicos JT-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,120" - tono rubí TT-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,120" - colores estándar TTM-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,120" - colores metálicos TT-2MC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - estándar TTM-2MC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - metálicos JT-2MC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - tono rubí TTF-2MC Lazos para</p>	<p>azul abierta larga con bobina de color de 15 pies GCC-AZOM Glenroe - Cadena azul abierta mediana con bobina de color de 15 pies GCC-BC Glenroe - Cadena azul cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-BLKC Glenroe - Cadena negra cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-BLKO Glenroe - Cadena NEGRA ABIERTA con bobina de color de 15 pies GCC-BLKOL Glenroe - Cadena negra abierta larga con bobina de color de 15 pies GCC-BLKOM Glenroe - Cadena negra abierta mediana con bobina color 15 pies GCC-BO Glenroe - Cadena azul abierta con bobina de color de 15 pies GCC-BOL Glenroe - Cadena azul abierta larga con bobina de color de 15 pies GCC-BOM Glenroe - Cadena azul abierta media con bobina de color de 15 pies GCC-BRNO Glenroe - Cadena marrón abierta con bobina de color de 15 pies GCC-BYO Glenroe - Cadena B amarilla abierta con bobina de color de 15 pies GCC-CBO Glenroe - Cadena azul cobalto abierta con bobina de color de 15 pies GCC-CBOL Glenroe - Cadena azul cobalto abierta larga con bobina de color GCC-CBOM Glenroe - Cadena azul cobalto abierta media con bobina de color GCC-CHPNC Glenroe -</p>
--	---	--

E



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>paciente multicolores. Diámetro 0,120" - fluorescentes TT-2GLOWMC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - brillante TT-2JMC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - jalea TT-2MMC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - masculino JT-4 (código de color)Lazos individuales pequeños para pacientes - tonos rubí TT-4 (código de color)Lazos individuales pequeños para pacientes - colores estándares TTM-4 (código de color)Lazos individuales pequeños para pacientes - colores metálicos TT-4MC Lazos pequeños para paciente, multicolores. Diámetro 0,120" - estándar TTM-4MC Lazos pequeños para paciente, multicolores. Diámetro 0,120" - metálicos JT-4MC Lazos pequeños para paciente, multicolores. Diámetro 0,120" - tono rubí TTF-4MC Lazos pequeños para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - fluorescentes TT-4GLOWMC Lazos pequeños para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - brillante</p>	<p>Cadena champagne cerrada con bobina color de 15 pies GCC-CHPNO Glenroe - Cadena champagne abierta con bobina de color de 15 pies GCC-DGC Glenroe - Cadena gris oscura cerrada con bobina de color 15 pies GCC-DGO Glenroe - Cadena gris oscura abierta con bobina de color de 15 pies GCC-DGOL Glenroe - Cadena gris oscura abierta larga con bobina de color GCC-DGOM Glenroe - Cadena gris oscura abierta media con bobina de color GCC-DGRNO Glenroe - Cadena verde obscuro abierto con bobina de color 15 GCC-EC Glenroe - Cadena esmeralda cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-EO Glenroe - Cadena esmeralda abierta con bobina de color de 15 pies GCC-EOM Glenroe - Cadena esmeralda abierta media con bobina de color GCC-FC Glenroe - Cadena fucsia cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-FGC Glenroe - Cadena verde fluorescente cerrada con bobina de color GCC-FGO Glenroe - Cadena verde fluorescente abierta con bobina de color GCC-FGOL Glenroe - Cadena verde fluorescente abierta larga con bobina color GCC-FGOM Glenroe - Cadena verde fluorescente abierta media bobina color GCC-FIREO Glenroe - Cadena</p>
--	--	--

C. A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>TT-4JMC Lazos pequeños para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - jalea</p> <p>TT-4MMC Lazos pequeños para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - masculino</p> <p>TTUS-1 (código de color)Lazos de ligaduras Ultra SlideTM - lazos "S"</p> <p>TTUS-2 (código de color) Lazos de ligaduras Ultra SlideTM - lazos individuales para pacientes. Diámetro 0,120"</p> <p>TTUS-4 (código de color)Lazos de ligaduras Ultra SlideTM - lazos pequeños para pacientes</p> <p>GC-(código de color)C Tuff Chain cerrado</p> <p>GC-(código de color)O Tuff Chain abierto</p> <p>GC-(código de color)OM Tuff Chain abierto medio</p> <p>GC-(código de color)OL Tuff Chain abierto largo</p> <p>GCJ-(código de color)C Tuff Chain cerrado - rubí</p> <p>GCJ-(código de color)O Tuff Chain abierto -rubí</p> <p>GCJ-(código de color)OM Tuff Chain abierto medio - rubí</p> <p>GCJ-(código de color)OL Tuff Chain abierto largo - rubí</p> <p>GCM-(código de color)C Tuff Chain cerrado - metálico</p> <p>GCM-(código de color)O Tuff Chain abierto - metálico</p> <p>GCM-(código de color)OM</p>	<p>roja intenso abierta con bobina de color</p> <p>GCC-FO Glenroe - Cadena fucsia abierta con bobina de color</p> <p>GCC-FOC Glenroe - Cadena naranja fluorescente cerrada con bobina color</p> <p>GCC-FOL Glenroe - Cadena fucsia abierta larga con bobina de color</p> <p>GCC-FOM Glenroe - Cadena fucsia abierta media con bobina color de 15 pies</p> <p>GCC-FOO Glenroe - Cadena naranja fluor. abierta con bobina color de 15 pies</p> <p>GCC-FOOM Glenroe - Cadena naranja fluor. abierta media con bobina color de 15</p> <p>GCC-FPC Glenroe - Cadena rosa fluor. cerrada con bobina de color de 15 pies</p> <p>GCC-FPO Glenroe - Cadena rosa fluor. abierta con bobina de color 15 pies</p> <p>GCC-FPOL Glenroe - Cadena rosa fluor. abierta larga con bobina de color 15</p> <p>GCC-FPOM Glenroe - Cadena rosa fluor. Abierta media con bobina de color 15</p> <p>GCC-FRO Glenroe - Cadena roja fluorescente abierta con bobina color 15 pies</p> <p>GCC-FYO Glenroe - Cadena Amarillo fluor. abierta con bobina color 15 pies</p> <p>GCC-GFO Glenroe - Cadena pomelo abierta con bobina de color de 15 pies</p> <p>GCC-GLDC Glenroe - Cadena dorada cerrada con bobina de color de 15 pies</p> <p>GCC-GLDO Glenroe - Cadena dorada abierta con bobina de</p>
--	---	---

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>Tuff Chain abierto medio - metálico GCM-(código de color)OL Tuff Chain abierto largo - metálico GCUS-(código de color)C Ultra Slide Chain cerrado GCUS-(código de color)O Ultra Slide Chain abierto GCUS-(código de color)OM Ultra Slide Chain abierto medio GCUS-(código de color)OL Ultra Slide Chain abierto largo UT-(código de color)C Ultra Tuff Chain cerrado UT-(código de color)O Ultra Tuff Chain abierto UT-(código de color)OM Ultra Tuff Chain abierto medio UT-(código de color)OL Ultra Tuff Chain abierto largo GCT-(código de color)C Thin Chain cerrado GCT-(código de color)O Thin Chain abierto GCT-(código de color)OL Thin Chain abierto largo OS-1 OrthosepsTM separadores moldeados posteriores OS-2 OrthosepsTM separadores individuales para pacientes SS2 OrthosepsTM separadores radio-opacos RS-2 ResepTM separadores posteriores extra grandes OS-2GCA Separadores anteriores transparentes DS8-2 DurasepsTM separadores de tamaño</p>	<p>color de 15 pies GCC-GLDOL Glenroe - Cadena dorada abierta larga con bobina de color de 15 pies GCC-GLOWBC Glenroe - Cadena azul brillante cerrada con bobina color 15 pies GCC-GLOWBO Glenroe - Cadena azul brillante abierta bobina de color de 15 p. GCC-GLOWBOL Glenroe - Cadena azul brillante abierta larga con bobina color de 15 pies GCC-GLOWBOM Glenroe - Cadena azul brillante abierta media con bobina color de 15 pies GCC-GLOWC Glenroe - Cadena brillante cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-GLOWGC Glenroe - Cadena verde brillante cerrada con bobina color de 15 pies GCC-GLOWGO Glenroe - Cadena verde brillante abierta bobina de color 15 GCC-GLOWGOL Glenroe - Cadena verde abierta larga con bobina de color de 15 pies GCC-GLOWGOM Glenroe - Cadena verde brillante abierta media con bobina color GCC-GLOWO Glenroe - Cadena BRILLANTE ABIERTA con bobina de color de 15 pies GCC-GLOWOL Glenroe - Cadena brillante abierta larga con bobina color de 15 pies GCC-GLOWOO Glenroe - Cadena naranja brillante</p>
--	---	---

EA



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>estándar - 8-day (púrpura) DS8-2S DurasepsTM separadores de tamaño pequeño - 8-day (púrpura) DS-2 DurasepsTM separadores de tamaño estándar - 3-day (naranja) DS-2S DurasepsTM separadores de tamaño pequeño - 3-day (naranja) OS-2XL Separadores Jumbo ESS100 Separadores sueltos - 100 por envase - anteriores (verde) ESS1000 Separadores sueltos - 1000 por envase - anteriores (verdes) ESL100 Separadores sueltos - 100 por envase - posteriores (azules) ESL1000 Separadores sueltos - 1000 por envase - posteriores (azules) ESR100 Separadores sueltos - 100 por envase - radio-opacos (azul oscuro) ESR1000 Separadores sueltos - 1000 por envase - radio-opaco (azul oscuro) ETT-020 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,02" redondo macizo ETH-020 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,020" redondo hueco</p>	<p>abierta con bobina color de 15 pies GCC-GLOWPC Glenroe - Cadena púrpura brillante cerrada con bobina de color de 15 GCC-GLOWPO Glenroe - Cadena púrpura brillante abierta con bobina color de 15 pies GCC-GLOWPOL Glenroe - Cadena púrpura brillante abierta larga con bobina color GCC-GLOWPOM Glenroe - Cadena púrpura brillante abierta media con bobina color GCC-GLOWRO Glenroe - Cadena rojo brillante abierta con bobina color de 15 pies GCC-GLOWROL Glenroe - Cadena rojo brillante abierta larga con bobina color de 15 p. GCC-GOL Glenroe - Cadena gris abierta larga con bobina color de 15 GCC-GRNC Glenroe - Cadena verde cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-GRNO Glenroe - Cadena VERDE ABIERTA con bobina de color de 15 pies GCC-GRNOL Glenroe - Cadena verde abierta larga con bobina de color 15 pies GCC-GRNOM Glenroe - Cadena verde abierta media con bobina de color de 15 pies GCC-HPC Glenroe - Cadena rosada cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-HPOL Glenroe - Cadena rosada abierta larga con bobina de color de 15 pies</p>
--	--	--

EA



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>UTT-020 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,020'' Ultra Tuff redondo macizo ETT-025 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris de 0,025'' redondo macizo ETT-2525 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris de 0,025'' cuadrado macizo ETH-025 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,025'' redondo hueco UTT-025 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,020'' Ultra Tuff redondo macizo ETT-025X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 50' de 0,025'' redondo macizo ETH-025X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 50' de 0,025'' redondo hueco ETT-030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,030'' redondo macizo ETT-3030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25'' de 0,030'' cuadrado macizo ETH-030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,030'' redondo hueco UTT-030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,030'' Ultra Tuff redondo</p>	<p>GCC-HPOM Glenroe - Cadena rosada abierta media con bobina de color de 15 pies GCCJ-AO Glenroe - Cadena amatista abierta con bobina de color de 15 pies GCC-JBC Glenroe - Cadena azul jalea cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-JGO Glenroe - Cadena verde jalea abierta con bobina de color de 15 pies GCCJ-JC Glenroe - Cadena joya jade cerrada con bobina de color 15 GCCJ-JOL Glenroe - Cadena joya jade abierta larga con bobina de color GCC-JPO Glenroe - color jalea púrpura abierta con bobina de color de 15 pies GCCJ-SC Glenroe - Cadena joya zafiro cerrada con bobina de color GCCJ-SO Glenroe - Cadena ZAFIRO ABIERTA con bobina de color de 15 pies GCCJ-SOL Glenroe - Cadena joya zafiro abierta larga con bobina de color GCC-JYO Glenroe - Cadena Amarillo joya abierta con bobina de color 15 p GCC-KC Glenroe - Cadena kiwi cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-LBC Glenroe - Cadena azul clara cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-LBO Glenroe - Cadena AZUL CLARA ABIERTA bobina de color de 15 pies GCC-LBOL Glenroe - Cadena azul clara abierta larga con bobina de color 15 GCC-LBOM Glenroe - Cadena</p>
--	---	---

E
A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

	<p>macizo UTT-035 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,035'' Ultra Tuff redondo macizo ETT-030X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 50' de 0,030'' redondo macizo ETH-030X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 50' de 0,030'' redondo hueco ETTC-020 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,020'' redondo macizo ETHC-020 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,020'' redondo hueco UTTC-020 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,020'' Ultra Tuff redondo macizo ETTC-025 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,025'' redondo macizo ETTC-2525 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25'' de 0,025'' cuadrado macizo ETHC-025 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,025'' redondo hueco UTTC-025 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,025'' Ultra Tuff</p>	<p>azul clara abierta media con bobina de color 15 GCC-LC Glenroe - Cadena lavanda cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-LGC Glenroe - Cadena gris clara cerrada con bobina de color 15 GCC-LGO Glenroe - Cadena gris clara abierta con bobina de color de 15 pies GCC-LGOL Glenroe - Cadena gris clara abierta larga con bobina de color GGG-LGRNO Glenroe - Cadena verde claro abierta con bobina de color 15 p GCC-LO Glenroe - Cadena LAVANDA ABIERTA con bobina de color de 15 pies GCC-LOL Glenroe - Cadena lavanda abierta larga con bobina de color 15 GCC-LOM Glenroe - Cadena lavanda abierta media con bobina de color 15 GCC-LPC Glenroe - Cadena rosa clara cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-LPO Glenroe - Cadena rosa clara abierta con bobina de color de 15 pies GCC-LPOL Glenroe - rosa clara abierta larga con bobina de color de 15 pies GCC-LPOM Glenroe - Cadena rosa clara abierta media con bobina de color 15' GCC-LYO Glenroe - Cadena amarilla clara abierta con bobina de color 15' GCCGM-BC Glenroe - Cadena azul metálica cerrada con bobina de color GCCM-BLKO Glenroe - Cadena negra metálica</p>
--	--	---

E



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

	<p>redondo macizo ETTC-025X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 50' de 0,030" redondo macizo ETHC-025X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 50' de 0,025" redondo hueco ETTC-030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,0320" redondo macizo ETTC-3030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,030" redondo macizo ETHC-030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,030" redondo hueco UTTC-030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,030" Ultra Tuff redondo macizo UTTC-035 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,035" Ultra Tuff redondo macizo ETTC-030X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 50' de 0,030" redondo macizo ETHC-030X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 50' de 0,030" redondo hueco AWS-18 (código de color) GlenroeTM, funda de</p>	<p>abierta con bobina de color GCCM-BLKOL Glenroe - Cadena negra metálica abierta larga con bobina de color GCCM-BO Glenroe - Cadena AZUL METÁLICA ABIERTA con bobina de color de 15' GCCM-BOL Glenroe - Cadena azul metálica abierta larga con bobina de color GCCM-BOM Glenroe - Cadena azul metálica abierta media con bobina de color 15 GCC-MC Glenroe - Cadena marrón cerrada con bobina de color de 15 pies GCCM-CO Glenroe - Cadena cobre abierta con bobina de color de 15 pies GCCM-GRNO Glenroe - Cadena verde metálico abierta con bobina color. 15 pies GCCM-GRNOL Glenroe - Cadena verde metálico abierta larga bobina de color GCCM-MO Glenroe - Cadena marrón abierta con bobina de color de 15 pies GCCM-OGO Glenroe - Cadena verde marino metálica abierta con bobina color. GCC-MOL Glenroe - Cadena marrón abierta larga con bobina de color 15 GCCM-PC Glenroe - Cadena púrpura metálica cerrada con bobina de color ea. GCCM-PO Glenroe - Cadena púrpura metálica abierta con bobina de color ea. GCCM-POL Glenroe - Cadena púrpura abierta larga con bobina de color ea. GCCM-POM Glenroe - Cadena</p>
--	--	---

E. A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>arco, diámetro 0,018" AWS-27 (código de color) Glenroe™, funda de arco, diámetro 0,027" LBT-C Glenroe™, tubos para placas labio-activas, transparentes LBT Glenroe™, tubos para placas labio-activas, grises LBT-TC Glenroe™, tubos para placas labio-activas, color diente opaco ST-045 Tubo termorretráctil TM-1 Tuff Link™, módulos elastoméricos - 4,3 mm, grises TM-1C Tuff Link™, módulos elastoméricos - 4,3 mm, transparentes TM-2 Tuff Link™, módulos elastoméricos - 6,0 mm, grises TM-2C Tuff Link™, módulos elastoméricos - 6,0 mm, transparentes TM-3 Tuff Link™, módulos elastoméricos - 8,5 mm, grises TM-3C Tuff Link™, módulos elastoméricos - 8,5 mm, transparentes TM-4 Tuff Link™, módulos elastoméricos - 11,5 mm, grises TM-4C Tuff Link™, módulos elastoméricos - 11,5 mm, transparentes TM-5ª Tuff Link™, módulos elastoméricos - diferentes tamaños, grises TM-5AC Tuff Link™, módulos elastoméricos - diferentes tamaños,</p>	<p>púrpura metálica abierta media con bobina col. 15 GCCM-RC Glenroe - Cadena rojo metálico con bobina de color GCCM-RO Glenroe - Cadena rojo metálica abierta con bobina de color de 15 pies GCC-NBC Glenroe - Cadena azul marino cerrada con bobina de color 15 p GCC-NBO Glenroe - Cadena azul marino abierta bobina de color de 15 pies GCC-NBOL Glenroe - Cadena azul marino abierta larga con bobina de color GCC-NBOM Glenroe - Cadena azul marino abierta media con bobina de color GCC-OC Glenroe - Cadena naranja cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-OO Glenroe - Cadena naranja abierta con bobina de color de 15 pies GCC-OOL Glenroe - Cadena naranja abierta larga con bobina de color de 15 pies GCC-OOM Glenroe - Cadena naranja abierta media con bobina de color 15 p GCC-ORCHC Glenroe - Cadena orquídea cerrada con bobina de color 15 GCC-ORCHO Glenroe - Cadena orquídea abierta con bobina de color 15 GCC-PC Glenroe - Cadena púrpura cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-PEARLBC Glenroe - Cadena azul perla cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-PEARLBO Glenroe -</p>
--	--	---

E
A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. F.

	<p>transparentes RW-1 Cuña de rotación, gris estándar RW-1C Cuña de rotación, transparente estándar RW-2 Cuña de rotación, gris intenso RW-2C Cuña de rotación, transparente intenso RW-KIT Kit de introducción de la cuña de rotación (50 por tamaño) gris RW-KITC Kit de introducción de la cuña de rotación (50 por tamaño) transparente PET(código de color)1000SB Lazos elastoméricos estándar sueltos de 0,110" granel de 1000 lazos PET(código de color)5000SB Lazos elastoméricos estándar sueltos de 0,110" granel de 5000 lazos PET(código de color)1000B Lazos elastoméricos estándar sueltos de 0,120" granel de 1000 lazos PET(código de color)5000B Lazos elastoméricos estándar sueltos de 0,120" granel de 5000 lazos PETUS(código de color)1000SB Lazos elastoméricos suelos Ultra Slide de 0,110" granel de 1000</p>	<p>Cadena azul perla abierta con bobina de color de 15 pies GCC-PEARLBOM Cadena azul perla abierta mediana cadena con bobina de color GCC-PEARLC Glenroe - Cadena perla cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-PEARLGO Glenroe - Cadena verde perla abierta con bobina de color de 15 pies GCC-PEARLGOM Cadena verde perla abierta media con bobina de color GCC-PEARLO Glenroe - Cadena perla abierta con bobina de color de 15 pies GCC-PEARLOL Glenroe - Cadena perla abierta larga con bobina de color de 15 pies GCC-PEARLOM Glenroe - Cadena perla abierta media con bobina de color de 15 pies GCC-PO Glenroe - Cadena PÚRPURA ABIERTA con bobina de color de 15 pies GCC-POL Glenroe - Cadena púrpura abierta larga con bobina de color 15 p GCC-POM Glenroe - Cadena púrpura abierta media con bobina de color de 15 pies GCC-RBO Glenroe - Cadena azul real abierta con bobina de color de 15 pies GCC-RBOL Glenroe - Cadena azul real abierta larga con bobina de color 15 p GCC-RC Glenroe - Cadena roja cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-RO Glenroe - Cadena roja abierta con bobina de</p>
--	--	--

C *A*



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

	<p>lazos PETUS(código de color)5000SB Lazos elastoméricos sueltos Ultra Slide de 0,110" granel de 5000 lazos PETUS(código de color)1000B Lazos elastoméricos sueltos Ultra Slide de 0,120" granel de 1000 lazos PETUS(código de color)5000B Lazos elastoméricos sueltos Ultra Slide de 0,120" granel de 5000 lazos PETMC1000SB Lazos elastoméricos sueltos multi color de 0,110" granel de 1000 lazos PETMC5000SB Lazos elastoméricos sueltos multi color de 0,110" granel de 5000 lazos PETMC1000B Lazos elastoméricos sueltos multi color de 0,120" granel de 1000 lazos PETMC5000B Lazos elastoméricos sueltos multi color de 0,120" granel de 5000 lazos PET(código de color)1000S Lazos elastoméricos envainados estándar de 0,110" vainas de 50 lazos PET(código de color)1000 Lazos elastoméricos envainados estándar de 0,120" vainas de 50 lazos lazos PETUS(código de</p>	<p>color de 15 pies GCC-ROL Glenroe - Cadena roja abierta larga con bobina de color de 15 pies GCC-ROM Glenroe - Cadena roja abierta media con bobina de color de 15 pies GCC-SGC Glenroe - Cadena verde primavera cerrada con bobina de color GCC-SGO Glenroe verde primavera abierta con bobina de color de 15 pies GCC-SGOL Glenroe - Cadena verde primavera abierta larga con bobina coloreada. GCC-SGOM Glenroe - Cadena verde primavera abierta media con bobina color. GCC-SILC Glenroe - Cadena plateada cerrada con bobina de color 15 GCC-SILO Glenroe - Cadena plateada abierta con bobina de color 15 GCC-SILOL Glenroe - Cadena plateada abierta larga con bobina de color 15 GCC-SILOM Glenroe - Cadena plateada abierta media con bobina color. 15 pies GCC-SKYC Glenroe - Cadena azul cielo cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-SKYO Glenroe - Cadena AZUL CIELO ABIERTA con bobina de color de 15' GCC-SKYOL Glenroe - Cadena azul cielo abierta larga con bobina de color de 15 pies GCC-SKYOM Glenroe - Cadena azul cielo abierta media con bobina de color 15 GCC-TC Glenroe - Cadena verde azulada cerrada con bobina de color 15</p>
--	--	--

E ↗



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>color)1000S Lazos elastoméricos envainados Ultra Slide de 0,110" 20 vainas de 50 lazos PETUS(código de color)1000 Lazos elastoméricos envainados Ultra Slide de 0,120" 20 vainas de 50 lazos PETMC1000S Lazos elastoméricos envainados multi color de 0,110" 20 vainas de 50 lazos PETMC1000 Lazos elastoméricos envainados multi color de 0,120" 20 vainas de 50 lazos CKE-KIT1A WyredTM, kit de expansión de mejilla pequeño para autoclave CKE-KIT1S WyredTM, kit de expansión de mejilla pequeño esterilizable con calor CKE-KIT1D WyredTM, kit de expansión de mejilla pequeño esterilizable con frío CKE-KIT2A WyredTM, kit de expansión de mejilla mediano para autoclave CKE-KIT2S WyredTM, kit de expansión de mejilla mediano esterilizable con calor CKE-KIT2D WyredTM, kit de expansión de mejilla pequeño esterilizable con frío CKE-1ª WyredTM, expansión de mejilla refractaria sólo pequeña para autoclave CKE-1S WyredTM, expansión de mejilla refractaria sólo pequeña</p>	<p>GCC-TCC Glenroe - Cadena color diente cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-TCO Glenroe - Cadena color diente abierta con bobina de color de 15 pies GCC-TCOL Glenroe - Cadena color diente abierta larga con bobina de color 15 GCC-TCOM Glenroe - Cadena color diente abierta media con bobina color. 15 p GCC-TGNO Glenroe - Cadena mandarina abierta con bobina de color de 15 pies GCC-TO Glenroe - Cadena VERDE AZULADA ABIERTA bobina de color 15 pies GCC-TOL Glenroe - Cadena verde azulada abierta larga con bobina de color 15 GCC-VC Glenroe - Cadena violeta cerrada con bobina de color 15 GCC-VO Glenroe - Cadena violeta abierta con bobina de color de 15 pies GCC-VOL Glenroe - Cadena violeta abierta larga con bobina de color 15 GCC-VOM Glenroe - Cadena violeta abierta media con bobina de color 15 GCC-WC Glenroe - Cadena blanca cerrada con bobina de color de 15 pies GCC-WO Glenroe - Cadena blanca abierta con bobina de color de 15 pies GCC-WOL Glenroe - Cadena blanca abierta larga con bobina de color de 15 pies GCC-WOM Glenroe - Cadena blanca abierta media con bobina de color 15 p GCC-YC Glenroe - Cadena</p>
--	---	---

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

esterilizable con calor CKE-1D WyredTM, expansión de mejilla refractaria sólo pequeña esterilizable con frío CKE-2ª WyredTM, expansión de mejilla refractaria sólo mediana para autoclave CKE-2S WyredTM, expansión de mejilla refractaria sólo mediana esterilizable con calor CKE-2D WyredTM, expansión de mejilla refractaria sólo mediana esterilizable con frío CKE-KITWIRE Pieza de alambre de la expansión CKE-ENDCAPS Capsula externa del alambre de la expansión PCKE-0 Spand EzzTM, expansión de mejilla pequeña para autoclave PCKE-0S Spand EzzTM, expansión de mejilla pequeña esterilizable con calor PCKE-0D Spand EzzTM, expansión de mejilla pequeña descartable PCKE-1 Spand EzzTM, expansión de mejilla mediana para autoclave PCKE-1S Spand EzzTM, expansión de mejilla mediana esterilizable con calor PCKE-1D Spand EzzTM, expansión de mejilla mediana descartable PCKE-2 Spand EzzTM, expansión de mejilla grande para autoclave	amarilla cerrada con bobina de color 15 GCC-YO Glenroe - Cadena AMARILLA ABIERTA con bobina de color de 15 pies GCC-YOL Glenroe - Cadena amarilla abierta larga con bobina de color 15 GCC-YOM Glenroe - Cadena amarilla abierta media con bobina de color 15 1APL35S5 0,035", 5" cuadrado 1APL35S125 0,035", 125mm cuadrado 1APL35C125 0,035", 125mm circular 1APL35C120 0,035", 120mm circular 1APL40S5 0,040", 5" cuadrado 1APL40S125 0,040", 125mm cuadrado 1APL40C125 0,040", 125mm circular 1APL40C120 0,040", 120mm circular 40034 SpaceFile™ IPR tiras, doble cara, surtidas PK9 40034-LS SpaceFile™ IPR tiras, lado izquierdo, surtidas PK9 40034-RS SpaceFile™ IPA tiras, lado derecho, surtidas PK9 40035-BL SpaceFile™ IPR tiras, doble cara, mediana/azul PK8 40035-BLK SpaceFile™ IPR tiras, doble cara, X abrasiva/negra PK8 40035-CS SpaceFile™ IPR tiras-Coping, acerrada/dorado PK8 40035-G SpaceFile™ IPR tiras, doble cara, pulido/gris
---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

PCKE-2S Spand EzzTM, expansión de mejilla grande esterilizable con calor PCKE-2D Spand EzzTM, expansión de mejilla grande descartable PCKE-0TYS Spand EzzTM, expansión de mejilla pequeña/transparente amarilla PCKE-1TBS Spand EzzTM, expansión de mejilla mediana/transparente azul PCKE-2TRS Spand EzzTM, expansión de mejilla mediana/transparente roja EXO-1 Expansión de mejilla extra oral pequeña/con lengüetas para autoclave EXO-1S Expansión de mejilla extra oral pequeña/con lengüetas esterilizable con calor EXO-1D Expansión de mejilla extra oral pequeña/con lengüetas descartable EXO-1NT Expansión de mejilla extra oral pequeña/sin lengüetas para autoclave EXO-1SNT Expansión de mejilla extra oral pequeña/sin lengüetas esterilizable con calor EXO-1DNT Expansión de mejilla extra oral pequeña/sin lengüetas descartable EXO-2 Expansión de	PK8 40035-GR SpaceFile™ IPR tiras, doble cara, abrasiva/verde PK8 40035-LS-BL SpaceFile™ IPR tiras, lado izquierdo, mediana/azul PK8 40035-LS-BLK SpaceFile™ IPR tiras, lado izquierdo, X abrasiva/negra PK8 40035-LS-G SpaceFile™ IPA tiras, lado izquierdo, pulido/gris PK8 40035-LS-GR SpaceFile™ IPR tiras, lado izquierdo, abrasiva/verde PK8 40035-LS-P Space File™ IPR tiras, lado izquierdo, terminación/ púrpura PK8 40035-LS-R SpaceFile™ IPR tiras, lado izquierdo, fina/roja PK8 40035-LS-W SpaceFile™ IPR tiras, lado izquierdo, XX fina/blanca PK8 40035•LS-Y SpaceFile™ IPR tiras, lado izquierdo, X fina/amarilla PK8 40035-P SpaceFile™ IPR tiras, doble cara, terminación/púrpura PK8 40035-R SpaceFile™ IPR tiras, doble cara, fina/roja PK8 40035-RS-BL SpaceFile™ IPR tiras, lado derecho, mediana/azul PK8 40035-RS-BLK SpaceFile™ IPR tiras, lado derecho, X abrasiva/negra PK8 40035-RS-G SpaceFile™ IPR tiras, lado derecho, pulido/gris PK8 40035-RS-GR SpaceFile™ IPR tiras, lado derecho, abrasiva/verde PK8
---	---

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	mejilla extra oral normal/con lengüetas para autoclave EXO-2S Expansión de mejilla extra oral normal/con lengüetas esterilizable con calor EXO-2D Expansión de mejilla extra oral normal/con lengüetas descartable EXO-2NT Expansión de mejilla extra oral normal/sin lengüetas para autoclave EXO-2SNT Expansión de mejilla extra oral normal/sin lengüetas esterilizable con calor EXO-2DNT Expansión de mejilla extra oral normal/sin lengüetas descartable SE-PCKE Sistema de eliminación de saliva BPR-1D Retractor Pedo esterilizable con frío BPR-1ª Retractor Pedo para autoclave BPR-1S Retractor Pedo esterilizable con calor BPR-KITD Kit retractor (2 Pedo y 2 Grandes) esterilizable con frío BPR-KITA Kit retractor (2 Pedo y 2 Grandes) para autoclave BPR-KITS Kit retractor (2 Pedo y 2 Grandes) esterilizable con calor BPR-2D Retractor grande esterilizable con frío BPR-2ª Retractor grande para autoclave BPR-2S Retractor grande esterilizable con clor	40035-RS-P SpaceFile™ IPR tiras, lado derecho, terminación/púrpura PK8 40035-RS-R SpaceFile™ IPR tiras, lado derecho, fina/roja PK8 40035-RS-W SpaceFile™ IPR tiras, lado derecho, XX fina/blanca PKB 40035-RS-Y SpaceFile™ IPR tiras, lado derecho, X fina/amarilla PK8 40035-W SpaceFile™ IPR tiras, doble cara, XX fina/blanca PK8 40035-Y SpaceFile™ IPR tiras, doble cara, X fina/amarilla PK8 JT -1(código de color) Lazos "S" - Tono brillante TT-1(código de color) Lazos "S" - Colores estándar TTM-1(código de color) Lazos "S" - Colores metálicos JT-3(código de color)Lazos "O" - Tono brillante TT-3(código de color)Lazos "O" - Colores estándar TTM-3(código de color)Lazos "O" - Colores metálicos JTS-2(código de color)Lazos individuales para pacientes 0,110" de diámetro - Tono brillante TTS-2(código de color)Lazos individuales para pacientes 0,110" de diámetro - Col. estándar TTSM-2(código de color)Lazos individuales para pacientes 0,110" de diámetro - Col. metálicos JT-2(código de color)Lazos individuales para pacientes 0,120" de diámetro -Tono brillante
--	---	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

	<p>PHOTO-2 Retractor grande de dos piezas para autoclave PHOTO-2D Retractor grande de dos piezas descartable PHOTO-1 Retractor pequeño de dos piezas para autoclave PHOTO-1D Retractor descartable pequeño de dos piezas TB-DS Bloque lingual descartable pequeño aroma a cerezas TBU-DS Bloque lingual descartable pequeño sin aroma TB-D Bloque lingual descartable mediano aroma a cerezas TBU-D Bloque lingual descartable mediano sin aroma. TB-SSDS Bloque lingual descartable súper blando pequeño TB-SSD Bloque lingual descartable súper blando regular. SE-3 Eyectores de saliva Glenroe™ AT-3 Tubos adaptadores Glenroe™ SBMC Cajas para pacientes Orthosil™ SB-P Protector de brackets Orthosil™ WB (código de color) Cera para aliviar al paciente aromatizada/brillante/sólida WB-S (código de color) Cera para aliviar al paciente con destellos</p>	<p>TT-2(código de color) Lazos individuales para pacientes 0,120" de diámetro - Col. estándar TTM-2(código de color) Lazos individuales para pacientes 0,120" de diámetro - Col. metálicos TT-2MC Lazos multicolores para pacientes 0,120" de diámetro - Estándar TTM-2MC Lazos multicolores para pacientes 0,120" de diámetro - Metálico JT-2MC Lazos multicolores para pacientes 0,120" de diámetro - Tono brillante TTF-2MC Lazos multicolores para pacientes 0,120" de diámetro - Fluorescente TT-2GLOWMC Lazos multicolores para pacientes 0,120" de diámetro - Brillante TT-2JMC Lazos multicolores para pacientes 0,120" de diámetro - Jalea TT-2MMC Lazos multicolores para pacientes 0,120" de diámetro - Masculino JT-4(código de color) Lazos para pacientes individuales mini - Tono brillante - TT-4(código de color) Lazos para pacientes individuales mini - Colores estándar TTM-4(código de color) Lazos para pacientes individuales mini - Colores metálicos TT-4MC Lazos multicolores mini para pacientes 0,120" de diámetro - Estándar TTM-4MC Lazos multicolores mini para pacientes 0,120" de diámetro - Metálico JT-4MC Lazos multicolores mini para pacientes 0,120" de</p>
--	---	---

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>WB-TS (código de color) Cera para el alivio del paciente tropical con destellos TGPS-(código de color)Protector bucal respirable Tuff Guard™ con tira, paquete de 10 TGP-(código de color) Protector bucal respirable Tuff Guard™ sin tira, paquete de 10. TG-(código de color)Protector bucal respirable Tuff Guard™ sin tira individual con caja. TGD-(código de color) Protector bucal respirable Tuff Guard™ sin tira, caja dispensadora de 5. MGS-(código de color)Protector deportivo súper con tira regular SMGS-(código de color)Protector deportivo súper con tira, pequeño PMGS-(código de color)Protector deportivo súper con tira, pediátrico MG-(código de color) Protector deportivo súper sin tira, regular SMG-(código de color)Protector deportivo súper sin tira, pequeño PMG-(código de color)Protector deportivo súper sin tira, pediátrico. EB25 Oblea terapéutica para mordida Elasti™ transparente/cereza EB25G Oblea terapéutica para mordida Elasti™ violeta/uva EB-25PBG Oblea</p>	<p>diámetro - Brillante TTF-4MC Lazos multicolores mini para pacientes 0,120" de diámetro - Fluoresc. TT-4 GLOWMC Lazos multicolores mini para pacientes 0,120" de diámetro - Brillante TT-4JMC Lazos multicolores mini para pacientes 0,120" de diámetro - Brillante TT-4MMC Lazos multicolores mini para pacientes 0,120" de diámetro - Masculino TTUS-1(código de color) Ultra Slide™ lazos de ligadura - lazos "S" TTUS-2(código de color)Ultra Slide™ lazos de ligaduras - lazos individuales diámetro 120" TTUS-4(código de color)Ultra Slide™ lazos de ligadura - Mini lazos para pacientes GC-(código de color)C Tuff Chain cerrada GC-(código de color)O Tuff Chain abierta GC-(código de color)OM Tuff Chain abierta medio GC-(código de color)OL Tuff Chain abierta largo GCJ-(código de color)C Tuff Chain cerrada - brillante GCJ-(código de color)O Tuff Chain abierta - brillante GCJ-(código de color)OM Tuff Chain abierta mediana - brillante GCJ-(código de color)OL Tuff Chain abierta larga - brillante GCM-(código de color)C Tuff Chain cerrada - metálico GCM-(código de color)O Tuff Chain abierta - metálico GCM-(código de color)OM</p>
--	---	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>terapéutica para mordida Elasti™ rosa/chicle EB-25M Oblea terapéutica para mordida Elasti™ verde/menta S2-BSBG Tablilla para bruxismo "S" rosa/chicle S2-BS Tablilla para bruxismo "S" transparente. HC-2 Almohadillas para ganchos LG-1 Protector ortolabial UNL731 Elásticos ultra sin látex 1/8"/3,2 mm, livianos 2,5 onzas UNL733 Elásticos ultra sin látex 1/8"/3,2 mm medianos 3,5 onzas UNL735 Elásticos ultra sin látex 1/8"/3,2 mm pesados 4,5 onzas UNL736 Elásticos ultra sin látex 1/8"/3,2 mm extrapesados, 6 onzas UNL741 Elásticos ultra sin látex 3/16"/4,8 mm livianos, 2,5 onzas UNL743 Elásticos ultra sin látex 3/16"/4,8 mm medianos, 3,5 onzas UNL745 Elásticos ultra sin látex 3/16"/4,8 mm pesados, 4,5 onzas UNL746 Elásticos ultra sin látex 3/16"/4,8 mm extrapesados, 6 onzas UNL751 Elásticos ultra sin látex 1/4"/6,4 mm livianos, 2,5 onzas UNL753 Elásticos ultra sin látex 1/4"/6,4 mm medianos 3,5 onzas UNL755 Elásticos ultra sin látex 1/4"/6,4 mm pesados, 4,5 onzas</p>	<p>Tuff Chain abierta Medio-metálico GCM-(código de color)OL Tuff Chain abierta Largo-metálico GCUS-(código de color)C Ultra Slide Chain cerrada GCUS-(código de color)O Ultra Slide Chain abierta GCUS-(código de color)OM Ultra Slide Chain abierta mediana GCUS-(código de color)OL Ultra Slide Chain abierta largo UT-(código de color)C Ultra Tuff Chain cerrada UT-(código de color)O Ultra Tuff Chain abierta UT-(código de color)OM Ultra Tuff Chain abierta media UT-(código de color)OL Ultra Tuff Chain abierta larga GCT-(código de color)C Thin Chain cerrada GCT-(código de color)O Thin Chain abierta GCT-(código de color)OL Thin Chain abierta larga OS-1 Orthoseps™ separadores posteriores moldeados SS2 Orthoseps™ separadores radiopacos OS-2GCA Separadores anteriores transparentes DS8-2 Duraseps™ separadores tamaño estandarizado - 8-días (púrpura) DS8-2S Duraseps™ separadores pequeños - 8-días (púrpura) DS-2 Duraseps™ separadores tamaño estándar - 3-días(anaranjado) DS-2S Duraseps™ separadores pequeños - 3-</p>
--	---	---

E
A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

UNL756 Elásticos ultra sin látex 1/4"/6,4 mm extrapesados, 6 onzas	días (anaranjado)
UNL761 Elásticos ultra sin látex 5/16"/7,9 mm livianos, 2,5 onzas	ESS100 Separadores sueltos - 100 por paquete - anteriores (verde)
UNL763 Elásticos ultra sin látex 5/16"/7,9 mm medianos, 3,5 onzas	ESS1000 Separadores sueltos - 1000 por paquete - anteriores (verde)
UNL765 Elásticos ultra sin látex 5/16"/7,9 mm pesados, 4,5 onzas	ESL100 Separadores sueltos - 100 por paquete - posteriores (azul)
UNL766 Elásticos ultra sin látex 5/16"/7,9 mm extrapesados, 6 onzas	ESL1000 Separadores sueltos - 1000 por paquete - posteriores (azul)
UNL771 Elásticos ultra sin látex 3/8"/9,5 mm livianos, 2,5 onzas	ESR100 Separadores sueltos - 100 por paquete - radiopaco (azul oscuro)
UNL773 Elásticos ultra sin látex 3/8"/9,5 mm medianos 3,5 onzas	ESR1000 Separadores sueltos - 1000 por paquete - radiopaco (azul oscuro)
UNL775 Elásticos ultra sin látex 3/8"/9,5 mm pesados 4,5 onzas	ETT-020 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25', gris, redondo sólido de 0,02"
UNL776 Elásticos ultra sin látex 3/8"/9,5 mm extrapesados, 6 onzas	ETH-020 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25' gris, redondo hueco de 0,020"
G731 Elásticos de látex 1/8"/3,2 mm livianos 2,5 onzas	UTT-020 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25' gris, redondo sólido de 0,020"
G733 Elásticos de látex 1/8"/3,2 mm medianos, 3,5 onzas	ETT-025 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25' gris, redondo sólido de 0,025"
G735 Elásticos de látex 1/8"/3,2 mm pesados, 4,5 onzas	ETT-2525 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25' gris, cuadrado sólido de 0,025"
G736 Elásticos de látex 1/8"/3,2 mm extrapesados, 6 onzas	ETH-025 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25' gris, redondo hueco de 0,025"
G741 Elásticos de látex 3/16"/4,8 mm livianos, 2,5 onzas	UTT-025 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25' gris, redondo sólido de 0,025"
G743 Elásticos de látex 3/16"/4,8 mm medianos, 3,5 onzas	ETT-025X50FT Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 50' gris, redondo sólido de 0,025"
G745 Elásticos de látex	

Σ ↙



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

3/16"/4,8 mm pesados, 4,5 onzas G746 Elásticos de látex 3/16"/4,8 mm extrapesados, 6 onzas G751 Elásticos de látex 1/4"/6,4 mm livianos 2,5 onzas G753 Elásticos de látex 1/4"/6,4 mm medianos 3,5 onzas G755 Elásticos de látex 1/4"/6,4 mm pesados, 4,5 onzas G756 Elásticos de látex 1/4"/6,4 mm extrapesados, 6 onzas G761 Elásticos de látex 5/16"/7,9 mm livianos 2,5 onzas G763 Elásticos de látex 5/16"/7,9 mm medianos, 3,5 onzas G765 Elásticos de látex 5/16"/7,9 mm pesados, 4,5 onzas G766 Elásticos de látex 5/16"/7,9 mm extrapesados, 6 onzas G771 Elásticos de látex 3/8"/9,5 mm livianos 2,5 onzas G773 Elásticos de látex 3/8"/9,5 mm medianos, 3,5 onzas G775 Elásticos de látex 3/8"/9,5 mm pesados, 4,5 onzas G776 Elásticos de látex 3/8"/9,5 mm extrapesados, 6 onzas G892 Elásticos de neón 1/8"/3,2 mm livianos, 2,5 onzas G894 Elásticos de neón 1/8"/3,2 mm medianos,	ETH-025X50FT Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 50' gris, redondo hueco de 0,025" ETT-030 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25' gris, redondo sólido de 0,030" ETT-3030 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25' gris, cuadrado sólido de 0,030" ETH-030 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25' gris, redondo hueco de 0,030" UTT -030 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25' gris, redondo sólido de 0,030" UTT -035 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25' gris, redondo sólido de 0,035" ETT-030X50FT Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 50' gris, redondo sólido de 0,030" ETH-030X50FT Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 50' gris, redondo hueco de 0,030" ETTC-020 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25' gris, redondo sólido de 0,020" ETHC-020 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25' trans., redondo hueco de 0,020" UTTC-020 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25' trans., redondo sólido de 0,020" ETTC-025 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25' trans., redondo sólido de 0,025" ETTC-2525 Ultra TuftTM hilo elastomérico - bobina 25' trans., cuadrado sólido de
--	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>3,5 onzas G896 Elásticos de neón 1/8"/3,2 mm pesados, 4,5 onzas G898 Elásticos de neón 1/8"/3,2 mm extrapesados, 6 onzas G900 Elásticos de neón 3/16"/4,8 mm livianos, 2,5 onzas G902 Elásticos de neón 3/16"/4,8 mm medianos, 3,5 onzas G904 Elásticos de neón 3/16"/4,8 mm pesados, 4,5 onzas G906 Elásticos de neón 3/16"/4,8 mm extrapesados, 6 onzas G910 Elásticos de neón 1/4"/6,4 mm livianos 2,5 onzas. G912 Elásticos de neón 1/4"/6,4 mm medianos 3,5 onzas G914 Elásticos de neón 1/4"/6,4 mm pesados, 4,5 onzas G916 Elásticos de neón 1/4"/6,4 mm extrapesados, 6 onzas G920 Elásticos de neón 5/16"/7,9 mm livianos, 2,5 onzas G922 Elásticos de neón 5/16"/7,9 mm medianos, 3,5 onzas G924 Elásticos de neón 5/16"/7,9 mm pesados, 4,5 onzas G926 Elásticos de neón 5/16"/7,9 mm extrapesados, 6 onzas G928 Elásticos de neón 3/8"/9,5 mm livianos, 2,5 onzas</p>	<p>0,025" ETHC-025 Ultra Tuft™ hilo elastomérico - bobina 25' trans., redondo hueco de 0,025" UTTC-025 Ultra Tuft™ hilo elastomérico - bobina 25' trans., redondo sólido de 0,025" ETTC-025X50FT Ultra Tuft™ hilo elastomérico - bobina 50' trans., redondo sólido de 0,025" ETHC-025X50FT Ultra Tuft™ hilo elastomérico - bobina 50' trans., redondo hueco de 0,025" ETTC-030 Ultra Tuft™ hilo elastomérico - bobina 25' trans., redondo sólido de 0,030" ETTC-3030 Ultra Tuft™ hilo elastomérico - bobina 25' trans., redondo sólido de 0,030" ETHC-030 Ultra Tuft™ hilo elastomérico - bobina 25' trans., redondo hueco de 0,030" UTTC-030 Ultra Tuft™ hilo elastomérico - bobina 25' trans., redondo sólido de 0,030" UTTC-035 Ultra Tuft™ hilo elastomérico - bobina 25' trans., redondo sólido de 0,035" ETTC-030X50FT Ultra Tuft™ hilo elastomérico - bobina 50' trans., redondo sólido de 0,030" ETHC-030X50FT Ultra Tuft™ hilo elastomérico - bobina 50' trans., redondo hueco de 0,030" AWS-18(código de color)</p>
--	--	---

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>G930 Elásticos de neón 3/8"/9,5 mm medianos, 3,5 onzas G932 Elásticos de neón 3/8"/9,5 mm pesados, 4,5 onzas G934 Elásticos de neón 3/8"/9,5 mm extrapesados, 6 onzas TT-5 (código de color) Lazos elastoméricos para ligaduras Tuff Stick G457 Elásticos de látex oral extra 1/4" 8 onzas G456 Elásticos de látex oral extra 1/4" 16 onzas G467 Elásticos de látex oral extra 5/16" 8 onzas G465 Elásticos de látex oral extra 5/16" 14 onzas G466 Elásticos de látex oral extra 5/16" 16 onzas. G474 Elásticos de látex oral extra 3/8", 8 onzas G475 Elásticos de látex oral extra 3/8", 14 onzas G476 Elásticos de látex oral extra 3/8", 16 onzas G484 Elásticos de látex oral extra 1/2", 8 onzas G485 Elásticos de látex oral extra 1/2", 14 onzas G486 Elásticos de látex oral extra 1/2", 16 onzas EP- (código de color) Colocador Elasti™ colores estándares y aromatizados EP-T (código de color) Colocador Elasti™ colores tropicales EP-100 Colocador Elasti™ colores vívidos, multienvase. IMP-100 Protector de</p>	<p>Glenroe™ funda para arco de alambre, diámetro 0,018" AWS-27(código de color) Glenroe™ funda para arco de alambre, diámetro 0,027" LBT-C Glenroe™ protector de labios - transparente LBT Glenroe™ protector de labios - gris LBT-TC Glenroe™ protector de labios - color diente opaco ST-045 Tubo contraíble TM-1 Tuff Link™ módulos elastoméricos - gris de 4,3mm TM-1C TuffLink™ módulos elastoméricos - transparente de 4,3mm TM-2 TuffLink™ módulos elastoméricos - gris de 6,0mm TM-2C Tuff Link™ módulos elastoméricos - transparente de 6,0mm TM-3 TuffLink™ módulos elastoméricos - gris de 8,5mm TM-3C Tuff Link™ módulos elastoméricos - transparente de 8,5mm TM-4 Tuff Link™ módulos elastoméricos - gris de 11,5 TM-4C TuffLink™ módulos elastoméricos - transparente de 11,5 TM-5A TuffLink™ módulos elastoméricos - tamaños surtidos, gris TM-5AC TuffLink™ módulos elastoméricos - tamaños surtidos, transparente RW-1 Cuña de rotación estándar gris RW-1C Cuña de rotación estándar transparente RW-2 Cuña de rotación</p>
--	--	--

Handwritten signature or initials



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	impresiones ERU118R Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco central maxilar de prescripción Roth, Línea económica ERU122R Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco central maxilar de prescripción Roth, Línea económica ERU118L Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco central maxilar de prescripción Roth, Línea económica ERU122L Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco central maxilar de prescripción Roth, Línea económica ERU218R Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco lateral maxilar de prescripción Roth, Línea económica ERU222R Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco lateral maxilar de prescripción Roth, Línea económica ERU218L Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco lateral maxilar de prescripción Roth, Línea económica ERU222L Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco lateral maxilar de prescripción Roth, Línea económica ERU318RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco lateral maxilar, canino con gancho, de prescripción	aumentada gris RW-2C Cuña de rotación aumentada transparente RW-KIT Cuña de rotación equipo de introducción (50 por tamaño) gris RW-KITC Cuña de rotación equipo de introducción (50 por tamaño) transparente PET(cód. de color)1000SB Ligaduras elastoméricas sueltas, estándar 0,110", granel, 1000 ligaduras PET(cód. de color)5000SB Ligaduras elastoméricas sueltas, estándar 0,110", granel, 5000 ligaduras PET(cód. de color)1000B Ligaduras elastoméricas sueltas, estándar 0,120", granel, 1000 ligaduras PET(cód. de color)5000B Ligaduras elastoméricas sueltas, estándar 0,120", granel, 5000 ligaduras PETUS(c. de color)1000SB Ligaduras elastoméricas sueltas, ultra deslizantes 0,110", granel, 1000 ligaduras PETUS(c. de color)5000SB Ligaduras elastoméricas sueltas ultra deslizantes 0,110", granel, 5000 ligaduras PETUS (c. de color)1000B Ligaduras elastoméricas sueltas ultra deslizantes 0,120", gran. 1000 ligaduras PETUS(c. de color)5000B Ligaduras elastoméricas sueltas ultra deslizantes 0,120", gran. 5000 ligaduras PETMC1000SB Ligaduras elastoméricas sueltas varios colores 0,110", gran. 1000
--	---	---

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>Roth, Línea económica ERU322RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERU318LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERU322LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERU18BIRHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco maxilar, premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERU22BIRHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco maxilar, premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERU18BILHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco maxilar, premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERU22BILHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco maxilar, premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERL118 Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular,</p>	<p>ligaduras PETMC5000SB Ligaduras elastoméricas sueltas varios colores 0,110", gran. 5000 ligaduras PETMC1000B Ligaduras elastoméricas sueltas varios colores 0,120", gran. 1000 ligaduras PETMC5000B Ligaduras elastoméricas sueltas varios colores 0,120", gran. 5000 ligaduras PET(cód. de color)1000S Ligaduras elastoméricas en varillas, estándar de 0,110", 20 varillas de 50 ligaduras PET(cód. de color)1000 Ligaduras elastoméricas en varillas, estándar de 0,120", 20 varillas de 50 ligaduras PETMC1000S Ligaduras elastoméricas en varillas, varios colores de 0,110", 20 varillas de 50 ligaduras PETMC1000 Ligaduras elastoméricas en varillas, varios colores de 0,120", 20 varillas 50 ligaduras CKE-KITWIRE Pieza de expansión de alambre CKE-ENDCAPS Tapas terminales del retractor de alambre TB-DS Bloqueador de lengua pequeño, descartable, sabor cereza TBU-DS Bloqueador de lengua pequeño, descartable, sin sabor TB-D Bloqueador de lengua mediano, descartable, sabor cereza TBU-D Bloqueador de lengua mediano, descartable, sin sabor</p>
--	---	---

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>anterior inferior, de prescripción Roth, Línea económica ERL122 Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, anterior inferior, de prescripción Roth; Línea económica ERL318RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERL322RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERL318LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERL322LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERL418RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERL422RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea</p>	<p>TB-SSDS Bloqueador de lengua pequeño, súper suave, descartable TB-SSD Bloqueador de lengua normal, súper suave, descartable AT-3 Glenroe, tubos adaptadores SB-P OrthosilTM protector de bracket WB(código de color)Cera de alivio del paciente aromatizada/brillante/sólida WB-S(código de color)Cera de alivio del paciente brillante WB-TS(código de color)Cera de alivio del paciente brillante tropical HC-2 Protectores contra ganchos LG-1 Protector labial para ortodoncia UNL731 Ultra elásticos sin látex 1/8"/3,2mm liviano 2,5 onzas UNL733 Ultra elásticos sin látex 1/8"/3,2mm medio 3,5 onzas UNL735 Ultra elásticos sin látex 1/8"/3,2mm pesado 4,5 onzas UNL736 Ultra elásticos sin látex 1/8"/3,2mm x-pesado 6 onzas UNL741 Ultra elásticos sin látex 3/16"/4,8mm liviano 2,5 onzas UNL743 Ultra elásticos sin látex 3/16"/4,8mm medio 3,5 onzas UNL745 Ultra elásticos sin látex 3/16"/4,8mm pesado 4,5 onzas UNL746 Ultra elásticos sin látex 3/16"/4,8mm x-pesado 6 onzas</p>
--	--	---

E. A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>económica ERL418LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERL422LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERL518RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERL522RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERL518LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ERL522LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica ESU118 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" superior central</p>	<p>UNL751 Ultra elásticos sin látex 1/4"/6,4mm liviano 2,5 onzas UNL753 Ultra elásticos sin látex 1/4"/6,4mm medio 3,5 onzas UNL755 Ultra elásticos sin látex 1/4"/6,4mm pesado 4,5 onzas UNL756 Ultra elásticos sin látex 1/4"/6,4mm x-pesado 6 onzas UNL761 Ultra elásticos sin látex 5/16"/7,9mm liviano 2,5 onzas UNL763 Ultra elásticos sin látex 5/16"/7,9mm medio 3,5 onzas UNL765 Ultra elásticos sin látex 5/16"/7,9mm pesado 4,5 onzas UNL766 Ultra elásticos sin látex 5/16"/7,9mm x-pesado 6 onzas UNL771 Ultra elásticos sin látex 3/8"/9,5mm liviano 2,5 onzas UNL773 Ultra elásticos sin látex 3/8"/9,5mm medio 3,5 onzas UNL775 Ultra elásticos sin látex 3/8"/9,5mm pesado 4,5 onzas UNL776 Ultra elásticos sin látex 3/8"/9,5mm x-pesado 6 onzas G731 Elásticos Látex 1/8"/3,2 mm liviano 2,5 onzas G733 Elásticos Látex 1/8"/3,2 mm medio 3,5 onzas G735 Elásticos Látex 1/8"/3,2 mm pesado 4,5 onzas G736 Elásticos Látex 1/8"/3,2 mm x-pesado 6 onzas G741 Elásticos Látex 3/16"/4,8 mm liviano 2,5 onzas</p>
--	--	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Edgewise estándar, Línea económica ESU122 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" superior central Edgewise estándar, Línea económica ESU218 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" superior lateral Edgewise estándar, Línea económica ESU222 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" superior lateral Edgewise estándar, Línea económica ESL118 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" inferior anteriores, Edgewise estándar, Línea económica ESL122 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" inferior anteriores, Edgewise estándar, Línea económica ES318 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" caninos, Edgewise estándar, Línea económica ES322 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" caninos, Edgewise estándar, Línea económica ES18BI Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" premolar, Edgewise estándar, Línea económica ES22BI Bracket de acero inoxidable, ranura de	onzas G743 Elásticos Látex 3/16"/4,8 mm medio 3,5 onzas G745 Elásticos Látex 3/16"/4,8 mm pesado 4,5 onzas G746 Elásticos Látex 3/16"/4,8 mm X-pesado 6 onzas G751 Elásticos Látex 1/4"/6,4 mm liviano 2,5 onzas G753 Elásticos Látex 1/4"/6,4 mm medio 3,5 onzas G755 Elásticos Látex 1/4"/6,4 mm pesado 4,5 onzas G756 Elásticos Látex 1/4"/6,4 mm X-pesado 6 onzas G761 Elásticos Látex 5/16"/7,9 mm liviano 2,5 onzas G763 Elásticos Látex 5/16"/7,9 mm medio 3,5 onzas G765 Elásticos Látex 5/16"/7,9 mm pesado 4,5 onzas G766 Elásticos Látex 5/16"/7,9mm x-pesado 6 onzas G771 Elásticos Látex 3/8"/9,5mm liviano 2,5 onzas G773 Elásticos Látex 3/8"/9,5mm medio 3,5 onzas G775 Elásticos Látex 3/8"/9,5mm pesado 4,5 onzas G776 Elásticos Látex 3/8"/9,5mm x-pesado 6 onzas G892 Elásticos Neón 1/8"/3,2mm liviano 2,5 onzas G894 Elásticos Neón 1/8"/3,2mm medio 3,5 onzas G896 Elásticos Neón 1/8"/3,2mm pesado 4,5
---	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	0,022" premolar, Edgewise estándar, Línea económica MRU118R Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar central, de prescripción Roth, Línea Ultra MRU122R Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar central, de prescripción Roth, Línea Ultra MRU118L Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar central, de prescripción Roth, Línea Ultra MRU122L Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar central, de prescripción Roth, Línea Ultra MRU218R Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar lateral, de prescripción Roth, Línea Ultra MRU222R Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar lateral, de prescripción Roth, Línea Ultra MRU218L Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar lateral, de prescripción Roth, Línea Ultra MRU222L Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar lateral, de prescripción Roth, Línea Ultra MRU318RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar	onzas G898 Elásticos Neón 1/8"/3,2mm x-pesado 6 onzas G900 Elásticos Neón 3/16"/4,8mm liviano 2,5 onzas G902 Elásticos Neón 3/16"/4,8mm medio 3,5 onzas G904 Elásticos Neón 3/16"/4,8mm pesado 4,5 onzas G906 Elásticos Neón 3/16"/4,8mm x-pesado 6 onzas G910 Elásticos Neón 1/4"/6,4mm liviano 2,5 onzas G912 Elásticos Neón 1/4"/6,4mm Medio 3,5 onzas G914 Elásticos Neón 1/4"/6,4mm pesado 4,5 onzas G916 Elásticos Neón 1/4"/6,4mm x-pesado 6 onzas G920 Elásticos Neón 5/16"/7,9mm liviano 2,5 onzas G922 Elásticos Neón 5/16"/7,9mm Medio 3,5 onzas G924 Elásticos Neón 5/16"/7,9mm pesado 4,5 onzas G926 Elásticos Neón 5/16"/7,9mm x-pesado 6 onzas G928 Elásticos Neón 3/8"/9,5mm liviano 2,5 onzas G930 Elásticos Neón 3/8"/9,5mm medio 3,5 onzas G932 Elásticos Neón 3/8"/9,5mm pesado 4,5 onzas G934 Elásticos Neón 3/8"/9,5mm x-pesado 6 onzas
--	---	--

E

✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra MRU322RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra MRU318LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra MRU322LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra MRU18BI Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar premolar, de prescripción Roth, Línea Ultra MRU22BI Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar premolar, de prescripción Roth, Línea Ultra MRL118 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular anterior inferior, de prescripción Roth, Línea Ultra MRL122 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco mandibular anterior inferior, de prescripción Roth, Línea Ultra MRL318RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco</p>	<p>TT-5(código de color)Tuff Stick, lazos de ligadura elastoméricos G457 Extra Oral Elásticos látex1/4" 8 onzas G456 Extra Oral Elásticos látex1/4" 16 onzas G467 Extra Oral Elásticos látex 5/16" 8 onzas G465 Extra Oral Elásticos látex 5/16" 14 onzas G466 Extra Oral Elásticos látex 5/16" 16 onzas G474 Extra Oral Elásticos látex 3/8" 8 onzas G475 Extra Oral Elásticos látex 3/8" 14 onzas G476 Extra Oral Elásticos látex 3/8" 16 onzas G484 Extra Oral Elásticos látex 1/2" 8 onzas G485 Extra Oral Elásticos látex 1/2" 14 onzas G486 Extra Oral Elásticos látex 1/2" 16 onzas EP-(código de color) ElastiTM colocador estándar & aromatizado color EP-T(código de color)ElastiTM colocador colores tropicales EP-100 ElastiTM colocador colores vívidos Multi-Pack MSU118 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" central superior, arco de canto estándar, Ultra Line™ MSU122 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" central superior, arco de canto estándar, Ultra Line™ MSU218 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" central lateral, arco de canto, Ultra Line™</p>
--	--	---

E



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>mandibular canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra MRL322RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco</p> <p>mandibular canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra MRL318LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco</p> <p>mandibular canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra MRL322LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco</p> <p>mandibular canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra MRL418RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco</p> <p>mandibular primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra MRL422RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco</p> <p>mandibular primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra MRL418LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco</p> <p>mandibular primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra MRL422LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco</p> <p>mandibular primer</p>	<p>MSU222 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" central lateral, arco de canto estándar, Ultra Line™</p> <p>MSL118 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" anterior inferior, arco de canto estándar, Ultra Line™</p> <p>MSL122 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" anterior inferior, arco de canto estándar, Ultra Line™</p> <p>MS318 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" Ultra Line™, arco de canto de canino estándar</p> <p>MS322 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" Ultra Line™, arco de canto de canino estándar</p> <p>MS18BI Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" Ultra Line™, arco de canto de premolares estándar</p> <p>MS22BI Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" Ultra Line™, arco de canto de premolares estándar</p> <p>FSU118 Bracket de composite transparente cristal estándar, arco de canto superior central, con ranura de 0,018"</p> <p>FSU122 Bracket de composite transparente cristal estándar, arco de canto superior central, con ranura de 0,022"</p> <p>FSU218 Bracket de composite transparente cristal estándar, arco de canto superior lateral, con ranura de 0,018"</p> <p>FSU222 Bracket de composite transparente cristal estándar, arco de canto superior lateral, con ranura de 0,022"</p>
--	---	---

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

	<p>premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra MRL518RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra MRL522RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco mandibular segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra MRL518LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra MSU118 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" superior central Edgewise estándar, Línea ultra MSU122 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" superior central Edgewise estándar, Línea ultra MSU218 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" superior lateral Edgewise estándar, Línea ultra MSU222 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" superior lateral Edgewise estándar, Línea ultra MSL218 Bracket de acero inoxidable con ranura de</p>	<p>FSL118 Bracket de composite transparente cristal estándar, arco de canto inferior anterior, con ranura de 0,018" FSL122 Bracket de composite transparente cristal estándar, arco de canto inferior anterior, con ranura de 0,022" FS318 Bracket de composite transparente cristal estándar, arco de canto para caninos con ranura de 0,018" FS322 Bracket de composite transparente cristal estándar, arco de canto para caninos con ranura de 0,022" FS18BI Bracket de composite transparente cristal estándar, arco de canto para premolares con ranura de 0,018" FS22BI Bracket de composite transparente cristal estándar, arco de canto para premolares con ranura de 0,022" BHG-18B Bracket estético de cerámica, calibre para altura de bracket, azul, ranura de 0,018" BHG-22B Bracket estético de cerámica, calibre para altura de bracket, azul, ranura de 0,022" BHG-18 Bracket estético de cerámica, calibre para altura de bracket, blanco, ranura de 0,018" BHG-22 Bracket estético de cerámica, calibre para altura de bracket, blanco, ranura de 0,022" CRU118R Bracket estético de cerámica para arco maxilar</p>
--	---	---

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>0,018" anteriores inferiores Edgewise estándar, Línea ultra MSL222 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" anteriores inferiores Edgewise estándar, Línea ultra MS318 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" caninos Edgewise estándar, Línea ultra MS322 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" caninos Edgewise estándar, Línea ultra MS18BI Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" premolares Edgewise estándar, Línea ultra MS22BI Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" premolares Edgewise estándar, Línea ultra FRU118R Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar central, prescripción Roth. FRU122R Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar central, prescripción Roth. FRU118L Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar central, prescripción Roth. FRU122L Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022",</p>	<p>central de prescripción Roth y ranura de 0,018" CRU122R Bracket estético de cerámica para arco maxilar central de prescripción Roth y ranura de 0,022" CRU118L Bracket estético de cerámica para arco maxilar central de prescripción Roth y ranura de 0,018" CRU122L Bracket estético de cerámica para arco maxilar central de prescripción Roth y ranura de 0,022" CRU218R Bracket estético de cerámica para arco maxilar lateral de prescripción Roth y ranura de 0,018" CRU222R Bracket estético de cerámica para arco maxilar lateral de prescripción Roth y ranura de 0,022" CRU218L Bracket estético de cerámica para arco maxilar lateral de prescripción Roth y ranura de 0,018" CRU222L Bracket estético de cerámica para arco maxilar lateral de prescripción Roth y ranura de 0,022" CRU318R Bracket estético de cerámica para arco maxilar canino de prescripción Roth y ranura de 0,018" CRU322R Bracket estético de cerámica para arco maxilar canino de prescripción Roth y ranura de 0,022" CRU318L Bracket estético de cerámica para arco maxilar canino de prescripción Roth y ranura de 0,018" CRU322L Bracket estético de cerámica para arco maxilar canino de prescripción Roth y ranura de 0,022"</p>
--	--	---

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>arco maxilar central, prescripción Roth. FRU218R Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar lateral, prescripción Roth. FRU222R Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar lateral, prescripción Roth. FRU218L Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar lateral, prescripción Roth. FRU222L Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar lateral, prescripción Roth. FRU318HK Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar, canino con gancho, prescripción Roth. FRU322RHK Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino con gancho, ranura de 0,022" FRU318RHK Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino con gancho, ranura de 0,018" FRU322LHK Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino con gancho, ranura de 0,022"</p>	<p>CR18BI Bracket estético de cerámica para arco maxilar premolar de prescripción Roth y ranura de 0,018" CR22BI Bracket estético de cerámica para arco maxilar premolar de prescripción Roth y ranura de 0,022" CRL318R Bracket estético de cerámica para arco mandibular canino de prescripción Roth y ranura de 0,018" CRL322R Bracket estético de cerámica para arco mandibular canino de prescripción Roth y ranura de 0,022" CRL318L Bracket estético de cerámica para arco mandibular canino de prescripción Roth y ranura de 0,018" CRL322L Bracket estético de cerámica para arco mandibular canino de prescripción Roth y ranura de 0,022" CSU118 Bracket estético de cerámica, arco de canto estándar central superior, ranura de 0,018" CSU122 Bracket estético de cerámica, arco de canto estándar central superior, ranura de 0,022" CSU218 Bracket estético de cerámica, arco de canto estándar lateral inferior, ranura de 0,018" CSU222 Bracket estético de cerámica, arco de canto estándar, lateral inferior, ranura de 0,022" CSL118 Bracket estético de cerámica, arco de canto</p>
--	---	--

E 1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>FRU318R Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino sin gancho, ranura de 0,018"</p> <p>FRU322R Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino sin gancho, ranura de 0,022"</p> <p>FRU318L Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino sin gancho, ranura de 0,018"</p> <p>FRU322L Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino sin gancho, ranura de 0,022"</p> <p>FRU18BIHK Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar, premolar con gancho, prescripción Roth.</p> <p>FRU22BIHK Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar, premolar con gancho, prescripción Roth.</p> <p>FRU18BI Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar, premolar sin gancho, prescripción Roth.</p> <p>FRU22BI Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar, premolar</p>	<p>estándar, anterior inferior, ranura de 0,018"</p> <p>CSL122 Bracket estético de cerámica, arco de canto estándar, anterior inferior, ranura de 0,022"</p> <p>CS318 Bracket estético de cerámica, arco de canto estándar para caninos, ranura de 0,018"</p> <p>CS322 Bracket estético de cerámica, arco de canto estándar para caninos, ranura de 0,022"</p> <p>CS18BI Bracket estético de cerámica, arco de canto estándar para premolares, ranura de 0,018"</p> <p>CS22BI Bracket estético de cerámica, arco de canto estándar para premolares, ranura de 0,022"</p> <p>TS-1SS Asentador de bandas de punta corta esterilizable a alta temperatura</p> <p>TS-3ST Asentador de bandas de punta corta esterilizable c/calor, inserto en forma de estrella</p> <p>TS-1ST Asentador de bandas de punta corta esterilizable c/calor inserto normal</p> <p>TS-2ST Asentador de bandas de punta corta esterilizable c/calor inserto en reversa</p> <p>TS-RST Asentador de bandas de punta corta esterilizable c/calor inserto redondo</p> <p>TS-1 Asentador de bandas de punta corta esterilizable en autoclave</p> <p>TS-3S Asentador de bandas de punta estándar estéril. con calor, inserto en forma de estrella</p> <p>TS-1S Asentador de bandas</p>
--	--	---

E
A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>sin gancho, prescripción Roth.</p> <p>FRL118 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular anterior inferior de prescripción Roth, ranura de 0,018".</p> <p>FRL122 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular anterior inferior de prescripción Roth, ranura de 0,022".</p> <p>FRL318RHK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino con gancho y ranura de 0,018".</p> <p>FRL322RHK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino con gancho y ranura de 0,022".</p> <p>FRL318LHK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino con gancho y ranura de 0,018".</p> <p>FRL322LHK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino con gancho y ranura de 0,022".</p> <p>FRL318R Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de</p>	<p>de punta estándar estéril. con calor inserto normal</p> <p>TS-2S Asentador de bandas de punta estándar estéril. con calor inserto en reversa</p> <p>TS-RS Asentador de bandas de punta estándar estéril. con calor inserto redondo</p> <p>TS-1ECB Asentador de bandas Ergo</p> <p>TS-1ECBS Asentador de bandas Ergo esterilizable con calor</p> <p>LCCI Instrumento de contorneado lingual</p> <p>AMDOR-25 Calibre para medir arcos - color anaranjado</p> <p>AMD-25 Calibre para medir arcos - color blanco</p> <p>ESK Kit de instrumentos para tiras abrasivas</p> <p>ES-1000 Instrumento para tiras abrasivas</p> <p>AS-S4M Tira abrasiva, una cara, grano medio de 4 mm</p> <p>AS-D4M Tira abrasiva, doble cara, grano medio de 4 mm</p> <p>AS-S6M Tira abrasiva, una cara, grano medio de 6 mm</p> <p>AS-D6M Tira abrasiva, doble cara, grano medio de 6 mm</p> <p>AS-S8M Tira abrasiva, una cara, grano medio de 8 mm</p> <p>AS-D8M Tira abrasiva, doble cara, grano medio de 8 mm</p> <p>M12U Arco de alambre titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,012"</p> <p>TM12U Arco de alambre titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural térmico superior 0,012"</p> <p>M12L Arco de alambre titanio-níquel térmico</p>
--	---	---

E.

7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>prescripción Roth, canino sin gancho y ranura de 0,018". FRL322R Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino sin gancho y ranura de 0,022". FRL318L Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino sin gancho y ranura de 0,018". FRL322L Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino sin gancho y ranura de 0,022". FRL418HK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, primer premolar con gancho y ranura de 0,018". FRL422HK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, primer premolar con gancho y ranura de 0,022". FRL418 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, primer premolar sin gancho y ranura de 0,018". FRL422 Bracket de</p>	<p>Marsenol, forma de arco natural inferior 0,012" TM12L Arco de alambre titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural térmico inferior 0,012" M14U Arco de alambre titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,014" TM14U Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural térmico superior 0,014" M14L Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,014" TM14L Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural térmico inferior 0,014" M16U Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,016" TM16U Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural térmico superior 0,016" M16L Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,016" TM16L Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural térmico inferior 0,016" M18U Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco</p>
--	---	---

C A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, primer premolar sin gancho y ranura de 0,022". FRL518HK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, segundo premolar con gancho y ranura de 0,018". FRL522HK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, segundo premolar con gancho y ranura de 0,022". FRL518 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, segundo premolar sin gancho y ranura de 0,018". FRL522 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, segundo premolar sin gancho y ranura de 0,022". FSU118 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise superior central, con ranura de 0,018". FSU122 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise</p>	<p>natural superior 0,018" TM18U Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural térmico superior 0,018" M18L Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,018" TM18L Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural térmico inferior 0,018" M20U Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,020" M20L Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,020" M616U Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,016"X0,016" M616L Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,016"X0,016" M622U Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,016"X0,022" M622L Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,016"X0,022" M725U Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco</p>
--	--	---

C
A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>superior central, con ranura de 0,022". FSU218 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise superior lateral, con ranura de 0,018". FSU222 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise superior lateral, con ranura de 0,022". FSL118 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise inferiores anteriores, con ranura de 0,018". FSL122 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise inferiores anteriores, con ranura de 0,022". FSL318 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise para caninos, con ranura de 0,018". FSL322 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise para caninos, con ranura de 0,022". FSL18BI Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise para premolares, con ranura de 0,018". FSL22BI Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise para premolares, con ranura de 0,022". PLB Botón de unión transparente cristal. BHG-18B Bracket estético de cerámica,</p>	<p>natural superior 0,017"X0,025" M725L Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,017"X0,025" M825U Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,018"X0,025" M825L Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,018"X0,025" M925U Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,019"X0,025" M925L Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,019"X0,025" M215U Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,021"X0,025" M215L Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,021"X0,025" RCA16U Arcos de curva reversa de titanio-níquel 0,016" redondo superior RCA16L Arcos de curva reversa de titanio-níquel 0,016" redondo inferior RCA622U Arcos de curva reversa de titanio-níquel 0,016"x0,022" cuadrado</p>	
--	---	--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>calibre para altura de bracket, azul, ranura de 0,018". BHG-22B Bracket estético de cerámica, calibre para altura de bracket, azul, ranura de 0,022". BHG-18 Bracket estético de cerámica, calibre para altura de bracket, blanco, ranura de 0,018". BHG-22 Bracket estético de cerámica, calibre para altura de bracket, blanco, ranura de 0,022". CRU118R Bracket estético de cerámica para arco maxilar central de prescripción Roth y ranura de 0,018". CRU122R Bracket estético de cerámica para arco maxilar central de prescripción Roth y ranura de 0,022". CRU118L Bracket estético de cerámica para arco maxilar central de prescripción Roth y ranura de 0,018". CRU122L Bracket estético de cerámica para arco maxilar central de prescripción Roth y ranura de 0,022". CRU218R Bracket estético de cerámica para arco maxilar lateral de prescripción Roth y ranura de 0,018". CRU222R Bracket estético de cerámica para arco maxilar lateral de prescripción Roth y ranura de 0,022".</p>	<p>superior RCA622L Arcos de curva reversa de titanio-níquel 0,016"x0,022" cuadrado inferior CSO-9NT Resorte helicoidal titanio-níquel 0,009"X0,030" abierto liviano CSC-9NT Resorte helicoidal titanio-níquel 0,010"X0,030"X9 mm cerrado CSO-10NT Resorte helicoidal titanio-níquel 0,010"X0,030" medio abierto CSC-12NT Resorte helicoidal titanio-níquel 0,010"X0,030"X12 mm cerrado CSO-12NT Resorte helicoidal titanio-níquel 0,010"X0,030" abierto pesado PO12U Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,012" redondo superior PO12L Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,012" redondo inferior PO14U Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,014" redondo superior PO14L Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,014" redondo inferior PO16U Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,016" redondo superior PO16L Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,016" redondo inferior PO18U Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,018" redondo superior PO18L Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,018" redondo inferior PO20U Alambre de acero</p>
--	--	--

E

~



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. F.

	<p>CRU218L Bracket estético de cerámica para arco maxilar lateral de prescripción Roth y ranura de 0,018".</p> <p>CRU222L Bracket estético de cerámica para arco maxilar lateral de prescripción Roth y ranura de 0,022".</p> <p>CRU318RHK Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,018".</p> <p>CRU322RHK Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,022".</p> <p>CRU318LHK Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,018".</p> <p>CRU322LHK Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,022".</p> <p>CRU318R Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,018".</p> <p>CRU322R Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,022".</p> <p>CRU318L Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,018".</p> <p>CRU322L Bracket estético</p>	<p>inox. - forma de arco natur. 0,020" redondo superior</p> <p>PO20L Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,020" redondo inferior</p> <p>P616U Alambre de acero inoxidable - forma de arco natural 0,016"x0,016" superior rectangular y cuadrado</p> <p>P616L Alambre de acero inoxidable - forma de arco natural 0,016"x0,016" inferior rectangular y cuadrado</p> <p>P622U Alambre de acero inoxidable - forma de arco natural 0,016"x0,022" superior rectangular y cuadrado</p> <p>P622L Alambre de acero inoxidable - forma de arco natural 0,016"x0,022" inferior rectangular y cuadrado</p> <p>P725U Alambre de acero inoxidable - forma de arco natural 0,017"x0,025" superior rectangular y cuadrado</p> <p>P725L Alambre de acero inoxidable - forma de arco natural 0,017"x0,025" inferior rectangular y cuadrado</p> <p>P818U Alambre de acero inoxidable - forma de arco natural 0,018"x0,018" superior rectangular y cuadrado</p> <p>P818L Alambre de acero inoxidable - forma de arco natural 0,018"x0,018" inferior rectangular y cuadrado</p> <p>P825U Alambre de acero inoxidable - forma de arco natural 0,018"x0,025" superior rectangular y cuadrado</p>
--	---	---

E

✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.I.

	<p>de cerámica para arco maxilar, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,022". CR18BI Bracket estético de cerámica para arco maxilar, premolar, de prescripción Roth y ranura de 0,018". CR22BI Bracket estético de cerámica para arco maxilar, premolar, de prescripción Roth y ranura de 0,022". CRL118 Bracket estético de cerámica para arco mandibular inferior anterior, de prescripción Roth y ranura de 0,018". CRL122 Bracket estético de cerámica para arco mandibular inferior anterior, de prescripción Roth y ranura de 0,022". CRL318RHK Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,018". CRL322RHK Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,022". CRL318LHK Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,018". CRL322LHK Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino con gancho, de</p>	<p>P825L Alambre de acero inoxidable - forma de arco natural 0,018"x0,025" inferior rectangular y cuadrado P925U Alambre de acero inoxidable - forma de arco natural 0,019"x0,025" superior rectangular y cuadrado P925L Alambre de acero inoxidable - forma de arco natural 0,019"x0,025" inferior rectangular y cuadrado P215U Alambre de acero inoxidable - forma de arco natural 0,021"x0,025" superior rectangular y cuadrado P215L Alambre de acero inoxidable - forma de arco natural 0,021"x0,025" inferior rectangular y cuadrado RWS14U Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,014" redondo superior RWS14L Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,014" redondo inferior RWS16U Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,016" redondo superior RWS16L Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,016" redondo inferior RWS18U Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,018" redondo superior RWS18L Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,018" redondo inferior RWS20U Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,020" redondo superior RWS20L Alambre de acero inox. - forma de arco natur. 0,020" redondo inferior</p>
--	--	--

E



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>prescripción Roth y ranura de 0,022". CRL318R Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,018". CRL322R Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,022". CRL318L Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,018". CRL322L Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,022". CRL418 Bracket estético de cerámica para arco mandibular, primer premolar, de prescripción Roth y ranura de 0,018". CRL422 Bracket estético de cerámica para arco mandibular, primer premolar, de prescripción Roth y ranura de 0,022". CRL518 Bracket estético de cerámica para arco mandibular, segundo premolar, de prescripción Roth y ranura de 0,018". CRL522 Bracket estético de cerámica para arco mandibular, segundo premolar, de prescripción Roth y ranura de 0,022". CSU118 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, central superior, ranura de</p>	<p>TSS015 Alambre trenzado súper de tres filamentos 0,0155" tramos rectos TSS175 Alambre trenzado súper de tres filamentos 0,0175" tramos rectos TSS195 Alambre trenzado súper de tres filamentos 0,0195" tramos rectos UCWS015 Cable de alambre súper suave 0,0155" tramos rectos UCWS175 Cable de alambre súper suave 0,0175" tramos rectos LS36 Funda lingual soldable KTH10 Ganchos para atar ligaduras Kobayashi® 0,010" KTH12 Ganchos para atar ligaduras Kobayashi® 0,012" KTH14 Ganchos para atar ligaduras Kobayashi® 0,014" KTH12S Ganchos para atar ligaduras Shorty Kobayashi® 0,012" KTH14S Ganchos para atar ligaduras Shorty Kobayashi® 0,014" RWL14 Alambre de acero inoxidable redondo de 0,014" RWL16 Alambre de acero inoxidable redondo de 0,016" RWL18 Alambre de acero inoxidable redondo de 0,018" RWL20 Alambre de acero inoxidable redondo de 0,020" RWL616 Alambre de acero inoxidable cuadrado y rectangular de 0,016"x0,016" RWL622 Alambre de acero inoxidable cuadrado y rectangular de 0,016"x0,022" RWL722 Alambre de acero inoxidable cuadrado y rectangular de 0,017"x0,022" RWL725 Alambre de acero</p>
--	---	--

Handwritten marks: a checkmark and a signature.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. I.

	<p>0,018" CSU122 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, central superior, ranura de 0,022" CSU218 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, lateral inferior, ranura de 0,018" CSU222 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, lateral inferior, ranura de 0,022" CSL118 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, anteriores inferiores, ranura de 0,018" CSL122 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, anteriores inferiores, ranura de 0,022" CS318 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, para caninos, ranura de 0,018" CS322 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, para caninos, ranura de 0,022" CS18BI Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, para premolares, ranura de 0,018" CS22BI Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, para premolares, ranura de 0,022" FLB Botón de unión relleno de cerámica TS-1SS Varilla para mordida esterilizable a</p>	<p>inoxidable cuadrado y rectangular de 0,017"x0,025" RWL825 Alambre de acero inoxidable cuadrado y rectangular de 0,018"x0,025" RWL925 Alambre de acero inoxidable cuadrado y rectangular de 0,019"x0,025" RWL215 Alambre de acero inoxidable cuadrado y rectangular de 0,021"x0,025" RET25 Alambre de retención 0,025" RET28 Alambre de retención 0,028" RET30 Alambre de retención 0,030" RET32 Alambre de retención 0,032" RET36 Alambre de retención 0,036" AWM-1 Marcadores de arcos descartables TFP-DL020X100R Láminas de 125mm DuralightTM, circulares, 0,020"/1/2mm - caja de 100 DFS030X100S Láminas DuraforceTM transparentes de 5" cuadradas, 0,030"/3/4mm, caja de 100 DFS030X100SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125mm cuadradas 0,030"/3/4mm, caja de 100 DFS030X100R Láminas DuraforceTM transparentes de 125mm circulares 0,030"/3/4mm, caja de 100 DFS030X100RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120mm circulares 0,030"/3/4mm, caja de 100 DFS030X10S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas 0,030"/3/4mm,</p>
--	--	---

E

A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>alta temperatura de punta corta. TS-3ST Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura de punta corta, con inserto en forma de estrella TS-1ST Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura de punta corta, con inserto en forma regular TS-2ST Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura de punta corta, con inserto en reversa TS-RST Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura de punta corta, con inserto en forma redonda TS-1 Varilla para mordida de punta corta apta para autoclave. TS-3S Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura, con punta estándar e inserto en forma de estrella. TS-1S Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura, con punta estándar e inserto en forma regular. TS-2S Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura, con punta estándar e inserto en reversa. TS-RS Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura, con punta estándar e inserto en forma redonda. TS-1ECB Varilla para</p>	<p>bolsa de 10 DFS030X10SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125mm cuadrados 0,030"/3/4mm, bolsa de 10 DFS030X10R Láminas Duraforce™ transparentes de 125mm circulares 0,030"/3/4mm, bolsa de 10 DFS030X10RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120mm circulares 0,030"/3/4mm, bolsa de 10 DFS040X100S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas 0,040"/1mm, caja de 100 DFS040X100SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125mm cuadradas 0,040"/1mm, caja 100 DFS040X100R Láminas Duraforce™ transparentes de 125mm circulares 0.040"/1mm, caja de 100 DFS040X100RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120mm circulares 0.040"/1mm, caja de 100 DFS040X10S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas 0.040"/1mm, bolsa de 10 DFS040X10SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125mm cuadradas 0,040"/1mm, bolsa de 10 DFS040X10R Láminas Duraforce™ transparentes de 125mm circulares 0,040"/1mm, bolsa de 10 DFS040X10RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120mm circulares 0,040"/1mm, bolsa 10 DFS060X50S Láminas</p>
--	--	--

E

A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>mordida ergonómica TS-1ECB Varilla para mordida ergonómica esterilizable con calor FILE-C Instrumento para contornear bandas esterilizables con calor. LIG-T Instrumento Tucker para ligaduras LCCI Instrumento para contornear lingual AMDOR-25 Calibre para medir arcos - color naranja AMD-25 Calibre para medir arcos - color blanco ESK Kit de instrumentos para varillas abrasivas ES-100 Instrumento para varillas abrasivas AS-S4SF Varilla abrasiva, una cara, grano super fino de 4 mm AS-S4M Varilla abrasiva de una cara grano medio de 4 mm AS-D4M Varilla abrasiva de doble cara, grano medio de 4 mm AS-S6SF Varilla abrasiva de una cara grano superfino de 6 mm AS-S6M Varilla abrasiva de una cara grano medio de 6 mm AS-D6M Varilla abrasiva de doble cara, grano medio de 6 mm AS-S8M Varilla abrasiva de una cara grano medio de 8 mm AS-D8M Varilla abrasiva de doble cara grano medio de 8 mm M12U Alambre de titanio-</p>	<p>Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas 0,060"/1½mm, bolsa de 50 DFS060X50SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125mm cuadradas 0,060"/1½mm, caja 50 DFS060X50R Láminas Duraforce™ transparentes de 125mm circulares 0,060"/1½mm, caja de 50 DFS060X50RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120mm circulares 0,060"/1½mm, caja de 50 DFS060X5S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas 0,060"/1 ½mm, bolsa de 5 DFS060X5SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125mm cuadradas 0,060"/1½mm, bolsa de 5 DFS060X5R Láminas Duraforce™ transparentes de 125mm circulares 0,060"/1½mm, bolsa de 5 DFS060X5RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120mm circulares 0,060"/1½mm, bolsa de 5 DFSTR040X25S Láminas de color Duraforce™ de 5", cuadradas, 0,040"/1mm, rojas translúcidas DFSTR040X25SS Láminas de color Duraforce™ de 125mm, cuadradas, 0,040"/1mm, rojas translúcidas DFSTR040X25R Láminas de color Duraforce™ de 125mm, circulares, 0,040"/1mm, rojas translúcidas DFSTB040X25S Láminas de color Duraforce™ de 5", cuadradas, 0,040"/1mm,</p>
--	---	---

E

A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,12" TM12U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo superior 0,12" M12L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,12" TM12L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo inferior 0,12" M14U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,14" TM14U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo superior 0,14" M14L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,14" TM14L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo inferior 0,14" M16U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,16" TM16U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo superior 0,16" M16L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol,</p>	<p>azules translúcidas DFSTB040X25SS Láminas de color Duraforce™ de 125mm, cuadradas, 0,040"/1mm, azules translúcidas DFSTB040X25R Láminas de color Duraforce™ de 125mm, circulares, 0,040"/1mm, azules transparentes DFSTY040X25S Láminas de color Duraforce™ de 5", cuadradas, 0,040"/1mm, amarillas translúcidas DFSTY040X25SS Láminas de color Duraforce™ de 125mm, cuadradas, 0,040"/1mm, amarillas translúcidas DFSTY040X25R Láminas de color Duraforce™ de 125mm, circulares, 0,040"/1mm, amarillas translúcidas DFSTG040X25S Láminas de color Duraforce™ de 5", cuadradas, 0,040"/1mm, verdes translúcidas DFSTG040X25SS Láminas de color Duraforce™ de 125mm, cuadradas, 0,040"/1mm, verdes translúcidas DFSTG040X25R Láminas de color Duraforce™ de 125mm, circulares, 0,040"/1mm, verdes translúcidas UFS040X100S Láminas Ultrafit™ de 5", cuadradas, 0,040"/1mm, caja x 100 UFS040X100SS Láminas Ultrafit™ de 125 mm, cuadradas, 0,040"/1 mm, caja x 100 UFS040X100R Láminas Ultrafit™ de 125mm, circulares, 0,040"/1mm, caja x 100 UFS040X100RS Láminas Ultrafit™ de 120mm,</p>
--	--	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

forma de arco natural inferior 0,16" TM16L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo inferior 0,16" M18U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,18" TM18U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo superior 0,18" M18L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,18" TM18L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo inferior 0,18" M20U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,20" M20L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,20" M616U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,16" x 0,16" M616L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,16" x 0,16" M622U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco	circulares, 0,040"/1mm, caja x 100 UFS040X10S Láminas Ultrafit™ de 5", cuadradas, 0,040"/1mm, bolsa x 10 UFS040X10SS Láminas Ultrafit™ de 125mm, cuadradas, 0,040"/1mm, bolsa x 10 UFS040X10R Láminas Ultrafit™ de 125mm, circulares, 0,040"/1mm, bolsa x 10 UFS040X10RS Láminas Ultrafit™ de 120mm, circulares, 0,040"/1mm, bolsa x 10 UFS060X50S Láminas Ultrafit™ de 5", cuadradas, 0,060"/1½mm, caja x 50 UFS04050SS Láminas Ultrafit™ de 125mm, cuadradas, 0,060"/1½mm, caja x 50 UFS060X50R Láminas Ultrafit™ de 125mm, circulares, 0,060"/1½mm, caja x 50 UFS060X50RS Láminas Ultrafit™ de 120mm, circulares, 0,060"/1½mm, caja x 50 UFS0605S Láminas Ultrafit™ de 5", cuadradas, 0,060"/1½mm, bolsa x 5 UFS060X5SS Láminas Ultrafit™ de 125mm, cuadradas, 0,060"/1½mm, bolsa x 5 UFS060X5R Láminas Ultrafit™ de 125mm, circulares, 0,060"/1½mm, bolsa x 5 UFS060X5RS Láminas Ultrafit™ de 120mm, circulares, 0,060"/1½mm, bolsa x 5
---	---

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>natural superior 0,16" x 0,22" TM622U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo superior 0,16" x 0,22" M622L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,16" x 0,22" TM622L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo inferior 0,16" x 0,22" M725U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,17" x 0,25" TM725U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo superior 0,17" x 0,25" M725L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,17" x 0,25" TM725L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo inferior 0,17" x 0,25" M825U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,18" x 0,25" TM825U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo superior</p>	<p>DCS030X20S Láminas Duraclear™ de 5" cuadradas 0,030"/3/4mm, bolsa x 20 DCS030X20SS Láminas Duraclear™ de 125mm cuadradas 0,030"/3/40mm, bolsa x 20 DCS030X20R Láminas Duraclear™ de 125mm circulares 0,030"/3/4mm, bolsa x 20 DCS030X20RS Láminas Duraclear™ de 120mm circulares 0,030"/3/4mm, bolsa x 20 DCS030X2S Láminas Duraclear™ de 5" cuadradas 0,030"/3/4mm, bolsa x 20 DCS030X2R Láminas Duraclear™ de 125mm circulares 0,030"/3/4mm, bolsa x 2 DCS040X20S Láminas Duraclear™ de 5" cuadradas 0,040"/1mm, bolsa x 20 DCS040X20R Láminas Duraclear™ de 125mm circulares 0,040"/1mm, bolsa x 20 DCS040X20RS Láminas Duraclear™ de 120mm circulares 0,040"/1mm, bolsa x 20 DCS040X2S Láminas Duraclear™ de 5" cuadradas 0,040"/1mm, bolsa x 2 DCS060X10S Láminas Duraclear™ de 5" cuadradas 0,060"/1 1/2mm, bolsa x 10 DCS060X10R Láminas Duraclear™ de 125mm circulares 0,060"/1 1/2mm, bolsa x 10 DCS060X10RS Láminas Duraclear™ de 120mm circulares 0,060"/1 1/2mm,</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>0,18" x 0,25" M825L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,18" x 0,25" TM825L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo inferior 0,18" x 0,25" M925U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,19" x 0,25" M925L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,19" x 0,25" M215U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,21" x 0,25" M215L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,21" x 0,25" RCA16U Arcos de curva reversa de níquel-titanio 0,16" redondos superiores RCA16L Arcos de curva reversa de níquel-titanio 0,16" redondos inferiores RCA622U Arcos de curva reversa de níquel-titanio 0,16" cuadrados superiores RCA622L Arcos de curva reversa de níquel y titanio 0,16" cuadrados inferiores</p>	<p>bolsa x 10 DCS080X10S Láminas Duraclear™ de 5" cuadradas 0,080"/2mm, bolsa x 10 DCS080X10SS Láminas Duraclear™ de 125mm cuadradas 0,080"/2mm, bolsa x 10 DCS080X10R Láminas Duraclear™ de 125mm circulares 0,080"/2mm, bolsa x 10 DCS080X10RS Láminas Duraclear™ de 120mm circulares 0,080"/2mm, bolsa x 10 DGSBLK040X25R Duraguard™ negro 0,040 (1mm) circular, envase x 25 DGSBLK120X25S Duraguard™ negro 0,120 (3mm) cuadrado, envase x 25 DGSBLK160X25S Duraguard™ negro 0,160 (4mm) cuadrado, envase x 25 DGSB120BS Duraguard™ azul 0,120 (3mm) cuadrado, x unidad DGSB040X25R Duraguard™ azul 0,040 (1mm) circular, envase x 25 DGSB040X25S Duraguard™ azul 0,040 (1mm) cuadrado, envase x 25 DGSB060X25S Duraguard™ azul 0,060 (1,5mm) cuadrado, envase x 25 DGSB080X25S Duraguard™ azul 0,080 (2mm) cuadrado, envase x 25 DGSB120X25R Duraguard™ azul 0,120 (3mm) redondo, envase x 25 DGSB120X25S Duraguard™</p>
--	---	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

CSO-9NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,009" x 0,030", abierto	azul 0,120 (3mm) cuadrado, envase x 25
CSC-9NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,009" x 0,030", cerrado	DGSB160X25R Duraguard™ azul 0,160 (4mm) redondo, envase x 25
CSO-10NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,010" x 0,030", abierto	DGSB160X25S Duraguard™ azul 0,160 (4mm) cuadrado, envase x 25
CSC-10NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,010" x 0,030", cerrado	DGSC040X25R Duraguard™ transparente 0,040 (1mm) circular, envase x 25
CSO-12NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,012" x 0,030", abierto	DGSC040BR Duraguard™ transparente 0,040 (1 mm) circular, x unidad
CSC-12NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,012" x 0,030", cerrado	DGSC040X25S Duraguard™ transparente 0,040 (1 mm) cuadrado, envase x 25
PO12U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,012", redondo superior	DGSC040BS Duraguard™ transparente 0,040 (1mm) cuadrado, granel, cada uno
PO12L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,012", redondo inferior	DGSC040BSS Duraguard™ transparente 0,040 (1mm) cuadrado, especial, granel, c/u
PO14U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,014", redondo superior	DGSC060X25S Duraguard™ transparente 0,060 (1,5mm) cuadrado, envase x 25
PO14L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,014", redondo inferior	DGSC060X2R Duraguard™ transparente 0,060 (1,5mm) circular, envase x 2
PO16U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016", redondo superior	DGSC060BR Duraguard™ transparente 0,060 (1,5mm) circular, cada uno
PO16L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016", redondo inferior	DGSC080X25R Duraguard™ transparente 0,080 (2mm) circular, envase x 25
PO18U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018", redondo superior	DGSC080X25RS Duraguard™ transparente 0,080 (2mm) circular pequeño, envase x 25
	DGSC080X25S Duraguard™ transparente 0,080 (2mm) cuadrado, envase x 25
	DGSC080BRS Duraguard™ transparente 0,080 (2mm) circular pequeño, cada uno
	DGSC080BS Duraguard™

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>PO18L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018", redondo inferior</p> <p>PO20U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,020", redondo superior</p> <p>PO20L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,020", redondo inferior</p> <p>P616U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016" x 0,016", rectangular y cuadrado superior</p> <p>P616L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016" x 0,016", rectangular y cuadrado inferior</p> <p>P622U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016" x 0,022, rectangular y cuadrado superior</p> <p>P622L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016" x 0,022", rectangular y cuadrado inferior</p> <p>P725U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,017" x 0,025", rectangular y cuadrado superior</p> <p>P725L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,017" x 0,025", rectangular y cuadrado inferior</p> <p>P818U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018" x 0,018", rectangular y cuadrado</p>	<p>transparente 0,080 (2mm) cuadrado, cada uno</p> <p>DGSC120X25R Duraguard™ transparente 0,120 (3mm) circular, envase x 25</p> <p>DGSC120X25S Duraguard™ transparente 0,120 (3mm) cuadrado, envase x 25</p> <p>DGSC120BRS Duraguard™ transparente 0,120 (3mm) circular pequeño, cada uno</p> <p>DGSC120BS Duraguard™ transparente 0,120 (3mm) cuadrado, cada uno</p> <p>DGSC160X25S Duraguard™ transparente 0,160 (4mm, envase x 25</p> <p>DGSC160X25R Duraguard™ transparente 0,160 (4mm) circular, envase x 25</p> <p>DGSC160BS Duraguard™ transparente 0,160 (4mm) cuadrado, cada uno</p> <p>DGSG120X25S Duraguard™ verde 0,120 (3mm)</p> <p>DGSG120X25R Duraguard™ verde 0,120 (3mm) circular, envase x 25</p> <p>DGSG160X25S Duraguard™ verde 0,160 (4mm) envase x 25</p> <p>DGSG160X25R Duraguard™ verde 0,160 (4mm) circular, envase x 25</p> <p>DGSLB080X25R Duraguard™ celeste 0,080 (2mm) circular, envase x 25</p> <p>DGSLB160X25S Duraguard™ celeste 0,160 (4mm) envase x 25</p> <p>DGSLB160X25R Duraguard™ celeste 0,160 (4mm) circular, envase x 25</p> <p>DGSMC160X25R Duraguard™ multicolor 0,160 (4mm), envase x 25</p>
--	---	---

E

✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

superior P818L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018" x 0,018", rectangular y cuadrado inferior P825U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018" x 0,025", rectangular y cuadrado superior P825L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018" x 0,025", rectangular y cuadrado inferior P925U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,019" x 0,025", rectangular y cuadrado superior P925L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,019" x 0,025", rectangular y cuadrado inferior P215U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,021" x 0,025", rectangular y cuadrado superior P215L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,021" x 0,025", rectangular y cuadrado inferior RWS14U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,014" redondo superior RWS14L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,014" redondo inferior RWS16U Alambre de acero inoxidable - forma	DGSMC120X25S Duraguard™ multicolor 0,120 (3mm), envase x 25 DGSMC160X25S Duraguard™ multicolor 0,160 (4mm), envase x 25 DGSO040X25R Duraguard™ anaranjado 0,040 (1mm) circular, envase x 25 DGSO120X25R Duraguard™ anaranjado 0,120 (3mm) circular, envase x 25 DGSO160X25S Duraguard™ anaranjado 0,160 (4mm) envase x 25 DGSO160X25R Duraguard™ anaranjado 0,160 (4mm) circular, envase x 25 DGSP040X25R Duraguard™ púrpura 0,040 (1mm) circular, envase x 25 DGSP080X25R Duraguard™ púrpura 0,080 (2mm) circular, envase x 25 DGSP120X25R Duraguard™ púrpura 0,120 (3mm), envase x 25 DGSP160X25R Duraguard™ púrpura 0,160 (4mm) púrpura 0,160 (4mm), envase x 25 DGSR080X25S Duraguard™ rojo 0,080 (2mm), envase x 25 DGSR120X25S Duraguard™ rojo 0,120 (3mm), envase x 25 DGSR120X25R Duraguard™ rojo 0,120 (3mm) circular, envase x 25 DGSR160X25R Duraguard™ rojo 0,160 (4mm) circular, envase x 25 DGSR160X25S Duraguard™ rojo 0,160 (4mm) cuadrado,
--	---

C

A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>de arco estándar 0,016" redondo superior RWS16L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" redondo inferior RWS18U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,018" redondo superior RWS18L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,018" redondo inferior RWS20U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,020" redondo superior RWS20L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,020" redondo inferior S616U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" x 0,016" rectangular y cuadrado superior S616L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" x 0,016" rectangular y cuadrado inferior S622U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" x 0,022" rectangular y cuadrado superior S622L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" x 0,022" rectangular y cuadrado inferior S725U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,017" x 0,025" rectangular y</p>	<p>envase x 25 DGSW040X25S Láminas Duraguard™ 0,040, blancas cuadradas, envase x 25 DGSC060X25R Láminas Duraguard™ 0,060 transparentes circulares, envase x 25 DGSBLK160X25R Láminas Duraguard™ 0,160 (4mm), negras, circulares, envase x 25 DGSSIL060X25S Duraguard™ plateado 0,060 (1,5mm) cuadrado, envase x 25 DGSSIL160X25R Duraguard™ plateado 0,160 (4mm), envase x 25 DGSW040X2S Duraguard™ blanco 0,040 (1mm) cuadrado, envase x 2 DGSW120X25S Duraguard™ blanco 0,120 (3mm), envase x 25 DGSW120X25R Duraguard™ blanco 0,120 (3mm) circular, envase x 25 DGSW160X25S Duraguard™ blanco 0,160 (4mm), envase x 25 DGSW160X25R Duraguard™ blanco 0,160 (4mm) circular, envase x 25 DGSY040X25R Duraguard™ amarillo 0,040 (1mm) circular, envase x 25 DGSY120X25R Duraguard™ amarillo 0,120 (3mm) circular, envase x 25 DGSY120X25S Duraguard™ amarillo 0,120 (3mm) cuadrado, envase x 25 DGSY160X25S Duraguard™ amarillo 0,160 (4mm), envase x 25 DGSY160X25R Duraguard™</p>
--	--	---

E

A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>cuadrado superior S725L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,017" x 0,025" rectangular y cuadrado inferior S825U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,018" x 0,025" rectangular y cuadrado superior S825L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,018" x 0,025" rectangular y cuadrado inferior S925U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,019" x 0,025" rectangular y cuadrado superior S925L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,019" x 0,025" rectangular y cuadrado inferior TSS015 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0155" recto longitudinal TSPA015 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0155", forma arco natural TSS175 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0175", recto longitudinal TSPA175 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0175", forma arco natural TSS195 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0195", recto longitudinal</p>	<p>amarillo 0,160 (4mm) circular, envase x 25 AC-25(cód. de color)PP ChewiesTM, Asentador de funda de alineador - Paquete de 10 unidades para pacientes PAB Botón para alineador de composite - envase de 4 unidades WB-TC1 Cera para púnticos, envase x 10 unidades, para pacientes WB-TC Cera para púnticos, caja de 50 envases, para pacientes PB-(código de color)Posicionador en bruto, con y sin aroma, colores sólidos y transparentes PBS-(código de color)Posicionador en bruto, con y sin aroma, colores suaves PB-C(código de color)Posicionador en bruto, con y sin aroma, colores claros 1A350 Essix ACE® Plástico - 5" cuadrado 0,030" 1AH50 Essix ACE® Plástico - 5" cuadrado 0,035" 1A450 Essix ACE® Plástico - 5" cuadrado 0,040" 1A347 Essix ACE® Plástico - 125mm cuadrado 0,030" 1AH347 Essix ACE® Plástico - 125mm cuadrado 0,035" 1A478 Essix ACE® Plástico - 125mm cuadrado 0,040" 1A325 Essix ACE® Plástico - 125mm circular 0,030" 1AH25 Essix ACE® Plástico - 125mm circular 0,035" 1A425 Essix ACE® Plástico - 125mm circular 0,040"</p>
--	--	--

C

A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

TSPA195 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0195", forma arco natural	1A320 Essix ACE® Plástico - 120mm circular 0,030"
USWS015 Cable súper suave 0,0155" recto longitudinal	1AH20 Essix ACE® Plástico - 120mm circular 0,035"
PCWA015 Cable súper suave 0,0155" forma arco natural	1A420 Essix ACE® Plástico - 120mm circular 0,040"
USWS175 Cable súper suave 0,0175" recto longitudinal	10025 Essix A+TM Plástico - 5" cuadrado 0,020"
PCWA175 Cable súper suave 0,0175" forma arco natural	10035 Essix A+TM Plástico - 5" cuadrado 0,030"
PCWA195 Cable súper suave 0,0195" forma arco natural	10045 Essix A+TM Plástico - 5" cuadrado 0,040"
LS36 Funda lingual soldable	10065 Essix A+TM Plástico - 5" cuadrado 0,060"
KTH10 Gancho para atar ligaduras Kobayahi® 0,010"	10085 Essix A+TM Plástico - 5" cuadrado 0,080"
KTH12 Gancho para atar ligaduras Kobayahi® 0,012"	13500 Essix A+TM Plástico - 5" cuadrado 0,120"
KTH14 Gancho para atar ligaduras Kobayahi® 0,014"	10020 Essix A+TM Plástico - 125mm, cuadrado de 0,020"
KTH12S Gancho enano para atar ligaduras Kobayahi® 0,012"	10030 Essix A+TM Plástico - 125mm, cuadrado de 0,030"
KTH14S Gancho enano para atar ligaduras Kobayahi® 0,014"	10040 Essix A+TM Plástico - 125mm, cuadrado de 0,040"
RWL14 Alambre redondo de acero inoxidable de 0,014"	10060 Essix A+TM Plástico - 125mm, cuadrado de 0,060"
RWL16 Alambre redondo de acero inoxidable de 0,016"	10080 Essix A+TM Plástico - 125mm, cuadrado de 0,080"
RWL18 Alambre redondo de acero inoxidable de 0,018"	11020 Essix A+TM Plástico - 125mm, circular de 0,020"
RWL20 Alambre redondo	11030 Essix A+TM Plástico - 125mm, circular de 0,030"
	11040 Essix A+TM Plástico - 125mm, circular de 0,040"
	11060 Essix A+TM Plástico - 125mm, circular de 0,060"
	11080 Essix A+TM Plástico - 125mm, circular de 0,080"
	13125 Essix A+TM Plástico - 125mm, circular de 0,120"
	11021 Essix A+TM Plástico - 12mm, circular de 0,020"
	11031 Essix A+TM Plástico - 12mm, circular de 0,030"
	11041 Essix A+TM Plástico - 12mm, circular de 0,040"



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>de acero inoxidable de 0,020" RWL616 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,016" x 0,016" RWL622 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,016" x 0,022" RWL722 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,017" x 0,022" RWL725 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,017" x 0,025" RWL825 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,018" x 0,025" RWL925 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,019" x 0,025" RWL215 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,021" x 0,025" RET25 Alambre retenedor 0,025" RET28 Alambre retenedor 0,028" RET30 Alambre retenedor 0,030" RET32 Alambre retenedor 0,032" RET36 Alambre retenedor 0,036" AWM-1 Marcadores de arcos descartables TFP-DL020X100S Láminas Duralight™ de 5" cuadradas; 0,020"/1/2 mm - Caja de 100</p>	<p>11061 Essix A+TM Plástico - 12mm, circular de 0,060" 11081 Essix A+TM Plástico - 12mm, circular de 0,080" 13120 Essix A+TM Plástico - 12mm, circular de 0,120" 1C500 Essix C+TM Plástico 5" 1C478 Essix C+TM Plástico 125mm cuadrado 1C125 Essix C+TM Plástico 125mm circular 1C120 Essix C+TM Plástico 120mm circular 1C135 Essix C+TM Plástico 135mm circular 1C500-(código de color) Essix C+TM Plástico de colores - cuadrados 1C125 (código de color) Essix C+TM Plástico de colores de 125mm, circular 1MEDL Essix® laminado dual 5" cuadrado; 0,120" 1MEDL125 Essix® laminado dual 125mm circular; 0,120" -12500 Essix® laminado dual 5" circular; 0,080" 12125 Essix® laminado dual 125mm circular; 0,080" 1MENL Protector nocturno laminado 70500 Essix Tray Rite® Plástico, 5" cuadrado 70125 Essix Tray Rite® Plástico, 125mm circular 70120 Essix Tray Rite® Plástico, 120mm circular T4BC T4B Trainer for Braces™ transparente T4BO T4B Trainer for Braces™ anaranjado T4CIIC T4CII Trainer for Class 11 Correction™ transparente T4CIIB T4CII Trainer for Class 11 Correction™ azul</p>
--	--	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

TFP-DL020X100SS Láminas Duralight™ de 125 mm cuadradas; 0,020"/1/2 mm - Caja de 100	T4A1C Aparato T4ATM para 1ª fase - transparente
TFP-DL020X100R Láminas Duralight™ de 125 mm circulares; 0,020"/1/2 mm - Caja de 100	T4A1B Aparato T4ATM para 1ª fase - azul
TFP-DL020X100RS Láminas Duralight™ de 120 mm circulares; 0,020"/1/2 mm - Caja de 100	T4A2C Aparato T4ATM para 2ª fase - transparente
TFP-DL020X10S Láminas Duralight™ de 5" cuadradas; 0,020"/1/2 mm - Bolsa de 10	T4A2R Aparato T4ATM para 2ª fase - rojo
TFP-DL020X10SS Láminas Duralight™ de 125 mm cuadradas; 0,020"/1/2 mm - Bolsa de 10	TMJ-A Aparato TMJTM - transparente
TFP-DL020X10R Láminas Duralight™ de 125 mm circulares; 0,020"/1/2 mm - Bolsa de 10	TMJ-MBV Aparato TMJ- MBVTM - transparente
TFP-DL020X10RS Láminas Duralight™ de 120 mm circulares; 0,020"/1/2 mm - Bolsa de 10	TMD Aparato TMDTM - transparente
DFS030X100S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,030"/3/4 mm Caja de 100	ART01 Herramienta para extracción de aparatos
DFS030X100SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas; 0,030"/3/4 mm, cajas de 100	AC-W Alineador Chewies - blanco
DFS030X100R Láminas	AC-GM Alineador Chewies - verde menta
	TT-5 Lazos largos color gris claro, paquete por 20
	TT-5A Lazos largos color agua, paquete por 20
	TT-5AZ Lazos largos color azul, paquete por 20
	TT-5B Lazos largos color azul, paquete por 20
	TI-5BBULK Lazos largos color azul, granel cada uno
	TT-5BLK Lazos largos negro, paquete por 20
	TT-5BRN Lazos largos color marrón, paquete por 20
	TT-5BY Lazos largos color amarillo, paquete por 20
	TT-5C Lazos largos transparentes, paquetes por 20
	TT-5CB Lazos largos color azul cobalto, paquete por 20
	TT-5CBULK Lazos largos transparentes, granel, cada uno
	TT-5CHPN Lazos largos color champaña, paquete por 20

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, cajas de 100 DFS030X100RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, cajas de 100 DFS030X10S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,030"/3/4 mm, bolsa de 10 DFS030X10SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas; 0,030"/3/4 mm, bolsa de 10 DFS030X10R Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, bolsa de 10 DFS030X10RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, bolsa de 10 DFS040X100S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsa de 100 DFS040X100SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas; 0,040"/3/4 mm, cajas de 100 DFS040X100R	TT-5D Lazos largos gris oscuro, paquete por 20 TT-5DG Lazos largos verde oscuro, paquete por 20 TT-5E Lazos largos verde esmeralda, paquete por 20 TT-5F Lazos largos fucsia, paquete por 20 TT-5FG Lazos largos verde fluorescente, paquete por 20 TT-5FIRE Lazos largos rojo fuego, paquete por 20 TT-5FO Lazos largos naranja fluorescente, paquete por 20 TT-5FP Lazos largos rosa fluorescente, paquete por 20 TT-5FR Lazos largos rojo fluorescente, paquete por 20 TT-5FY Lazos largos amarillo fluorescente, paquete por 20 TT-5G Lazos largos verde, paquete por 20 TT-5GF Lazos largos pomelo, paquete por 20 TT-5GLD Lazos largos dorados, paquete por 20 TT-5GLOW Lazos largos brillantes, paquete por 20 TT-5GLOWB Lazos largos azul brillante, paquete por 20 TT-5GLOWG Lazos largos verde brillante, paquete por 20 TT-5GLOWO Lazos largos naranja brillante, paquete por 20 TT-5GLOWP Lazos largos púrpura brillante, paquete por 20 TT-5GLOWR Lazos largos rojo brillante, paquete por 20 TT-5HP Lazos largos rosa cálido, paquete por 20 TT-5HPBULK Lazos largos rosa cálido, a granel, cada uno
--	---

L

A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p style="text-align: center;">Láminas</p> <p>Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares; 0,040"/3/4 mm, cajas de 100 DFS040X100RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares; 0,040"/3/4 mm, cajas de 100 DFS040X10S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,040"/3/4 mm, bolsa de 10 DFS040X10SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas; 0,040"/3/4 mm, bolsa de 10 DFS040X10R Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares; 0,040"/3/4 mm, bolsa de 10 DFS040X10RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares; 0,040"/3/4 mm, bolsa de 10 DFS060X50S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,060"/1 1/2 mm, cajas de 50 DFS060X50SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas; 0,060"/1 1/2 mm, cajas de 50 DFS060X50R Láminas</p>	<p>TT-5JB Lazos largos azul gelatina, paquete por 20 TT-5JG Lazos largos verde gelatina, paquete por 20 TT-5JP Lazos largos púrpura gelatina, paquete por 20 TT-5JR Lazos largos rojo gelatina, paquete por 20 TT-5JY Lazos largos amarillo gelatina, paquete por 20 TT-5K Lazos largos color kiwi, paquete por 20 TT-5L Lazos largos color lavanda, paquete por 20 TT-5LB Lazos largos celeste, paquete por 20 TT-5LG Lazos largos verde claro, paquete por 20 TT-5LP Lazos largos rosa claro, paquete por 20 TT-5LY Lazos largos amarillo claro, paquete por 20 TT-5M Lazos largos marrones, paquete por 20 TT-5MC Lazos largos varios colores, paquete por 20 TT-5MNB Lazos largos azul medianoche, paquete por 20 TT-5NB Lazos largos azul marino, paquete por 20 TT-5OR Lazos largos naranja, paquete por 20 TT-5ORCH Lazos largos orquídea, paquete por 20 TT-5P Lazos largos púrpura, paquete por 20 TT-5PEARLB Lazos largos azul perla, paquete por 20 TT-5PEARLG Lazos largos verde perla, paquete por 20 TT-5PRL Lazos largos color perla, paquete por 20 TT-5PRLBULK Lazos largos perla, granel, cada uno TT-5R Lazos largos rojos, paquete por 20</p>
--	---	---

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, cajas de 50 DFS060X50RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, cajas de 50 DFS060X5S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5 DFS060X5SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5 DFS060X5R Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5 DFS060X5RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5 DESTRO40X25S Láminas Duraforce™ de color de 5", cuadradas, 0,040"/1 mm, rojo translúcido DESTRO40X25SS Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, cuadradas, 0,040"/1 mm, rojo translúcido DESTRO40X25R Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, circulares, 0,040"/1 mm, rojo translúcido DESTB040X25S Láminas Duraforce™ de color de 5", cuadradas, 0,040"/1</p>	<p>TT-5RB Lazos largos azul real, paquete por 20 TT-5RBULK Lazos largos rojos, granel, cada uno TT-5SG Lazos largos verde primavera, paquete por 20 TT-5SIL Lazos largos plateados, paquete por 20 TT-5SILBULK Lazos largos plateados, granel, cada uno TT-5SKY Lazos largos color cielo, paquete, por 20 TT-5SKYBULK Lazos largos azul cielo, granel, cada uno TT-5SM Lazos largos color humo, paquete por 20 TT-5T Lazos largos verde brillante, paquete por 20 TT-5TC Lazos largos color diente, paquete por 20 TT-5TG Lazos largos verde tractor, paquete por 20 TT-5TGN Lazos largos color mandarina, paquete por 20 TT-5V Lazos largos violetas, paquete por 20 TT-5W Lazos largos blancos, paquete por 20 TT-5Y Lazos largos amarillos, paquete por 20 EDT-AZHP ChromaTies, ligaduras azules/rosa cálido, en varas EDT-AZHP 100000B ChromaTies, ligaduras azules/rosa cálido; 0,120", paquete x 100.000 EDT-AZHP 1000B ChromaTies, ligaduras azules/rosa cálido; 0,120", granel x 1.000 paquetes EDT-AZHP 5000B ChromaTies, ligaduras azules/rosa cálido; 0,120", granel 5.000 paquetes EDT-BLKOR ChromaTies,</p>
--	---	--

E
A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>mm, azul translúcido DESTB040X25SS Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, cuadradas, 0,040"/1 mm, azul translúcido DESTB040X25R Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, circulares, 0,040"/1 mm, azul translúcido DESTY040X25S Láminas Duraforce™ de color de 5", cuadradas, 0,040"/1 mm, amarillo translúcido DESTY040X25SS Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, cuadradas, 0,040"/1 mm, amarillo translúcido DESTY040X25R Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, circulares, 0,040"/1 mm, amarillo translúcido DESTG040X25S Láminas Duraforce™ de color de 5", cuadradas, 0,040"/1 mm, verde translúcido DESTG040X25SS Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, cuadradas, 0,040"/1 mm, verde translúcido DESTG040X25R Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, circulares, 0,040"/1 mm, verde translúcido DFSPRL040X25S Láminas Duraforce™ de color de 5", cuadradas; 0,040"/1 mm, perla DFSPRL040X25SS Láminas Duraforce™ de color de 125 mm,</p>	<p>ligaduras negras/naranjas cálido en varillas EDT-BLKOR 100000B ChromaTies, ligaduras negras/naranja; 0,120", paquete 100.000 EDT-BLKOR 1000B ChromaTies, ligaduras negras/naranja; 0,120", granel 1.000 paquetes EDT-BLKOR 5000B ChromaTies, ligaduras negras/naranja; 0,120", granel 5.000 paquetes EDT-BLKSIL ChromaTies, ligaduras negras/plateado cálido en varillas EDT-BLKSIL 100000B ChromaTies, ligaduras negras/plateado; 0,120", paquete 100.000 EDT-BLKSIL 1000B ChromaTies, ligaduras negras/plateado; 0,120", granel, 1.000 paquetes EDT-BLKSIL 5000B ChromaTies, ligaduras negras/plateado; 0,120", granel 5.000 paquetes EDT-BLKY ChromaTies, ligaduras negras/amarillo cálido en varillas EDT-BLKY 100000B ChromaTies, ligaduras negras/amarillas; 0,120", paquete 100.000 EDT-BLKY 1000B ChromaTies, ligaduras negras/amarillas; 0,120", granel 1.000 paquetes EDT-BLKY 5000B ChromaTies, ligaduras negras/amarillas; 0,120", granel 5.000 paquetes EDT-BOR ChromaTies, ligaduras azules/naranja</p>
--	---	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>cuadradas; 0,040"/1 mm, perla DFSPRL040X25R Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, circulares; 0,040"/1 mm, perla UFS040X100S Láminas Ultrafit™ de 5", cuadradas; 0,040"/1 mm, caja de 100 UFS040X100SS Láminas Ultrafit™ de 125 mm, cuadradas; 0,040"/1 mm, caja de 100 UFS040X100R Láminas Ultrafit™ de 125 mm, circulares; 0,040"/1 mm, caja de 100 UFS040X100RS Láminas Ultrafit™ de 120 mm, circulares; 0,040"/1 mm, caja de 100 UFS040X10S Láminas Ultrafit™ de 5", cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsa de 10 UFS040X10SS Láminas Ultrafit™ de 125 mm, cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsa de 10 UFS040X10R Láminas Ultrafit™ de 125 mm, circulares; 0,040"/1 mm, bolsa de 10 UFS040X10RS Láminas Ultrafit™ de 120 mm, circulares; 0,040"/1 mm, bolsa de 10 UFS060X50S Láminas Ultrafit™ de 5", cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, caja de 50 UFS04050SS Láminas Ultrafit™ de 125 mm, cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, caja de 50</p>	<p>cálido en varillas EDT-BOR 100000B ChromaTies, ligaduras azules/naranjas; 0,120", paquete 100.000 EDT-BOR 1000B ChromaTies, ligaduras azules/naranjas; 0,120", granel 1.000 paquetes EDT-BOR 5000B ChromaTies, ligaduras azules/naranjas; 0,120", granel 5.000 paquetes EDT-BW ChromaTies, ligaduras azules/blanco cálido en varillas EDT-BW 100000B ChromaTies, ligaduras azules/blancas; 0,120", paquete 100.000 EDT-BW 1000B ChromaTies, ligaduras azules/blancas; 0,120", granel 1.000 paquetes EDT-BW 5000B ChromaTies, ligaduras azules/blancas; 0,120", granel 5.000 paquetes EDT-BY ChromaTies, ligaduras azules/amarillo cálido en varillas EDT-BY 100000B ChromaTies, ligaduras azules/amarillo; 0,120", paquete 100.000 EDT-BY 1000B ChromaTies, ligaduras azules/amarillo; 0,120", granel 1.000 paquetes EDT-BY 5000B ChromaTies, ligaduras azules/amarillo; 0,120", granel 5.000 paquetes EDT-CBFIRE ChromaTies, ligaduras azules/rojo cálido en varillas</p>
--	--	---

C A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

UFS060X50R Láminas Ultrafit™ de 125 mm, circulares; 0,060"/1 ½ mm, caja de 50	EDT -CBFIRE 100000B ChromaTies, ligaduras azules/rojo; 0,120", paquete 100.000
UFS060X50RS Láminas Ultrafit™ de 120 mm, circulares; 0,060"/1 ½ mm, caja de 50	EDT-CBFIRE 1000B ChromaTies, ligaduras azules/rojo; 0,120", granel 1.000 paquetes
UFS0605S Láminas Ultrafit™ de 5" cuadradas,; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5	EDT-CBFIRE 5000B ChromaTies, ligaduras azules/rojo; 0,120", granel 5.000 paquetes
UFS060X5SS Láminas Ultrafit™ de 125 mm cuadradas,; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5	EDT-EW ChromaTies, ligaduras verde/blanco cálido en varillas
UFS060X5R Láminas Ultrafit™ de 125 mm circulares,; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5	EDT-EW 100000B ChromaTies, ligaduras verde/blanco; 0,120", paquete 100.000
UFS060X5RS Láminas Ultrafit™ de 120 mm circulares,; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5	EDT-EW 1000B ChromaTies, ligaduras verde/blanco; 0,120", granel, 1.000 paquetes
TFP-C040X50S Láminas Tuff Form™ de 5" cuadradas; 0,040"/1 mm	EDT-EW 5000B ChromaTies, ligaduras verde/blanco; 0,120", granel, 5.000 paquetes
TFP-C040X50R Láminas Tuff Form™ 125 mm circulares; 0,040"/1 mm	EDT-LGORCH ChromaTies, ligaduras verde claro/orquídea en varillas
TFP-C040X50RS Láminas Tuff Form™ 120 mm circulares; 0,040"/1 mm	EDT-LGORCH 100000B ChromaTies, ligaduras verde claro/orquídea; 0,120", paquete 100.000
DCS030X20S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 20	EDT-LGORCH 1000B ChromaTies, ligaduras verde claro/orquídea; 0,120", granel, 1.000 paq.
DCS030X20SS Láminas Duraclear™ 125 mm cuadradas; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 20	EDT-LGORCH 5000B ChromaTies, ligaduras verde claro/orquídea; 0,120", granel, 5.000 paq.
DCS030X20R Láminas Duraclear™ 125 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 20	EDT-LPORCH ChromaTies, ligaduras rosa claro/orquídea en varillas
DCS030X20RS Láminas	EDT-LPORCH 100000B

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Duraclear™ 120 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 20 DCS030X2S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 2 DCS030X2SS Láminas Duraclear™ 125 mm cuadradas; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 2 DCS030X2R Láminas Duraclear™ 125 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 2 DCS030X2RS Láminas Duraclear™ 120 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 2 DCS040X20S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsas de 20 DCS040X20SS Láminas Duraclear™ 125 mm cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsas de 20 DCS040X20R Láminas Duraclear™ 125 mm circulares; 0,040"/1 mm, bolsas de 20 DCS040X20RS Láminas Duraclear™ 120 mm circulares; 0,040"/1 mm, bolsas de 20 DCS040X2S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsas de 2 DCS040X2SS Láminas Duraclear™ 125 mm cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsas de 2 DCS040X2R Láminas Duraclear™ 125 mm circulares; 0,040"/1 mm,	ChromaTies, ligaduras rosa claro/orquídea; 0,120", paquete 100.000 EDT-LPorch 1000B ChromaTies, ligaduras rosa claro/orquídea; 0,120", granel 1.000 paq. EDT-LPorch 5000B ChromaTies, ligaduras rosa claro/orquídea; 0,120", granel 5.000 paq. EDT-RE ChromaTies, ligaduras rojo/verde en varillas EDT-RE 100000B ChromaTies, ligaduras rojo/verde; 0,120", a granel, 100.000 x paq. EDT-RE 1000B ChromaTies, ligaduras rojo/verde; 0,120", a granel, 1.000 x paq. EDT-RE 5000B ChromaTies, ligaduras rojo/verde; 0,120", a granel, 5.000 x paq. EDT-RW ChromaTies, ligaduras rojo/blanco en varillas EDT-RW 100000B ChromaTies, ligaduras rojo/blanco; 0,120", a granel, 100.000 x paq. EDT-RW 1000B ChromaTies, ligaduras rojo/blanco; 0,120", a granel, 1.000 x paq. EDT-RW 5000B ChromaTies, ligaduras rojo/blanco; 0,120", a granel 5.000 x paq. PETUS(código de color)1000S Ligaduras elastoméricas en varillas de 0,110", ultra deslizables, 20 varillas con 50 ligaduras cada una PETUS(código de color)1000 Ligaduras elastoméricas en varillas de 0,120" ultra deslizables, 20 varillas de 50
--	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>bolsas de 2 DCS040X2RS Láminas Duraclear™ 120 mm circulares; 0,040"/1 mm, bolsas de 2 DCS060X10S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, bolsas de 10 DCS060X10SS Láminas Duraclear™ 125 mm cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, bolsas de 10 DCS060X10R Láminas Duraclear™ 125 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, bolsas de 10 DCS060X10RS Láminas Duraclear™ 120 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, bolsas de 10 DCS080X10S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,080"/1 ½ mm, bolsas de 10 DCS080X10SS Láminas Duraclear™ 125 mm cuadradas; 0,080"/1 ½ mm, bolsas de 10 DCS080X10R Láminas Duraclear™ 125 mm circulares; 0,080"/1 ½ mm, bolsas de 10 DCS080X10RS Láminas Duraclear™ 120 mm circulares; 0,080"/1 ½ mm, bolsas de 10 DGS(código de color)040X25S Láminas Duraguard™ 5" cuadradas, 0,040"/ 1 mm DGS(código de color)040X25R Láminas Duraguard™ 125 mm circulares, 0,040"/ 1 mm DGS(código de</p>	<p>ligaduras cada una ERU118R Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,018", arco maxilar central para prescripción Roth, línea económica ERU118L Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,018", arco maxilar central para prescripción Roth, línea económica ERU122L Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,022", arco maxilar central para prescripción Roth, línea económica ERL122 Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,022", arco mandibular anterior inferior para prescripción Roth, línea económica ERL318RHK Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,018", arco lateral maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth, línea económica ERL522RHK Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,022", arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth, línea económica MRU118R Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,018", arco maxilar central, de prescripción Roth, línea ultra MRU122R Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,022", arco maxilar central, de prescripción Roth, línea ultra MRU122L Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,022", arco maxilar central,</p>
--	---	--

E

A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>color)060X25S Láminas Duraguard™ 5" cuadradas, 0,060"/ 1 ½ mm DGS(código de color)060X25R Láminas Duraguard™ 125 mm circulares, 0,060"/ 1 ½ mm DGS(código de color)080X25S Láminas Duraguard™ 5" cuadradas, 0,080"/ 2 mm DGS(código de color)080X25R Láminas Duraguard™ 125 mm circulares, 0,080"/ 2 mm DGS(código de color)0120X25S Láminas Duraguard™ 5" cuadradas, 0,0120"/ 3 mm DGS(código de color)0120X25R Láminas Duraguard™ 125 mm circulares, 0,0120"/ 3 mm DGS(código de color)0160X25S Láminas Duraguard™ 5" cuadradas, 0,0160"/ 4 mm DGS(código de color)0160X25R Láminas Duraguard™ 125 mm circulares, 0,0160"/ 4 mm DFS-INTS Kit de introducción de láminas termoformadas, láminas cuadradas DF-INTR Kit de introducción de láminas termoformadas, láminas redondas AC-25(código de</p>	<p>de prescripción Roth, línea ultra MRU218R Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,018", arco maxilar lateral, de prescripción Roth, línea ultra MRU222R Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,022", arco maxilar lateral, de prescripción Roth, línea ultra MRU222L Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,022", arco maxilar lateral, de prescripción Roth, línea ultra MRU318RHK Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,018", arco maxilar para canino con gancho de prescripción Roth, línea ultra MRU322RHK Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,022", arco maxilar para canino con gancho de prescripción Roth, línea ultra MRU322LHK Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,022", arco maxilar para canino con gancho de prescripción Roth, línea ultra MRL122 Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,022", arco mandibular anterior inferior de prescripción Roth, línea ultra MRL322RHK Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,022", arco mandibular para canino con gancho de prescripción Roth, línea ultra MRL322LHK Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,022", arco mandibular para canino con gancho de</p>
--	--	---

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>color)PP- superficie de apoyo para bandeja alineadora Chewies™ - Paquete de 10 para pacientes PAB Botón alineador de composite - paquete de 4 WB-TC1 Cera Pontic, paquete de 10 para pacientes WB-TC Cera Pontic, caja de 50 paquetes para pacientes RP-NE (tamaño en mm) Posicionadores Readit™ excepto extracción RP-2E (tamaño en mm) Posicionadores Readit™ para extracción 4+4 (sólo superior) RP-4E (tamaño en mm) Posicionadores Readit™ para extracción 4+4 (sup./inf.) PB-(código de color) Posicionador en bruto, con y sin aroma, colores sólidos y trasparentes PBS-(código de color) Posicionador en bruto, con y sin aroma, colores suaves PB-C-(código de color) Posicionador en bruto, con y sin aroma, colores claros PBM Molde en bruto posicionador 1A350 Essix ACE® Plástico - 5" cuadrado 0,030" 1AH50 Essix ACE® Plástico - 5" cuadrado 0,035" 1A450 Essix ACE® Plástico - 5" cuadrado</p>	<p>prescripción Roth, línea ultra MRL422RHK Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,022", arco mandibular para primer premolar con gancho de prescripción Roth, línea ultra MRL422LHK Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,022", arco mandibular para primer premolar con gancho de prescripción Roth, línea ultra MRL522RHK Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,022", arco mandibular para segundo premolar con gancho de prescripción Roth, línea ultra MRL522LHK Bracket de acero inoxidable con ranuras de 0,022", arco mandibular para segundo premolar con gancho de prescripción Roth, línea ultra FRU118R Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco maxilar central, de prescripción Roth FRU122R Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco maxilar central, de prescripción Roth FRU118L Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco maxilar central, de prescripción Roth FRU122L Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco maxilar central, de prescripción Roth FRU218R Bracket de</p>
--	---	--

C A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>0,040" 1A347 Essix ACE® Plástico - 125 mm cuadrado 0,030" 1AH347 Essix ACE® Plástico - 125 mm cuadrado 0,035" 1A478 Essix ACE® Plástico - 125 mm cuadrado 0,040" 1A325 Essix ACE® Plástico - 125 mm círculo 0,030" 1AH25 Essix ACE® Plástico - 125 mm círculo 0,035" 1A425 Essix ACE® Plástico - 125 mm círculo 0,040" 1A320 Essix ACE® Plástico - 120 mm círculo 0,030" 1AH20 Essix ACE® Plástico - 120 mm círculo 0,035" 1A420 Essix ACE® Plástico - 120 mm círculo 0,040" 10025 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,020" 10035 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,030" 10045 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,040" 10065 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,060" 10085 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,080" 13500 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,120" 10020 Essix A+™ Plástico - 125 mm cuadrado 0,020" 10030 Essix A+™ Plástico - 125 mm cuadrado 0,030"</p>	<p>composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco maxilar lateral, de prescripción Roth FRU222R Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco maxilar lateral, de prescripción Roth FRU218L Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco maxilar lateral, de prescripción Roth FRU222L Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco maxilar lateral, de prescripción Roth FRU318RHK Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco maxilar canino con gancho de prescripción Roth FRU322RHK Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco maxilar canino con gancho, de prescripción Roth FRU318LHK Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco maxilar canino con gancho, de prescripción Roth FRU322LHK Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco maxilar canino con gancho, de prescripción Roth FRU318R Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco maxilar canino sin gancho, de prescripción Roth FRU322R Bracket de composite transparente</p>
--	---	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

10040 Essix A+™ Plástico - 125 mm cuadrado 0,040"	cristal, con ranura de 0,022", arco maxilar canino sin gancho, de prescripción Roth Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco maxilar canino sin gancho, de prescripción Roth FRU318L Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco maxilar canino sin gancho, de prescripción Roth FRU322L Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco maxilar premolar con gancho, de prescripción Roth FRU18BIHK Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco maxilar premolar con gancho, de prescripción Roth FRU22BIHK Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco maxilar premolar sin gancho, de prescripción Roth FRU18BI Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco maxilar premolar sin gancho, de prescripción Roth FRU22BI Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco mandibular inferior anterior, de prescripción Roth FRL118 Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco mandibular inferior anterior, de prescripción Roth FRL122 Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco
10060 Essix A+™ Plástico - 125 mm cuadrado 0,060"	
10080 Essix A+™ Plástico - 125 mm cuadrado 0,080"	
11020 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,020"	
11030 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,030"	
11040 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,040"	
11060 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,060"	
11080 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,080"	
13125 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,120"	
11021 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,020"	
11031 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,030"	
11041 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,040"	
11061 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,060"	
11081 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,080"	
13120 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,120"	
1C500 Essix C+™ plástico 5"	
1C478 Essix C+™ plástico 125 mm cuadrado	
1C125 Essix C+™ plástico 125 mm círculo	
1C120 Essix C+™ plástico 120 mm círculo	
1C135 Essix C+™ plástico 135 mm círculo	
1C500-(código de color) Essix C+™ plástico de	

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	colores, cuadrados 1C125-(código de color) Essix C+™ plástico de colores, 125 mm, círculos UC500 Essix U-C-Me® 5", cuadrado UC478 Essix U-C-Me® 125 mm cuadrado UC125 Essix U-C-Me® 125 mm círculo UC120 Essix U-C-Me® 120 mm círculo 1E350 Essix Embrace™ Plástico, 5" cuadrado 0,030" 1E500 Essix Embrace™ Plástico, 5" cuadrado 0,040" 1E347 Essix Embrace™ Plástico, 125 mm cuadrado 0,030" 1E478 Essix Embrace™ Plástico, 125 mm cuadrado 0,040" 1E325 Essix Embrace™ Plástico, 125 mm círculo 0,030" 1E125 Essix Embrace™ Plástico, 125 mm círculo 0,040" 1E320 Essix Embrace™ Plástico, 120 mm círculo 0,030" 1E120 Essix Embrace™ Plástico, 120 mm círculo 0,040" 1MEDL Essix® Laminado dual 5" cuadrado 0,120" 1MEDL25 Essix® Laminado dual 125 mm círculo 0,120" 12500 Essix® Laminado dual 5" cuadrado 0,080" 12125 Essix® Laminado dual 125 mm círculo 0,080"	mandibular inferior para canino con gancho, de prescripción Roth FRL318RHK Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco mandibular inferior para canino con gancho, de prescripción Roth FRL322RHK Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco mandibular inferior para canino con gancho, de prescripción Roth FRL318LHK Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco mandibular inferior para canino con gancho, de prescripción Roth FRL322LHK Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco mandibular inferior para canino sin gancho, de prescripción Roth FRL318R Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco mandibular inferior para canino sin gancho, de prescripción Roth FRL322R Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco mandibular inferior para canino sin gancho, de prescripción Roth FRL318L Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco mandibular inferior para canino sin gancho, de prescripción Roth FRL322L Bracket de
--	--	---

C

✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>1MENL Laminados protectores nocturnos 70500 Essix Tray Rite® Plástico 5" cuadrado 70125 Essix Tray Rite® Plástico 125 mm círculo 70120 Essix Tray Rite® Plástico 120 mm círculo 17550 Protector de impresión 5VNM1 Bandas interproximales FlexView® - estrechas medianas 5VNF1 Bandas interproximales FlexView® - estrechas finas 5VNX1 Bandas interproximales FlexView® - estrechas extrafinas 5VN15 Bandas interproximales FlexView® - estrechas surtidas 5VWM1 Bandas interproximales FlexView® - anchas medianas 5VWF1 Bandas interproximales FlexView® - anchas finas 5VWX1 Bandas interproximales FlexView® - anchas extrafinas 5VW15 Bandas interproximales FlexView® - anchas surtidas 53001 Bandas interproximales diamante - estrecha mediana, simple 53002 Bandas</p>	<p>composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco mandibular inferior para 1° premolar con gancho, de prescripción Roth FRL418HK Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco mandibular inferior para 1° premolar con gancho, de prescripción Roth FRL422HK Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco mandibular inferior para 1° premolar sin gancho, de prescripción Roth FRL418 Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco mandibular inferior para 1° premolar sin gancho, de prescripción Roth FRL422 Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco mandibular inferior para 2° premolar con gancho, de prescripción Roth FRL518HK Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco mandibular inferior para 2° premolar con gancho, de prescripción Roth FRL522HK Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,018", arco mandibular inferior para 2° premolar sin gancho, de prescripción Roth FRL518 Bracket de composite transparente cristal, con ranura de 0,022", arco mandibular inferior para 2° premolar sin gancho, de</p>
--	---	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

interproximales diamante - estrecha mediana, doble 53003 Bandas interproximales diamante - estrecha fina 53101 Bandas interproximales diamante - ancha mediana, simple 53102 Bandas interproximales diamante - ancha mediana, doble 53103 Bandas interproximales diamante - ancha fina 53400 Bandas interproximales estriadas IPR01 Calibre medidor de espesor incremental ARS 50002 Calibre medidor de espacio ARS CS100 Separadores anteriores radiopacos transparentes RSPL1 Pinzas para separadores radiopacos TAP-01 Pinzas para mejorar el socavado ThermoAire™ TAP-82630 Pinzas mesial-distal Thermoplier™ TAP-05 Pinzas formadoras de ganchos elásticos ThermoAire™ TAP-82570 Pinzas formadoras de muescas elásticas ThermoAire™ TAP-02 Pinzas formadoras de protuberancias grandes ThermoAire™ TAP-03 Pinzas formadoras de protuberancias pequeñas ThermoAire™	prescripción Roth FRL522 Bracket estético de cerámica con ranura de 0,018", arco maxilar para canino con gancho, de prescripción Roth CRU318RHK Bracket estético de cerámica con ranura de 0,022", arco maxilar para canino con gancho, de prescripción Roth CRU322RHK Bracket estético de cerámica con ranura de 0,018", arco maxilar para canino con gancho, de prescripción Roth CRU318LHK Bracket estético de cerámica con ranura de 0,022", arco maxilar para canino con gancho, de prescripción Roth CRU322LHK Bracket estético de cerámica con ranura de 0,018", arco mandibular inferior anterior, de prescripción Roth CRL118 Bracket estético de cerámica con ranura de 0,022", arco mandibular inferior anterior, de prescripción Roth CRL122 Bracket estético de cerámica con ranura de 0,018", arco mandibular para canino con gancho, de prescripción Roth CRL318RHK Bracket estético de cerámica con ranura de 0,022", arco mandibular para canino con gancho, de prescripción Roth CRL318LHK Bracket estético de cerámica con ranura de 0,018", arco mandibular para canino con gancho, de prescripción Roth
--	---

E

A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

TAI-01 Instrumento cónico ThermoAire™ TAI-05L Instrumento para ganchos planos izquierdos ThermoAire™ TAI-05R Instrumento para ganchos planos derechos ThermoAire™ TAI-03 Instrumento para ganchos Shepard ThermoAire™ TAI-04 Instrumento fresa de lengua ThermoAire™ TAI-02 Instrumento de proyección plana ThermoAire™ TAI-SET Juego de instrumentos ThermoAire™ 820KIT Kit del sistema Hilliard MTM 8253b Juego de pinzas maxilar y mandibular Hilliard Thermoplier™ 8257X Juego de pinzas formadoras de muescas y ganchos Hilliard Thermoplier™ 85573 Juego de pinzas formadora de muescas y ganchos, círculos grandes, Hilliard Thermoplier™ 82510 Pinzas para mejorar el socavado Hilliard ThermoPlier™ 82520 Pinzas para mover piezas dentales maxilares Hilliard ThermoPlier™ 82530 Pinzas para mover piezas mandibulares Hilliard ThermoPlier™ 82560 Pinzas micro rampa Hilliard ThermoPlier™ 82540 Pinzas para plano	CRL322LHK Bracket estético de cerámica con ranura de 0,022", arco mandibular para canino con gancho, de prescripción Roth CRL418 Bracket estético de cerámica con ranura de 0,018", arco mandibular para 1° premolar, de prescripción Roth CRL422 Bracket estético de cerámica con ranura de 0,022", arco mandibular para 1° premolar, de prescripción Roth CRL518 Bracket estético de cerámica con ranura de 0,018", arco mandibular para 2° premolar, de prescripción Roth CRL522 Bracket estético de cerámica con ranura de 0,022", arco mandibular para 2° premolar, de prescripción Roth TM622U Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior de 0,016" x 0,022" TM622L Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior de 0,016" x 0,022" TM725U Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior de 0,017" x 0,025" TM725L Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior de 0,017" x 0,025" TM825U Arco de alambre de
--	--

E

A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>de mordida Hilliard ThermoPlier™ 82630 Pinzas mesiales- distales Hilliard ThermoPlier™ 82550 Pinzas formadoras de ganchos elásticos Hilliard ThermoPlier™ 82570 Pinzas formadoras de muescas Hilliard ThermoPlier™ 82610 Pinzas con círculos grandes Hilliard ThermoPlier™ 82620 Pinzas con círculos pequeños Hilliard ThermoPlier 82590 Pinzas formadoras de burbujas Hilliard ThermoPlier™ 82730 Pinzas sacabocado sistema tipo puntada inductor de fuerza F.I.T.™ 8271S Pinzas de inserción sistema tipo puntada inductor de fuerza F.I.T.™ - cortas 8271M Pinzas de inserción sistema tipo puntada inductor de fuerza F.I.T.™ - medianas 8271L alicates de inserción para el sistema F.I.T.™ (tachuela inductora de fuerza)- grandes 827HR alicates de extracción para el sistema F.I.T.™ (tachuela inductora de fuerza) – mediana 8281 F.I.T.™ (Force inducing Tack) – corta 82802 F.I.T.™ (Force</p>	<p>titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior de 0,018" x 0,025" TM825L Arco de alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior de 0,018" x 0,025"</p>
--	---	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	inducing Tack) – mediana 82803 F.I.T. TM (Force inducing Tack) – larga 82740 Alicates perforadoras para el sistema H.I.T. TM (Hook inserting tack) 82720 Alicates de inserción para el sistema H.I.T. TM (Hook inserting tack) 828HT Ganchos para el sistema H.I.T. TM (Hook inserting Tack) 82ELA Elásticos Essix H.I.T. TM 827FC Juego completo de 5 alicates F.I.T. TM 8281C Combo de tachuelas – 48 tachuelas en total 82148B Pinzas Essix 827HC Juego de 2 alicates H.I.T. TM 827HS Juego de 2 alicates H.I.T. TM y alicates en círculo grandes ThermoplierTM 827SET Kit F.I.T. TM / H.I.T. TM		
--	--	--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma ACRYL-AR S.R.L. Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1042-19, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días..... **06 SET. 2016**

Expediente N° 1-47-3110-1188-16-1

DISPOSICIÓN N° **9903**
gsch

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Representante
Exclusivo



06 SET. 2016



Av. Elcano 4933 (C1427CIH)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-4700
ventas@acryl-ar.com

9903

PROYECTO DE ROTULO

BRACKETS, TUBOS, BANDAS, ALAMBRES, Y ACCESORIOS ORTODONTICOS

1. Fabricado por: Dentsply International Raintree Essix – 7290 26th Court East, Sarasota, FL 34243 Estados Unidos
2. Importado por Acryl-ar SRL – Av. Elcano 4593 – Cap Fed
3. Materiales para Ortodoncia: Marca Glenroe Modelos: xxx
4. lote N°
5. fecha de vto.
6. Fecha de elab.
7. conservar en su envase original en lugar seco y al abrigo de la luz y el calor
8. ver instrucciones de uso en el interior del envase.
9. Directora técnica: Sandra Broz – farmacéutica – MN 10898
10. Autorizado por la ANMAT – PM-1042-19
11. Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias

E


ACRYL - AR S.R.L.
 SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO


SANDRA BROZ
 M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA




ACRYL-AR

Representante
Exclusivo



Av. Elcano 4933 (C1427CH)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-4700
ventas@acryl-ar.com

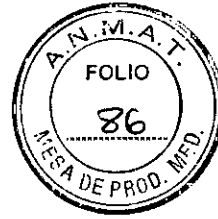

9903

PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

DE BRACKETS

1. Fabricado por: Dentsply International Raintree Essix – 7290 26th Court East, Sarasota, FL 34243 Estados Unidos
2. Importado por Acryl-ar SRL – Av. Elcano 4593 – Cap Fed
3. Materiales para Ortodoncia: Marca Glenroe Modelos: xxx
4. conservar en su envase original en lugar seco y al abrigo de la luz y el calor
5. Directora técnica: Sandra Broz – farmacéutica – MN 10898
6. Autorizado por la ANMAT – PM-1042-19
7. Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias

Selección el adhesivo del bracket

1. Pueden unirse los bracket con cualquier adhesivo ortodóntico normal
2. Remoción y manejo del bracket
3. Tome los brackets con el fórceps hemostático o pone las pinzas para brackets es a las superficies del mesial-distal o en las alas distal y mesial del bracket y saquelo del empaque. Mantener alejado la base de los brackets de cualquier contaminación, esto tendría un efecto perjudicial para la adhesión.
4. Preparando los dientes
5. Verifique cada diente cuidadosamente por cualquier daño que pudiera existir en el esmalte para asegurarse de no tener ninguna sorpresa durante la adhesión.
6. Siga las instrucciones del fabricante del adhesivo ortodóntico por acondicionar los dientes.
7. Aplicación del adhesivo ortodóntico
8. Prepare el adhesivo ortodóntico según las instrucciones del fabricante. Aplique sólo una cantidad pequeña del adhesivo al centro de la base del bracket, pero bastante como para cubrir la superficie adhesiva. Esto producirá una fuerza de vinculación óptima.
5. Colocando los brackets


ACRYL - AR S.R.L.

SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENGO

SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TÉCNICA



Representante
Exclusivo

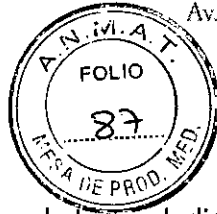

Av. Elcano 4933 (C1427CIH)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-4700
ventas@acryl-ar.com

9. Después de aplicar el adhesivo, ponga el bracket en el diente de la manera usual, encuadre el bracket y apriételo adelante.
10. Antes de que el adhesivo endurezca (tiempo de endurecido según las instrucciones del fabricante del adhesivo), quite completamente cualquier exceso de alrededor de la base del bracket. Esto es particularmente importante para el fácil desprendimiento al final del tratamiento.
11. colocando el arco y uniéndolo
12. La unión puede completarse de la manera usual después de que el adhesivo ha endurecido.
13. Remoción del bracket
14. Los bracket pueden ser removidos con quitador de brackets o alicates de Weingart, pueden tomar los brackets del mesial y distal y pueden soltar la base del bracket cuidadosamente del diente cerrando los alicates y doblando los brackets. Entonces, si necesario, quite el bracket del diente sin tirar torciendo el bracket brevemente a la derecha o izquierda.
15. Ninguna precaución especial tiene que ser tomada al disponer de brackets después del tratamiento.
16. Asegurarse que los otros productos como los tubos ortodónticos, las bandas ortodónticas, adhesivos, arcos de alambres y otros accesorios estén en buena condición buena y dentro de la fecha de expiración antes de aplicarlos a los bracket ortodónticos.

INSTRUCCIONES DE USO DE TUBOS

1. seleccionando el adhesivo conveniente
2. Los tubos ortodónticos puede adherirse con cualquier adhesivo estándar ortodóntico.
3. remoción y manejo del tubo
4. Agarre los tubos con las pinzas de los brackets. Mantener alejado la base de los tubos de cualquier contaminación, esto tendría un efecto perjudicial al adherir.
5. Preparando los dientes
6. Verifique cada diente cuidadosamente por cualquier daño que pudiera existir en el esmalte para asegurarse de no tener ninguna sorpresa durante la adhesión.

ACRYL - AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO

SANDRA BRÓZ
M.N. 10898
DIRECTORA TÉCNICA



Representante
Exclusivo



9903
Av. Elcano 4933 (C. 42 de Mayo)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-4700
ventas@acryl-ar.com

7. Siga las instrucciones del fabricante del adhesivo ortodóntico por ~~preparar~~ ^{acondicionar} los dientes.
8. Aplique el adhesivo ortodóntico
9. Prepare el adhesivo ortodóntico según las instrucciones del fabricante. Aplique solo una cantidad pequeña del adhesivo al centro de la base del tubo, pero bastante como para cubrir la superficie adhesiva. Esto producirá una fuerza de la vinculación óptima.
10. Colocando los tubos
11. Después de aplicar el adhesivo, ponga el tubo en el diente de la manera usual, encuadre el tubo y apriételo adelante.
12. Antes de que el adhesivo endurezca (tiempo de endurecido según las instrucciones del fabricante del adhesivo), quite completamente cualquier rebaba del exceso alrededor del lado de la base del tubo. Esto es particularmente importante para el fácil desprendimiento al final del tratamiento.
13. Insertando el arco
14. El arco de alambre puede insertarse de la manera usual después de que el adhesivo ha endurecido.
15. Remoción de los tubos
16. Los tubos pueden ser removidos con el quitador del brackets posterior. Agarre los tubos al mesial y distal y suelte la base del tubo cuidadosamente del diente cerrando los alicates y doblando los tubos. Entonces, si necesario, quite el tubo del diente sin tirar torciendo el tubo brevemente al derecho o izquierda.
17. Ninguna precaución especial tiene que ser tomada al disponer de tubos después del tratamiento.




INSTRUCCIONES DE USO DE BANDAS

1. Elegir el tamaño conveniente de las bandas para cada diente.
2. Cerrar primeramente los extremos mesial y distal de los tubos y la hendidura de las vainas con la cera dental mantener el adhesivo de la vinculación lejos antes de unir las bandas.
3. desinfecte y seque las bandas y el diente.

ACRYL - AR S.R.L.

SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO

SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TÉCNICA

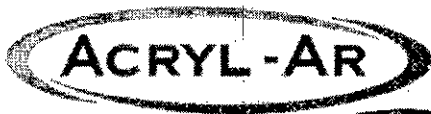

Representante
Exclusivo



9903
Av. Elcano 4933 (C.1427CIH)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-4700
ventas@acryl-ar.com



4. prepare el adhesivo según las instrucciones del fabricante.
5. cuando el adhesivo de la vinculación sea mixto, extiéndalo alrededor de la superficie interna. Coloque una pequeña pieza de papel duro sobre la banda, ponga la banda en su posición con el dedo índice, apriételo hacia el gingival. Entonces apriete el borde de mesial-distal con el colocador de bandas. Cuando los extremos mesial-distal de la banda coincide con el molar, coloque y presione el borde mesial-bucal y el borde distal-lingual. Debe apretarse a lo largo del borde de la corona si la banda es aplicada mas abajo. Para librarse del adhesivo de la vinculación innecesario cuando las bandas están en las posiciones correctas.
6. removiendo las bandas
7. Remueva las bandas con el extractor de bandas al final del tratamiento. Ninguna precaución especial tiene que ser tomada al disponer de las bandas después del tratamiento.

Información general

8. Refiérase a la etiqueta del producto pertinente o catalogue las especificaciones para la información técnica, por ejemplo el tamaño, las ligaduras, la marca, etc.

E


ACRYL - AR S.R.L.
SOCIO GERENTE
CHRISTIAN BOICHENCO


SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA

